

Sarlisi

サーリシ口腔洗浄器

— 取扱説明書 —



本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。

またお読みいただいた後は、必ずご使用になる方が
すぐに見られる場所に保管してください。

目次


CATALOG

安全上の注意	1
各部のなまえ	2
使用上の注意	4
使用方法	4
製品仕様	9
パッケージ内容	9
アフターサービス&保証書	10


1 安全上の注意

1. 使用手順や、安全上の注意が分からない状態で、本製品を使用しないでください。誤った操作により、怪我をする恐れがあります。
2. 本取扱説明書以外の使い方、本製品を使用しないでください。
3. 本製品を、お客様自身で分解したり、改造したりしないでください。
4. 本製品を高温多湿な場所に保管しないでください。
5. ご使用中、歯茎から大量に出血したり、1週間経っても血が出る場合などは、本製品の使用を中止し、歯科医に相談してください。
6. 本製品は、お子様や乳幼児の使用には適しておりませんが、万が一使用する際は、保護者の方と一緒にお使いください。また、保管する際は、お子様や乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
7. 直近2ヶ月以内に口腔手術などを受けた方は、医師に相談した上でお使いください。
8. 本製品は、電池装置の安全基準に準じておりますが、ペースメーカーやインプラントを使用している方などは、ご使用前に医師に相談してください。
9. 濡れた手で充電ケーブルを触らない。充電ケーブルを水につけたり、水洗いしたりしない、また、浴室や湿気の多い場合で使用、保管したり、洗面台の上など水のかかりやすい場所に置いたりしないでください。火災、感電、けがなどの原因となります。
10. お手入れの際は必ず電源コードを抜いてから行う。また、水洗い後は、電極部分の水分を完全に拭き取ってください。

2 各部のなまえ

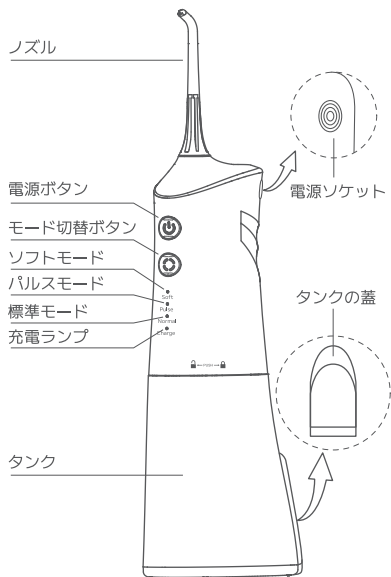


ヘッドの種類

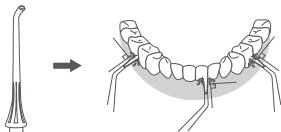


• 標準ノズル

水圧が大きく、徹底的に洗浄できます。歯に直角に水をあてて、奥歯から順に前歯に向かって洗浄してください。

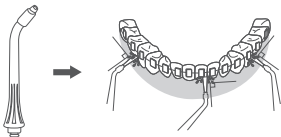

• 歯科矯正用ノズル

矯正している歯の周辺の洗浄に適しています。

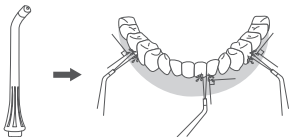

• ソフトノズル


歯周ポケットに溜まった汚れを落とします。

3 使用上の注意

1. 本製品の本体には、タンクや配管などに液体が多少残っている場合がございます。その液体は、性能(水流)テストの際に残った残留水のため健康に影響などはございません。安心してお使いください。
2. 使用中に、電池残量が10%以下になった場合は、赤いランプが点滅してお知らせします。
3. 使用中に、電源が切れてしまった場合は、モード表示ランプとモーターの電源は同時に切れ、赤いランプが10秒点滅した後に電源が完全にオフになります。その際は、本製品を充電してから再度お使いください。

4 使用方法


1. タンクの給水用の蓋を開けて、40℃以下の水を注ぎ、蓋を閉じる。

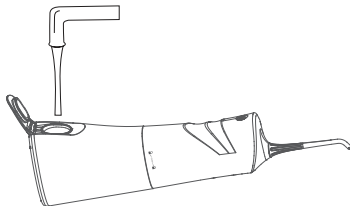

2. ノズルを、本体の差し込み口の位置に合わせて差し込み、時計回りに45度回転させる。




3. ノズルの先端を、歯に向かって垂直にする。
4. 水が出るように口を少し開ける。
5. 歯を洗浄する。
①ノズルの角度を90度にして、歯や歯茎に噴射する。
②水で洗浄する。
③歯、歯間、歯列矯正の周りなどを徹底的に洗浄する。

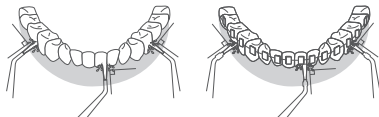


• タンクの取り付け方

※本体とタンクを上下に重ね合わせて、本体を鍵のマークに沿って、左に移動させてロックする。

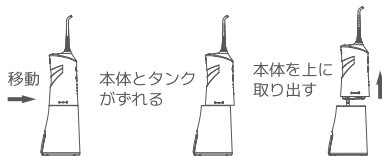

• タンクの取り外し方

※本体を左に移動させて、本体を上に取り外す。

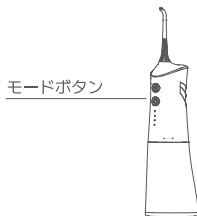

• 洗浄モードの切り替え方

本製品が作動していない状態で、モードボタンを2秒以上長押しすると、3つのモードランプが同時に点滅します。その状態で、お好みのモードを選択し、選択したモードのランプが点灯したら、切り替え完了です。

- 手動モード：電源ボタンを押す度に、水が出ます。お好きなタイミングで水を噴射することが可能です。
- 自動モード：電源ボタンを押している間は、自動で水が出続けます。電源ボタンを押す手間が省けるため、長時間使用する際などに便利です。


● 洗浄パワーの切り替え方

電源ボタンを押して、本製品が作動し始めてから、モードボタンを押すと洗浄強度を選択することができます。


- ソフトモード(Soft)：歯茎が敏感な方などに適しており、歯を優しく洗浄します。
- パルスモード(Pulses)：洗浄パワーが比較的に強く、しっかり洗浄し、口腔内を健康にします。
- ノーマルモード(Normal)：標準的な強さで、歯の隙間に残った食べ物などを効果的に除去します。

お手入れ方法

- 1.電源ボタンを押して、電源を切る。
- 2.ノズルを反時計回りに45度回転させ、本体を上引き抜く。

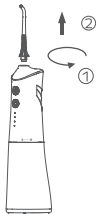

- 3.タンクの蓋を開けて、タンク内の水を捨てる。
- 4.電源ボタンを押して、電源を入れ、水をしっかりと出し切る。
- 5.乾いた布などで、本体を拭く。

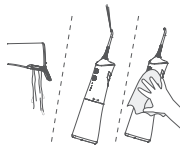

● 本体のクリーニング

汚れを水できれいに洗浄し、乾いた柔らかい布などで拭いてください。また、本体を水に浸けないでください。

● タンクのクリーニング

布などで汚れを拭き取ってください。

● ノズル

水で洗い、乾いた柔らかい布などで拭いてください。また、ノズルは約6ヶ月ごとに交換することをおすすめします。

※注意

- 1.細菌の繁殖を防ぐため、本体やタンク内に水が残っていないことを確認してください。また、長時間使用しない場合は、必ず乾いた状態で保管してください。
- 2.水または中性洗剤で洗浄してください。また、腐食性や研磨剤入りの薬剤(酢や石灰など)は使用しないでください。製品が破損する恐れがあります。
- 3.本製品を洗う際は、40度以上の水で洗わないでください。
- 4.高温多湿な場所や、直射日光の当たる場所に保管しないでください。

5 製品仕様

品名：	サーリシ口腔洗浄器
型番：	RLI504
電源方式：	充電式
定格電源：	5V \equiv 1A
消費電力：	5W(充電時)
電池容量：	2,000mAh
充電時間：	約5時間
使用時間：	約4時間
本体重量：	約235g
本体サイズ：	約77*47*281mm

6 パッケージ内容

本体：	口腔洗浄器*1
付属品：	取扱説明書*1、充電ケーブル*1、標準ノズル*2、歯科矯正用ノズル*1、ソフトノズル*2

7 アフターサービス&保証書

この保証書は、「無償保証規定」の記載内容で無償保証を行うことをお約束するものです。ご購入日から保証期間中に故障が発生した場合は、対応をご依頼ください。また、お客様にご提示いただいた個人情報は、個人情報保護法に基づいて、適切に取り扱わせていただきます。なお、本体以外の付属品は、消耗品のため保証対象外となります。

〈無償保証規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合や、万が一、不良品が届いた場合、無償で対応させていただきます。
2. 保証期間内(無償保証期間延長サービスなど以外、通常ご購入日から1年以内)に故障して無料保証をお受けになる場合には、本書と購入日を証明する書類をご用意の上、対応をご依頼ください。
3. 以下のような場合は、保証期間内であっても有償での対応となります。
 - (ア) 本書や購入日を証明する書類がない場合
 - (イ) 誤った使用方法や、不当な修理および改造による故障または破損の場合
 - (ウ) ご購入後の移動中の落下や、運送上の故障または破損の場合
 - (エ) 火災や地震、その他の自然災害や公害による故障または破損の場合
 - (オ) 一般家庭用以外の目的での使用による故障や破損の場合
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

※ 下記の情報をご用意の上、ご連絡ください。

品名：サーリシ口腔洗浄器	型番：RLI504
無償保証期間：購入日から1年間	
お客様氏名：	
電話番号：	
住所：	
購入店舗：	
注文番号：	

この度は、Sarlisiの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品について、なにかご不明点や問題点などございましたら、お気軽に購入店舗、またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

Webでお問い合わせ：service@sarlisi-store.com

