

Sarlisi

サーリシ口腔洗浄器

— 取扱説明書 —



本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。

またお読みいただいた後は、必ずご使用になる方が
すぐに見られる場所に保管してください。

目次


CATALOG

安全上の注意	1
各部のなまえ	2
使用上の注意	4
使用方法	4
製品仕様	8
パッケージ内容	8
アフターサービス&保証書	9

1 安全上の注意

1. 本製品を浴室で使用しないでください。
2. 付属のケーブル以外は使用しないでください。
3. ご使用中またはご使用後に、口腔内や体に異常などを感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
4. 本製品を丸ごと水洗いしないでください。
5. 本製品はお子様手の届かない場所に保管してください。
6. 本製品を高温多湿な場所に保管しないでください。
7. 本製品をお客様自身で改造・修理しないでください。
万が一、故障や不良品の場合は、お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。

2 各部のなまえ

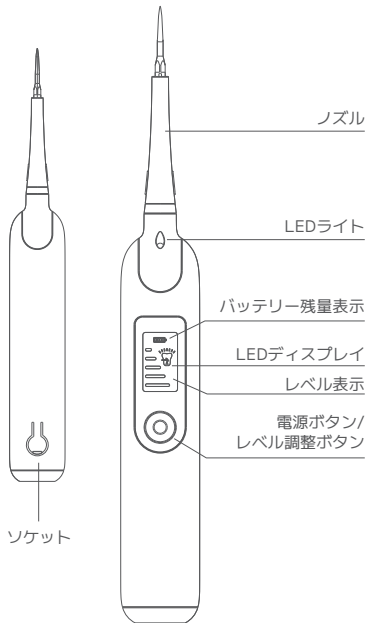

• ヘッドの種類



プラーク除去ヘッド

歯周などに溜まったプラークを取り除くのをサポートします。



歯石取りヘッド

硬くなった歯石を取り除くのをサポートします。



黄ばみ落としヘッド

食べ物などによる着色汚れを落とすのをサポートします。



ブラシヘッド


電動歯ブラシとして使用することができます。

3 使用上の注意


1. 使用後は、ヘッドをしっかりと乾かしてください。
2. 長期間使用しない場合も、1ヶ月に1回を目安にフル充電を行ってください。
3. 歯や歯周はとても敏感のため、強い力で洗浄しないでください。

4 使用方法


1. 用途に合わせてお好みのノズルを選択したら、ノズルを少し左向きにはめて、右側に軽く回転させて装着する。ノズルを交換する場合は、左側に軽く回転させて上に持ち上げて外す。

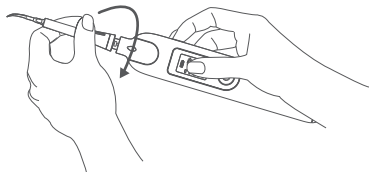


2.水または、アルコールでノズルをキレイにする。

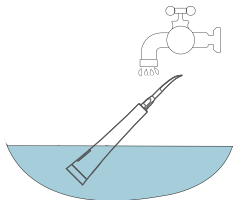


3.電源ボタンを約2秒長押しして、電源を入れるとLED
ライトが点灯する。

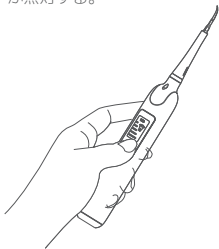

4.レベルボタンを押して、お好みのレベル(振動の強さ)
を調節する。

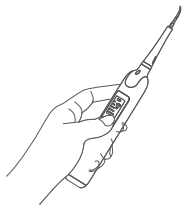


5.鏡を見ながら、歯石やプラークなどの汚れを洗浄する。

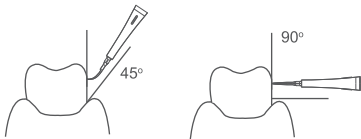

6.使用後は、約2秒電源ボタンを長押しして電源を切る。



7. 水または、アルコールでノズルをキレイにし、タオルや乾いた布などで拭く。また、本体は布で汚れなどを拭き取る。

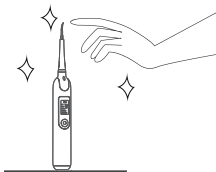

5 製品仕様

品名：	サーリシ口腔洗浄器
型番：	AD1128
電源方式：	充電式
充電電源：	5V \equiv 1A
消費電力：	約0.75W
電池容量：	250mAh
充電時間：	約1.5時間
使用時間：	約2時間
本体重量：	約69g
本体サイズ：	約216*30*26mm

6 パッケージ内容

本体：	口腔洗浄器*1
付属品：	取扱説明書*1、充電ケーブル*1、 ブラシヘッド*2、プラーク除去ヘッド*1、 歯石取りヘッド*1、黄ばみ落としヘッド*1、 舌苔クリーナー*1

7 アフターサービス&保証書

この保証書は、「無償保証規定」の記載内容で無償保証を行うことをお約束するものです。ご購入日から保証期間中に故障が発生した場合は、対応をご依頼ください。また、お客様にご提示頂いた個人情報、個人情報保護法に基づいて、適切に取り扱わせていただきます。なお、本体以外の付属品は、消耗品のため保証対象外となります。

〈無償保証規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合や、万が一、不良品が届いた場合、無償で対応させていただきます。
- 保証期間内(無償保証期間延長サービスなど以外、通常ご購入日から1年以内)に故障して無料保証をお受けになる場合には、本書と購入日を証明する書類をご用意の上、対応をご依頼ください。
- 以下のような場合は、保証期間内であっても有償での対応となります。
 - 本書や購入日を証明する書類がない場合
 - 誤った使用方法や、不当な修理および改造による故障または破損の場合
 - ご購入後の移動中の落下や、運送上の故障または破損の場合
 - 火災や地震、その他の自然災害や公害による故障または破損の場合
 - 一般家庭用以外の目的での使用による故障や破損の場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

※ 下記の情報をご用意の上、ご連絡ください。

品名：サーリシロ腔洗浄器	型番：AD1128
無償保証期間：購入日から1年間	
お客様氏名：	
電話番号：	
住所：	
購入店舗：	
注文番号：	

この度は、Sarlisiの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品について、なにかご不明点や問題点などございましたら、お気軽に購入店舗、またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

Webでお問い合わせ：service@sarlisi-store.com

