


取扱説明書

品名：RF温冷美顔器

型番：SABG09BL

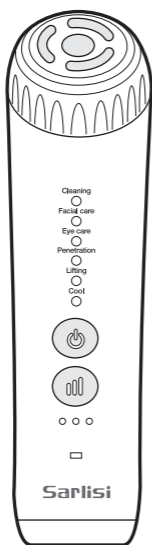

もくじ

安全上のご注意	2~3
各部のなまえ	4
充電のしかた	4
お使いになる前に	5
スキンテストのしかた	5
使いかた	6~9
製品のお手入れ方法	10
よくあるご質問	11
故障かな?と思ったら	11
製品仕様	11
製品を廃棄するとき	裏表紙
保証とアフターサービス	裏表紙

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書(本書裏表紙)は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付 **家庭用**

※ 本製品は医療機器ではありません。
© 2024 sarlisi Inc. 無断複写・転載を禁じます。




最新の情報はこちらから



<https://sarlisi.co.jp/>

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 危険	人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容
 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。	 実行しなければならない内容です。
--	--

危険



下記のような医用電気機器や家庭用電気治療器の近くでは使用しない

- 医用電気機器や家庭用電気治療器の誤動作による事故や体調不良の原因となります。
 - ・ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
 - ・人工心肺などの生命維持用医用電気機器
 - ・心電計や点滴器などの装着型の医用電気機器

警告



下記に該当する方は、本製品を使用しない

- 事故や体調不良の原因となります。
 - ・心臓疾患の人
 - ・顔面の神経障害のある人
 - ・出血性疾患、血友病疾患などの血液異常の人
 - ・幼児や成長期のお子様、および自分で意思表示のできない人
 - ・交通事故などにより頭部に後遺症がある人
- 肌トラブルの原因となります。
 - ・皮膚アレルギーの人・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
- ホルモンバランスが不安定なため肌トラブルの原因となります。
 - ・妊娠中および産後1か月の人
- やけどの原因となります。
 - ・温度の感覚が自覚できない人

心臓の近くには使用しない

- 事故や体調不良の原因となります。

下記の場合や、部位には使用しない

- 肌や身体の問題の原因となります。
 - ・体調がすぐれない場合・ステロイド系ホルモン剤や免疫抑制薬眠気を誘う薬を服用した場合・疲労が激しい場合・肌に傷や湿しん・はれものなどのある部位・皮膚炎・過度の日焼けなど、皮膚に異常のある場合・当日、脱毛処理をした部位
 - ・外科手術(形成・美容など)を受けた部位・のど・粘膜



同じ箇所にあて続けず、肌の上を動かしながら使用する

- やけどの原因となります。
- 肌や身体に痛み・異常を感じたら直ちに使用を中止する
- 事故や肌・身体の問題の原因となります。

警告



次のような方は、医師に相談のうえ、使用する

- 事故や体調不良、肌トラブルの原因となります。
 - ・今までに重い病気をした人・急性疾患の人・悪性腫瘍のある人
 - ・糖尿病など高度な末梢循環障害による知覚障害のある人・感染症疾患のある人・有熱性疾患のある人・エステ、クリニックなどで、ダウンタイム(回復に要する時間)が必要な施術、および肌に強い赤みが発生する施術を約2週間以内に受けた人・敏感肌の人

本体・付属のUSBケーブルは、下記の項目を必ず守って取り扱う

- 感電やショートによる火災などの原因となります。
 - ・水につけたり、水洗いしない・風呂、シャワー室で使用・充電しない
 - ・傷んだり、接続がゆるいときは使用しない・傷めない(傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなど)

本製品のお手入れの際は、使用・充電を中止し、USBケーブルを抜く

- 感電やけがの原因となります。

充電ポートやUSBプラグにほこりなどが付着しないように定期的に掃除する

- 湿気などで絶縁不良になり、火災の原因となります。

USBケーブルを接続するときは、根元まで確実に差し込む

- 火災や感電の原因となります。

異常・故障時には直ちに使用・充電を中止し、USBケーブルを抜く

- 火災・感電・けがの原因となります。
 - <異常・故障例>・本体、USBケーブルが変形したり異常に熱い
 - ・こげ臭いにおいがする

付属のUSBケーブル以外を使ったり付属のUSBケーブルを他の機器に使用しない

- やけどやショートによる火災などの原因となります。



ぬれた手でUSBケーブルを抜き差ししない

- 感電やけがの原因となります。

本製品は火へ投入したり、加熱をしたり、高温での充電・使用・放置・保管をしない

- 発熱・発火・破裂の原因となります。

乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない

- 事故やけがの原因となります。

改造・分解・修理しない

- 火災・感電・けがの原因となります。

注意



充電ポートやUSBプラグにピンやゴミを付着させない

- 感電やショートによる火災などの原因となります。

ヘッドを金属にあてない

- やけどの原因となります。

充電時以外は、USBケーブルを充電ポートから抜く

- 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

ご使用前にヘッドに割れ・欠け・変形などの破損がないか確認する

- 肌を傷つける原因となります。

指定部位以外に使用したり、同じ部位に当て続けたい

- 肌や身体のトラブルの原因となります。


使用中、歯に違和感が生じる場合はレベルを下げるか、部位をずらして使用する

- 一時的な歯の痛みの原因となります。

使用頻度や使用方法は、必ず取扱説明書の内容に従う

- 肌を傷つけたり感染、炎症、出血、色素沈着などのトラブルや症状が悪化する原因となります。

各部のなまえ

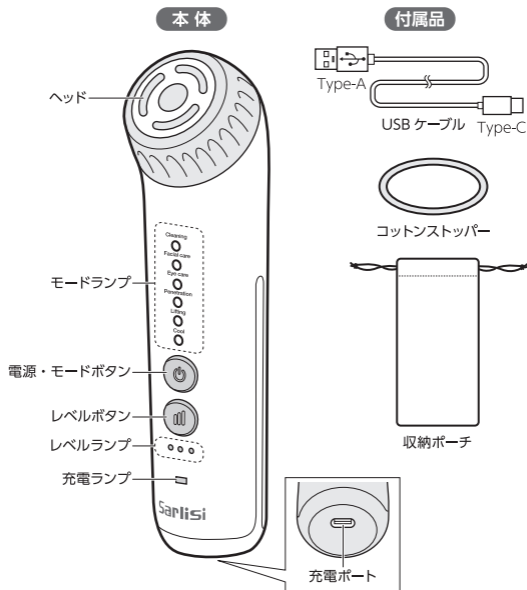


充電のしかた

使いはじめや長期間ご使用にならなかった場合は、充電してからご使用ください。

USBケーブルを接続する

- ① Type-C側を本体の充電ポートに接続する
- ② Type-A側を市販のUSB充電器に接続する
- ③ 市販のUSB充電器をコンセントに接続する

充電ランプ

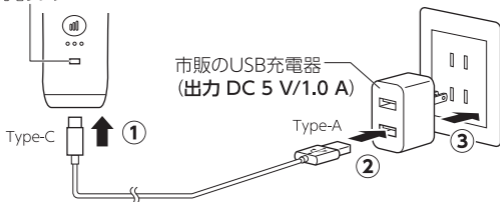

- 充電中は充電ランプが点滅し、充電が完了すると点灯に切り替わります。
- フル充電までの目安時間は約2時間です。充電時間は充電環境によって変わります。

お使いになる前に

肌について

- 本製品をはじめてご使用になるときは、必ず、スキントテスト（肌の敏感テスト）を行ってください。
- 素肌（メイク落とし・洗顔をした状態）でご使用ください。
- ご使用前に、ピアスなど、顔・首周辺のアクセサリーを外してください。
- 肌や身体に痛み・異常を感じたら直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

レベルについて


- 使いはじめは、レベル「1」で使用し、肌の調子やお好みに合わせて調節してください。

お手持ちの化粧品について

- お手持ちの化粧品を使用するときは、必ず水溶性の化粧品をご使用ください。
- ヘッドを滑らせやすくなるような化粧品と一緒にご使用ください。
- 次の化粧品は使用しないでください。
 - ・オイル系
 - ・スクラブ系
 - ・温感効果のあるローション

スキントテストのしかた

- 本製品をはじめてご使用になるときは、必ず、スキントテスト（肌の敏感テスト）を行ってください。

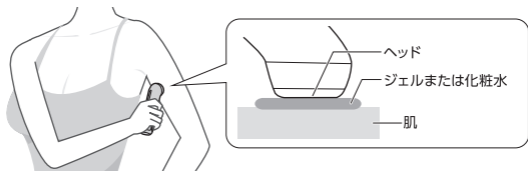

- 1 腕の内側をせっけんで洗い、タオルなどで拭き取る**
 - ・ しっかり拭き取ってください。
- 2 肌にスキンケア製品（ジェルまたは化粧水）をうすく塗る**
 - ・ ヘッドの大きさ程度に塗ってください。
 - ・ ジェルと化粧水の両方をテストする場合は、それぞれ異なる部位に塗ってください。
- 3 電源を入れ、円を描くようにヘッドを塗布部にあてる**
 - ・ モードとレベルを下記に従って設定してください。設定のしかたは8ページの「運転のしかた」をご参照ください。
 - ジェルの場合：「Facial care」モード⇒「レベル1」に設定する
 - 化粧水の場合：「Lifting」モード⇒「レベル1」に設定する
- 4 48時間後の肌の状態を確認する**
 - ・ 塗布部は、こすらないでください。
 - ・ 肌に赤みやほてりを感じなければ、本製品をご使用いただけます。
 - ・ 肌に痛み・異常を感じたら直ちに使用を中止し、専門医にご相談ください。

使いかた

- 本製品をはじめてご使用になるときはスキントテストを行ってください。
- 使用頻度・時間は目安です。肌の状態を見ながら調節してください。

モードについて

機能について	イオン	…イオンの力で美容成分を角質層まで届けます。
	RF	…高周波（ラジオ波）をあて、肌に温感を伝えます。
	EMS	…肌に電気的な刺激をあたえ、筋肉を収縮させます。
	LED	…波長の異なる光をあて、肌をケアします。
	パイプ	…ヘッドを振動させて肌をマッサージします。
	冷却	…ヘッドをひんやりと冷却します。


モード	機能	スキンケア製品	使用頻度	時間
Cleaning 肌をクリーニングするとき	イオン LED(黄) パイプ	・コットン取付け ・化粧水 ・ジェル ・クレンジング	週に2～3回	毎回4分 ※敏感肌の方は、 毎回1～2分
	※上・下まぶたには使用できません。			
Facial care 顔全体のケアをしたいとき	RF EMS LED(赤)	・化粧水 ・ジェル ・美容液 ・エッセンシャルオイル ・シートマスク	朝夜1日1回 ※敏感肌の方は、 使用頻度を減らす	毎回4分以内 ※シートマスク 使用時は、 8分以内
	※のどやのど周り/上・下まぶたには使用できません。			
Eye care 目の周りをケアしたいとき	RF EMS LED(赤) パイプ	・美容液 ・アイクリーム	朝夜1日1回 ※敏感肌の方は、 使用頻度を減らして ください。	両目で1回4分 ※敏感肌の方は、 毎回1～2分
	※のどやのど周り/上まぶたには使用できません。			
Penetration 角質層まで浸透ケアをしたいとき	イオン RF LED(赤) パイプ	・化粧水 ・ジェル ・美容液	週に2～3回	毎回4分 ※敏感肌の方は、 毎回1～2分
	※のどやのど周り/上・下まぶたには使用できません。			
Lifting 顔の表情筋をトレーニングするとき	EMS パイプ	・化粧水 ・ジェル	週に2～3回	毎回4分 ※敏感肌の方は、 毎回1～2分
	※のどやのど周り/上・下まぶたには使用できません。			
Cool 肌を冷やし、引き締めたいとき	LED(青) 冷却	使用しません ※ヘッドを肌に直接あてます。	毎日	毎回4分
	※上まぶたには使用できません。			

コットンの取り付けかた

- コットン（市販品）を取り付けるときは、付属のコットンストッパーを使用してヘッドに取り付けてください。


1 コットン（市販品）をヘッドに被せる

- ・ ヘッド全体を覆うことができる大きめのコットンをご使用ください。
- ・ 厚手のコットンを使用すると、RF機能を使用するモードでは温感が弱まることがありますので、薄手のコットンをご使用ください。

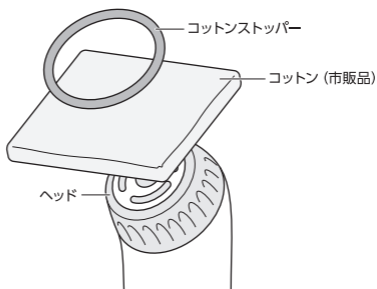


2 付属のコットンストッパーで固定する

- ・ ヘッド全体を覆うように固定してください。
- ・ コットンが破れたり、外れないようにしっかり取り付けてください。

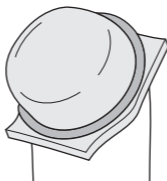

3 コットンに化粧水などを付ける

- ・ 化粧水がヘッド全体にいきわたるように付けてください。
- ・ 使用中にコットンが乾いてきたときは、化粧水を足してください。

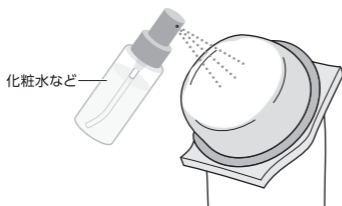


運転のしかた

- 本製品の使用前に、メイクを落として洗顔した後、お手持ちの化粧水で肌を整え、ジェルまたは美容液・乳液などを塗ってください。

1 メイクを落とし、洗顔する

- ・ 洗顔したあとは、スキンケア製品肌（化粧水・ジェル・美容液・乳液など）を塗って肌を整えてください。

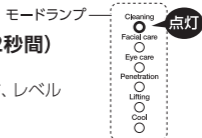

2 電源・モードボタンを長押し（2秒間）して電源を入れる

- ・ “ピッ”と鳴り、「Cleaning」モード、レベル「1」で運転が開始されます。

3 電源・モードボタンを押して、モードを選択する

- ・ 押すたびにモードが切り替わり、選択中のモードランプが点灯します。
- ・ モードについては「モードについて（6ページ）」をご参照ください。



4 レベルボタンを押して、レベルを設定する

- ・ 押すたびにレベルが切り替わり、選択中のレベルランプが点灯します。
- ・ レベルは「1」～「3」の3段階で設定できます。
- ・ 使いはじめは、レベル「1」からご使用ください。また、使用中に痛みを感じたり、極端な熱さを感じる時はレベルを下げてご使用ください。



5 ヘッドを肌にあてて動かす

- ・ ヘッド面を肌に密着させ、同じ部位に止めないように動かしながら使用してください。（9ページ参照）

※ 肌に強く押しあてないでください。

- ・ 使用頻度・時間については「モードについて（6ページ）」をご参照ください。
- ・ 約4分経過すると“ピー”と鳴り、自動で運転が停止します。
- ・ 途中で使用を中止するときは、「電源・モード」ボタンを長押し（2秒間）してください。“ピー”と鳴り、電源が切れます。

正常運転時

運転開始

ピッピッ

2分後

お知らせ音が鳴ります。

4分後

自動で運転が停止します。



電池残量が少ないとき

- ・ 運転開始後、電池残量が少なくなると“ピッピッピッ”と鳴り、充電ランプが点滅します。その後、運転を継続すると“ピーピーピーピーピー”と鳴り、全部のランプが点滅し、電源が切れます。その際は、お早めに充電を行ってください。

6 使い終わったら、肌を整える

- ・ 日頃お使いの化粧品で肌をケアしてください。
- ・ 使用後は、本体のお手入れを行ってください。（10ページ参照）

肌ケアのしかた


- 使い始めは、レベル「1」からご使用ください。また、使用中に痛みや、極端な熱さを感じる時は、レベルを下げてご使用ください。
 - 同じ部位に止めないように動かしながら使用してください。
- ※ 肌に強く押しあてないでください。
※ ご使用の際は目を閉じ、ヘッドのLEDライトを直視しないでください。

モード **Cleaning**




- ヘッドに取り付けたコットンに化粧水などを付けます。
 - 円を描くように、ヘッドをゆっくり動かしてください。
- ※ 上まぶた・下まぶたには使用できません。

モード **Facial care** ○ **Penetration** ○ **Lifting** ○ **Cool**

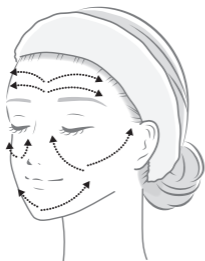

- 顔の輪郭に沿って、下から上にゆっくりヘッドを滑らせます。
 - 額は顔の中心から外側に向かって動かします。左右それぞれ行ってください。
- ※ のどや、のどの周りには使用できません。
- ※ 上まぶた・下まぶたには使用できません。(Coolモードのみ、下まぶたに使用できます。)

モード **Eye care**

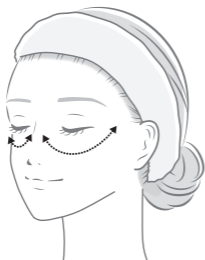

- 顔の輪郭に沿って、下から上にゆっくりヘッドを滑らせます。
 - 額は顔の中心から外側に向かって動かします。左右それぞれ行ってください。
- ※ のどや、のどの周りには使用できません。
- ※ 上まぶたには使用できません。

製品のお手入れ方法

- 本製品の性能を最適に保つため、毎回お手入れを行ってください。
- 本体のお手入れを行うときは、必ず使用・充電を中止し、USBケーブルを抜いて行ってください。

⚠ 警告

- 本体（ヘッド以外）やUSBケーブルをぬらしたり、水につけたり、水洗いしないでください。

⚠ 注意

- シンナー、ベンジン、石油系洗剤、揮発油、アルコールなど可燃性の溶剤、薬品類、研磨剤を含んだ洗剤や熱湯を使用してお手入れを行わないでください。

本体


- 本体表面に付着した汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- 充電ポートにほこりや毛クズなどが付着している場合は取り除いてください。

ヘッド

- 水を含ませた柔らかい布で、付着したジェルや化粧品などを拭き取ってください。


※ ヘッド部以外をぬらしたり、水洗いしないでください。

※ ジェルや化粧品などが付着したまま放置しないでください。

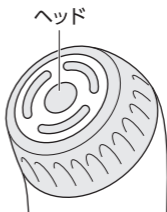

USB ケーブル

- 端子部にほこりや毛クズなどが付着している場合は取り除いてください。

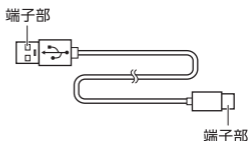

コットンストッパー

- ヘッドから取り外し、水洗いしてください。



保管するときは

- お手入れを行ったあと、十分乾燥させてから付属の収納ポーチに入れて保管してください。
- ※ USBケーブルを接続したまま保管しないでください。
- ※ 高温多湿になる所、直射日光のあたる所、不安定な所、乳幼児の手の届く所などに保管しないでください。

よくあるご質問

- EMS、RFとはどんな機能なの？
⇒「モードについて(6 ページ)」をご参照ください。
- 使用頻度や使用時間の目安は？
⇒モードにより異なります。「モードについて(6 ページ)」をご参照ください。
- なぜスキンケア製品をつけるの？
⇒EMS、RFをしっかり和肌に伝えるためです。
- スキンケア製品は1回にどれぐらいつけるの？
⇒肌を乾燥を感じたり、少ないと感じたら付け足してください。
- お風呂場で使えるの？
⇒ヘッド以外は、防水仕様ではないため、浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
- コットンには汚れが付かないの？
⇒目で見えなくても汚れは落ちています。汚れの落ちかたには個人差があります。
- 使用後に肌が熱する？
⇒RFの温めによるものです。気になる場合はCoolモード、保冷剤を使用するなど、お肌を冷やしてください。

故障かな？と思ったら

- ご使用にあたってお困りの際は、下記をご参照ください。
- 使用中やご使用後に肌や身体に痛み・異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、専門医にご相談ください。
- 電源が入らない・電源が切れない
⇒電源・モードボタンを長押し(2秒間)してください。
⇒電池残量がありません。充電してください。
- 充電できない
⇒USBケーブルを正しく接続してください。
- 使用中に電源が切れる
⇒電池残量がありません。充電してください。
- 本体が熱い
⇒連続して使用していませんか？30分以上本体を休ませてください。
- EMSが強く、ビリビリと痛い
⇒レベルを下げてご使用ください。
- EMSが弱く、感じられない
⇒レベルを上げるか、肌が乾燥している場合はジェルや化粧水を付けてください。
- RFが強く、熱く感じる
⇒レベルを下げてご使用ください。
- 「Cool」モードで冷たく感じない
⇒連続して使用していませんか？30分以上本体を休ませてください。

製品仕様

※本製品の性能向上のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

電源方式	充電式
定格入力	DC 5 V 1 A
消費電力	約 8 W
使用電池	リチウムイオンポリマー蓄電池
充電時間	約 2 時間 ※充電環境によって異なります。
使用時間	約 5 時間 ※モードによって異なります。
推奨環境	室温 15℃～30℃
外形寸法	約幅 4.3×高さ 16.7×奥行 4.5 (cm)
本体質量	約 155 g
付属品	USBケーブル(Type-A-Type-C)…1本、収納ポーチ…1個、取扱説明書…1部 コットンストッパー…3個(直径 4.5 cm×2個、直径 5.0 cm×1個)

製品を廃棄するとき <リサイクルにご協力ください。>



本製品に内蔵されている電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄の方法に関しては、お住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルのご協力をお願いいたします。
※自治体により、回収のルールが異なります。

保証とアフターサービス

● 保証書

必ず「お買い上げ日・販売店(ご購入サイト)」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みのことと大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より本体1年間です。

● 修理(交換)を依頼される時

■ 保証期間中の修理(交換)：

製品に本書とお買い上げ時のレシートまたは領収書を添えて、お買い上げの販売店(ご購入サイト)にご依頼ください。保証期間中の修理(交換)に必要な往復送料はお買い上げの販売店(ご購入サイト)が負担いたします。製品送付先は販売店(ご購入サイト)にお問い合わせください。

■ 保証期間が過ぎたあとの対応：

有償での対応となります。お買い上げの販売店(ご購入サイト)にお問い合わせください。

● ご不明な点や修理(交換)に関するご相談は

お買い上げの販売店(ご購入サイト)にお問い合わせください。

無料修理規定

この保証書は、本書記載内容で無料修理(交換)を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から下記保証期間中に、取扱説明書やその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理(交換)いたしますので、製品に本書とお買い上げ時のレシートまたは領収書を添えて、お買い上げの販売店(ご購入サイト)にご依頼ください。

- 保証期間内で次のような場合には有償での対応となります。
 - (ア) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (イ) お買い上げ後の落下、引越、輸送等による故障または損傷。
 - (ウ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
 - (エ) 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - (オ) 本書の提示がない場合。
 - (カ) 本書に、お買い上げ日・ご購入情報・お客様・販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (キ) 消耗部品・付属品の交換、仕様変更等
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店(ご購入サイト)にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

Sarlisi		保証書	
品名	RF温冷美顔器	お客様	ふりがな お名前
型番	SABG09BL		ご住所
保証期間	お買い上げ日 年 月 日から 本体……………1年間	販売店	電話 ()
ご購入情報	ご注文番号 レシート等貼り付け欄		住所・店名・ご購入サイト名 電話 ()

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理(交換)をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後のアフターサービス等についてご不明な点がある場合は、お買い上げの販売店(ご購入サイト)にお問い合わせください。
- ※ レシートまたは領収書、もしくはそれに準ずるものがない場合は無効となります。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

- お受けした個人情報、保証書にご記入いただいた個人情報は、商品、サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにSARLISI株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対してはSARLISI株式会社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

SARLISI株式会社

〒260-0027 千葉県千葉市中央区新田町12-1 トーシン千葉ビル602

■ TEL/FAX: 043-305-5736 ■ ホームページ: <https://sarlisi.co.jp>