

FESTINO

家庭用

Charging Facial EMS Peeling

充電式 フェイシャル EMSピーリング

取扱説明書・保証書



この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いになる前に本書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。また、本書は大切に保管してください。

BA-SMHB014-01-2105

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。本書には、ご使用になる方や他の方々への危害、財産への損害を未然に防ぐため必ず守っていただきたい事項を示しています。

⚠ 警告 この表示の注意事項を守らず誤った使用をすると、【死亡または重傷を負う可能性が想定される】内容を表記しています。

⚠ 注意 この表示の注意事項を守らず誤った使用をすると、【物品の損害の発生や軽傷を負う可能性が想定される】内容を表記しています。

お守りいただく内容を、次の絵表示で区分して説明しています。

⊘ 禁止マーク **⊘** は、してはいけないこと【禁止】を示しています。

! 指しマーク **!** は、必ず行うこと【強制】を示しています。

⚠ 警告

⊘ 次のような人は使用しないでください。事故や肌のトラブルを生じる恐れがあります。

- ・アレルギー体質の人
- ・アトピー性皮膚炎の人、敏感肌の人
- ・医師の治療を受けている人
- ・皮膚感覚の弱い人、顔面に神経障害のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・妊娠中の人、生理中の人、授乳中の人
- ・感染性疾患の人
- ・飲酒後の人
- ・急性疾患の人
- ・血圧異常の人
- ・健康がすぐれない人
- ・血液異常の人

⊘ 次のような場合、または部位には使用しないでください。事故や肌のトラブルを生じる恐れがあります。

- ・にきび、吹出物
- ・皮膚炎、日焼けなど肌に異常のある部位
- ・口内
- ・インプラント、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位
- ・まぶた、眼球
- ・切り傷、湿疹、腫れもの、化膿性疾患のある部位
- ・のどぼとけ
- ・整形手術した部位
- ・各種疾患
- ・突起したホクロ

※ご自身で判断できない場合は、ご使用前に医師にご相談ください。


- ⊗ 分解や修理、改造はしないでください。故障やけがの原因になります。
- ⊗ 医療用や業務用として使用しないでください。家庭用として設計・製造されています。
- ⊗ お子様のみで使用しないでください。また、お子様の手の届く場所に保管しないでください。けがや感電の恐れがあります。
- ⊗ 本製品は完全防水ではありませんので、浴室など湿気の多い場所や、高温となる場所で使用しないでください。感電やショートの原因があります。
- ⊗ 濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししないでください。火災や感電の原因になります。
- ⊗ 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。感電やショートの原因になります。
- ⊗ USBケーブルを傷つけたり、ねじったり、束ねたり、上にものを乗せたり、加工したりしないでください。火災や感電の原因になります。
- ⊗ 充電中にお手入れをしないでください。火災や感電、けがの原因になります。お手入れをする際は必ずUSBケーブルを本体から抜いてください。
- ❗ 使用中や使用後に肌や体調に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止して専門医に相談してください。事故や体調不良、肌トラブルの原因になります。
- ❗ 電池から漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、皮膚に障害を起こす恐れがありますので、すぐに大量の水道水などきれいな水で洗い流してください。目に入った場合はこすらずに水で洗い流し、至急医師にご相談ください。失明や目に障害を負う恐れがあります。
- ❗ 電池が液漏れしたり異臭がするときは、直ちに火気から遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂、発火の原因になります。
- ❗ 電源は必ず付属のUSBケーブルをご使用ください。火災や感電の原因になります。
- ❗ USBプラグはUSBケーブル差し込み口の奥までしっかり差し込んでください。差し込みがゆるい場合は使用しないでください。感電やショート、発火の原因になります。
- ❗ 異常を感じた場合（こげ臭い、発煙など）は使用を停止し、USBプラグを抜いて充電を中止してください。火災や感電の原因になります。

⚠ 注意

- ⊗ 顔のお手入れ以外の目的で使用したり、ペットや乳幼児に使用したりしないでください。けがや故障の原因になります。
- ⊗ 肌に傷や炎症、かゆみ、発疹などの異常がある場合は使用しないでください。肌を傷つけたり、悪化させる原因になります。
- ⊗ 超音波ピーリングモードは、肌が乾いた状態で使用しないでください。肌の水分が少ない状態で使用すると、肌のトラブルの原因になります。
- ⊗ ヘッド部分を肌に強く押し付けたり、同じ場所に当て続けしないでください。肌を痛める原因になります。
- ⊗ 本製品は一人用ですので、複数の人と共用しないでください。感染症などの原因になります。
- ⊗ ヘッド部分を肌以外の異物に触れさせないでください。事故やトラブルにつながる恐れがあります。
- ⊗ 防水設計ではありませんので、本体を水洗いしないでください。故障の原因になります。
- ⊗ お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤類、薬品類で拭いたりしないでください。変色や変形、故障、破損の原因になります。
- ⊗ 本製品を直射日光が当たる場所に置かないでください。変色、変形、故障の原因になります。
- ⊗ 本製品を落としたり、強い衝撃を加えたりしないでください。けがや故障の原因になります。
- ⊗ 高温となる場所や浴室など湿気の多い場所、屋外では使用しないでください。
- ⊗ スプレーなど引火性のものの近くで使用しないでください。火災やけがの原因になります。
- ❗ ご使用前は必ず、本体や超音波ピーリングヘッド、EMSローラーヘッドの破損や変形、傷などがなければ確認してください。肌を傷つける原因になります。

- ❗ 使用頻度・使用時間は、超音波ピーリングモード/EMSモード共に、週1~2回、1日10分以内にしてください。
- ❗ 敏感肌の方や、初めて使用するときは、事故や肌荒れなどのトラブルを防ぐため、使用時間を短くして肌の様子を見ながら肌の状態に合わせて使用してください。
- ❗ アクセサリーや貴金属類などは外してから使用してください。身につけたまま使用すると事故やトラブルの原因になります。
- ❗ 使用後は必ず、本体、超音波ピーリングヘッド、EMSローラーヘッドのお手入れをして、水分を拭き取ってください。水分が残った状態で充電すると、ショートする恐れがあります。
- ❗ 長期間使用しない場合は、1ヶ月に1度を目安に充電してください。電池は放電していき、電池が空の状態でも長期間放置すると電池の寿命が短くなります。
- ❗ 長時間使用しない場合は、必ずUSBプラグを本体から抜いてください。
- ❗ USBケーブルを抜くときは、ケーブルを持たずに必ずUSBプラグを持って抜いてください。感電やショート、ケーブルの断線の原因になります。

各部の名称

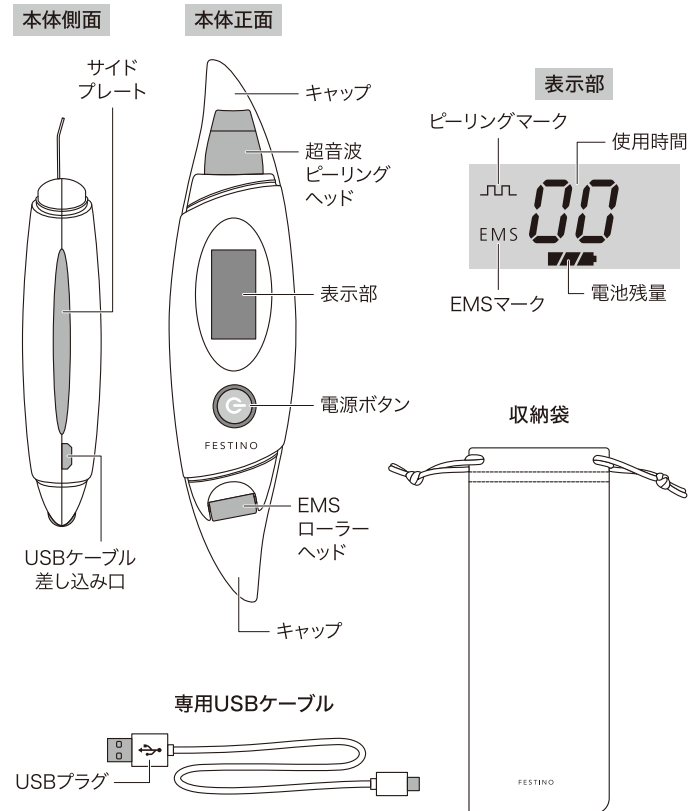

充電の仕方

本体のUSBケーブル差し込み口に付属のUSBケーブルを差し込み、パソコンなどから充電してください。(必ず電源オフの状態でご充電してください。)

※初めて使用するときは、一度満充電にしてから使用してください。

※充電中は表示部に「CH」と表示され、約2時間で充電が完了します。完了するとピピッと音が鳴り、表示部が消灯します。

※充電後はUSBケーブルを接続したままにせず、必ず本体から抜いてください。過充電などバッテリー破損や故障の原因になります。

ご使用前の準備

- ・必ず洗顔をして、メイクや汚れなどを落とし、肌を清潔な状態にしてください。
- ・身につけているアクセサリーや貴金属類などは必ず外してください。



注意

- ・肌に傷や炎症、かゆみ、発疹などの異常がある場合は絶対に使用しないでください。肌を傷つけたり、悪化させる原因になります。
- ・本体や超音波ピーリングヘッド、EMSローラーヘッドの破損や変形、傷などがなければ確認してからご使用ください。肌を傷つける原因になります。
- ・超音波ピーリングモードは、肌が乾いた状態で使用しないでください。肌の水分が少ない状態で使用すると、肌のトラブルの原因になります。

〈ご使用前の肌テスト〉

肌トラブル防止のため、初めて使用する際は必ず事前に肌テストを行ってください。

- 1** 腕の内側を清潔にする
石けんで洗い、タオルなどで水分を拭き取ります。
- 2** 各モードで約3分間使用する
超音波ピーリングモード、EMSモード、それぞれ約3分間使用します。
- 3** 肌に異常がないか確認する
24時間以内に肌を異常を感じた場合は、使用しないでください。


使い方【超音波ピーリングモード】

超音波ヘッドが皮脂・毛穴汚れを洗浄して肌をピーリングします。

- 1** 肌に水を塗布する ※乾いた肌への使用は絶対にしないでください。
- 2** 電源ボタンを長押しして、電源を入れる
ピッと音が鳴り、電源がONになります。
- 3** 電源ボタンを押して、モードを選択する
ピッと音が鳴り、超音波ピーリングモードになると表示部にピーリングマークが付きまます。
- 4** 超音波ピーリングヘッドを肌に軽く押し当て、ゆっくり動かす



ヘッドの向きに注意して肌当たります。

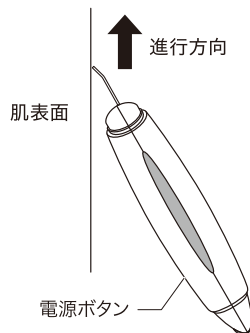

ポイント

- ・ 温かい蒸しタオルで顔を温めたあとや、入浴後に肌が温まった状態での使用がおすすめです。
- ・ 使用中に超音波ピーリングヘッドのすべりが悪くなったり、肌の水分が足りなくなった場合は、その都度水を塗布してください。
- ・ 使用後は、化粧水や美容液などで肌を整えてください。

〈動かし方〉



- ・ 使用頻度・使用時間は、週1～2回、1日10分以内にしてください。
- ・ 超音波ピーリングヘッドは同じ場所に当て続けず移動させてください。また、強く押し当てないでください。肌のトラブルの原因になります。

- 5** 使用を終えるときは、電源ボタンを長押しして電源を切り、お手入れをする
ピッピッと音が鳴り、電源がOFFになります。

※約10分で自動的に電源が切れます。

※使用後は毎回必ずお手入れをしてください。(P.12参照)

使い方【EMSモード】

EMSローラーで表情筋に適度な刺激を与えて肌を引き締めます。

- 1** 電源ボタンを長押しして、電源を入れる

ピッと音が鳴り、電源がONになります。

- 2** 電源ボタンを押して、モードを選択する

ピッと音が鳴り、EMSモードになると表示部にEMSマークがつきます。



- 3** EMSローラーヘッドを肌に軽く押し当て、ゆっくり動かす



本体両側面の
サイドプレートに触れる
ように持ってください。

ポイント

- ・ 肌が乾いた状態だとEMSの刺激を感じにくい場合があります。刺激が弱いと感じる場合は、水や化粧水で肌を保湿してからご使用ください。

お手入れと保管の仕方

※お手入れの際は必ず電源を切り、USBケーブルを本体から抜いてください。

〈本体〉

薄めた石けん水を浸してよく絞った柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

〈超音波ピーリングヘッド〉(EMSローラーヘッド)

水や汚れを柔らかい布で拭き取ってください。



注意

- ・ 使用後は毎回お手入れをしてください。
- ・ 水洗いは絶対にしないでください。故障や感電の原因になります。
- ・ ベンジン、アルコール、シンナーなど薬品類は絶対に使用しないでください。

※お手入れ後はよく乾燥させ、収納袋に入れて湿気のない場所で保管してください。



注意

- ・ 長期間使用しない場合は、1ヶ月に1度を目安に充電してください。電池は放電していき、電池が空の状態では長期間放置すると電池の寿命が短くなります。
- ・ お子様の手が届く場所に保管しないでください。
- ・ 高温となる場所や、浴室など湿気が多い場所には保管しないでください。
- ・ 直射日光の当たる場所や、暖房器具などの近くには保管しないでください。

〈動かし方〉



フェイスライン



頬・額



口周り・あご



鼻周り



注意

- ・ 使用頻度・使用時間は、週1~2回、1日10分以内にしてください。
- ・ EMSローラーヘッドは同じ場所に当て続けず移動させてください。また、強く押し当てないでください。肌のトラブルの原因になります。
- ・ 顔の部位によって、刺激の感じ方には差があります。

4 使用を終えるときは、電源ボタンを長押しして電源を切り、お手入れをする

ビップッと音が鳴り、電源がOFFになります。

※約10分で自動的に電源が切れます。

※使用後は毎回必ずお手入れをしてください。(P.12参照)

故障かな?と思ったら

※故障かな?と思ったらときは、修理を依頼される前に下記のことをお調べください。

症状	主な原因	対処方法
電源が入らない	充電がされていない	充電してください。(P.7参照)
充電ができない	USBケーブルが接続していない	USBケーブルを正しく接続してください。
超音波ピーリングヘッドが振動しない	充電がされていない	充電してください。(P.7参照)
	超音波ピーリングモードになっていない	モードを切り替えてください。
EMSローラーヘッドが作動しない	充電がされていない	充電してください。(P.7参照)
	EMSモードになっていない	モードを切り替えてください。
	肌の水分が足りていない	水や化粧水で肌を保湿してからご使用ください。
	本体両側面のサイドブレードを握っていない	本体両側面のサイドブレードを握ってください。



警告



Li-ion

リチウムイオン電池内蔵

廃棄する際は専用の回収BOXに捨ててください。
絶対に分解して電池を取り出さないでください。

仕様

品名	充電式 フェイシャルEMSピーリング	USBケーブル	約60cm
品番	SMHB-014	付属品	専用USBケーブル、 キャップ、収納袋、 取扱説明書・保証書
サイズ	約W42×D27×H180mm		
電源	USB電源 (5V 0.5A)	材質	本体:ABS ヘッド:ステンレス キャップ:PC 収納袋:ポリエステル
消費電力	約2.5W		
内蔵電池	リチウムイオン電池		
電池容量	450mAh	生産国	中国
充電時間	約2時間		
使用時間	最大約1時間		

※仕様、デザインは商品改良のため予告なく変更することがあります。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従ったご使用において、保証期間内に故障や品質不良が発生した場合は、当社が無償にて修理または交換いたします。
- ご転居の場合、またはご贈答品等の場合での修理のご依頼先は、お買い上げの販売店またはシンプルマインドカスタマーセンターへご連絡ください。
- 以下の場合は保証期間内でも有償修理になります。
(イ)本保証書が提示されない場合
(ロ)本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、また字句を書き換えた場合
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害や異常電圧による故障および損傷
(ニ)一般家庭用途以外(例えば業務用における長時間の使用)で生じた故障及び損傷
(ホ)本体及び付属品の消耗・紛失、損傷など
(ヘ)お買い上げ後の落下、衝撃などによる損傷、変形
(ト)使用上の誤りや当社以外で行われた修理や改造による故障
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- 本保証書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理のお約束をするものです。従って、本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

〈アフターサービス〉

■保証書

必ず販売店名、お買い上げ年月日などをご確認のうえ、販売店より受け取りください。
また、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

■修理に出されるとき

- 保証期間中
取扱説明書などの注意書きに従った使用状態で故障した場合は、保証書をご提示いただくことで無償交換となります。保証期間中でも、本書に記載されている注意書きを無視したうえでの故障や破損、改造、分解を加えた場合などは有償となる場合があります。
- 保証期間を経過しているとき
保証期間を過ぎた場合はお客様のご要望により、有償修理をいたします。
※その場合の送料はお客様負担となります。

■アフターサービスについてご不明点がある場合やお困りのとき

お買い上げ販売店またはシンプルマインド カスタマーセンターまでお問い合わせください。

保証書

※空欄部分に販売店名、お買い上げ年月日を必ずご記入ください。

品名	充電式 フェイシャル EMSピーリング (SMHB-014)		
保証期間	本体お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
販売店名			
お客様	お名前		
	ご住所		
	電話番号		

発売元: ウィナース株式会社

製造元: シンプルマインド株式会社

製品についてのお問い合わせは下記まで

シンプルマインド カスタマーセンター

電話 **03-6662-7106**

【受付時間】 10:00~12:00/13:00~17:00 (土日祝日を除く)

【住所】 〒125-0062 東京都葛飾区青戸4-2-7-201