


FESTINO Charging Facial Hot Treatment

充電式 フェイシャル ホットトリートメント

家庭用

取扱説明書・保証書

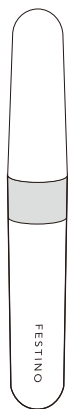

仕様

品名	フェスティノ 充電式 フェイシャル ホットトリートメント		
品番	SMHB-023		
サイズ	約W18.5×D18.5×H128mm		
電源	USB電源 (DC5.0V/1.0A)		
消費電力	0.8W		
内蔵電池	リチウムイオン電池		
電池容量	300mAh	充電時間	約1.5h
最大使用時間	約2.0h	USBケーブル	約0.8m
付属品	専用USBケーブル/キャップ/取扱説明書・保証書		
材質	本体・キャップ:ABS/ヘッド:亜鉛合金		
生産国	中国		

※仕様、デザインは商品改良のため予告なく変更することがあります。

製品についてのお問い合わせは下記まで

シンプルマインド カスタマーセンター

電話 **03-6662-7106**

【受付時間】 10:00~12:00/13:00~17:00
(土日祝日を除く)

【住所】 〒125-0062 東京都葛飾区青戸4-2-7-201

BA-SMHB023-02-2110

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いになる前に本書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。また、本書は大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。本書には、ご使用になる方や他の方々への危害、財産への損害を未然に防ぐため必ず守っていただきたい事項を示しています。

警告	この表示の注意事項を守らず誤った使用をすると、【死亡または重傷を負う可能性が想定される】内容を表記しています。
注意	この表示の注意事項を守らず誤った使用をすると、【物品の損害の発生や軽傷を負う可能性が想定される】内容を表記しています。

お守りいただく内容を、次の絵表示で区分して説明しています。

禁止マーク は、してはいけないこと【禁止】を示しています。指示マーク は、必ず行うこと【強制】を示しています。

警告

- 次のような人は使用しないでください。事故や肌のトラブルを生じる恐れがあります。
 - ・アレルギー体質の人
 - ・アトピー性皮膚炎の人、敏感肌の人
 - ・感染性疾患の人
 - ・飲酒後の人
 - ・医師の治療を受けている人
 - ・皮膚感覚の弱い人、顔面に神経障害のある人
 - ・急性疾患の人
 - ・血圧異常の人
 - ・心臓に障害のある人
 - ・妊娠中の人、生理中の人、授乳中の人
 - ・健康がすぐれない人
 - ・血液異常の人
- 次のような場合、または部位には使用しないでください。事故や肌のトラブルを生じる恐れがあります。
 - ・整形手術した部位
 - ・皮膚炎、日焼けなど肌に異常のある部位
 - ・にきび、吹出物
 - ・口内
 - ・突起したホクロ
 - ・インプラント、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位
 - ・まぶた、眼球
 - ・のどぼとけ
 - ・各種疾患
 - ・切り傷、湿疹、腫れもの、化膿性疾患のある部位
- ※ご自身で判断できない場合は、ご使用前に医師にご相談ください。
- 充電中にお手入れをしないでください。火災や感電、けがの原因になります。お手入れをするときは、必ずUSBケーブルを本体から抜いてください。
- 本製品の分解や修理、改造はしないでください。故障やけがの原因になります。
- 本製品は充電式電池を内蔵しているため、火のそばや炎天下で使用したり放置したりしないでください。また、火中投下や加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。発熱や発火、破裂、動作不良などの原因になります。
- USBプラグが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電、ショートによる火災の原因になります。
- 濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししないでください。火災や感電の原因になります。
- USBコードの上にものを載せたり、挟み込んだりしないでください。火災や感電の原因になります。
- USBコードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、加工したりしないでください。火災や感電の原因になります。
- 医療用や業務用として使用しないでください。家庭用として設計・製造されています。
- 高温となる場所や浴室など湿気が多い場所、屋外では使用しないでください。

保証書 ※空欄部分に販売店名、お買い上げ年月日を必ずご記入ください。

品名	フェスティノ 充電式 フェイシャル ホットトリートメント (SMHB-023)		
保証期間	本体お買い上げ日より1年間	お買い上げ日	年 月 日
販売店名	お名前 ご住所 電話番号		
		〈お客様〉	

発売元:ウィナーズ株式会社 製造元:シンプルマインド株式会社

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従ったご使用において、保証期間内に故障や品質不良が発生した場合は、当社が無償にて修理または交換いたします。
- ご転居の場合、またはご贈答品等の場合での修理のご依頼先は、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターへご連絡ください。
- 以下の場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (イ) 本保証書が提示されない場合
 - (ロ) 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、また字句を書き換えた場合
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガスや異常電圧による故障及び損傷
- (二) 一般家庭用途以外 (例えば業務用における長時間の使用) で生じた故障及び損傷
- (ホ) 本体及び付属品の消耗、紛失、損傷など
- (ヘ) お買い上げ後の落下、衝撃などによる損傷、変形
- (ト) 使用上の誤りや当社以外で行われた修理や改造による故障

4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
5. 本保証書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理のお約束をするものです。従って、本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

〈アフターサービス〉

- 保証書
必ず販売店名、お買い上げ年月日などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
- 修理に出されるとき
・保証期間中
取扱説明書などの注意書きに従った使用状態で故障した場合は、保証書をご提示いただくことで無償交換となります。保証期間中でも、本書に記載されている注意書きを無視したうえで故障や破損、改造、分解を加えた場合などは有償となる場合があります。
・保証期間を過ぎた場合はお客様のご要望により、有償修理をいたします。※その場合の送料はお客様負担となります。
- アフターサービスについてご不明点がある場合やお困りのとき
お買い上げ販売店またはシンプルマインド カスタマーセンターまでお問い合わせください。



警告



Li-ion

リチウムイオン電池内蔵

廃棄する際は専用の回収BOXに捨ててください。
絶対に分解して電池を取り出さないでください。


- お子様のみでの使用はしないでください。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ① USBケーブルを抜くときは、必ずUSBプラグを持って抜いてください。ケーブルを持って抜くと感電やショート、ケーブルの断線の原因になります。
- ① 電池から漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、皮膚に障害を起こす恐れがありますので、すぐに大量の水水道水などきれいな水で洗い流してください。
- ① 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。また、乳幼児が触らないように注意してください。けがや事故の原因になります。
- ① 電池が液漏れしたり異臭がするときは、直ちに火気から遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂、発火の原因になります。
- ① 充電するときは、必ず充電端子にほこりや水が付着していないことを確認してください。感電やショート、発火の原因になります。
- ① 充電時は、DC5.0V/1.0A以内の電源を使用してください。この電源以外の電源を使用すると発熱や故障の原因になります。
- ① 異常が生じたとき(こげ臭い、異音がする、変形したり異常に熱い、発煙など)はすぐに使用を停止し、USBプラグを抜いて充電を中止してください。火災や感電、けがの原因になります。

注意

- 本製品を落としたり、強い衝撃を加えたりしないでください。けがや故障の原因になります。
- 顔のお手入れ以外の目的で使用したり、ベットの使用したりしないでください。けがや事故、故障の原因になります。
- 肌に傷や炎症、かゆみ、発疹などの異常がある場合は使用しないでください。肌を傷つけたり、悪化させる原因になります。
- 同じ場所に当て続けしないでください。また、1日1回約2分以上の使用はしないでください。肌を傷める原因になります。
- 本製品は一人用ですので、複数の人と共用しないでください。感染症などの原因になります。
- 本体を水洗いしないでください。防水設計ではありませんので、故障の原因になります。
- 本製品を直射日光が当たる場所に置かないでください。変色、変形、故障の原因になります。
- スプレーなど引火性のもの近くに使用しないでください。火災やけがの原因になります。
- お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤類、薬品類で拭いたりしないでください。変色や変形、故障、破損の原因になります。
- ① 初めて使用する場合は、使用時間を短くして、肌の様子を見ながら使用してください。
- ① 使用中や使用後に肌に異常を感じた場合は、使用を中止し、医師にご相談ください。
- ① ご使用の際は、必ず化粧水や美容液などを肌につけてください。乾いた肌に使用すると、皮膚を傷める原因になります。
- ① 充電は必ず付属のUSBケーブルをご使用ください。付属のUSBケーブル以外のものを使用すると、発熱や故障の原因になります。
- ① 使用や充電、保管は5℃~35℃の範囲でしてください。この範囲外の環境での使用や充電、保管は故障の原因になります。
- ① 長期間使用しない場合は、半年に1度を目安に充電してください。電池は放電していき、電池が空の状態では長期間放置すると電池の寿命が短くなります。

各部の名称

本体

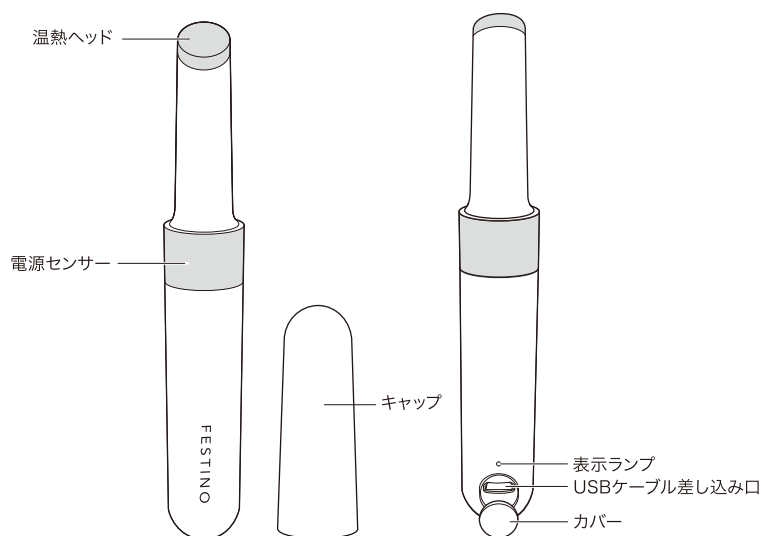

専用USBケーブル (micro USB)



3

使い方

1 お手持ちの化粧水や美容液をケアしたい部分につける

唇のケアにはリップクリームなどを薄く塗ります。
※リップバームなど粘度の高いものは一緒に使用しないでください。

2 電源センサーに触れるように持ち、温熱ヘッドを肌や唇に軽く押し当てる

ヘッドを肌に当てている間、電源がオンになります。

3 肌や唇の表面で優しくゆっくり動かす

約30秒後、温熱ヘッドがじんわり温かくなります。

4 使用後はお手入れをする

お手入れの仕方(P.6)をご参照ください。

マイクロカレント&音波振動で
美容成分が角質層まで浸透し、
ハリ・ツヤ・潤いを与えます。



注意

- ・安全上のご注意(P.1～P.2)を読んでからご使用ください。
- ・ヘッドを肌に強く当てたり、同じ場所に当て続けたりしないでください。肌を傷める原因になります。
- ・1回の使用時間は2分を目安としてください。長時間の連続使用は肌を傷める原因になります。
- ・防水加工されていませんので、浴室など温度の高い場所で使用しないでください。故障の原因になります。

5

充電の仕方

本体のUSBケーブル差し込み口に付属のUSBケーブルを差し込み、パソコンなどから充電してください。

- ※初めて使用するときは、一度満充電にしてから使用してください。
- ※充電中は表示ランプがオレンジに点灯し、充電が完了すると緑が点灯します。
- ※充電後はUSBケーブルを接続したままにせず、必ず本体から抜いてください。
- 過充電などバッテリー破損や故障の原因になります。
- ※使用后、表示ランプがオレンジに点滅した際は早めに充電してください。

表示ランプについて

使用時	緑	点灯
使用后(充電15%以上)	緑	3回点滅
使用后(充電15%未満)	オレンジ	3回点滅
充電中	オレンジ	点灯
充電完了	緑	点灯

4

お手入れの仕方

- 〈温熱ヘッド〉 表面についた汚れなどは、水を含ませて固く絞った布で軽く拭き取ってください。
- 〈温熱ヘッド以外〉 乾いた布で拭いてください。



- ・水洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。
- 注意 ・ベンジン、アルコール、シンナーなど薬品類は使用しないでください。変色、変形など故障の原因になります。

※上記のような変色・変形・傷などは保証の対象外となりますので、ご注意ください。

保管について

- ・直射日光が当たる場所には保管しないでください。変色、変形、故障の原因になります。
- ・お手入れ後には十分に乾燥させてから保管してください。
- ・お子様の手の届かない場所に保管してください。

故障かな?と思ったら

※故障かな?と思ったらときは、修理を依頼される前に下記のことをお確かめください。

症状	主な原因	対処方法
電源が入らない	電源センサーに触れていない	電源センサーに触れるように持ってお使いください。
	充電がされていない	充電してください。(P.4参照)
充電ができない	USBケーブルを接続していない	USBケーブルを正しく接続してください。
作動中に停止する	充電電池の残量不足	充電してください。(P.4参照)

6