



# Intelligentes Beheizbares Nackenkissen Gebrauchsanweisung

# Produktbeschreibung


Das Vulpés Intelligentes Beheizbares Nackenkissen wurde für Personen entwickelt, die unter Nackensteifigkeit und Schmerzen leiden. Das intelligente beheizte Nackenkissen bietet präzise Heizunterstützung mit der maßgeschneiderten Graphenheiztechnologie, welche die empfindlichen Nackenregionen abdeckt

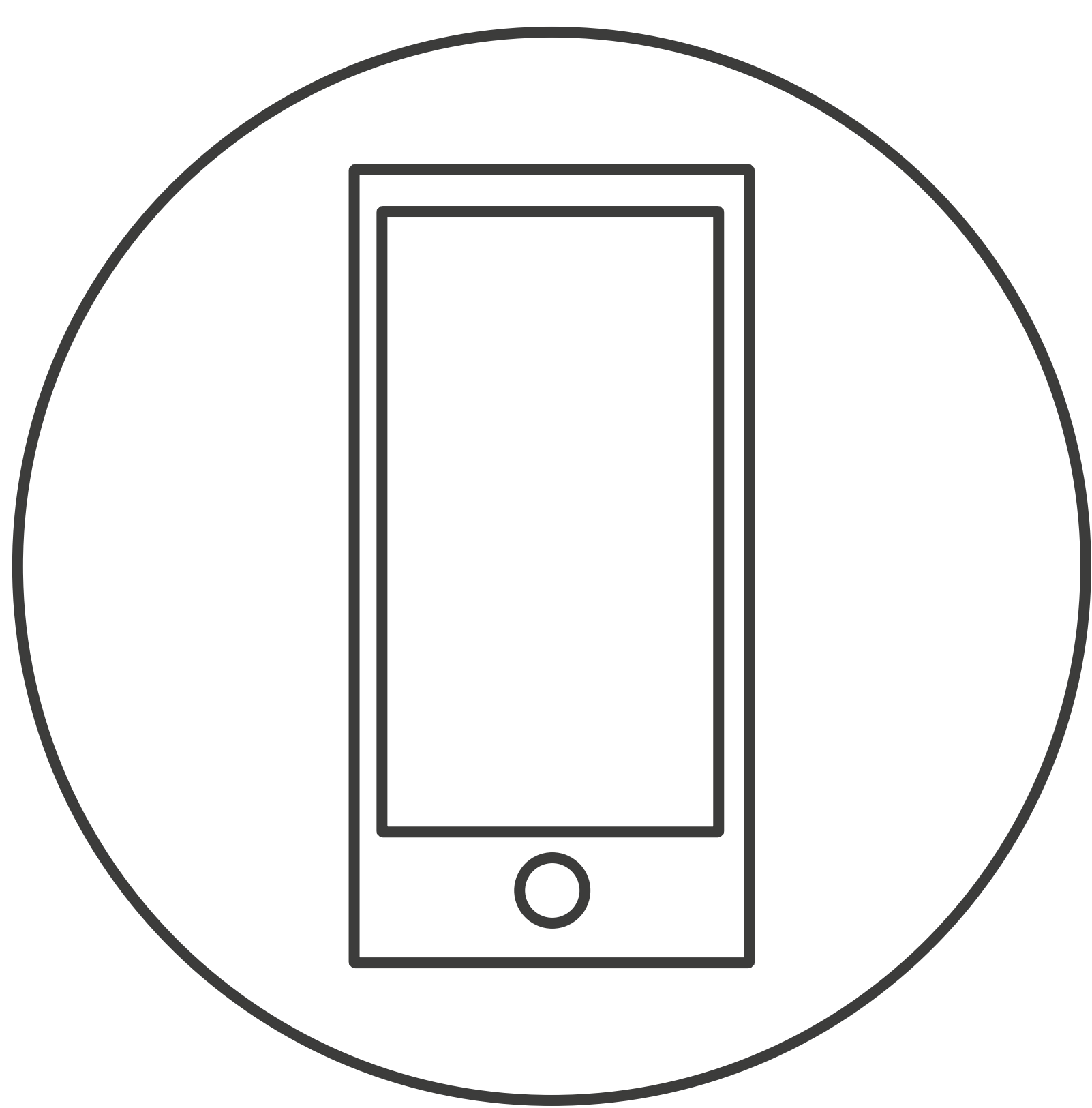


Smartphone  
gesteuert

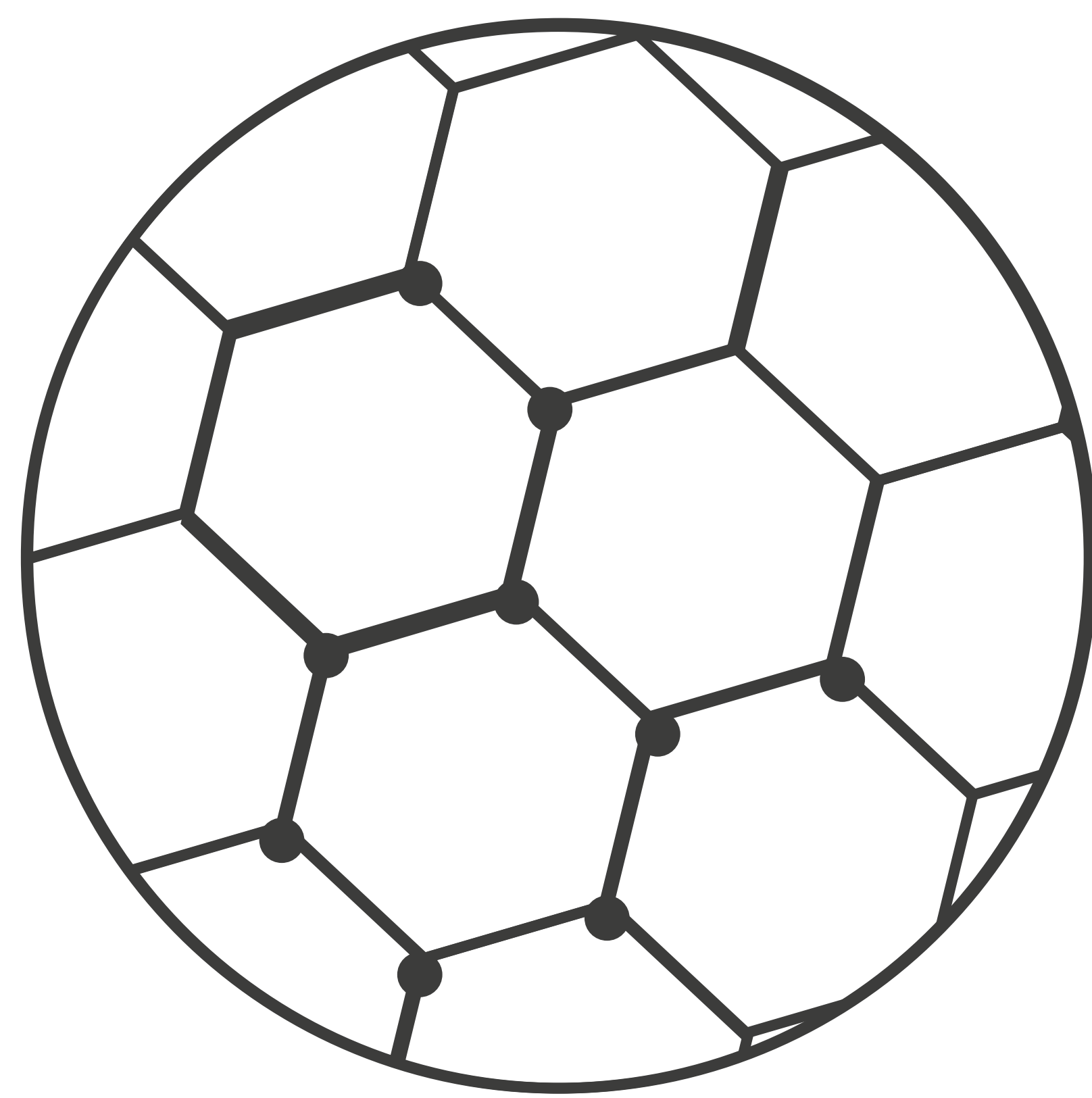


Graphen  
technologie

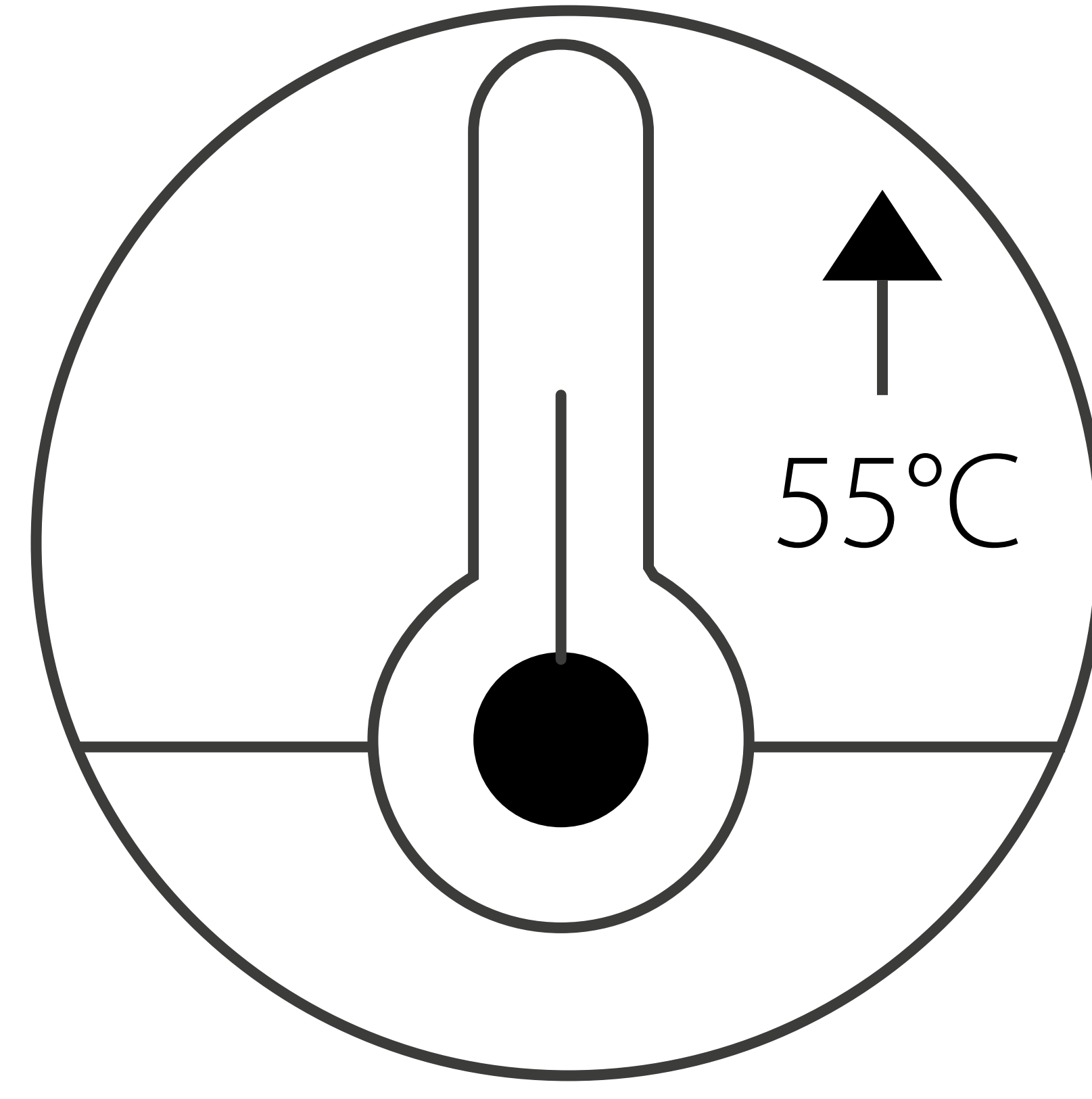

Elektrisch beheizt

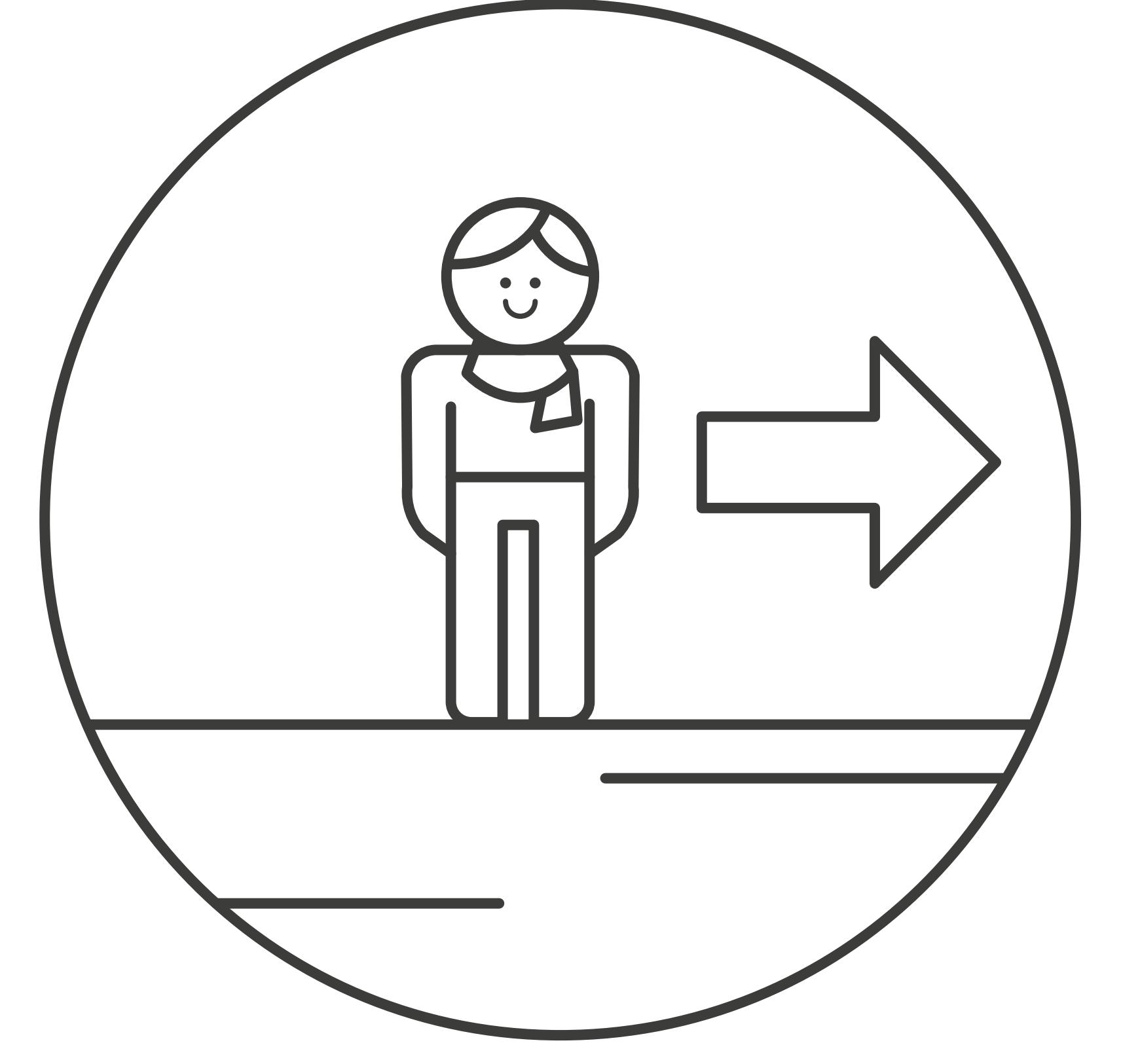


Mobil einsetzbar

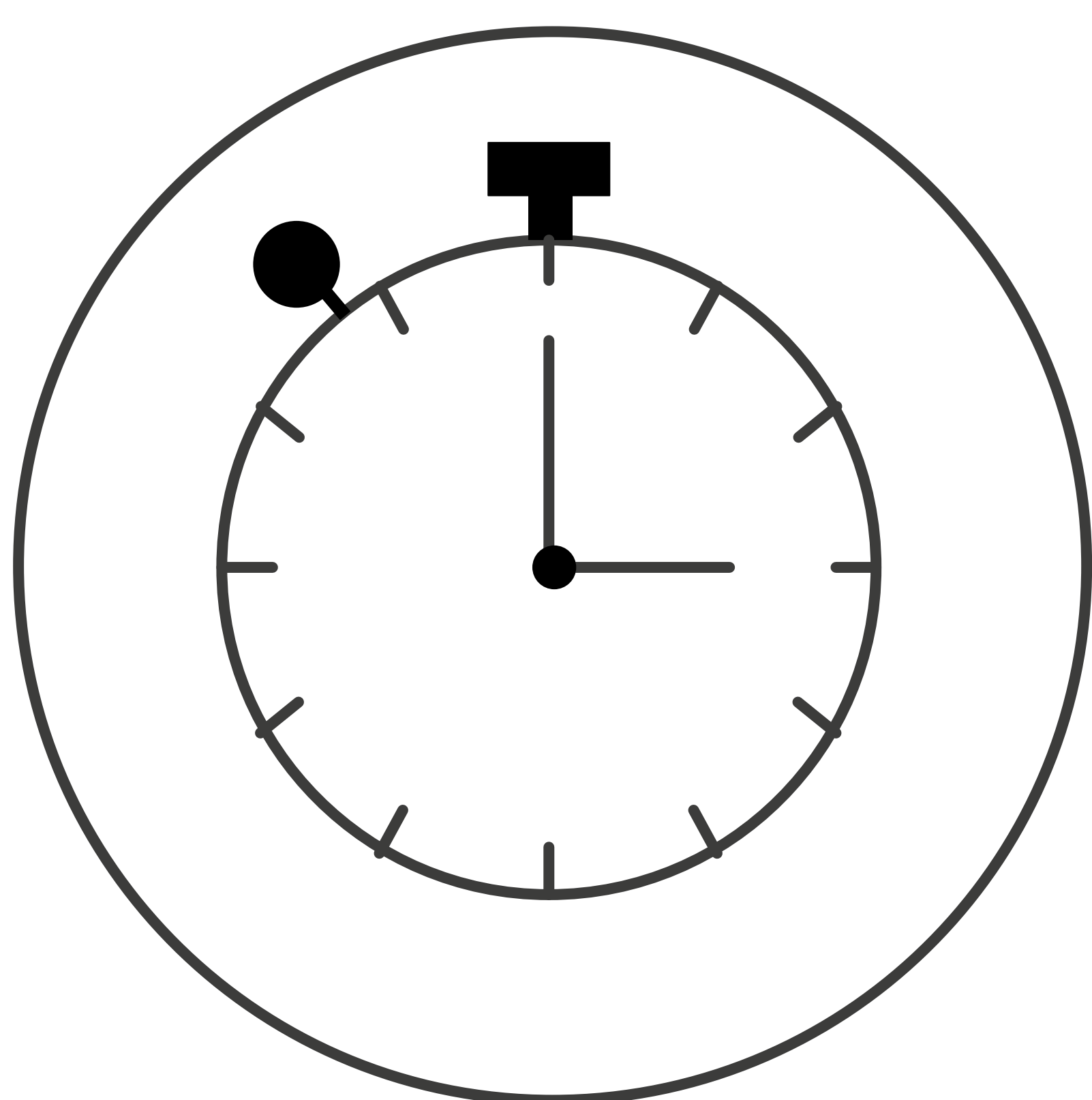


Automatische  
Zeitschaltuhr



Hautfreundliches  
& weiches Material

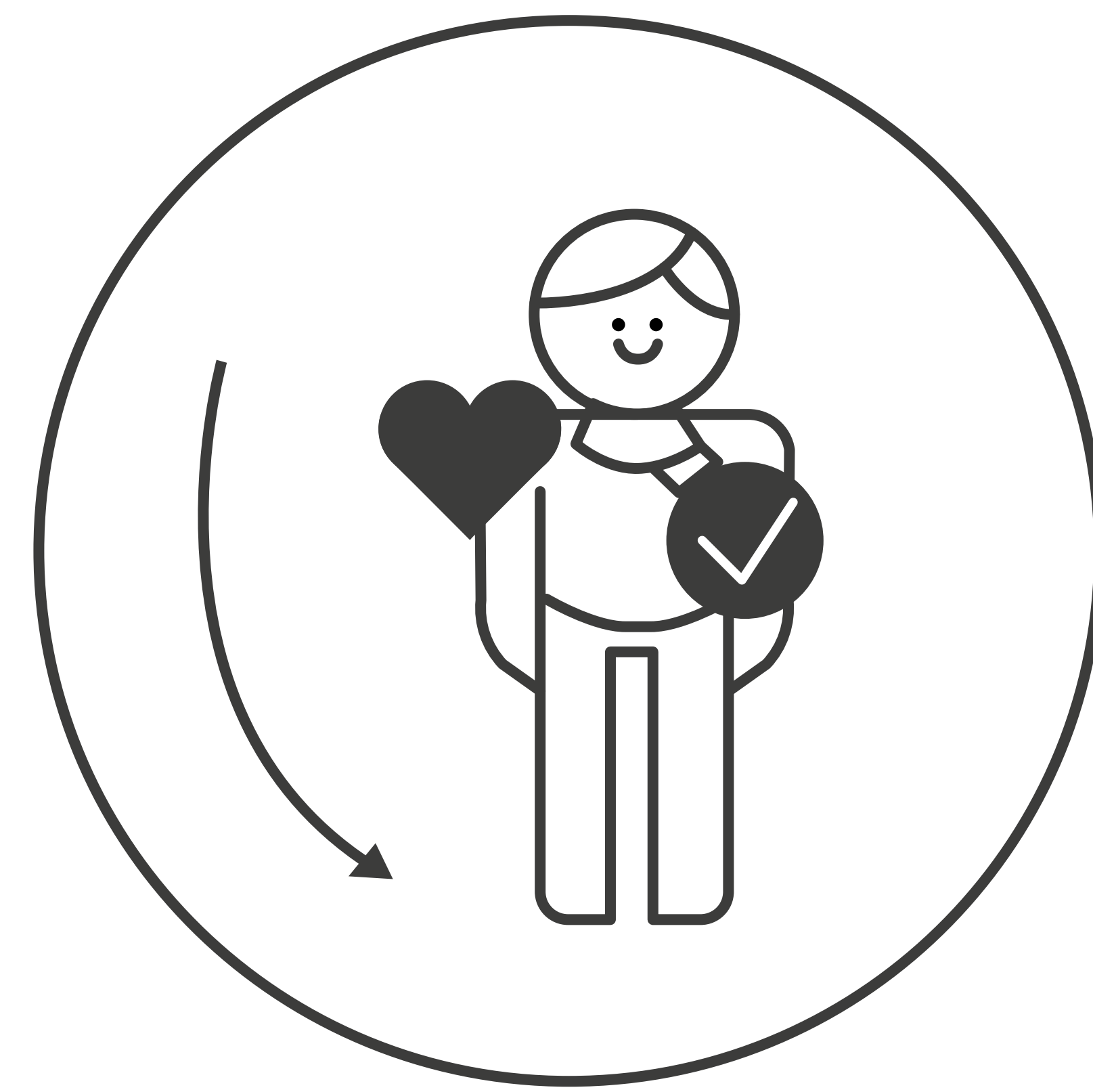

Ergonomisch

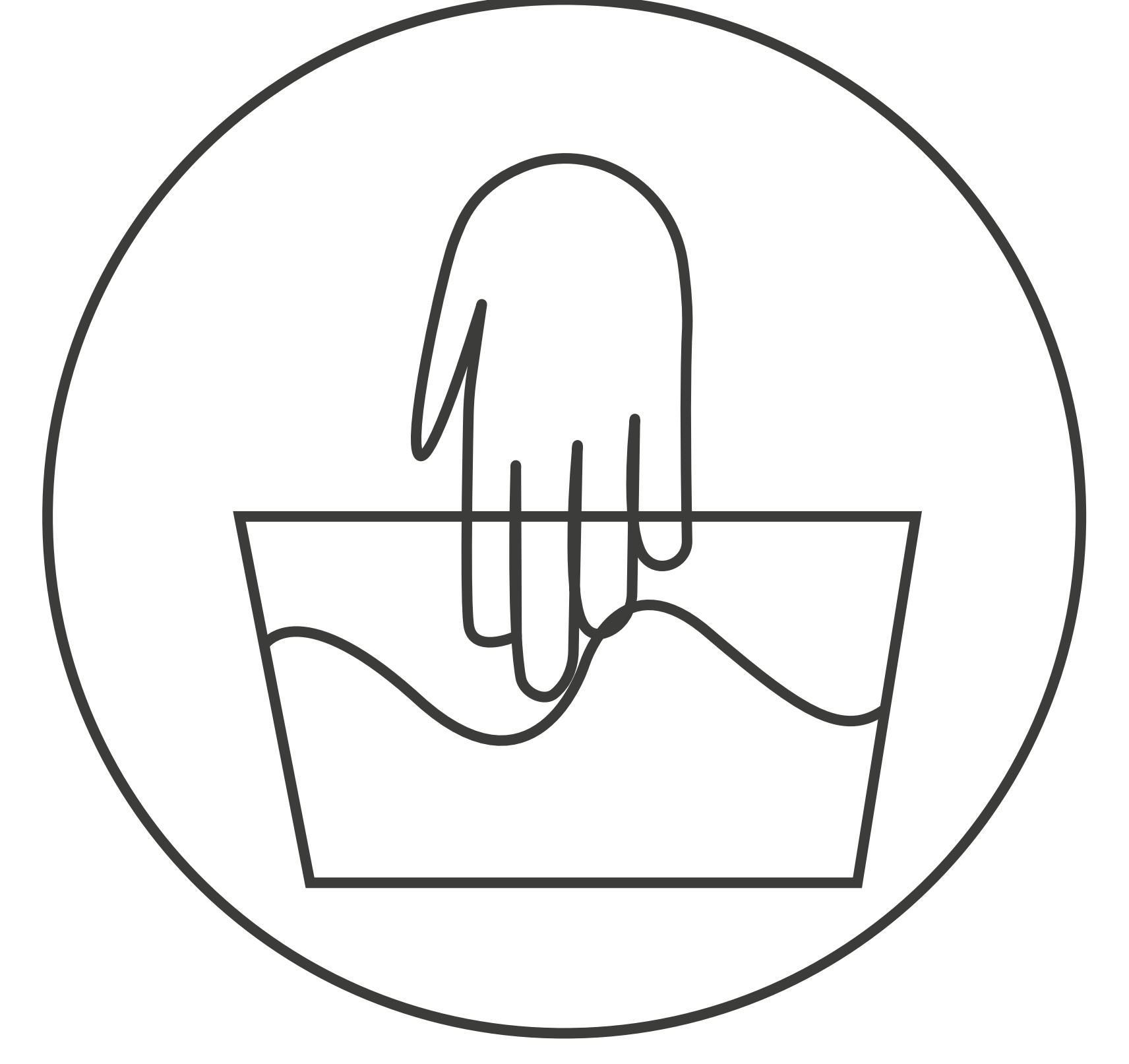

Handwäsche

Das Vulpés Intelligentes Beheizbares Nackenkissen kann zur Unterstützung verschiedener Zustände verwendet werden.



Nackensteifigkeit



Muskelkrampf




Mildernde Kopfschmerzen



Förderung des Schlafes



Schmerzlinderung

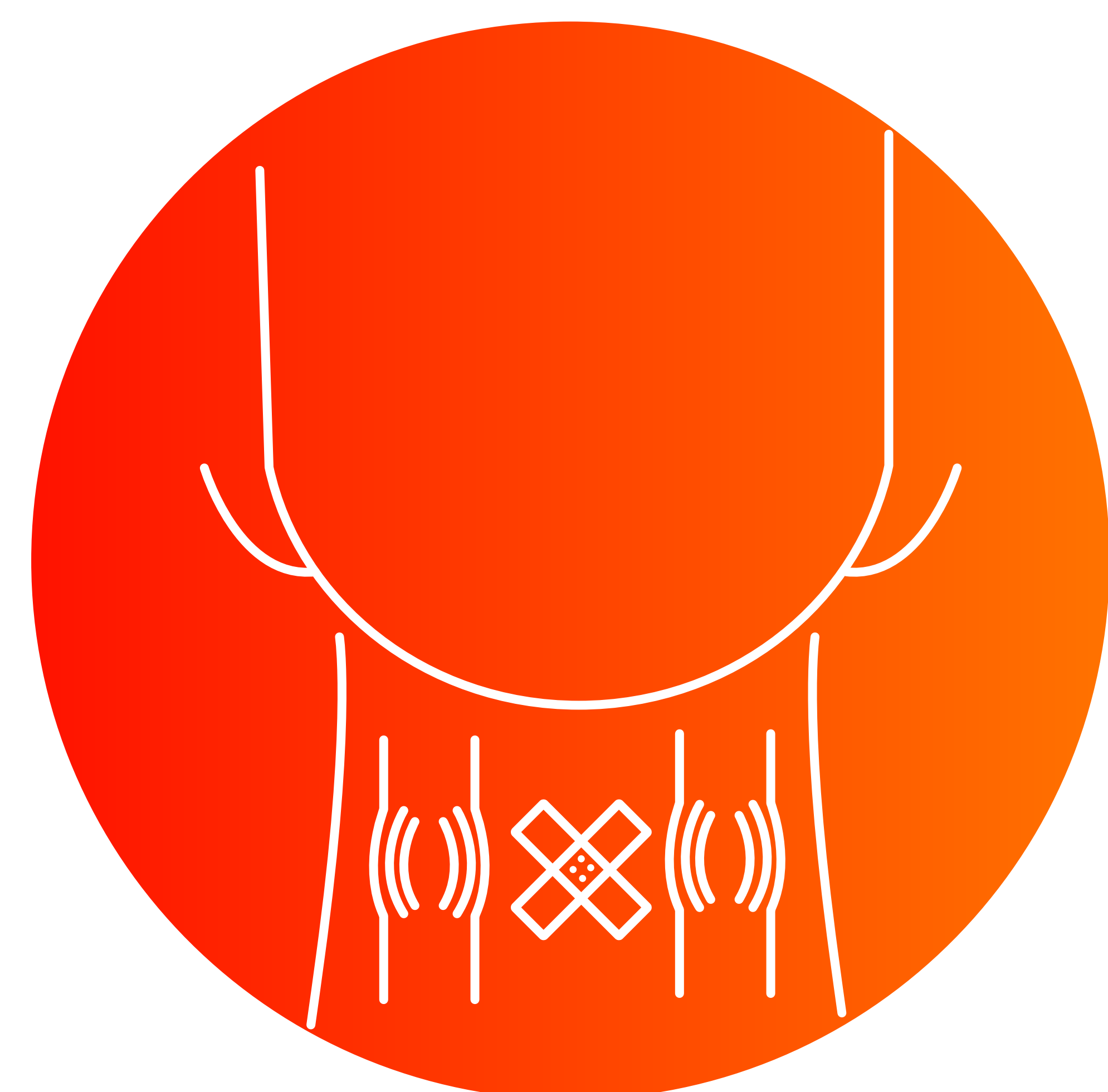


Unterstützung der  
Muskelregeneration


**Das Vulpés Intelligentes Beheizbares Nackenkissen ist kein „medizinisches Produkt“. Es verspricht keine Heilung für Krankheiten oder Krankheiten. Bitte kontaktieren Sie das medizinische Fachpersonal für medizinische Beratung oder Behandlungsoptionen.**

# ANWENDUNGEN


# WAS IST IN DER BOX?

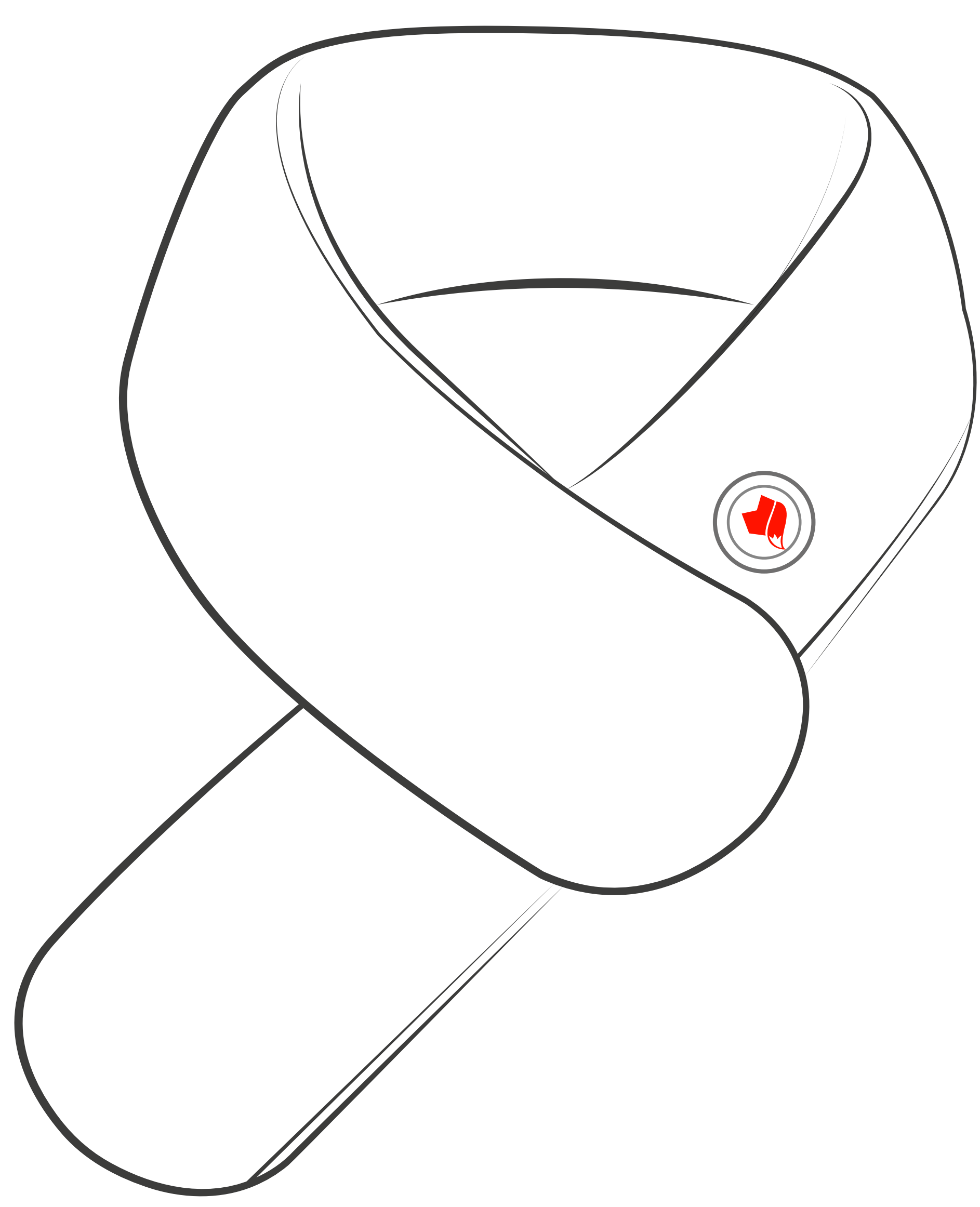


Vulpés Intelligentes Beheizbares Nackenkissen \*

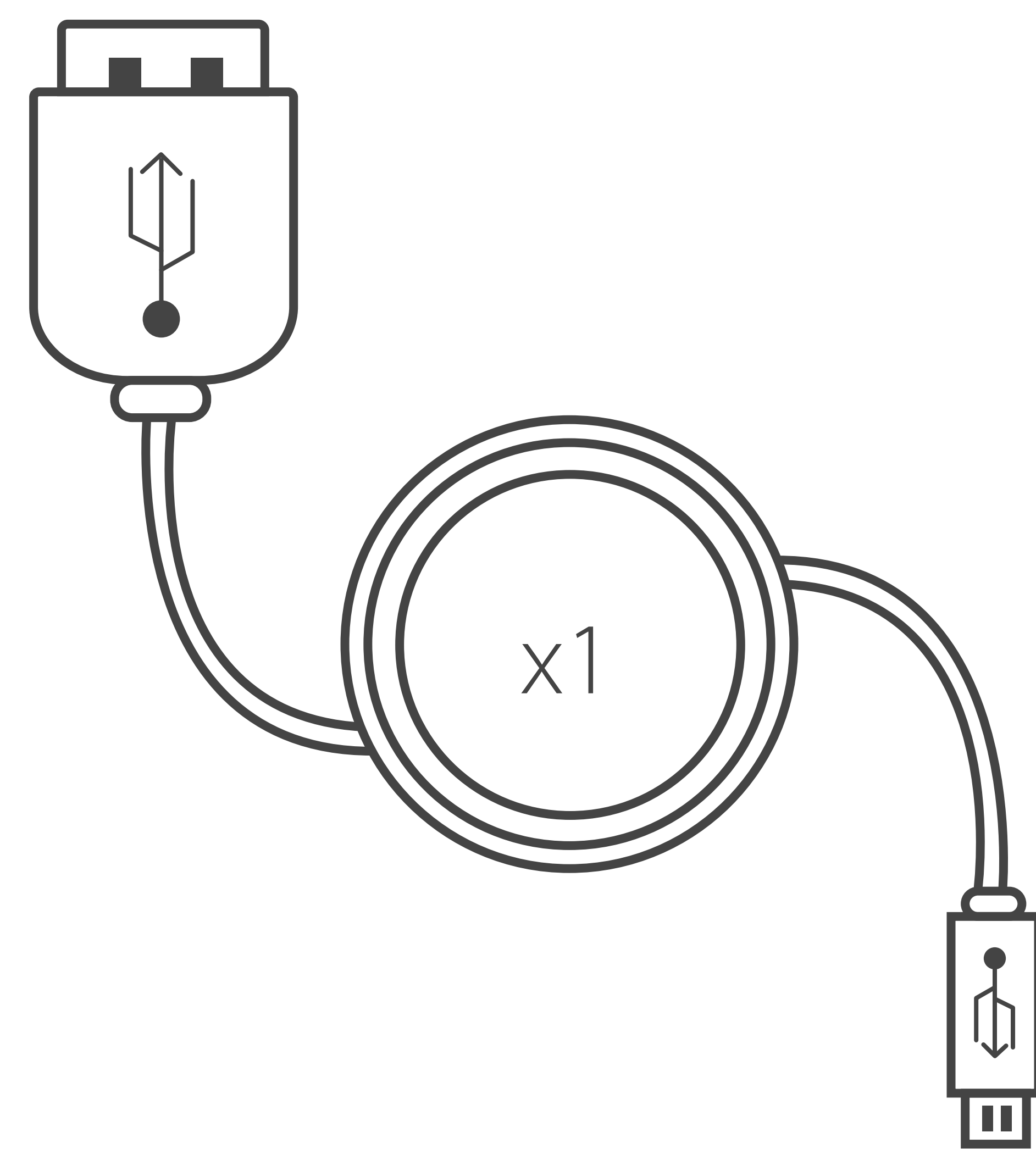

Ladekabel


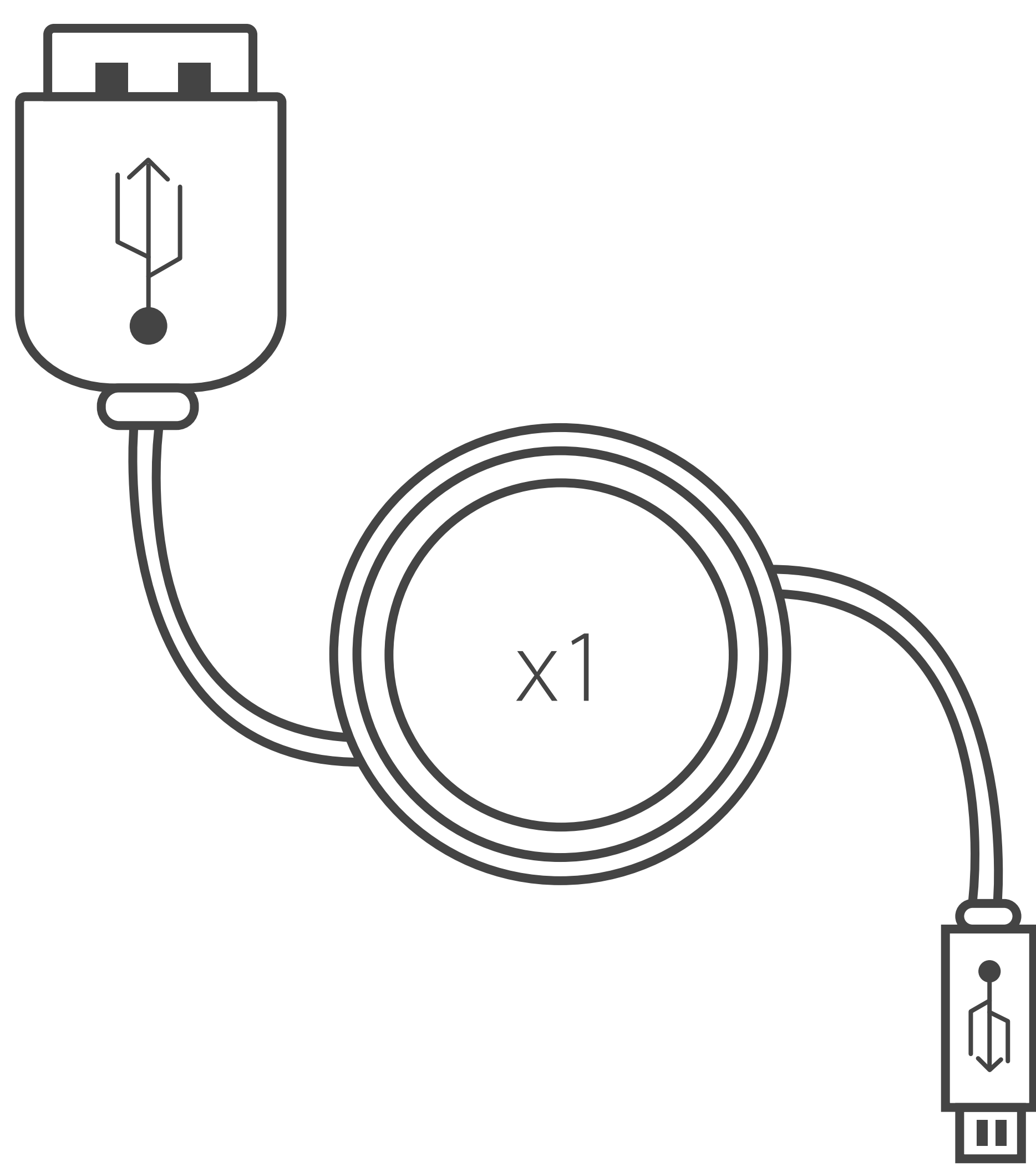


Verlängerungskabel

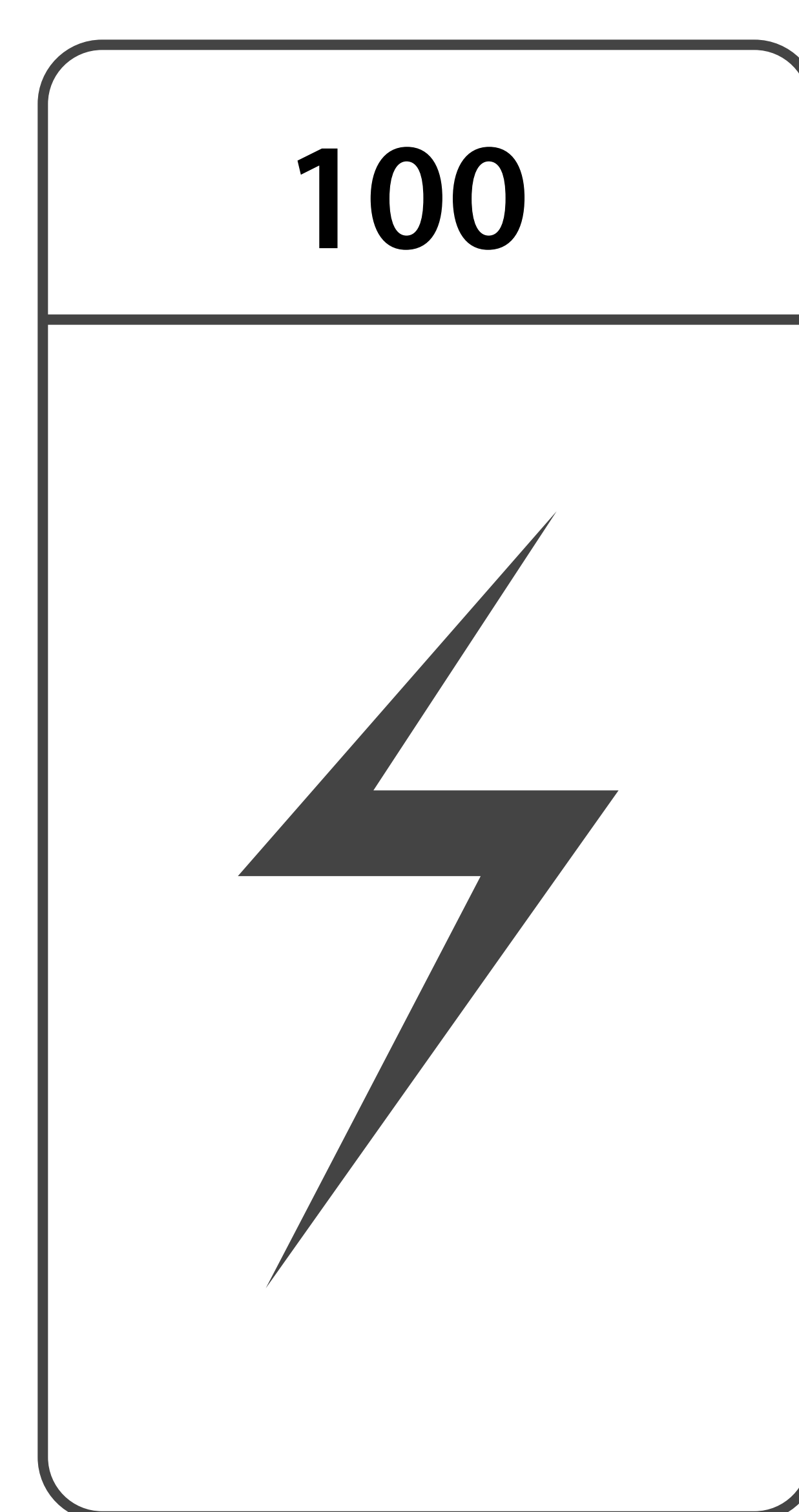

5000 mAh Powerbank

\* Vulpés Intelligentes Beheizbares Nackenkissen Größe : 69 cm

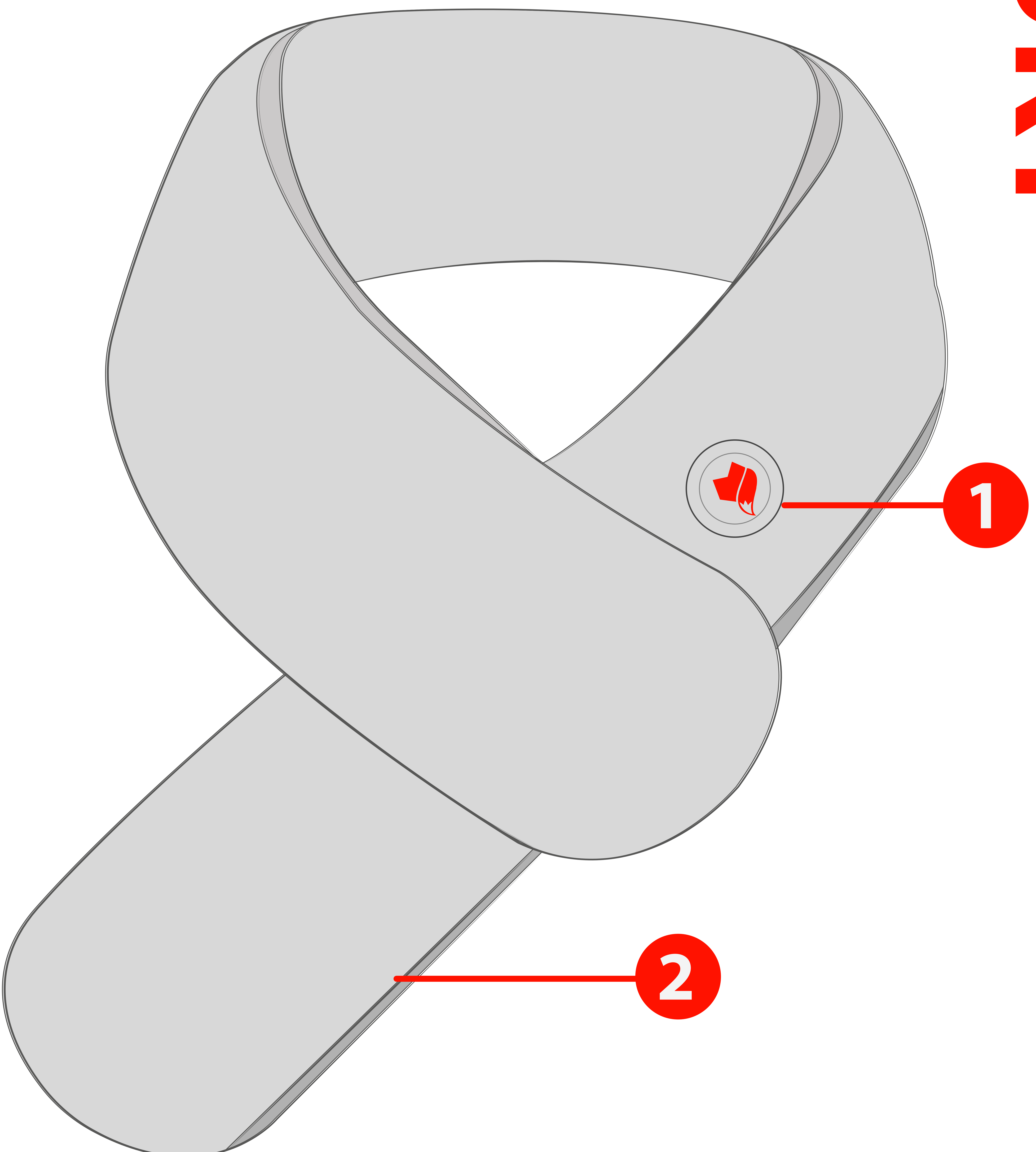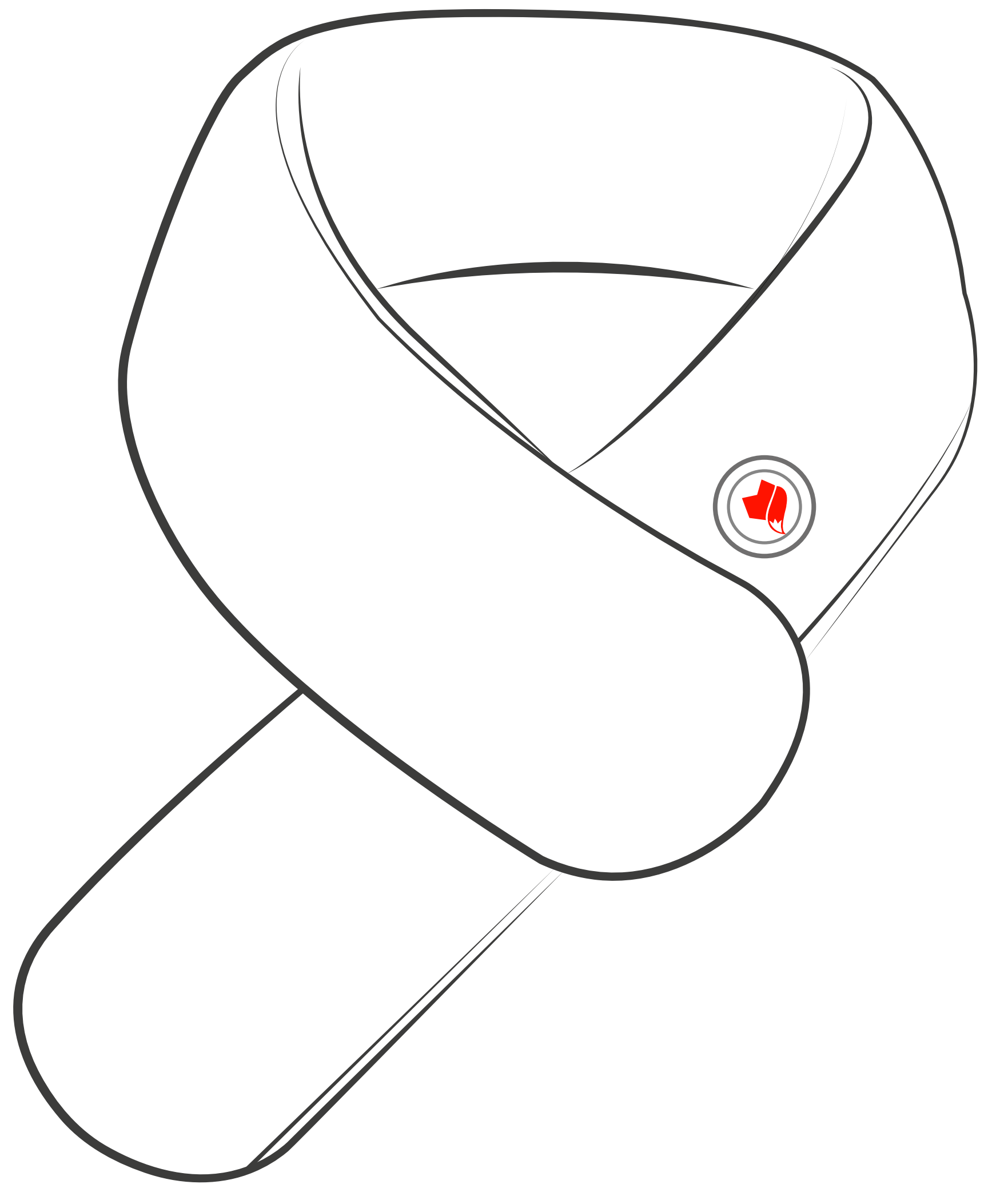


**1**

Kabelloser, 3-Modus-Regler

**2**

Batterietasche mit integriertem USB-Kabel

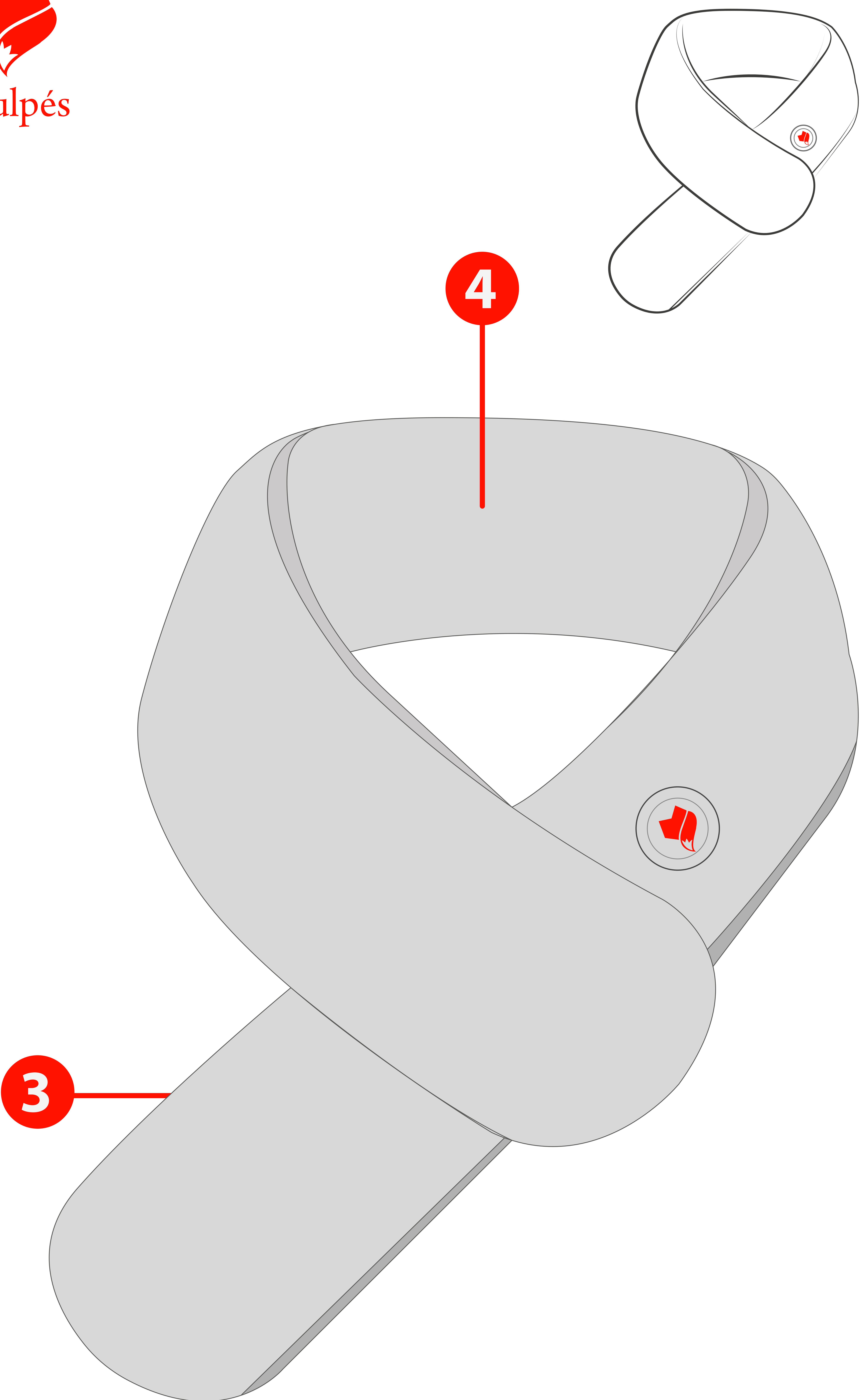



**3**

Hautfreundliches und weiches Material

**4**

Heizbereich

# EINRICHTUNG

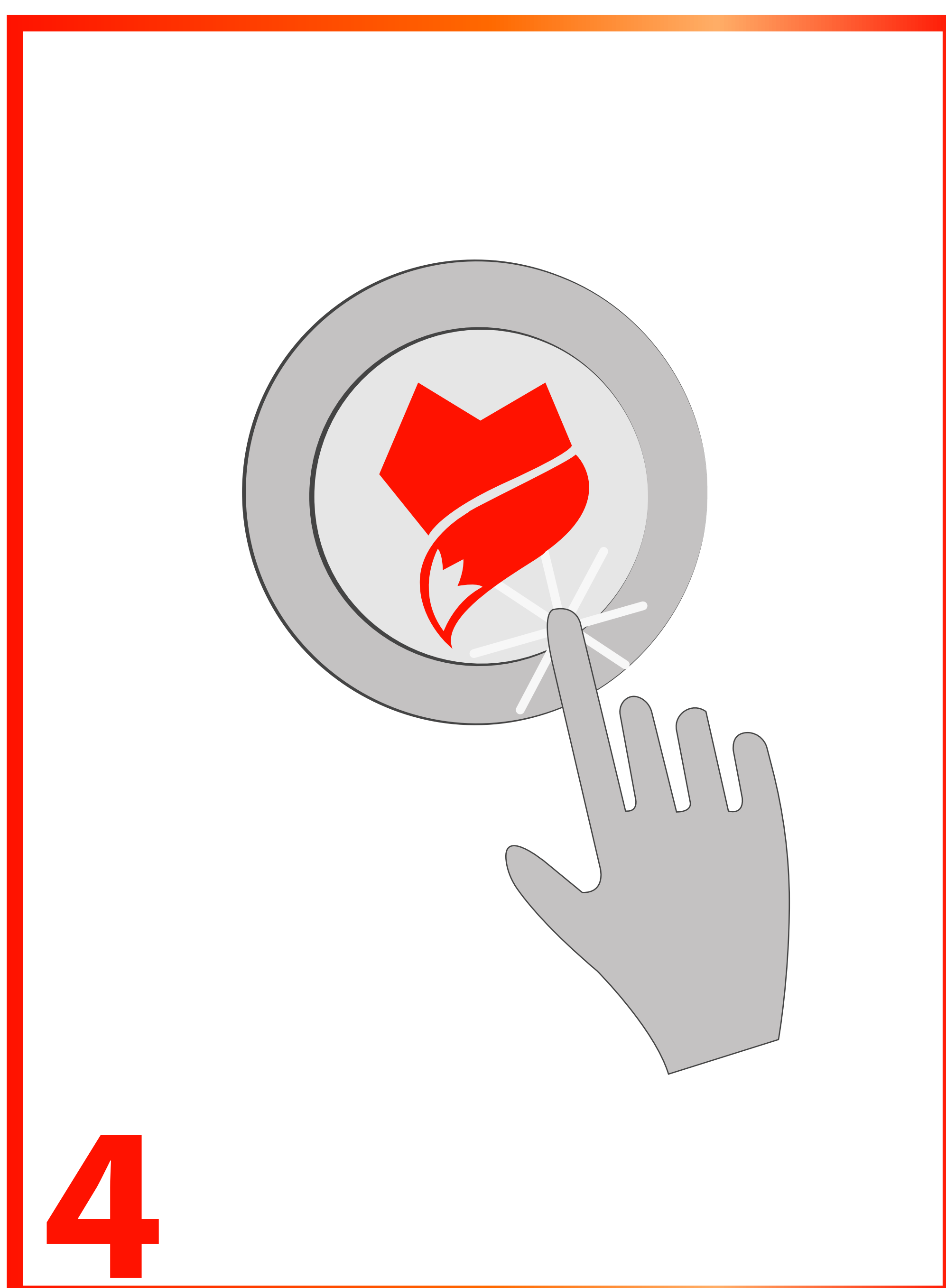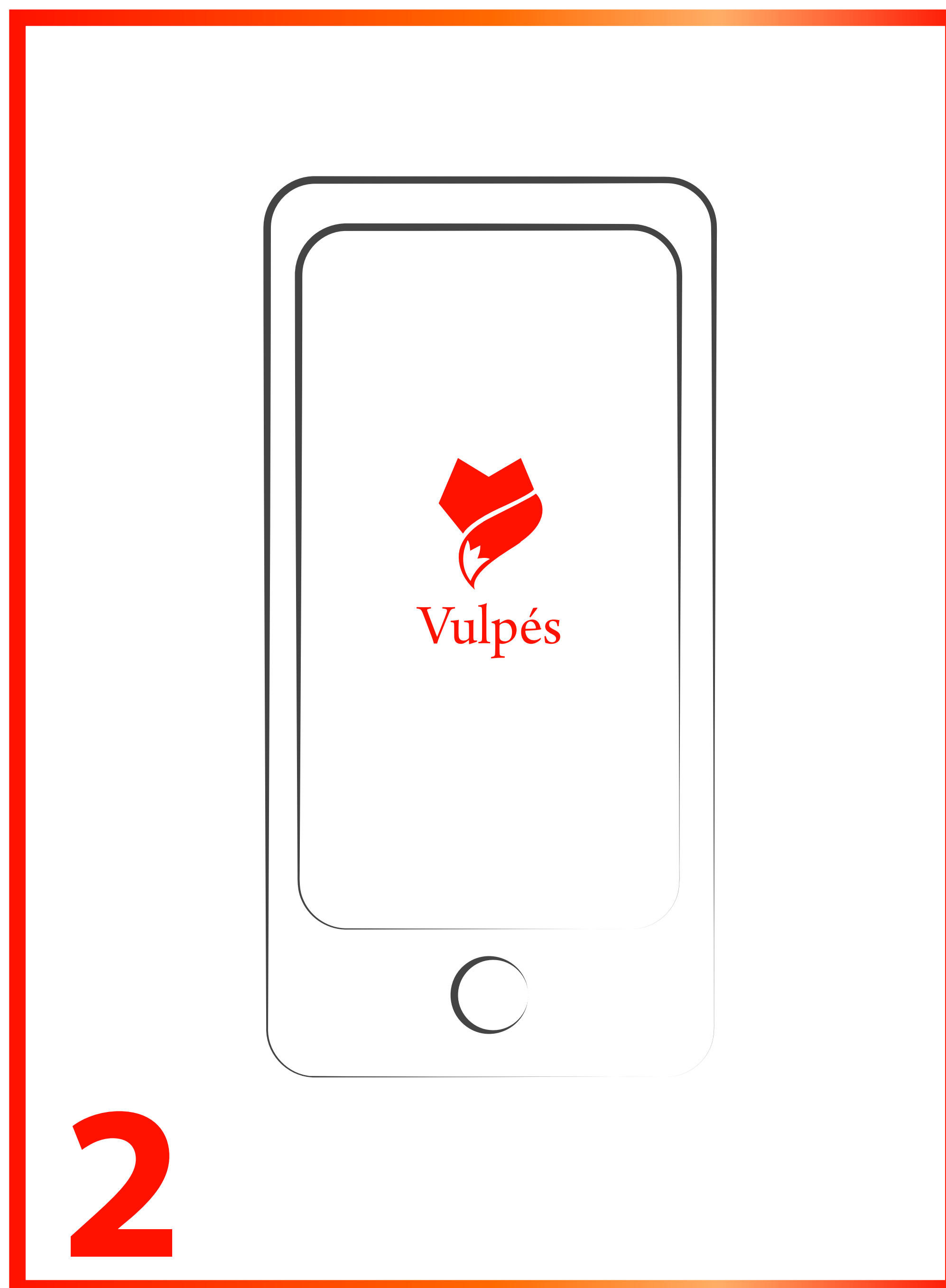

**1** Stecken Sie die 5V / 2A Powerbank oder das Verlängerungskabel in den USB-Stecker, der in der Tasche befindet.

**Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die Powerbank eingeschaltet ist, bevor Sie das intelligente beheizte Nackenpad aktivieren. Einige Powerbanks schalten sich automatisch nach 30 Sekunden ab, falls das Nackenpad nicht aktiviert wurde.**

**2** Laden Sie die Vulpés Smartwear Mobile-App aus dem Apple App Store oder dem Google Play Store herunter und installieren Sie sie.

**3** Koppeln Sie Ihr Nackenkissen mit der mobilen Anwendung, indem Sie die Schritte in der App befolgen.


**Hinweis: Sie haben die Möglichkeit, die Heizeinstellungen über 3. Smartphone, 4. Knopf zu steuern.**

**4** Drücken Sie den Controller, um die Heizeinstellungen zu aktivieren. Drücken Sie die Controller-Taste, um den gewünschten Heizzustand für **niedrig (gelb), mittel (orange) und hoch (rot) einzustellen.**




# VERWENDUNG

# PRODUKT

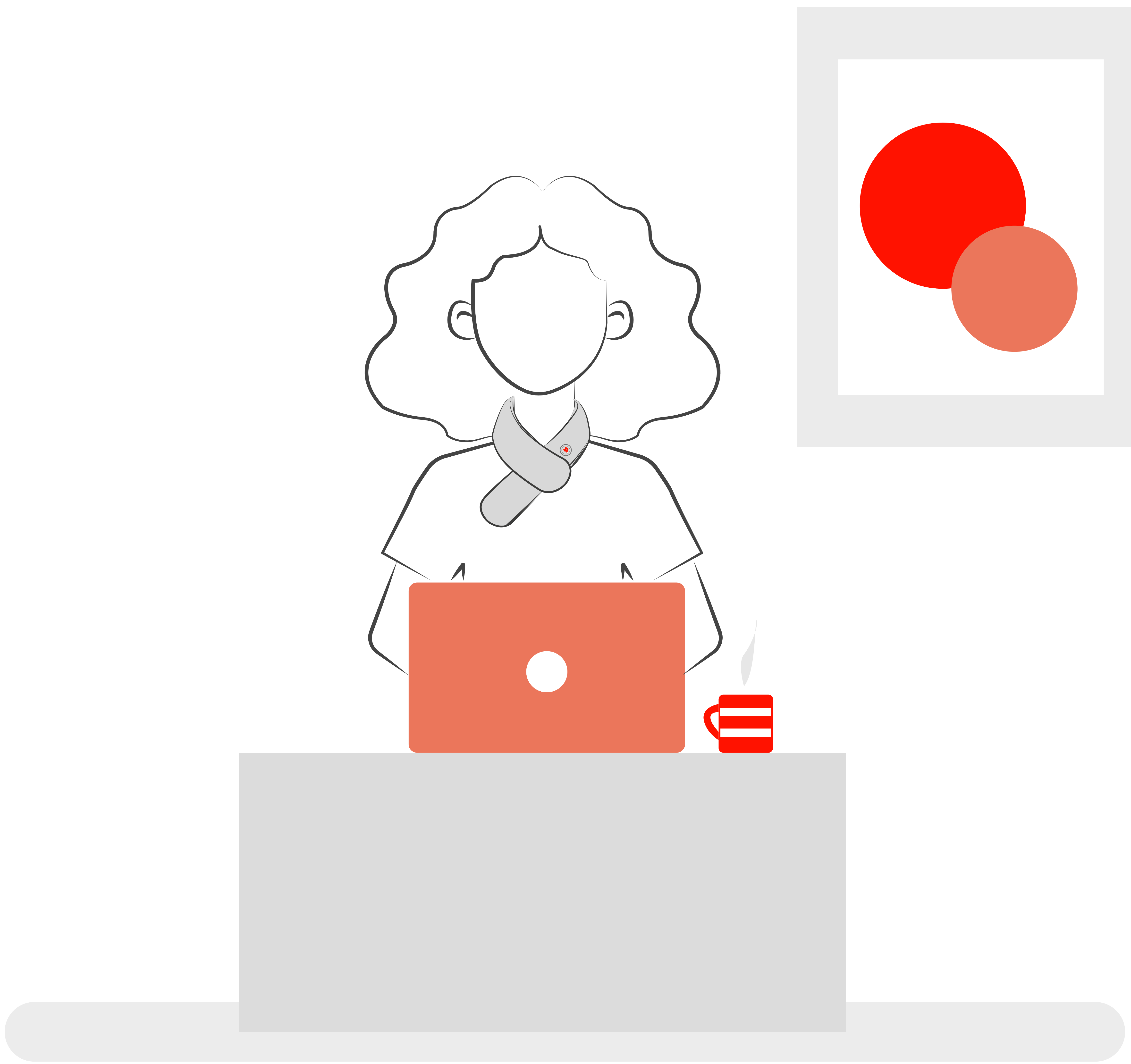

Das Vulpés Intelligentes Beheizbares Nackenkissen kann bei der Arbeit verwendet werden


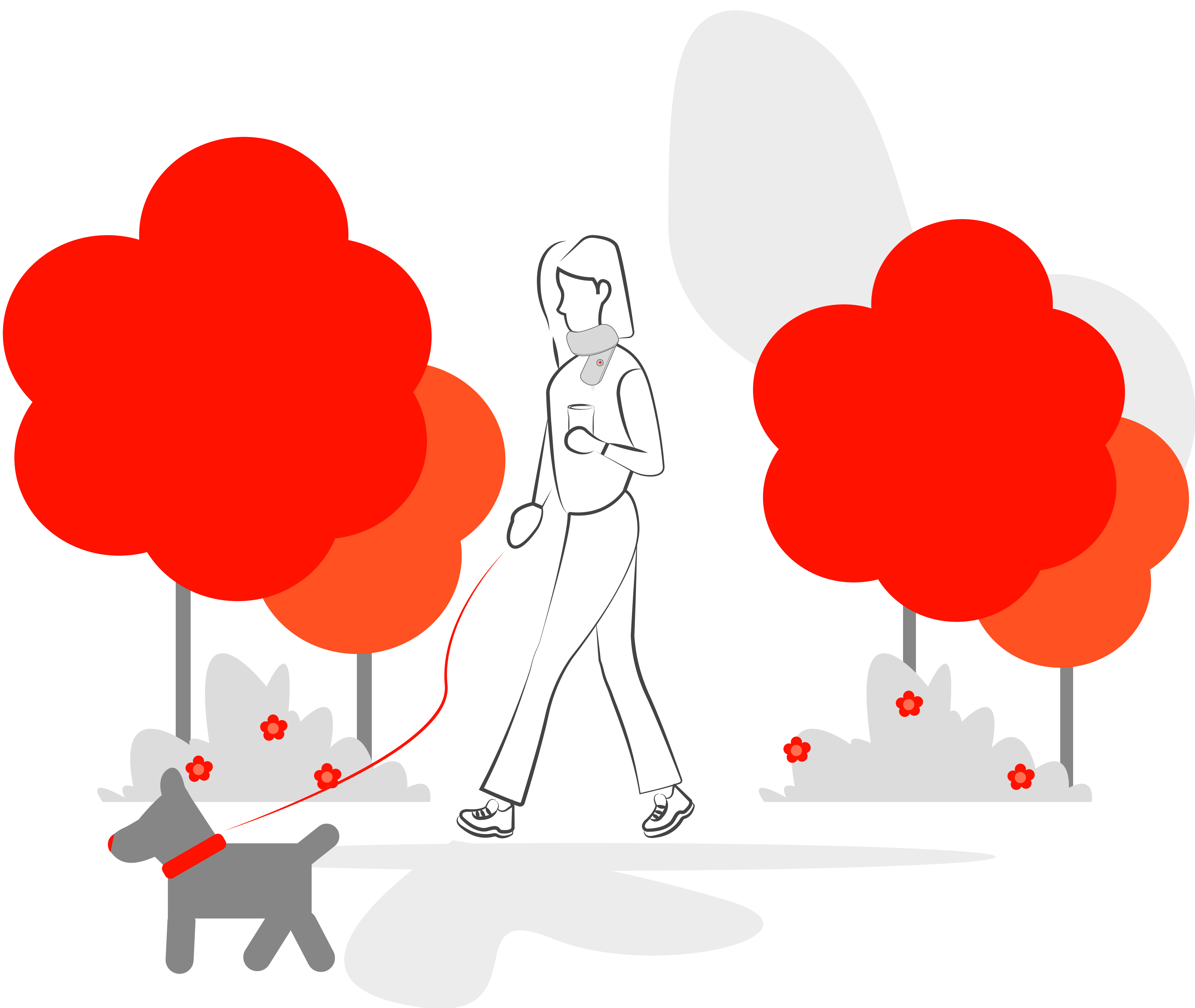


Dank der PowerBank kann das Intelligentes Beheizbares Nackenkissen auch unterwegs verwendet werden



# VERWENDUNG


# POWER BANK

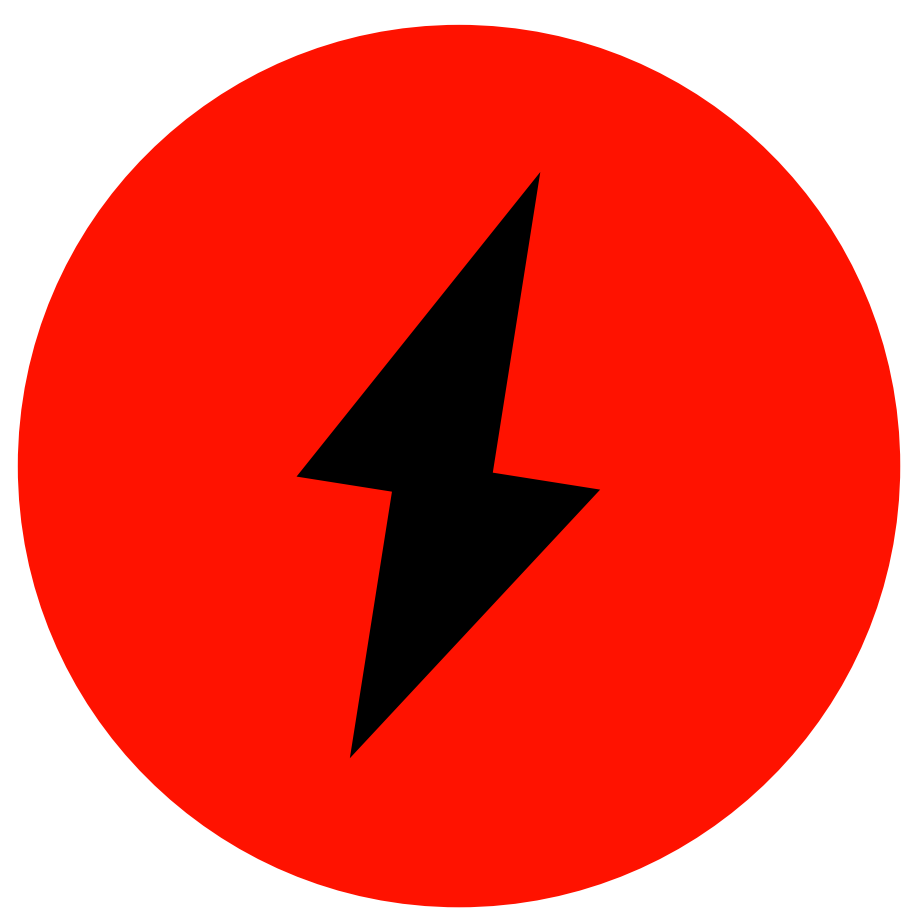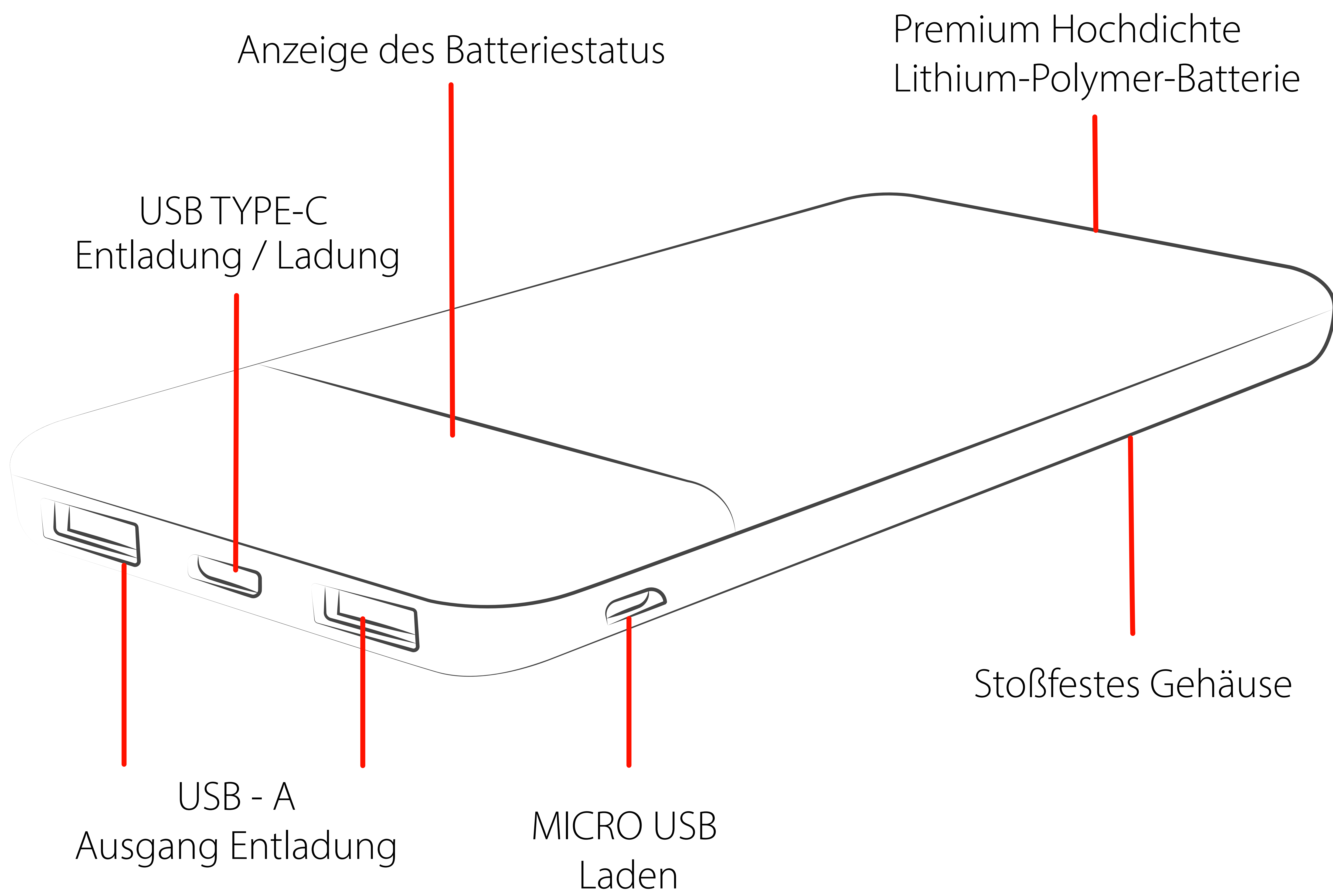


Anzeige des Batteriestatus



Leichtgewicht

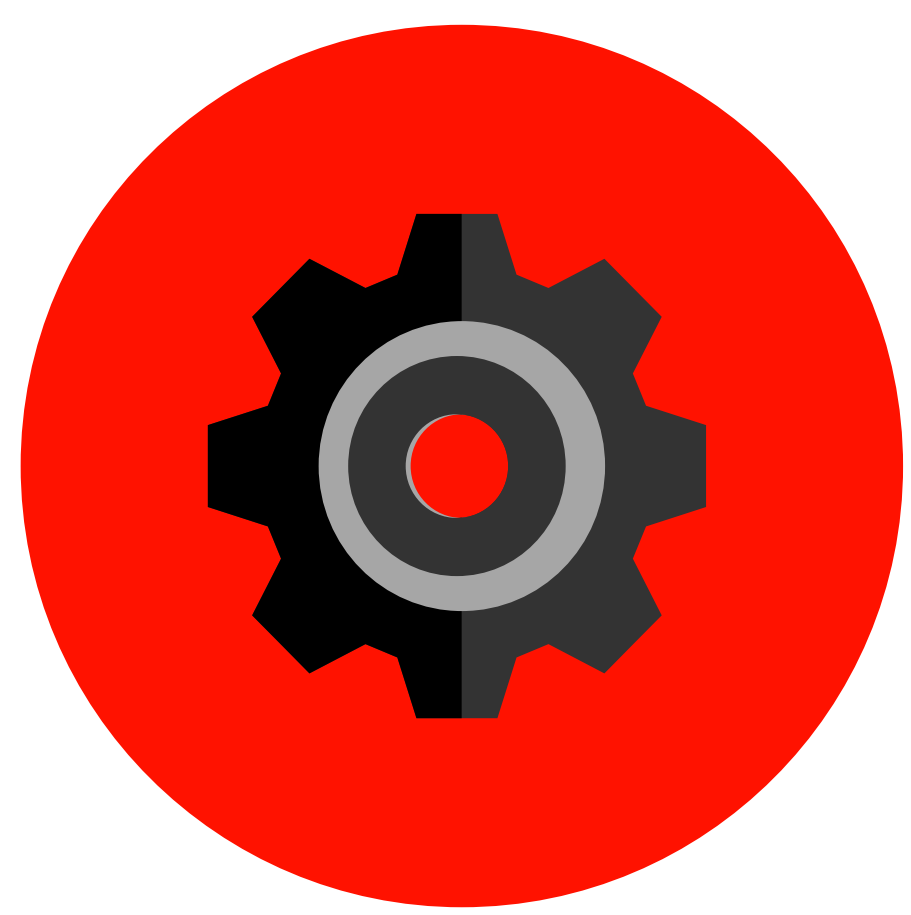


Hochwirksam

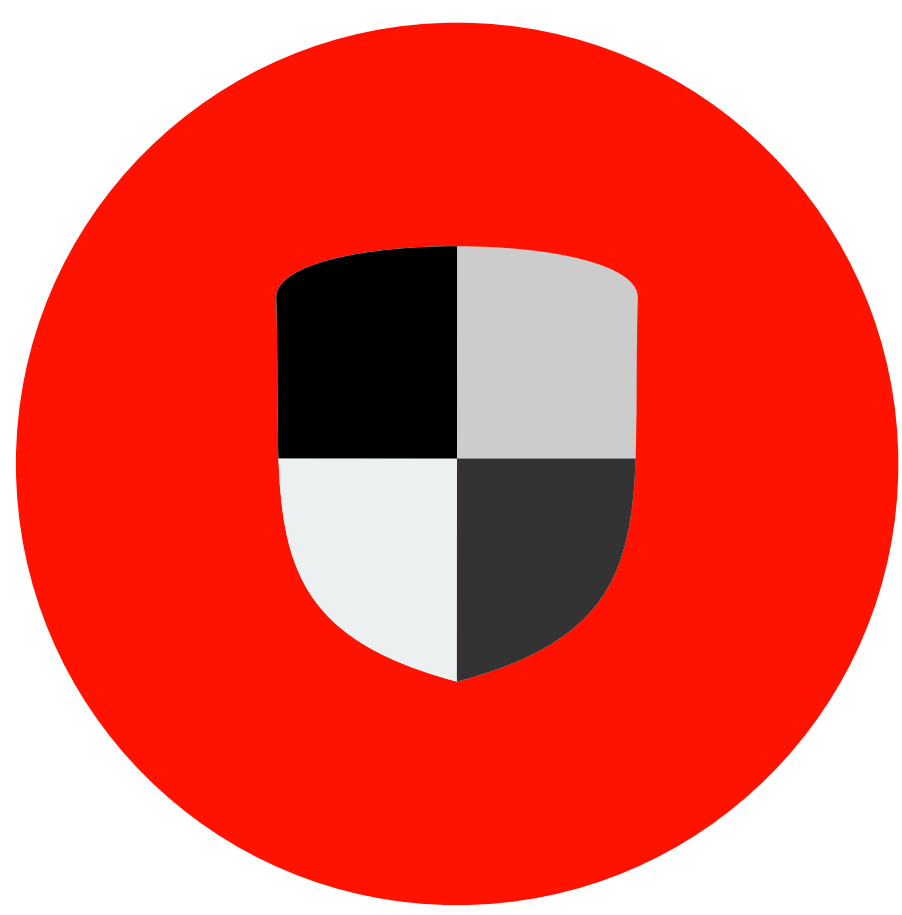

Hohe Sicherheit




Lithium-Polymer Akku

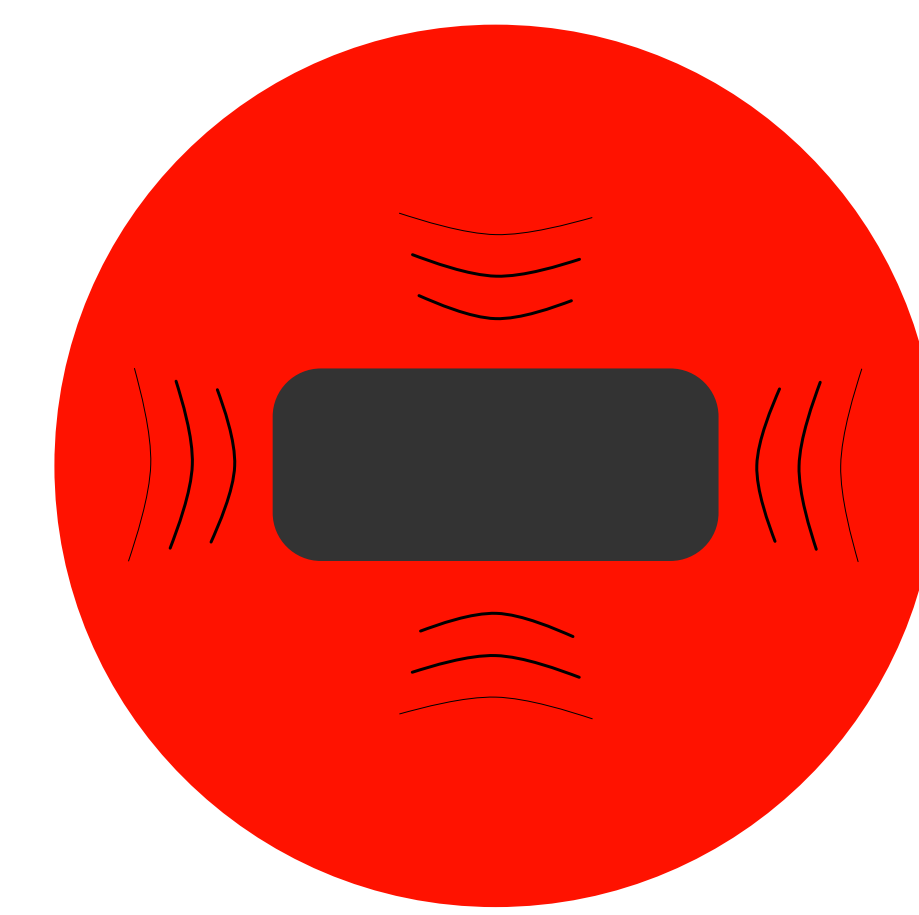


Stoßfest


## SICHERHEITSFUNKTIONEN

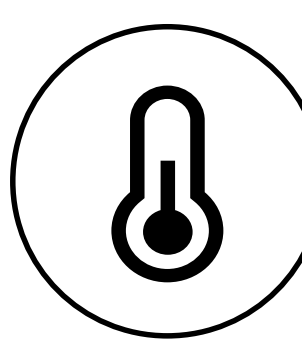


Temperaturschutz

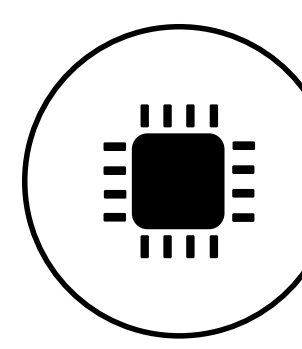


Überlast- und Kurzschlusschutz

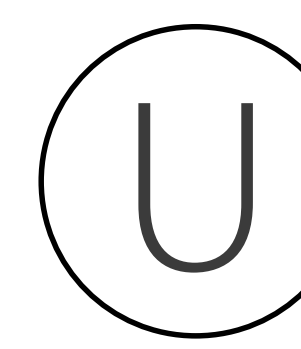


Eingangsspannungsschutz

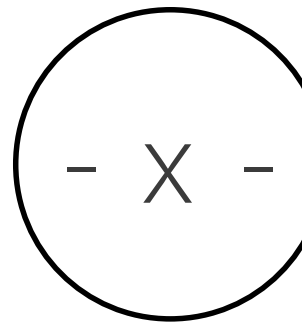


Kurzschlusschutz

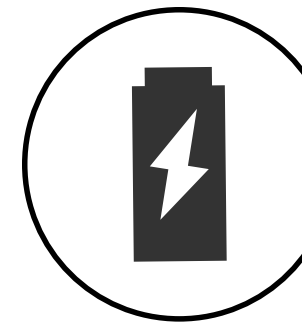


Überladungs- und Tiefentladungsschutz

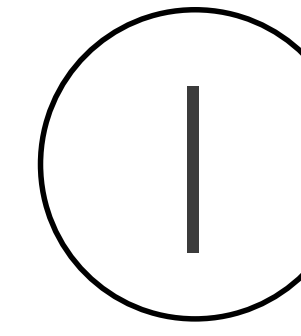


Ausgangsstromschutz

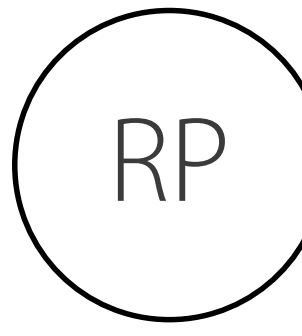

Rückschutz

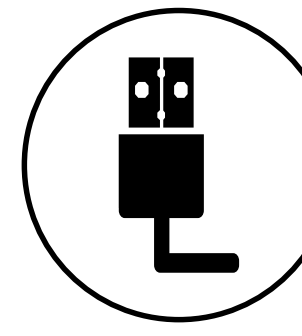

Eingangsverpolschutz

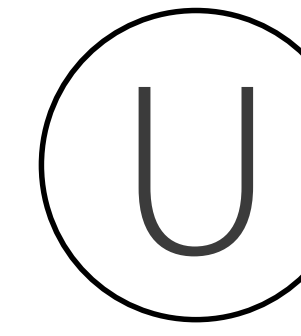

Ausgangsspannungsschutz

## SPEZIFIKATIONEN

Batterietyp	Lithium-Polymer	Eingang	Micro USB	DC 5.0V / 2.0	A
			USB Type C	DC 5.0V / 2.4	A
Kapazität	5000 mAh	Ausgang	USB Type A	DC 5.0V / 3	A
			USB Type C	DC 5.0V / 2.4	A
Nettogewicht	110 g	Maße	100 x 63.3 x 13.5 mm		

**Das Produkt darf nicht von Personen mit verminderter Hitzeempfindlichkeit oder von Personen, die verletzungsanfällig sein könnten, verwendet werden.**

(z. B. Diabetiker, Personen mit krankheitsbedingten Hautveränderungen oder Personen mit vernarbter Haut in dem Bereich, auf den das Pad aufgelegt werden soll, nach der Einnahme jeglicher schmerzlindernder Medikamente oder Alkohol)

**Dieses Produkt ist kein "medizinisches Produkt". Es verspricht keine Heilung von Krankheiten oder Beschwerden. Bitte kontaktieren Sie medizinisches Personal für medizinische Beratung oder Behandlungsoptionen.**

**Personen, die Unbehagen beim Tragen des Vulpés Nackenpads verspüren, müssen das Nackenpad sofort abnehmen und vor der weiteren Verwendung ärztlichen Rat einholen**

**Personen mit Hautallergien gegen synthetische, gummi-oder kunststoffhaltige Materialien, die im Nackenpad vorkommen können, sollten ihre Haut bei jedem Tragen des Nackenpads sorgfältig beobachten. Sollte es zu Hautreizungen kommen, setzen Sie das Tragen des Gurtes sofort ab und suchen Sie medizinischen Rat.**




**Reinigung:** Bitte schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und entfernen Sie die Powerbank aus der Tasche. Bitte reinigen Sie das Gerät nur von Hand. Bevor Sie das thermische System erneut verwenden, muss es vollständig getrocknet sein. Bitte vermeiden Sie während des Trocknungsprozesses jeglichen Kontakt mit Heizkörpern.

Bitte verhindern Sie während des Betriebs jeglichen allgemeinen Kontakt mit Wasser



**Kinder: Warnung!** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie Kinder nicht mit Geräten oder Zubehör spielen.

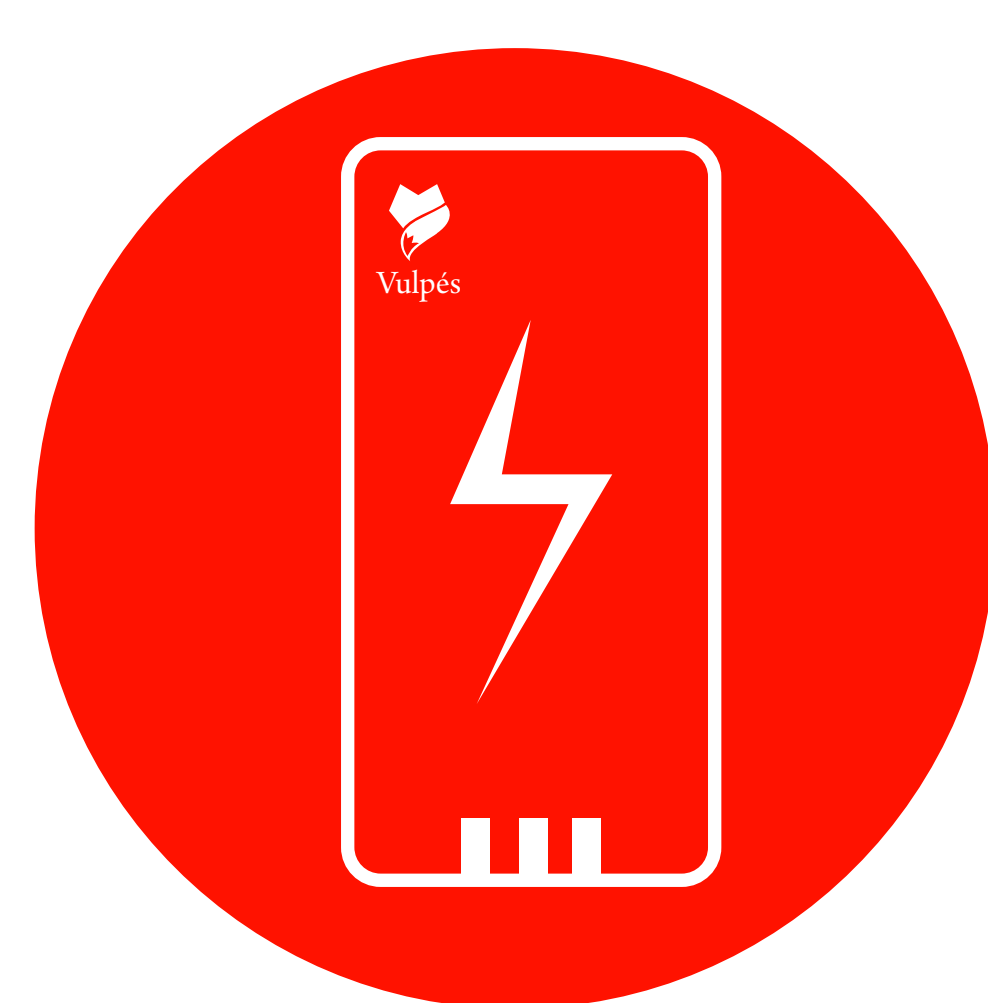

**Power Bank:** Bitte verwenden Sie immer den **5V/2A Powerbank** - Ausgangsport. Durch die Verwendung von Ausgängen mit höherer Spannung beschädigen Sie das Steuersystem dauerhaft.

**Beschreibung, Funktion und beabsichtigte Verwendung der Vulpés Powerbank:**

Das Produkt ist zum Laden oder Betreiben von mobilen Geräten und Vulpés-spezifischen Produkten mit 5 V Gleichstrom konzipiert. Die Powerbank ist mit einem integrierten Lithium-Polymer-Akku ausgestattet, der als Energiespeicher dient.

Wir empfehlen die Verwendung von Vulpés Powerbanks oder Powerbanks von Markenherstellern. **Bitte überprüfen Sie sorgfältig die Anweisungen von Drittanbieter-Powerbanks, bevor Sie sie in Verbindung mit dem Vulpés Nackenpad verwenden.**

**WICHTIG**

**Hinweis: Bei Problemen mit dem Produkt kontaktieren Sie bitte das Vulpés-Team oder Ihren lokalen Vertriebspartner.**



**Wartung und Pflege:** Im Falle einer Fehlfunktion lassen Sie bitte einen Fachmann die Wartungs- und Reparaturarbeiten durchführen. Verwenden Sie bitte nur ein trockenes und weiches Tuch zur Reinigung. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel und Chemikalien.



**Sicherheitshinweise - Bitte beachten Sie folgende Aspekte nicht:**

**Verändern Sie nicht das Produkt, Produktteile oder Zubehör.**

**Öffnen Sie nicht das Gehäuse.**

**Vermeiden Sie extreme Bedingungen, wie starke Hitze, direktes Sonnenlicht sowie Mikrowellen, Vibrationen und mechanischen Druck.**

**Werfen Sie es nicht ins Feuer.**

**Lassen Sie das Produkt NIE unbeaufsichtigt, wenn es in Gebrauch ist!**

**Verursachen Sie keinen Kurzschluss an Anschlüssen und Schaltkreisen.**


**Entsorgen Sie ausgelaufene, verformte oder korrodierte Produkte mit geeigneten Schutzmaßnahmen.**

**Verwenden Sie es nicht in explosiver Umgebung.**

**Wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, laden Sie es alle 3 Monate, um die Kapazität zu erhalten.**



**Materialschäden durch unsachgemäßen Gebrauch:** Vergleichen Sie die Spezifikationen von Produkt, Stromversorgung und Peripheriegeräten. Diese müssen identisch sein. Verwenden Sie das Produkt, Produktteile und Zubehör nur in einwandfreiem Zustand.

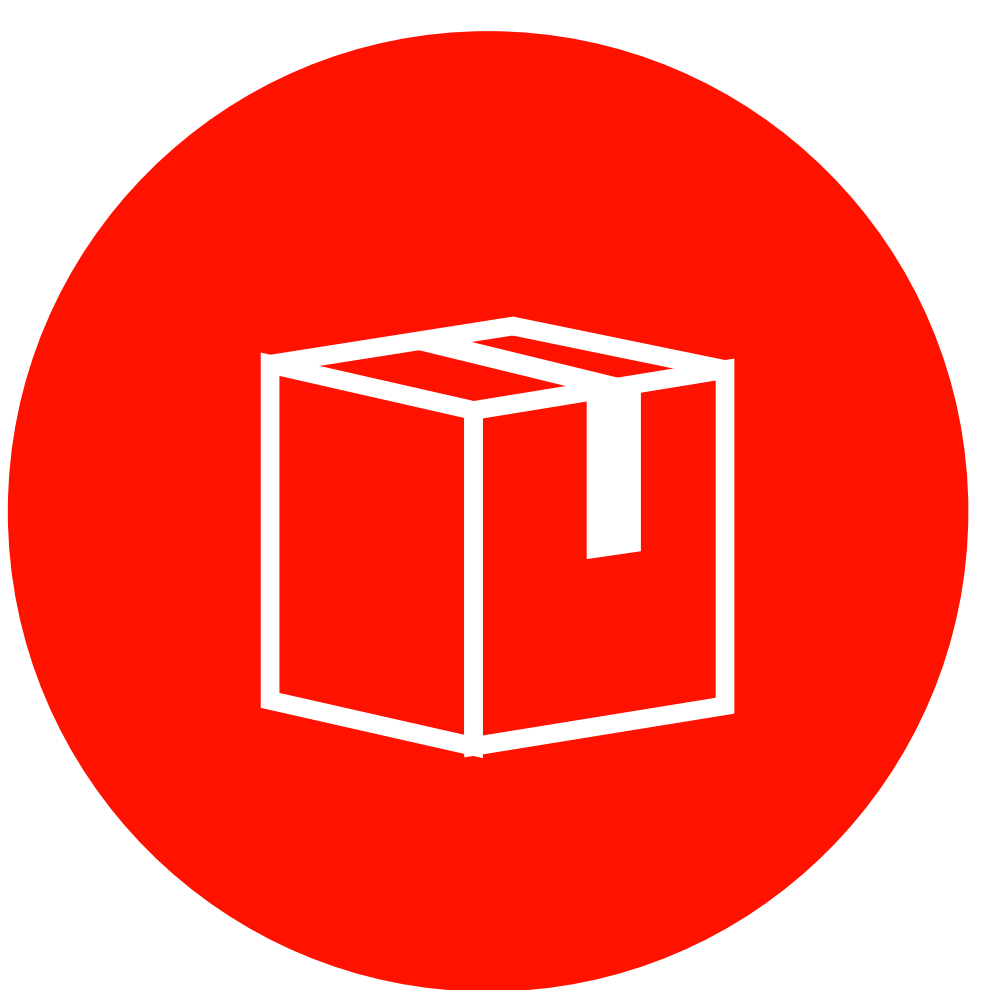

**Lagerung:** Bitte gehen Sie sorgfältig mit dem Gerät um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf. **Setzen Sie es bitte keiner Flamme aus, lassen Sie es nicht fallen, werfen Sie es nicht und versuchen Sie nicht, das Produkt zu biegen oder zu schneiden.**

**Bitte versuchen Sie nicht, das elektrische Nackenkissen oder -Komponente zu reparieren. Dies würde die Garantie aufheben und kann zu Temperaturkontrollstörungen führen, die leichte bis schwere Verbrennungen verursachen können.**

**Bitte schneiden oder verändern Sie das Produkt nicht. Dies wird die Garantie aufheben und kann die Funktion des Produkts beeinträchtigen.**

Bitte schneiden Sie das Nackenpad nicht und halten Sie es fern von scharfen Gegenständen. Ein Schnitt im Nackenpad kann das Produkt beschädigen. Falls das Nackenpad versehentlich geschnitten wurde, entfernen Sie bitte das Produkt vom Körper und verwenden Sie es nicht erneut.

# WICHTIG



**Ausschalten:** Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn es über Nacht getragen wird, und schalten Sie es aus, bevor Sie einschlafen.


Benutzer sollten sich bewusst sein, dass verschiedene Umweltbedingungen, einschließlich hoher oder niedriger Temperaturen, die Eigenschaften des Nackenpad verändern und sowohl die Leistung als auch die Akkulaufzeit verringern können.

Bitte aktivieren Sie die Powerbank und das Vulpés Nackenpad nicht im gefrorenen Zustand.



**Recycling:** Gemäß der europäischen WEEE-Richtlinie dürfen elektrische und elektronische Geräte nicht mit dem Verbraucherabfall entsorgt werden. Ihre Komponenten müssen recycelt oder getrennt voneinander entsorgt werden. Andernfalls können Schadstoffe und gefährliche Substanzen unsere Umwelt verschmutzen. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer kostenlos an den Hersteller, den Händler oder öffentliche Sammelstellen zu entsorgen. Einzelheiten werden durch nationales Recht geregelt. Das Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung verweist auf diese Bedingungen. Mit dieser Art der Abfalltrennung, Anwendung und Entsorgung gebrauchter Geräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

**WEEE No. 28527803**

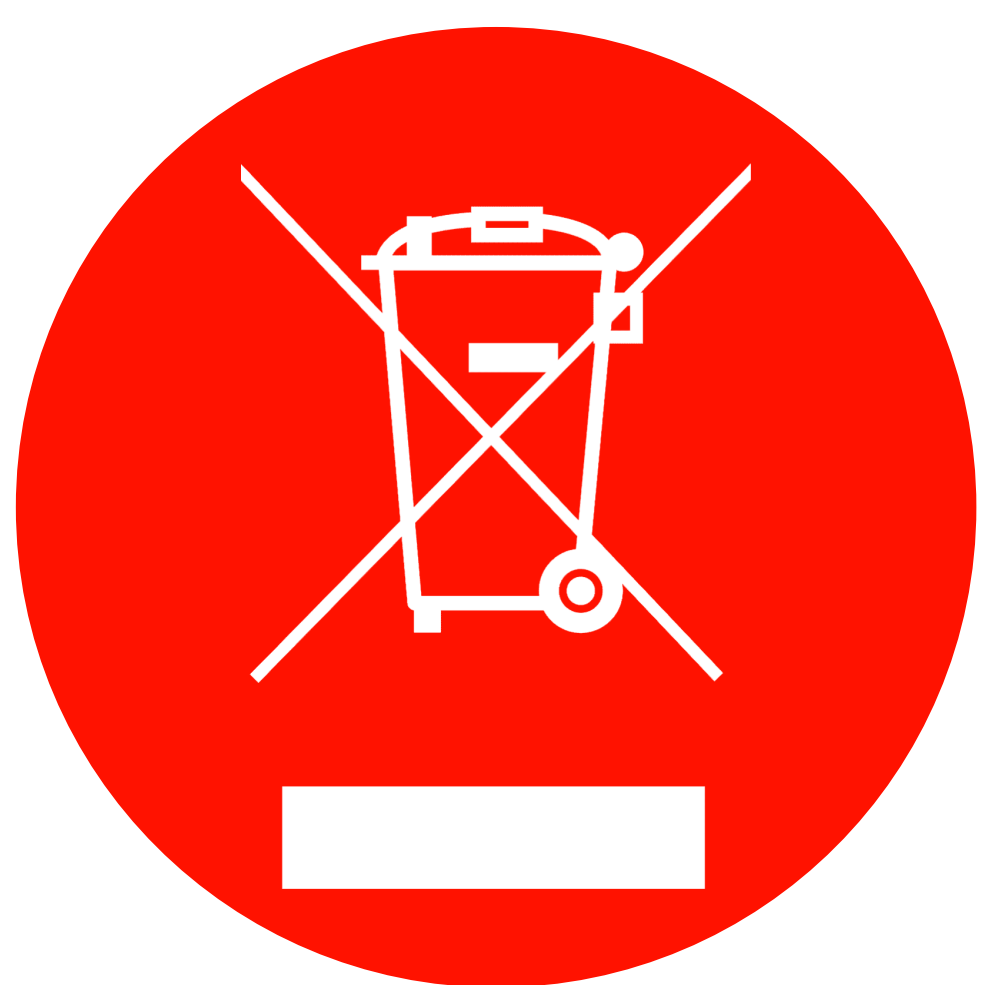

**Unsere Garantie:** Unter den Bedingungen dieser beschränkten Garantie garantiert Vulpés, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des ursprünglichen Kaufs durch einen Verbraucher frei von Mängeln in Design, Material und Verarbeitung ist. Diese beschränkte Garantie gilt für die Dauer von einem (1) Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum des Produkts.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund des physio-chemischen Zustands der Lithium-Polymer-Technologie die Akkulaufzeit nach einer bestimmten Nutzungsdauer abnehmen kann. Eine höhere Nutzungshäufigkeit beschleunigt den Akkuverschleißprozess. **Für die Powerbank bietet Vulpés keine Unternehmensgarantie.**

Für weitere Einzelheiten besuchen Sie bitte die Vulpés-Website <https://www.vulpes-smartwear.com>