

トリア・ビューティお客様サポートセンター
info@tribeauty.co.jp
tribeauty.co.jp

tria.

トリア・スキン エイジングケアレーザーの使用上の警告及び注意などの詳細は取扱説明書をお読みください。

©2016 Tria Beauty, Inc. All rights reserved.
トリア、トリア・ビューティ、およびトリアのロゴは、Tria Beauty, Inc. の登録商標です。
特許によって保護されています。詳しくはtribeauty.com/legalからご確認ください。

11342D



ご使用のポイント

鏡を見ながらお手入れしましょう

初めの数回は鏡を見ながらトリートメントしましょう。
本体を肌にぴったりと当てて動かし続けると、
紫色の接触ランプが点灯します。

より良い効果を実感するためにトリートメントレベルを上げてみましょう

トリートメント中に一時的にヒリヒリ感や、熱を感じる場合があります。
これは正常なことで数分で落ち着きます。肌がスキン エイジングケアレー
ザーに慣れるため低いレベルから使用し始めてください。その後「中」、
それから「高」というように、徐々にレベルを上げていくと、
より高い効果が期待できます。

トリートメントは必ず夜にしましょう

お休み前にトリートメントすると、万が一、一時的な
赤みが出た場合も寝ている間に落ち着く時間を与える
ことができます。

日焼け止めを塗りましょう

スキン エイジングケアレーザーご使用中は毎朝、
UV効果が高く、肌に合った日焼け止めを必ず
お使いください。お昼の間にも重ねて塗ることを
お勧めします。




tria.

SKIN AGING CARE LASER

クイックスタートガイド

トリア・スキン エイジングケアレーザーについて 知っておきましょう

スキン エイジングケアレーザー

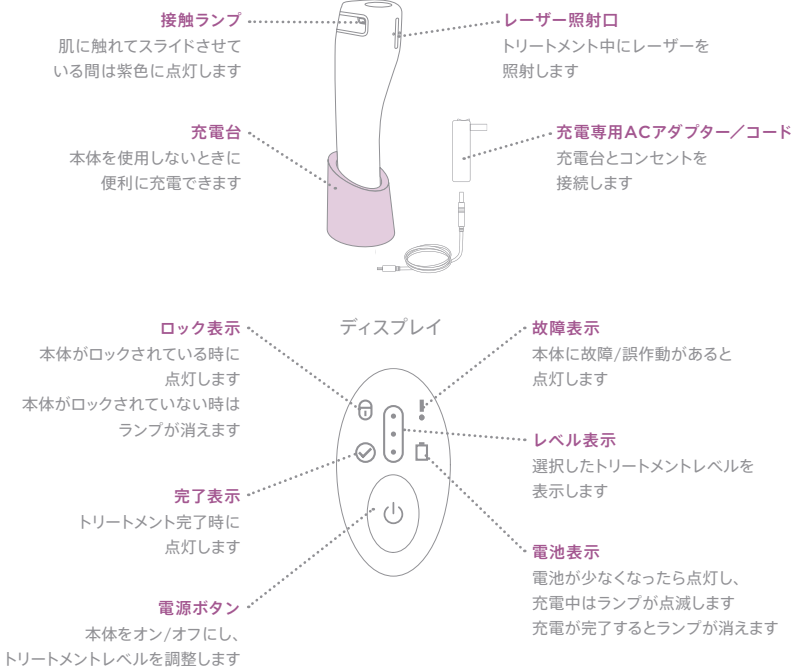

初めてご使用になる前に

使用方法と警告の詳細は、同封の『取扱説明書』をお読みください。

充電する: トリア・スキン エイジングケアレーザーが完全に充電され、電池表示が消えるまで充電してください。(2時間半以上) 製品到着時にはフル充電された状態です。初めての使用の際に、追加充電が必要ありません。

お手入れ方法

お手入れの前に顔をきれいに洗って水分が残らないように拭きます。トリア・スキン エイジングケアレーザーを使用した後にローションとセラムをご使用になりますと、肌を整えるのに役立ちます。


1 電源を入れる

充電台からトリア・スキン エイジングケアレーザーをはずし、電源ボタンを押して電源を入れます。本体がロックされていないか(ロック表示が消えているか)をご確認ください。



2 トリートメントレベルを設定する


電源ボタンからトリートメントレベル(低、中、高)を選びます。トリア・スキン エイジングケアレーザーは最後にご使用になったトリートメントレベルを記憶しています。

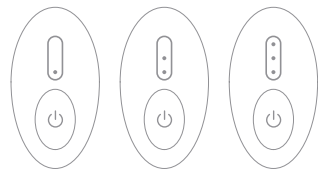

⚠ トリア・スキン エイジングケアレーザーを目、まぶた、眼窩内にはご使用にならないでください。目に重度の損傷を起こす恐れがあります。目の周りのトリートメントは、皮膚の下に骨が感じられる箇所のみを使ってください。

3 トリートメントを始める


- 図のように顔を4つのゾーンに分けます。顔のゾーン1からレーザーの照射口全体がお肌にぴったり当たるようにして、まんべんなく左右にゆっくりとすべらせるようにスライドさせます。
- 各ゾーンのトリートメントをするには紫色の接触ランプが点灯し続けるように、本体を肌にしっかりと当て、一箇所に留まることなく動かし続けます。
- 本体がピッと音を出すと次のゾーンに移ります。4ゾーン全部をトリートメントし終わると、スイッチが自動的に切れます。

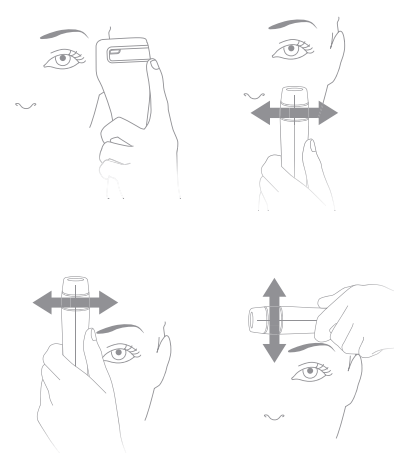

より良い効果を実感するためにレベルを上げましょう
お肌がトリア・スキン エイジングケアレーザーによる反応に慣れた後は、最高の効果を実感するため、徐々にレベルを上げてください。

ゾーンごとのトリートメント

トリートメントゾーン

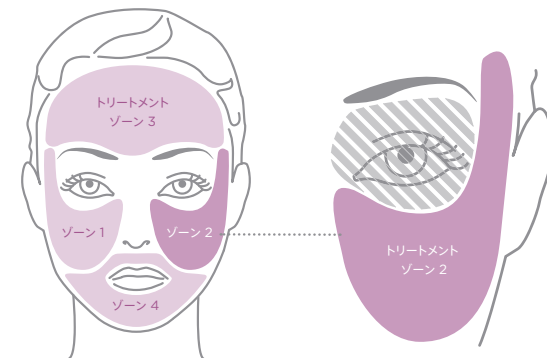

レベル別所要時間

低	1ゾーンあたり約30秒
中	1ゾーンあたり約1分
高	1ゾーンあたり約2分30秒

トリートメントレベル

