


STARKFELD® STARKGUN MINI

STARKFELD -110% or nothing

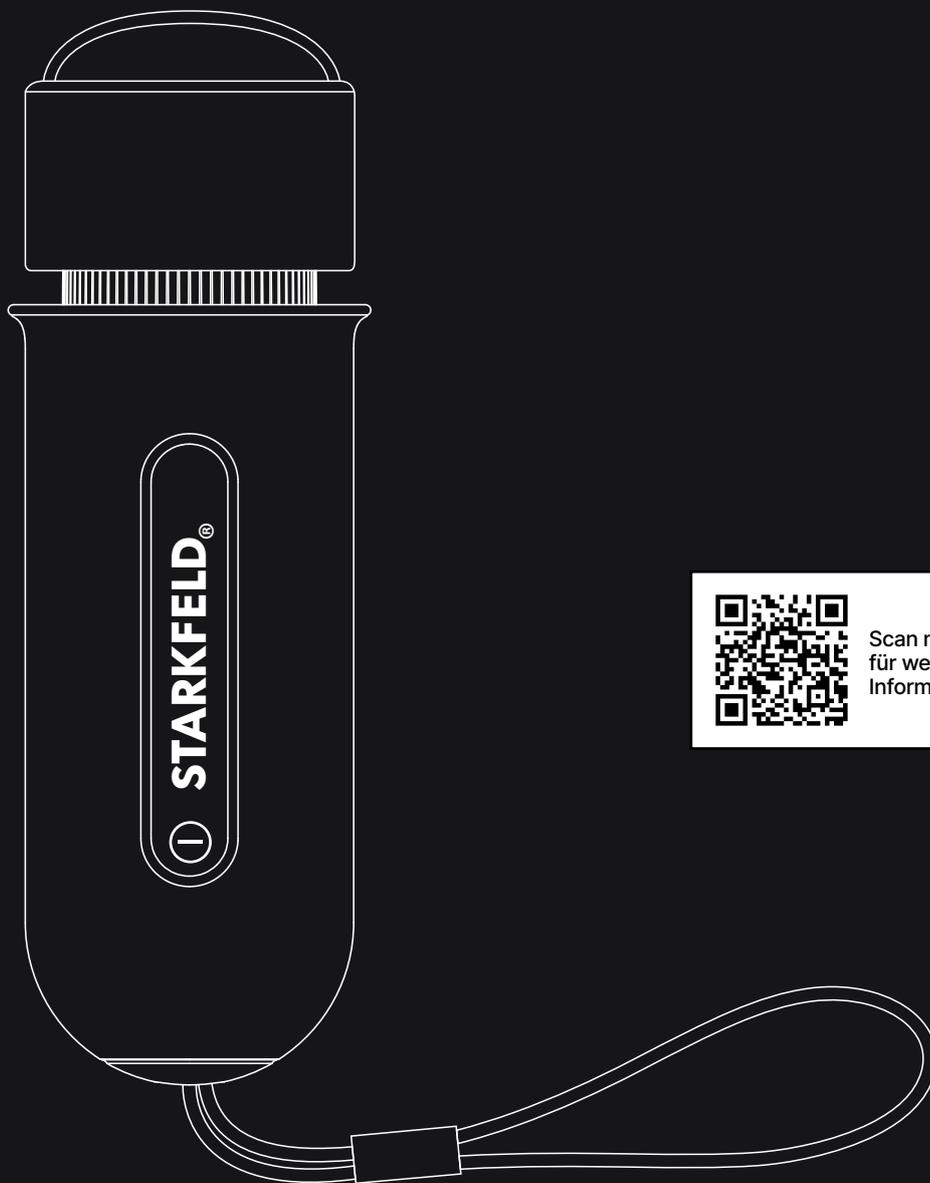

Scan mich
für weitere
Informationen.

Model No. : SF-004

STARKFELD

Als innovatives Startup verbinden wir deutsche Ingenieurskunst mit modernster Recovery- und Fitness-Technologie. Unser Ziel: Menschen zu helfen, ihre Gesundheit und Regeneration auf ein neues Level zu bringen – für ein Leben voller Energie und Leistungsfähigkeit.

STARKFELD – 110% or nothing!

INHALT

STARKFELD - - - - -	01
STARKGUN MINI - - - - -	02
Produktübersicht - - - - -	03
Anwendung - - - - -	04
Wichtige Hinweise - - - - -	05
Parametertabelle - - - - -	06
STARCSURANCE® - Zufriedenheitsgarantie - - - - -	07
Rechtliche Hinweise - - - - -	08
Entsorgung - - - - -	09
Disclaimer - - - - -	10

STARKGUN MINI


Vielen Dank, dass Sie sich für die Starkgun Mini entschieden haben. Dieses innovative Gerät kombiniert Leistungsfähigkeit mit einem tragbaren Design, ideal für die Erholung Ihrer Muskeln. Mit vier austauschbaren Aufsätzen bietet die Starkgun Deluxe eine maßgeschneiderte Massage für jeden Bedarf.

Wichtige Hinweise vor der Verwendung:

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf, um jederzeit darauf zugreifen zu können.
- Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes, insbesondere bei gesundheitlichen Vorbedingungen (siehe unten).

PRODUKTÜBERSICHT

Die STARKGUN MINI ist ein fortschrittliches Gerät für myofasziale Tiefenmassage und Muskelentspannung. Dank der intensiven Hochfrequenzvibrationen hilft sie, Muskelverspannungen zu lösen, Schmerzen zu lindern und die Regeneration zu fördern. Ihr leichtes Design und die einfache Handhabung machen sie ideal für den Einsatz zu Hause, im Fitnessstudio oder unterwegs.

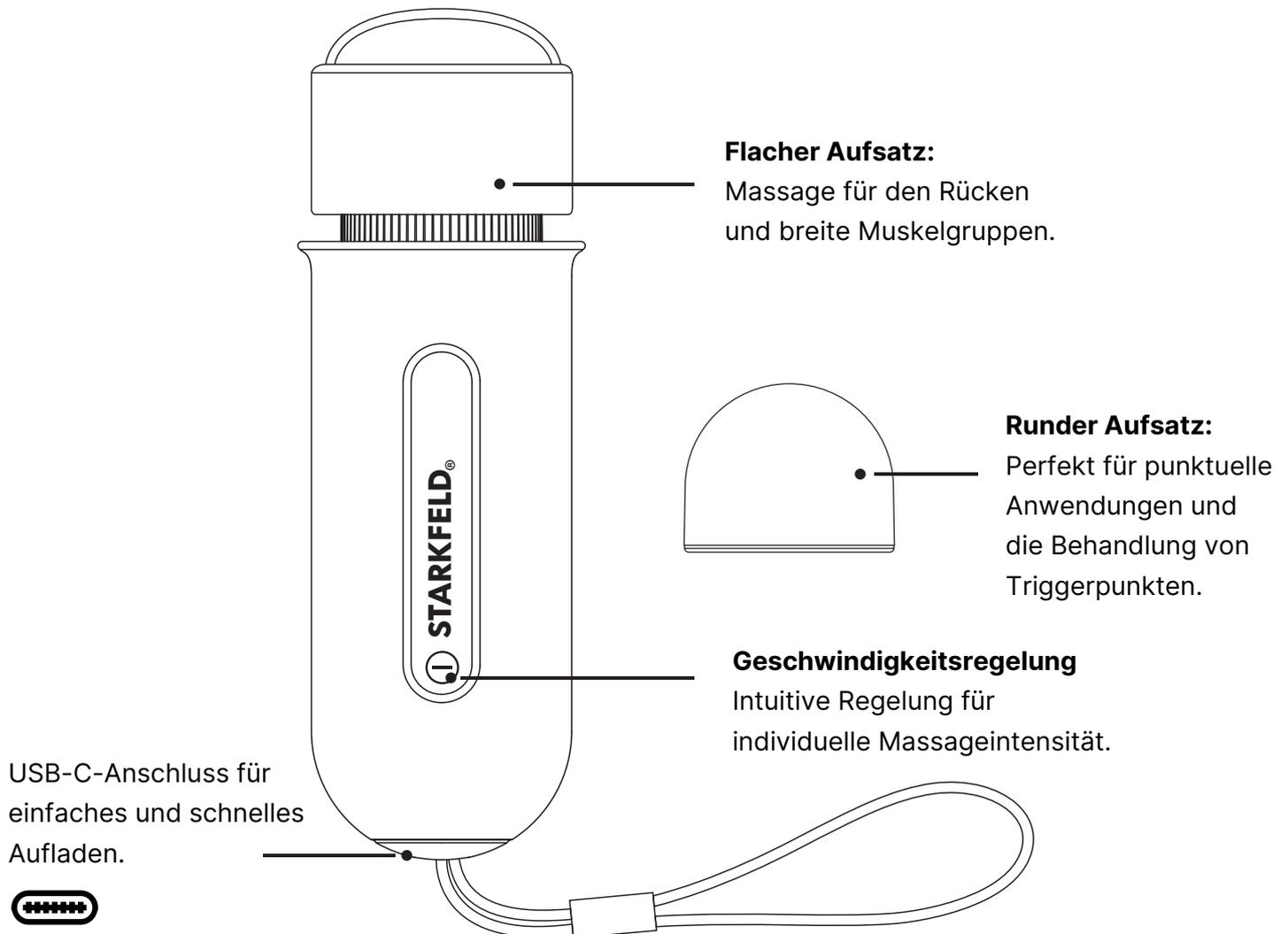

ANWENDUNG

Benutzerhandbuch

Bedienung und Batteriestatus

Aktuellen Batteriestatus anzeigen: Drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste. Blaue LED blinkt: Batteriestand unter 20 %, bitte Gerät sofort aufladen.

- Eine blaue LED leuchtet: Batteriestand 20–60 %.
- Zwei blaue LEDs leuchten: Batteriestand 60–95 %.
- Drei blaue LEDs leuchten: Batteriestand 96–100 %.

Gerät ein- und ausschalten


- Einschalten: Doppel-klicken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Massagepistole innerhalb von 3 Sekunden zu starten.
- Ausschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste für 2 Sekunden gedrückt. Das Gerät schaltet sich in jedem Zustand vollständig aus.

Geschwindigkeitsstufen einstellen

- Stufe 1: Aktivieren Sie die erste Stufe durch einmaliges Drücken der Geschwindigkeitssteuerungstaste. Eine LED leuchtet auf.
- Stufe 2: Drücken Sie die Geschwindigkeitssteuerungstaste erneut. Zwei LEDs leuchten auf.
- Stufe 3: Drücken Sie die Geschwindigkeitssteuerungstaste ein drittes Mal. Drei LEDs leuchten auf.

Hinweis: Um in den Standby-Modus zu wechseln, drücken Sie die Geschwindigkeitssteuerungstaste erneut. Nach 3 Sekunden schaltet sich das Gerät automatisch ab.

LED ANZEIGE

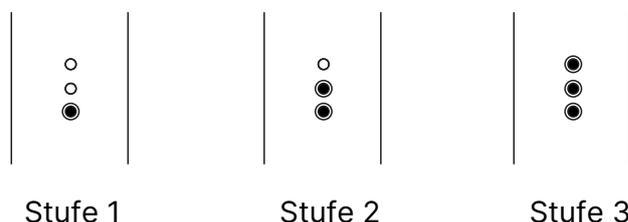

Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Taste weniger als 2 Sekunden, um den Batteriestand anzuzeigen. Alle Lichter schalten sich aus, wenn keine Taste gedrückt wird. Wenn Sie die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt halten, schaltet sich die Massagepistole ein und beginnt mit der ersten Stufe.

ANWENDUNG

Ladeanzeige

- Ladevorgang: Das Licht wechselt in folgender Reihenfolge:
- Grünes Licht → Blaues Licht → Gelbes Licht → Violette Licht → Grünes Licht bleibt dauerhaft an.
- Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet grünes Licht durchgehend.

WARTUNG

- Reinigen Sie das Gerät nach jeder Nutzung mit einem leicht feuchten Tuch und trocknen Sie es anschließend gründlich mit einem weichen Tuch.
- Lagern Sie das Gerät in der mitgelieferten tragbaren Box und bewahren Sie es fern von Feuchtigkeit und Wärmequellen auf.

WICHTIGE HINWEISE

Um das Risiko von Stromschlägen, Bränden und Verletzungen zu minimieren, befolgen Sie bitte diese Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig:

- Anwendung:Nur für Erwachsene geeignet.
- Nutzen Sie die Massagepistole ausschließlich auf trockener Haut mit leichtem Druck.
- Massieren Sie eine Stelle maximal 60 Sekunden lang. (Hinweis: Das Risiko von Hautirritationen ist geringer, wenn das Gerät über Kleidung verwendet wird.)
- Verwenden Sie die Massagepistole nur auf weichem Gewebe, nicht auf Knochen oder Gelenken.
- Sicherheit während der Nutzung:Vermeiden Sie starken Druck, da sonst Blutergüsse entstehen können. Überprüfen Sie die Haut regelmäßig während der Massage.
- Stoppen Sie die Nutzung sofort, wenn Sie Schmerzen oder Unwohlsein verspüren.
- Halten Sie Finger, Haare und andere Körperteile fern von der rotierenden Achse und den beweglichen Teilen des Massagekopfs.
- Legen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze des Geräts ein.
- Schutz vor Flüssigkeiten und Schäden:Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Geräts mit Feuchtigkeit.
- Handhabung:Lassen Sie das Gerät nicht fallen und verwenden Sie es nicht unsachgemäß.
- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, ob das Gerät und der Akku in einem ordnungsgemäßen Zustand sind.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht eigenständig. Dies führt zum Verlust der Garantie.
- Nutzung und Ladehinweise:Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde am Stück. Lassen Sie es mindestens 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.
- Laden Sie das Gerät nach der ersten Nutzung für maximal 6 Stunden vollständig auf.
- Der Akku kann bei jeder Ladestufe aufgeladen werden. Vermeiden Sie jedoch ein vollständiges Entladen.
- Wechseln Sie den Massagekopf nur, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

PARAMETERTABELLE

Produktname	Massagepistole
Produktmodell	SF-004-A6
Nennspannung	5V~
Geräteabmessungen	53 × 158 mm
Batteriekapazität	11 Wh
Gerätegewicht	0,3 kg
Leistung	10 W
Hubweg	6 mm
Ladeanschluss	Typ-C
Geschwindigkeiten	1400 U/min, 1800 U/min, 2200 U/min
Standard	GB4706.10-2008, GB4706.1-2005

STARCSURANCE® - ZUFRIEDENHEITSGARANTIE

Wir von STARKFELD möchten, dass **Sie zu 110 % mit Ihrem Kauf zufrieden sind**. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen die STARCSURANCE® Zufriedenheitsgarantie an. Sie benötigen keine separate Garantiekarte mehr – Ihre Zufriedenheit ist unser oberstes Ziel.

Unsere Garantie deckt 2 Jahre alle Schäden ab, die nicht mutwillig verursacht wurden oder durch Missachtung der Bedienungsanleitung entstanden sind. Sollten Sie ein Problem mit Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich einfach an unseren Kundenservice.

Wir garantieren, dass wir in jedem Fall eine zufriedenstellende Lösung finden, sei es durch Austausch, Rabatte oder eine vollständige Geldrückerstattung. Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind.

Kontakt:

E-Mail: kundenservice@starkfeld.com

Informationen: Geben Sie bitte Ihre Bestellnummer und eine Beschreibung des Problems an. Wir kümmern uns darum und sorgen für eine schnelle Lösung – sei es durch Reparatur, Austausch oder Erstattung.

Mit STARCSURANCE® bieten wir Ihnen Sicherheit – unkompliziert und zuverlässig. Ihre Zufriedenheit hat für uns oberste Priorität.

RECHTLICHE HINWEISE

Haftungsausschluss: STARKFELD übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung oder Missachtung der Bedienungsanleitung entstehen. Die Verwendung des Produkts erfolgt auf eigene Gefahr.

Gewährleistung: Wir bieten Ihnen die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung für alle Produkte, die Sie bei uns erwerben. Die Dauer der Gewährleistung beträgt in der Regel 2 Jahre ab Erhalt der Ware. Sie umfasst alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

STARKFELD® Markenrechte: STARKFELD® und STARKSURANCE® sind eingetragene Marken der HMD Services GmbH. Die unbefugte Verwendung dieser Marken oder der damit verbundenen Produktnamen ist verboten und kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Urheberrecht: Alle Inhalte dieser Bedienungsanleitung, einschließlich Texte, Bilder und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder Veränderung der Inhalte ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Starkfeld nicht gestattet.

Datenschutz: Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten ausschließlich gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung auf unserer Website.

Konformitätserklärung: Dieses Produkt entspricht den geltenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen gemäß den europäischen Normen und trägt das CE-Zeichen.

Entsorgung: Dieses Gerät enthält elektronische Komponenten und muss entsprechend den Vorschriften des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie das Gerät bei entsprechenden Sammelstellen oder kontaktieren Sie uns, um eine umweltgerechte Rückgabe zu ermöglichen.



ENTSORGUNG

Der **StarkGun MINI** enthält elektronische Bauteile und eine eingebaute Batterie, die recycelt werden müssen. Entsorgen Sie das Gerät bitte nicht über den Hausmüll. Gemäß dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) sowie dem Batteriegesetz (BattG) sind solche Geräte und Batterien umweltgerecht zu entsorgen.

Recycling:


Der **StarkGun MINI** enthält wertvolle Materialien, die recycelt werden können. Bitte geben Sie das Gerät bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle ab, um umweltschädliche Stoffe wie Quecksilber oder Blei sicher zu entsorgen.

Rückgabe an Sammelstellen:

Elektroschrott und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät und die enthaltenen Batterien zu kommunalen Sammelstellen (z.B. Wertstoffhöfen) oder in Geschäfte, die Elektrogeräte zurücknehmen.

Rückgabe an den Hersteller:

Sie können den **StarkGun MINI** auch direkt an den Hersteller zurücksenden, der die fachgerechte Entsorgung übernimmt.

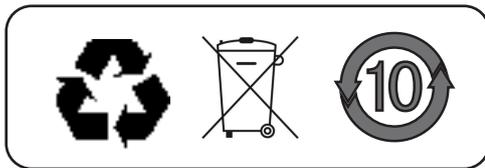

Wir freuen uns darauf, Ihnen weiterhin außergewöhnlichen Komfort und Zufriedenheit durch unseren Service zu bieten.

DISCLAIMER

Wir sind sehr bestrebt, unsere Ökobilanz kontinuierlich zu verbessern und möchten gemeinsam mit Ihnen dazu beitragen, unsere Umwelt zu schützen. Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich klimaneutral zu werden. Unterstützen Sie uns auf dieser Mission und leisten Sie Ihren Beitrag für eine nachhaltige Zukunft.



Unternehmensadresse:
HMD Services GmbH,
Landolinsteige 1/1,
73728 Esslingen am Neckar