


QR-7103

Welkom bij BarberBoss en gefeliciteerd met uw nieuwe aankoop! Zorg voor gemoedsrust door uw garantie van 12 maanden te activeren en gratis 6 maanden extra garantie te claimen op www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty. Naast et onze garantie bent u ook verzekerd van de wettelijke consumentenrechten in uw land, waardoor uw aankoop volledig beschermd is.

Productstructuur en Accessoires

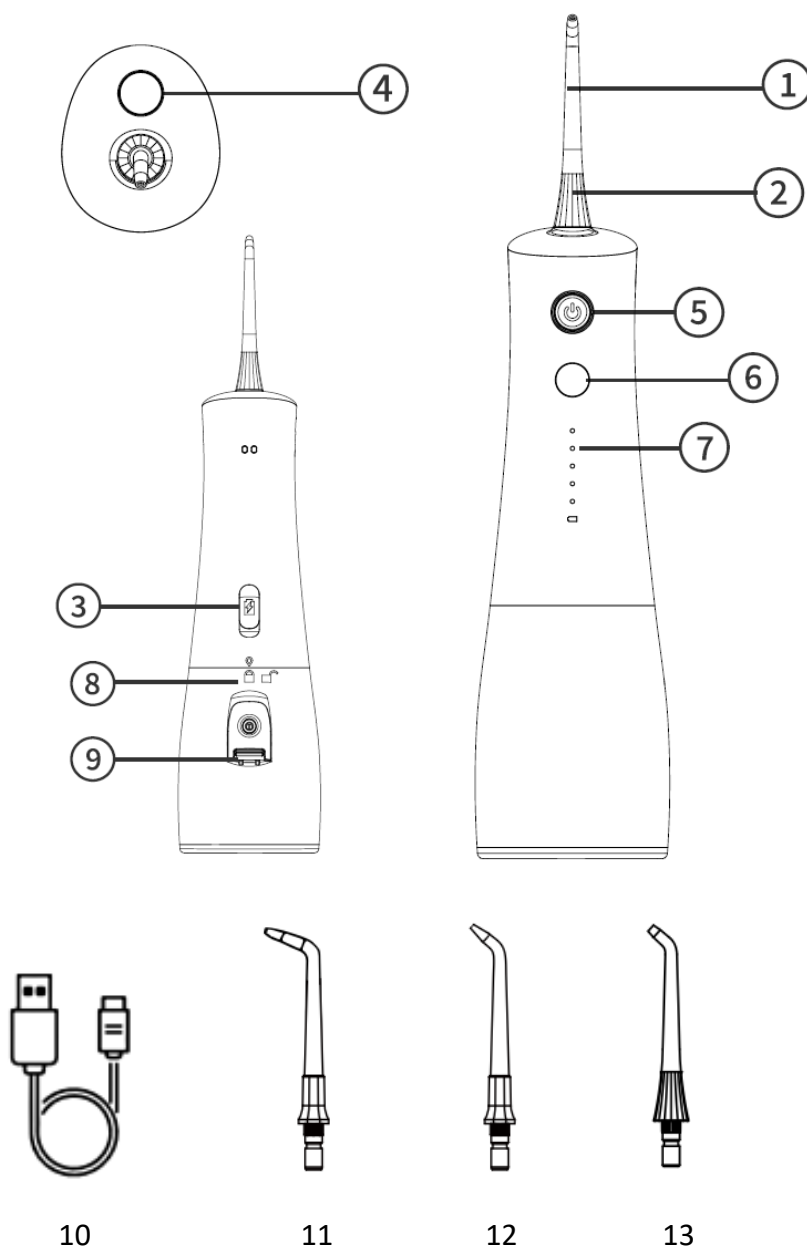

1. Mondstuk
2. Mondstuk Draaiknop
3. USB-Oplaadpoort
4. Mondstukontgrendelingsknop

5. Aan/uit-knop
6. Modusselectieknop
7. Modusindicatorlampjes
8. Watertank
9. Waterinlaat
10. USB-Oplaadkabel
11. Orthodontische Tip
12. Parodontale Tip
13. Standaard Tip

Productdetails

Productnaam	QR-7103 Orale Irrigator
Modelnummer	QR-7103
Laadingang	5V 1,0A
Watertankcapaciteit	340ml
Laadtijd	6 Uur
Gebruiksduur	Tot 60 Dagen

Wat is Inbegrepen

Waterstraalreiniger	x1
Standaard Tip	x2
Orthodontische Tip	x1
Parodontale Tip	x1
Oplaadkabel	x1

Nozzle Tips: Functie en Gebruik

Mondstuktype	Gebruik	Aanbevolen Vervangingsinterval
Standaard Tip	Ideaal voor dagelijkse reiniging en het verwijderen van voedselresten tussen tanden en tandvlees.	Elke 3 Maanden
Orthodontische Tip	Ontworpen voor reiniging rond beugels, brackets en andere orthodontische apparaten.	Elke 3 Maanden

Parodontale Tip	Reinigt voorzichtig diep onder de tandvleesrand om tandvleesaandoeningen behandelen en gezondheid verbeteren.	Elke 3 Maanden
-----------------	---	----------------


Gebruiksaanwijzing

1. Aan/Uitzetten:


- **Begin met Flossen:** Plaats de tip en druk op de aan/uit-knop om te beginnen met irrigeren. Het apparaat heeft automatische stoptimer van 2 minuten of kan handmatig worden uitgeschakeld door nogmaals op de aan/uit-knop te drukken.
- **Uitschakelen:** Druk na afloop op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.
- **Leegmaken en Leegmaken:** Giet het resterende water uit de tank en laat het apparaat 2-3 seconden draaien om het resterende water af te voeren.

2. Het Mondstuk Plaatsen en Verwijderen:

- Plaats het mondstuk in de bovenkant van de waterflosserhendel en druk stevig totdat u een klikgeluid hoort, wat bevestigt dat het goed op zijn plaats zit (Figuur 1).
- Om het mondstuk te verwijderen, drukt u op de ontgrendelingsknop van het mondstuk en trekt u het mondstuk voorzichtig eruit (Figuur 1).
- **Opmerking:**
 - Druk niet ontgrendelingsknop van mondstuk terwijl apparaat in werking is.
 - Als de mondstukkop niet direct water spuit na het inschakelen van het apparaat (met name het eerste gebruik of na lange periodes van inactiviteit), volgt u de volgende stappen: 1. Voeg een kleine hoeveelheid water toe aan het gebied waar de punt moet worden ingebracht (Figuur 2). 2. Plaats een nieuw punt en druk op de aan/uit-knop om het apparaat te activeren.

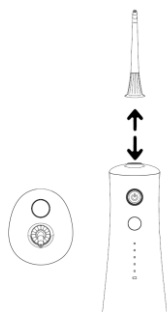

Figuur 1

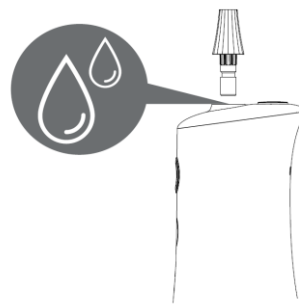


Figuur 2


3. Watertank Installeren en Vullen:

- Open de dop van de watertank, vul deze met water en sluit dop stevig (Figuur 3).
- Om de watertank los te maken of te bevestigen, draait u deze eenvoudig:
 - Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.

- Houd de watertank vast met uw linkerhand en draai het bovenste gedeelte met uw rechterhand naar rechts om los te maken.
- Om de tank weer vast te maken, draait u deze in de tegenovergestelde richting.
- **Opmerking:** Vul de tank uitsluitend met water of een door een tandarts aanbevolen oplossing.

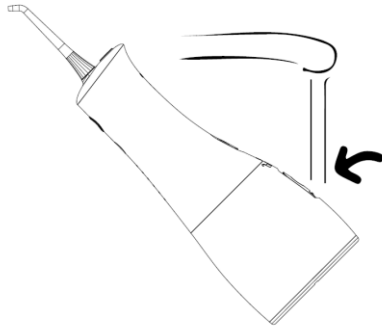

Figuur 3

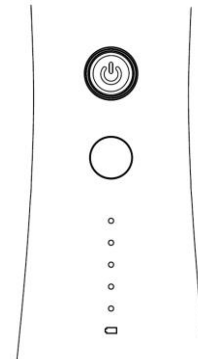

Figuur 4

4. Drukmodusinstellingen:

Deze waterflosser biedt 5 drukmodi, die eenvoudig kunnen worden aangepast door op modusselectieknop (Figuur 4) onder aan/uit-knop te drukken. De drukinstellingen zijn als volgt:

- **Zacht:** Ideaal voor beginners met een zachte waterdruk.
- **Gemiddeld:** Dagelijkse efficiënte reiniging.
- **Sterk:** Sterke waterdruk voor hardnekkige vlekken.
- **Aangepast:** Schakel over naar de aangepaste modus, zet het apparaat aan en houd de modusknop ingedrukt totdat de indicator knippert. De waterdruk neemt toe door 7 niveaus. Laat de knop los bij de gewenste instelling om deze op te slaan.
- **Straal:** Eenvoudig te gebruiken, water stroomt alleen wanneer u op de aan/uit-knop drukt.
- **Opmerking:** Controleer ingestelde modus met bijbehorende modusindicatielampje.

5. Reisvergrendeling:


Om de reisvergrendeling in of uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt totdat alle indicatielampjes één keer knipperen.

6. Hoe op te Laden:

Sluit de meegeleverde USB-kabel rechtstreeks aan op het apparaat. Sluit vervolgens de USB aan op een 5V1A USB-adapter. Het product moet worden opgeladen via een

laptop/computer/powerbank/USB-poort (Figuur 5). Na het opladen koppelt u de USB-connector los en koppelt u vervolgens de USB-connector los van het product.

- Laad het product volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt en na een lange periode van niet-gebruik.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het oplaadt.
- Het ledlampje gaat branden om te bevestigen dat het opladen is gestart.
- Een volledige lading duurt ongeveer 6 uur, wat tot 60 dagen gebruik oplevert. Voor optimale prestaties is het beste om het apparaat te gebruiken wanneer het volledig is opgeladen.

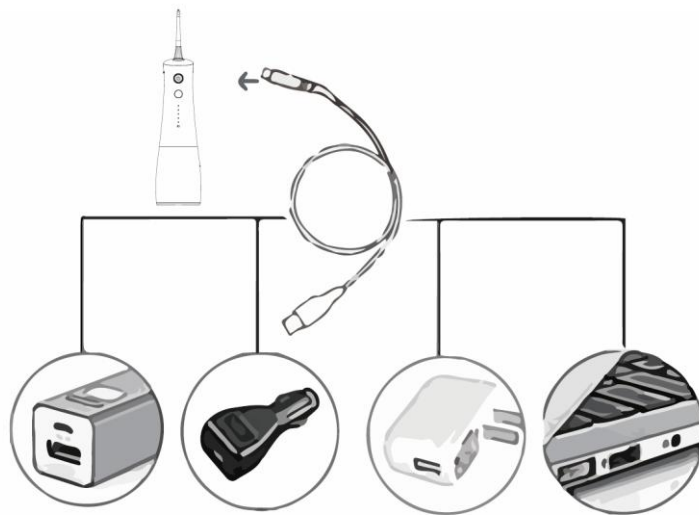

Figuur 5

Reiniging en Onderhoud

Let op: Hoewel dit apparaat waterbestendig is (IPX8-classificatie), mag u het niet langer dan de aangegeven diepte en duur onderdompelen in water of een andere vloeistof. Om optimale prestaties en een lange levensduur te behouden, moet u ervoor zorgen dat het product is schoongemaakt en grondig is gedroogd voordat u het weer gebruikt.

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van de oplaadkabels voordat u het reinigt.
- Leeg de watertank na elk gebruik en laat het apparaat 2-3 seconden draaien om het resterende water af te voeren en bacterievorming te voorkomen.
- Gebruik altijd alleen water of neutrale reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Gebruik nooit bijtende of schurende stoffen (bijv. azijn, kalkverwijderaars), omdat deze het apparaat kunnen beschadigen.
- Houd het apparaat uit de buurt van hoge temperaturen en direct zonlicht.
- Dompel het apparaat niet gedurende langere tijd onder in water of een andere vloeistof.
- Veeg het apparaat indien nodig af met een zachte doek en een mild, niet-schurend reinigingsmiddel.

- Reinig de watertank met zeepsop, gebruik een borstel om vuil te verwijderen en veeg het droog.
- Zorg ervoor dat de watertank volledig droog is voordat u het apparaat voor langere tijd opbergt.

Voorzorgsmaatregelen

Opladen:

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de oplaadkabel aansluit. Trek niet met kracht aan het netsnoer of het apparaat.
- Sluit het netsnoer altijd eerst aan op het product en steek het vervolgens in het stopcontact.
- Als de USB-kabel per ongeluk in het water valt, koppel dan eerst adapter los voordat u het product ophaalt.
- Koppel de adapter niet los met natte handen.
- Gebruik het apparaat alleen met het opgegeven voltagesysteem op het apparaat of de oplader om schade te voorkomen
- Voorkom overladen door het apparaat los koppelen zodra de aangegeven oplaadtijd is bereikt.
- Houd het product altijd uit de buurt van waterbronnen tijdens het opladen. Vermijd opladen in de buurt van baden, gootstenen of andere vloeistofcontainers.
- Laad het apparaat niet op zachte oppervlakken zoals bedden of beddengoed, vooral niet in afgesloten ruimtes. Mocht het product oververhit raken tijdens het opladen, koppel het dan onmiddellijk los.
- Vermijd opladen in gebieden met hoge temperaturen of in de buurt van open vuur om brandgevaar te verminderen.
- Beschadig, breek of wijzig de USB-kabel niet. Vermijd overmatig rekken, buigen of draaien en plaats er geen zware voorwerpen op of klem het tussen voorwerpen.
- Als het netsnoer beschadigd raakt, vervang het dan alleen door compatibele snoeren of componenten van de oorspronkelijke fabrikant.

Gebruik:

- Dit product is uitsluitend ontworpen voor het reinigen van tandvlees en tanden. Gebruik het niet voor andere doeleinden.
- Gebruik het product niet als u spuitmond kwijtraakt en gebruik alleen de aanbevolen tips en accessoires.
- Druk de spuitmond niet te hard tegen tanden of het tandvlees om letsel te voorkomen.
- Mensen die last hebben van tand- of tandvleespijn kunnen het apparaat mogelijk niet gebruiken en dienen voor gebruik hun tandarts te raadplegen.
- Gebruik het apparaat niet als u open wonden in de mond of op de tong heeft.
- Houd uw mond gesloten tijdens het gebruik van het apparaat om te voorkomen dat er water opspatten. Spoel uw tanden niet van een afstand en richt geen water op uw lichaam of gezicht.
- Steek geen vreemd voorwerp in een opening van het product.
- Gebruik het product niet buitenshuis, in de buurt van spuitbussen of in gebieden waar zuurstof wordt toegediend.

- Gebruik geen jodium, zoutoplossing of water onoplosbare geconcentreerde essentiële oliën in dit product. Het gebruik hiervan kan prestaties verminderen en de levensduur van het product verkorten en kan de garantie ongeldig maken.
- Verwijder alle orale sieraden voordat u dit product gebruikt.
- Als het apparaat defect raakt of beschadigd is, schakel het dan onmiddellijk uit en vermijd ongeautoriseerde demontage.
- Dit apparaat is waterdicht (IPX8-classificatie), maar dompel het niet gedurende langere tijd onder in water of een andere vloeistof om defecten, brand, elektrische schokken of explosies te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het product volledig droog is voordat u het opbergt om functionaliteit te behouden.
- Wij raden aan opslag in vochtige, vochtige ruimtes of hoge temperaturen vermijden. Stel het product niet bloot aan vuur of extreme hitte.

Safety:

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar, maar toezicht wordt aanbevolen om een veilige werking te garanderen. Bewaar het apparaat altijd buiten bereik van onbewaakte kinderen om onbedoelde schade te voorkomen.
- Kinderen mogen niet met apparaat spelen, aangezien dit apparaat geen speelgoed is.
- Richt geen water onder de tong, in het oor, de neus of andere gevoelige gebieden. Dit apparaat kan een hoge waterdruk produceren die ernstige schade kan veroorzaken in deze gebieden. Ook kan de dodelijke amoëbe, naegleria fowleri, aanwezig zijn in sommige kraanwater of niet-gechloreerd bronwater en kan dodelijk zijn als deze in deze gebieden wordt gericht.
- Houd het apparaat, de kabel en het mondstuk buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Het mondstuk is klein genoeg om te worden ingeslikt en kan in de keel worden vastgeklemd.
- Om te voorkomen dat de batterij opwarmt of giftige en schadelijke stoffen vrijgeeft, mag u het product of de batterij nooit openen, wijzigen, beschadigen of demonteren.

Problemen Oplossen:

Vraag	Oorzaken	Oplossingen
Lekkages in watertank	Afdichtring is abnormaal	Verwijder de afdichtring en installeer deze opnieuw
Lage waterdruk	Batterij bijna leeg	Laad het apparaat op
	Spuitskop blokkeert	Vervang door de nieuwe spuitskop
	Vuil of gruis vast in spuitskop	
Gaat maar een paar minuten mee, zelfs na volledige lading	Lege batterij	Neem contact op met het servicecentrum voor ondersteuning
	Onvoldoende oplaadtijd	Laad het apparaat minstens 6 uur op
	Oplaadsnoer beschadigd	Probeer het apparaat op te laden met een nieuwe oplaadkabel
	Adapter kapot	Probeer de nieuwe adapter
	Watertank is leeg	Vul de watertank

Motor maakt geluid maar er komt geen water uit	Ontwrichting van zuigklep	Houd het apparaat aan, vul water tot het gat waar de sproeikop in gaat
	Blokkeringen van de sproeikop	Vervang met nieuwe tips
Motor maakt geen geluid	Batterij bijna leeg	Activeer de batterij door het apparaat langer dan 16 uur op te laden
Product stopt plotseling met werken	Oververhittingsbeveiliging is geactiveerd (continu 5 tanks water op hoogste druk gebruikt)	Overmatige hitte zorgt ervoor dat het apparaat stopt. Schakel het apparaat uit, laat het 2 uur afkoelen en start het opnieuw op
	Product 2-minuten anti-mistouch ontwerp	Opnieuw opstarten om te gebruiken

Milieubescherming en Recycling

Veilige Verwijdering van Apparaten

Dit apparaat bevat een lithiumbatterij. Aan het einde van de levensduur mag de batterij niet worden afgevoerd als stedelijk afval. De batterij moet worden ingeleverd bij een speciaal afvalinzamelingscentrum van de overheid of bij een dealer die deze service biedt. Door een huishoudelijk apparaat apart af te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die voortvloeien uit onjuiste verwijdering. Hierdoor kunnen de bestanddelen worden teruggewonnen om aanzienlijke besparingen op energie en hulpbronnen te verkrijgen.

Zoals vermeld, bevat de ingebouwde oplaadbare batterij in dit product stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Om de verantwoorde verwijdering en recycling van het apparaat te garanderen, volgt u de regels van uw land voor de gescheiden inzameling van elektrische producten en batterijen, of raadpleegt u de volgende stappen:

1. Activeer de aan/uit-schakelaar van het apparaat en laat het werken totdat het stopt met werken, waarbij u ervoor zorgt dat de batterij volledig leeg is.
2. Voordat u het apparaat demonteert en de batterij verwijderd, moet u er altijd voor zorgen dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van alle stroombronnen.
3. Zodra de batterij is verwijderd, mag u het apparaat nooit meer op de lader aansluiten. Wees bovendien voorzichtig om te voorkomen dat er een kortsluiting ontstaat tussen de positieve en negatieve polen van de batterij.
4. Volg vervolgens de richtlijnen van lokale autoriteiten om verwijderde batterij af te voeren.



Accessoires

Hebt u vervangende onderdelen nodig? Iets verloren? Accessoires kunt u kopen via onze website www.barberboss.co.uk/shop.

Klantenservice

Voor hulp kunt u terecht op onze website: www.barberboss.co.uk of stuur ons een e-mail op care@barberboss.co.uk. U kunt ons ook bellen of WhatsAppen op 0800 612 6688 (of +44800 612 6688 als u contact opneemt van buiten het VK). U kunt ook naar onze YouTube gaan voor een aantal handige tips/handleidingen www.youtube.com/@BarberBossUK.

