



MODE D'EMPLOI



1
Insérez la capsule sélectionnée dans l'appareil.

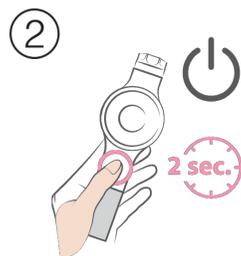


2
Appuyez 2 secondes sur le bouton marche pour allumer l'appareil. Il affiche le programme sélectionné et le nombre de doses restantes (voir page 4).

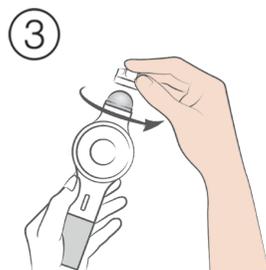

3
Dévissez le bouchon de la capsule.



4
Appuyez ensuite très brièvement sur le bouton marche pour lancer le programme ou le mettre en pause.

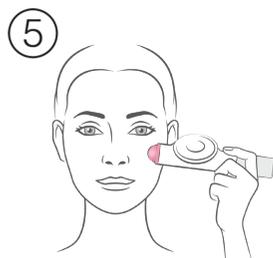

5
Commencez l'application en suivant les indications des gestuelles ci-contre. L'appareil s'éteindra automatiquement 5 secondes après la fin de la session. Révissez le bouchon sur la capsule puis placer l'appareil sur son socle.



6
Après 7 sessions, la capsule étant vide, appuyez sur le bouton d'éjection au dos de l'appareil jusqu'à libération de la capsule.


1

GESTUELLES ET PROGRAMMES

PROTOCOLE D'APPLICATION

3 minutes par jour
6 zones de chaque côté du visage
15 secondes par zone

Le programme s'utilise sur une peau propre et sèche quotidiennement. Sur chaque zone, placez l'appareil perpendiculairement à la surface de votre peau puis déplacez le en mouvements circulaires, toujours en partant de l'intérieur du visage vers l'extérieur. Après 15 secondes, l'appareil émet un signal sonore, vous pouvez alors passer à la zone suivante dans l'ordre indiqué sur les gestuelles ci-contre.

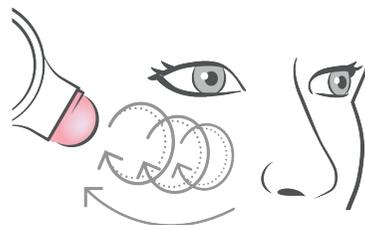

LES PROGRAMMES

Quatre programmes de soin spécifiques sont disponibles pour répondre à vos besoins. Chaque programme comprend une capsule de sérum photo-actif qui déclenche automatiquement son programme de lumières régénérantes associé.

REPAIR : Lisse les rides, lifte et raffermit, illumine le teint.


PURITY : Corrige les imperfections, purifie et matifie la peau, resserre les pores.

REDNESS RELIEF : Apaise les rougeurs, répare la fonction barrière et limite le vieillissement cutané.

BRIGHTENING : Illumine et uniformise la peau, ravive l'éclat du teint.




2

GESTUELLES ET PROGRAMMES

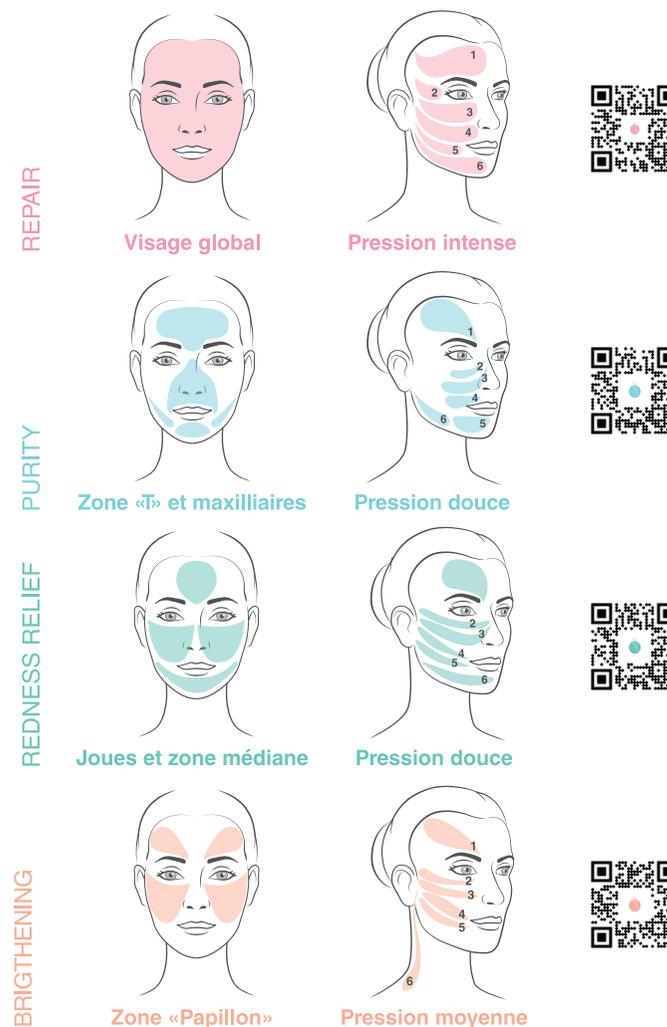

Si vous souhaitez travailler une partie de votre visage en particulier, vous pouvez passer l'appareil jusqu'à deux fois sur une zone.

3

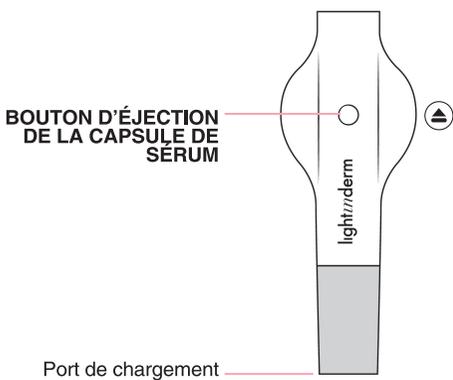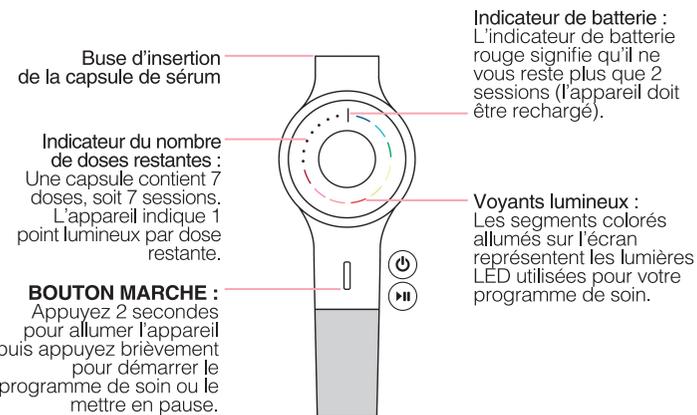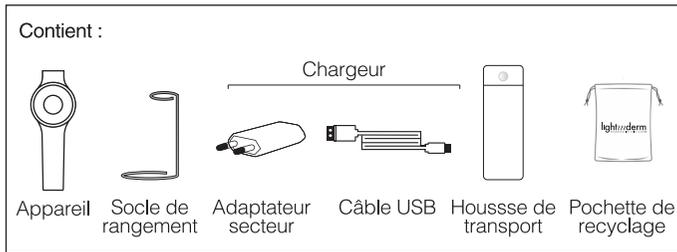


STOCKAGE

Il est recommandé de placer l'appareil sur son socle de rangement en gardant la capsule toujours vers le haut.



Les capsules doivent être stockées droites dans leur étui.

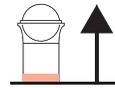

CHARGEMENT

Avant de réaliser votre première session de soin, veillez à charger complètement l'appareil Lightinderm. Veillez à bien insérer jusqu'au bout le câble USB dans l'appareil. Une charge complète permet au moins 7 sessions de soin.

Lors du chargement de votre appareil, l'indicateur de batterie passera du rouge clignotant au vert clignotant pour finir au vert fixe lorsque la batterie sera complètement chargée.

RECYCLAGE

Vous pouvez stocker les capsules usagées dans la pochette de recyclage fournie dans le coffret.



à recycler avec le plastique



à recycler avec le verre



ASSISTANCE

Si vous avez la moindre question ou retour d'expérience, l'équipe Lightinderm se tient à votre disposition :

contact@lightinderm.com
Paris Santé Cochin - Lightinderm
27 rue du faubourg Saint-Jacques - 75014 Paris
Du lundi au vendredi de 10h à 17h - 09 63 50 03 27

lightinderm.
REGENERATIVE SKIN CARE.



Le premier système de soin pour la peau qui combine lumières régénérantes et sérums photo-actifs.

GUIDE D'UTILISATION