

Come usare il GlowLift



5 Modalità

DETERSIONE

Pulisce a fondo le impurità della pelle.

RINFRESCANTE

Rinfresca profondamente la pelle.

EMS LIFTING

Rivitalizza la pelle flaccida e combatte le rughe

IDRATANTE

Promuove l'assorbimento dei nutrienti.

COOL SYNTHESIS

Trattiene l'umidità

Come usare il GlowLift

Luce Blu



La luce blu elimina efficacemente l'infiammazione e l'acne, riduce i pori e regola l'equilibrio tra sebo e idratazione della pelle, diminuendo la formazione di zone lucide e di nuove imperfezioni.

Adatto a pelle grassa:

- Migliora il Sebo
- Trattamento con luce fredda e blu.
- Anti-acne
- Allevia le infiammazioni




Come usare il GlowLift

Luce Rossa

Accelera la circolazione sanguigna, aumenta l'elasticità della pelle, ne migliora l'aspetto, ottenendo così un'efficace azione antiossidante e riparatrice.

Adatto per pelle secca

- Lifting rassodante
- Attiva i muscoli
- Pelle sottile
- Anti-età

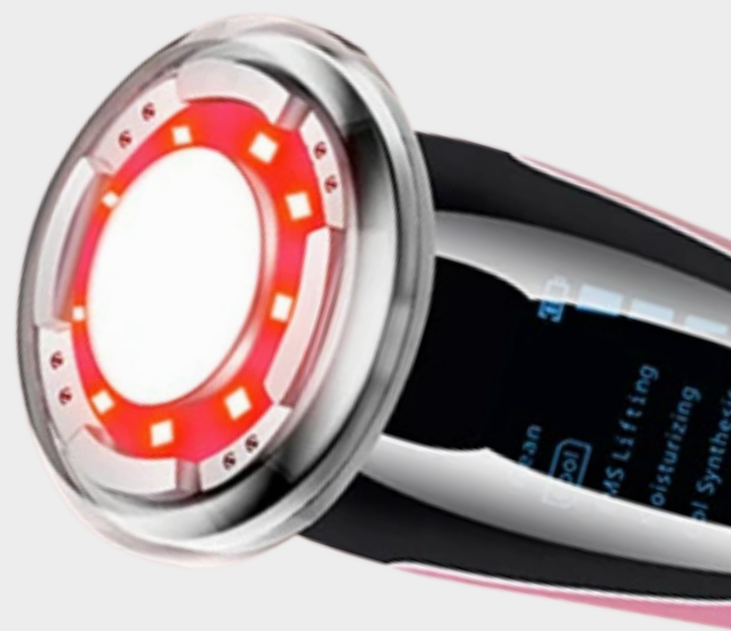

Come usare il GlowLift


Modalità di Pulizia



Manualmente



Con il Dispositivo

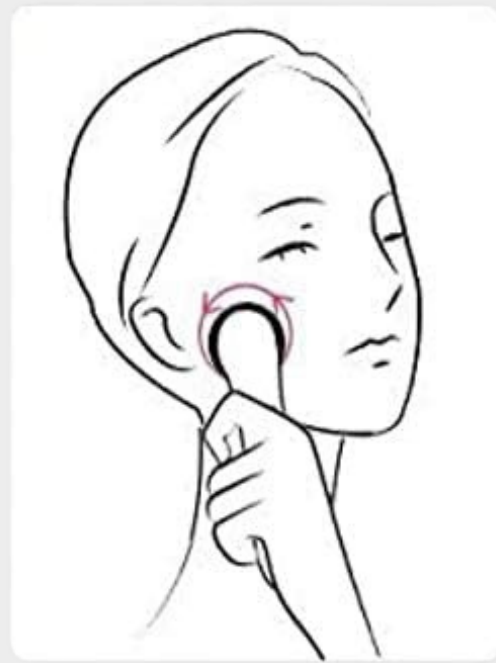

Posiziona un dischetto di cotone, aggiungi un po' di struccante.

Seleziona la modalità di pulizia e **massaggia per 5 minuti.**

Cómo usar el GlowLift

Modalità Rinfrescante

Stimola la produzione di collagene e migliora l'elasticità della pelle.

Utilizza questa modalità per rinnovare e rivitalizzare la pelle, riducendo la visibilità delle rughe e dei segni dell'invecchiamento.

Usalo applicando la **Crema Jelly al Collagene**.


Collagen

Come usare il GlowLift

Modalità EMS Lifting

Produce micro-corrente EMS, accelera il metabolismo
e rimodella le cellule della pelle;
allevia la melanina e le rughe profonde, aiuta a
ripristinare l'elasticità e rende la pelle soda, liscia e
luminosa.

L'EMS stimola i muscoli, contrastando le rughe
d'espressione (zampe di gallina) e le rughe del viso.
Usalo applicando il **Siero Rosa con peptidi e PDRN**.

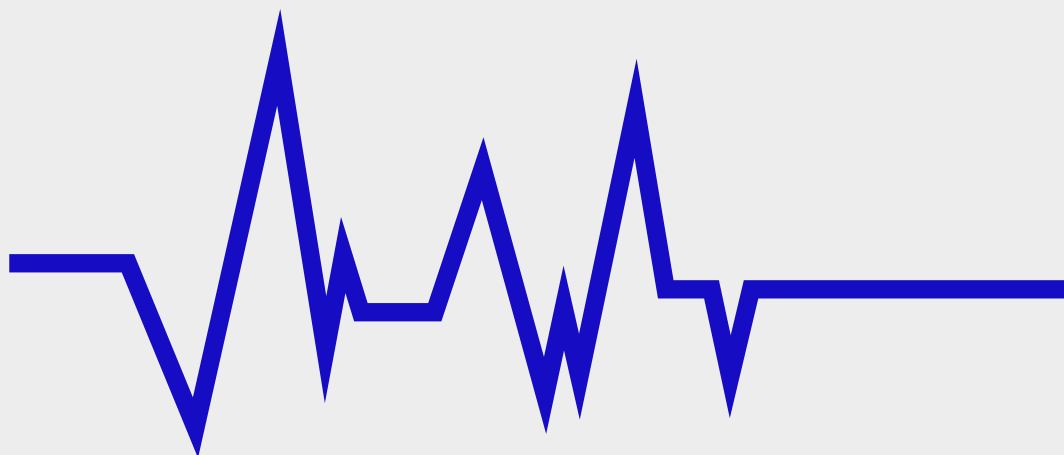


Come usare il GlowLift

Modo Idratante

Favorisce l'assorbimento profondo di sieri e creme.

Per un utilizzo ottimale, applica un prodotto skincare (come un siero) e attiva questa modalità per migliorarne l'assorbimento e la penetrazione nelle cellule cutanee.

Usalo applicando la **Crema in capsule con Vitamina C**, la **Crema in capsule con Peptidi e PDRN** e il **Siero Rosa con peptidi e PDRN**.

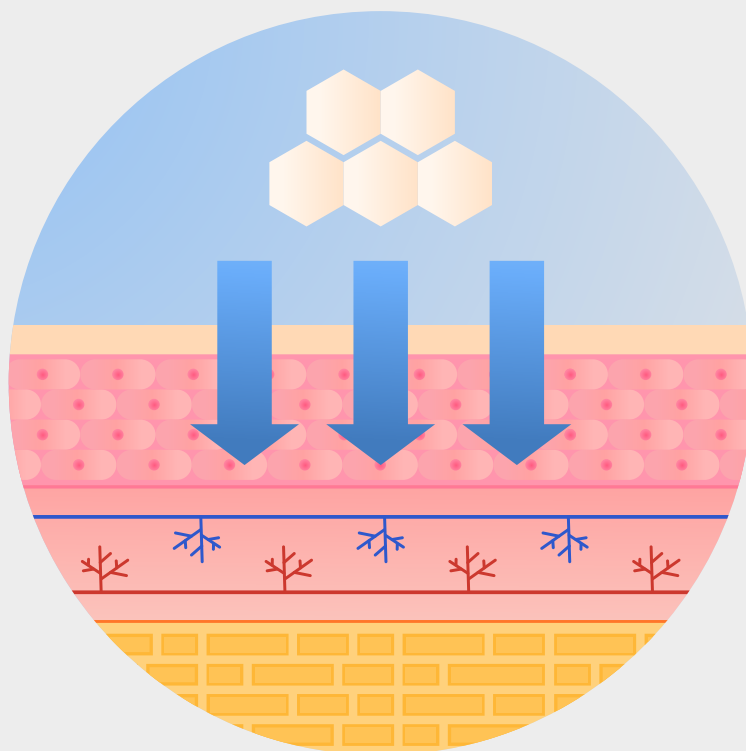


Come usare il GlowLift

Modalità Cool Synthesis

Questa modalità aiuta a “sigillare” l'idratazione e a ridurre i rossori della pelle.

Usala alla fine della tua routine per migliorare la ritenzione di acqua e mantenere la pelle fresca e tonica.

È particolarmente indicata alla fine della skincare routine, soprattutto per chi ha la **pelle sensibile o soggetta ad arrossamenti**.

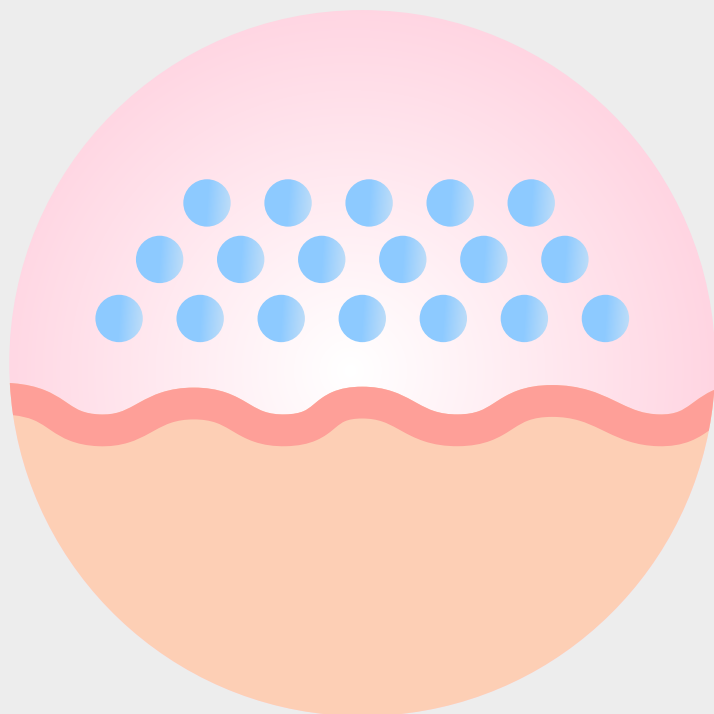

Come usare il GlowLift

Manuale d'Uso



Per le sopracciglia

Lungo la sopracciglia fino alle tempie, muovi delicatamente dal basso verso l'alto.



Per il ponte del naso

Lungo il ponte del naso, muovi delicatamente dall'alto verso il basso.



Per le guance

Lungo le guance, dal basso verso l'alto, muovi delicatamente dall'interno verso l'esterno.



Per il mento

Lungo il mento, da destra a sinistra e da sinistra a destra, muovi delicatamente in avanti e indietro.