

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEKTROSTYMULATOR

Model: AS9034

Relaks – wszędzie i o każdej porze

FIZJOLOVE

Mydecor sp. z o.o
ul. Ostródzka 112a
03-289 Warszawa
Made in P.R.C.
www.fizjoloove.pl


Zawartość zestawu:

- Urządzenie do masażu – 1 szt.
- Elektrody (podkładki) – 4 szt.
- Przewód elektrodowy – 2 szt.
- Kabel USB – 1szt.
- Instrukcja obsługi – 1 szt.
- Płytko do przechowywania elektrod – 1 szt.

Cechy produktu:

- 2 wyjścia, 24 tryby masażu
- 20 poziomów intensywności
- Domyślny czas masażu: 20 minut
(regulowany od 10 do 60 minut)
- Wbudowany akumulator litowy
- Wskaźnik naładowania baterii
- Zasilacz: AC 110–240 V, ładowarka USB 5 V

Opis urządzenia:

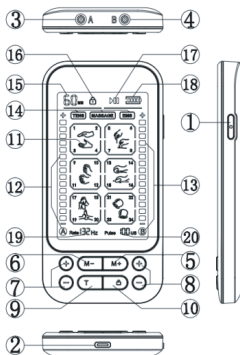

1. Włącznik/wyłącznik
2. Port ładowania USB
3. Złącze wyjściowe kanału A
4. Złącze wyjściowe kanału B
5. Wybór trybu
6. Wybór trybu (wstecz)
7. Zwiększanie/zmniejszanie intensywności (Kanał A)
8. Zwiększanie/zmniejszanie intensywności (Kanał B)
9. Ustawienie czasu działania
10. Blokada/Przycisk pauzy (przytrzymaj 2 sekundy)

-----Wyświetlacz LCD-----

- 11. Ikony trybów
- 12. Poziom intensywności kanału A
- 13. Poziom intensywności kanału B
- 14. Seria trybów
- 15. Czas
- 16. Blokada
- 17. Pauza
- 18. Wskaźnik baterii
- 19. Częstotliwość trybu
- 20. Szerokość trybu

Tryby Masażu

Mode	
Mode 1	Delikatne unoszenie
Mode 2	Miękkie ugniatanie
Mode 3	Ugniatanie + silne uderzenia
Mode 4	Naciskanie
Mode 5	Delikatne unoszenie 10 sek. / pauza 4
Mode 6	Powolne unoszenie
Mode 7	Bańki – 20 sek.

Mode 8	Delikatne unoszenie – 25 sek.
Mode 9	Wibracje
Mode 10	Akupunktura – wolno do szybko
Mode 11	Akupunktura – wolno do mocno
Mode 12	Unoszenie + rozluźnienie
Mode 13	Ciągłe stukanie
Mode 14	Bańki
Mode 15	Bańki + 3 uderzenia
Mode 16	Bańki + 1 uderzenie
Mode 17	Stukanie – mocno do lekko
Mode 18	Delikatne unoszenie + lekkie stukanie
Mode 19	Kombinacja
Mode 20	Bańki + rozluźnienie
Mode 21	Stukanie – szybko + wolno
Mode 22	Szybkie uderzenia
Mode 23	Delikatne unoszenie + rozluźnienie
Mode 24	Ciągłe stukanie

Sposób użycia:

1. Naładuj urządzenie do 10 godzin przed pierwszym użyciem.
2. Podłącz przewód do portu na dole urządzenia.
3. Podłącz elektrody do przewodu (na zatrzaski).
4. Zdejmij folię ochronną i przyłóż elektrody do wybranego miejsca na ciele.

Uwaga: kilka kropel wody na elektrodzie przedłuży jej żywotność. Możesz użyć drugiego portu i powtórzyć proces dla kolejnych 2 elektrod. Upewnij się, że elektrody nie zachodzą na siebie i że skóra jest czysta (bez olejków/kremów).

5. Włącz urządzenie przesuwając przełącznik ON/OFF.
6. Wybierz kanał A lub B.
7. Naciśnij przycisk „M” lub wybierz tryb za pomocą przycisku trybu.
Uwaga: przy każdej zmianie trybu intensywność domyślnie ustawia się na najniższym poziomie.
8. Po wyborze trybu, zwiększaj intensywność „+” lub zmniejszaj „-”.
9. Zalecany czas sesji: 10–60 minut (zwiększanie co 10 min).
Urządzenie wyłączy się automatycznie po zakończeniu odliczania.
10. Usiądź i ciesz się masażem!

UWAGA:

- Nie podłączaj urządzenia do zwykłych słuchawek.
- Nie dotykaj portu USB w trakcie pracy.
- Używaj tylko ładowarki zgodnej z normą IEC/EN 60601-1. Nieautoryzowane ładowarki mogą być niebezpieczne.

Środki ostrożności:

- Nie stosować w okolicach serca, głowy, szyi, krocza, ust, gardła, ran i blizn.
- Nie dotykaj elektrod, gdy urządzenie jest włączone.
- Kobiety w ciąży nie powinny korzystać z urządzenia.
- Nie używać przy rozruszniku serca, sztucznym płucu, respiratorze.
- Nie używać podczas prowadzenia pojazdów, obsługi maszyn itp.

Nie stosować przy:

- Ostre choroby, świeże urazy, po operacjach (do 6 miesięcy)
- Dysfunkcjach serca, epilepsji, nadciśnieniu, gorączce
- Nowotworach, chorobach zakaźnych, problemach skórnych
- Bólu o nieznanej przyczynie, przepuklinie, bólu mięśni, ograniczonej ruchomości stawów
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Nie jest to urządzenie medyczne ani do rehabilitacji.

Konserwacja:

1. Po użyciu wyłącz urządzenie, odłącz elektrody. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.
2. Zakryj elektrody folią ochronną, przechowuj w torebce strunowej. Kilka kropel wody zwiększy trwałość.
3. Ładuj urządzenie co najmniej raz na 3 miesiące, jeśli nie jest używane regularnie.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Jedna elektroda działa silniej	To normalne. Różne obszary twojego ciała będą reagować inaczej.	Nic nie trzeba robić. Upewnij się, że pady są wilgotne i dobrze się stykają.
Podczas masażu skóra odczuwa bolesne pieczenie lub stymulacja ulega osłabieniu.	Podkładki żelowe nie przylegają ściśle do skóry, albo są zbyt suche.	Nanieś kilka kropli wody na powierzchnię klejącą każdego płatka i upewnij się, że płatki są mocno dociśnięte do skóry podczas aplikacji.
Urządzenie jest włączone, ale nie odczuwa się żadnych impulsów.	Obie elektrody nie przylegają ściśle do skóry. Albo jest luźne połączenie.	Upewnij się, że obie elektrody są mocno dociśnięte do skóry. Upewnij się, że wszystkie połączenia między urządzeniem a elektrodami są dobrze połączone. Zwiększ poziom intensywności.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Podkładki żelowe nie przyklejają się do skóry nawet po ich oczyszczeniu i zwilżeniu.	Należy wymienić podkładki żelowe.	Wymień zestaw elektrod.
Urządzenie nie włącza się lub ekran jest przyciemniony.	Bateria jest słaba	Naładuj urządzenie.
Brak ulgi w bólu	Zbyt krótki czas/nieprawidłowa pozycja	Stosuj 20–30 min, 3–6 razy dziennie. Leżenie pomaga przy bólu szyi/głowy