

MAGNITONE

LONDON

FACE ROCKET®

Appareil 5-en-1 pour raffermir et tonifier le visage

Lire attentivement le mode d'emploi. Veuillez conserver la boîte et le manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure.

CE MANUEL COMPREND

- LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- LE CONTENU DE LA BOÎTE
- L'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE
- LES AVERTISSEMENTS
- NETTOYAGE + STOCKAGE
- RECYCLAGE + MISE AU REBUT
- CHARGER VOTRE APPAREIL
- PIÈCES + ACCESSOIRES
- TECHNOLOGIES
- COMMENT UTILISER LE FACE ROCKET
- GEL SUPRACONDUCTEUR LIFT OFF

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit: Appareil raffermissant et tonifiant pour le visage 5-en-1 FaceRocket® de MAGNITONE

Code produit: MFR01G

Entrée: 5.0V  1000mA 

Batterie: Li-Ion 3.7V 2000mAh



© MAGNITONE 2023

Marque déposée, propriété de:

HSNF Ltd., Londres, N10 2JE, Royaume-Uni.

HSNF IE Ltd., Dublin 7, D07 P4AX, Irlande.

Made / Fabriqué / Prodotto / Hecho / Hergestellt / Wyprodukowano / Vervaardigd in China.

CONTENU DE LA BOÎTE

1x Appareil raffermissant + tonifiant pour le visage 5-en-1 FaceRocket®.

1 x Gel supraconducteur prepare + glide LiftOff 60ml e

1 x Câble de chargement USB


ENREGISTREZ VOTRE GARANTIE

Votre appareil est couvert par une garantie de 12 mois à compter de votre date d'achat. Vous devez enregistrer votre appareil pour valider votre garantie.

Scannez le code QR pour enregistrer votre garantie et débloquer une couverture supplémentaire de 12 mois. Soit 2 ans au total !

Cette garantie ne couvre pas les pannes ou défauts causés par :

- Le non-respect des instructions d'utilisation et de nettoyage.
- Une manipulation négligente ou une mauvaise utilisation.
- Des dommages dus au transport.
- Les altérations, réparations ou ajustements entrepris par toute personne autre que nos ingénieurs produits qualifiés.

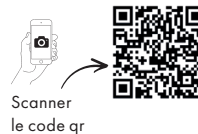**SERVICE CLIENTÈLE**

help@magnitone.co.uk

www.magnitone.co.uk

AVERTISSEMENTS

Donnez à votre peau une apparence et une sensation incomparables grâce au FaceRocket® - l'appareil de raffermissement et de tonification du visage par excellence. Cliniquement prouvé pour améliorer la fermeté de la peau de 29 %, la densité dermique de 35 % et réduire les rides de 10 %, FaceRocket offre des résultats réels en seulement 4 semaines.*

FaceRocket® est destiné à la stimulation faciale et à un usage cosmétique uniquement. Il ne s'agit pas d'un appareil médical et il ne doit pas être utilisé pour traiter des problèmes médicaux. Toute conséquence résultant d'une mauvaise utilisation, d'une application sur d'autres parties du corps, d'une connexion à des sources de tension inappropriées, d'éléments de contact sales ou de toute autre application ou utilisation inappropriée ne relève pas de la responsabilité de HSNF Ltd ou de ses affiliés.

Certains utilisateurs peuvent trouver la sensation assez forte, surtout comparée à d'autres produits à microcourant qu'ils ont utilisés. Une sensation de picotement (comme un petit choc électrique) et quelques contractions musculaires involontaires peuvent se produire pendant l'utilisation du FaceRocket® de MAGNITONE. Le fait de diminuer le réglage du mode peut réduire ou éliminer cette sensation. Si cette sensation est inconfortable, nous suggérons d'utiliser un réglage de puissance plus faible. Cette sensation disparaît normalement après les premières utilisations. Si vous ressentez une douleur ou une gêne, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.

**Étude indépendante menée auprès de 32 personnes âgées de 33 à 50 ans. Résultat moyen basé sur une utilisation régulière pendant 4 semaines.*



- Pour une utilisation sur le visage uniquement.
- Des effets indésirables peuvent survenir si les instructions ne sont pas respectées.
- Une application prolongée ou répétée sur un même site peut potentiellement endommager la peau.
- **Ne PAS** utiliser sur les yeux (le muscle périphérique du contour de l'orbite), sur ou autour des glandes thyroïdes (ligne médiane du cou, devant et de chaque côté de la trachée), sur les tempes (au-dessus de l'oreille), les seins ou la région de l'aîne.
- **N'appliquez PAS** de stimulation sur votre poitrine, car l'introduction d'un courant électrique dans la poitrine peut provoquer des troubles rythmiques du cœur, potentiellement mortels.
- **N'utilisez PAS** l'appareil avec des produits cosmétiques à base inflammable, sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.
- Lors de l'utilisation sur la bajoue, il convient de veiller à minimiser le traitement directement sur la ligne médiane du cou, en évitant spécifiquement la thyroïde.
- Il peut y avoir une perception de lumières clignotantes pendant l'utilisation de votre FaceRocket®, résultant de la stimulation de la zone des yeux. Si vous remarquez cette condition de façon constante sans l'utilisation de votre appareil, cessez de l'utiliser et demandez un avis médical.
- Certains utilisateurs peuvent ressentir un goût métallique dans la bouche pendant l'utilisation de l'appareil, résultant de la stimulation et de la sensibilité variable autour de la bouche. Si vous remarquez cette condition de façon constante sans l'utilisation de votre appareil, cessez de l'utiliser et demandez un avis médical.

SI VOUS SOUFFREZ D'UNE AFFECTION CUTANÉE SOUS-JACENTE, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

CONTRE-INDICATIONS

NE PAS UTILISER SI:

- Vous avez des zones où l'intégrité de la peau est affectée (telles que brûlures, cloques, lésions, incisions, plaies, maladies ou infections cutanées actives) ; vous souffrez d'une maladie ou d'une inflammation de la peau, vous avez une peau sensible ou une constitution allergique.
- Vous avez des antécédents d'épilepsie ou de crises d'épilepsie.
- Vous avez subi récemment une intervention chirurgicale ou d'autres procédures chirurgicales.
- Vous avez un appareil électronique implanté tel qu'un stimulateur cardiaque.
- Vous utilisez un dispositif médical porté sur le corps, tel qu'une pompe à insuline.
- Vous souffrez d'un cancer actif ou avez récemment guéri ou été traité pour des lésions suspectes ou cancéreuses.
- Vous êtes enceinte.
- Vous êtes suivi par un médecin pour un problème médical en cours, consultez-le avant d'utiliser cet appareil.
- Vous avez des antécédents connus de maladie de l'artère carotide, d'accident vasculaire cérébral ou d'accident ischémique transitoire (AIT), de sténose carotidienne, de tension artérielle instable, d'évanouissement facile, de maladie thyroïdienne ou d'interventions chirurgicales antérieures dans la région du cou.
- Vous avez tendance à saigner à la suite d'une blessure aiguë ou d'une fracture osseuse.
- Vous portez des implants qui ne sont pas compatibles avec l'utilisation de l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par ou sur des personnes âgées de moins de 18 ans.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- **NE PAS** immerger l'appareil dans l'eau.
- **NE PAS** faire tomber l'appareil ou l'utiliser de manière incorrecte.
- **NE PAS** manipuler l'appareil ou le chargeur avec des mains mouillées.
- **NE PAS** utiliser l'appareil s'il a été endommagé.
- **NE PAS** démonter ou tenter de réparer l'appareil.
- **NE PAS** placer l'appareil en plein soleil, ni exposer la batterie à des températures élevées ou à des équipements générant de la chaleur. D'autres équipements électriques à proximité peuvent être affectés par l'utilisation de ce produit.
- **NE PAS** contourner ou retirer le dispositif de sécurité inhérent à l'appareil.
- Assurez-vous que votre appareil soit déconnecté du câble de charge USB avant de l'utiliser.
- L'appareil **DOIT** être alimenté à une alimentation à très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
- Strictement réservé à un usage externe.

NETTOYAGE + STOCKAGE

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Assurez-vous que votre appareil soit déconnecté du câble de charge USB avant de le nettoyer. Utilisez une serviette légèrement humide pour nettoyer l'appareil et séchez-le avec un chiffon doux.

RECYCLAGE + MISE AU REBUT

Votre FaceRocket® de MAGNITONE ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa durée de vie. Lorsque vous n'avez plus besoin de votre produit, veuillez le mettre au rebut conformément à la procédure de recyclage de votre autorité locale.




CHARGER VOTRE APPAREIL

Avant la première utilisation, chargez votre FaceRocket®. Branchez-le sur une prise USB d'une prise de charge ou d'un ordinateur pour le charger. Lorsque l'appareil est complètement chargé, les voyants passent au vert.



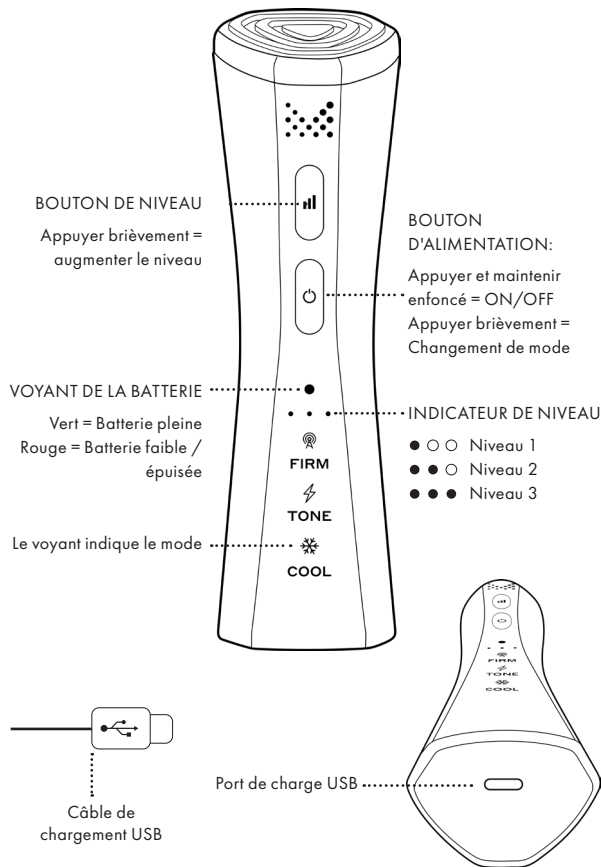


La durée de la charge de la batterie du FaceRocket® dépend entièrement de la durée d'utilisation, du mode et du niveau (par exemple, la radiofréquence consomme beaucoup plus d'énergie que la cryothérapie). Si vous utilisez votre appareil quotidiennement, vous devrez probablement le recharger plus d'une fois par semaine.




PIÈCES ET ACCESSOIRES



TECHNOLOGIES

FaceRocket® utilise une combinaison de technologies, toutes conçues pour offrir une apparence et une sensation plus fermes, plus lumineuses et plus tendues.

 RADIOFRÉQUENCE	<p>Les ondes radio chauffent sous la surface de la peau pour stimuler la production de collagène et d'élastine, ce qui rend la peau plus ferme.</p> <p>42°C</p>
 MICROCOURANT	<p>De petites impulsions électriques stimulent la contraction des muscles faciaux, pour les renforcer et les tonifier, ce qui contribue à lifter le visage.</p> <p>300 - 500 mA</p>
 LUMINOTHÉRAPIE LED ROUGE + VERTE	<p>Les ondes lumineuses rouges pénètrent sous la surface de la peau pour stimuler la production de collagène et d'élastine.</p> <p>Les ondes lumineuses vertes pénètrent sous la surface de la peau pour encourager la circulation sanguine, ce qui permet à la peau de paraître plus éclatante.</p> <p>Red: 630 - 680 nm / Green: 475 - 545 nm</p>
 CRYOTHÉRAPIE	<p>Rafrichit et apaise la peau, réduit les boursoufflures et encourage le drainage lymphatique.</p> <p>4°C</p>
 MASSAGE SONIQUE	<p>De douces vibrations stimulent la peau sous sa surface, ce qui favorise la circulation sanguine et le drainage lymphatique.</p>

MODE	TECHNOLOGIES	NIVEAUX
 FIRM	<ul style="list-style-type: none"> • Radiofréquence • LED rouge 	n/a
 TONE	<ul style="list-style-type: none"> • Microcourant • LED rouge 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ~ 300 mA 2. ~ 400 mA 3. ~ 500 mA
 COOL	<ul style="list-style-type: none"> • Cryothérapie • LED verte • Massage sonique 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pas de massage 2. Massage 1 3. Massage 2

COMMENT UTILISER LE FACEROCKET®

AVANT DE COMMENCER

Assurez-vous d'avoir lu et compris tous les avertissements, mises en garde et instructions avant de commencer.

Prenez une photo "avant" ! Pensez à prendre une photo de votre visage préalablement nettoyé, démaquillé, dans une pièce bien éclairée. Prenez des photos chaque semaine au même endroit et dans la même position pour suivre vos progrès. Vous ne remarquerez peut-être pas de changements tous les jours, mais des selfies réguliers vous aideront à constater la différence !

Partagez cette aventure avec nous sur les réseaux sociaux - utilisez le hashtag **#FaceRocket**

 [magnitoneofficial](#)

 [magnitonelondon](#)

 [magnitoneskincare](#)

 youtube.com/c/MAGNITONELondon

QUELLE FRÉQUENCE

Pour de meilleurs résultats, suivez notre programme pour le visage en 28 jours ! Ce calendrier quotidien vous guidera tout au long de vos 28 premiers jours de séances. Utilisez le calendrier à la page suivante ou scannez le code QR pour télécharger et imprimer le vôtre.



Une fois les 28 jours terminés, maintenez les résultats en utilisant le mode FIRM au moins une fois par semaine et le mode TONE 1 à 3 fois par semaine. Le mode COOL peut être utilisé quotidiennement, selon les besoins.

FACEROCKET®

0 BEFORE YOU BEGIN	1 	2 	3
KEY PRENDRE UN SELFIE Mode FIRM 5-10 minutes Mode TONE 3-5 minutes Mode COOL 1-3 minutes ○ ● ○ Niveau 1 ● ● ○ Niveau 2 ● ● ● Niveau 3	8 	9 	10
	15 	16 	17
	22 	23 	24





PROGRAMME POUR LE VISAGE EN 28 JOURS

4 	5 	6 	7
11 	12 	13 	14
18 	19 	20 	21
25 	26 	27 	28

FIRM

RADIOFRÉQUENCE + LUMINOTHÉRAPIE PAR LED ROUGES

Raffermit et resserre la peau grâce à la radiofréquence et aux LED rouges, qui agissent ensemble sous la surface pour stimuler la production de collagène et d'élastine. Ne pas utiliser le mode FIRM plus d'une fois tous les 3 jours.

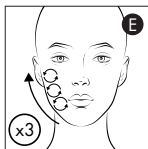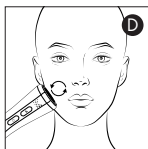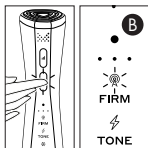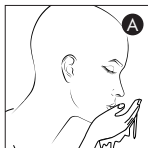

1. Avant de commencer, assurez-vous que votre peau soit parfaitement nettoyée - débarrassée du maquillage, des graisses de surface et de la saleté quotidienne (A). (Les hommes doivent se raser avant le traitement car les poils du visage peuvent interférer avec la conductivité).




IMPORTANT: Toute crème, lotion, autobronzant ou autre produit à base d'huile sur la peau risque de bloquer la radiofréquence.

Nous recommandons un double nettoyage complet ; essayez nos lingettes nettoyantes en microfibras WipeOut pour vous débarrasser du maquillage et de la saleté superficielle, puis intensifiez le nettoyage en utilisant l'une de nos brosses nettoyantes maintes fois primées !



2. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour mettre le FaceRocket® en marche. Il démarre automatiquement en mode FIRM (B).
3. Pendant que l'appareil préchauffe, appliquez une couche généreuse de gel supraconducteur sur votre peau (C). Vous pouvez l'appliquer sur l'ensemble du visage ou section par section, et renouveler l'application tout au long du traitement si nécessaire.

IMPORTANT: Vous devez utiliser un gel supraconducteur pour aider la radiofréquence à atteindre la surface de la peau. Sans ce gel, le traitement ne fonctionnera pas.

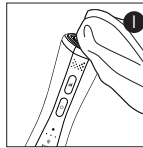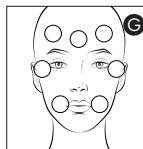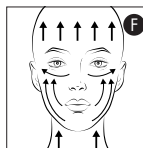

4. En commençant par le menton, placer la tête du FaceRocket® à fleur de peau et effectuer doucement de petits mouvements circulaires (D). Au bout de 5 secondes, vous entendrez un bip, ce qui signifie que vous devez passer à la section suivante de votre visage. Gardez toujours le FaceRocket® en mouvement en mode FIRM. Il ne faut PAS le maintenir en place.
5. Travaillez le long de la mâchoire jusqu'à l'oreille d'un côté de votre visage (E), puis répétez cette section de votre visage 2 fois de plus. Vous effectuez ainsi 3 x "répétitions" au total.
6. En utilisant la même technique, passez à la section suivante de votre visage et continuez à travailler autour de votre visage (F):
 - Du coin de la bouche à l'oreille.
 - Du dessous de l'œil/de la pommette à l'oreille (NE PAS utiliser sur les paupières/la zone délicate de l'œil).
 - Le front.
 - Sous le menton.
 Appliquez plus de gel si nécessaire.
7. Une fois que l'ensemble du visage a été traité, vous pouvez vous concentrer sur les zones problématiques spécifiques telles que la ride du sourire, la ride du lion ou les pattes d'oie (G). Pour ce faire, effectuez délicatement de petits mouvements circulaires avec le FaceRocket® pendant 15 secondes (3 bips de 5 secondes).
8. Lorsque vous avez terminé, enlevez l'excédent de gel avec une serviette propre et humide (H) et poursuivez votre routine de soins de la peau comme à votre habitude.
9. Nettoyez la tête du FaceRocket® à l'aide d'un chiffon humide. (I) Ne la rincez PAS à l'eau.


TONE

MICROCOURANT + LUMINOTHÉRAPIE PAR LED ROUGES

Lifte, tonifiez et redessinez les contours de votre visage grâce au microcourant. De petites impulsions d'électricité stimulent les muscles du visage, les renforcent et les tonifient.


En mode TONE, n'utilisez PAS le FaceRocket® par-dessus les yeux (le muscle circulaire à l'intérieur du rebord orbital), sur ou autour des glandes thyroïdes (ligne médiane du cou, devant et de chaque côté de la trachée), sur les tempes (au-dessus de l'oreille), sur les seins ou dans la région de l'aîne. Assurez-vous d'avoir lu et compris toutes les mises en garde avant de commencer.

Le mode TONE peut être utilisé quotidiennement. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le 2 à 3 fois par semaine.

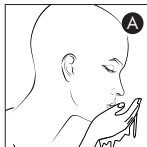

1. Avant de commencer, assurez-vous que votre peau soit parfaitement nettoyée - débarrassée du maquillage, des graisses de surface et de la saleté quotidienne (A). (Les hommes doivent se raser avant le traitement car les poils du visage peuvent interférer avec la conductivité).

IMPORTANT: Toute crème, lotion, autobronzant ou autre produit à base d'huile sur la peau risque de bloquer la radiofréquence.


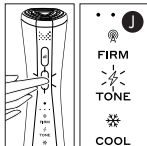


Nous recommandons un double nettoyage complet ; essayez nos lingettes nettoyantes en microfibras WipeOut pour vous débarrasser du maquillage et de la saleté superficielle, puis intensifiez le nettoyage en utilisant l'une de nos brosses nettoyantes maintes fois primées !




2. Appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pour allumer le FaceRocket®. Appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation pour sélectionner le mode TONE (J).

Le FaceRocket® en mode TONE démarre au niveau 1 d'intensité de microcourant. Commencez toujours au niveau 1 et augmentez l'intensité après quelques traitements. Appuyer sur le bouton de Niveau pour augmenter l'intensité.

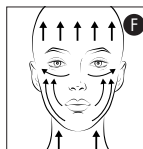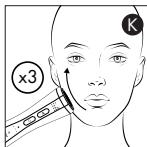

3. Appliquez une couche généreuse de gel supraconducteur sur votre peau (C). Vous pouvez l'appliquer sur l'ensemble du visage ou section par section, et renouveler l'application tout au long du traitement si nécessaire.

IMPORTANT: Vous devez utiliser un gel supraconducteur pour aider la radiofréquence à atteindre la surface de la peau. Sans ce gel, le traitement ne fonctionnera pas.

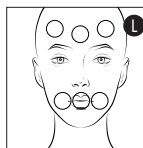


4. En commençant par le menton, placer la tête du FaceRocket® à fleur de peau et faites la glisser doucement le long de la mâchoire, jusqu'à l'oreille (K), jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Répétez cette partie de votre visage 2 fois de plus. Vous effectuez ainsi 3 x " répétitions " au total.



5. En utilisant la même technique, passez à la section suivante de votre visage et continuez à travailler autour de votre visage (F):

- Du coin de la bouche à l'oreille.
- Du dessous de l'œil/de la pommette à l'oreille (NE PAS utiliser sur les paupières/la zone délicate de l'œil).
- Le front.
- Sous le menton.

Appliquez plus de gel si nécessaire.

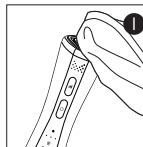





6. Une fois que l'ensemble du visage a été traité, vous pouvez vous concentrer sur les zones problématiques spécifiques telles que les lèvres, les rides du sourire ou les rides du lion (L). Pour ce faire, maintenez le FaceRocket® au même endroit pendant 15 secondes (3 bips de 5 secondes).
7. Lorsque vous avez terminé, enlevez l'excédent de gel avec une serviette propre et humide (H) et poursuivez votre routine de soins de la peau comme à votre habitude.
8. Nettoyez la tête du FaceRocket® à l'aide d'un chiffon humide (I). Ne la rincez PAS à l'eau.

COOL 

CRYOTHÉRAPIE + LUMINOTHÉRAPIE PAR LED VERTES + MASSAGE SONIQUE

La cryothérapie rafraîchissante apaise et réduit les poches, tandis que les LED vertes et le massage sonore stimulent le flux sanguin, favorisent le drainage lymphatique et redonnent de l'éclat à la peau.

Le mode COOL peut être utilisé quotidiennement, aussi souvent que vous le souhaitez ou que vous en avez besoin. Il peut être utilisé conjointement avec les deux autres modes. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le après les traitements FIRM ou TONE.

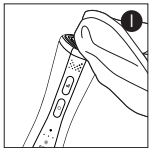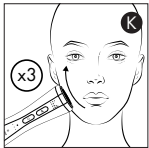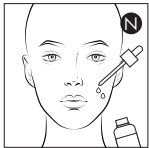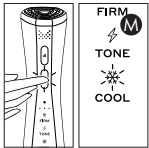

1. Veillez à ce que votre peau soit propre et démaquillée.
2. Appuyer sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour mettre le FaceRocket® en marche. Appuyez à nouveau deux fois sur le bouton d'alimentation pour sélectionner le mode COOL (M). Appuyez sur le bouton Niveau pour choisir le paramètre de massage:
 - a. Cryothérapie + Luminothérapie LED verte uniquement.
 - b. Cryothérapie + luminothérapie à DEL vertes + massage sonore 1.
 - c. Cryothérapie + luminothérapie par LED vertes + massage sonore 2.
3. Le mode Refroidissement ne nécessite pas l'application préalable d'un produit, mais pour de meilleurs résultats, appliquer une couche généreuse d'un sérum nourrissant (N) tel que l'acide hyaluronique ou la vitamine C (non inclus) pour aider le FaceRocket® à glisser et à hydrater la peau. Ceci est facultatif et le mode COOL peut être utilisé sans produit préalable.
4. En commençant par le menton, placez la tête du FaceRocket® au ras de la peau et faites glisser doucement le long de la mâchoire, jusqu'à l'oreille (K), jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

Facultatif: Répétez cette section de votre visage 2 fois de plus. Vous ferez ainsi 3 x "répétitions" au total.
5. Si vous souhaitez vous concentrer sur certaines zones, vous pouvez maintenir l'appareil en place pendant 15 secondes, en restant immobile ou en effectuant de petits mouvements circulaires.
6. Lorsque vous avez terminé, tout le sérum devrait être absorbé. Complétez votre routine de soins de la peau avec un SPF et une crème hydratante.
7. Nettoyez la tête du FaceRocket® à l'aide d'un chiffon humide (I). Ne la rincez PAS à l'eau.

MAGNITONE
LONDONGEL SUPRACONDUCTEUR
PREPARE + GLIDE LIFT OFF

Ce gel aqueux supraconducteur permet de faire glisser sans effort le microcourant et la radiofréquence et de les faire pénétrer plus profondément dans la peau.

MODE D'UTILISATION

Testez la sensibilité de votre peau au gel pour LiftOff Prepare + Glide. Appliquez une quantité de gel de la taille d'un petit pois sur le dessous de l'avant-bras et laissez agir pendant 15 à 20 minutes avant de rincer. En cas de réaction (éruption cutanée ou rougeur), contactez immédiatement MAGNITONE pour obtenir des recommandations quant à l'utilisation de produits alternatifs. Vous ne devez pas commencer le traitement avec le FaceRocket® de MAGNITONE tant que vous n'avez pas trouvé un gel adéquat.

Veillez à ce que votre peau soit propre et sèche. Appliquez une couche généreuse de gel sur toutes les zones à traiter, immédiatement avant d'utiliser l'appareil FaceRocket®. Essayez-ou rincez après utilisation.

INGRÉDIENTS

Aqua (Eau), Carbomère, Glycérine, Méthyl Paraben, Propyl Paraben, Propylène Glycol, Hydroxyde de sodium

PRÉCAUTIONS

Pour usage externe uniquement. Ne pas utiliser sur une peau sensible ou abîmée. Dans le cas improbable d'une éruption cutanée ou d'une irritation, cesser l'utilisation. Éviter tout contact avec les yeux.



STOCKAGE

Conservé dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil, en refermant bien le couvercle.

PARTAGER, C'EST AIDER!

Nous aimons voir vos photos et vidéos. Prenez une photo, faites une vidéo, marquez-nous sur les réseaux sociaux et nous la partagerons!

 [magnitoneofficial](#)

 [magnitonelondon](#)

 [magnitoneskincare](#)

 youtube.com/c/MAGNITONELondon

N'oubliez pas de nous taguer et d'utiliser **#NoFilterSkincare**.

NOTRE PROMESSE

Nous pensons que toutes les peaux sont belles.

Les rides, les imperfections, les taches de rousseur, les boutons - ce sont eux qui nous rendent uniques et humains. Nous voulons représenter de vraies personnes et de vraies peaux, c'est pourquoi nous promettons que toutes nos images sont 100% non retouchées.

Nos appareils et nos soins de la peau sont simplement des outils qui vous aident à vous sentir en confiance dans la magnifique peau que vous.

xoxo

Attention au
tampon

