

MAGNITONE
LONDON

FACE ROCKET®

Dispositivo 5 en 1 para Reafirmar y Tonificar el Rostro

Lea atentamente las instrucciones de uso. Conserve la caja y el manual de usuario para futuras consultas.

ESTE MANUAL INCLUYE

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- CONTENIDO DE LA CAJA
- REGISTRO DE LA GARANTÍA
- ADVERTENCIAS
- LIMPIEZA + ALMACENAMIENTO
- RECICLAJE + ELIMINACIÓN
- CARGA DEL DISPOSITIVO
- PIEZAS + ACCESORIOS
- TECNOLOGÍAS
- CÓMO UTILIZAR FACE ROCKET
- GEL SUPERCONDUCTOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto: MAGNITONE FaceRocket® Dispositivo
5 en 1 Reafirmante + Tonificante Facial
Código del producto: MFR01G

Entrada: 5.0V  1000mA 

Batería: Li-Ion 3.7V 2000mAh



© MAGNITONE 2023

Marca registrada, propiedad de:
HSNF Ltd., Londres, N10 2JE, Reino Unido. HSNF IE Ltd., Dublin 7, D07 P4AX,
Irlanda.

Made / Fabriqué / Prodotto / Hecho / Hergestellt / Wyprodukowano /
Vervaardigd in China.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 x FaceRocket® Dispositivo 5 en 1 Reafirmante + Tonificante Facial
- 1 x LiftOff Gel Superconductor Prepare + Glide 60ml e
- 1 x Cable de carga USB

REGISTRO DE GARANTÍA

Su dispositivo está protegido por una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra. Debe registrar su dispositivo para validar la garantía.

Escanee el código QR para registrar su garantía y disfrutar de 12 meses más de cobertura. Es decir, ¡2 años en total!

Esta garantía no cubre los fallos o defectos causados por:

- Fallos derivados de la omisión de las instrucciones de funcionamiento y limpieza.
- Manipulación imprudente o uso indebido.
- Daños ocasionados durante el transporte.
- Alteraciones, reparaciones o ajustes realizados por personas ajenas a nuestros ingenieros de producto cualificados.



SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

help@magnitone.co.uk
www.magnitone.co.uk

ADVERTENCIAS

Consiga una piel con un aspecto y textura de ensueño con FaceRocket®, lo último en reafirmación y tonificación facial. Clínicamente probado para mejorar la firmeza de la piel en un 29%, la densidad dérmica en un 35% y reducir las arrugas en un 10%, FaceRocket ofrece resultados reales en sólo 4 semanas.*

FaceRocket® está destinado a la estimulación facial y está indicado únicamente para uso cosmético. No es un dispositivo médico y no debe utilizarse para tratar ninguna afección médica. Cualquier consecuencia derivada de un uso incorrecto, de la aplicación en otras partes del cuerpo, de la conexión a fuentes de tensión inadecuadas, de elementos de contacto sucios o de cualquier otra aplicación o uso inadecuados no es responsabilidad de HSNF Ltd ni de sus filiales.

Algunos usuarios pueden encontrar la sensación bastante fuerte, especialmente en comparación con otros productos de microcorriente que hayan utilizado. Durante el uso de MAGNITONE FaceRocket® puede producirse una sensación de hormigueo (como una pequeña descarga eléctrica) y algunas contracciones musculares involuntarias. Bajar el ajuste del modo puede reducir o eliminar esta sensación. Si le resulta incómodo, le sugerimos que utilice un ajuste de potencia más bajo. Normalmente, esta sensación desaparece después de los primeros usos. Si experimenta algún dolor o molestia, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

**Estudio independiente de 32 personas de entre 33 y 50 años. Resultado medio obtenido con un uso regular durante 4 semanas.*



- Sólo para uso facial.
- Pueden producirse efectos adversos si no se siguen las instrucciones.
- La aplicación prolongada o repetida en una misma zona puede dañar la piel.
- **NO** utilizar sobre los ojos (músculo circular del reborde orbitario), sobre o alrededor de las glándulas tiroideas (línea media del cuello, delante y a ambos lados de la tráquea), en las sienes (encima de la oreja), los pechos o la ingle.
- **NO** aplique la estimulación sobre el pecho, ya que la penetración de corriente eléctrica en el pecho puede provocar alteraciones rítmicas en el corazón, que pueden ser mortales.
- **NO** utilice el dispositivo junto con productos cosméticos de base inflamable, a menos que estén recomendados por el fabricante.
- Cuando se utilice en la papada, se debe tener cuidado de minimizar el tratamiento directamente sobre la línea media del cuello, evitando específicamente la tiroides.
- Puede percibirse una luz intermitente durante el uso de su FaceRocket®, resultante de la estimulación de la zona ocular. Si percibe esta afección constantemente sin el uso de su dispositivo, interrumpa el uso y busque consejo médico.
- Algunos usuarios pueden experimentar un sabor metálico en la boca durante el uso del dispositivo, resultante de la estimulación y sensibilidad variable alrededor de la boca. Si lo nota constantemente sin utilizar el dispositivo, interrumpa su uso y consulte a un médico.

CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE USARLO SI PADECE ALGUNA ENFERMEDAD CUTÁNEA SUBYACENTE.

CONTRAINDICACIONES

NO USAR SI:

- Tiene zonas en las que la integridad de la piel está dañada (como quemaduras, ampollas, lesiones, incisiones, heridas, enfermedades o infecciones cutáneas activas); padece una enfermedad o inflamación cutánea, tiene la piel sensible o una reacción alérgica.
- Tiene antecedentes de epilepsia o convulsiones.
- Ha sido sometido recientemente a una intervención quirúrgica o a otros procedimientos quirúrgicos.
- Tiene algún dispositivo electrónico implantado, como un marcapasos cardíaco.
- Utiliza un dispositivo médico corporal, como una bomba de insulina.
- Padece algún tipo de cáncer activo o se ha recuperado o tratado recientemente de alguna lesión sospechosa o cancerosa.
- Está embarazada.
- Está bajo el cuidado de un médico por cualquier condición médica (consulte con su médico antes de utilizar este dispositivo).
- Tiene antecedentes conocidos de enfermedad de la arteria carótida, accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio (AIT), estenosis carotídea, tensión arterial inestable, facilidad para desmayarse, enfermedad tiroidea o intervenciones quirúrgicas previas en la zona del cuello.
- Tiene tendencia a las hemorragias tras lesiones agudas o fracturas óseas.
- Lleva implantes no compatibles con su uso.
- Este dispositivo no debe ser utilizado por o en personas menores de 18 años.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- **NO** sumerja el dispositivo en agua.
- **NO** deje caer el producto ni lo utilice indebidamente.
- **NO** manipule el dispositivo ni el cargador con las manos mojadas.
- **NO** utilice el dispositivo si está dañado.
- **NO** desmonte ni intente reparar el producto.
- **NO** coloque el producto bajo la luz directa del sol ni exponga la batería a altas temperaturas o a equipos que generen calor. El uso de este producto puede afectar a otros equipos eléctricos cercanos.
- **NO** puentee ni retire el mecanismo de seguridad integrado en el dispositivo.
- Asegúrese de que el dispositivo está desconectado del cable de carga USB antes de utilizarlo.
- El dispositivo DEBE conectarse únicamente a la tensión extra baja de seguridad correspondiente a la marca del dispositivo.
- Estrictamente para uso externo.

LIMPIEZA + ALMACENAMIENTO

La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Asegúrese de que el dispositivo está desconectado del cable de carga USB antes de limpiarlo. Utilice una toalla ligeramente húmeda para limpiar el dispositivo y séquelo con un paño suave.

RECICLAJE + ELIMINACIÓN

Al final de la vida útil de su MAGNITONE FaceRocket® no debe desecharse con otros residuos domésticos o comerciales. Cuando ya no vaya a utilizar el producto, deséchelo de acuerdo con el procedimiento de reciclaje de las autoridades locales.




CARGA DEL DISPOSITIVO

Antes de su primer uso, cargue su FaceRocket®. Conéctelo a cualquier toma USB de un enchufe u ordenador para cargar el dispositivo. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, las luces se iluminarán en verde.

La duración de la carga de la batería del FaceRocket® depende totalmente del tiempo que lo utilice, del modo y del nivel (por ejemplo, la radiofrecuencia consume mucha más energía que la crioterapia). Si utiliza el dispositivo a diario, es probable que tenga que cargarlo al menos una vez a la semana.

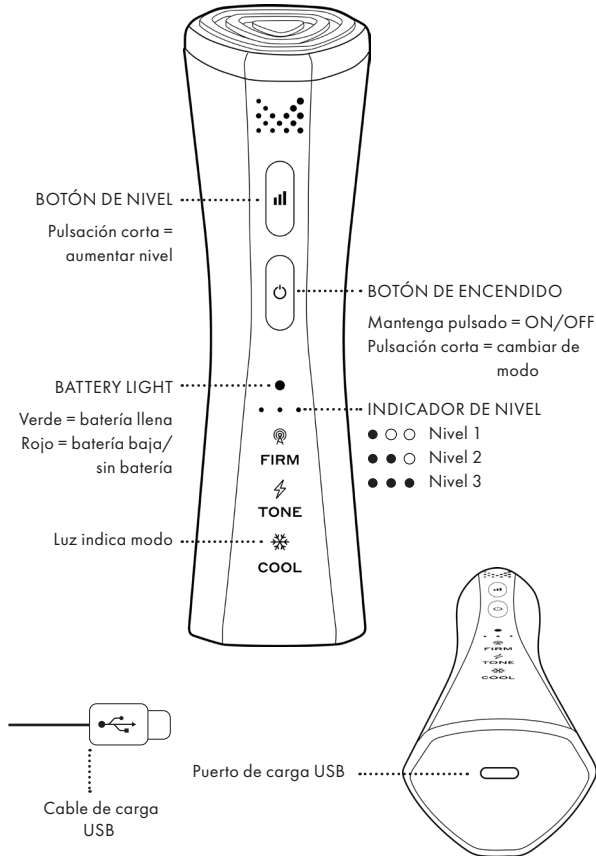


PARTES Y ACCESORIOS



TECNOLOGÍAS

FaceRocket® utiliza una combinación de tecnologías, todas ellas diseñadas para conseguir un aspecto más firme, luminoso y terso.

 RADIOFRECUENCIA	<p>Las ondas de radio calientan por debajo de la superficie de la piel para estimular la producción de colágeno y elastina, lo que se traduce en una piel más firme.</p> <p>42°C</p>
 MICROCORRIENTE	<p>Pequeños impulsos de electricidad estimulan la contracción de los músculos faciales, fortaleciéndolos y tonificándolos, lo que ayuda a elevar el rostro.</p> <p>300 - 500 mA</p>
 TERAPIA DE LUZ LED ROJA + VERDE	<p>Las ondas de luz roja penetran bajo la superficie de la piel para estimular la producción de colágeno y elastina.</p> <p>Las ondas de luz verde penetran bajo la superficie de la piel para estimular el flujo sanguíneo, ayudando a que la piel luzca más radiante.</p> <p>Red: 630 - 680 nm / Green: 475 - 545 nm</p>
 CRIOTERAPIA	<p>Refresca y calma la piel, reduce las bolsas y favorece el drenaje linfático.</p> <p>4°C</p>
 MASAJE SÓNICO	<p>Las suaves vibraciones estimulan a nivel subcutáneo, mejorando la circulación sanguínea y el drenaje linfático.</p>

MODO	TECNOLOGÍAS	NIVELES
 FIRM	<ul style="list-style-type: none"> Radiofrecuencia Led rojo 	n/a
 TONE	<ul style="list-style-type: none"> Microcorriente Led rojo 	<ol style="list-style-type: none"> ~ 300 mA ~ 400 mA ~ 500 mA
 COOL	<ul style="list-style-type: none"> Crioterapia Led verde Masaje sónico 	<ol style="list-style-type: none"> Sin masaje Masaje 1 Masaje 2

CÓMO UTILIZAR FACE ROCKET®

ANTES DE EMPEZAR

Asegúrese de haber leído y comprendido todas las advertencias, precauciones e instrucciones antes de empezar.

Hágase la foto del "antes". Acuérdesse de hacer una foto del "antes" a su rostro limpio, sin maquillaje, en una habitación bien iluminada. Tómese fotos cada semana en el mismo lugar y posición para seguir sus progresos. Puede que no note los cambios a diario, pero hacerse selfies regularmente le ayudará a ver la diferencia.

Comparta su experiencia con nosotros en las redes sociales: utilice el hashtag **#FaceRocket**

 [magnitoneofficial](#)

 [magnitonelondon](#)

 [magnitoneskincare](#)

 [youtube.com/c/MAGNITONELondon](https://www.youtube.com/c/MAGNITONELondon)

FRECUENCIA DE USO


























Para mejores resultados, siga nuestro Programa Facial de 28 Días. Este calendario diario le guiará durante los primeros 28 días de tratamiento. Utilice el calendario de la página siguiente o escanee el código QR para descargar e imprimir el suyo.

























Una vez finalizados los 28 días, mantenga los resultados utilizando el modo FIRM al menos una vez a la semana y el modo TONE de 1 a 3 veces a la semana. El modo COOL puede utilizarse a diario, según se requiera.

FACEROCKET®

PROGRAMA FACIAL DE 28 DÍAS


0  BEFORE YOU BEGIN	1  	2 	3 
KEY  HÁGASE UN SELFIE	8 	9 	10  
 Modo FIRM 5-10 minutes	15 	16  	17 
 Modo TONE 3-5 minutes	22  	23 	24 
 Modo COOL 1-3 minutes	25  	26 	27 
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Nivel 1 <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Nivel 2 <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Nivel 3			

4  	5 	6 	7  
11 	12 	13  	14 
18 	19  	20 	21 
25  	26 	27 	28  

FIRM


RADIOFRECUENCIA + TERAPIA DE LUZ LED ROJA

Reafirme + tense la piel con Radiofrecuencia + LED Rojo, trabajando juntos bajo la superficie para estimular la producción de colágeno + elastina. No utilice el Modo FIRM más de una vez cada 3 días.

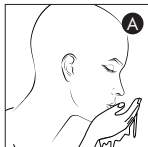

1. Antes de empezar, asegúrese de que su piel está completamente limpia, sin maquillaje, aceites superficiales ni suciedad diaria (A). (Los hombres deben afeitarse antes del tratamiento, ya que el vello facial puede interferir con la conductividad).


IMPORTANTE: Cualquier crema, loción, autobronceador u otros productos a base de aceite sobre la piel pueden bloquear la radiofrecuencia.

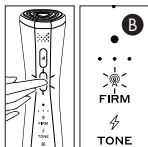

Recomendamos una doble limpieza completa; pruebe nuestras Toallitas Limpiadoras de Microfibra WipeOut Amazing para retirar el maquillaje y la suciedad superficial y, a continuación, potencie su segunda limpieza con uno de nuestros galardonados cepillos limpiadores.




2. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el FaceRocket®. Se iniciará automáticamente en modo FIRM (B).

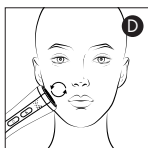


3. Mientras el dispositivo se calienta, aplique una capa generosa de Gel Superconductor sobre la piel (C). Puede aplicarlo en todo el rostro o sección por sección, y volver a aplicarlo a lo largo del tratamiento según sea necesario.

IMPORTANTE: Debe utilizar un Gel Superconductor para facilitar que la radiofrecuencia llegue a la capa subcutánea de la piel. Sin él, el tratamiento no funcionará.

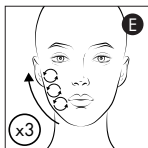


4. Empezando por la barbilla, coloque el cabezal del FaceRocket® a ras de la piel y muévalo suavemente con pequeños movimientos circulares (D). Después de 5 segundos oír un pitido, esto significa que debe pasar a la siguiente sección de su cara. Mantenga siempre el

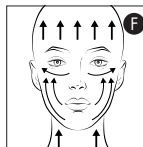


FaceRocket® en movimiento en el modo FIRM. NO lo mantenga en un solo lugar.

5. Recorra la línea de la mandíbula hasta la oreja en un lado de la cara (E) y repita esta sección de la cara 2 veces más. En total, 3 repeticiones.
6. Utilizando esta misma técnica, pase a la siguiente sección de la cara y continúe trabajando alrededor de la cara (F):
 - De la comisura de los labios a la oreja.
 - Zona de debajo de los ojos/pómulos hasta la oreja (NO utilizar en los párpados/zona delicada de los ojos).
 - Frente.
 - Debajo de la barbilla.

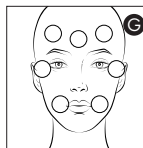

Aplique más gel según sea necesario.

7. Una vez que termine con todo el rostro, puede volver atrás y trabajar en cualquier zona problemática específica, como la línea de la sonrisa, las arrugas del entrecejo o las patas de gallo (G). Para ello, mueva suavemente el FaceRocket® con pequeños movimientos circulares durante 15 segundos (3 pitidos de 5 segundos).
8. Cuando haya terminado, retire el exceso de gel con un paño limpio y húmedo (H) y complete su rutina de cuidado de la piel con normalidad.
9. Limpie el cabezal de su FaceRocket® con un paño húmedo (I). NO lo enjuague con agua.

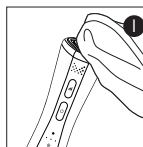


TONE MICROCORRIENTE + TERAPIA DE LUZ LED ROJA  

Lifting, tonificación y contorno con microcorriente. Pequeños impulsos eléctricos estimulan los músculos faciales, fortaleciéndolos y tonificándolos.


En el modo TONE, NO utilice FaceRocket® sobre los ojos (el músculo circular situado dentro del reborde orbitario), sobre o alrededor de las glándulas tiroideas (línea media del cuello, delante y a ambos lados de la tráquea), en las mamas (encima de la oreja), los pechos o la zona de la ingle. Asegúrese de haber leído y comprendido todas las ADVERTENCIAS antes de empezar.

El Modo TONE puede utilizarse a diario. Para obtener los mejores resultados, utilícelo de 2 a 3 veces por semana.

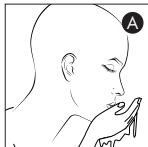

1. Antes de empezar, asegúrese de que su piel está completamente limpia, sin maquillaje, aceites superficiales ni suciedad diaria (A). (Los hombres deben afeitarse antes del tratamiento, ya que el vello facial puede interferir con la conductividad).

IMPORTANTE: Cualquier crema, loción, autobronceador u otros productos a base de aceite sobre la piel pueden bloquear la radiofrecuencia.


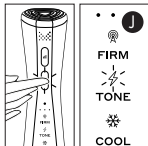


Recomendamos una doble limpieza completa; pruebe nuestras Toallitas Limpiadoras de Microfibra WipeOut Amazing para retirar el maquillaje y la suciedad superficial y, a continuación, potencie su segunda limpieza con uno de nuestros galardonados cepillos limpiadores.




2. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el FaceRocket®. 2. Pulse de nuevo el botón de encendido para seleccionar el modo TONE (J).

FaceRocket® en el modo TONE comenzará en el nivel 1 de intensidad de microcorriente. Comience siempre en el nivel 1 y vaya aumentando la intensidad después de algunos tratamientos. Pulse el botón Nivel para aumentar la intensidad.

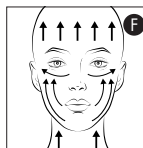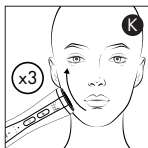

3. Aplique una capa generosa de Gel Superconductor sobre la piel (C). Puede aplicarlo en todo el rostro o sección por sección, y volver a aplicarlo a lo largo del tratamiento según sea necesario.

IMPORTANTE: Debe utilizar un Gel Superconductor para facilitar que la microcorriente llegue por debajo de la superficie de la piel. Sin él, el tratamiento no funcionará.

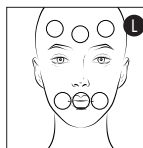


4. Empezando por la barbilla, coloque el cabezal del FaceRocket® a ras de la piel y deslícelo suavemente a lo largo de la mandíbula, hasta la oreja (K), hasta que oiga un pitido. Repita esta sección de su cara 2 veces más. Así realizará 3 "repeticiones" en total.



5. Utilizando esta misma técnica, pase a la siguiente sección de la cara y continúe trabajando alrededor de la cara (F):

- De la comisura de los labios a la oreja.
- Zona de debajo de los ojos/pómulos hasta la oreja (NO utilizar en los párpados/zona delicada de los ojos).
- Frente.
- Debajo de la barbilla.

Aplique más gel según sea necesario.

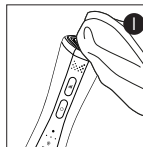


6. Una vez terminado el tratamiento en todo el rostro, puede volver atrás y trabajar en zonas problemáticas concretas, como los labios, las líneas de expresión o las arrugas del entrecejo (L). Para ello, mantenga FaceRocket® en un lugar durante un máximo de 15 segundos (3 pitidos de 5 segundos).
7. Cuando haya terminado, retire el exceso de gel con un paño limpio y húmedo (H) y complete su rutina de cuidado de la piel con normalidad.
8. Limpie el cabezal de su FaceRocket® con un paño húmedo (I). NO lo enjuague con agua.


COOL **CRIOTERAPIA + TERAPIA DE LUZ LED VERDE + MASAJE SÓNICO**

La crioterapia refrescante calma y reduce las bolsas, mientras que el LED verde y el masaje sónico estimulan el flujo sanguíneo, ayudan al drenaje linfático y mejoran la luminosidad.

El Modo COOL puede utilizarse a diario, tantas veces como se desee o necesite. Se puede utilizar junto con los otros 2 modos. Para obtener mejores resultados, utilícelo después de los tratamientos FIRM o TONE.

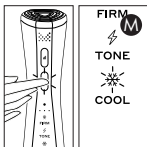

1. Asegúrese de que su piel está limpia y desmaquillada.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el FaceRocket®. Vuelva a pulsar el botón de encendido das veces para seleccionar el modo COOL (M). Pulse el botón de nivel para elegir el ajuste de masaje:
 - a. Sólo crioterapia + terapia de luz LED verde.
 - b. Crioterapia + Terapia de Luz LED Verde + Masaje Sónico 1.
 - c. Crioterapia + Terapia de Luz LED Verde + Masaje Sónico 2.

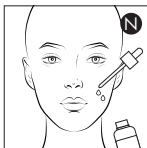


3. Sin embargo, para obtener mejores resultados, aplique una capa generosa de un sérum nutritivo (N), como ácido hialurónico o vitamina C (no incluidos), para ayudar al dispositivo FaceRocket® a deslizarse e hidratar la piel. Esto es opcional y el Modo COOL puede utilizarse sin ningún producto.



4. Empezando por la barbilla, coloque el cabezal del FaceRocket® a ras de la piel y deslícelo suavemente a lo largo de la mandíbula, hasta la oreja (K), hasta que oiga un pitido.

Opcional - Repita esta sección de su cara 2 veces más. Así hará 3 "repeticiones" en total.

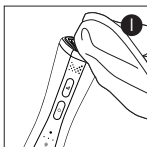

5. Si tiene alguna zona en la que desea enfocarse, puede mantener el dispositivo ahí durante un máximo de 15 segundos, quieto o con pequeños movimientos circulares.
6. Cuando termine, el sérum debería haberse absorbido. Complete su rutina de cuidado de la piel con protector solar y crema hidratante.
7. Limpie el cabezal de su FaceRocket® con un paño húmedo (I). NO lo enjuague con agua.

MAGNITONE
LONDON**LIFT OFF GEL SUPERCONDUCTOR
PREPARE + GLIDE**

Este gel superconductor a base de agua se desliza fácilmente y garantiza la correcta administración de microcorriente y radiofrecuencia en las capas más profundas de la piel.

INSTRUCCIONES DE USO

Compruebe si su piel es sensible al gel LiftOff Prepare + Glide. Aplique una cantidad de gel del tamaño de un guisante en la parte inferior del antebrazo y déjelo actuar durante 15-20 minutos antes de retirarlo. Si se produce una reacción (erupción o enrojecimiento), póngase inmediatamente en contacto con MAGNITONE para que le recomienden productos alternativos. No debe comenzar el tratamiento con MAGNITONE FaceRocket® hasta que encuentre un gel adecuado.

Asegúrese de que su piel está limpia y seca. Aplique una capa generosa del gel en todas las zonas de tratamiento, inmediatamente antes de utilizar el dispositivo FaceRocket®. Limpie o aclare después del uso.

INGREDIENTES

Aqua (agua), Carbómero, Glicerina, Metilparabeno, Propilparabeno, Propilenglicol, Hidróxido de sodio

PRECAUCIONES

Sólo para uso externo. No utilizar sobre la piel irritada o dañada. En caso de erupción o irritación, interrumpa su uso. Evitar el contacto con los ojos.

**ALMACENAMIENTO**

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y con la tapa bien cerrada.

¡COMPARTIR ES VIVIR!

Nos encanta ver vuestras fotos y vídeos. Haz una foto, graba un vídeo, etiquétanos en las redes sociales y lo compartiremos.

 [magnitoneofficial](#)

 [magnitonelondon](#)

 [magnitoneskincare](#)

 youtube.com/c/MAGNITONELondon

Asegúrate de etiquetarnos y utilizar **#NoFilterSkincare**.

NUESTRA PROMESA

Creemos que toda piel es bella.

Las líneas, las manchas, las pecas, los granos... son lo que nos hace únicos y nos hace humanos. Queremos representar a personas y pieles reales, por lo que prometemos que todas nuestras imágenes están 100% sin retocar.

Nuestros dispositivos y productos para el cuidado de la piel son simplemente herramientas que te ayudan a sentirte segura de ti misma en la preciosa piel que tienes.

xoxo

Busca el
sello

