

## RÉSULTATS

Les utilisateurs du HairMax remarqueront tous ou une partie des avantages suivants:

- ✓ Nouvelle croissance des follicules dormants
- ✓ Diminution substantielle de chute de cheveux
- ✓ Vitesse accrue de croissance des cheveux
- ✓ Maniabilité accrue de la chevelure
- ✓ Une meilleure qualité générale de l'état des cheveux



# HAIRMAX®

HAIRMAX.COM

Appeler 24/7

1.800.9REGROW (734769)



LEXINGTON INTL., LLC  
777 YAMATO ROAD, SUITE 105  
BOCA RATON, FL 33431  
T. +1.561.417.0200 F. +1.561.892.0747

## QUESTIONS ET RÉPONSES

### Q: Qui est le meilleur candidat pour le HairMax®?

R: HairMax peut être utilisé par les hommes et les femmes (Model Lux 9 pour les femmes) montrant un éclaircissement des cheveux ou une calvitie causée par une affection héréditaire. Les médecins utilisent un système connu sous le nom de classification de Norwood-Hamilton (hommes) et l'Echelle de Ludwig-Savin (femmes) pour décrire le niveau de perte de cheveux. Votre médecin peut discuter avec vous si le HairMax est approprié pour le traitement de votre condition.

### Q: Combien de fois dois-je utiliser le HairMax®?

R: Il est recommandé d'utiliser le HairMax 3 fois par semaine avec au moins une journée entre chaque traitement. Selon le modèle, le temps de traitement total varie de 8 à 15 minutes.

### Q: HairMax peut-il être utilisé avec d'autres médicaments?

R: Oui, il n'y a pas de contre-indications à l'utilisation du HairMax avec d'autres médicaments. Vous devriez, cependant, discuter avec votre médecin et déterminer quelles méthodes de traitement seraient mieux adaptées à votre besoin individuel.

### Q: Est-ce que les résultats s'amélioreront lorsque le HairMax est utilisé plus fréquemment que 3 fois par semaine pendant 15 minutes?

R: Il a été constaté que trois fois par semaine est la quantité optimale d'utilisation nécessaire pour générer le maximum de résultats. L'utilisation de HairMax plus de trois fois par semaine n'a démontré aucun avantage supplémentaire.

### Q: Combien de temps avant que les résultats concrets soient obtenus après utilisation du HairMax?

R: Les résultats varient selon l'utilisateur, mais en général, l'amélioration sera visible après 12 semaines de traitement. Toutefois, étant donné que les cheveux poussent lentement, nous recommandons que le HairMax soit utilisé pendant au moins 20 semaines avant de pouvoir juger des résultats.

### Q: Quel est le meilleur moment pour utiliser le HairMax?

R: Il est préférable d'utiliser le HairMax après la douche. Il peut être utilisé sur le cuir chevelu sec ou humide, mais doit être utilisé avant toute application de gels topiques, ou autres produits capillaires.

## QUESTIONS ET RÉPONSES

À suivre...

### Q: Est-ce qu'une chute additionnelle de cheveux sera enregistrée lors de l'utilisation du HairMax ?

R: Certains utilisateurs ont observé une augmentation à la phase télogène initiale de la chute de cheveux après le début du traitement. C'est un bon signe et cela indique la présence de repousses saines qui bientôt prendront la place des cheveux télogène.

### Q: Quelle est la différence entre les 3 modèles?

R: L'énergie au laser délivré par chacun des mécanismes est la même. La seule différence est dans le temps de traitement nécessaire à chaque session. Plus le mécanisme à des rayons laser moins de temps est nécessaire.

### Q: Combien de fois dois-je charger le HairMax?

R: Le HairMax est équipé d'une batterie intégrée au lithium-ion et une fois complètement chargé (en 2-3 heures), il peut être utilisé pour environ 10 heures continue. Lorsque la batterie doit être rechargée, le HairMax s'éteint. Il est recommandé de toujours retourner le HairMax à la station de chargement après chaque utilisation pour le garder complètement chargée.

### Q: Est-ce que la puissance du laser du HairMax diminue si la batterie n'est pas complètement chargée?

R: Si la puissance du laser diminue elle est due à une batterie faible et l'appareil s'éteindra automatiquement. Il est recommandé que vous portiez le cordon d'alimentation avec vous si vous êtes loin de la station de chargement pour une période de temps prolongée.

### Q: Comment puis-je utiliser le HairMax pour traiter ma chute de cheveux ?

R: Placer le HairMax à plat sur votre cuir chevelu de sorte que les deux rangées d'engrenage touchent votre cuir chevelu. Commencer par déplacer le HairMax à l'encontre de la direction des repousses, de l'avant vers l'arrière. Suite à cela, déplacer le HairMax de la gauche vers la droite. Répétez ces étapes au cours de la durée totale du traitement.

\*Les modèles HairMax Advanced 7, Lux 9, et Professional 12 sont indiqués pour le traitement de l'Alopécie Androgénétique, et la croissance des cheveux chez les hommes qui présentent les classifications Norwood Hamilton de Iia à V et chez les femmes ayant Ludwig (Savin) I-4, II-1, II-2, ou présentent une chute de cheveux au niveau frontal et qui ont les deux types de peau Fitzpatrick I à IV. La lumière Laser - Éviter Toute Exposition Directe Avec Les Yeux.

HAIRMAX®  
The science of hair growth.

## INFORMATION SUR LES PATIENTS

Découverte dans la croissance des cheveux,  
Soins des cheveux et Science Capillaire



## INTRODUCTION

Certains disent que les cheveux font l'homme ou la femme, il a été qualifié notre apothéose et définit notre style, le cadre de notre présentation personnelle. Pour de nombreuses personnes, la perte de cheveux est une expérience frustrante.

Grace au HairMax LaserComb® il y a maintenant un espoir bien-fondé pour ceux qui souffrent de chute de cheveux et de cheveux clairsemés.

Lexington International, LLC a commencé les travaux de développement de la Photothérapie au laser en Australie voilà déjà plus de 20 ans. Depuis lors, la compagnie a été à l'avant -garde de cette technologie émergente. En 2001, le HairMax a été introduit sur le marché et, à partir de son création, plus de 92% des utilisateurs du HairMax sont satisfaits de leurs résultats.

En 2007, basé sur une étude clinique multicentrique, le HairMax a obtenu l'autorisation de commercialisation par la FDA américaine pour le traitement de l'alopecie androgénétique et la promotion de la croissance des cheveux chez les hommes. En 2011, basée sur des études cliniques multicentriques, le HairMax a reçu l'autorisation à la commercialisation par la FDA pour le traitement de l'alopecie androgénétique et de promouvoir la croissance des cheveux chez les femmes.\*

Depuis 2001, il y a eu en tout sept études cliniques réalisées avec 460 sujets et toutes les études ont démontré l'efficacité et l'innocuité du HairMax.

Le HairMax portable est disponible sans prescription et à un seul coût qui offre des avantages à long terme. Il est portable, facile à utiliser, et ne nécessite que trois traitements par semaine. HairMax est même décrit comme "thérapeutique" ou "apaisante" par bon nombre de ses utilisateurs.

Maintenant disponible en 3 modèles différents et commercialisé dans 155 pays, HairMax est en passe de devenir la norme pour le traitement efficace de chute de cheveux.



## COMMENT FONCTIONNE LE HAIRMAX



Les dents de séparation de cheveux pour un chemin dégagé au follicule pileux

Le HairMax® fonctionne sur le principe de la Stimulation PhotoBio, un processus par lequel l'énergie laser est délivré au follicule pileux. Photothérapie au laser stimule les facteurs de croissance dans le follicule pileux. Certains utilisateurs rapportent un certain ralentissement de la chute

de cheveux au début du traitement suivi par la suite d'une croissance rapide et dense des nouvelles repousses. Cela souligne le fait que le HairMax vise effectivement le follicule pileux au niveau des cellules et en quelque sorte accélère le processus de la croissance des cheveux tout en provoquant la croissance d'une repousse plus épaisse (ou terminal) où se trouvait auparavant des cheveux clairsemés ou mourant.



Les données cliniques témoignent de la miniaturisation inversée, l'augmentation du nombre de cheveux par unité folliculaire et prolonge la phase anagène.

## MODE D'UTILISATION

\*Les modèles HairMax Advanced 7, Lux 9, et Professional 12 sont indiqués pour le traitement de l'Alopecie Androgénétique, et la croissance des cheveux chez les hommes qui présentent les classifications Norwood Hamilton de I à V et chez les femmes ayant Ludwig (Savin) I-4, II-1, II-2, ou présentent une chute de cheveux au niveau frontal et qui ont les deux types de peau Fitzpatrick I à IV. La lumière Laser - Éviter Toute Exposition Directe Avec Les Yeux.


Votre fournisseur de soins de santé discutera avec vous si HairMax est approprié pour le traitement de votre condition.

## ETUDES DEMONTRANT L'EFFICACITÉ DE HAIRMAX CHEZ LES FEMMES



En 2010, une étude clinique à double insu a été menée chez les femmes, âgés de 25 à 60 ans souffrant d'alopecie androgénétique à différents sites de recherche à travers le pays. Ces études ont également été réalisées sous strictes directives (BPC - Bonnes

Pratiques Clinique) [GCP - Good Clinical Guidelines] et ont été approuvées par l'IRB (Comité Indépendant d'Evaluation) et supervisées par un CRO (Organisation de Recherche de Contrat). Les sujets ont été randomisés pour HairMax® 9 Lux ou un dispositif de contrôle. Les sujets ont été randomisés pour HairMax® 9 Lux ou un dispositif de contrôle. Les sujets ont utilisé le HairMax pendant 26 semaines et ont été évalués pour tout changement enregistré au niveau de la chevelure utilisant une de mesure de référence. Veuillez trouver ci-après un tableau des résultats.

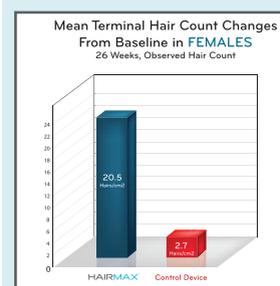

Comme on le voit, ces sujets en utilisant le HairMax ont enregistré une moyenne de 20.5 cheveux par cm<sup>2</sup> (centimètre carré) vs 2.7 cheveux par cm<sup>2</sup> pour le dispositif de contrôle à la fin de l'étude à 26 semaines. Cette figure représente une moyenne, et certains sujets en utilisant le HairMax ont

connu une croissance de plus de 40 poils par cm<sup>2</sup> sur leurs ligne de base. Tandis que les sujets du groupe HairMax ont enregistré une croissance de cheveux à 16 semaines, la croissance des cheveux a augmenté de façon spectaculaire à la fin de l'étude à 26 semaines. Plus important encore, 100% de tous les sujets en utilisant le HairMax ont expérimenté une croissance des cheveux à 26 semaines et pas d'effets secondaires graves n'ont été signalés. Les sujets ont également rapporté avoir vu une augmentation de l'épaisseur et la densité de leur chevelure.

Les résultats de cette étude constituaient un facteur clé de la soumission 510(k) et par conséquent l'autorisation de commercialisation a été accordée en 2011 pour le traitement de la perte de cheveux chez les femmes.\*

## ÉTUDES DEMONTRANT L'EFFICACITÉ DE HAIRMAX CHEZ LES HOMMES




En 2011, deux études cliniques à double insu ont été menées chez les hommes, âgés de 25 à 60 ans souffrant d'alopecie androgénétique en divers sites de recherche à travers le pays. Ces études ont également été réalisées sous strictes directives (BPC - Bonnes

Pratiques Clinique) [GCP - Good Clinical Guidelines] et ont été approuvées par l'IRB (Comité Indépendant d'Evaluation) et supervisées par un CRO (Organisme de Recherche Sous Contrat).

Les sujets ont été randomisés pour recevoir soit le HairMax Advanced 7, le HairMax Lux 9, le HairMax Professional 2 ou un dispositif de contrôle. Les sujets ont utilisé le HairMax pendant 26 semaines et ont été évalués pour tout changement enregistré au niveau de la chevelure utilisant une mesure de référence. Veuillez trouver ci-après un tableau des résultats.

Comme on le voit, ces sujets en utilisant le HairMax ont enregistré une moyenne de 21.6 cheveux par cm<sup>2</sup> (centimètre carré) vs 4.3 cheveux par cm<sup>2</sup> pour le dispositif de contrôle à la fin de l'étude à 26 semaines. Cette figure représente une moyenne, et certains sujets en utilisant le HairMax ont

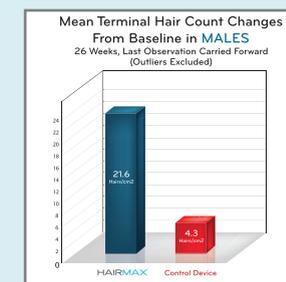

connu une croissance de plus de 50 cheveux par cm<sup>2</sup> sur leurs ligne de base. Plus important encore, plus de 93% de tous les sujets utilisant le HairMax ont expérimenté une croissance des cheveux à 26 semaines et pas d'effets secondaires graves n'ont été signalés. Les sujets ont également rapporté avoir vu une augmentation de l'épaisseur et la densité de leur chevelure.

En 2006, une étude clinique de l'HairMax comparé à une imitation a été soumise à la FDA dans le cadre d'une application pour le 510(k). L'étude visait à évaluer la croissance des cheveux, les changements dans la densité de la chevelure et les risques. Cet étude a montré que le HairMax était efficace et sans risques dans le traitement de la perte de cheveux héréditaire chez les hommes\* et a constitué un facteur clé dans l'octroi de l'autorisation de commercialisation par le FDA en 2007.