

8. ⚠ Advarsel

Bruk CLEANE bare til det formål beskrevet i denne bruksanvisningen. Hvis du opplever noen form for bivirkning, stopp bruken av CLEANE og konsulter lege eller hudspesialist. Konsulter lege hvis du bruker antibiotiske salver eller tabletter som kan gjøre huden overfølsom for varme.

HOLD LADEREN / ADAPTERET UNNA VANN

Ikke oppbevar CLEANE eller laderen på steder hvor den kan utsettes for vann. Hvis CLEANE er plagget inn i strømladeren og faller i vann kan du få et alvorlig elektrisk støt hvis du tar i vannet.

9. ⚠ Sikkerhetsregler

Les bruksanvisningen nøye!

- Bruk CLEANE bare til det formål beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Ikke ta apparatet fra hverandre da dette kan skade produktet.
- Ikke utsett CLEANE for vann eller fuktighet, da det kan ødelegge produktet.
- Ikke bruk CLEANE mens du er i badekar eller dusj.
- Ikke bruk CLEANE når du har våte hender
- Hold behandlingstuppen ren ved å bruke en ren klut eventuelt fuktet med alkohol.

10. Oppbevaring

Oppbevar CLEANE på et tørt sted, og unngå vann. Hold CLEANE unna direkte sollys og høy varme. Hvis CLEANE ikke brukes over lang tid anbefales det å lade den hver tredje måned for å opprettholde batteriets levetid.

11. Sikkerhetsstandarder

CLEANE etterlever følgende sikkerhetsstandarder:

Safety performance EN60601:1990+A1:1993+A2:1995+A13:1996
EMC EN60601-1-2:2001+A1:2006
Biocompatibility ISO10993-10:2002

12. Forsiktighetsregler

- Rens behandlingstuppen med en klut eventuelt fuktet i alkohol.
- Hold CLEANE unna vann og høy varme.

13. Garanti

CLEANE er garantert fri for defekter for en periode på ett år etter kjøpsdato ved normalt bruk. Hvis CLEANE skulle bli defekt i løpet av garantiperioden, kontakt utsalgsstedet eller kundeservice

Telefon: +47 22 41 08 00 e-post: post@ridian.no

Garantien gjelder ikke i følgende tilfeller:

- Skade forårsaket av feilbruk eller om man har tatt apparatet fra hverandre selv.
- Ved bruk av andre ladere enn den medfølgende.
- Hvis man kobler enheten til strømkilde med feil strøm eller spenning.

14. Feilsøking

CLEANE virker ikke når jeg trykker på strømbryteren
Sørg for å holde strømbryteren inne i kun 0,5 sekunder. Sjekk at CLEANE er ladet.

Etter en behandling ønsker jeg å behandle en ny kvise, men CLEANE har slått seg av

Sørg for å holde strømbryteren inne i kun 0,5 sekunder, men innen et minutt etter forrige behandling. Hvis du ikke trykker på strømbryteren innen et minutt, slår CLEANE seg automatisk av.

CLEANE slår seg av under en behandling

Det betyr at det er på tide å lade CLEANE. Bruk det medfølgende adapteret som beskrevet i punkt 5. Prøv igjen etter lading. Har du fortsatt problemer, kontakt kundeservice.

Hvordan ser jeg at CLEANE lader?

Når CLEANE lader, lyser den grønne lampen.
Når CLEANE er fulladet lyser den blå lampen.

15. Kundeserviceinformasjon

Kontakt utsalgsstedet eller kundeservice hos Ridian AS:
+47 22 41 08 00 post@ridian.no

Symbol	Explanation
	Forsiktighet - advarsel Forsiktighet - varning Forsigtighed - advarsel
EC REP	Europeisk representant Europeiska representant Europäische repräsentant
	Residuerbar Atervinningsbart Genanvendeligt
	Type B anvendt del Typ B tillämpad del Type B anvendt del
	Separat innsamling av elektriske deler Separat innsamling av elektriske deler Særskilt innsamling af elektriske dele
SN	Serienummer Serienummer Serienummer

EC REP

Dispositivo Medico Servizio di sicurezza GmbH
Corporation Schiffgraben 41, D-30175 Hannover,
Germania.
Come richiesto in allegato 1, "Requisiti Essenziali"
articolo 13.3 della direttiva 93/42/CEE del
Consiglio Europeo datato 14 giugno 1993,
(Giornale ufficiale della Comunità Europea
No.L169/1-43, datato 12 luglio 1993).
La nomina produttore MDSS è il suo
rappresentante autorizzato in Europa. MDSS non
agisce come agente di vendita o del distributore.

Made in Korea
By Medicon

CLEANE

Til fjerning av kviser og akne

Norsk bruksanvisning

Distribuert av:

Ridian AS

Norge/Sverige/Danmark
Tlf: +47 2241 0800

post@ridian.no

Medicon Co.,LTD

1642-5, Wonju medical instrument
venture center Gangwon techno
park 106, Donghwa-Ri, Munmak-Eup
Wonju-Si, Gangwon-Do, Korea

TEL: 82(0)2 3672 1291-1294

FAX: 82(0)2 3672 1295

Customer service : 82 80 200 5941



MEDICON
MEDICON CO.,LTD.
www.medicon.co.kr


Innhold

1. Bruksområde
2. Produktbeskrivelse
3. Spesifikasjoner
4. Hvordan bruke CLEANE
5. Hvordan lade CLEANE
6. Akne typer
7. Kontraindikasjoner
8. Advarsler
9. Sikkerhetsregler
10. Oppbevaring
11. Sikkerhetsstandard
12. Forsiktighetsregler
13. Garanti
14. Feilsøking
15. Kundeserviceinformasjon

1. Bruksområde

CLEANE skal brukes til behandling av mild til moderat betente akner/kviser. CLEANE fjerner akner/kviser med varme- og lysbehandling ved at bakteriene som forårsaker aknene/kvisene steriliseres og drepes.

2. Produktbeskrivelse

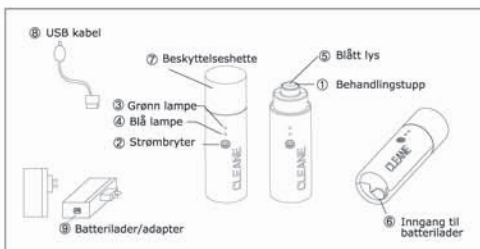

3. Spesifikasjoner

- Dimensjoner: 122 x 155 x 49 mm
- Vekt: 27 g
- Strømkilde: Lithium Ion Polymer batteri
- 3,7V 250mA
- Ekstern strømkilde: AC/DC Adapter (DC inn 5V 0,5A)
- Brukstemperatur: 10°C - 40°C
- Lagringstemperatur: -20°C - 60°C
- Atmosfærisk trykk: 700hPa til 1060hPa
- Luftfuktighet ≤ 85 %
- Behandlingstid 2½ minutt

4. Hvordan bruke CLEANE?



Steg 1

Trykk inn strømbryteren (ca. 0,5 sek). Du vil høre et lydsignal og den grønne lampen lyser. Vent et minutt til tuppen er varmet opp. Ikke trykk på strømbryteren mens tuppen varmes opp.



Steg 2

Etter et minutt høres et nytt lydsignal. Den grønne og blå lampen blinker. Dette indikerer at funksjonssjekken er gjort og tuppen er varmet opp



Steg 3

Trykk på strømbryteren når den grønne og blå lampen blinker. Blått lys kommer nå ut fra behandlingstuppen og temperaturen har nådd riktig behandlingstemperatur.



Steg 4

Press behandlingstuppen lett mot aknen/kvisen i 2½ minutt (nøyaktig 2½ minutt gir best resultat). Under behandlingen høres et lydsignal hvert 3. sekund. Etter 2½ minutt høres et nytt lydsignal og den grønne og blå

lampen blinker i ett minutt. For å behandle neste kvise/akne, trykk på strømbryteren en gang til og gjenta steg 4. Trykker du ikke på strømbryteren slår CLEANE seg av etter ett minutt. Vil du slå av CLEANE hold strømbryteren inne i to sekunder.

Avhengig av hudtype vil du kunne oppleve at huden blir rød rundt det behandlede området. Dette gir seg normalt etter et par timer. Behandlingen kan gjentas flere ganger, men la det gå minst fire timer mellom hver behandling. Du vil kunne se gode resultater allerede etter 24 timer.

5. Hvordan lade CLEANE?



CLEANE lades med USB kabelen som enten kan plugges direkte inn i en PC, eller plugges inn i adapteret som så plugges inn i veggkontakten. Kabelens runde ende plugges så inn i CLEANE på undersiden av apparatet. Når ladingen starter vil den grønne lampen lyse. Når CLEANE er fulladet vil den blå lampen lyse.

6. Akne typer

CLEANE virker på milde til moderate akner/kviser, betente akner/kviser og akner/kviser med puss.

Den er ikke anbefalt for komedoner (hudormer i form av små hvite nupper eller sorte prikker)

Den er heller ikke anbefalt på alvorlig nodulær eller cystisk akne.

7. Kontraindikasjoner

Ikke bruk CLEANE på andre typer hudlesjoner.

Ikke bruk CLEANE på insektstikk eller sår.

Ikke bruk CLEANE hvis din hud er veldig sensitiv mot varme.