


Afin d'obtenir une précision et une durée de vie utile maximales de votre pèse-personne, veuillez lire les instructions suivantes avant de l'utiliser.

Mesures du poids en mémoire (de 01 à 30)

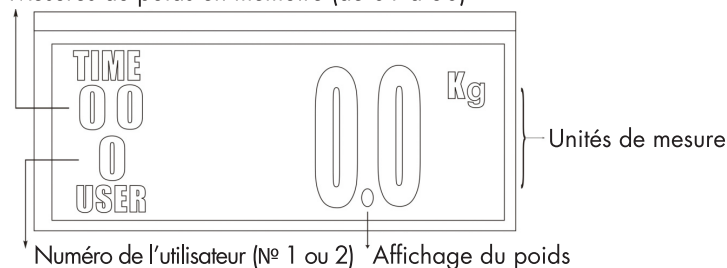

Fonction et caractéristiques

- Fonction vocale (en anglais et en français)
- Mémoire pour 2 utilisateurs (N° 1 ou 2).
- Données mémorisées individuelles : 30 mesures mémorisées pour chaque utilisateur.
- Mise sous tension automatique

Définitions des touches

MODE:

- Mise sous tension [ON] du pèse-personne.
- Affiche la dernière mesure du poids de l'utilisateur.
- La représentation des mesures dans leur ordre chronologique [TIME] revient à "00" lorsque l'on visualise les mesures du poids en mémoire.
- ▲ Sélectionne le numéro de l'utilisateur (N° 1 ou 2).
- Vérifie les mesures en mémoire de l'utilisateur. En appuyant une fois sur cette touche, les mesures historiques stockées subséquentes s'afficheront sur l'écran, une mesure à la fois (de 01 à 30).
NOTE : 01 est la dernière mesure du poids.
- ▼/U – Change l'unité de mesure : kg - lb. Cette touche fonctionne seulement lors de la mise sous tension du pèse-personne et lorsque l'affichage lit "0.0".
- En appuyant une fois sur cette touche ▼/U, les mesures historiques stockées précédentes s'afficheront sur l'écran, une mesure à la fois.

NOTES

1. Lorsque l'affichage clignote, aucune fonction ne peut être utilisée.
2. Assurez-vous de déposer le pèse-personne sur une surface plane.
3. Pour mettre sous tension le pèse-personne, appuyez sur la touche "MODE" ou bien montez sur le pèse-personne.

Pesée sans la fonction de mémorisation

Déposez le pèse-personne sur une surface plane et appuyez sur la touche "MODE" pour le mettre sous tension. Le pèse-personne affichera "0.0"; montez sur la plateforme et votre poids s'affichera puis sera lu vocalement à deux reprises. Vous pouvez aussi mettre sous tension le pèse-personne en montant sur la plateforme campé sur vos jambes et votre poids s'affichera puis sera lu vocalement à deux reprises. Le pèse-personne se mettra hors tension automatiquement après avoir lu vocalement le poids.

Pesée avec la fonction mémoire

Mettez le pèse-personne sous tension et il affichera "0.0". Appuyez sur la touche ▲ et le numéro de l'utilisateur se mettra à clignoter. Appuyez sur la touche ▲ pour sélectionner l'utilisateur (1 ou 2). Attendez 4 secondes; lorsque l'affichage lit "0.0", montez sur la plateforme, votre poids s'affichera et sera lu vocalement à deux reprises. Cette mesure de poids sera mémorisée comme étant la dernière mesure de poids de l'utilisateur. Chaque utilisateur peut mémoriser 30 mesures.

Changement de la langue

Appuyez et tenez enfoncée la touche "MODE" pendant quelques secondes pour mettre sous tension le pèse-personne. "L – 01" ou "L – 02" s'affichera; puis vous pouvez appuyer de nouveau sur la touche "MODE" pour choisir la langue :
"L – 01" en anglais
"L – 02" en français

Visualiser les mesures historiques stockées

Mettez le pèse-personne sous tension et il affichera "0.0"; puis appuyez sur la touche ▲ pour sélectionner l'utilisateur (1 ou 2). Lorsque le pèse-personne affiche "0.0", appuyez sur la touche "MODE", laquelle

affichera la dernière mesure de poids de l'utilisateur. La présentation des mesures dans leur ordre chronologique [TIME] clignotera; appuyez sur la touche ▲ pour visualiser les mesures de poids en mémoire depuis la 1ère jusqu'à la 30e mesure. Lorsque vous visualisez les mesures de poids en mémoire, il n'y aura aucune lecture lue vocalement.

Effacer les mesures en mémoire

Mettez le pèse-personne sous tension et il affichera "0.0"; puis appuyez sur la touche ▲ pour sélectionner l'utilisateur (1 ou 2). Lorsque le pèse-personne affiche "0.0", appuyez sur la touche "MODE", laquelle affichera la dernière mesure de poids de l'utilisateur, puis appuyez simultanément sur les touches "MODE" et "▼/U" pendant quelques secondes; alors toutes les mesures en mémoire seront effacées. Si vous désirez effacer les mesures en mémoire de l'autre utilisateur, remettez le pèse-personne sous tension et répétez la procédure ci-dessus.

Mise en place de la pile

Glissez le couvercle du compartiment de la pile sous le pèse-personne et raccordez une pile de 9 V (non comprise) aux têtes de raccordement distinctives. Remettez en place le couvercle du compartiment de la pile.

Dépannage

1. "Lo" : Indicateur de pile faible, remplacez-la par une pile neuve (non comprise)
2. "OL" : Indicateur de surcharge
3. "Err" : Indicateur de mauvais fonctionnement du pèse-personne

Spécifications techniques

Capacité maximale : 250 kg (550 lb)
Capacité minimale : 2 kg (4,4 lb)
Graduation : 0,1 kg (0,22 lb)
Mode unités de mesure du poids : kg, lb
Capacité mémoire d'utilisateur : 2 utilisateurs
Condition de fonctionnement : Température 0 à 40 °C; H.R. < 85 %
Alimentation : Une (1) pile de 9 V (non comprise)

Notes

1. Déposez le pèse-personne sur une surface plane.
2. Gardez votre pèse-personne dans un endroit sec afin de protéger le dispositif électronique. Évitez un environnement où les températures sont très élevées ou très basses.
3. Le pèse-personne est un produit électronique de haute précision, évitez les fortes secousses et les chocs violents.
4. Pour prévenir les égratignures sur le panneau de verre, ne portez pas de chaussures.
5. Nettoyez le pèse-personne avec un chiffon. N'utilisez pas de solvants. N'immergez pas le pèse-personne dans l'eau.
6. Le produit est conçu pour un usage domestique et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
7. Retirez la pile si le pèse-personne n'est pas utilisé pendant une longue période.

MISE EN GARDE : NE PAS utiliser le pèse-personne parlant avec mesures en mémoire sur un tapis, la précision des mesures pourrait en être affectée. Déposer le pèse-personne uniquement sur une surface sèche et plane.

GARANTIE D'UN AN

Si ce produit se révèle défectueux en raison de vices de matériaux ou de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat, veuillez le renvoyer à l'adresse spécifiée ci-dessous. Le produit sera réparé ou remplacé, sans frais, après réception du produit port payé et d'un montant de 20,00 \$ pour couvrir les frais de manutention, emballage et port de retour. Veuillez inclure une preuve d'achat, vos nom et prénom, adresse, numéro de téléphone de jour ou votre adresse électronique.

MANUFACTURED BY / FABRIQUÉ PAR:

BIOS | Medical

16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE