


ANLAN

Мултифункционален масажор за лице



Ръководство за употреба

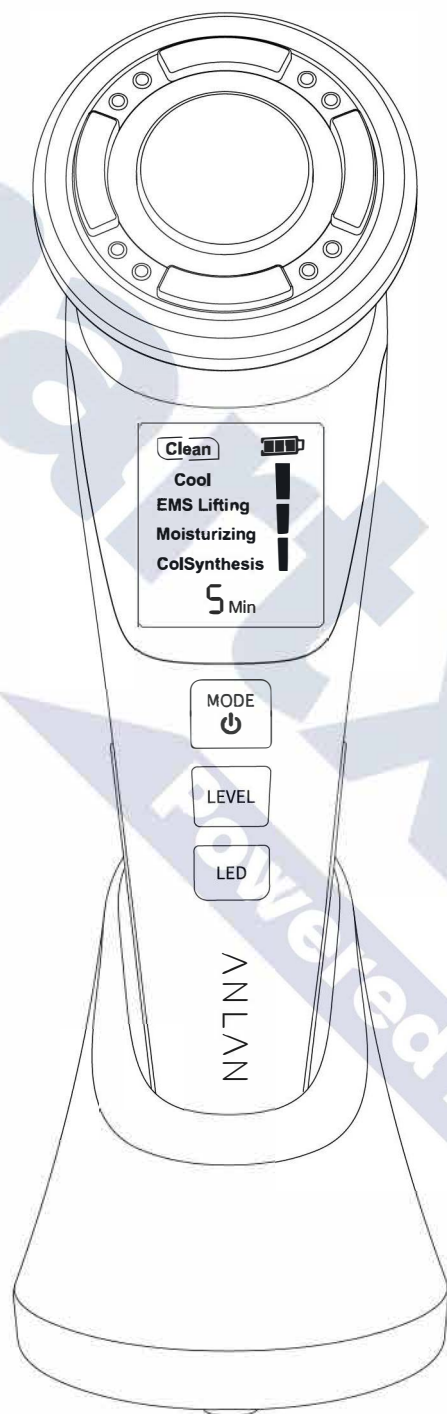





※Този уред не е медицински продукт, използван за диагностика или лечение, а общ предмет от бита. Благодарим Ви, че закупихте мултифункционалния масажор за лице ANLAN. Моля, прочетете внимателно цялото ръководство, преди да го използвате, за да гарантирате правилна и безопасна употреба.


Превенция

За ваша безопасност, моля, прочетете внимателно ръководството.

 Внимание	Неправилната употреба може да доведе до наранявания и/или повреди.
 Внимание	Моля, следвайте инструкциите, за да избегнете нараняване.

 Забранено	 Внимание
	Моля, не използвайте това устройство с друга медицинска електроника.
	<ul style="list-style-type: none">● Малък електромагнитно имплант, като пейсмейкър.● Медицинска електроника за поддържане на живота, като изкуствено сърце/ изкуствен бял дроб.● Преносима медицинска електроника, като устройство за електрокардиограма.
 Забележка	 Внимание
	Моля, консултирайте се с Вашия лекар преди употреба в следните случаи. В противен случай може да възникне злополука или сериозен физически дискомфорт. Потребителят използва продукта на своя отговорност и в зависимост от собственото си физическо състояние.
	<ul style="list-style-type: none">● Лица със сърдечни заболявания.● Лица с остро заболяване.● Лица с висока температура/треска.● Лица, които имат хипотония и/или хипертония.● Лица с инфекциозни заболявания.● Лица с онкологични заболявания● Лица, които имат болки в лицевия нерв.● Бременни лица или наскоро родили.● Лица с дерматит.● Лица с алергия.● Лица с хемофилия.● Лица с диабет.

Наименование на частите

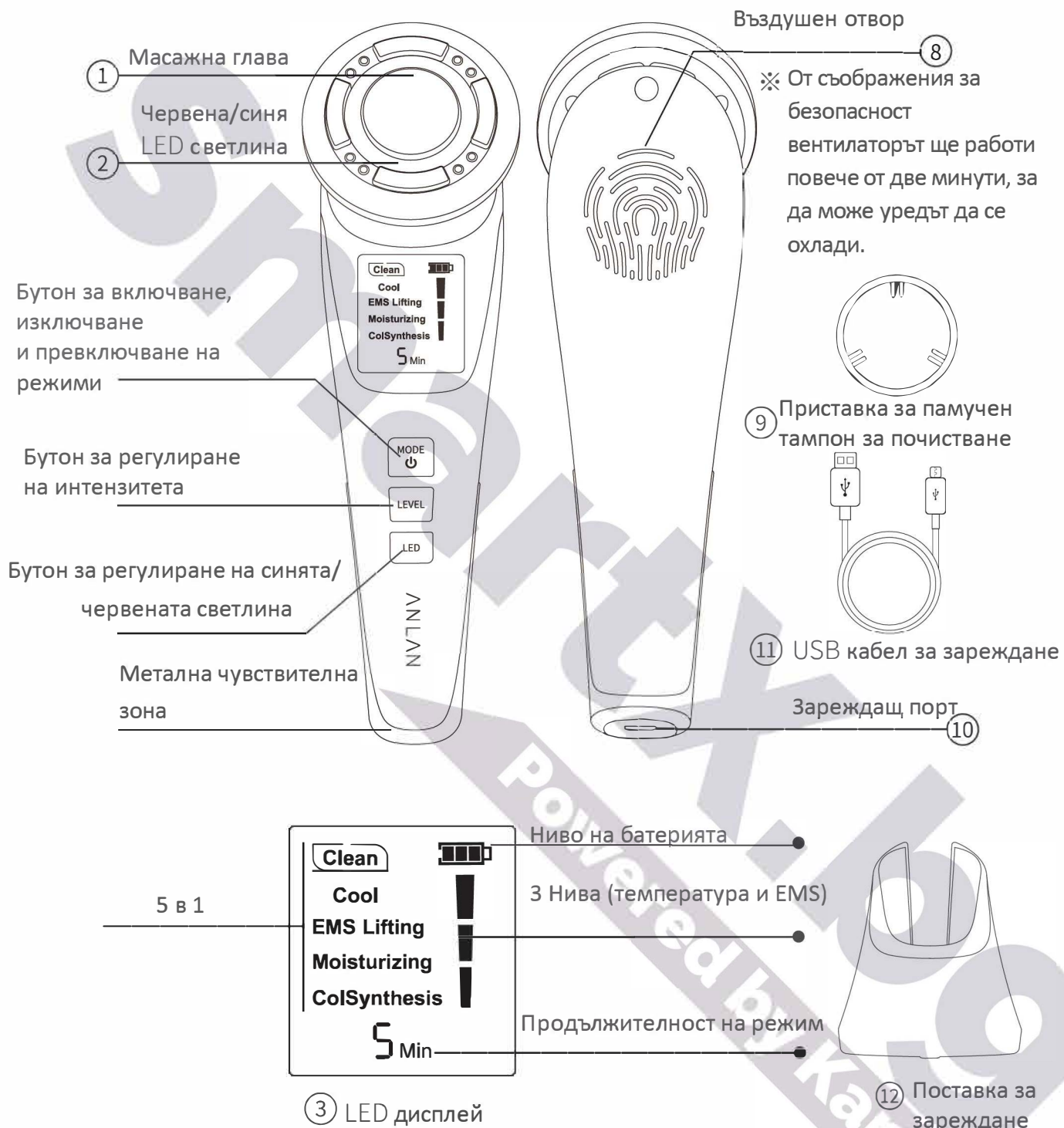

Спецификации

Име: Мултифункционален масажор за лице
Модел: DRY06
Размер на уреда: 175*55*67mm
Размер на поставката: 80*65mm
Нетно тегло на уреда: 140g
Материали: ABS, неръждаема стомана
Честота на вибрациите: 10000(+10%)rpm
Температурен диапазон: 6- 42 °C (± 5 °C)
Мощност: Max 10. 5W
Капацитет на батерията: 1000mAh литиево-йонна батерия
Време за зареждане: 3 часа
Акcesoари: Уред, поставка за зареждане, приставка за памучен тампон за почистване, кабел за зареждане, ръководство за употреба, калъф
Гаранция: 1 година


Комплектът съдържа




Уред *1




Поставка за зареждане *1

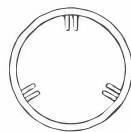

Приставка за памучен тампон за почистване*2

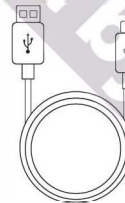

USB кабел за зареждане*1

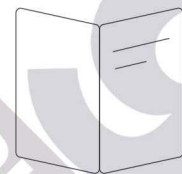

Ръководство за употреба*1

Преди употреба



Преди първата употреба Ви препоръчваме да тествате уреда върху.

Изпробвайте го върху кожата с крем, преди да използвате.



1. Измийте ръката си със сапун, след това избършете с кърпа.



2. Режим "MOIST" и нанесете вашите продукти за грижа за кожата, за да ги тествате.




3. Ако няма дискомфорт след 48 часа, можете да използвате устройството отново.




Забележка

- Моля, отстранете грима си и почистете лицето си преди употреба.
- Не използвайте на едно място повече от 10 секунди.
- Моля, настройте подходяща температура според вашите нужди.
- Уверете се, че докосвате металната чувствителна зона, когато използвате.
- Ако кожата ви е твърде суха, устройството няма да работи.
- Ако изпитате какъвто и да е дискомфорт, спрете да използвате уреда и се консултирайте с лекар.


Как да прикрепите/махнете приставката за памучния тампон

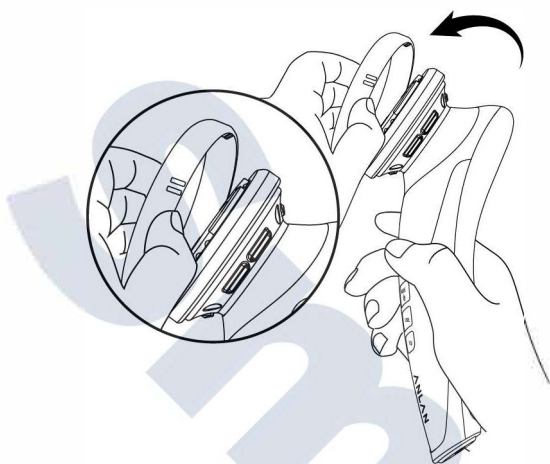

- 1** Отворете болта на ръба и свалете прозрачния пръстен.

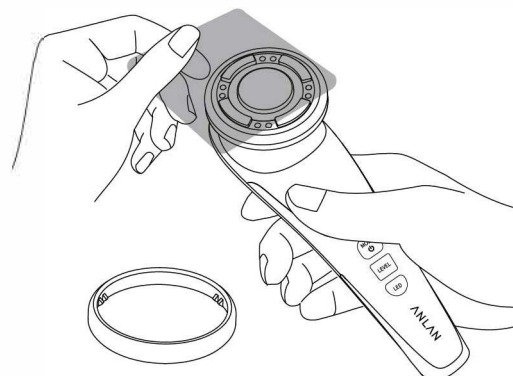

- 2** Поставете памучния тампон за отстраняване на грим върху главата на масажора.

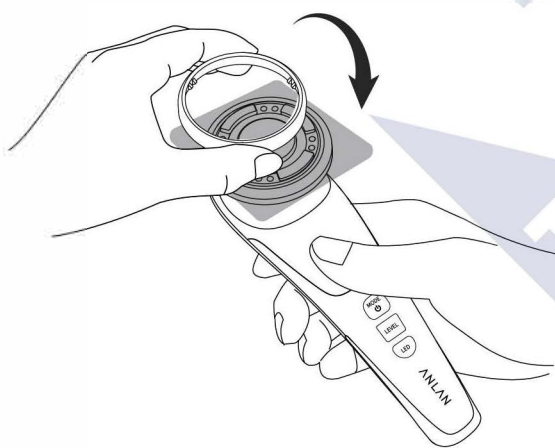

- 3** Поставете прозрачния пръстен.



- 4** Напоете памучния тампон с мицеларна вода или тоник за почистване на лице и включете уреда в режим почистване.

Режими

Не е нужно да спазвате определена последователност при избора на режим, задайте режима и времето според състоянието на кожата и предпочитанията си.

Режим	Комбинация от функции	Препоръчано	Честота на използване	Ниво
Почистване	Горещ компрес синя/червена светлина.	Прикачете памучния тампон с приставката, за да отстраните грима.	Веднъж на ден по 5 минути всеки път.	температура: 3 ниво. (Горещо:38°C-40°C- 42°C)
Охлаждане	Охлаждащ компрес синя/червена светлина	Лосион със стягащо действие.	Веднъж на ден по 2 минути всеки път.	температура: 3 ниво (Хладно: 6°C-8°C-12°C)
EMS Лифтинг	EMS синя/червена светлина	Използвайте с лосион, тоалетно мляко, крем и др.	Веднъж на ден по 5 минути всеки път.	EMS:3 ниво
Овлажняване	EMS горещ компрес синя/червена светлина	Използвайте с лосион, тоалетно мляко, крем и др.	Веднъж на ден по 5 минути всеки път.	EMS:3 ниво (Горещо:38°C-40°C- 42°C)
Синтез на колаген	EMS охлаждащ компрес синя/червена светлина	тоалетно мляко, крем и др.	Веднъж на ден по 2 минути всеки път.	EMS:3 ниво (Хладно:6°C-8°C-12°C)


Как да използвате

Почистване веднъж дневно

- 1 Измийте лицето си както обикновено.



- 2 Поставете памучния тампон върху масажната глава с фиксиращия пръстен и след това напоете памучния тампон с мицеларна вода или тоник (не използвайте емулсия или гел). Ако използвате само вода или минерална вода, може да не постигнете желаните ефекти.

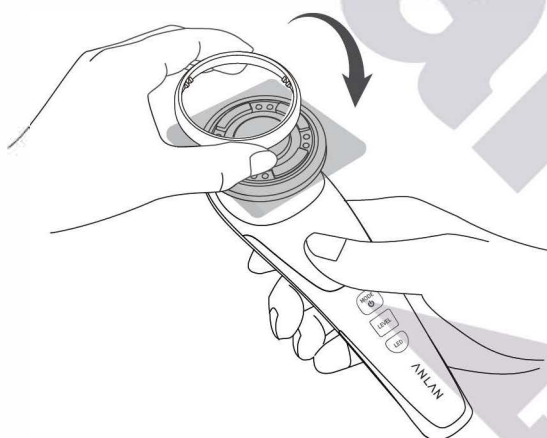


3




Натиснете бутона за включване (натиснете продължително за 3 секунди, за да стартирате) режима на почистване по подразбиране на интензитета, вибрациите и топлината на уреда за красота. (38°C)



Натиснете бутона, за да изберете температурата. (38°C- 40°C- 42°C)

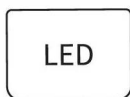

Натиснете бутона, за да изберете режим на синя/червена светлина.

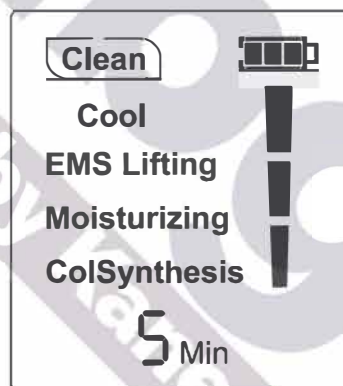

- 4 Хванете устройството и докоснете металната чувствителна зона. Поставете устройството близо до лицето си, но го премествайте отвътре навън леко и бавно.

Съвети за насочване:

- ① Чело: от долу нагоре
- ② Нос: от горе надолу
- ③ Лице: отвътре навън
- ④ Близо до устата: Почистете в кръг
- ⑤ Филтрум: само напред-назад
- ⑥ Брадичка: от горе надолу



- 5 След употреба отстранете памучния тампон и избършете устройството с мека кърпа/хартиена кърпа.



Охлаждане веднъж дневно

- 1 След като измиете лицето си, нанесете серум равномерно върху цялото лице.



2




Натиснете бутона за включване/ превключване на режим, за да активирате в режим «Охлаждане».



Натиснете бутона, за да изберете температурата. (6°C- 8°C- 12°C)



Натиснете бутона, за да изберете режим на синя/червена светлина.

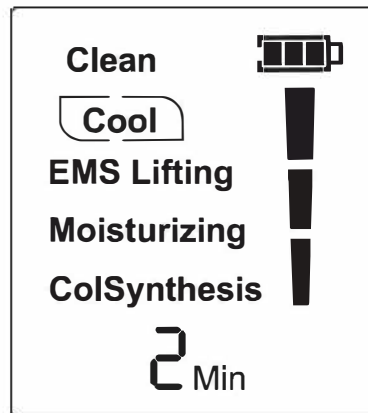

3

Хванете устройството и докоснете металната чувствителна зона. Поставете устройството близо до лицето си и го преместете отвътре навън леко и бавно.


Съвети за насочване:

- ① **Чело:** от долу нагоре
- ② **Нос:** от горе надолу
- ③ **Лице:** отвътре навън
- ④ **Близо до устата:** Почистете в кръг
- ⑤ **Филтрум:** само напред-назад
- ⑥ **Брадичка:** от горе надолу



4

След употреба извършете устройството с мека кърпа/ хартиена кърпа.

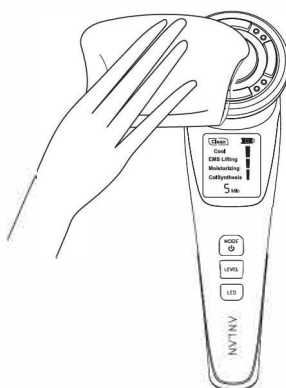

5

Ако не продължите с друг режим след приложението режим «Охлаждане», можете да нанесете продуктите за грижа за кожата, които използвате по принцип.



EMS лифтинг веднъж на ден по 5 минути всеки път

- 1 След измиване на лицето нанесете стягащ лосион върху кожата.




- 2 Натиснете бутона за включване/превключване на режим, за да активирате в режим EMS лифтинг.



Натиснете бутона, за да изберете нивото на EMS.

Натиснете бутона, за да изберете режим на синя/червена светлина.

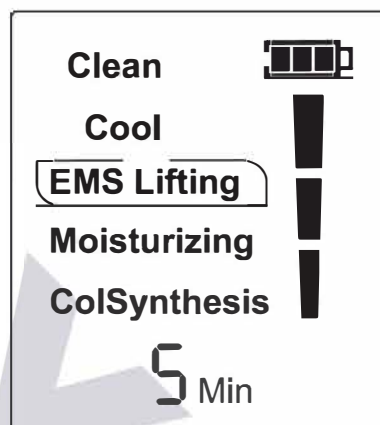

- 3 Хванете устройството и докоснете металната чувствителна зона. Поставете устройството близо до лицето си и го преместете отвътре навън леко и бавно.

Съвети за насочване:

- 1 **Чело:** от долу нагоре
- 2 **Нос:** от горе надолу
- 3 **Лице:** отвътре навън
- 4 **Близо до устата:** Почистете в кръг
- 5 **Филтрум:** само напред-назад
- 6 **Брадичка:** от горе надолу



- 4 След употреба избършете устройството с мека кърпа/ хартиена кърпа.



- 5 Ако не продължите с друг режим след приложението режим «EMS Lifting», можете да нанесете продуктите за грижа за кожата, които използвате по принцип.




Овлажняване веднъж на ден по 5 минути всеки път

- 1 След измиване на лицето нанесете стягащ лосион или крем върху кожата.



- 2
- MODE**
[Power icon]
- Натиснете бутона за включване, за да преминете към режим на **Овлажняване**.
- LEVEL**
- Натиснете бутона, за да изберете температурата. (38°C-40°C-42°C)
- LED**
- Натиснете бутона, за да изберете режим на синя/червена светлина.

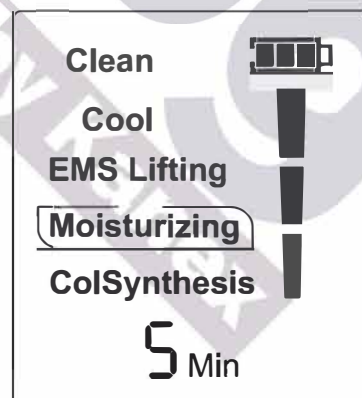


- 3 Хванете устройството и докоснете металната чувствителна зона. Поставете устройството близо до лицето си, но го преместете отвътре навън леко и бавно.

Съвети за насочване:

- ① **Чело:** от долу нагоре
- ② **Нос:** от горе надолу
- ③ **Лице:** отвътре навън
- ④ **Близо до устата:** Почистете в кръг
- ⑤ **Филтрум:** само напред-назад
- ⑥ **Брадичка:** от горе надолу



- 4 След употреба избършете устройството с мека кърпа/ хартиена кърпа.

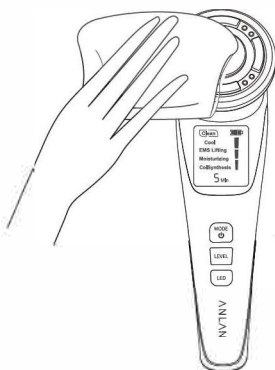


- 5 Ако не продължите с друг режим след приложен режим «Овлажняване», можете да нанесете продуктите за грижа за кожата, които използвате по принцип.



Синтез на колаген веднъж на ден по 2 минути всеки път


- 1 След измиване на лицето нанесете стягащ лосион или крем върху кожата.



2 **MODE**  Натиснете бутона за включване, за да преминете към режим **синтез на колаген**.

LEVEL Натиснете бутона, за да изберете температурата.(6°C- 8°C- 12°C)

LED Натиснете бутона, за да изберете режим на синя/червена светлина.

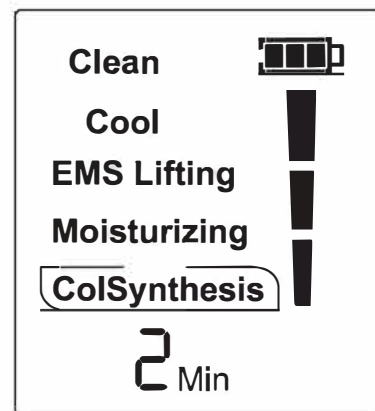

3 Хванете устройството и докоснете металната чувствителна зона. Поставете устройството близо до лицето си, но го преместете отвътре навън леко и бавно.


Съвети за насочване:

- 1 **Чело:** от долу нагоре
- 2 **Нос:** от горе надолу
- 3 **Лице:** отвътре навън
- 4 **Близо до устата:** Почистете в кръг
- 5 **Филтрум:** само напред-назад
- 6 **Брадичка:** от горе надолу



4 След употреба избършете устройството с мека кърпа/ хартиена кърпа.

5 Ако не продължите с друг режим след приложението режим **«Синтез на колаген»**, можете да нанесете продуктите за грижа за кожата, които използвате по принцип.

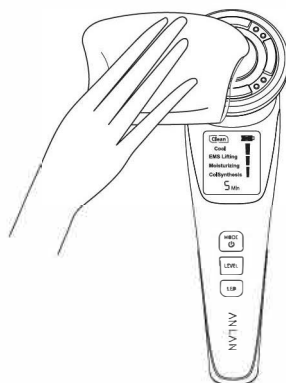

Почистване и поддръжка

- **Внимание:** Уредът не е водоустойчив! Моля, не го поставяйте във вода.
- Моля, не използвайте уреда с атенюатор/бензин/алкохол.
- Избършете уреда с мека кърпа/хартиена кърпа. (понякога мокра)
- Съхранявайте уреда на сухо и чисто място.
- Дръжте уреда далеч от деца.
- Дръжте уреда далеч от източници на топлина.

Често задавани въпроси

В: Уредът не вибрира.

О: Хванете уреда и докоснете металната чувствителна зона.

В: Мога ли да използвам уреда върху други части на тялото?

О: Не го използвайте за нищо друго освен за лицето си.

В: Използва ли се режимът “Почистване” за отстраняване на грим?

О: Можете да премахнете грима в режим “Почистване”. Винаги използвайте чист памучен тампон.

В: Усещам изтръпване на кожата си.

О: Добавете лосион към памучния тампон.

Моля, използвайте, като добавите серум.

Ако изпитвате дискомфорт, спрете да използвате уреда незабавно и се консултирайте със специалист.

В: Памучните тампони за премахване на грим не пасват на това устройство.

О: Може би памучните тампони Ви за премахване на грим са твърде големи/малки, моля, опитайте с други.

В: Не е ли по-ефективно да се прилага по-силен натиск?

О: Няма нужда да натискате силно. Прилагайте само лек натиск, за да избегнете наранявания.

В: Мога ли да го използвам в банята?

О: Уредът не е водоустойчив. Да не се използва в банята.

В: Мога ли да го използвам с грим?

О: Можете да използвате само в режим "Почистване". Преди да използвате други режими, измийте лицето си и отстранете грима си.

Внимание



Нашият продукт функционира с литиево-йонна батерия. Ето защо, ако искате да изхвърлите този продукт, моля, следвайте местните правила за изхвърляне на отпадъци.

Powered by Kanex