


Papablic

Mini UV Sterilizer

Mini esterilizador UV

Mini-stérilisateur UV

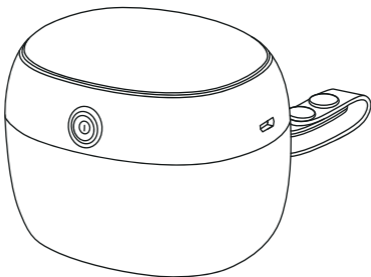

USER MANUAL

MANUAL DE USUARIO

MANUEL DE L'UTILISATEUR

IMPORTANT SAFEGUARDS

Please take the time to read this user manual carefully before using the Mini UV Sterilizer and save it for future reference.

DANGER

- Please do not place close to fire sources.
- Do not clean the base, mains cord, or plug in water and prevent water from entering the appliance through the outlets to avoid any damage to the product or any danger to yourself and others.
- Do not reach for or drop into water or other liquids.
- Never disassemble the base to avoid the risk of electric shock.

WARNING

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities or a lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning the appliance's use by a person responsible for their safety.
- Keep the appliance and mains cord out of the reach of children.
- Never allow children to play with the PE packing bags of the product to avoid the risk of suffocation.
- Do not place the appliance, mains cord, or plug close to hot surfaces, sharp edges, and corners. If the plug, mains cord, or the appliance itself is damaged, do not use it.
- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before connecting the appliance.
- Eye damage may result from directly viewing the light produced by the lamp in this apparatus. Always turn off the LED before opening the protective cover.
- UV light radiation can cause serious skin burns and eye injuries. Do not look directly at the UV light while in operation.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Never use this device on pets and food.
- Do not tamper with the lid interlocks to prevent UV exposure.
- Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or disabled people.
- Use the Mini UV Sterilizer only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Papablic.
- This product is for household use only.

CAUTION

- Never use any accessories or parts from other manufacturers or those that Papablic does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee will become invalid.
- Do not use the appliance if it has fallen or is damaged in any way.
- Please do not use it with a damaged cord or plug. If the appliance is not working as intended, it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into a liquid, return it immediately to Papablic for repair.
- Do not expose the appliance to extreme heat or direct sunlight. Always place and use the appliance in a dry place. When not in use, please clean and store it in a dry place.
- Do not allow it to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Do not handle the plug or appliance with wet hands.
- It must be supplied safely at an extra-low voltage corresponding to the markings on the appliance.
- Environmental conditions, such as temperatures and altitude, may affect the functioning of this appliance.

 **WARNING:** The cover is provided with an interlock to reduce the risk of excessive ultraviolet radiation. Do not defeat its purpose or attempt to service without removing it.

CONGRATULATIONS

Congratulations on your purchase of the **Papablic Mini UV Sterilizer!**


The Portable Sterilizer lets you disinfect your baby's pacifiers quickly and easily. With its small size and convenient power options, you can keep your baby healthy at home or on the go.

This product has been designed and developed with safety and functionality in mind. If the lid is opened during use, the built-in safety protection switch will automatically turn off the UVC light.

INCLUDED PARTS

CHECK WHAT YOU HAVE RECEIVED...

You should have received **1 box**. Please check the contents of the box against the list below. If anything is missing, please contact Customer Service at service@papablic.com.

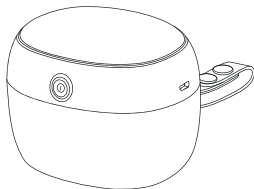


Sterilizer Unit



USB-C Cable

INCLUDED PARTS

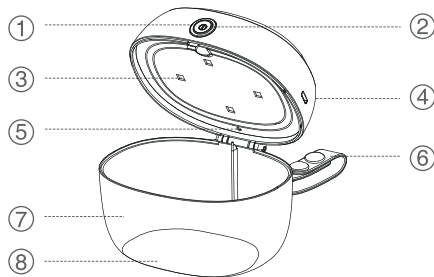

- ① Indicator Light
- ② Power Button
- ③ UVC LEDs
- ④ USB Type-C Port
- ⑤ Safety Protection Switch
- ⑥ Handle
- ⑦ Base
- ⑧ Mirror

HOW TO USE

SAFETY FEATURE

If the lid is opened during use, the UVC light will automatically turn off to protect the skin and eyes from UV exposure.

BEFORE FIRST USE

The Papablic Mini UV Sterilizer has been cleaned with alcohol wipes before packaging. They may have an alcohol smell when first opened. It is recommended that you sterilize the appliance twice with an empty basket before using it for the first time.

INDICATOR LIGHT CHART

INDICATOR LIGHT	MODE
Blinking Blue Light	Charging
Blue Breathing Light	Disinfecting in 59-Second Mode
Green Breathing Light	Disinfecting in 3-Minute Mode
Solid Light	Fully Charged
No Light	Disinfecting Complete/Turn Off
Blue Light Blinking Five Times Quickly	Needs to Be Charged Immediately

HOW TO USE

OPERATION TIPS

There are two operation modes(59-second / 3-minute) for use.

	OPERATION	INDICATOR LIGHT
How to Start/ 59-Second Mode	Press the power button.	Blue Breathing Light
3-Minute Mode	Press the power button twice.	Green Breathing Light
How to Stop	Press the power button three times.	No Light
Charge	Plugging in.	Blinking Blue Light (The blue light is always on when fully charged).

HOW TO USE

HOW TO USE

1. Wash the pacifier or wipe it clean to remove any debris before sterilization. To open the sterilizer, squeeze it on both sides with one hand (see Fig. 1), place the pacifier into the sterilizing box, then close the lid (see Fig. 2).

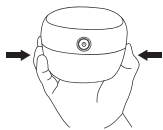


Fig.1

2. Use 59-second mode. Press the power button to begin disinfecting. The blue breathing light will come on until the process is complete (59 seconds) (see Fig. 3).



Fig. 2

Or use 3-minute mode. Press the power button twice to begin disinfection. The green breathing light will come on until the process is complete (3 minutes) (see Fig. 3).

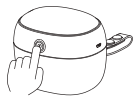


Fig. 3

3. When disinfecting is finished, the indicator light will turn off. Open the lid and remove the pacifier (see Fig. 4).



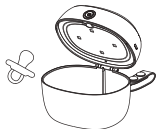


Fig. 4

HOW TO USE

Tips:

Do not insert more than two pacifiers at a time. This device disinfects the surfaces exposed to the UVC light. The pacifier must have unobstructed access to the UVC light.

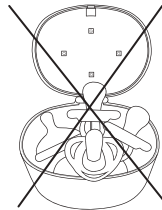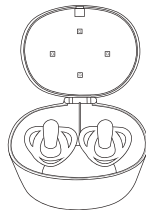

HOW TO CARE FOR YOUR PAPABLIC UV STERILIZER

MAINTENANCE

Clean the interior of the product for watermarks and stains after each use. Always store the sterilizer in a clean, dry place.

CLEANING

This device is not waterproof. Never immerse the device, the mains cord, or the mains plug in water or any other liquid.

To clean, wipe the surface of the unit with a towel. Remove any water droplets to prevent moisture from damaging the unit's circuitry.

Between use or while carrying it during travel, please place the product into a storage bag to prevent dust contamination and protect the surface from abrasion.

Caution

- Never allow any water on the UV LEDs when cleaning the appliance.
- Do not use chemicals, cleaners, vinegar, or any other cleaning solution on the product.
- Always wipe off the dry water spots after each use. Dry water spots will hinder the performance of the UV lights.

TROUBLESHOOTING

TROUBLESHOOTING

1. If the power button does not respond or the unit will not turn on:

- (A) Check if the power is depleted; charge it if required.
- (B) If the internal circuit is damaged, the unit must be returned to Papablic for after-sales service.

2. The UVC light will not shut off after the lid is opened:

- (A) Check if the product cover detection switch is dirty. Wipe it clean with a cloth.
- (B) Check if the rubber column of the upper cover detection switch is broken.
- (C) If the rubber cover of the upper cover detection switch is broken or the internal circuit is damaged, the unit must be returned for after-sales service.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Product Name: Mini UV Sterilizer

Model: PPL50

Rated Input: 5VDC $\overline{\text{---}}$ 1A

Dimensions: 3.93 in. (100 mm) x 3.3 in. (84 mm) x 3.54 in. (90 mm)

Net Weight: 4.23 oz. (120 g)

UVC LED Life: 5,000 hours

Input Connector: USB Type-C

Battery Life: 100 minutes

WARRANTY SERVICE

WARRANTY SERVICE

We specifically and expressly warrant that the products manufactured or sold by Papablic to our customers shall be of the highest quality and applied to our warranty service.

For a period of **one (1) year** after the Delivery Date, Papablic warrants that the Product, when used in accordance with the instructions in the applicable documentation, will operate as described in all material respects. During the Warranty Period, defects in the materials or workmanship of components or deliverables specified and furnished by or through Papablic shall be repaired or replaced by Papablic at no cost or expense to Customer.

Papablic will correct any reproducible error in the Product or replace any defective Product provided that such error is reported to Papablic by Customer in writing during the Warranty Period, and that Customer provides all information that may be necessary (receipt of the product, proof of purchase). For the avoidance of doubt, Papablic does not warrant that Customer's use of the Product will be error-free or uninterrupted. If the product is determined damaged intentionally by Customer, it would not be applicable for the Warranty Service.

The above-mentioned Warranty Service may only be applicable for Product acquired on Papablic official website, official store of Papablic on Amazon (USA and Canada) and Walmart. Please contact us directly at service@papablic.com (<http://papablic.com/>) for any question related to our Product, and one of our overly eager customer service representatives will get back to you.

**SPANISH
ESPAÑOL
ESPAGNOL**

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Tómese el tiempo para leer este manual de usuario detenidamente antes de usar el mini esterilizador UV y guárdelo para futuras consultas.

PELIGRO

- No lo coloque cerca de fuentes de fuego.
- No limpie la base, el cable de alimentación o el enchufe con agua y evite que el agua ingrese al aparato a través de las salidas para evitar cualquier daño al producto o cualquier peligro para usted y los demás.
- No lo alcance ni lo deje caer en agua u otros líquidos.
- Nunca desarme la base para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

ADVERTENCIA

- Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
- Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- No permita que los niños jueguen con las bolsas de embalaje de PE del producto para evitar el riesgo de asfixia.
- No coloque el aparato, el cable de alimentación o el enchufe cerca de superficies calientes, bordes afilados y esquinas. Si el enchufe, el cable de alimentación o el aparato en sí están dañados, no los utilice.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- Compruebe si el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el voltaje de la red local antes de conectar el aparato.
- Puede dañar los ojos al ver directamente la luz producida por la lámpara en este aparato. Apague siempre el LED antes de abrir la cubierta protectora.
- La radiación de luz ultravioleta puede causar quemaduras graves en la piel y lesiones oculares. No mire directamente a la luz ultravioleta mientras está en funcionamiento.
- Nunca use este dispositivo con mascotas y alimentos.
- No manipule los enclavamientos de la tapa para evitar la exposición a los rayos UV.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando este producto es utilizado por, sobre o cerca de niños o personas discapacitadas.
- Utilice el mini esterilizador UV solo para el uso previsto como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por Papablic.
- Este producto es solo para uso doméstico.

PRECAUCIÓN

- No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes o que Papablic no recomiende específicamente. Si utiliza dichos accesorios o piezas, su garantía dejará de ser válida.
- No utilice el aparato si se ha caído o está dañado de alguna manera.
- No lo utilice con un cable o enchufe dañado. Si el electrodoméstico no funciona según lo previsto, se ha caído, dañado, dejado al aire libre o se ha caído en un líquido, devuélvalo inmediatamente a Papablic para su reparación.
- No exponga el aparato a calor extremo o luz solar directa.
- Coloque y utilice siempre el aparato en un lugar seco.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- Cuando no esté en uso, límpielo y guárdelo en un lugar seco.
- No permita que se utilice como juguete. Es necesario prestar mucha atención cuando lo utilicen niños o cerca de ellos.
- No manipule el enchufe ni el aparato con las manos mojadas.
- Debe ser alimentado de forma segura a un voltaje muy bajo que corresponda con las marcas del aparato.
- Las condiciones ambientales, como la temperatura y la altitud, pueden afectar el funcionamiento de este aparato.

⚠ ADVERTENCIA: La cubierta está provista de un enclavamiento para reducir el riesgo de radiación ultravioleta excesiva. No anule su propósito ni intente repararlo sin quitarlo.

FELICITACIONES

¡Felicitaciones por su compra del **mini esterilizador UV Papablic!**


El esterilizador portátil le permite desinfectar los chupetes de su bebé de forma rápida y sencilla. Con su pequeño tamaño y convenientes opciones de energía, puede proteger la salud de su hijo en casa o al aire libre.

Este producto ha sido diseñado y desarrollado pensando en la seguridad y la funcionalidad. Si la tapa se abre durante el uso, el interruptor de protección de seguridad incorporado apagará automáticamente la luz UVC.

PIEZAS INCLUIDAS

COMPRUEBE LO QUE HA RECIBIDO...

Ha recibido **1 caja**. Verifique el contenido del cuadro con la lista a continuación. Si falta algo, comuníquese con Servicio al cliente a service@papablic.com.

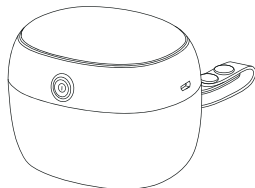


Unidad Esterilizadora



Cable USB-C

PIEZAS INCLUIDAS

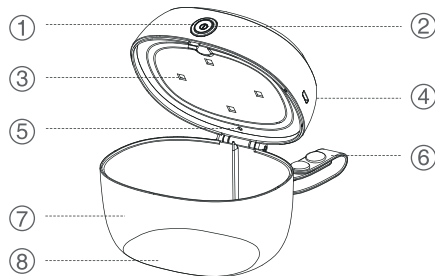

- ① Luz Indicadora
- ② Botón De Encendido
- ③ LED UV
- ④ Puerto USB tipo C
- ⑤ Interruptor De Protección De Seguridad
- ⑥ Agarrador
- ⑦ Base
- ⑧ Espejo

CÓMO USAR

CARACTERÍSTICA DE SEGURIDAD

Si se abre la tapa durante el uso, la luz UVC se apagará automáticamente para proteger la piel y los ojos de la exposición a los rayos UV.

ANTES DEL PRIMER USO

El esterilizador Papapublic Mini UV se ha limpiado con toallitas con alcohol antes del envasado. Pueden oler a alcohol cuando se abren por primera vez. Se recomienda que esterilice el aparato dos veces con una canasta vacía antes de usarlo por primera vez.

TABLA DE LUZ INDICADORA

LUZ INDICADORA	MODO
Luz azul intermitente	Cargando
Luz de respiración azul	Desinfección en modo de 59 segundos
Luz de respiración verde	Desinfección en modo de 3 minutos
Luz sólida	Completamente cargado
Sin luz	Desinfección completa/Apagar
Luz azul parpadeando cinco veces rápidamente	Debe cargarse de inmediato

CÓMO USAR

CONSEJOS DE OPERACIÓN

Hay dos modos de funcionamiento (59 segundos / 3 minutos) para su uso.

	OPERACIÓN	LUZ INDICADORA
Cómo empezar/ Modo de 59 segundos	Presiona el boton de poder.	Luz de respiración azul
Modo de 3 minutos	Presione el botón de encendido dos veces.	Luz verde de respiración
Cómo detener	Presione el botón de encendido tres veces.	Sin luz
Carga	Enchufando.	Luz azul intermitente (La luz azul está siempre encendida cuando está completamente cargada).

CÓMO USAR

CÓMO USAR

1. Lave el chupete o límpielo para eliminar cualquier residuo antes de la esterilización. Para abrir el esterilizador, apriételo en ambos lados con una mano (ver Fig.1), coloque el chupete en la caja de esterilización, luego cierre la tapa (ver Fig. 2).

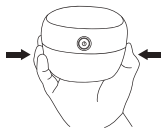


Fig.1

2. Utilice el modo de 59 segundos. Presione el botón de encendido para comenzar a desinfectar. La luz de respiración azul se encenderá hasta que se complete el proceso (59 segundos) (ver Fig. 3).



Fig. 2

O use el modo de 3 minutos. Presione el botón de encendido dos veces para comenzar la desinfección. La luz verde de respiración se encenderá hasta que se complete el proceso (3 minutos) (ver Fig. 3).

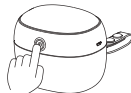


Fig. 3

3. Una vez finalizada la desinfección, la luz indicadora se apagará. Abra la tapa y retire el chupete (ver Fig. 4).



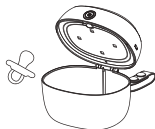


Fig. 4

CÓMO USAR

Consejos:

No inserte más de dos chupetes a la vez. Este dispositivo desinfecta las superficies expuestas a la luz UVC. El chupete debe tener acceso sin obstáculos a la luz UVC.

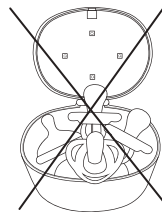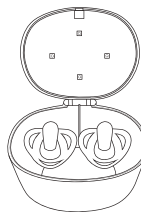

CÓMO CUIDAR SU ESTERILIZADOR PAPABLIC UV

MANTENIMIENTO

Limpie el interior del producto para marcas de agua y manchas después de cada uso. Guarde siempre el esterilizador en un lugar limpio y seco.

LIMPIEZA

Este dispositivo no es resistente al agua. No sumerja nunca el dispositivo, el cable de alimentación o el enchufe de red en agua o cualquier otro líquido.

Para limpiar, limpie la superficie de la unidad con una toalla. Quite las gotas de agua para evitar que la humedad dañe los circuitos de la unidad.

Entre su uso o mientras lo lleva durante el viaje, coloque el producto en una bolsa de almacenamiento para evitar la contaminación por polvo y proteger la superficie de la abrasión.

Precaución

- Nunca permita que entre agua en las LED UV cuando limpie el aparato.
- No utilice productos químicos, limpiadores, vinagre ni ninguna otra solución limpiadora en el producto.
- Limpie siempre las manchas secas de agua después de cada uso. Las manchas de agua seca obstaculizarán el rendimiento de las luces UV.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Si el botón de encendido no responde o la unidad no se enciende:

- (A) Verifique si la energía está agotada; cárguelo si es necesario.
- (B) Si el circuito interno está dañado, la unidad debe devolverse a Papablic para el servicio posventa.

2. La luz UVC no se apagará después de que se abra la tapa:

- (A) Compruebe si el interruptor de detección de la cubierta del producto está sucio. Límpielo con un paño.
- (B) Compruebe si la columna de goma del interruptor de detección de la cubierta superior está rota.
- (C) Si la cubierta de goma del interruptor de detección de la cubierta superior está rota o el circuito interno está dañado, la unidad debe devolverse para servicio posventa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto: Mini esterilizador UV

Modelo: PPL50

Entrada nominal: 5 VDC \equiv 1A

Dimensiones: 3.93 in. (100 mm) x 3.3 in. (84 mm) x 3.54 in. (90 mm)

Peso neto: 4.23 oz (120 g)

Vida útil del LED UV: 5,000 horas

Conector de entrada: USB tipo C

Duración de la batería: 100 minutos

SERVICIO DE GARANTÍA

SERVICIO DE GARANTÍA

Garantizamos específica y expresamente que los productos fabricados o vendidos por Papablic a nuestros clientes serán de la más alta calidad y se aplicarán a nuestro servicio de garantía. Durante un período de **un (1) año** después de la Fecha de entrega, Papablic garantiza que el Producto, cuando se utilice de acuerdo con las instrucciones de la documentación aplicable, funcionará como se describe en todos los aspectos materiales. Durante el Período de garantía, Papablic reparará o reemplazará los defectos en los materiales o la mano de obra de los componentes o entregables especificados y proporcionados por o a través de Papablic sin costo ni gasto para el Cliente.

Papablic corregirá cualquier error reproducible en el Producto o reemplazará cualquier Producto defectuoso siempre que el Cliente informe a Papablic por escrito de dicho error durante el Período de Garantía, y que el Cliente proporcione toda la información que pueda ser necesaria (recibo del producto, comprobante de compra). Para evitar dudas, Papablic no garantiza que el uso del Producto por parte del Cliente esté libre de errores o sea ininterrumpido. Si el cliente determina que el producto está dañado intencionalmente, no sería aplicable para el servicio de garantía.

El Servicio de Garantía antes mencionado solo puede ser aplicable para el Producto adquirido en el sitio web oficial de Papablic, tienda oficial de Papablic en Amazon (Los Estados Unidos y Canadá) y Walmart. Comuníquese con nosotros directamente a **service@papablic.com** (<http://papablic.com/>) si tiene alguna pregunta relacionada con nuestro Producto, y uno de nuestros ansiosos representantes de servicio al cliente se comunicará con usted.

DES GARANTIES IMPORTANTES

Veillez prendre le temps de lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le mini-stérilisateur UV et de le conserver pour référence ultérieure.

DANGER

- Veuillez ne pas vous placer à proximité de sources de feu.
- Ne nettoyez pas la base, le cordon d'alimentation ou la prise d'eau et empêchez l'eau de pénétrer dans l'appareil par les prises afin d'éviter tout dommage au produit ou tout danger pour vous-même et les autres.
- N'essayez pas de toucher ou de tomber dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne démontez jamais le socle pour éviter tout risque de choc électrique.

AVERTISSEMENT

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont été supervisées ou instruites de l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Gardez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- Ne laissez jamais les enfants jouer avec les sacs d'emballage en PE du produit afin d'éviter tout risque de suffocation.
- Ne placez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise à proximité de surfaces chaudes, d'arêtes vives et de coins. Si la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même sont endommagés, ne les utilisez pas.

DES GARANTIES IMPORTANTES

- Vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du réseau électrique local avant de brancher l'appareil.
- L'observation directe de la lumière produite par la lampe de cet appareil peut provoquer des lésions oculaires. Éteignez toujours la DEL avant d'ouvrir le couvercle de protection.
- Les rayons UV peuvent provoquer de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. Ne regardez pas directement la lumière UV pendant le fonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez jamais cet appareil sur des animaux de compagnie et de la nourriture.
- Ne modifiez pas le verrouillage du couvercle pour éviter l'exposition aux UV.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
- N'utilisez le mini-stérilisateur UV que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par Papablic.
- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.

PRÉCAUTION

- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces provenant d'autres fabricants ou ceux que Papablic ne recommande pas spécifiquement. Si vous utilisez de tels accessoires ou pièces, votre garantie sera invalidée.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il est endommagé de quelque manière que ce soit.

DES GARANTIES IMPORTANTES

- Ne l'utilisez pas avec un cordon ou une prise endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas comme prévu, s'il est tombé, endommagé, laissé à l'extérieur ou tombé dans un liquide, retournez-le immédiatement à Papablic pour réparation.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême ou à la lumière directe du soleil.
- Placez et utilisez toujours l'appareil dans un endroit sec.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez le nettoyer et le ranger dans un endroit sec.
- Ne le laissez pas être utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité.
- Ne manipulez pas la prise ou l'appareil avec des mains mouillées.
- Il doit être alimenté en toute sécurité à une tension extra-basse correspondant aux indications figurant sur l'appareil.
- Les conditions environnementales, telles que la température et l'altitude, peuvent affecter le fonctionnement de cet appareil.

⚠ AVERTISSEMENT: La couverture est munie d'un dispositif de verrouillage pour réduire le risque de rayonnement ultraviolet excessif. N'allez pas à l'encontre de son objectif et n'essayez pas de l'entretenir sans l'avoir enlevé.

FÉLICITATIONS

Félicitations pour votre achat du **mini-stérilisateur UV Papablic!**


Le stérilisateur portable vous permet de désinfecter rapidement et facilement les sucs de votre bébé. Grâce à sa petite taille et à ses options d'alimentation pratiques, vous pouvez protéger la santé de votre enfant à la maison ou à l'extérieur.

Ce produit a été conçu et développé dans un souci de sécurité et de fonctionnalité. Si le couvercle est ouvert pendant l'utilisation, l'interrupteur de protection intégré éteint automatiquement la lumière UVC.

PARTIES INCLUSES

VÉRIFIEZ CE QUE VOUS AVEZ REÇU...

Vous devriez avoir reçu **1 boîte**. Veuillez vérifier le contenu de la boîte par rapport à la liste ci-dessous. S'il manque quelque chose, veuillez contacter le service clientèle à l'adresse suivante : **service@papablic.com**.

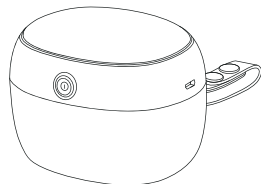


Unité Stérilisateur



Câble USB-C

PARTIES INCLUSES

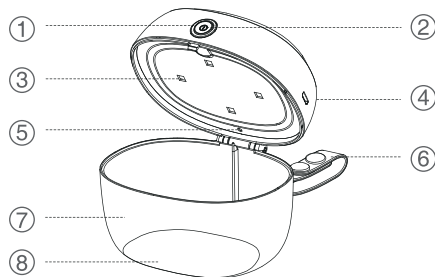

- ① Témoin lumineux
- ② Bouton d'alimentation
- ③ Voyants DÉL UVC
- ④ Port USB de type C
- ⑤ Interrupteur de protection de sécurité
- ⑥ Poignée
- ⑦ Base
- ⑧ Miroir

UTILISATION

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

Si le couvercle est ouvert pendant l'utilisation, la lumière UVC s'éteint automatiquement pour protéger la peau et les yeux de l'exposition aux UV.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Le mini-stérilisateur UV Papablic a été nettoyé avec des lingettes à l'alcool avant d'être emballé. Ils peuvent avoir une odeur d'alcool lors de leur première ouverture. Il est recommandé de stériliser l'appareil deux fois avec un panier vide avant de l'utiliser pour la première fois.

TABLEAU DES VOYANTS LUMINEUX

TÉMOIN LUMINEUX	MODE
Lumière bleue clignotante	Charge
Lumière bleue qui respire	Désinfection en mode 59 secondes
Feu vert pour respirer	Désinfection en mode 3 minutes
Lumière solide	Entièrement chargé
Pas de lumière	Désinfection complète/arrêt
La lumière bleue clignote cinq fois rapidement	Doit être facturé immédiatement

UTILISATION

CONSEILS DE FONCTIONNEMENT

Il existe deux modes de fonctionnement (59 secondes / 3 minutes) à utiliser.

	UTILISATION	TÉMOIN LUMINEUX
Comment commencer/ Mode 59 secondes	Appuyez sur le bouton d'allumage.	La lumière bleue qui respire
Mode 3 minutes	Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation.	Feu vert pour respirer
Comment s'arrêter	Appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation.	Pas de lumière
Charge	Branchement.	Bleu clignotant Light (The La lumière bleue est toujours allumée lorsqu'elle est complètement chargée).

UTILISATION

UTILISATION

1. Lavez la sucette ou essuyez-la pour enlever tous les débris avant de la stériliser. Pour ouvrir le stérilisateur, pressez-le des deux côtés avec une main (voir Fig. 1), placez la sucette dans la boîte de stérilisation, puis fermez le couvercle (voir Fig. 2).

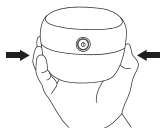


Fig.1

2. Utilisez le mode 59 secondes. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour commencer la désinfection. Le voyant bleu de respiration s'allumera jusqu'à ce que le processus soit terminé (59 secondes) (voir fig. 3).



Fig. 2

Ou utilisez le mode 3 minutes. Appuyez deux fois sur le bouton de mise en marche pour commencer la désinfection. Le voyant respiratoire vert s'allume jusqu'à ce que le processus soit terminé (3 minutes) (voir fig. 3).



Fig. 3

3. Lorsque la désinfection est terminée, le témoin lumineux s'éteint. Ouvrez le couvercle et retirez la sucette (voir Fig. 4).



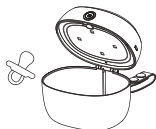


Fig. 4

UTILISATION

Conseils:

N'insérez pas plus de deux sucettes à la fois. Ce dispositif désinfecte les surfaces exposées aux rayons UVC. La sucette doit avoir un accès libre à la lumière UVC.

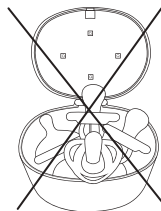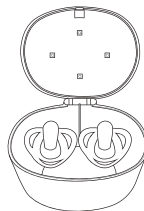

COMMENT PRENDRE SOIN DE VOTRE STÉRILISATEUR UV PAPABLIC

MAINTENANCE

Après chaque utilisation, nettoyez l'intérieur du produit pour éliminer les filigranes et les taches. Rangez toujours le stérilisateur dans un endroit propre et sec.

NETTOYAGE

Cet appareil n'est pas étanche. Ne jamais immerger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide.

Pour nettoyer, essuyez la surface de l'appareil avec une serviette. Enlevez toutes les gouttelettes d'eau pour éviter que l'humidité n'endommage les circuits de l'appareil.

Entre les utilisations ou pendant le transport en voyage, veuillez placer l'appareil dans un sac de rangement pour éviter la contamination par la poussière et protéger la surface de l'appareil contre l'abrasion.

Précaution

- Ne laissez jamais d'eau sur les DÉL UVC lorsque vous nettoyez l'appareil.
- N'utilisez pas de produits chimiques, de nettoyeurs, de vinaigre ou toute autre solution de nettoyage sur le produit.
- Essuyez toujours les points d'eau secs après chaque utilisation. Les taches d'eau sèche nuisent aux performances des lampes UV.

DÉPANNAGE

DÉPANNAGE

1. Si le bouton d'alimentation ne répond pas ou si l'appareil ne s'allume pas:

- (A) Vérifiez si l'alimentation est épuisée ; rechargez-la si nécessaire.
- (B) Si le circuit interne est endommagé, l'appareil doit être retourné à Papablic pour le service après-vente.

2. La lumière UVC ne s'éteint pas après l'ouverture du couvercle:

- (A) Vérifiez si l'interrupteur de détection du couvercle du produit est sale. Essayez-le avec un chiffon.
- (B) Vérifiez si la colonne de caoutchouc du commutateur de détection du couvercle supérieur est cassée.
- (C) Si le couvercle en caoutchouc de l'interrupteur de détection du couvercle supérieur est cassé ou si le circuit interne est endommagé, l'appareil doit être renvoyé au service après-vente.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Nom du produit: Mini-stérilisateur UV

Modèle: PPL50

Entrée cotée: 5VCC \equiv 1A

Dimensions: 3,93 po (100 mm) x 3,3 po (84 mm) x 3,54 po (90 mm)

Poids net: 4,23 oz. (120 g)

Durée de vie de la lumière DÉL UVC: 5 000 heures

Connecteur d'entrée: USB Type-C

Batterie Life: 100 minutes

SERVICE DE GARANTIE

SERVICE DE GARANTIE

Nous garantissons spécifiquement et expressément que les produits fabriqués ou vendus par Papablic à nos clients seront de la plus haute qualité et appliqués à notre service de garantie. Pendant une période de **un (1) an** après la Date de livraison, Papablic garantit que le Produit, lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions de la documentation applicable, fonctionnera comme décrit à tous égards importants. Pendant la période de garantie, les défauts de matériaux ou de fabrication des composants ou des livrables spécifiés et fournis par ou via Papablic seront réparés ou remplacés par Papablic sans frais ni frais pour le client.

Papablic corrigera toute erreur reproductible dans le Produit ou remplacera tout Produit défectueux à condition que cette erreur soit signalée à Papablic par le Client par écrit pendant la Période de Garantie, et que le Client fournisse toutes les informations qui pourraient être nécessaires (réception du produit, preuve d'achat). Pour éviter tout doute, Papablic ne garantit pas que l'utilisation du Produit par le Client sera sans erreur ou ininterrompue. Si le produit est déterminé intentionnellement endommagé par le client, il ne sera pas applicable pour le service de garantie.

Le service de garantie mentionné ci-dessus ne peut s'appliquer qu'aux produits achetés sur le site officiel de Papablic, la boutique officielle de Papablic sur Amazon (Les États-Unis et le Canada) et Walmart. Veuillez nous contacter directement à **service@papablic.com** (<http://papablic.com/>) pour toute question relative à notre produit, et l'un de nos représentants du service client trop enthousiaste vous répondra.