


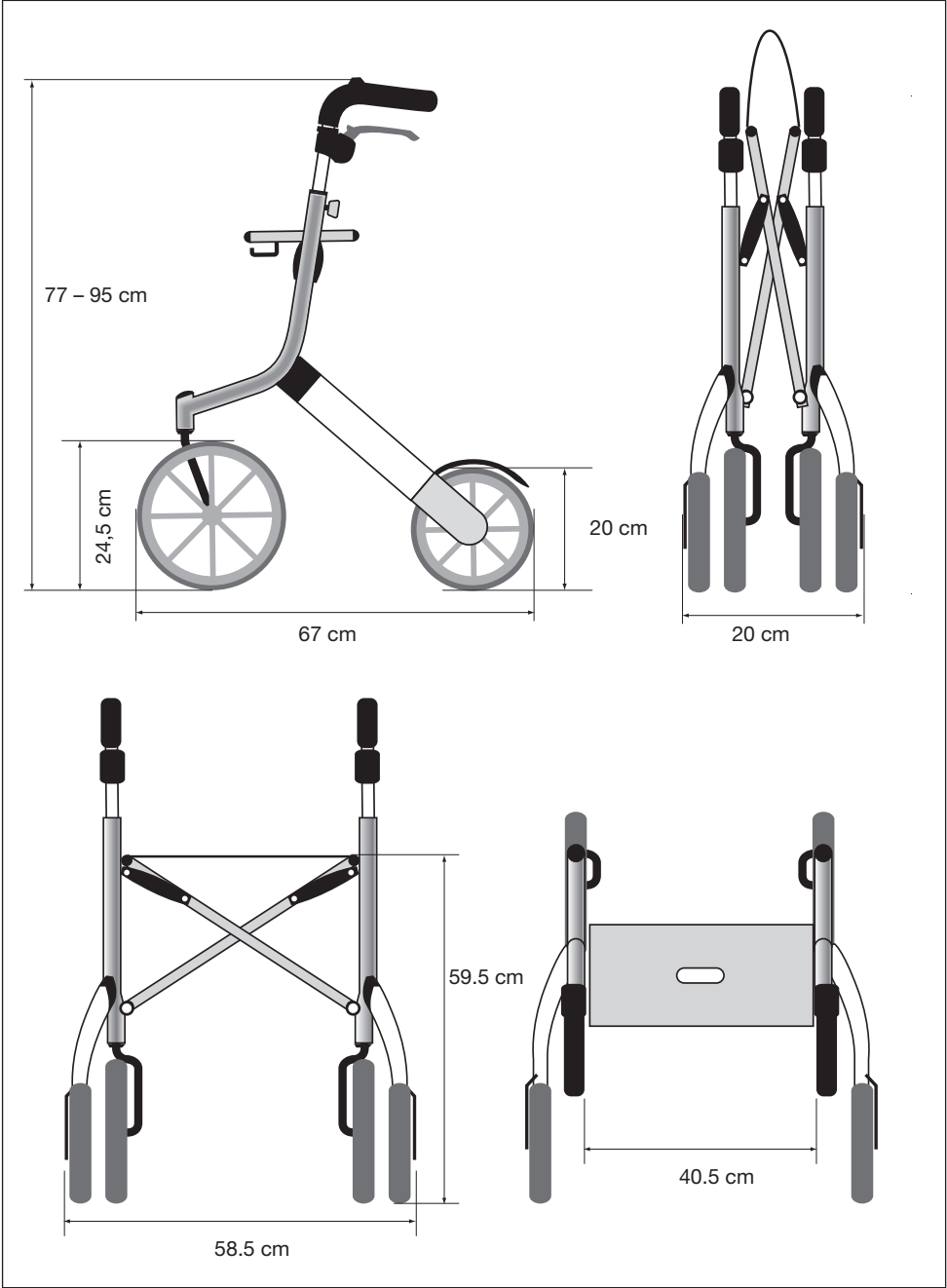
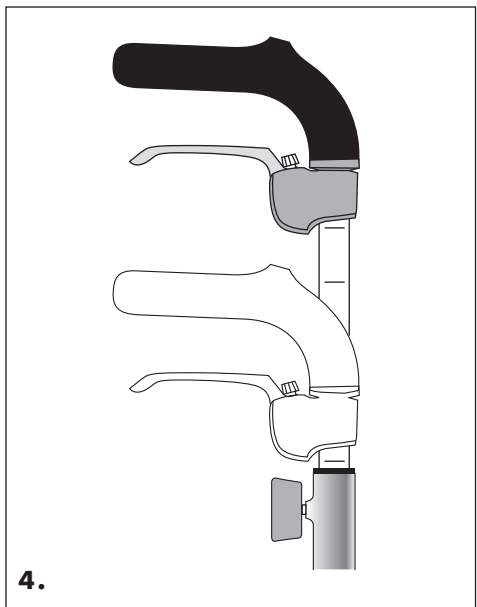


Able2

LET'S GO OUT

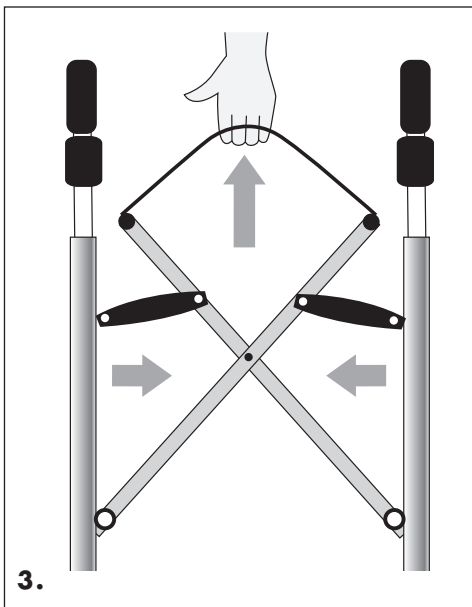

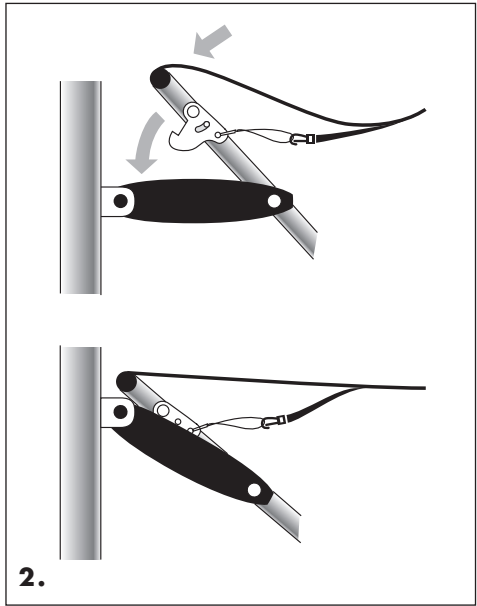

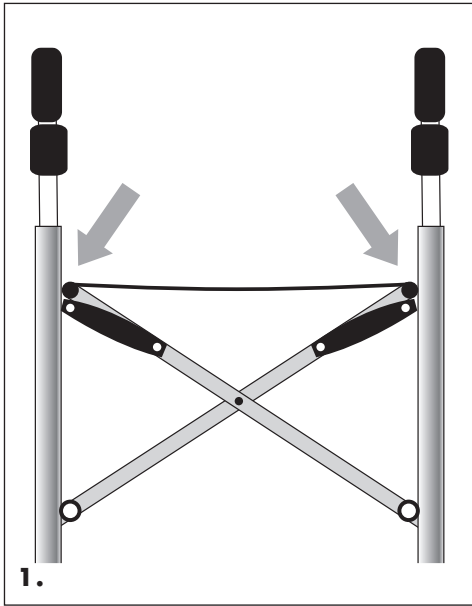

Let's Go Out rollator voor gebruik buitenshuis.

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe rollator die uw leven wat gemakkelijker, veiliger en aangenamer zal maken.

Om u snel vertrouwd te maken met uw rollator is het belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing goed leest en deze bewaart zodat u later nog eens iets kunt opzoeken.

De rollator helpt u wanneer u buiten gaat lopen. U kunt er ook op zitten, wanneer u er tijdens het lopen behoefte aan hebt om uit te rusten. Vergeet dan niet om de parkeerrem te gebruiken (positie 3 op de afbeelding rechts).

De grote voorwielen maken het mogelijk om obstakels, zoals stoepranden, te passeren.

Neem deze obstakels altijd onder een haakse hoek. De rollator blijft is dan stabiel dan wanneer u er schuin naar toe loopt.

De zitting van de Let's Go Out rollator is uitsluitend bedoeld om op te zitten, niet om b.v. kinderen of grote voorwerpen te vervoeren. Plaats geen zware voorwerpen, grote dozen of meubelstukken op de zitting.

Als accessoire is een tas leverbaar. Deze kan desgewenst van de rollator worden afgehaald om als boodschappentas te gebruiken of om lichte voorwerpen mee te nemen, zoals fruit, garens, een thermosfles, boek e.d.

Onderhoud: U kunt de rollator reinigen met niet te heet water en eventueel wat afwasmiddel. Zet de rollator niet op een hete of erg vochtige plaats.

Garantie:

De garantietermijn is 2 jaar. Slijtage aan b.v. wielen en kabels valt niet onder de garantie.

Uitvouwen.

(Zie de afbeeldingen op pag. 3)

1. Zet de rollator rechtop voor u, steunend op de wielen. Vouw de rollator uit door de beide zijkanen van elkaar af te bewegen.


2. Verzekeer u ervan dat de rollator geheel uitgeklaapt is en dat de vergrendelhaak onder de zitting vastgeklapt is.

Opvouwen.

3. Trek de zitting in het midden omhoog; de vergrendelhaak onder de zitting zal loskomen en de rollator wordt opgevouwen. Duw zondodig de zijkanen meer naar elkaar toe.


Hoogteverstelling

4. Draai de klemschroeven voor de handgrepen los. Stel de handgrepen in op de gewenste hoogte en draai de schroeven. Houd rekening met de markeringen op de buizen.

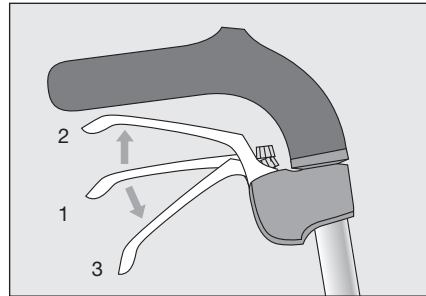

Remfunctie.

1. Remhandgrepen in positie 1: de wielen kunnen vrij draaien.
2. Remmen: trek de remhandgrepen omhoog naar positie 2.
3. Parkeerremmen: duw de remhandgrepen geheel omlaag naar positie 3.

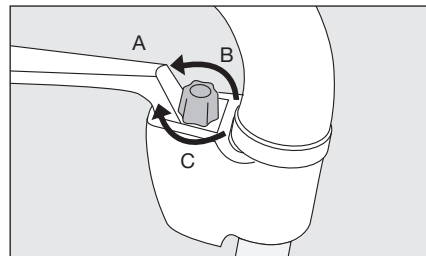

Remmen afstellen.

1. De remkracht wordt ingesteld met de stelschroeven op de remhandgrepen (A)
2. Draai de stelschroeven linksom of rechtsom tot de remkracht ingesteld is zoals gewenst. Door de stelschroef in de richting B te draaien wordt de remkracht groter. Als u de stelschroef in de richting C draait vermindert de remkracht.

Technische gegevens:



Getest volgens ISO 11199-2 voor maximum gebruikersgewicht 130 kg.

Grootste breedte	58.5 cm.
Lengte	67 cm.
Gewicht	6.4 kg.
Hoogte duwhandgrepen	verstelbaar van 77 tot 95 cm.
Zithoogte	59.5 cm.
Diameter voorwielen:	24.5 cm.
Diameter achterwielen:	20 cm.
Belasting tas (optioneel)	max 12 kg.





TRUST **CARE**

www.trustcare.se

Trust Care
Skrittgatan 8B
21377 Malmoe, Sweden
Tel.: +46 40 15 61 20
info@trustcare.se