

Instructions

Suction Cup Grab Bars

Item # 521-1561-1912, 521-1561-1916,
521-1562-1912, 521-1562-1916, 521-1562-1901

Installation

NOTE: Grab bar must be placed on a smooth, non-porous surface. If placed over cracks or on grout between tiles, the grab bar will not be stable, and you may get a false reading on the Indicator.

1. Thoroughly clean and dry the suction cups and surface where the suction cups will be attached. Occasionally clean both suction cups and attachment surface as needed.
2. Release the suction cups by flipping the latches on the grab bar so they are in the upright position.
3. Firmly push the suction cups against the surface to remove all excess air, Fig. 1.
4. Push the latches down and make sure the Indicators are green.

NOTE: If the Indicator is red, Fig. 2, repeat steps 1-4 to reattach.




5. Always test grab bar suction before each use even though both Indicators may still be green. Do not use the grab bar to support your body weight; it is only for balance assistance.

Removal:

1. Flip both latches up.
2. Pull the vinyl tabs on the side of each suction cup to release the suction, Fig. 3. You may also slide the grip to the edge of the surface to break the suction.

CAUTION:

- Do not use the grab bar to support your body weight; it is only for balance assistance.
- Grip loses strength after time, so you should reattach the grab bar before every use.
- The Indicators are designed to ensure successful installation; they do not indicate proper adhesion.

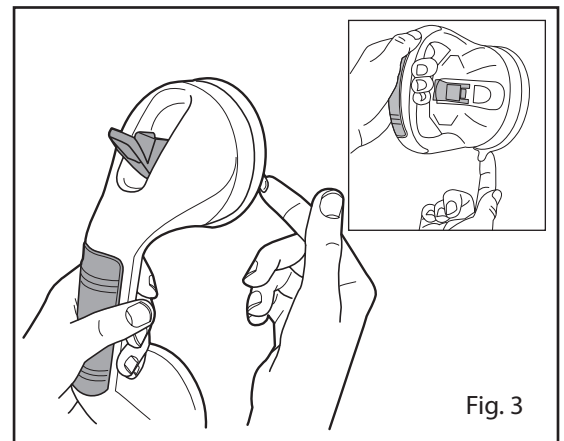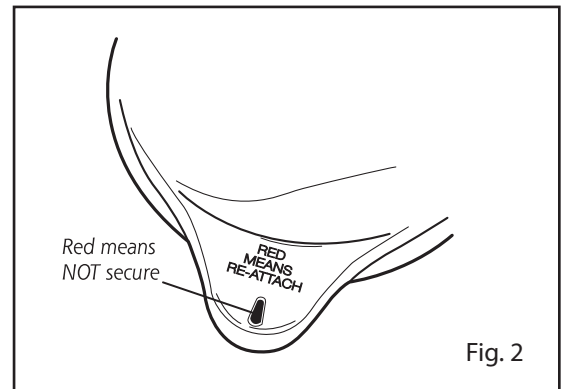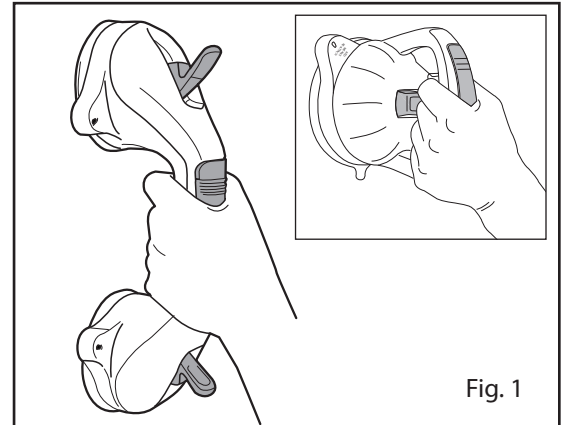

Instrucciones

Agarraderas con Ventosas

Artículo n.º 521-1561-1912, 521-1561-1916,
521-1562-1912, 521-1562-1916, 521-1562-1901

Instalación

NOTA: la agarradera debe colocarse sobre una superficie suave y no porosa. Si se coloca sobre grietas o sobre la lechada de cemento de los azulejos, la agarradera no quedará estable y es posible que el Indicador arroje una lectura falsa.

1. Limpie y seque bien las ventosas y la superficie sobre la cual las pegará. De vez en cuando, limpie tanto las ventosas como la superficie donde están pegadas, según sea necesario.
2. Suelte las ventosas cambiando de posición las trancas de la agarradera, para que estén en posición vertical.
3. Empuje con firmeza las ventosas contra la superficie para quitar todo exceso de aire, Fig. 1.
4. Empuje las trancas hacia abajo y asegúrese de que los indicadores estén verdes.

NOTA: si el indicador está en rojo, Fig. 2, repita los pasos 1 a 4 para volver a pegar.

5. Siempre pruebe la succión de la agarradera antes de usarla, incluso aunque ambos Indicadores estén aún en verde. No use la agarradera para apoyar su peso corporal, es sólo para ayudar a mantener el equilibrio.

Extracción:

1. Dé vuelta las dos trancas hacia arriba.
2. Tire de las lengüetas de vinilo que están sobre el lado de cada ventosa para soltar la succión, Fig. 3. También puede deslizar la empuñadura hasta el borde de la superficie, para quebrar la succión.

PRECAUCIÓN:

- No use la agarradera para apoyar su peso corporal, es sólo para ayudar a mantener el equilibrio.
- El sostén pierde fuerza luego de un tiempo, por lo que deberá volver a pegar la agarradera antes de cada uso.
- Los Indicadores están diseñados para asegurar una instalación exitosa; no indican una adhesión adecuada.

