



CITY LITE *Model*

Operating Manual

1-888-56-BUGGY

contact@thetravelbuggy.com

Contents

Introduction.....	3
Specifications	4
Specification Diagram	5
Safe Operation	6
Precautions	7
Maintenance.....	8
Electromagnetic Interference (EMI)	8
Setup	9
Controller.....	11
Basic Operation.....	12
Charging Batteries	13
Free Wheel Mode.....	15
Transporting Your City Lite	16
Troubleshooting	17
Diagnostics.....	18
Limited Warranty	19

Introduction

Thank you for choosing The Travel Buggy for your portable wheelchair transportation needs. Congratulations on your choice of the CITY LITE model, which will provide you with years of dependable service with proper use and care.

It is important to read through this manual before operating your CITY LITE to become familiar with its features as well as its limitations and safety information. You will find the operation and care of your CITY LITE very simple and easy, but should you have any questions please contact us at The Travel Buggy at our customer hotline, 1.888.56.BUGGY or by email contact@thetravelbuggy.com.

Disclaimer: The Travel Buggy, its affiliates and partners cannot be held responsible for personal injury or property damage resulting from the unsafe or improper operation or maintenance of the CITY LITE portable electric wheelchair.

As part of our ongoing product improvement initiative, The Travel Buggy reserves the right to change specifications and design without notice. As a result, there may be minor differences between your CITY LITE and its accessories and the photos, illustrations and instructions in this manual.

Get to know your CITY LITE Model by The Travel Buggy:

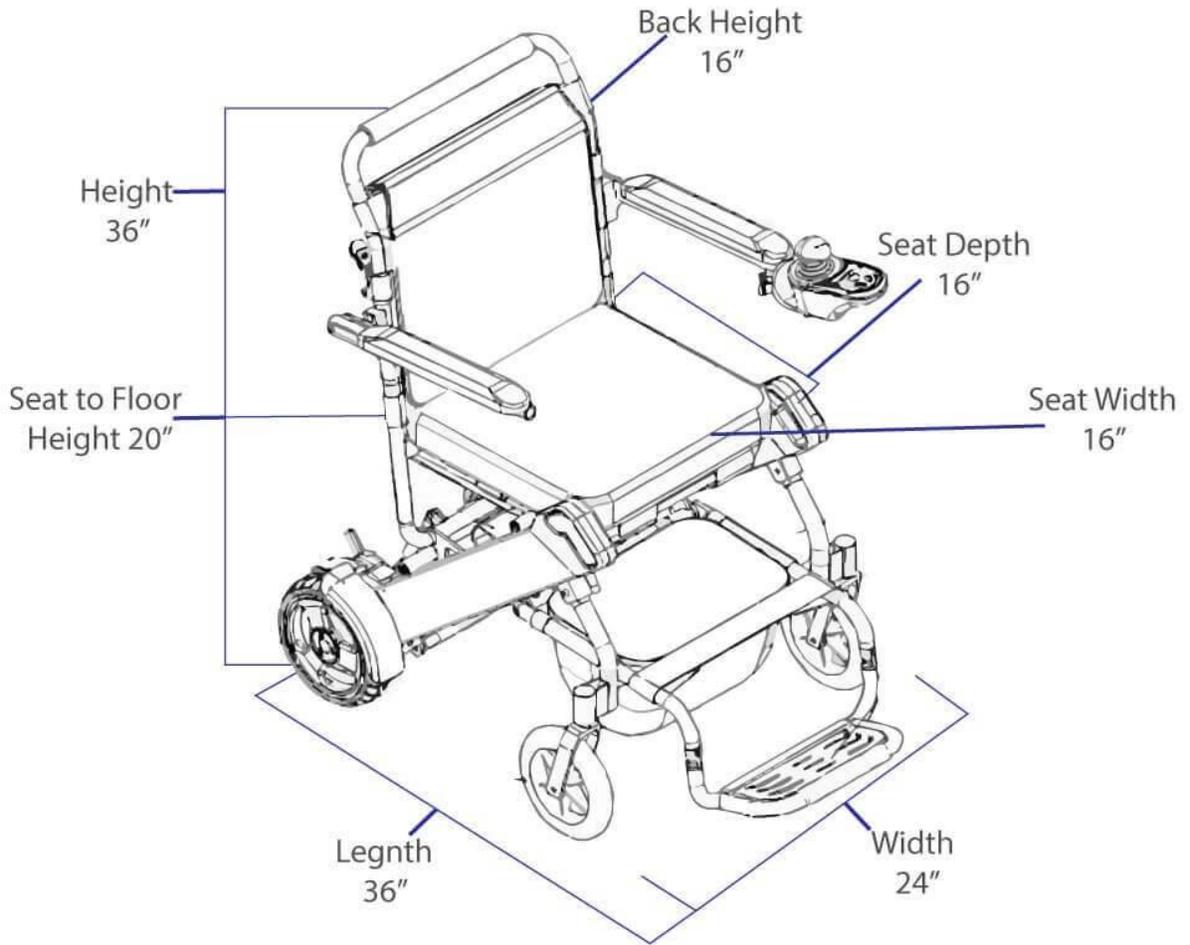


Locate Serial Number on the bottom of the bar, under seating area for registration online and note here:

Specifications

Max load:	120 kg (265 lbs.)
Tires:	6" PU solid tire (Front) 8" PU solid tire (Back)
Max slope capacity:	12°
Max speed:	6 km (3.7 miles) per hour
Max distance (full charge):	20 km (12 miles) (single battery) 40 km (24 miles) (double battery)
Steering:	360° joystick controller
Motor:	2 x 180W brushless motors
Seat depth:	40 cm (15.75 inches)
Seat width:	40 cm (15.75 inches)
Seat height:	47 cm (18.5 inches)
Braking distance:	1.5 m (when at top speed)
Turning radius:	85 cm (33 inches)
Battery:	Lithium 24V/10AH (a second 10AH is optional)
Charger:	24V/2A
Time required to fully charge battery:	6-8 hours
Net weight (including battery):	21 kg (46 lbs.) (single battery) 23 kg (51 lbs.) (double battery)
Net weight (without battery):	19 kg (42 lbs.)
Frame material:	Aluminum alloy
Unfolded (L x W x H):	89 x 61 x 94 cm (35 x 24 x 37 inches)
Folded (L x W x H):	61 x 33 x 78.75 cm (24 x 13 x 31 inches)

Specification Diagram



Safe Operation

We think this is the most important section of the manual; how to safely operate the CITY LITE portable wheelchair. Please review this section thoroughly and contact us if you have any questions.

General Safety...

- Adjust the CITY LITE to your personal comfort level as much as possible.
- Take your time to learn how the CITY LITE works in a private space before you begin operating around others.
- Practice bending, reaching and transferring in and out of the CITY LITE.
- Always be aware of your surroundings.
- If you're not sure the CITY LITE can surpass an obstacle, try to find another way around.
- The CITY LITE is designed for a single user only; more than one user may result in personal injury to you and others.
- Make sure that electronic components such as the control panel, battery charger, and other electronic controlled components avoid moisture. If these components come into contact with moisture, dry before use.
- The CITY LITE seat is designed for comfort, not specifically for pressure relief; if you suffer from pressure sores, or if you are at risk that they will occur, please consult your doctor.

Before using your CITY LITE...

- Make sure the CITY LITE is operating smoothly.
- Check for any unusual noises, vibration, or a change in the ease of use; if you detect a problem, use the tool kit to perform maintenance or get in touch with your service professional or The Travel Buggy directly.
- Failing to maintain your CITY LITE could increase the risk for injury; get in touch with The Travel Buggy so that we can help you find and correct the problem.

Getting into the CITY LITE...

- Before sitting, make sure the CITY LITE is OFF, this will ensure the CITY LITE will not move upon touching the joystick.
- Make sure the foot rest is down.
- Once onboard, make sure your feet are safely on the footrest.

Driving the CITY LITE...

- Be alert to the danger of motor vehicles on roads or in parking lots.
- At night, or when it is hard to see, use reflective tape on your CITY LITE.
- The CITY LITE is designed for use on firm, even surfaces such as concrete, asphalt or indoor flooring.
- Do not operate the CITY LITE in sand, loose soil or over rough terrain, which could damage wheels, bearings, axles or motors, or loosen fasteners.

Getting out of the CITY LITE...

- Make sure to bring the CITY LITE to a complete stop.
- Turn OFF the CITY LITE to avoid accidentally operating the joystick and moving the wheelchair.
- Raise the armrest so that you can conveniently exit the CITY LITE.
- Carefully and safely get out of the seat.

Weight Limit – Do not exceed or the warranty will be void...

- Never exceed a total weight of 120 kg (265 lbs.) total for the rider plus items carried.
- Exceeding the weight limit is likely to damage the seat, frame or fasteners and may cause severe injury to you or others.

When transporting the CITY LITE...

- Never sit in the CITY LITE while in a moving vehicle; an accident or sudden stop may cause you to be thrown from the power chair.
- Never transport the CITY LITE in the front seat of a vehicle where it may shift and interfere with the driver.
- Always secure the CITY LITE so that it cannot roll or shift when being transported in a vehicle.
- The CITY LITE is NOT approved to be used with any tie down system, which is generally used to transport a seated user in a powered wheelchair in a motor vehicle.

Precautions

CAUTION: OPERATE SAFELY

**Do not operate the CITY LITE in water of any kind.
Do not operate the CITY LITE up or down staircases or escalators.**

**Do not operate the CITY LITE while on a moving vehicle such as a bus.
Do not lean your body to reach out of the CITY LITE, causing a balance issue.
Do not exceed the weight limit total of 120 kg (265 lbs.) for rider plus any items.**

**DO turn off the CITY LITE when exiting the chair for safety.
DO practice driving the CITY LITE in a private, enclosed area.**

**Be aware of local regulations regarding operating the CITY LITE on a public road.
Modifying your CITY LITE in any way may void all warranties.
Do not expose the CITY LITE or batteries to extreme temperatures.**

Maintenance

It is important to perform regular maintenance of your CITY LITE for longevity and warranty eligibility. Even a little cleaning now and again will go a long way to keeping your device looking and functioning like new.

Certified repair shops with trained professionals who specialize in electric wheelchairs and scooters will be qualified to perform the service and maintenance on your CITY LITE electric wheelchair should it be required. Please be sure to keep a log of the service and maintenance performed. Your shop or technician may require parts, which The Travel Buggy has available.

We recommend you inspect your CITY LITE two to three times per year for in the following areas:

- Frame: Tighten loose screws as necessary using the tool kit included with your CITY LITE.
- Wheels: make sure they rotate easily. Significant resistance may require new bearings.
- Armrests: look for excessive wear or if they are loose.

Replacement parts and more major maintenance issues should be done by a professional. We do not recommend that you do intense types of maintenance work to the CITY LITE yourself.

Battery...

- Use batteries that have been supplied by The Travel Buggy only; our batteries are special lithium batteries designed specifically for use in the CITY LITE.
- Read all battery instructions before attempting to change or charge battery.
- To remove the battery, you must first unplug the wire harness from the back of the battery.
- Pull the battery out slowly and evenly. Replace the battery by reversing these steps.

Fasteners...

Many of the screws, bolts and nuts on the CITY LITE are special high-strength fasteners. Replacing these fasteners with non-approved parts may cause your CITY LITE to result in faulty operation and may cause harm to you or other people, therefore:

- Use fasteners that have been supplied by The Travel Buggy only.
- Using the tools included with your CITY LITE, tighten any fasteners that become loose as soon as possible.

Change and Adjustments...

Never use non-CITY LITE parts or make changes to your CITY LITE unless authorized in writing by a representative from our company. Doing so will void the Warranty and may create a safety hazard.

Electromagnetic Interference (EMI)

Powered vehicles such as the CITY LITE may be susceptible to electromagnetic interference (EMI), which is interfering electromagnetic energy (EM) emitted from sources such as radio stations, TV stations, amateur radio (HAM) transmitters, two-way radios, and cellular phones. The interference (from radio wave sources) can cause the CITY LITE to release its brakes, move by itself, or move in unintended directions.

Setup

Your CITY LITE will arrive carefully packaged in a cardboard box. We suggest that two people are available to remove the packaging and set up the CITY LITE for the first time.

1. The CITY LITE ships upright; carefully open the top of the box then turn the box on the side for easier removal of the contents.
2. Once all packaging has been removed, you will find the following components::



1. Raise the backrest until it snaps into place
 2. Place one hand on the backrest and use your other hand to push the footrest down.
 3. Pull the cable located under the seat to set the locking mechanism. *NOTE: Important step.
 4. Push the back rest away from the seat cushion, locking it in place.
 5. Rotate both armrests up and over towards the front of the chair.
- NOTE: Make certain that the back rest is locked in place and does not collapse forward before using.

1. Raise backrest



2. Expand chair



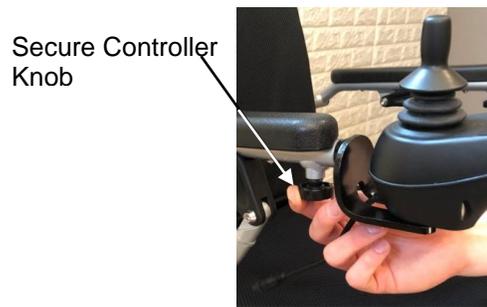
3. & 4. Pull cable to lock;
Push back rest away
From seat cushion



5. Raise armrests



- Slide the Controller into the open slot on the arm of the CITY LITE on the right side (unless pre-ordered for left-handed users). Tighten knob located under the arm rest to secure the controller in place.



- Connect the controller wire harness to the CPU wire harness that runs from the chair itself, taking care to line up the pins properly so that they do not get bent, broken or damaged. Secure the connection by twisting the coupling ring over the connected harness.



Connect CPU to Controller wire harness

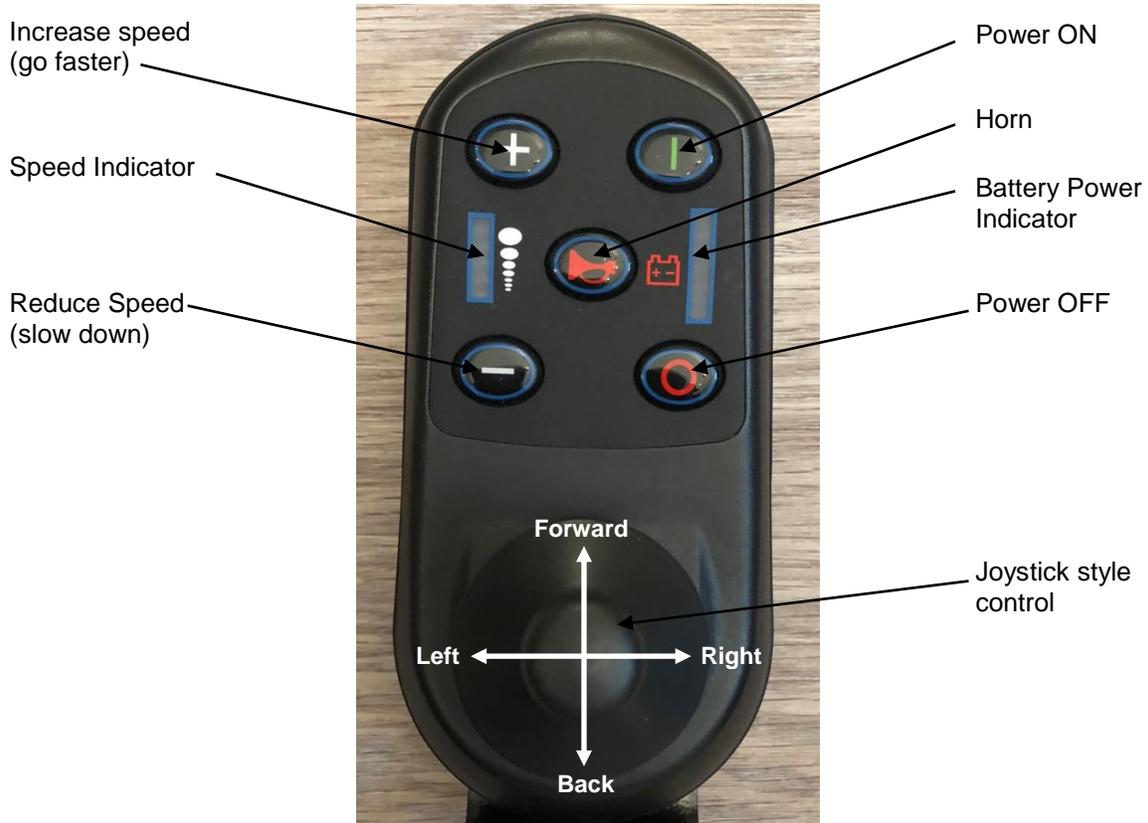
NOTE: Make sure connector pins in wire harness are lined up properly; do NOT force the wire harness connections together or you will bend or break the pins.

- Connect battery harness located near the rear wheel of the CITY LITE.



Controller

The CITY LITE is equipped with a joystick style controller which is intuitive and easy to understand and use. The Controller on your CITY LITE also features a horn, speed controls, battery indicator and power buttons as shown:



Controller and Driving Tips...

- Take some time in a safe, controlled environment to learn the operation of the controller, the speed and the maneuverability of the CITY LITE.
- When turning, reduce your speed, which will help avoid any potential tilting or tipping of the CITY LITE.
- Be sure to adjust the speed depending on your environment.
- To slow down, slowly bring the joystick back toward the initial position.
- To stop, just bring the joystick back to the initial position.
- Use extra care when you drive the CITY LITE in reverse. You may lose control or fall if one of the rear wheels hits an object. When operating in reverse:
 - Operate the CITY LITE slowly and at an even speed.
 - Stop often and check to make sure your path is clear of obstacles.

Basic Operation

Before operating your CITY LITE, be sure to read all safety information and precautions included in this manual. Operate only in the appropriate environment after you have practiced operating the CITY LITE and know how to work the controller.

GET IN	Be certain that the power is OFF before sitting in the seat of your CITY LITE, with no lights on the controller. Make sure the foot rest is down before getting into your CITY LITE.
POWER ON	Press the Power button, you will hear a beep and a light will indicate that power is on.
TURNING & STEERING	Use the joystick style control to steer and turn left, right or go forward and backward.
STOPPING	Simply remove your hand from the joystick to stop.
POWER OFF	When stopping, it is advised that you power OFF the CITY LITE to prevent accidents. Press the Power button to turn off the CITY LITE.
GET OUT	Make sure there is no light on the controller before getting off the CITY LITE.

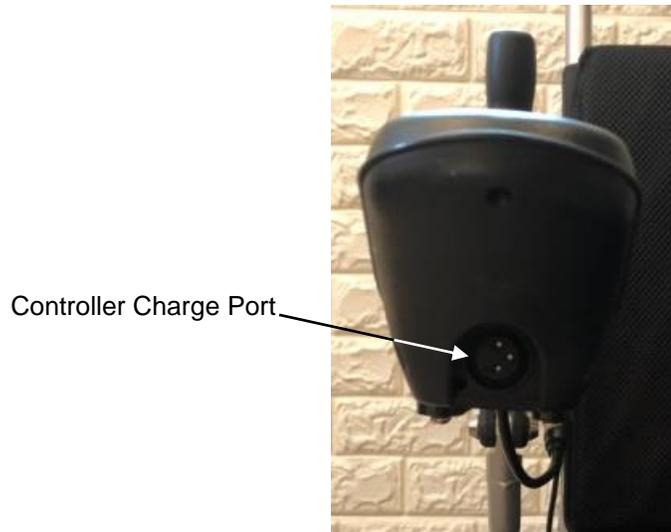
NOTE: To ensure complete safety, always power off your CITY LITE when you aren't moving, no matter how briefly you have stopped. This will ensure that you or someone else doesn't accidentally operate the joystick control causing unexpected movement of the wheelchair.

Charging Batteries

Your CITY LITE will arrive with a fully charged battery, which should last a maximum of 20 km or 12 miles under normal operating conditions. A second battery can be purchased by contacting The Travel Buggy, which will extend the run time. We recommend that you run the CITY LITE until the battery is completely dead in order to get the most out of the battery life.

When you need to charge the battery in your CITY LITE, use the following procedure:

1. Turn the power OFF using the button on the controller.
2. Plug in the charger to the controller port (see below) and leave to charge for 6 to 8 hours.



1. Plug the charger power harness into the charger and then into a grounded wall outlet.
2. Allow your CITY to charge for 6 to 8 hours or when the light on the charger turns green, which means your batteries are fully charged.
3. Should you require them, the lights and what they mean are located on the back of the charger.

Front of Charger

Charger Light:

Light should come on after plugging in the charger.
Light color indicates battery life:
RED – battery is fully drained
AMBER – battery is charging
GREEN – battery is fully charged; unplug from power



Back of Charger with definitions of what the light colors mean.



Your CITY LITE may require a new battery at some point; to change it:

1. Unplug the battery wire harness located on the back of the chair near the rear wheel.
2. Slide out the battery completely. Replace by sliding the new battery in and plugging in the wire harness.



More information on the CITY LITE battery...

- The CITY LITE comes with one battery installed, charged 24 volt 10Ah lithium ion battery.
- Charging the battery for 8 hours will maximize the overall life-cycle of the battery.
- Turn the main unit's power off while charging.
- Do not leave children unsupervised near the CITY LITE while it is charging.
- Do not attempt to open the battery housing.
- Red means the power is on and the unit is charging; green means the unit is fully charged. Note: this information is also located on the back of the charger.
- When the battery is fully charged, remove the cable. Then take out the DC charging connector and AC input power socket.
- The average time taken to re-charge workable batteries will vary from 2 to 8 hours depending on the level of usage.
- Do not charge more than 8 hours.
- If you do not operate the CITY LITE for two months, we recommend that you charge the battery for 6-8 hours before use.
- Over Current Protection: this system is included on the CITY LITE and will shut off the current from the batteries if triggered, thus shutting the motor down, which will ensure that the motor and battery do not experience any damage.
- The lifecycle of a lithium battery is measured in charge cycles with an average of 500 charge cycles.
- Check the battery indicator light daily if you use the CITY frequently.
- Do not use any battery chargers that have not been certified by The Travel Buggy.
- If damaged, do not handle the battery without protective gloves and eyewear.
- If the battery needs to be disposed of, locate the nearest hazardous materials disposal facility, and call them for instructions.
- The CITY LITE is equipped with one lithium battery and will go up to approximately 20 km or 12 miles. This maximum operating time per charge can be affected by:
 - Uneven, sloped or soft terrain
 - Exceeding total weight limit
 - Varying speed excessively
 - Stopping and starting frequently
- Before storing your CITY LITE for long periods of time, take these steps to maintain the battery:
 - Fully charge the battery before storing, then

- Remove the battery from the unit
- Store the battery in a room temperature environment that is kept dry
- Avoid temperature extremes and do not allow the battery to freeze
- Do not attempt to charge your battery if it is frozen from extreme weather conditions, instead first allow it to thaw for several hours.
- Additional or replacement batteries are available from The Travel Buggy; contact us at 1.888.56.BUGGY or by email at contact@thetravelbuggy.com.

Free Wheel Mode

In order to have a care giver push the CITY LITE, it must be put in Free Wheel mode. This mode disengages the drive mechanism to the wheels, making them free to push manually. We recommend that you turn OFF the power to the CITY LITE when in this mode, both for safety and to save battery power.

1. To put the CITY LITE in Free Wheel Mode, come to a full stop and turn OFF the power on the controller.
2. Push UP on the two red levers located on each rear wheel as shown:



Push UP two red levers on each wheel

Transporting Your City Lite

To transport your CITY LITE, it is advised that you fold it up following the procedures below.

NOTE: Never transport the CITY LITE in a tie down system, as the CITY LITE is not compatible with them. Never sit in the CITY LITE and be transported in a moving vehicle. Do not place the folded CITY LITE in the front seat with the driver where it could move or slide.

1. Turn off the controller and unplug the wire harness. Remove the controller by loosening the knob and sliding it out of the chair.
2. Rotate both armrests up and toward the back of the chair.
3. Store the cushion underneath the chair.
4. Squeeze both levers to fold the back rest down.
5. Pull the cable located under the seat to release the locking mechanism.
6. Push the back rest toward the seat and fold up the foot rest.

1. Unplug and remove



2. Rotate arm rests



3. Store cushion



4. Squeeze levers and fold back rest down



5. Pull cable



6. Fold up



For instructions on how to unfold the CITY LITE, see the Setup portion of this manual.





Troubleshooting

The following represents the most common questions asked about the CITY LITE with regard to everyday use; check this helpful guide or the operator's manual for more information if you have a question about using your CITY LITE:

Question	Possible Causes	Answer
Why is there NO POWER to the CITY LITE?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controller system power is not connected. 2. Controller system CPU and joystick are not connected. 3. Battery power is too low. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Connect the Battery. 2. Ensure all connections between Joystick, CPU and Battery are securely tightened. 3. Charge the Battery.
Why is the CITY LITE noisy or vibrating when turning?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Speed is set too low. 2. Motor is damaged. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raise the speed. At low speeds, the motor may sound or feel strained. 2. Replace the motor.
Why can't I remove the battery?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Battery must be unplugged before removing. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unplug the battery wire harness located on the back of the wheelchair.
Why is the driving distance shorter than normal?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chair is being operated at below 0 degrees Celsius. 2. Chair is being driven on uneven surfaces, rough terrain or slopes often. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. This is a normal characteristic of Lithium material in a battery when operating at a cold temperature. 2. Energy consumption increases on uneven surfaces, rough terrain or slopes. This is normal.
Why can't I charge the battery?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Charger light does not turn on. 2. Charger light is always green. 3. Charging time is stopped before full charge is complete. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replace the charger. 2. Battery is not connected, or may need to be replaced. 3. Capacity of the battery has decreased over time. Replace the battery.
Why can't I connect the Controller?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Connector pins (male) on the controller have become bent and misaligned with connector holes (female) on CPU connector. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Using a small tool, carefully straighten the connector pins (male) on the Controller to align with holes (female) on the CPU connector.

Diagnostics

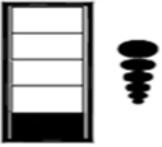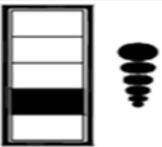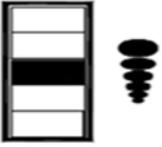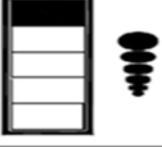Your controller has an indicator light that, during normal operation, is a steady GREEN. This light also functions as a diagnostic tool by flashing in patterns that indicate a diagnostic code. The following is a chart of the diagnostic light codes that your CITY LITE may use to indicate problems. It is important to pay attention to these diagnostics in case the CITY LITE must be put out of use for safety reasons until maintenance can be performed.

Diagnostic Code (left side – speed indicator light)	Diagnosis Description	Trouble Shooting
1 	Battery Empty	Charge the battery immediately.
2 	Joystick malfunction	Will likely require Joystick replacement. Call for service.
3 	Wheelchair is charging	Unplug charging cable to use wheelchair.
4 	Motor connection damaged	Will likely require motor or cable replacement. Call for service.
5 	Brake is not connected or damaged	Make sure the chair is not in freewheel mode (push red levers to power mode). If error continues, call for service.

Limited Warranty

The purchaser of this product is entitled to a limited warranty as offered by The Travel Buggy and its affiliates on the following components and timeframes:

- Frame - 5 Years
- Motor - 2 years
- Battery - 1 year
- Joystick and CPU System - 1 year
- Wear Parts* - 3 months

*Includes tires, seat and back rest, arm rests, and support straps.

This warranty is valid for the replacement of dysfunctional parts only. Any parts under warranty will be replaced and shipped to your door. Any service and labor fees, if applicable, to replace parts under warranty must be paid by the user.

Due to its straightforward design, most parts can be easily exchanged by the end user without a professional service tech required. However, it is always recommended you seek professional help for maintenance and service, to make sure the work is done properly.

The warranty only covers NON-DELIBERATE Damage.

The warranty does not cover:

- Products damaged by user negligence.
- Products damaged accidentally.
- Products damaged intentionally.
- Products that have been subjected to negligence.
- Products that have been subjected to abuse.
- Products that have been improperly stored.
- Products that have been improperly handled.
- Products that have been improperly operated.
- Products that have experienced general misuse.
- Products that have been modified in an unauthorized, unapproved way.

Warranty is non-transferable and only valid for the original wheelchair purchaser.

Warranty is only valid so long as product is registered online at www.thetravelbuggy.com within 30 days of receipt. The serial number for registration can be found at the top of the chair's back, simply remove the roll cushion to locate it.

The Travel Buggy will, at its sole discretion, replace any warrantable item that fails within the warranty period.

The Travel Buggy team promises to try and make right any issue that may arise with your purchase or the experience with our products.



Modèle CITY LITE

Mode d'emploi

1-888-56-BUGGY

contact@thetravelbuggy.com

Contents

Introduction	3
Spécifications	4
Schéma de spécification Schéma	5
Fonctionnement en toute sécurité	6
Précautions	7
Entretien	8
Interférence électromagnétique (EMI)	8
Mise en service	9
Régulateur	11
Fonctionnement de base	12
Chargement des batteries	13
Mode roue libre	15
Transport de votre City Lite	16
Dépannage	17
Diagnostic	18
Garantie limitée	19

Introduction

Merci d'avoir choisi Travel Buggy pour vos besoins de transport de fauteuils roulants portables. Félicitations pour le choix du modèle CITY LITE, qui vous fournira des années de service fiable avec une utilisation et des soins appropriés.

Il est important de lire ce manuel avant d'utiliser votre CITY LITE afin de se familiariser avec ses caractéristiques, ses limites et ses informations de sécurité. Vous trouverez le fonctionnement et l'entretien de votre CITY LITE très simple et facile, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à Travel Buggy sur notre hotline clients, 1.888.56. BUGGY ou par email contact@thetravelbuggy.com.

Avertissement : Travel Buggy, ses filiales et ses partenaires ne peuvent être tenus responsables des dommages corporels ou matériels résultant de l'utilisation ou de l'entretien dangereux ou inapproprié du fauteuil roulant électrique portatif CITY LITE.

Dans le cadre de notre initiative d'amélioration continue des produits, Travel Buggy se réserve le droit de modifier les spécifications et la conception sans préavis. Par conséquent, il peut y avoir des différences mineures entre votre CITY LITE et ses accessoires et les photos, illustrations et instructions contenues dans ce manuel.

Apprenez à connaître votre CITYLITE par Travel Buggy :






Localisez le numéro de série au bas du bar, sous le coin salon pour vous inscrire en ligne et notez ici:

Specifications

Charge maximale:	120 kg (265 lbs.)
Roues:	6" PU solide (avant) 8" PU solide (Arrière)
Capacité maximale de pente:	12°
Vitesse maximale:	6 km (6.0 miles) par heure
Distance maximale (pleine charge):	20 km (12.5 miles) (batterie simple) 40 km (25 milles) (batterie double)
Pilotage	contrôleur de joystick 360 °
Moteur:	2 x moteurs sans balai 180W
Profondeur du siège:	40 cm (15.75 pouces)
Largeur du siège:	40 cm (15.75 pouces)
Hauteur du siège:	47 cm (18.5 pouces)
Distance de freinage:	1.5 m (quand à la vitesse supérieure)
Rayon de braquage :	85 cm (33 pouces)
Batterie:	Lithium 24V/10Ah (une seconde 10Ah est facultative)
Chargeur:	24V/2A

Temps nécessaire pour charger complètement la batterie :	6-8 heures
Poids net (batterie incluse) :	21 kg (46 lb) (batterie simple) 23 kg (51 lb) (batterie double)
Poids net (sans batterie) :	19 kg (42 lbs.)
Matériaux du cadre :	Alliage d'aluminium
Déplié (L x L x H) :	89 x 61 x 94 cm (35 x 24 x 37 pouces)
Folded (L x L x H) :	61 x 33 x 78.75 cm (24 x 13 x 31 pouces)

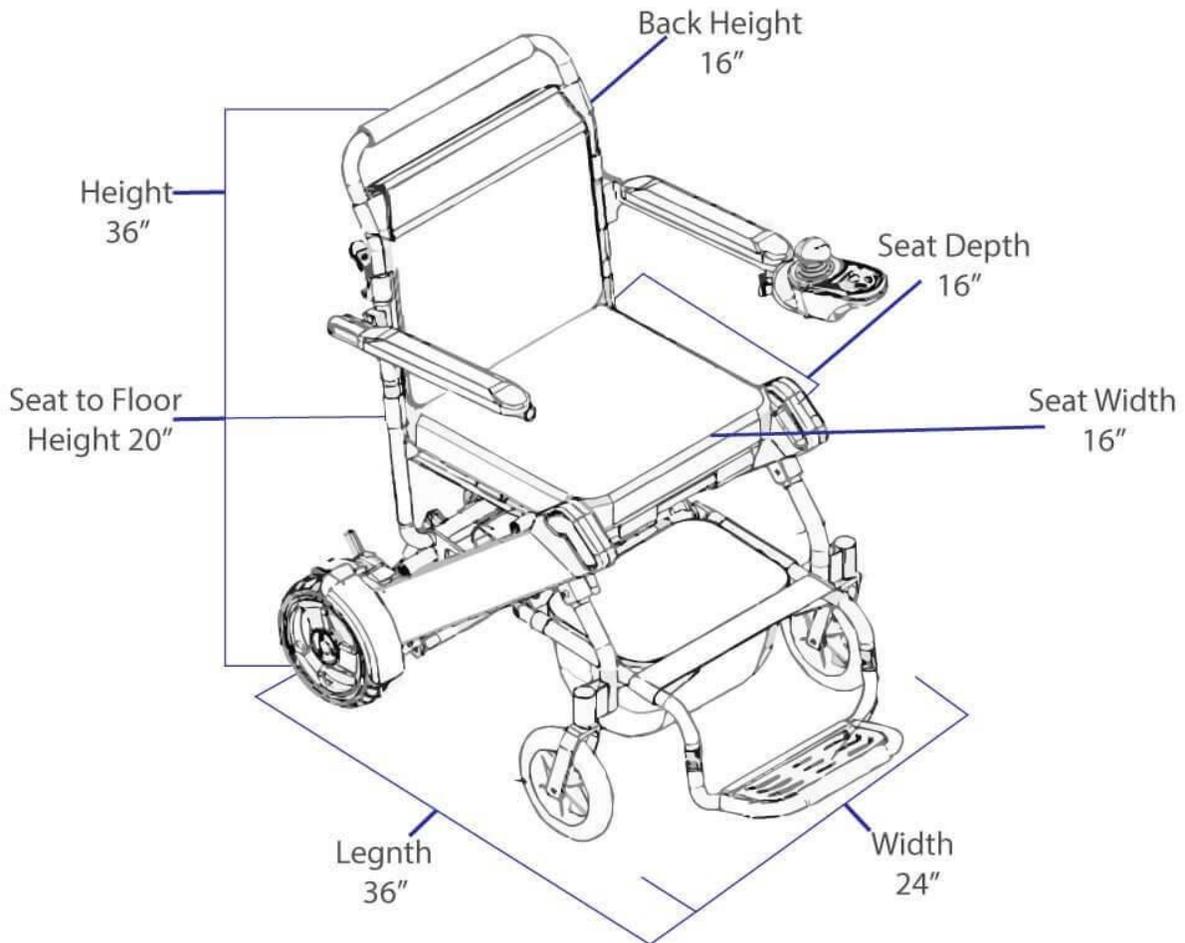Specification Diagram



Fonctionnement en toute sécurité

Nous pensons que c'est la section la plus importante du manuel; Comment utiliser en toute sécurité le fauteuil roulant CITY LITE portable. S'il vous plaît examiner attentivement cette section et contactez-nous si vous avez des questions.

Sécurité générale...

- Réglez la CITY LITE à votre niveau de confort personnel le plus possible.
- Prenez votre temps pour apprendre comment la CITY LITE travaille dans un espace privé avant de commencer à rouler autour d'autres.
- Pratiquez la flexion, l'atteinte et le transfert dans et hors de la CITY LITE.
- Soyez toujours conscient de votre environnement.
- Si vous n'êtes pas sûr que la CITY LITE puisse dépasser un obstacle, essayez de trouver un autre moyen de contourner.
- Le CITY LITE est conçu pour un seul utilisateur ; plus d'un utilisateur peut causer des dommages personnels à vous et à d'autres.
- Assurez-vous que les composants électroniques tels que le panneau de commande, le chargeur de batterie et d'autres composants électroniques contrôlés évitent l'humidité. Si ces composants entrent en contact avec l'humidité, sécher avant utilisation.
- Le siège de la CITY LITE est conçu pour le confort, pas spécifiquement pour le soulagement de la pression; Si vous souffrez de plaies de pression, ou si vous êtes à risque qu'ils se produisent, s'il vous plaît consulter votre médecin.

Avant d'utiliser votre CITY LITE...

- Assurez-vous que la CITY LITE fonctionne en douceur.
- Vérifier s'il y a des bruits inhabituels, des vibrations ou un changement dans la facilité d'utilisation ; Si vous détectez un problème, utilisez la trousse d'outils pour effectuer la maintenance ou communiquer directement avec votre professionnel de service ou le buggy Travel.
- Le fait de ne pas maintenir votre CITY LITE pourrait augmenter le risque de blessure ; entrer en contact avec le Buggy Travel.

Afin que nous puissions vous aider à trouver et à corriger le problème.

Entrer dans la CITY LITE...

- Avant de vous asseoir, assurez-vous que la CITY LITE est éteinte, ce qui permettra à la CITY LITE ne se déplace pas sur le toucher le joystick
- Assurez-vous que le repose-pied est au sol
- Une fois à bord, assurez-vous que vos pieds sont en sécurité sur le repose-pied

Conduire la City Lite.....

- Être attentif aux dangers des véhicules automobiles sur les routes ou dans les parcs de stationnement.
- La nuit, ou quand il est difficile de voir, utilisez du ruban réfléchissant sur votre CITY LITE.
- Le CITY LITE est conçu pour être utilisé sur des surfaces fermes, même comme le béton, l'asphalte ou le plancher intérieur.

- Ne pas faire fonctionner la CITY LITE dans du sable, du sol meuble ou sur un terrain accidenté, ce qui pourrait endommager les roues, les roulements, les essieux ou les moteurs, ou desserrer les attaches.

Sortir de la CITY LITE...

- Assurez-vous d'amener la CITY LITE à un arrêt complet.
- Éteignez le CITY LITE pour éviter d'actionner accidentellement le joystick et de déplacer le fauteuil roulant.
- Soulevez l'accoudoir de sorte que vous puissiez facilement sortir de la CITY LITE.
- Sortez prudemment et en toute sécurité du siège.

Limite de poids – ne pas dépasser ou la garantie sera annulée...

- Ne jamais dépasser un poids total de 120 kg (265 lb) au total pour le cavalier plus les articles transportés.
- Le dépassement de la limite de poids est susceptible d'endommager le siège, le cadre ou les attaches et peut causer des blessures graves à vous ou à d'autres.

Lors du transport de la CITY LITE...

- Ne jamais s'asseoir dans la City Lite dans un véhicule en mouvement; un accident ou un arrêt brusque peut vous amener à être éjecté du fauteuil électrique.
- Ne jamais transporter la ville Lite sur le siège avant d'un véhicule où elle peut se déplacer et interférer avec le conducteur.
- Sécurisez toujours le City Lite afin qu'il ne puisse pas rouler ou se déplacer lorsqu'il est transporté dans un véhicule.
- La City Lite n'est pas homologuée pour être utilisée avec un système d'arrimage, qui est généralement utilisé pour transporter un utilisateur assis dans un fauteuil roulant motorisé dans un véhicule à moteur.

Précautions

ATTENTION: opérer en toute

**Ne pas utiliser le CITY LITE dans l'eau.
N'utilisez pas l'escalier ou les escaliers mécaniques de CITY LITE.**

N'utilisez pas le CITY LITE lorsque vous êtes dans un véhicule en mouvement, tel qu'un autobus.

N'inclinez pas votre corps pour sortir du CITY LITE, ce qui causerait un problème d'équilibre.

Ne dépassez pas la limite de poids total de 120 kg (265 lb) pour le cavalier et tous les articles.

**Éteignez le CITY LITE lorsque vous quittez le fauteuil pour des raisons de sécurité.
Pratiquez la conduite du CITY LITE dans un endroit privé et fermé.**

Entretien

Il est important d'effectuer un entretien régulier de votre CITY LITE pour la longévité et l'éligibilité à la garantie. Même un petit nettoyage de temps en temps permettra de garder votre appareil comme neuf. Les ateliers de réparation certifiés avec des professionnels formés qui se spécialisent dans les fauteuils roulants électriques et les scooters seront qualifiés pour effectuer le service et l'entretien de votre fauteuil roulant électrique CITY LITE si nécessaire. Veuillez-vous assurer de tenir un registre des travaux d'entretien et de maintenance effectués. Votre atelier ou votre technicien peut avoir besoin de pièces que The Travel Buggy a à sa disposition.

Nous vous recommandons d'inspecter votre CITY LITE deux à trois fois par an dans les domaines suivants :

Cadre : Serrer les vis desserrées au besoin à l'aide du kit d'outils inclus avec votre CITY.

Roues : s'assurer qu'elles tournent facilement. Une résistance importante peut nécessiter de nouveaux roulements.

Accoudoirs : recherche l'usure excessive ou s'ils sont desserrés.

Les pièces de rechange et les problèmes d'entretien plus importants devraient être effectués par un professionnel. Nous ne recommandons pas que vous fassiez vous-même des travaux d'entretien intensifs à la VILLE.

Batterie...

Utilisez des batteries qui ont été fournies par The Travel Buggy seulement ; nos batteries sont des batteries spéciales au lithium spécialement conçues pour une utilisation dans le CITY LITE.

Lire toutes les instructions de la batterie avant d'essayer de changer ou de charger la batterie.

Pour retirer la batterie, vous devez d'abord débrancher le faisceau de câbles à l'arrière de la batterie.

Retirez la batterie lentement et uniformément. Remplacez la batterie en inversant ces étapes.

Attaches ...

La plupart des vis, boulons et écrous du CITY LITE sont des fixations spéciales à haute résistance. Le remplacement de ces fixations par des pièces non approuvées peut entraîner un mauvais fonctionnement de votre CITY LITE et peut causer du tort à vous ou à d'autres personnes :

Utilisez uniquement des fixations fournies par le Travel Buggy.

A l'aide des outils fournis avec votre CITY LITE, serrez toutes les fixations qui se desserrent dès que possible.

Changement et ajustements.....

N'utilisez jamais de pièces n'appartenant pas à City Lite et n'apportez jamais de modifications à votre CITY LITE sans l'autorisation écrite d'un représentant de notre société. Cela annulera la garantie et peut créer un risque pour la sécurité Electromagnétique Interférence (EMI)

Les véhicules motorisés tels que la City Lite peuvent être sensibles aux interférences électromagnétiques (EMI), qui interfèrent l'énergie électromagnétique (EM) émise par des sources telles que les stations de radio, les stations de télévision, les émetteurs de radio amateur (Ham), les radios bidirectionnelles et téléphones cellulaires.

L'interférence (provenant des sources d'ondes radio) peut faire en sorte que la City Lite relâche ses freins, se déplace par elle-même ou se déplace dans des directions involontaires.

Installation

Votre City Lite arrivera soigneusement emballé dans une boîte en carton. Nous suggérons que deux personnes soient disponibles pour retirer l'emballage et installer la City Lite pour la première fois.

1. la ville Lite navires debout; Ouvrez soigneusement le haut de la boîte puis tournez la boîte sur le côté pour faciliter l'enlèvement du contenu.

2. une fois que tout l'emballage a été enlevé, vous trouverez les composants suivants::



1. Relevez le dossier jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
2. Placez une main sur le dossier et utilisez votre autre main pour pousser le Repose-pieds vers le bas.
3. Tirez le câble situé sous le siège pour régler le mécanisme de verrouillage.
N.B. : Étape importante.
4. Poussez le dossier à l'écart du coussin du siège, en le verrouillant en place.
5. Faites pivoter les deux accoudoirs vers le haut et vers l'avant de la chaise.

REMARQUE : Assurez-vous que le dossier est verrouillé en place et ne s'affaisse pas vers l'avant avant de l'utiliser.

1. Soulever le



2. Étendre la chaise



3. & 4. Tirez le câble pour verrouiller ;
poussez le dossier pour l'éloigner.
Du coussin d'assise



5. Relever les accoudoirs



1. Glisser le contrôleur dans la fente ouverte du bras de la CITY sur le côté droit (à moins qu'il ne soit précommandé pour les utilisateurs gauchers). Serrez le bouton situé sous l'accoudoir pour fixer le contrôleur en place.

Contrôleur de glissière
dans le repos de bras



Bouton de
Contrôleur de sécurisé



1. Connectez le faisceau de câbles du contrôleur au faisceau de câbles de l'unité centrale qui part du fauteuil lui-même, en prenant soin d'aligner correctement les broches afin qu'elles ne se plient pas, ne se cassent pas ou ne soient pas endommagées. Fixez la connexion en tournant l'anneau d'accouplement sur le harnais raccordé.



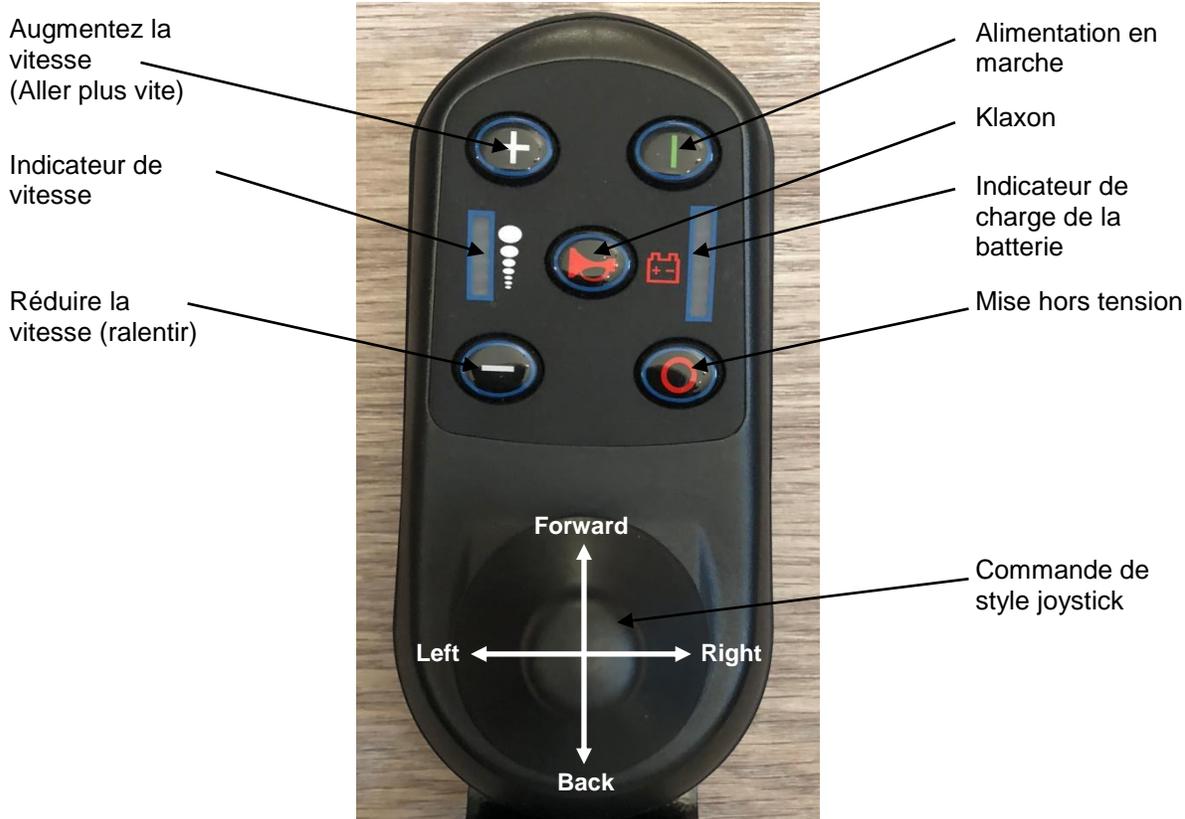
Connectez l'unité centrale au faisceau de câbles du contrôleur

1. Connectez le faisceau de batterie situé près de la roue arrière de la CITY LITE.



Contrôleur

La CITY LITE est équipée d'un contrôleur de style joystick qui est intuitif et facile à comprendre et à utiliser. Le contrôleur de votre CITY LITE comporte également un avertisseur sonore, des commandes de vitesse, un indicateur de batterie et des boutons d'alimentation, comme illustré. :



Contrôleur et conseils de conduite...

- Prendre un certain temps dans un environnement sûr et contrôlé pour apprendre le fonctionnement du contrôleur et la vitesse et la maniabilité de la City Lite.
- Lorsque vous tournez, réduisez votre vitesse, ce qui permettra d'éviter tout basculement ou basculement potentiel de la City Lite.
- Assurez-vous d'ajuster la vitesse en fonction de votre environnement.
- Pour ralentir, ramenez lentement le joystick vers la position initiale.
- Pour arrêter, il suffit de ramener le joystick à la position initiale.
- Utilisez un soin supplémentaire lorsque vous conduisez le City Lite à l'envers. Vous risquez de perdre le contrôle ou de tomber si l'une des roues arrière heurte un objet. En marche arrière :
- Actionnez le City Lite lentement et à une vitesse égale.
- Arrêtez-vous souvent et assurez-vous que votre trajectoire est dégagée des obstacles.

Fonctionnement de base

Avant d'utiliser votre CITY LITE, assurez-vous de lire toutes les informations de sécurité et les précautions incluses dans ce manuel. N'opérez que dans l'environnement approprié après avoir pratiqué l'utilisation du CITY LITE et savoir comment utiliser le contrôleur.

GET IN	Assurez-vous que l'alimentation est éteinte avant de vous asseoir dans le siège de votre CITY LITE, sans lumières sur le contrôleur. Assurez-vous que le repose-pied est abaissé avant d'entrer dans votre CITY LITE.
POWER ON	Appuyez sur le bouton Power, vous entendrez un bip et un voyant lumineux vous indiquera que l'appareil est sous tension.
TURNING & STEERING	Utilisez le joystick pour diriger et tourner à gauche, à droite ou vers l'avant et vers l'arrière.
STOPPING	Il suffit de retirer la main du joystick pour l'arrêter.
POWER OFF	Lorsque vous vous arrêtez, il est conseillé d'éteindre le CITY LITE pour éviter les accidents. Appuyez sur le bouton Power pour éteindre le CITY LITE.
GET OUT	Assurez-vous qu'il n'y a pas de lumière sur le contrôleur avant de quitter le CITY LITE.

REMARQUE : Pour assurer une sécurité totale, éteignez toujours votre CITY LITE lorsque vous ne bougez pas, peu importe la durée de votre arrêt. De cette façon, vous ou quelqu'un d'autre n'actionnera pas accidentellement la commande du joystick, ce qui provoquera un mouvement inattendu du fauteuil roulant.

Rechargement des batteries

Votre CITY LITE arrivera avec une batterie complètement chargée, qui devrait durer au maximum 20 km ou 12,5 miles dans des conditions normales de fonctionnement. Une deuxième batterie peut être achetée en contactant The Travel Buggy, ce qui prolongera la durée de fonctionnement. Nous vous recommandons de faire fonctionner le CITY LITE jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée afin de tirer le meilleur parti de la durée de vie de la batterie.

Lorsque vous devez charger la batterie dans votre CITY LITE, suivez la procédure suivante :

1. Mettez l'appareil hors tension à l'aide de la touche du contrôleur.
2. Branchez le chargeur sur le port du contrôleur (voir ci-dessous) et laissez charger pendant 6 à 8 heures.



Port de charge du contrôleur

1. Branchez le faisceau d'alimentation du chargeur dans le chargeur, puis dans une prise murale mise à la terre.
2. Laissez votre CITY se charger pendant 6 à 8 heures ou lorsque le voyant du chargeur devient vert, ce qui signifie que vos batteries sont complètement chargées.
3. Si vous en avez besoin, les lumières et leur signification se trouvent à l'arrière du chargeur.

Avant du chargeur

Lumière de chargeur :

La lumière doit être allumée après avoir branché le chargeur.

La couleur claire indique la durée de vie de la batterie :
 Rouge – la batterie est complètement drainée
 Ambre – la batterie est en charge



Arrière du chargeur avec des définitions de ce que les couleurs de lumière signifient.

Votre City Lite peut nécessiter une nouvelle batterie à un moment donné ; pour le changer :

1. Débranchez le faisceau de câbles de batterie situé à l'arrière de la chaise près de la roue arrière.
2. Retirez complètement la batterie. Remplacez-la en glissant la nouvelle pile et en branchant le faisceau de câbles.



Plus d'informations sur la batterie CITY LITE.....

- La CITY LITE est livrée avec une batterie installée, chargée 24 volts 10Ah lithium ion.
- La charge de la batterie pendant 8 heures permettra de maximiser le cycle de vie global de la batterie.
- Coupez l'alimentation de l'unité principale pendant la charge.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance près de la City Lite pendant qu'il est en charge.
- N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de la batterie.
- Rouge signifie que l'alimentation est allumée et que l'appareil est en charge; vert signifie que l'appareil est complètement chargé. Remarque: cette information est également située à l'arrière du chargeur.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, retirez le câble. Enlevez ensuite le connecteur de charge CC et la prise d'alimentation d'entrée .
- Le temps moyen utilisé pour recharger les batteries viables variera de 2 à 8 heures selon le niveau d'utilisation.
- Ne pas recharger plus de 8 heures.
- Si vous ne faites pas fonctionner le City Lite pendant deux mois, nous vous conseillons de recharger la batterie pendant 6-8 heures avant de l'utiliser.
- Protection contre le courant: ce système est inclus sur le City Lite et arrêtera le courant des batteries si déclenché, fermant ainsi le moteur vers le bas, qui s'assurera que le moteur et la batterie ne subissent aucun dommage.
- Le cycle de vie d'une batterie au lithium est mesuré en cycles de charge avec une moyenne de 500 cycles de charge.
- Vérifiez le voyant de la batterie quotidiennement si vous utilisez la ville fréquemment.
- N'utilisez pas de chargeurs de batterie qui n'ont pas été certifiés par notre société.
- S'il est endommagé, ne manipulez pas la batterie sans gants et lunettes de protection.
- Si la batterie doit être éliminée, localisez l'installation d'élimination des matières dangereuses la plus proche et appelez-la pour des instructions.
- Le City Lite est équipé d'une batterie au lithium et va jusqu'à environ 20 km ou 12,5 milles.
Cette durée maximale de fonctionnement par charge peut être affectée par:
 - Terrain inégal, incliné ou mou
 - Dépassement de la limite de poids total
 - Vitesse variable excessivement
 - Arrêt et démarrage fréquents

- Avant de ranger votre City Lite pendant de longues périodes, procédez comme suit pour maintenir la batterie:
 - Chargez complètement la batterie avant de l'entreposer, puis
 - Retirez la batterie de l'appareil
 - Entreposer la batterie dans un environnement de température ambiante maintenu à sec
 - Évitez les extrêmes de température et ne laissez pas la batterie geler
- N'essayez pas de recharger votre batterie si elle est gelée de conditions météorologiques extrêmes, au lieu d'abord lui permettre de dégeler pendant plusieurs heures.
- Des piles additionnelles ou 4placement sont disponibles chez Travel Buggy; Contactez-nous sur 1.888.56. buggy ou contact@thetravelbuggy.com.

Mode roue libre

Afin d'avoir un dispensateur de soins pousser la City Lite, elle doit être mise en mode roue libre. Ce mode débraye le mécanisme d'entraînement sur les roues, ce qui les rend libres de pousser manuellement. Nous vous conseillons de désactiver l'alimentation de la City Lite dans ce mode, à la fois pour la sécurité et pour économiser la puissance de la batterie.

1. pour mettre la City Lite en mode roue libre, venez à un arrêt complet et éteignez l'alimentation sur le contrôleur.
2. Poussez vers le haut sur les deux leviers rouges situés sur chaque roue arrière comme indique:



Poussez deux leviers rouges sur chaque roue

Transport de votre ville Lite

Pour transporter votre City Lite, il est conseillé de le plier en suivant les procédures ci-dessous.

Notez : ne jamais transporter la City Lite dans un système d'arrimage, car la City Lite n'est pas compatible avec eux. Ne jamais s'asseoir dans la City Lite et être transporté dans un véhicule en

mouvement. Ne placez pas la City Lite pliée sur le siège avant avec le conducteur où il pourrait se déplacer ou glisser.

1. Éteignez le régulateur et débranchez le faisceau de câbles. Enlevez le régulateur en desserrant le bouton et en le glissant hors de la chaise.
2. Tournez les deux accoudoirs vers le haut et vers l'arrière du fauteuil.
3. ranger le coussin sous la chaise.
4. Presser les deux leviers pour plier le repose-dos vers le bas.
5. Tirez le câble situé sous le siège pour libérer le mécanisme de verrouillage.
6. Poussez le repose-dos vers le siège et pliez le repose-pied.

1. Débranchez et retirez



2. Accoudoirs pivotants



3. Coussin de rangement



4. Pressez les leviers et rabattez le repose-pied



5. Tirez le câble



6. Pliez vers le haut



Pour des instructions sur la façon de déplier le CITY LITE, voir la partie installation de ce manuel.




Dépannage

Voici les questions les plus fréquemment posées sur la CITY LITE en ce qui concerne l'utilisation quotidienne ; consultez ce guide utile ou le manuel d'utilisation pour plus d'informations si vous avez une question sur l'utilisation de votre CITY LITE :

Question	Causes possibles	Réponse
Pourquoi n'y a-t-il PAS D'ALIMENTATION vers la CITY LITE ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. l'alimentation du système de contrôle n'est pas connectée. 2. le CPU du système de contrôle et le joystick ne sont pas connectés. 3. la puissance de la batterie est trop basse. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Connectez la batterie. 2. Assurez-vous que toutes les connexions entre le joystick, l'unité centrale et la batterie sont bien serrées. 3. Chargez la batterie.
Pourquoi la CITY Lite bruyante ou vibrante en tournant?	<ol style="list-style-type: none"> 1. la vitesse est réglée trop bas. 2. le moteur est endommagé. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Augmentez la vitesse. À basse vitesse, le moteur peut sonner ou se sentir tendu. 2. Remplacez le moteur.
Pourquoi ne puis-je pas retirer la batterie?	<ol style="list-style-type: none"> 1. la batterie doit être débranchée avant de la retirer. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Débranchez le faisceau de câbles de la batterie situé à l'arrière du fauteuil roulant.
Pourquoi la distance de conduite est-elle plus courte que la normale?	<ol style="list-style-type: none"> 1. la chaise est actionnée au-dessous de 0 degrés Celsius. 2. la chaise est conduite sur les surfaces inégales, le terrain accidenté ou les pentes souvent. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. C'est une caractéristique normale du lithium dans une batterie lorsqu'elle fonctionne à basse température. 2. La consommation d'énergie augmente sur les surfaces inégales, les terrains accidentés ou les pentes. C'est normal.
Pourquoi ne puis-je pas recharger la batterie?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le voyant du chargeur ne s'allume pas. 2. Le voyant du chargeur est toujours vert. 3. Le temps de charge est arrêté avant la fin de la charge complète. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remplacez le chargeur. 2. La batterie n'est pas connectée ou doit être remplacée. 3. La capacité de la batterie a diminué au fil du temps. Remplacez la batterie.
Pourquoi ne puis-je pas connecter le contrôleur?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les broches de connecteur (mâle) sur le contrôleur se sont pliées et désalignées avec les trous de connecteur (femelle) sur le connecteur CPU. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. à l'aide d'un petit outil, redressez soigneusement les broches du connecteur (mâle) sur le régulateur pour les aligner avec les trous (femelles) sur le connecteur du CPU.

Diagnostics

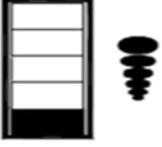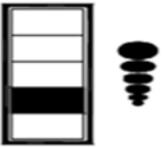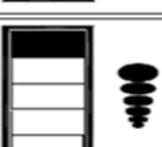Votre contrôleur est doté d'un voyant lumineux qui, en fonctionnement normal, est en vert fixe. Cette lumière fonctionne aussi comme un outil de diagnostic en clignotant dans les modèles qui indiquent un code de diagnostic. Ce qui suit est un tableau des codes de lumière diagnostique que City Lite peut utiliser pour indiquer des problèmes. Il est important de prêter attention à ces diagnostics dans le cas où la City Lite doit être mise hors d'usage pour des raisons de sécurité jusqu'à ce que l'entretien puisse être effectué.

Code de diagnostic (côté gauche - voyant de vitesse)	Description du diagnostic	Dépannage
1 	La batterie est vide	Chargez la batterie immédiatement
2 	Dysfonctionnement du joystick	Nécessitera probablement le remplacement du joystick. Appelez pour le service.
3 	Le fauteuil roulant charge	Débranchez le câble de charge pour utiliser le fauteuil roulant.
4 	Connexion du moteur endommagée	Nécessitera probablement le remplacement du moteur ou du câble. Appel à service
5 	Le frein n'est pas connecté ou endommagé	Assurez-vous que le fauteuil n'est pas en mode roue libre (poussez les leviers rouges en mode alimentation). Si l'erreur persiste, appelez le service.

Garantie limitée

L'acheteur de ce produit a droit à une garantie limitée offerte par le Travel buggy et ses filiales sur les composants et délais suivants:

- cadre-5 ans
- moteur-2 ans
- Batterie-1 an
- Joystick et système CPU-1 an
- Pièces d'usure *-3 mois

* comprend les pneus, le siège et le dossier, les accoudoirs et les sangles de soutien.

Cette garantie est valable uniquement pour le remplacement de pièces dysfonctionnelles. Toutes les pièces sous garantie seront remplacées et expédiées à votre porte. Les frais de service et de main-d'œuvre, le cas échéant, pour remplacer les pièces sous garantie doivent être payés par l'utilisateur.

En raison de sa conception simple, la plupart des pièces peuvent être facilement échangées par l'utilisateur final sans un technicien de service professionnel requis. Cependant, il est toujours recommandé que vous cherchiez une aide professionnelle pour l'entretien et le service, pour s'assurer que le travail est fait correctement.

La garantie ne couvre que les dommages non intentionnels.

La garantie ne couvre pas:

- Produits endommagés par négligence de l'utilisateur.
- Produits endommagés accidentellement.
- Produits endommagés intentionnellement.
- Les produits qui ont fait l'objet d'une négligence.
- Les produits qui ont fait l'objet d'abus.
- Les produits qui ont été mal stockés.
- Les produits mal manipulés.
- Les produits qui ont été mal exploités.
- Les produits qui ont connu une mauvaise utilisation générale.
- Les produits qui ont été modifiés de façon non autorisée et non approuvée.

La garantie n'est pas transférable et n'est valable que pour l'acheteur en fauteuil roulant d'origine.

La garantie n'est valable que dans la mesure où le produit est enregistré en ligne à www.thetravelbuggy.com dans les 30 jours suivant la réception. Le numéro de série pour l'enregistrement peut être trouvé en haut du dos du fauteuil, il suffit de retirer le coussin de roulement pour le localiser.

La Travel Buggy remplacera, à sa seule discrétion, tout article justifiable qui échouera pendant la période de garantie.

L'équipe de Travel Buggy promet d'essayer de faire droit tout problème qui peut surgir avec votre achat ou l'expérience avec nos produits.