

DASH

by Travel Buggy

Ultra Lite Power Wheelchair

TABLE OF CONTENTS

NOTICES	3	CHARGING	13
SAFETY INFORMATION	4	MAINTENANCE & CARE	14
SPECIFICATIONS	5	LIMITED WARRANTY	15
GETTING STARTED	7	CONTACT & SUPPORT	16
OPERATING	12		

NOTICES

Thank you for choosing DASH Ultra Lite Power Wheelchair by Travel Buggy, the World’s lightest power wheelchair.

It is important to read through this manual before operating your DASH to become familiar with its features as well as its limitations and safety information

You will find the operation and care of your DASH very simple and easy, but should you have any questions please contact Travel Buggy

OUR CUSTOMER HOTLINE
1.888.56.BUGGY (Canada)
1.855.56.BUGGY (USA)

EMAIL
contact@travelbuggy.com



DISCLAIMER:


Travel Buggy, its affiliates and partners cannot be held responsible for personal injury or property damage resulting from the unsafe or improper operation or maintenance of the DASH Ultra Lite Power Wheelchair.

As part of our ongoing product improvement initiative, Travel Buggy reserves the right to change specifications and design without notice. As a result, there may be minor differences between your DASH and the photos, illustrations and instructions in this manual

SAFETY INFORMATION

- DO make certain that the seat is in a locked position when you are operating your DASH
- DO reduce your DASH's speed when you are driving around a corner
- DO proceed with caution as you approach the downgrade of a ramp or other incline and when driving near a raised surface or unprotected ledges and drop offs (curbs, porches, stairs, etc.)
- DO avoid exposure to rain, snow, ice, salt, or standing water whenever possible
- DO maintain and store in a clean and dry condition
- DO keep your hands away from the tires when driving. Be aware that loose fitting clothing can become caught in drive tires
- DO keep tools and other metal objects away from battery terminals. Contact with tools can cause electrical shock
- DO follow the recommended weight capacity (220 lbs / 100 kg)
- DO follow the recommended incline slope rating (12 degrees / 20% slope)
- DO check the battery charge to ensure there is enough charge to get to your destination before using.
- DO NOT drive your DASH across the side of a hill or diagonally up or down a hill, and do not stop (if possible) while driving up or down an incline
- DO NOT operate your new DASH for the first time without completely reading and understanding the owner's manual
- DO NOT carry additional passengers on your DASH
- DO NOT use your DASH as a seat in a moving vehicle
- DO NOT allow unsupervised children to play near the power wheelchair
- DO NOT operate your DASH while under the influence of alcohol, as this may impair your ability to drive safely
- ALL servicing must be performed by qualified personnel only. Unauthorized modifications to power wheelchair, its power system or its control system may compromise the performance and safety of the system. UNDER NO CIRCUMSTANCES should you attempt any repair or service that is not covered in this manual.
- ALWAYS ensure all safety warning labels are in place and legible.

SPECIFICATIONS

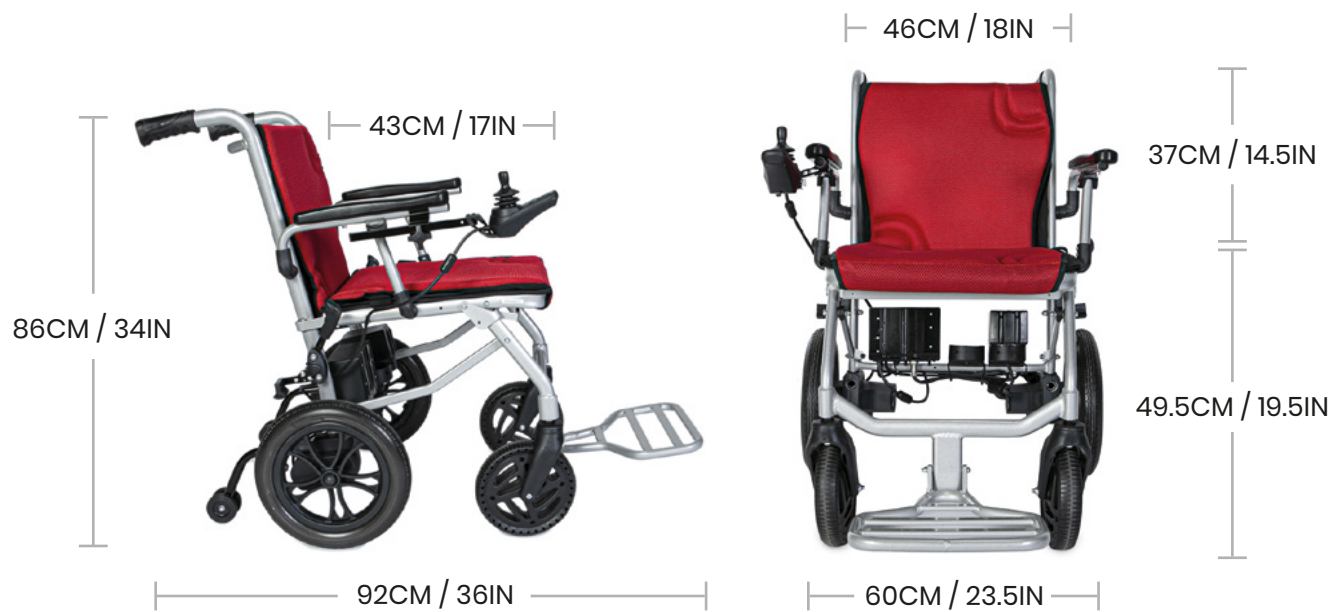

- ⚠ WARNING:** The operator should read all of the warnings signs and instructions here and on the power wheelchair before use.
- ⚠ WARNING:** Always protect batteries from freezing temperatures and never charge a frozen battery. This will damage the battery and may cause personal injury. Attempting to charge a battery in freezing conditions does not prevent a battery from freezing.
- ⚠ WARNING:** You should not operate your scooter on public streets and roadways. Be aware that it may be difficult for traffic to see you when you are seated on your power wheelchair. Obey all local pedestrian traffic rules. Wait until your path is clear of traffic, and then proceed with extreme caution.

SPECIFICATIONS

PERFORMANCE SPECIFICATIONS

DRIVING RANGE: 12.5 MI / 20 KM
MAXIMUM SPEED: 4 MPH / 6 KPH
DRIVE SYSTEM: TWO REAR MOTOR DRIVE
MOTOR TYPE: 250 WATT BRUSHLESS
INCLINE CAPABILITY: 12° / 20%
TURNING RADIUS: 37"
STOPPING DISTANCE: 5 FT (AT FULL SPEED)
OBSTACLE CLEARANCE: 1.5"
BRAKING SYSTEM: ELECTROMAGNETIC
MAX WEIGHT CAPACITY: 220 LBS

DIMENSIONAL SPECIFICATIONS

UNFOLDED DIMENSIONS: 36"L X 23.5"W X 34"H
CHAIR GROSS WEIGHT: 37.5 LBS
CHAIR NET WEIGHT: 35 LBS (NO BATTERIES)
SEATING WIDTH: 18"
SEAT CUSHION SIZE: 17" (W) X 16.5" (D)

FOLDED DIMENSIONS: 23"L X 13"W X 36"H
FRONT WHEEL DIAMETER: 8"
REAR WHEEL DIAMETER: 12"
FLOOR TO SEAT HEIGHT: 19.5"
BACK SUPPORT HEIGHT: 14.5"

OTHER SPECIFICATIONS

BATTERY TYPE: LITHIUM-ION (24V 5.2AH)
BATTERIES PROVIDED: TWO (2)
BATTERY WATT HOUR: 125 WH (AIRLINE APPROVED)
BATTERY CHARGE CYCLES: ~1,000
TIRES: NON-PUNCTURE
CHARGING TIME: 2-3 HOURS
CHARGER INPUT: 100-240V, 50/60HZ (INTERNATIONAL)
CHARGER OUTPUT: 29.4V 2.0A
LAP BELT: PROVIDED
HORN: BUILT-IN

GETTING STARTED




- Unbox your new DASH Ultra Lite Power Wheelchair
- Remove all packaging and protective wrap
- Locate the components provided with the power wheelchair

INCLUDED:

- A. DASH power wheelchair
- B. Lithium-ion battery pack
- C. Battery charger
- D. Anti-tip wheels
- E. Joystick controller
- F. Controller attachment
- G. Cargo net
- H. Seat cushion
- I. Back rest cushion

GETTING STARTED

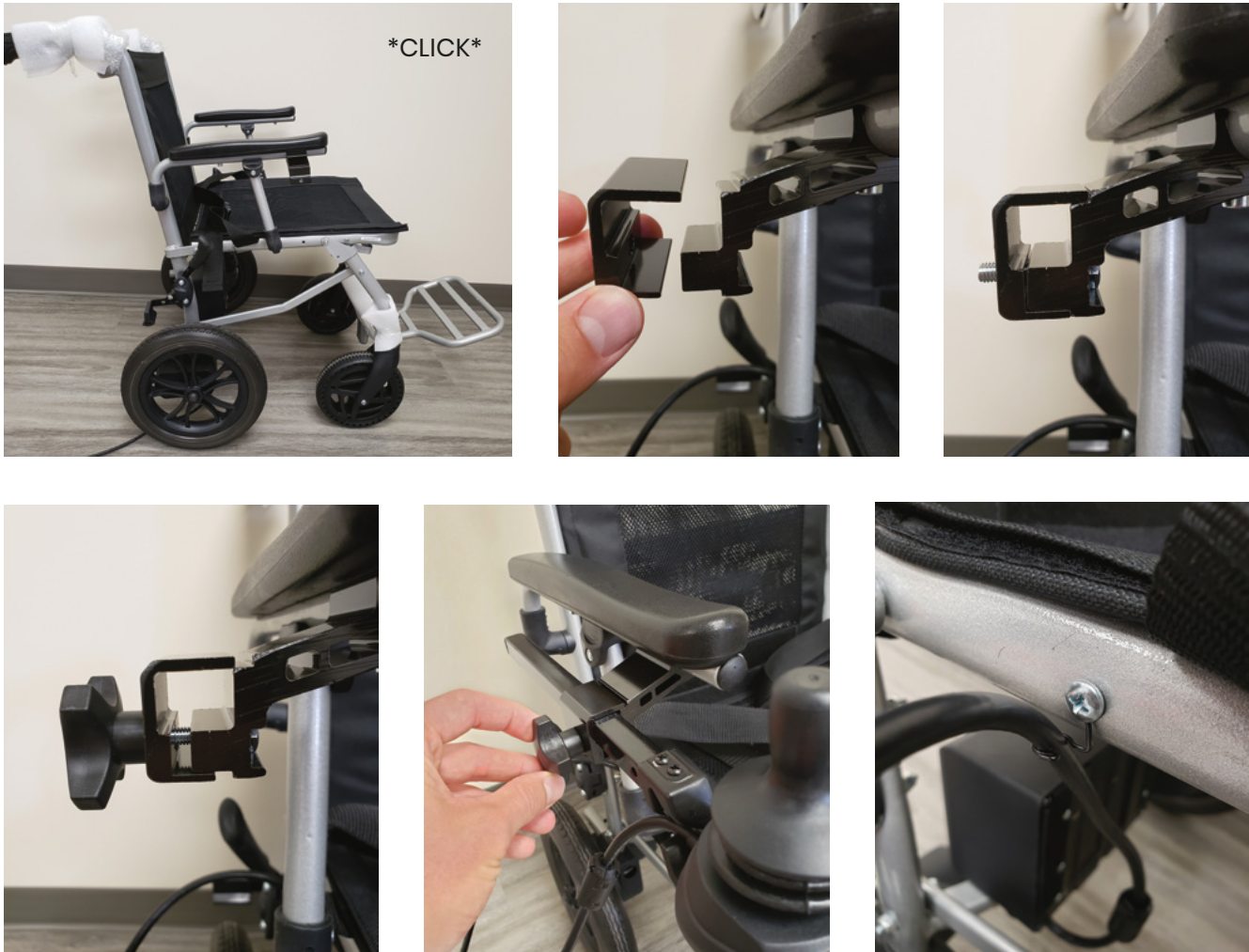

ASSEMBLY

- Unfold the power wheelchair until there is a “CLICK” indicating it is in the fully extended and locked seating position
- Attach the joystick controller by first locating the joystick attachment and loosely fastening it into place
- Insert joystick controller to desired length and fasten tight with the corkscrew knob. Note, the joystick length can be adjusted as required. Loop the joystick cable into the designated cable holder on the side of the power wheelchair


NOTICE: the Joystick Controller can be attached on the left or right side as preferred. Simply move the joystick attachment to the alternative side as desired.

GETTING STARTED



- Locate the smaller cushion of the two, the back rest cushion “I”, and adhere to Velcro at the bottom and around the top of the back rest. Widest part of the backrest cushion should be at the top of the back rest
- Next attach the seat cushion “H”. Be sure to fold the seat cushion under the front of the seat to secure it in place. The widest part of the seat cushion is nearest to the front of the chair.

GETTING STARTED

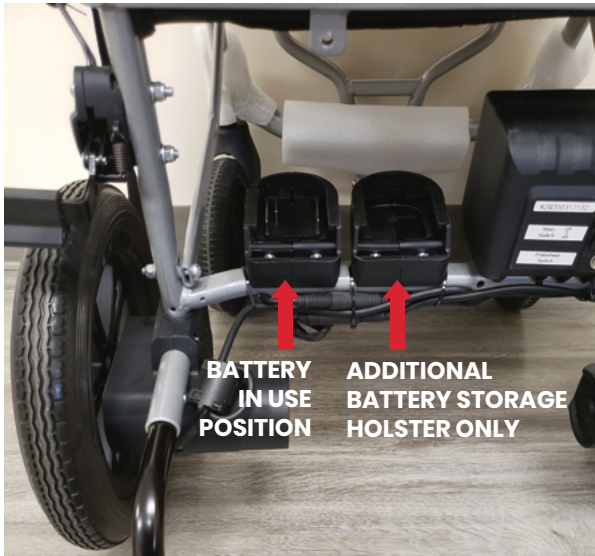

- Insert the battery into the left holster position on the back of the power wheelchair. Listen for a *CLICK* to ensure it was inserted fully.

- For optional additional safety, attach the anti-tip stabilizers at the rear of the wheelchair by depressing the button on the anti-tip wheels "D" and inserting into position. Ensure they are locked into the appropriate position.

NOTICE: Only the left holster position utilizes the battery power. If an additional battery was purchased, it can be held on the right holster, but must be put onto left holster to be put in-use to power the wheelchair

GETTING STARTED



- Your DASH power wheelchair may have come with an optional cargo net for storage of personal items. The cargo net can be fixed beneath the seat or at the back of the chair as indicated in the photos. Attach the hooks on all four sides and ensure tension is created in the cargo net once fastened.

OPERATING




- First, turn on the systems power by locating the CPU at the rear of the power chair and pushing the switch to the ON position
- Indicates the power to the unit is OFF
- | Indicates the power to the unit is ON



- Your battery is fully charged when all lights appear. As the battery is used, lights will disappear indicating the remaining charge life
- ● ● ● ● 80% to FULLY CHARGED
- ● ● ● 60% to 80%
- ● ● 40% to 60%
- ● 20% to 40%
- DEAD to 20%
- There are 3 speed settings as indicated on the controller
- ● ● FAST MODERATE SLOW

CHARGING

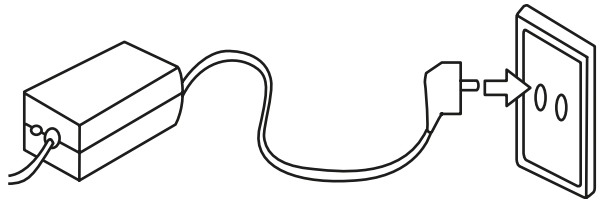

- Fully Charged
- Charging

- We recommend that you remove the battery from your DASH power wheelchair before charging
- Remove the battery from the power wheelchair by depressing the red switch and pulling it off the holster
- Connect the output plug of the charger into the charging socket of the battery, second connect the input plug of charger with your local power socket
- Please ensure the charger and battery are on a flat surface and keep in a well ventilated area
- Ensure the plugs and power socket are safe.
- When charging, the indicator lights are red. After 2-3 hours charging (depending on the remain electric quantity, the indicator lights change from red to green, which means the battery is fully charged

⚠ **NOTICE:** Battery life are estimates only. Be sure there is more than enough charge to get you to your final destination before leaving.

⚠ **WARNING:** Do not leave plugged in more than 12 hours as it will effect the longevity of the battery pack.

⚠ **WARNING:** Do not turn the power wheelchair on if charging battery in power wheelchair.

⚠ **WARNING:** Use of different chargers may cause serious injury to you and may damage the battery pack. Any consequences caused by this are the sole responsibility of the user.

MAINTENANCE & CARE

- Keep your DASH ultra lite power wheelchair clean from debris, moisture and dirt. Wipe clean often
- Visually inspect for worn, damaged or broken components. Special attention should be paid to the wheels and motors
- Check the condition of the warning labels. They are for the safety of the operator. REPLACE them if necessary.

LUBRICATION

- According to use condition, please clean or lubricate the front axle, rear axle, front fork and rotating parts after 180 days
- Molybdenum disulfide grease is recommended
- Your DASH ultra lite power wheelchair has electric hub motors that do not require lubrication, please do not lubricate the motors

LIMITED WARRANTY

The purchaser of this product is entitled to a limited warranty as offered by Travel Buggy and its affiliates on the following components and timeframes from the date of purchase:

3 YEAR WARRANTY – Main Frame

1 YEAR WARRANTY – Motor, Control System (CPU)

6 MONTHS WARRANTY – Battery/Cables

90 DAY LIMITED WARRANTY – On the wearing parts, such as the tires, armrest padding, joystick button covers, controls knobs

30 DAY LIMITED WARRANTY – Soft goods, such as seat cushion and backrest padding.

This warranty is valid for the replacement of dysfunctional parts only. Any parts under warranty will be replaced and shipped to your door. Any service and labor fees, if applicable, to replace parts under warranty must be paid by the user.

Due to its straightforward design, most parts can be easily exchanged by the end user without a professional service tech required. However, it is always recommended you seek professional help for maintenance and service, to make sure the work is done properly.

The warranty only covers NON-DELIBERATE Damage.

The warranty does not cover:

- Products damaged by user negligence.
- Products damaged accidentally.
- Products damaged intentionally.
- Products that have been subjected to negligence.
- Products that have been subjected to abuse.
- Products that have been improperly stored.
- Products that have been improperly handled.
- Products that have been improperly operated.
- Products that have experienced general misuse.
- Products that have been modified in an unauthorized, unapproved way.

Warranty is non-transferable and only valid for the original wheelchair purchaser.

Travel Buggy will, at its sole discretion, replace any warrantable item that fails within the warranty period.

CONTACT & SUPPORT

You will find the operation and care of your DASH very simple and easy, but should you have any questions please contact Travel Buggy.

OUR CUSTOMER HOTLINE

1.888.56.BUGGY (Canada)
1.855.56.BUGGY (USA)

EMAIL

contact@travelbuggy.com

Additional images and videos are available on our website.

OUR WEBSITE

www.travelbuggy.com

TABLE DES MATIÈRES

REMARQUES	3	CHARGEMENT	13
INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ	4	ENTRETIEN ET MAINTENANCE	14
SPÉCIFICATIONS	5	GARANTIE LIMITÉE	15
MISE EN MARCHÉ	7	CONTACT ET SUPPORT	16
FONCTIONNEMENT	12		

REMARQUES

Merci d’avoir choisi DASH Ultra Lite
Fauteuil roulant électrique par Travel Buggy,
le fauteuil roulant électrique le plus léger du monde.

Il est important de lire ce manuel avant
d’utiliser votre DASH afin de vous familiariser
avec ses caractéristiques, ses limites et les
informations de sécurité

Vous trouverez le fonctionnement et
l’entretien de votre DASH très simple et
facile, mais si vous avez des questions,
veuillez contacter Travel Buggy

NOTRE SERVICE CLIENTÈLE
1.888.56.BUGGY (Canada)
1.855.56.BUGGY (ÉTATS-UNIS)

EMAIL
contact@travelbuggy.com



CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Travel Buggy, ses filiales et partenaires ne peuvent être tenus responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant d’une utilisation ou d’un entretien dangereux ou incorrect du Fauteuil Roulant Électrique DASH Ultra Lite.

Dans le cadre de notre initiative d’amélioration continue des produits, Travel Buggy se réserve le droit de modifier les spécifications et la conception sans préavis. En conséquence, il peut y avoir des différences mineures entre votre DASH et les photos, illustrations et instructions de ce manuel

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ


- ASSUREZ-VOUS que le siège est en position verrouillée lorsque vous utilisez votre DASH
- RÉDUISEZ la vitesse de votre DASH lorsque vous prenez un virage
- FAITES preuve de prudence lorsque vous vous approchez d’une rampe ou d’une autre pente et lorsque vous vous approchez d’une surface surélevée ou de corniches et dénivellations non protégées (bordures, porches, escaliers, etc.)
- ÉVITEZ autant que possible de vous exposer à la pluie, à la neige, à la glace, au sel ou à l’eau stagnante.
- MAINTENEZ et STOCKEZ dans un état propre et sec
- N’APPROCHEZ pas vos mains des pneus lorsque vous conduisez. Sachez que les vêtements amples peuvent se prendre dans les pneus du véhicule.
- TENEZ les outils et autres objets métalliques éloignés des bornes de la batterie. Le contact avec les outils peut provoquer un choc électrique
- RESPECTEZ la capacité de poids recommandée (220 lbs / 100 kg)
- SUIVEZ la pente recommandée (12 degrés / 20% de pente)
- VÉRIFIEZ la charge de la batterie pour vous assurer qu’elle est suffisante pour atteindre votre destination avant de l’utiliser
- NE CONDUISEZ PAS votre DASH à travers le flanc d’une colline ou en diagonale dans une montée ou une descente, et ne vous arrêtez pas (si possible) lorsque vous montez ou descendez une pente
- N’UTILISEZ PAS votre nouveau DASH pour la première fois sans avoir lu et compris entièrement le manuel d’utilisation
- NE TRANSPORTEZ PAS de passagers supplémentaires sur votre DASH
- N’UTILISEZ PAS votre DASH comme siège dans un véhicule en mouvement
- NE PERMETTEZ PAS aux enfants non surveillés de jouer à proximité du fauteuil roulant électrique
- N’OPÉREZ PAS votre DASH pendant que vous êtes sous l’influence de l’alcool, car celui-ci peut nuire à votre capacité de conduire en toute sécurité
- TOUS les travaux de maintenance doivent être effectués par du personnel qualifié uniquement. Toute modification non autorisée du fauteuil roulant électrique, de son système d’alimentation ou de son système de commande peut compromettre les performances et la sécurité du système.
- EN AUCUN CAS, vous ne devez tenter une réparation ou un entretien qui n’est pas couvert par ce manuel.
- Assurez-vous TOUJOURS que toutes les étiquettes de mise en garde de sécurité sont en place et lisibles

⚠️ AVERTISSEMENT: : l’opérateur doit lire tous les avertissements et les instructions ici et sur le fauteuil roulant électrique avant de l’utiliser.

⚠️ AVERTISSEMENT: Protégez toujours les batteries contre le gel et ne chargez jamais une batterie gelée. Cela endommagerait la batterie et pourrait causer des blessures. Tenter de charger une batterie dans des conditions de gel n’empêche pas une batterie de geler.

⚠️ AVERTISSEMENT: Vous ne devez pas utiliser votre scooter sur la voie publique. Sachez qu’il peut être difficile pour la circulation de vous voir lorsque vous êtes assis sur votre fauteuil roulant électrique. Respectez toutes les règles locales de circulation des piétons. Attendez que votre chemin soit dégagé de la circulation, puis.

SPÉCIFICATIONS

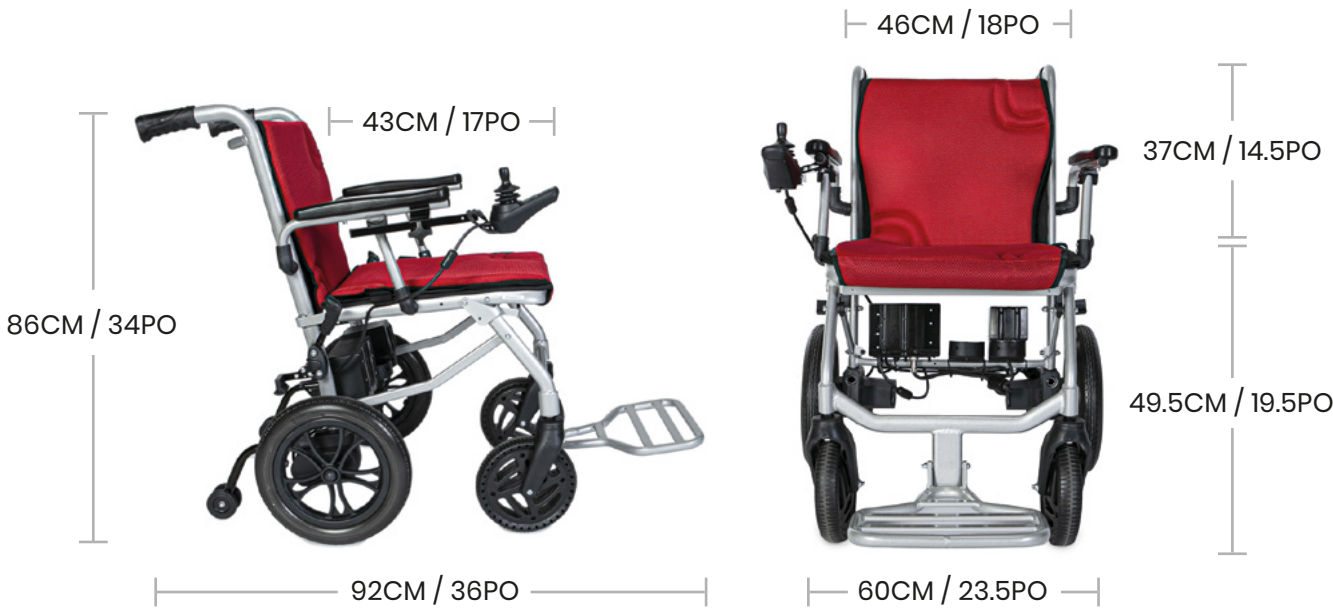

SPÉCIFICATIONS

LES SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

- DISTANCE DE CONDUITE: 12,5 MI / 20 KM
- VITESSE MAXIMALE: 4 MPH / 6 KPH
- SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT: DEUX MOTEURS À L'ARRIÈRE
- TYPE DE MOTEUR: 250 WATTS SANS BALAIS
- CAPACITÉ D'INCLINAISON: 12° / 20 %.
- RAYON DE BRAQUAGE: 37 PO.
- DISTANCE D'ARRÊT: 1,5 M (À PLEINE VITESSE)
- FRANCHISSEMENT D'OBSTACLES: 1,5 PO.
- SYSTÈME DE FREINAGE: ÉLECTROMAGNÉTIQUE
- CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE: 220 LBS
- SPÉCIFICATIONS DIMENSIONNELLES
- DIMENSIONS DÉPLIÉES: 36PO L X 23,5PO L X 34 PO H
- POIDS BRUT DE LA CHAISE: 37,5 LBS
- POIDS NET DE LA CHAISE: 35 LBS (SANS BATTERIES)
- LARGEUR DE SIÈGE: 18 PO

- TAILLE DU COUSSIN DE SIÈGE: 17PO L X 16,5PO D
- DIMENSIONS PLIÉES: 23PO L X 13PO L X 36PO H
- DIAMÈTRE DE LA ROUE AVANT: 8 PO.
- DIAMÈTRE DE LA ROUE ARRIÈRE: 12 PO.
- HAUTEUR DU SOL AU SIÈGE: 19,5 PO.
- HAUTEUR DU SUPPORT DORSAL: 14,5 PO.
- AUTRES SPÉCIFICATIONS
- TYPE DE BATTERIE: LITHIUM-ION (24V 5.2AH)
- BATTERIES FOURNIES: DEUX (2)
- BATTERIE WATT HEURE: 125 WH (APPROUVÉ PAR LA COMPAGNIE AÉRIENNE)
- LES CYCLES DE CHARGE DES BATTERIES: ~1,000
- PNEUS: NON-PUNCTURE
- TEMPS DE CHARGEMENT: 2 À 3 HEURES
- ENTRÉE DU CHARGEUR: 100-240V, 50/60HZ (INTERNATIONAL)
- SORTIE DU CHARGEUR: 29.4V 2.0A
- CEINTURE ABDOMINALE: FOURNIE
- KLAXON: INTÉGRÉ

MISE EN MARCHÉ




- Déballez votre nouveau Fauteuil Roulant Électrique DASH Ultra Lite
- Retirer tous les emballages et les films de protection
- Localisez les composants fournis avec le fauteuil roulant électrique

INCLUS:

- A. Fauteuil roulant électrique DASH
- B. Batterie au lithium-ion
- C. Chargeur de batterie
- D. Roues anti-basculement
- E. Manette de commande
- F. Attachement du contrôleur
- G. Filet de fret
- H. Coussin de siège
- I. Coussin de dossier

MISE EN MARCHÉ

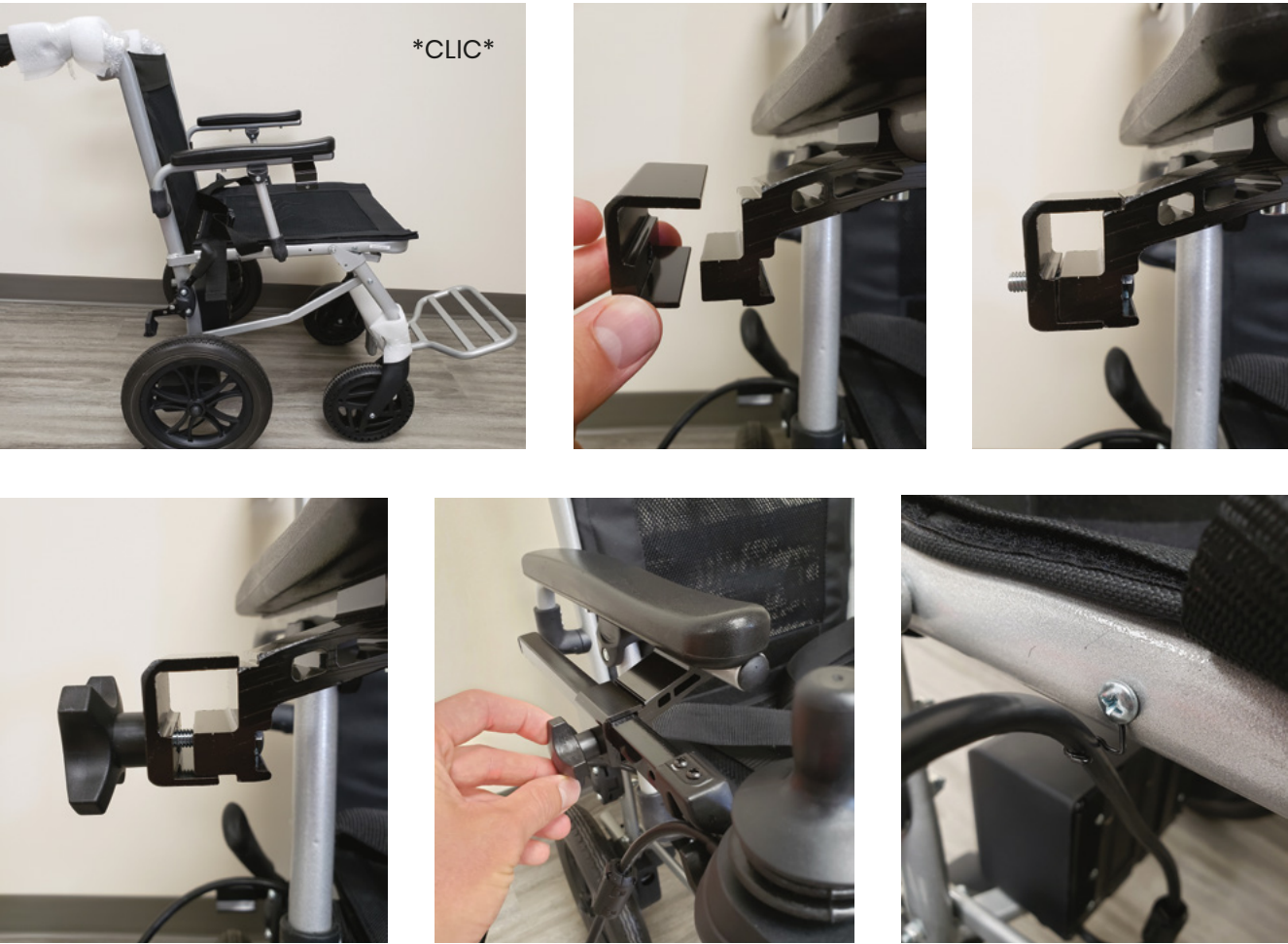

ASSEMBLAGE

- Déplier le fauteuil roulant électrique jusqu'à ce qu'un "CLIC" indique qu'il est en position d'assise entièrement déployée et verrouillée
- Fixer la manette de commande en commençant par localiser la fixation de la manette et la fixer sans serrer
- Insérez la manette de commande à la longueur désirée et fixez-la fermement avec le bouton du tire-bouchon. Notez que la longueur de la manette peut être ajustée selon les besoins. Enroulez le câble de la manette dans le porte-câble prévu à cet effet sur le côté du fauteuil roulant électrique

REMARQUE: : la manette de commande peut être fixée à gauche ou à droite selon les préférences. Il suffit de déplacer la fixation de la manette sur le côté alternatif comme souhaité.

MISE EN MARCHÉ



- Repérez le plus petit des deux, le coussin du dossier « I », et collez le Velcro en bas et en haut du dossier. La partie la plus large du coussin du dossier doit se trouver en haut du dossier

- Fixez ensuite le coussin de siège « H ». Veillez à replier le coussin sous l'avant du siège pour le maintenir en place. La partie la plus large du coussin de siège est la plus proche de l'avant du siège.

MISE EN MARCHÉ



- Insérez la batterie dans l'étui de gauche, à l'arrière du fauteuil roulant électrique. Écoutez un *CLIC* pour vous assurer qu'elle est bien insérée.

- Pour une sécurité supplémentaire optionnelle, fixez le bouton des roues anti-basculement « D » et en les insérant en position. Assurez-vous qu'elles sont verrouillées dans la position appropriée.

REMARQUE: Seule la position gauche de l'étui utilise l'énergie de la batterie. Si une batterie supplémentaire a été achetée, elle peut être placée dans l'étui droit, mais doit être placée dans l'étui gauche pour être utilisée pour alimenter le fauteuil roulant

MISE EN MARCHÉ



- Votre fauteuil roulant électrique DASH peut être fourni avec un filet de chargement en option pour ranger vos effets personnels. Le filet de chargement peut être fixé sous le siège ou à l'arrière de la chaise comme indiqué sur les photos. Fixez les crochets sur les quatre côtés et assurez-vous que la tension est créée dans le filet de chargement une fois fixé.

FONCTIONNEMENT



- Tout d'abord, mettez le système sous tension en plaçant l'unité centrale à l'arrière du fauteuil électrique et en appuyant sur le bouton en position MARCHÉ/ON

- Indique que l'appareil est hors tension
- | Indique que l'appareil est sous tension



- Votre batterie est complètement chargée lorsque toutes les lumières apparaissent. Au fur et à mesure que la batterie est utilisée, les voyants disparaissent, indiquant le niveau de charge restant


- ● ● ● ● 80% à PLEINEMENT CHARGÉ
- ● ● ● 60% to 80%
- ● ● 40% to 60%
- ● 20% to 40%
- DÉCHARGÉE à to 20%

- Il y a 3 réglages de vitesse comme indiqué sur le contrôleur

- ● ● RAPIDE
- ● MODÉRÉ
- LENT

⚠ REMARQUE: La durée de vie des piles n'est qu'une estimation. Assurez-vous que la charge est suffisante pour vous permettre d'atteindre votre destination finale avant de partir.

CHARGEMENT

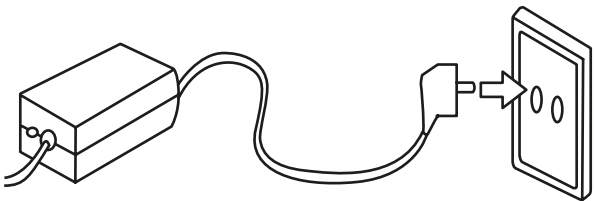

- Pleinement Chargée
- En charge

- Nous vous recommandons de retirer la batterie de votre fauteuil roulant électrique DASH avant de le charger
- Retirez la batterie du fauteuil roulant électrique en appuyant sur l'interrupteur rouge et en la retirant de l'étui
- Branchez la fiche de sortie du chargeur dans la prise de charge de la batterie, puis branchez la fiche d'entrée du chargeur à votre prise de courant locale.
- Veuillez-vous assurer que le chargeur et la batterie se trouvent sur une surface plane et dans un endroit bien ventilé
- Assurez-vous que les fiches et les prises de courant sont sûres.
- Lors de la charge, les voyants lumineux sont rouges. Après 2 à 3 heures de charge (selon la quantité d'électricité restante, les voyants passent du rouge au vert, ce qui signifie que la batterie est complètement chargée

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Gardez votre fauteuil roulant électrique DASH Ultra Lite propre et sans débris, humidité et saleté. Essuyez-le souvent
- Inspectez visuellement les composants usés, endommagés ou cassés. Une attention particulière doit être accordée aux roues et aux moteurs
- Vérifiez l'état des étiquettes d'avertissement. Elles sont destinées à assurer la sécurité de l'opérateur. Remplacez-les si nécessaire.

LUBRIFICATION

- Selon les conditions d'utilisation, veuillez nettoyer ou lubrifier l'essieu avant, l'essieu arrière, la fourche avant et les pièces rotatives après 180 jours
- La graisse au bisulfure de molybdène est recommandée
- Votre fauteuil roulant électrique DASH ultra lite est équipé de moteurs à moyeu électrique qui ne nécessitent pas de lubrification, veuillez ne pas lubrifier les moteurs

⚠ AVERTISSEMENT: ne laissez pas la batterie branchée plus de 12 heures, car cela affecterait sa longévité.

⚠ AVERTISSEMENT: ne mettez pas le fauteuil roulant électrique en marche si vous chargez la batterie dans le fauteuil roulant électrique.

⚠ AVERTISSEMENT: l'utilisation de chargeurs différents peut vous causer des blessures graves et endommager la batterie. Toutes les conséquences qui en découlent sont de la seule responsabilité de l'utilisateur.

GARANTIE LIMITÉE

L'acheteur de ce produit a droit à une garantie limitée, telle qu'offerte par Travel Buggy et ses filiales, sur les composants et les délais suivants à compter de la date d'achat:

3 ANS DE GARANTIE – Cadre Principal

1 AN DE GARANTIE – Moteur, Système de contrôle (CPU)

6 MOIS DE GARANTIE – Batteries/Câbles

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS – Sur les pièces d'usure, telles que les pneus, le rembourrage des accoudoirs, les couvercles de boutons de joystick, les boutons de commande

GARANTIE LIMITÉE DE 30 JOURS – Biens non-durables, tels que le rembourrage du siège et du dossier.

Cette garantie est valable uniquement pour le remplacement des pièces défectueuses. Toutes les pièces sous garantie seront remplacées et expédiées à votre porte. Tous les frais de service et de main-d'œuvre, le cas échéant, pour le remplacement des pièces sous garantie doivent être payés par l'utilisateur.

En raison de sa conception simple, la plupart des pièces peuvent être facilement échangées par l'utilisateur final sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un technicien de service professionnel. Toutefois, il est toujours recommandé de faire appel à un

professionnel pour l'entretien et le service, afin de s'assurer que le travail est effectué correctement.

La garantie ne couvre que les dommages NON DÉLIBÉRÉS.

La garantie ne couvre pas:

- Produits endommagés par la négligence de l'utilisateur.
- Produits endommagés accidentellement.
- Produits endommagés intentionnellement.
- Produits qui ont fait l'objet d'une négligence.
- Produits qui ont été soumis à des abus.
- Produits qui ont été stockés de manière incorrecte.
- Produits ayant fait l'objet d'une manipulation incorrecte.
- Produits ayant fait l'objet d'une utilisation incorrecte.
- Produits ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation générale.
- Produits qui ont été modifiés d'une manière non autorisée et non approuvée.

La garantie n'est pas transférable et n'est valable que pour l'acheteur original du fauteuil roulant.

Travel Buggy remplacera, à sa seule discrétion, tout article sous garantie qui tomberait en panne pendant la période de garantie.

CONTACT ET SUPPORT

Vous trouverez le fonctionnement et l'entretien de votre DASH très simple et facile, mais si vous avez des questions, veuillez contacter Travel Buggy.

NOTRE SERVICE CLIENTÈLE

1.888.56.BUGGY (Canada)

1.855.56.BUGGY (ÉTATS-UNIS)

EMAIL

contact@travelbuggy.com

Des images et des vidéos supplémentaires sont disponibles sur notre site web.

NOTRE SITE WEB

www.travelbuggy.com

DASH

by Travel Buggy

www.travelbuggy.com