

# CLENARE™


NASAL FILTERS

Website: [www.clenare.in](http://www.clenare.in)

Customer Support: [customercare@clenare.in](mailto:customercare@clenare.in)


Toll Free No. 1800 120 1828

Product Model	Filter Efficiency by Particle Size			Air Resistance* (85 L/MIN)	Disinfects
	10 Microns Pollen, Dust, Dander, Mold	2.5 Microns Germs, PM 2.5 Pollution	Gas Second-hand Smoke, TVOC		
SUPER DEFENSE FILTER	97%	90%	23%	3.0 pa	Yes
MAX DEFENSE FILTER	94%	80%	11%	2.8 pa	Yes

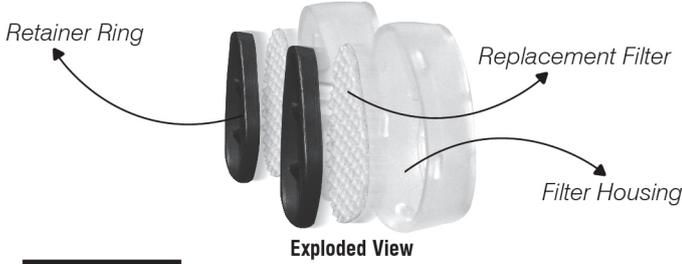

Exploded View

### HOW TO WEAR

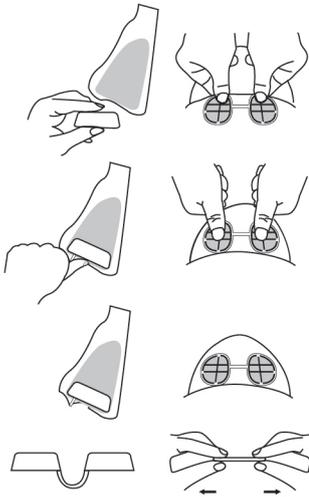


**Positioning** - Hold the frame of the nasal filter with the narrow ends pointing towards your nose tip, the wider end pointing towards your face, and the connector pointing down.

**Insert** - Using your thumbs, insert the filters into your nostrils until the bottom (open edge) of the frame is positioned just inside your nostrils.

You are ready to breathe clean air.

**Note on tightness** - If the connector is too tight for comfort, please remove the nasal filter and gently pull both the ends of the *connector* several times to stretch and loosen it. Avoid using excessive force to prevent breakage.

### HOW TO SET UP WITH REPLACEMENT FILTER PACK

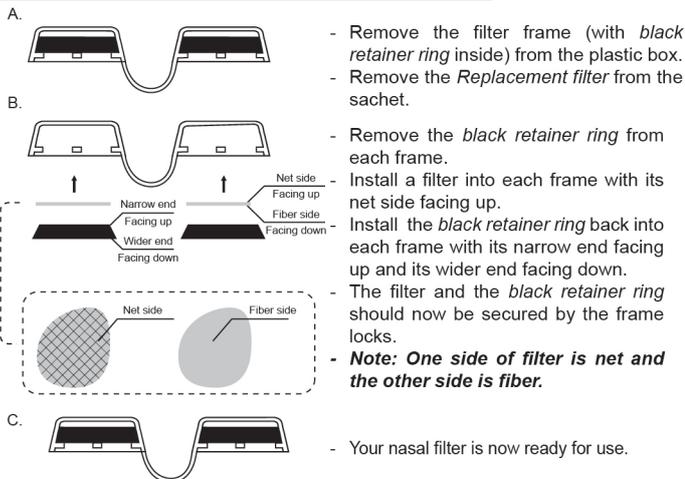

- Remove the filter frame (with *black retainer ring* inside) from the plastic box.  
- Remove the *Replacement filter* from the sachet.

- Remove the *black retainer ring* from each frame.

- Install a filter into each frame with its net side facing up.  
- Install the *black retainer ring* back into each frame with its narrow end facing up and its wider end facing down.

- The filter and the *black retainer ring* should now be secured by the frame locks.


- **Note: One side of filter is net and the other side is fiber.**

- Your nasal filter is now ready for use.

### Important Points:-


- Service life** - The outer frame can be used long-term, and the removable filters should be replaced when they start turning black in color or in 15 days whichever is earlier.
- Clean** - Wash the frame every day with clean water or 70% / 30% water/alcohol solution for optimal results.
- Washing the disposable filter replacements is not recommended, as this may reduce the filter efficiency.
- The filters captures most of the germs but does not kill the bacteria directly. If disinfection is desired, please replace filters every day for maximum protection.

\*For Caution see the packaging box

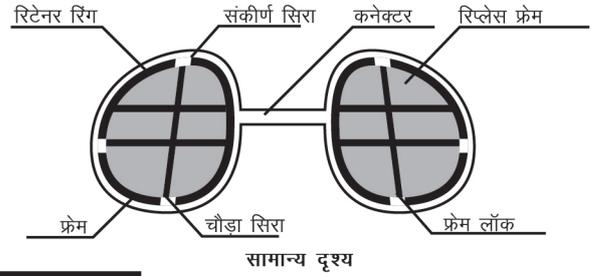

सामान्य दृश्य

### कैसे पहनें?

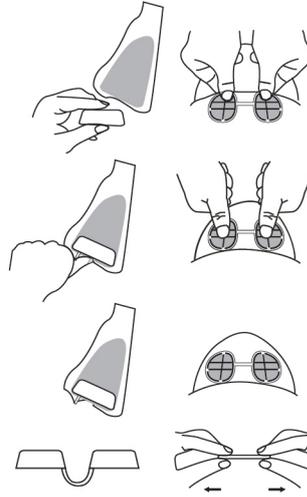


**पकड़ना** - नाक फिल्टर के फ्रेम को इस प्रकार पकड़ें कि पतला सिरा आपकी नाक की नोक की ओर हो, चौड़ा सिरा आपके चेहरे की ओर और कनेक्टर नीचे की ओर हो।

**अंदर डालना** - अंगूठों की मदद से फिल्टर्स को नाक के छेद के अंदर डालें जब तक फ्रेम का नीचला आधार (खुला कोर) नाक के छेद के ठीक नीचे न आ जाए।

अब आप बाहरी हवा में सांस ले सकते हैं।

**यदि कसाव महसूस हो** - यदि कनेक्टर के अधिक कसे होने से तकलीफ हो तो कृपया नेजल फिल्टर बाहर निकाल लें और धीरे से कनेक्टर के दोनों सिरों को बार-बार खींच कर लंबा और ढीला कर लें। हालांकि ज्यादा जोर नहीं लगाएँ वरना यह टूट सकता है।

### रिप्लेसमेंट फिल्टर पैक के साथ कैसे सेट करें

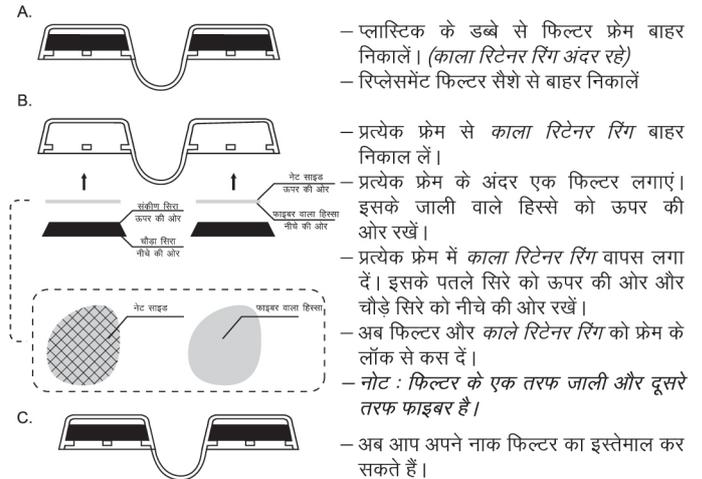

- प्लास्टिक के डब्बे से फिल्टर फ्रेम बाहर निकालें। (काला रिटेनर रिंग अंदर रहे)  
- रिप्लेसमेंट फिल्टर पैक से बाहर निकालें

- प्रत्येक फ्रेम से काला रिटेनर रिंग बाहर निकाल लें।

- प्रत्येक फ्रेम के अंदर एक फिल्टर लगाएं। इसके जाली वाले हिस्से को ऊपर की ओर रखें।

- प्रत्येक फ्रेम में काला रिटेनर रिंग वापस लगा दें। इसके पतले सिरों को ऊपर की ओर और चौड़े सिरों को नीचे की ओर रखें।

- अब फिल्टर और काले रिटेनर रिंग को फ्रेम के लॉक से कस दें।

- नोट : फिल्टर के एक तरफ जाली और दूसरे तरफ फाइबर है।

- अब आप अपने नाक फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

### महत्वपूर्ण बिन्दु:-

- उपयोग की समय सीमा** - बाहर का फ्रेम लंबी अवधि तक इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमूवेबल फिल्टर का जब रंग काला पड़ने लगे या उपयोग के 15 दिनों के बाद (जो पहले हो) बदल दें।
- सफाई** - बेहतर परिणाम के लिए फ्रेम को हर दिन साफ पानी से धोएं या 70 प्रतिशत / 30 प्रतिशत पानी / अल्कोहल के घोल से धोएं।
- डिस्पोजेबल फिल्टर नहीं धोने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे फिल्टर की क्षमता कम हो जाएगी।
- फिल्टर अधिकांश कीटाणुओं को रोक लेता है पर बैक्टीरिया का सीधे नाश नहीं कर सकता है। यदि संक्रमण का नाश करना है तो कृपया हर दिन फिल्टर बदल कर अधिक से अधिक सुरक्षित रहें।

\*सावधानी के लिए पैकेजिंग बॉक्स देखें।

