

MAGNET RELAX™ MASSAGE MASK

USER MANUAL



BETTER THAN A MASSAGE,
A UNIQUE EXPERIENCE

TABLE DES MATIÈRES

FR

EN

Spécifications du produit	01
Préparation	02
Configuration des fonctions	03
Manuel d'utilisation	04
Précautions, Attention Avertissement	5-7
Dépannage et Paramètres techniques	08
Transport, stockage et d'entretien	09
Avertissement, Nous Contacter	10

Spécifications du produit

FR
EN

- Ce produit est un appareil multifonctionnel de haute technologie qui fournit des massages relaxants autour des yeux et sur les zones autour de vos tempes.
- Le masque Magnet-Innov adopte un générateur de chaleur infrarouge à la pointe de la technologie qui active les cellules autour des yeux, stimule les molécules cellulaires par l'utilisation de vibrations, renforce la combinaison des molécules et améliore la capacité de régénération des tissus.
- Le produit utilise une technologie de pression d'air douce pour protéger et maintenir la santé des yeux.
- La pression de l'air donne aux yeux un massage total. Ce processus peut réduire la fatigue oculaire, améliorer la fonction du muscle ciliaire et prévenir la détérioration de l'axe optique.
- Le masque Magnet-Innov est également équipé d'un champ magnétique tridimensionnel intégré. Le mouvement constant du champ magnétique assure un massage efficace des parties principales du visage et des muscles autour des yeux, tout en générant un micro-courant dans les vaisseaux sanguins et en activant la circulation sanguine autour des yeux.


Préparation

FR

EN


Installation des piles

1. Ouvrir le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande.
2. Entrer les 4 piles AA en fonction de l'indication de présente dans le boîtier
3. Fermer le couvercle du compartiment à piles.

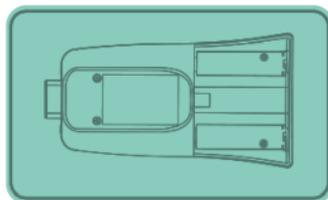

Installation du masque


1. Connecter l'adaptateur fourni sur la prise de courant DC 6V.
2. Brancher ensuite le câble sur une prise de courant.

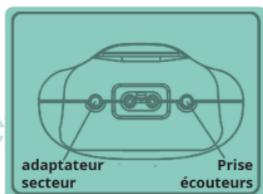

Brancher des écouteurs si vous le souhaitez.



Positionner le masque en face de vos yeux.

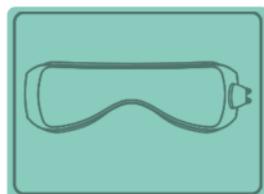


Positionner le masque en face de vos yeux.

magnetinnov
MEDICAL INNOVATION


Configuration des fonctions

FR
EN


Fonctions du masque de massage oculaire Magnet-innov®

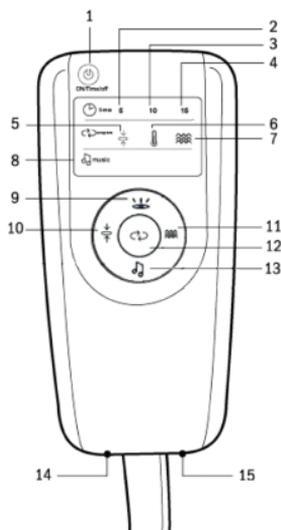

1. Minuterie Marche/Arrêt
2. Minuterie 5 minutes
3. Minuterie 10 minutes
4. Minuterie 15 minutes
5. Voyant du mode pression d'air
6. Voyant du mode infrarouge
7. Voyant du mode vibration multi-fréquences
8. Voyant musique
9. Bouton de sélection du mode infrarouge
10. Bouton de sélection du mode pression d'air
11. Bouton de sélection du mode vibration multi-fréquences
12. Bouton de sélection du mode de massage
13. Activer/désactiver la musique
14. Prise adaptateur secteur
15. Prise des écouteurs

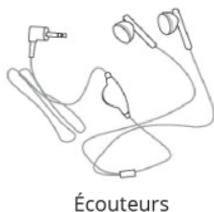


Écouteurs

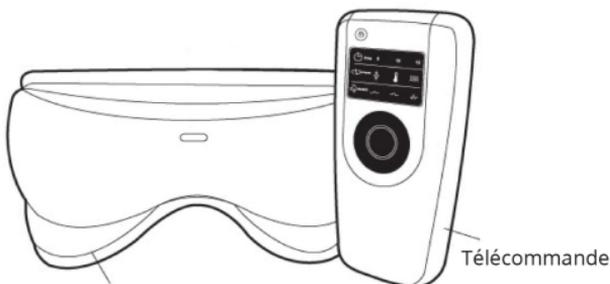

Housse en tissu



Adaptateur AC

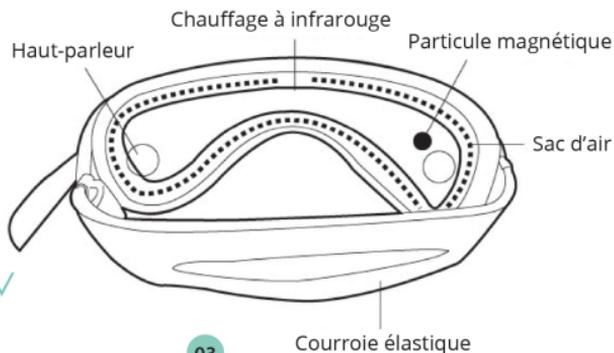

Bouton on/off/time



Air Infra Temps Musique Vibration

Bouton on/off/time



Appuyer sur »  » pour choisir entre les 3 modes de massage automatique.

Attention:

Au démarrage le premier mode de massage automatique est lancé, il est composé de :

- + Mode compression d'air niveau 1
- + Mode infrarouge basse température
- + Temps 15 min
- + Musique relaxante

-Bouton on/off



Appuyer 1 fois pour allumer / Appuyer longuement pour éteindre

-Changer le temps

Appuyer 1 fois sur le bouton on/off/time

Selection de la musique



Musique relaxante

Musique d'ambiance

Musique nature

Appui court pour changer de musique

Appui long pour arreter la musique

Mode Compression d'air

Circulaire (le symbole clignote 1 fois)

Niveau de puissance 1

Niveau de puissance 2

Niveau de puissance 3

Mode infrarouge

Basse température

Haute température

Choix du temps

5min

10min

15min

Choix du temps

Vibre 2 fois

Vibre 10 fois

Précautions

FR
EN

- Pour une utilisation correcte et sûre, nous vous prions de lire attentivement ce manuel d'utilisation.
- N'utilisez pas le masque comme substitut à une opération des yeux ou pour soulager les blessure oculaire, glaucome, cataracte, décollement de la rétine et œil grave maladies, etc.
- Les personnes d'hypertension et d'hypotension, doivent consulter leur médecin avant d'utiliser le produit.
- Les personnes ayant des problèmes mentaux ou intellectuels ne doivent pas utiliser le masque.
- Ne pas utiliser de diluants, d'essence, de chlorure, de produits de nettoyage alcalins ou acides.
- Cessez d'utiliser le masque si vous souffrez d'une maladie oculaire.
- Pour le nettoyage, essuyez-le avec du coton imbibé d'alcool. Ne pas passer sous l'eau ou laver l'appareil.
- Ne pas reconstruire, démonter ou réparer l'appareil.

Attention

- Portez l'appareil, puis allumez-le pour éviter d'endommager le coussin gonflable à cause de la surpression.
- Ne portez pas de lentilles de contact lorsque vous utilisez le produit.
- Veuillez ne pas utiliser ce produit dans un environnement à forte température ou trop humide.
- Ne pas utiliser ce produit en conduisant ou en marchant.

- Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte pendant l'utilisation.
- Il est conseillé aux enfants de ne pas utiliser le masque pendant plus de 20 minutes.
- Veuillez retirer les piles pendant l'entreposage afin d'éviter toute fuite de liquide.
- Veuillez garder les yeux fermés lorsque vous utilisez le masque. Après le massage, massez doucement la région des yeux pour enlever les taches rouges causées par l'appareil de massage.
- Ne jetez pas l'appareil sur le sol et ne l'immergez pas dans l'eau.

Avertissement

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, uniquement s'ils ont reçu une supervision et des instructions concernant l'utilisation de l'appareil, ainsi qu'une explication précise des avertissements suivants.

Avant d'utiliser le produit, veuillez à lire attentivement le mode d'emploi (manuel de l'utilisateur). L'entreprise n'est pas responsable des conséquences d'une utilisation incorrecte ou du non-respect des instructions correspondantes de ce produit.

1. Veuillez ne pas l'utiliser en conduisant.
2. Veuillez ne pas l'utiliser dans un environnement dont la température ou le degré d'humidité est excessivement élevé.
3. Pour ceux qui présentent des symptômes de maladie, veuillez l'utiliser avec prudence.
4. N'utilisez pas le masseur sur des parties du corps à opérer ou ayant des antécédents de chirurgie.
5. Placez d'abord l'appareil sur vos yeux puis allumez-le pour éviter d'endommager la poche gonflable due à une surpression.

- 6.** L'utilisation du masque est déconseillée pour les personnes ayant eu un accident vasculaire cérébral, souffrant d'une maladie cardiaque, d'hypertension ou d'hypoglycémie.
- 7.** Veuillez ne pas boire de l'alcool avant d'utiliser le masque.
- 8.** veuillez retirer les lentilles de contact, les épingles à cheveux et tout autre accessoire présent sur la tête ou le visage afin d'éviter des lésions corporelles.
- 9.** Veuillez utiliser un adaptateur électrique conforme aux normes nationales et prêter attention à la sécurité de l'électricité (5V/1A, non fourni).
- 10.** Ce produit est un produit de santé à usage domestique, et ne peut en aucun cas remplacer un traitement médical.
- 11.** Vous devez fermer les yeux pendant le massage.
- 12.** Si vous ne vous sentez pas bien pendant l'utilisation, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser. Veuillez ensuite consulter un médecin.
- 13.** Veuillez ne pas l'utiliser si vous avez eu une opération des yeux ou si vous avez des maladies oculaires. Ne pas l'utiliser si vos yeux sont gonflés.
- 14.** Le masseur est doté d'une fonction de compression chaude où la température peut atteindre 42 ° C. Les utilisateurs sensibles aux variations de température doivent être prudents en l'utilisant.
- 15.** Si la zone de massage présente des blessures, des rougeurs, des inflammations, ou une anomalie physique, il faut stopper immédiatement l'utilisation.
- 16.** Nous vous conseillons de faire au maximum une session de 10 minutes par jour. Le masque s'éteint automatiquement après 10 minutes.
- 17.** Les mineurs, les personnes handicapées et les personnes âgées doivent utiliser ce produit sous une surveillance adéquate.
- 18.** Pour le nettoyage, veuillez essuyer le masque avec un produit de nettoyage et un tissu doux imbibé d'alcool. Ne pas mouiller l'appareil.

Dépannages et problèmes techniques

FR
EN

En cas de problème lors de l'utilisation de l'appareil, veuillez suivre la procédure suivante.

Lisez les instructions ci-dessous pour trouver le problème ou si l'appareil est défectueux

Si'il ne peut pas fonctionner normalement, veuillez couper l'alimentation électrique et contacter le centre de service après-vente.

Problème	Cause possible du problème	Solution
Impossible de démarrer	Les piles sont déchargées	Veillez changer les piles.
	Les piles sont mal installées	Veillez installer les piles dans le bon sens.
		Veillez à ce que la pile soit bien fixée dans son logement.
	Câble mal branché	Veillez-vous assurer qu'il est correctement branché.
Cable endommagé	Vérifier les connexions des câbles, si les câbles sont endommagés, contacter le SAV.	
La lumière est trop faible	Les piles sont déchargées	Veillez changer les piles.
La pression d'air est trop faible	Les piles sont déchargées	Veillez changer les piles.
		Assurez-vous que les piles sont installées et fixées dans leurs supports.

Paramètres techniques :

Température ambiante idéale : 5°C-40°C

Humidité relative : <80%

Pression atmosphérique : 860hpa-1060hpa

Intensité du champ magnétique : 50mT-250mT

Fomentation : 30°C-42°C

Puissance d'entrée : DC6V 1A DC6V 1A

Puissance : 6W

Poids net:485g

Transport, stockage et entretien

Vérification de l'alimentation électrique

Vérifiez l'alimentation électrique et allumez l'appareil si la tension dépasse la plage nominale de l'appareil.

Maintenance

S'il doit être nettoyé, essuyez-le avec un coton imbibé d'alcool.

Mettre l'appareil en lieu sûr après utilisation. Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil. Eteignez l'appareil avant de le nettoyer.

Prendre des mesures pour prévenir l'humidité.

Contactez un technicien qualifié s'il y a un problème. Ne démontez pas l'appareil vous-même.

Transport et stockage

Température ambiante idéale : 5°C-40°C

Humidité relative de l'air : --.80% Maintenir un bon état de ventilation et à l'abri du soleil direct et des gaz corrosifs.

Pression atmosphérique : 860hpa-1060hpa

Transport : Le produit a une conception antichoc simple et peut être transporté par voie aérienne, ferroviaire, routière ou maritime ; évitez la pluie, la neige, les chocs et gardez toujours le bon côté vers le haut.

Avertissement:

Ce symbole sur l'appareil ou son emballage indique : Ne pas jeter les appareils électriques dans les décharges municipales non triées ; utiliser des installations de collecte séparées. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui est préjudiciable à votre santé et à votre bien-être.



Nous Contacter

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Nous ferons de notre mieux pour satisfaire votre demande.



contact@magnet-innov.com



Magnet-Innov



[magnet_innov](#)

magnetinnov
MEDICAL INNOVATION

MAGNET RELAX™ MASSAGE MASK

USER MANUAL



BETTER THAN A MASSAGE,
A UNIQUE EXPERIENCE

magnetinnov
MEDICAL INNOVATION

TABLE OF CONTENTS

FR

EN

Product Specifications.....	13
Preparation.....	14
Feature configuration.....	15
Usage Manual.....	16
Precautions and Warnings.....	17-19
Troubleshooting and technical parameters.....	20
Transport, storage, and maintenance.....	21
Warning, contact us.....	22

Product Specifications

FR
EN

- This product is a high-technology multifunctional device that provides relaxing massages in the area around the eye and temples.
- The Magnet-Innov mask adopts an infrared heat generator at the cutting edge of technology that activates cells around the eyes, stimulates cellular molecules through the use of vibrations, reinforces molecular combinations, and improves tissue regeneration capabilities.
- The product uses gentle air pressure to protect and maintain eye health
- The air pressure gives your eyes a total massage. This process can reduce eye fatigue, improve ciliary muscle function, and prevent optical axis deterioration.
- The Magnet-Innov mask is also equipped with an integrated three-dimensional magnetic field. The constant movement of the magnetic field ensures an effective massage of the face's main parts and muscles around the eyes, by generating micro-flow in the blood vessels and activating blood circulation around the eyes.


Preparation

FR

EN


Battery Installation

1. Open the battery compartment lid in the back of the remote.
2. Insert 4 AA batteries according to the directions in the compartment.
3. Close the battery jack compartment lid.

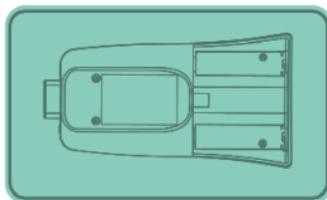

Mask Installation


1. Connect the adaptor provided into the DC 6V outlet.
2. Then plug in the cable into an outlet.

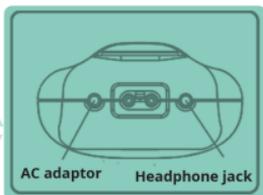

Plug in headphones if you want.



Position the mask opposite your eyes.

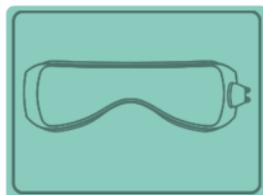


Position the mask opposite your eyes.

Magnetinnov
MEDICAL INNOVATION


Feature Configurations

FR
EN


Magnet-innov® eye massage mask features

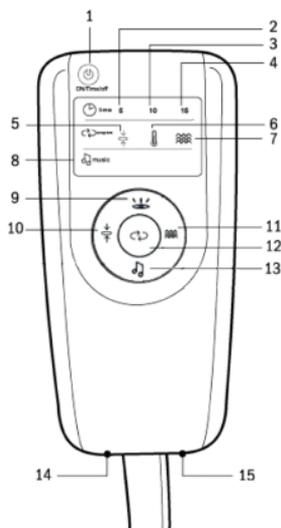

1. Start/Stop timer
2. 5 minute timer
3. 10 minute timer
4. 15 minute timer
5. Air pressure mode light
6. Infrared mode light
7. Multi-frequency vibration mode light
8. Music light
9. Infrared mode selection button
10. Air pressure mode selection button
11. Multi-frequency vibration mode selection button
12. Massage mode selection button
13. Music turn on/off
14. Power supply adapter jack
15. Headphone Jack

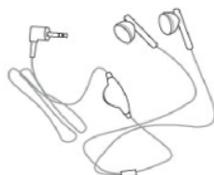

Headphones

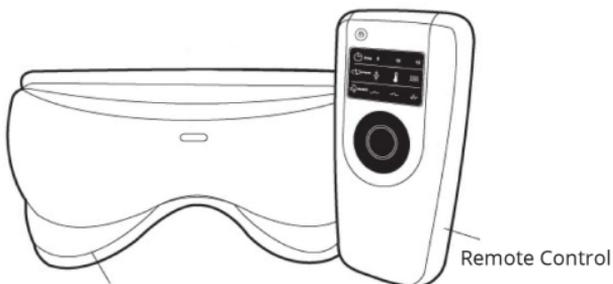


Fabric cover

Remote Control



AC Adapter

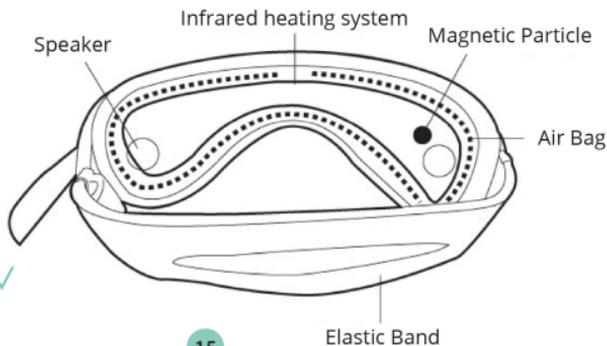

Speaker

Infrared heating system

Magnetic Particle

Air Bag

Elastic Band

On/off/time button



Air Infra Temps Music Vibration

On/off/time button



Press the "↻" to choose between three automatic massage modes.

Attention:

The first automatic massage mode will be automatically activated when the device is turned on which consists of:

- + Air compression level 1 mode
- + Low temperature infrared mode
- + 15 min time
- + Relaxing music

-On/off button



Press once to turn on/press for a long period of time to turn off

-Change the time

Press the on/off/time button once

Music selection



Relaxing music

Background music

Nature sounds

Press briefly to change music

press for a longer period of time to stop the music

Air compression mode

Circular (the symbol will flicker once)

Power level 1

Power level 2

Power level 3

Infrared mode

Low temperature

High temperature

Choose duration

5min

10min

15min

Choose period

Vibrates twice

Vibrates ten times

Precautions

FR

EN

- Please read the instructions of this manual carefully in order to ensure correct and safe use of the product.
- Do not use the mask as a substitute for an eye operation or to relieve eye injuries, glaucoma, cataracts, retinal detachment, and other serious eye diseases, etc.
- Those with high and low blood pressure should consult their doctor before using the product.
- People with mental or intellectual disabilities should not use the mask.
- Do not use diluents, gasoline, chlorine, or alkaline or acidic cleaning products.
- Stop using the mask if you suffer from an eye disease.
- To clean the device, wipe it down with a cotton ball soaked in rubbing alcohol. Do not submerge or wash the device.
- Do not rebuild, disassemble, or repair the device.

Attention

- Put on the device before turning it on in order to avoid damaging the inflatable cushion.
- Do not wear contact lenses during product use.
- Do not use the product in an environment with high temperatures or an environment that is too humid.
- Do not use this product while driving or walking.

- Children under 12 must have adult supervision while using the device.
- We recommend that children do not use the mask for more than 20 minutes.
- Remove batteries while storing the device in order to avoid any leaks.
- Keep your eyes closed while you use the mask. After the massage, gently massage the eye region to remove red marks caused by the massage device.
- Do not throw the device on the ground or submerge it in water.

Warning

This device can be used by children starting from the age of 8 years old and by people with reduced physical, sensorial or mental abilities, solely under supervision and by following the instructions on the usage of the device, under the condition of a clear awareness of the following warnings.

Read the user manual very carefully prior to using the product. The company is not responsible for the consequences of an improper usage of the device, or from a non-respect of the instructions outlined in this user manual.

1. Do not use while driving.
2. Do not use in environments where the temperature or humidity levels are excessively high.
3. To be used carefully by people who manifest disease symptoms.
4. Do not use the device on the areas of the body that have been recently operated or have had surgery performed on them on previous occasions.
5. Place the device on your eyes at first and then switch it on, in order to avoid damage to the inflatable bag due to overpressure.

- 6.** The usage of the mask is not recommended for individuals that have suffered from a stroke, heart disease, hypertension or hypoglycemia.
- 7.** Do not consume any alcohol prior to using the mask.
- 8.** Remove contact lenses, hair ties and any other accessories from the head and the face in order to avoid any risk of injury.
- 9.** Use the electrical adaptor which conforms to the norms of your country and pay attention to electrical safety (5V/1A, not provided).
- 10.** The product is a home health device. It cannot act as a replacement to a medical treatment by any means.
- 11.** You must close your eyes during the massage.
- 12.** If you are feeling unwell during the usage, stop the session immediately and consult a healthcare professional.
- 13.** Do not use the device if you had surgery performed on your eyes or if you are suffering from any eye diseases. Do not use if your eyes are swollen.
- 14.** The device is equipped with a hot compress function during which the temperature can get reach 42°C. People who are sensible to temperature variations need to be particularly cautious when using the device.
- 15.** If the massage area has got any wounds, redness, inflammation of other physical abnormalities, you must stop the usage of the device immediately.
- 16.** We recommend a daily 10-minute session. The mask would switch off automatically after 10 minutes.
- 17.** Minors, handicapped people and people of third age must use this product under constant supervision.
- 18.** For cleaning, dry the mask with a soft cloth with alcohol and a cleaning product. Do not wet the device.

Troubleshooting and technical problems

FR

In case of problems during use, follow the procedure below.

EN

Read the instructions below to find the problem or determine if the device is defective.

If the device doesn't work properly, cut off the power supply and contact customer service.

Problem	Possible cause of the problem	Solution
Device does not turn on	Batteries are unloaded	Change the batteries.
	Batteries are improperly placed	Check if the batteries are in the right direction.
		Check if the battery is properly placed in its compartment.
	Improperly plugged in cable	Make sure that the cable is plugged in properly.
Damaged cable	Check the cable connections. If the cables are damaged, contact customer service.	
The light is too dim.	Batteries are unloaded	Change the batteries.
The air pressure is too low.	Batteries are unloaded	Change the batteries.
		Make sure the batteries are installed and fastened in their holders.

Technical parameters :

Ideal temperature : 5°C-40°C

Relative humidity: <80%

Atmospheric pressure : 860hpa-1060hpa

Magnetic field strength: 50mT-250mT

Fomentation : 30°C-42°C

Input power : DC6V 1A DC6V 1A

Power : 6W

Net Weight: 485g

Transport, storage, and maintenance

FR

Power supply verification

Check the power supply and turn on the device if the voltage exceeds the nominal range of the device.

Maintenance

If the device must be cleaned, use a cotton ball with rubbing alcohol. Put the device in a safe place after use. Do not put heavy objects on the device. Turn the device off before cleaning. Avoid humidity.

Contact a qualified technician if there is a problem. Do not dismantle the device yourself.

Transport and storage

Ideal temperature : 5°C-40°C

Relative humidity : --.80% Keep in a well-ventilated area away from direct sunlight and corrosive gases.

Atmospheric pressure : 860hpa-1060hpa

Transport : The product has a simple shock-absorbing design and can be transported by air, train, truck/car, or boat. Avoid snow, rain, and shocks, and always keep the top side facing upwards.

EN

Avertissement:

This symbol on a device or its packaging means: do not throw away electronic devices in unapproved municipal landfills: use separate collection facilities. Contact your local authority to obtain information on available collection systems in your area. If electronic devices are thrown away in landfills, dangerous substances can seep into underground water and end up in the food chain which is dangerous to your health and wellbeing.



Contact Us

If you have any questions, feel free to contact us, and we'll do the best we can to address your questions or concerns.



contact@magnet-innov.com



Magnet-Innov



[magnet_innov](#)

magnetinnov
MEDICAL INNOVATION

Thank you for purchasing the Magnet Relax™ massage mask

Discover now our best products



Magnet-Perfect™
The Smart
Cervical Massager



Magnet-Zen™
The Shiatsu
Massage Pillow



Magnet-Relax 2.0
The Smart Eye
Massager

 Magnet-Innov

 magnet_innov

magnetinnov
MEDICAL INNOVATION
www.magnet-innov.com



 Scan me
for a gift