


glad skin

Inflammatory Skin Expert

ECZEMACT Cream & Gel

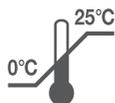

STAPHEFECT™
100
Sa
S. aureus killer



Micreos Human Health B.V.
Bankplein 2
2585 EV Den Haag
The Netherlands



Gladskin BV
Bankplein 2
2585 EV Den Haag
The Netherlands



UKRP:
Advna Ltd
Pure Offices, Plato Close,
Tachbrook Park, Warwick,
CV34 6WE
United Kingdom

INS-GE-ENNLDFRSE-V8.2
REVISION DATE MAY-2023

ENGLISH
Gladskin Eczemact Cream and Gel are medical devices. Please read this information carefully before using the product, even if you have used it before. That way, you will keep up-to-date on the effects of this product and how to use it properly as we may sometimes need to change the information. Please do not hesitate to contact us if you have any questions after reading this information.

FOR WHOM ARE GLADSKIN ECZEMACT CREAM AND GEL INTENDED?

Use Gladskin Eczemact Cream and Gel if you suffer from eczema. The symptoms of eczema include dry, rough and flaky skin with redness and itching. The *Staphylococcus aureus* bacteria can cause inflammation of the skin and worsen the eczema symptoms.

TOLERANCE

This formula is fragrance-free and hypoallergenic. It is suitable for face, eyelids and body.

HOW DOES THIS PRODUCT WORK?

Gladskin Eczemact Cream and Gel contains the main ingredient Staphfect™ SA.100. Stemming from Microbiome Science, this unique ingredient has the ability to specifically target the main bacteria responsible for inflammation of the skin, while preserving the other bacteria essential for skin health.

WHAT DOES THIS PRODUCT DO?

- Reduces eczema symptoms
- Anti-itching
- Anti-red patches
- Moisturises very dry skin

HOW TO USE THIS PRODUCT

 > For external use. Use the product on intact skin that is free of creams, cleansers, powders and so on.

 > Use regularly two to three times a day.

 > Apply a thin layer of the product on and around the areas with eczema.



> Let the product dry for at least 5-10 minutes before you apply any other products on your skin.

When using the Gladskin Eczemact Gel you may notice a thin film left on your skin. This is remaining gel which can be wiped off after 10 minutes.

WHEN NOT TO USE THIS PRODUCT

Do not use this product if your skin is not intact or if you are known to be allergic to any of the ingredients.

Gladskin Eczemact Cream should be a white to off-white cream. Gladskin Eczemact Gel should be a clear gel, free from visible particles. If this is not the case, do not use the product and contact us.

WHAT CAN YOU EXPECT?

Gladskin Eczemact Cream and Gel can have a quick calming effect, but it can also take a few weeks to see results. Often eczema symptoms are related to an imbalance in the bacterial composition of the skin (microbiome). If your eczema symptoms are not due to this imbalance Gladskin Eczemact Cream will still act as an emollient. Some users may experience redness, a burning sensation, swelling or itch after using Gladskin Eczemact Cream and Gel.

If you use Gladskin Eczemact Cream and Gel for the first time your eczema symptoms may temporarily increase. This should improve within 10 days.

If your eczema does not improve or side-effects are severe or persist, please stop using the product and consult your doctor.

In case of serious side-effects, please inform us and the national competent authority of the country where you reside.

INGREDIENTS

Gladskin Eczemact Cream:
Aqua, Glycerin, Vaseline® album, Cera cetomacrogolis emulsificans, Paraffinum liquidum, Arginine HCl, Sodium chloride, Trometamol, Staphfect™ SA.100, Calcium chloride, *Gladskin Eczemact Gel:*
Aqua, Propylene glycol,

Hydroxypropyl methylcellulose, Glycerin, Arginine HCl, Sodium chloride, Trometamol, Staphfect™ SA.100, Calcium chloride.

Gladskin Eczemact Cream and Gel are hypoallergenic and dermatologically tested. It is a Medical Device to be used on intact skin. Gladskin Eczemact Cream and Gel do not contain any lanolin, acids, alcohol, perfume or parabens.

SHELF LIFE AND STORAGE

The expiration date of this product is indicated on the dispenser. For an optimal benefit of the main ingredient in Gladskin Eczemact Cream and Gel we recommend you store the product in the refrigerator. Gladskin Eczemact Cream and Gel should not be stored at temperatures below 0°C or above 25°C.

NEDERLANDS

Gladskin Eczemact Cream en Gel zijn medische hulpmiddelen. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u het middel gaat gebruiken, ook wanneer u het al eerder heeft gebruikt. Op deze manier blijft u op de hoogte van de effecten van dit middel en van de juiste manier om het te gebruiken, aangezien wij deze informatie soms moeten aanpassen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft.

VOOR WIE IS GLADSKIN ECZEMACT CREAM EN GEL BEDOELD?

Gebruik Gladskin Eczemact Cream en Gel als u last heeft van eczeem. De verschijnselen van eczeem zijn onder andere een droge, ruwe en schilferende huid met roodheid en jeuk. De bacterie *Staphylococcus aureus* kan een ontsteking van de huid veroorzaken en de verschijnselen van eczeem verergeren.

TOLERANTIE

Dit product bevat geen parfum en is hypoallergeen. Het kan worden gebruikt op het gezicht, de oogleden en het lichaam.

HOE WERKT DIT MIDDEL?

Het belangrijkste bestanddeel van Gladskin Eczemact Cream en Gel is Staphfect™ SA.100. Dit

unieke ingrediënt is afkomstig uit microbiom onderzoek en heeft het vermogen om zich specifiek te richten op de belangrijkste bacteriën die verantwoordelijk zijn voor ontstekingen van de huid, terwijl de andere bacteriën die essentieel zijn voor de gezondheid van de huid behouden blijven.

WAT DOET DIT MIDDEL?

- Vermindert eczeem symptomen
- Anti-jeuk
- Anti-rode vlekken
- Hydrateert de zeer droge huid

HOE MOET DIT MIDDEL WORDEN GEBRUIKT?



> Voor uitwendig gebruik. Gebruik het middel op intacte huid die vrij is van crèmes, cleansers, poeder etc.



> Gebruik het middel regelmatig, twee of drie maal per dag.



> Breng een dunne laag van het middel aan op en rondom het gebied van de huid met eczeem.



> Laat het middel minimaal 5 tot 10 minuten drogen voordat u een ander middel aanbrengt op uw huid.

Als u Gladskin Eczemact Gel gebruikt ziet u misschien dat er een dun laagje van het middel achterblijft op de huid. Dit is overvloedige gel die na 10 minuten van de huid kan worden geveegd.

WANNEER MOET U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN?

Gebruik dit middel niet wanneer uw huid beschadigd is of wanneer u allergisch bent voor een van de bestanddelen.

Gladskin Eczemact Cream moet een witte tot gebroken-witte crème zijn. Gladskin Eczemact Gel moet een heldere gel zijn, zonder zichtbare deeltjes. Als dit niet het geval is gebruik het middel dan niet en neem contact met ons op.

WAT MAG U VAN DIT MIDDEL

VERWACHTEN?

Gladskin Eczemact Cream en Gel kunnen al snel een kalmerend effect op de huid hebben, maar het kan ook enkele weken duren tot het resultaat zichtbaar wordt. Het ontstaan van verschijnselen van eczeem hangt vaak samen met een onevenwichtige samenstelling van de bacteriën op de huid (het microbiom). Ook als de verschijnselen van uw eczeem niet het gevolg zijn van een onevenwichtige samenstelling zal Gladskin Eczemact Cream een verzachtend effect hebben. Bij sommige gebruikers kan na het gebruik van Gladskin Eczemact Cream en Gel roodheid, een branderig gevoel, zwelling of jeuk van de huid ontstaan.

Als u Gladskin Eczemact Cream en Gel voor de eerste keer gebruikt kunnen de verschijnselen van eczeem tijdelijk erger worden. Deze verschijnselen behoren binnen 10 dagen te verminderen.

Als de ernst van het eczeem niet vermindert of indien de bijwerkingen ernstig of hardnekkig zijn gebruik het middel dan niet meer en neem contact op met uw arts.

Als ernstige bijwerkingen optreden moet u dat aan ons melden en aan de nationale bevoegde instantie in het land waar u woont.

INGREDIËNTEN

Gladskin Eczemact Cream:
Water, Glycerine, Witte vaseline, Cera cetomacrogolis emulsificans, Vloeibare paraffine, Arginine HCl, Natriumchloride, Trometamol, Staphfect™ SA.100, Calciumchloride. *Gladskin Eczemact Gel:*
Water, Propyleenglycol, Hydroxypropyl-methylcellulose, Glycerine, Arginine HCl, Natriumchloride, Trometamol, Staphfect™ SA.100, Calciumchloride.

Gladskin Eczemact Cream en Gel zijn hypo-allergeen en dermatologisch getest. Het is een medisch hulpmiddel dat alleen op intacte huid mag worden aangebracht. Gladskin Eczemact Cream en Gel bevatten geen lanoline, zuren, alcohol, parfum of parabenen.

HOUDBAARHEID EN BEWAREN

De vervaldatum van dit middel staat vermeld op de dispenser. Voor een optimaal effect van het hoofdbestanddeel van Gladskin Eczemact Cream en Gel adviseren wij om het middel in de koelkast te bewaren. Gladskin Eczemact Cream en Gel mogen niet worden bewaard bij temperaturen die lager zijn dan 0°C of hoger dan 25°C.

DEUTSCH

Gladskin Eczemact Cream und Gel sind Medizinprodukte. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung aufmerksam, bevor Sie das Produkt anwenden, auch wenn Sie es bereits zuvor angewendet haben. So bleiben Sie auf dem Laufenden über die Wirkungen des Produkts und seine richtige Anwendung, da wir manchmal die Informationen ändern müssen. Wenn Sie nach dem Lesen dieser Informationen noch Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

FÜR WEN SIND GLADSKIN ECZEMACT CREAM UND GEL BESTIMMT?

Wenden Sie Gladskin Eczemact Cream und Gel an, wenn Sie an Ekzemen leiden. Symptome eines Ekzems sind trockene, raue und schuppige Haut mit Rötung und Juckreiz. *Staphylococcus aureus*-Bakterien können eine Entzündung der Haut auslösen und die Symptome eines Ekzems verschlimmern.

VERTRÄGLICHKEIT

Die Rezeptur ist frei von Duftstoffen und hypoallergen. Sie ist für Gesicht, Augenlider und Körper geeignet.

WIE WIRKT DIESES PRODUKT?

Gladskin Eczemact Cream und Gel enthalten als wichtigsten Bestandteil Staphfect™ SA.100. Dieser einzigartige Bestandteil stammt aus der Mikrobiom-Forschung und verfügt über die Fähigkeit, die wichtigsten Bakterien, die für eine Hautentzündung verantwortlich sind, gezielt anzugreifen, während die anderen, für die Gesundheit der Haut wichtigen Bakterien verschont werden.

WAS BEWIRKT DIESES PRODUKT?

Reduziert Neurodermitis-Symptome
- Anti-Juckreiz
- Anti-Rötungen
- Befeuchtet sehr trockene Haut

WIE IST DIESES PRODUKT ANZUWENDEN?



> Zur äußeren Anwendung. Wenden Sie das Produkt auf intakter Haut an, die frei von Cremes, Reinigungsmitteln, Puder usw. ist.



> Wenden Sie es regelmäßig zwei- bis dreimal täglich an.



> Tragen Sie eine dünne Schicht des Produktes auf die Ekzeme und ihre Umgebung auf.



> Lassen Sie das Produkt mindestens 5–10 Minuten trocknen, bevor Sie andere Produkte auf der Haut anwenden.

Wenn Sie das Gladskin Eczemact Gel anwenden, bemerken Sie möglicherweise, dass ein dünner Film auf Ihrer Haut verbleibt. Dies ist das noch vorhandene Gel, das Sie nach 10 Minuten abwischen können.

WANN DARF DAS PRODUKT NICHT ANGEWENDET WERDEN?

Wenden Sie dieses Produkt nicht an, wenn Ihre Haut nicht intakt ist oder wenn Sie wissen, dass Sie gegen einen der Bestandteile allergisch sind.

Die Gladskin Eczemact Cream sollte eine weiße bis fast weiße Creme sein. Das Gladskin Eczemact Gel sollte ein durchsichtiges Gel und frei von sichtbaren Partikeln sein. Sollte dies nicht der Fall sein, benutzen Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an uns.

WAS KÖNNEN SIE DAVON ERWARTEN?

Gladskin Eczemact Cream und Gel können eine schnelle beruhigende Wirkung haben, aber möglicherweise dauert es auch einige Wochen, bis Ergebnisse zu sehen sind. Die

Symptome eines Ekzems stehen häufig in Zusammenhang mit einem Ungleichgewicht der bakteriellen Zusammensetzung der Haut (Mikrobiom). Wenn Ihre Ekzemsymptome nicht durch dieses Ungleichgewicht verursacht sind, wirkt Gladskin Eczemact Cream dennoch als Linderungsmittel. Bei einigen Anwendern können nach der Anwendung von Gladskin Eczemact Cream und Gel Rötungen, ein brennendes Gefühl, Schwellungen oder Juckreiz auftreten.

Wenn Sie Gladskin Eczemact Cream und Gel zum ersten Mal anwenden, können sich Ihre Ekzemsymptome möglicherweise vorübergehend verstärken. Dies sollte innerhalb von 10 Tagen besser werden.

Wenn Ihr Ekzem sich nicht bessert oder Nebenwirkungen schwerwiegend sind oder anhalten, wenden Sie das Produkt bitte nicht weiter an und fragen Sie Ihren Arzt um Rat. Bei schwerwiegenden Nebenwirkungen informieren Sie bitte uns und die zuständige nationale Behörde Ihres Wohnsitzlandes.

INHALTSSTOFFE

Gladskin Eczemact Cream:
Wasser, Glycerin, Weiße Vaseline, Cera cetomacrogolis emulsificans, Flüssiges Paraffin, Arginin HCl, Natriumchlorid, Trometamol, Staph-ejekt SA.100, Calciumchlorid.
Gladskin Eczemact Gel:
Wasser, Propylenglycol, Hydroxypropylmethylcellulose, Glycerin, Arginin HCl, Natriumchlorid, Trometamol, Staph-ejekt SA.100, Calciumchlorid.

Gladskin Eczemact Cream und Gel sind hypoallergen und dermatologisch getestet. Es sind Medizinprodukte, die auf intakter Haut anzuwenden sind. Gladskin Eczemact Cream und Gel enthalten kein Lanolin, keine Säuren, Alkohol, Duftstoffe oder Parabene.

DAUER DER HALTBARKEIT UND AUFBEWAHRUNG

Das Verfallsdatum des Produkts ist auf dem Spender angegeben. Für eine optimale Wirkung des wichtigsten Bestandteils der Gladskin Eczemact Cream und des Gels empfehlen wir Ihnen, das Produkt im Kühlschrank aufzubewahren. Gladskin

Eczemact Cream und Gel sollten nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 25 °C aufbewahrt werden.

FRANÇAIS

Gladskin Eczemact Cream et Gel sont des dispositifs médicaux. Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser le produit, même si vous l'avez déjà utilisé auparavant. Vous vous utilisez ainsi au courant des effets de ce produit et de la façon de l'utiliser correctement, car nous devons peut-être parfois modifier les informations le concernant. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions après avoir lu ces informations.

À QUI SONT DESTINÉS GLADSKIN ECZEMACT CREAM ET GEL?

Gladskin Eczemact Cream et Gel sont des produits contre l'eczéma. L'eczéma se manifeste par des symptômes comme une peau sèche, rugueuse et qui pèle, avec des rougeurs et des démangeaisons. Une bactérie dénommée *Staphylococcus aureus* peut causer une inflammation de la peau et aggraver les symptômes de l'eczéma.

TOLÉRANCE

Cette formule est sans parfum et hypoallergénique. Elle peut être utilisée sur le visage, sur les paupières et sur le corps.

COMMENT CE PRODUIT AGIT-IL?

Le principal ingrédient de Gladskin Eczemact Cream et Gel est le Staph-ejekt™ SA.100. Issu de la science du microbiome (la flore cutanée), cet ingrédient unique est capable de s'attaquer uniquement aux principales bactéries responsables de l'inflammation de la peau, tout en épargnant les autres bactéries qui sont essentielles pour une peau saine.

QUE FAIT CE PRODUIT?

Réduit les symptômes de l'eczéma
- Anti-démangeaisons
- Anti-plaques rouges
- Hydrate la peau très sèche

COMMENT UTILISER CE PRODUIT?



> Ce produit est destiné à un usage externe. Appliquez le produit sur une peau intacte et débarrassée de tout autre produit tel que crèmes, produits nettoyants, poudres, etc.



> Utilisez régulièrement deux à trois fois par jour.



> Appliquez une fine couche du produit sur et autour des zones atteintes d'eczéma.



> Laissez sécher le produit pendant au moins 5-10 minutes avant d'appliquer d'autres produits sur votre peau.

Lors de l'utilisation de Gladskin Eczemact Gel, vous remarquerez peut-être un léger film résiduel sur votre peau. C'est du gel qui reste et que vous pouvez essuyer après 10 minutes.

QUAND NE PAS UTILISER CE PRODUIT

N'utilisez pas ce produit si votre peau n'est pas intacte ou si vous savez avez allergique à l'un des ingrédients.

Gladskin Eczemact Cream devrait être une crème de couleur blanc à blanc cassé. Gladskin Eczemact Gel devrait être un gel transparent, sans particules visibles. Si ce n'est pas le cas, n'utilisez pas le produit et contactez-nous.

À QUOI PUIS-JE M'ATTENDRE?

Gladskin Eczemact Cream et Gel peuvent produire rapidement un effet calmant, mais il faut parfois attendre plusieurs semaines pour voir des résultats. Les symptômes de l'eczéma sont souvent liés à un déséquilibre de la flore bactérienne de la peau (le microbiome). Si vos symptômes d'eczéma ne sont pas dus à ce déséquilibre, Gladskin Eczemact Cream agira quand même comme un émollient (avec un effet adoucissant). Chez certains utilisateurs, des rougeurs, une sensation de brûlure, un gonflement

ou des démangeaisons peuvent apparaître après l'application de Gladskin Eczemact Cream et Gel.

Si vous utilisez Gladskin Eczemact Cream et Gel pour la première fois, vos symptômes d'eczéma pourront s'aggraver temporairement. Ils devraient s'améliorer en une dizaine de jours au maximum.

Si votre eczéma ne s'améliore pas ou si les effets secondaires sont sévères ou persistants, veuillez cesser d'utiliser le produit et consulter votre médecin.

Si vous subissez des effets secondaires graves, veuillez nous en informer ainsi que l'autorité compétente nationale du pays où vous résidez.

INGRÉDIENTS

Gladskin Eczemact Cream :
Eau, Glycérine, Vaseline blanche, Cire émulsifiante cétomacrogol, Paraffine liquide, Chlorhydrate d'arginine, Chlorure de sodium, Trometamol, Staph-ejekt SA.100, Chlorure de calcium.
Gladskin Eczemact Gel :
Eau, Propylène glycol, Hydroxypropylmethylcellulose, Glycérine, Chlorhydrate d'arginine, Chlorure de sodium, Trometamol, Staph-ejekt SA.100, Chlorure de calcium.

Gladskin Eczemact Cream et Gel sont hypoallergéniques et testés dermatologiquement. Il s'agit d'un dispositif médical à utiliser sur une peau intacte. Gladskin Eczemact Cream et Gel ne contiennent ni lanoline, ni acides, ni alcool, ni parfum, ni parabènes.

COMMENT CONSERVER CE PRODUIT

La date de péremption de ce produit est indiquée sur le flacon. Pour optimiser l'effet bénéfique du principal ingrédient présent dans Gladskin Eczemact Cream et Gel, nous vous conseillons de conserver le produit au réfrigérateur. Ne pas exposer Gladskin Eczemact Cream et Gel à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 25 °C.

SVENSKA

Gladskin Eczemact Cream and Gel är medicintekniska produkter. Vänligen läs denna information noggrant innan du använder produkten, även om du har använt den tidigare. På så sätt håller du dig uppdaterad om produktens effekter och hur du använder den på rätt sätt då vi ibland behöver ändra informationen. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor efter att du läst denna information.

FÖR VEM ÄR GLADSKIN ECZEMACT CREAM OCH GEL AVSEDD FÖR?

Använd Eczemact Cream and Gel om du lider av eksem. Symtom på eksem innefattar torr, skrovlig och flagande hud med rodnad och klåda. *Staphylococcus aureus*-bakterien kan orsaka inflammation i huden och förvärra eksemsymptomen.

TOLERANS

Produkten är parfymfri och hypoallergenisk. Den är lämplig för ansikte, ögonlock och kropp.

HUR FUNGERAR PRODUKTEN?

Gladskin Eczemact Cream and Gel innehåller huvudingrediensen Staph-ejekt™ SA.100. Denna unika ingrediens har sitt ursprung i mikrobiomvetenskap och angriper specifikt den bakterie som huvudsakligen orsakar inflammation i huden samtidigt som den bevarar andra bakterier som är viktiga för hudens välmående.

VAD GÖR PRODUKTEN?

Reducerar eksem problem
- Mot klåda
- Mot röda fläckar
- Återutkar mycket torr hud

SÅ HÅR ANVÄNDER DU PRODUKTEN?



> För utvärtes bruk Använd produkten på oskadad hud som är ren från krämer, rengöringsprodukter, pudring och så vidare.



> Används regelbundet två till tre gånger per dag.



> Applicera ett tunt lager av produkten på och runt områdena med eksem.



> Låt produkten torka minst 5-10 minuter innan du applicerar andra produkter på huden.

När du använder Gladskin Eczemact Cream and Gel kan du uppleva att ett tunt lager finns kvar på huden. Det är överflödiga kan torkas bort efter 10 minuter.

NÅR SKA PRODUKTEN INTE SKA ANVÄNDAS

Använd inte denna produkt om din hud är skadad eller om du vet att du är allergisk mot någon av ingredienserna.

Gladskin Eczemact Cream är vit eller off-white. Gladskin Eczemact Gel är en klar gel, utan synliga partiklar. Om detta inte är fallet, använd inte produkten och kontakta oss.

DETTA KAN DU FÖRVÄNTA DIG

Gladskin Eczemact Cream and Gel kan ha en snabb lugnande effekt, men det kan också ta några veckor att se resultat. Eksemsymtom är ofta relaterade till en obalans i hudens bakteriefloora (mikrobiom). Om dina eksemsymtom inte beror på en sådan obalans, kommer Gladskin Eczemact Cream fortfarande att fungera smörjande. Vissa användare kan uppleva rodnad, en brännande känsla, svullnad eller klåda efter användning av Gladskin Eczemact Cream and Gel.

Om du använder Gladskin Eczemact Cream and Gel för första gången kan dina eksemsymtom öka tillfälligt. Detta bör förbättras inom 10 dagar.

Om dina eksem inte minskar eller om biverkningarna är svåra eller ihållande, sluta använda produkten och rådfråga en läkare.

Om svåra biverkningar uppstår, vänligen informera oss och den behöriga myndigheten i det land där du bor.

INGREDIENSER

Gladskin Eczemact Cream:
Vatten, glycerin, vaselinum album, Cera cetomacrogolis emulgeringsmedel, paraffinum liquidum, Arginin HCl, natriumklorid, trometamol, Staph-ejekt SA.100, kalciumklorid.

Gladskin Eczemact Gel:
Vatten, propylenglykol, hydroxypropylmethylcellulosa, glycerin, arginin HCl, natriumklorid, trometamol, Staph-ejekt SA.100, kalciumklorid.

Gladskin Eczemact Cream and Gel är hypoallergeniska och dermatologiskt testade. Det är medicinska produkter avsedda att användas på oskadad hud. Gladskin Eczemact Cream and Gel innehåller inte lanolin, syror, alkohol, parfym eller parabener.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Utgångsdatumet för produkten står angivet på förpackningen. För bästa effekt av huvudingrediensen i Gladskin Eczemact Cream and Gel rekommenderar vi att du förvarar produkten i kylskåpet. Eczemact Cream and Gel bör inte förvaras i temperaturer under 0°C eller över 25°C.

QUESTIONS OR FEEDBACK?

We are delighted to help you. Share your questions or feedback with us by e-mailing info@gladskin.com

Any information will be treated confidentially.