

MYHIXEL

myhixel.com

***Contact/Contacto/Kontakt/Contact
customerservice@myhixel.com***

***Developed in Spain by New Wellness Concept, S.L. (MYHIXEL). Imported by CNEX AIE, S.L.
Desarrollado en España por New Wellness Concept, S.L. (MYHIXEL), importado por CNEX AIE, S.L.
Entwickelt in Spanien von New Wellness Concept, S.L. (MYHIXEL). Importiert von CNEX AIE, S.L.
Développé en Espagne par New Wellness Concept, S.L. (MYHIXEL). Importé par CNEX AIE, S.L.***



Greetings!

¡Bienvenido!

Willkommen!

Bienvenue!

EN



Congrats! This is the first step to improve your sex life!




MYHIXEL is a unique method that allows men to improve their climax control in a natural way, without pills or numbing creams. MYHIXEL combines the most advanced device on the market with a program of exercises that improves the sexual well-being of men while they enjoy themselves.

At www.myhixel.com you can buy different accessories for your MYHIXEL I device, which allow you to enjoy the MYHIXEL experience even more.

Table of contents

1. Package content	3
2. MYHIXEL Play app activation	4
3. MYHIXEL I instructions for use	5
4. Cleaning	7
5. Materials	8
6. Storage	8
7. Warnings	8
8. Disclaimer	9

Package content

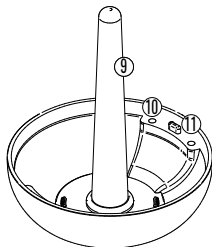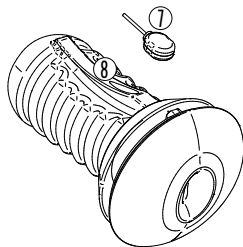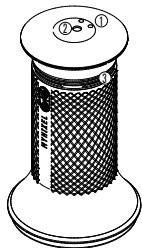

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Magnetic charging pins | 7. Vibrating motor |
| 2. Hands free thread | 8. Pocket for the vibrating motor |
| 3. Suction regulator thread | 9. Heating stick |
| 4. Buttons | 10. Closing magnets |
| 5. Heating connectors | 11. Closing plug |
| 6. Inner canal | |

MYHIXEL Play app activation







1. To activate your MYHIXEL Play program, you must first download the MYHIXEL Play app from the App store or Play store.
2. After the Welcome section, press the "Activate your Play program" button and scan the QR code located on the outside of the MYHIXEL I device box.
3. Enter the email address to which you want to associate your account and the MYHIXEL Serial Code found on the inside of the MYHIXEL I box with format XXXX-YYYYYY-ZZZZ. It is very important that you keep this number, because you may need it in the future to retrieve your account or when you change your mobile device.
4. To protect your session, you must enter a 4-digit PIN code.

Keep in mind that the app can only be activated on one mobile device at a time. If you need to change your mobile device, you can find the instructions on how to activate your program on the new device in the MYHIXEL Play app.



MYHIXEL I Instructions for use

1. Take the MYHIXEL I device out of the box.
2. Use the charging cable supplied. Connect the cable to the device as explained in the images below, and plug it into the power supply, via an adapter, for approximately 3-4 hours. If it is not your first time using the device, make sure that the device is completely dry before loading it, paying particular attention to the charging connectors that meet the lid and the body of the casing.
3. Once charged, turn on the heating function until the device reaches the proper temperature. When it reaches its maximum temperature it will automatically turn off. Don't warm it twice consecutively.
4. Remove and position the lid always vertically. Do not unscrew the lid as this could damage the connectors.
5. Lubricate the sleeve with lubricant. Ensure you lubricate the inlet and canal generously. Use a water-based lubricant, such as MYHIXEL Lube.
6. MYHIXEL I is now ready to use. Only use it when the penis is erect. Press the vibration button to turn the vibration on/off.
7. If you have the "hands free" accessory, you can enjoy the experience by adhering your MYHIXEL I securely to a smooth surface for the best hands-free session you'll ever experience.
8. If during penetration you feel that the friction is excessive, we recommend that you apply a little more lubricant. Tip: you can unscrew the upper lid slightly. This will allow you to regulate the level of suction that you feel during penetration.
9. Once the activity is finished, clean your MYHIXEL I as indicated below.

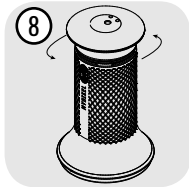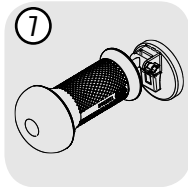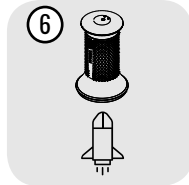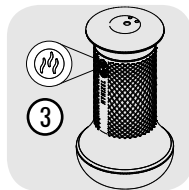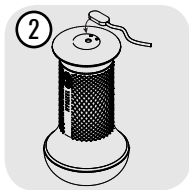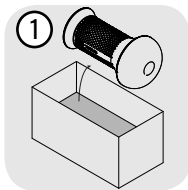

Cleaning

Clean your MYHIXEL I as detailed below.

Cleaning the sleeve

- To avoid damaging vibrating bullet cables, carefully remove the sleeve from the case.
- Remove the vibrating bullet from the side pocket.
- Turn the sleeve inside out like a sock. Place the sleeve under the tap and rinse well with water. For better results, you can use the MYHIXEL cleaner and water. Avoid using soap or other non specific cleaners , as this may damage the sleeve's material.
- Once cleaned, let the sleeve air dry until it is thoroughly dry.
- Remember that you can buy MYHIXEL's sleeve replacements at myhixel.com.

Cleaning the casing

- Remove the sleeve.
- Clean with a damp cloth, removing all the lubricant that has remained in the case.
- Take special care not to wet the connectors. Although they

are isolated, it is recommended that they do not get wet during cleaning.

- Dry the case with a dry cloth and leave it to air dry until any trace of moisture has disappeared.

When both parts are well dry, put the vibrating bullet back into the side pocket and put back the sleeve into the case. Replace the lid and store the MYHIXEL I in its box until its next use.

Materials

- Thermoplastic elastomer, ABS, silicone.
- Electronic components and 3.7 V lithium battery.
- Phthalates free materials.

Storage

Do not expose your MYHIXEL I to direct sunlight and avoid extreme heat. The best way to store the device is in its box. When the box is closed, it is perfectly protected from dust. Make sure the device is completely dry before storing it.

Warnings

- Do not use the product for more than 25 minutes. Sexologists recommend not to perform continuous penetration for more than 25 minutes, either masturbating, with a masturbator, or during intercourse.
- Do not touch the heater stick when the heating function has been turned on as it may be hot.

• Do not use the product if your skin is irritated. If you feel pain or discomfort during use, stop using the product and contact a specialist. You can contact one of our professionals at MYHIXEL Play app.

• Danger of injury to children. This product should be kept out of the reach of children.

• Do not share your MYHIXEL I with anyone else, for reasons of hygiene.

• Only use a water-based lubricant, for example, the specially designed MYHIXEL Lube gel, as other lubricants could damage the sleeve material.

• Danger of injury due to fire/ignition. Do not extinguish with water. Do not throw the product into fire.

• Danger of injury from defective batteries. Tampering can cause uncontrolled exothermic reactions of batteries. In this case, discard the entire product immediately and an appropriate way.

• Danger of injury due to electric shock. Liquid can damage the charging circuit and endanger your health.

• Disconnect the device from the charging cable/power supply during cleaning.

• Danger of damage from contact with liquids during charging. The contacts, plugs, and sockets must be dry and clean.

Avoid contact with liquids while charging the device.

- Danger of damage from contact with liquids during charging. The contacts, plugs, and sockets must be dry and clean. Avoid contact with liquids while charging the device.

- Danger of damage by magnetic fields. Magnetic fields can influence mechanical and electronic components, for example, a pacemaker. Do not use the product if you have a pacemaker. Contact your doctor to obtain more information. Do not place magnetic stripe cards, for example, credit cards, near the product, as they may become damaged.

- Danger of damage due to variations in ambient temperature. The variation of the ambient temperature, for example, after transport which can cause condensation. In this case, do not use the device until it has adapted to the new room temperature.

- Danger of damage due to overcharging the device. Disconnect the charging cable from the power supply after each charge.

- Danger of injury due to improper repair. Do not open the device by force. Do not perform repairs yourself. Do not insert pointed objects into the device.

- Stop using the device when it becomes damaged, the electronic part is exposed, or you feel that it may not work properly.

- Always let the sleeve air dry. Never put it in the microwave or other household appliance.

- Do not put the device underwater.

Disclaimer

Users of the MYHIXEL I do so at their own risk. Neither New Wellness Concept, SL nor its retailers assume any responsibility or liability for the use of the MYHIXEL I. Model may be changed for improvements without notice.

No liability is assumed for damages due to:

- Non-observance of instructions
- Unintended use
- Arbitrary modifications
- Technical modifications
- Use of unauthorized spare parts
- Use of unauthorized accessories

ES



¡Enhorabuena! Acabas de dar el primer paso para mejorar tu vida sexual. MYHIXEL es una propuesta revolucionaria que permite a los hombres mejorar la calidad de sus relaciones sexuales, gracias al control de la eyaculación de una manera completamente natural.




En MYHIXEL hemos desarrollado un método innovador que combina el dispositivo más avanzado del mercado, MYHIXEL I, junto a una experiencia lúdica a través de la app MYHIXEL PLAY, que mejora el bienestar sexual de los hombres mientras disfrutan.

Además, en www.myhixel.com podrás adquirir diferentes complementos para tu dispositivo MYHIXEL I, que harán que disfrutes de MYHIXEL de una forma aún más completa.

Contenido

1. Contenido del paquete	3
2. Activación de MYHIXEL Play	4
3. Instrucciones de uso de MYHIXEL I	5
4. Limpieza	7
5. Materiales	8
6. Almacenamiento	8
7. Advertencias	8
8. Exención de responsabilidad	9

Contenido del paquete

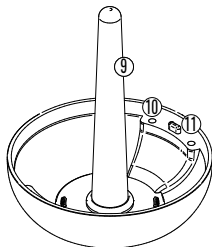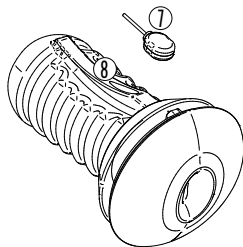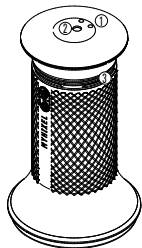

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Pines de carga magnéticos | 6. Canal interior |
| 2. Soporte hands free | 7. Motor vibrador |
| 3. Rosca reguladora de succión | 8. Bolsillo para motor vibrador |
| 4. Botonera | 9. Palo calefactor |
| 5. Pines conectores de calefacción | 10. Imanes para cierre |
| | 11. Clavija de cierre |

Activación de MYHIXEL Play

Para activar tu programa MYHIXEL Play, descarga la aplicación MYHIXEL Play de la App Store o Play Store.

Tras la introducción sobre MYHIXEL, pulsa la opción "Activa tu programa Play" y escanea el código QR que está en el exterior de la caja de tu dispositivo MYHIXEL I.

Este proceso está diseñado para securizar todos los datos que introduzcas en la app y tratar toda la información de manera anónima, protegiendo así tu privacidad.

A continuación, introduce tu email, al que quieres asociar tu cuenta y el Número de Serie MYHIXEL (MYHIXEL SERIAL CODE). Es el número que aparece en el interior de la caja de tu dispositivo MYHIXEL I con formato XXXX-YYYYYY-ZZZZ. Es muy importante que guardes este número, porque te puede hacer falta en el futuro para recuperar tu cuenta o si cambias de dispositivo móvil.

Para proteger tu sesión, deberás introducir un código PIN de 4 dígitos.

Una vez introducidos estos datos, podrás disfrutar de la experiencia de tu programa MYHIXEL Play.

Ten en cuenta que la app solamente se puede tener instalada en un dispositivo móvil de forma simultánea. Si necesitas

cambiar de dispositivo, encontrarás las instrucciones para hacerlo en la propia app MYHIXEL Play.










Instrucciones de uso de MYHIXEL I

1. Abre la caja y extrae tu MYHIXEL I. Antes de usarlo por primera vez, es necesario cargarlo completamente.
2. Utiliza exclusivamente el cable de carga suministrado. Conéctalo al dispositivo tal como se explica en las imágenes y enchufa en la corriente mediante un adaptador durante aproximadamente 3-4 horas para cargar la batería necesaria para las funciones de autocalentamiento y vibración. Si no es la primera vez que lo usas, antes de cargarlo asegúrate de que el dispositivo esté completamente seco, vigilando especialmente la zona de los pines de carga donde se une la tapa con el cuerpo de la carcasa.
3. Una vez cargado, enciende la función de calentamiento hasta que el dispositivo alcance la temperatura adecuada. Cuando alcance su máxima temperatura se apagará automáticamente. Nunca lo calientes más de una vez de forma consecutiva.
4. Para quitar y volver a poner la tapadera, hazlo siempre de forma directa y vertical, sin girar la tapa calentadora, siguiendo la pestaña de referencia, de lo contrario los pines conectores pueden dañarse.
5. Impregna la manga con lubricante. Lubrica el orificio de entrada y el canal abundantemente. Utiliza un lubricante a

base de agua, como MYHIXEL Lube.

6. El dispositivo está listo para usarse. Introduce tu pene cuando esté erecto. Pulsa el botón principal de vibración para encender o apagar la vibración.
7. Si dispones de tu accesorio "hands free", puedes disfrutar de la experiencia sin usar las manos, "pegando" tu MYHIXEL I a una superficie lisa.
8. Si durante la penetración tienes la sensación de que la fricción es excesiva, aplica un poco más de lubricante, ya que éste debe repartirse por todo el canal. Consejo: Girando levemente la tapadera trasera, la de carga, puedes regular el nivel de succión que sientes durante la penetración, jugando así con sus diferentes niveles.
9. Una vez terminado, limpia tu MYHIXEL I tal y como se indica a continuación, en el apartado de limpieza.

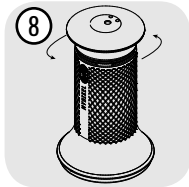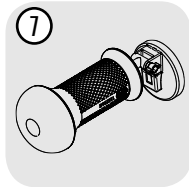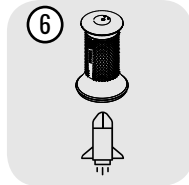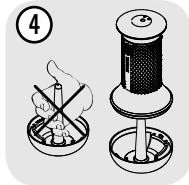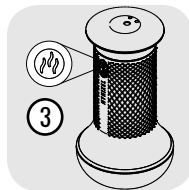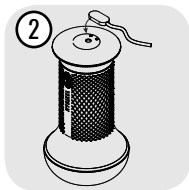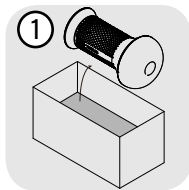

Limpieza

Limpia tu MYHIXEL I tal como se detalla a continuación.

Limpieza de la manga

- Con la tapa quitada (extremo del orificio de entrada), extrae con cuidado la manga. No lo hagas de forma brusca para no dañar los cables de la bala vibradora.
- Extrae la bala vibradora del bolsillo lateral.
- Una vez extraída la bala vibradora y sus cables, limpia la manga con agua abundante (se puede limpiar bajo el grifo) o con agua y el limpiador MYHIXEL para un mejor resultado. No limpiar en ningún caso con jabón u otros limpiadores, ya que puede dañar el material. Para limpiarlo mejor, te recomendamos que des la vuelta a la manga (como un calcetín).
- Una vez limpia, deja secar la manga al aire hasta que no quede nada de humedad.
- Recuerda que puedes adquirir nuevas mangas para tu dispositivo a través de myhixel.com.

Limpieza de la carcasa

- Para proceder a limpiar la carcasa, es necesario haber extraído la manga previamente.

- Recomendamos limpiar con un paño húmedo, quitando todo el lubricante que se haya quedado en la carcasa.
- Ten especial cuidado de no mojar la parte de los conectores. Aunque estén aislados, es recomendable que no les llegue ningún líquido durante la limpieza.
- Después, puedes pasar un paño seco y dejar al aire hasta que haya desaparecido cualquier rastro de humedad.
- Cuando ambas partes estén bien secas, volver a introducir la bala vibradora en el bolsillo lateral y meter la manga en la carcasa. Volver a poner la tapa y guardar en su caja hasta su próximo uso.

Materiales

- Elastómero termoplástico, ABS, silicona.
- Componentes electrónicos y batería de litio de 3.7 V.
- Composición de los materiales totalmente libre de ftalatos.

Almacenamiento

No expongas tu MYHIXEL I a la luz directa del sol y evita el calor extremo. Puedes guardar tu dispositivo en su caja, donde estará perfectamente protegido del polvo. Asegúrate de que el dispositivo esté completamente seco antes de almacenarlo.

Advertencias

- No utilices el producto si la piel está irritada o dañada. Si sientes dolor o malestar durante el uso, deja de utilizar el producto y contacta con un urólogo o sexólogo. En MYHIXEL Play podrás acceder a nuestra plataforma con diferentes profesionales.

- No utilizar el producto durante más de 25 minutos seguidos. Siguiendo el consejo de especialistas, no se recomienda realizar penetración continuada durante más de 25 minutos seguidos, ya sea masturbándose con la mano, con un dispositivo masturbador, o en el contexto del sexo en pareja.
- No tocar el palo calentador cuando la función de calentado haya estado encendida, ya que puede quemar.
- Peligro de lesiones en niños. Este producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- No compartas tu MYHIXEL I con nadie por motivos de higiene.
- Utilizar únicamente lubricante a base de agua, como MYHIXEL Lube, especialmente diseñado para nuestros productos, ya que otro tipo de lubricantes podría dañar los materiales.
- Peligro de lesiones por fuego / ignición. No extinguir con agua. No arrojar el producto al fuego.
- Dejar secar la manga siempre al aire, nunca en el microondas u otro electrodoméstico.
- Peligro de lesiones por descarga eléctrica. El líquido puede dañar el circuito de carga y poner en peligro tu salud. Desconecta el dispositivo del cable de carga / fuente de alimentación durante la limpieza.

- Peligro de lesiones por baterías defectuosas. La manipulación indebida puede causar reacciones exotérmicas incontroladas de las baterías. En este caso, desecha el producto completo de forma adecuada e inmediata.
- Peligro de daños por contacto con líquidos durante la carga. Los contactos, enchufes y tomas de corriente deben estar secos y limpios. Evita el contacto con líquidos mientras cargas el dispositivo.
- Peligro de daños por campos magnéticos. Los campos magnéticos pueden influir en componentes mecánicos y electrónicos como, p. ej., marcapasos. No utilices el producto directamente sobre el marcapasos. Ponte en contacto con el médico responsable de tu tratamiento para obtener más información. No coloques tarjetas con banda magnética (p.ej., tarjetas de crédito) cerca del producto, ya que pueden dañarse debido al imán del producto.
- Peligro de daños debido a variaciones de la temperatura ambiente. La variación de la temperatura ambiente (p. ej., después del transporte puede causar condensación). En este caso, no pongas el dispositivo en funcionamiento hasta haberse adaptado a la nueva temperatura ambiente.
- Peligro de daños debido a una carga demasiado larga. Desconecta el cable de carga de la fuente de alimentación después de cada proceso de carga.

- Peligro de lesiones debido a una reparación indebida. No abras el dispositivo por la fuerza para realizar reparaciones por ti mismo. No insertes objetos puntiagudos en el dispositivo.
- Dejar de utilizar cuando el dispositivo esté deteriorado, la parte electrónica quede expuesta o sientas que pueda no funcionar correctamente.
- No meter el dispositivo bajo el agua..

Exención de responsabilidad

El usuario utiliza este producto a su propio riesgo. New Wellness Concept, SL y sus distribuidores no asumen ninguna responsabilidad en relación con el uso de este producto. Podrán realizarse mejoras del modelo por parte de New Wellness Concept, SL sin previo aviso.

No se asume ninguna responsabilidad por daños debidos a:

- Inobservancia de las instrucciones
- Uso no previsto
- Modificaciones arbitrarias
- Modificaciones técnicas
- Uso de piezas de recambio no autorizadas
- Uso de accesorios no autorizados

DE



Herzlichen Glückwunsch! Dies ist der erste Schritt, damit Sie Ihr Sexualleben verbessern!




MYHIXEL ist eine einzigartige Methode, die es Männern ermöglicht, die Kontrolle über ihren Höhepunkt auf natürliche Weise zu verbessern, ohne zu Pillen oder betäubenden Cremes greifen zu müssen. MYHIXEL kombiniert das fortschrittlichste Gerät auf dem Markt mit einem Übungsprogramm, das das sexuelle Wohlbefinden von Männern verbessert, während Sie sich amüsieren.

Unter www.myhixel.com können Sie verschiedene Zubehörteile für Ihr MYHIXEL I Gerät erwerben, mit denen Sie das MYHIXEL-Erlebnis noch intensiver genießen können.

Inhalt

1. Paket Inhalt	3
2. MYHIXEL Play app Aktivierung	4
3. MYHIXEL I Gebrauchsanweisung	5
4. Reinigung	7
5. Material	8
6. Aufbewahrung	8
7. Warnings	8
8. Widerruf	9

Paket Inhalt

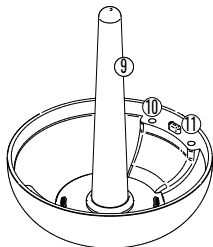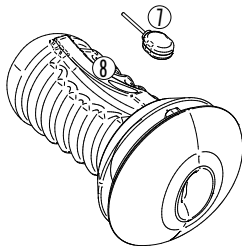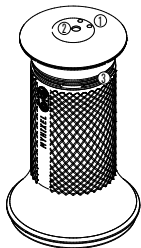

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Magnetische Ladestifte | 7. Vibrierender Motor |
| 2. Freisprechunterstützung | 8. Tasche für den Vibrationsmotor |
| 3. Saugregulierendes Gewinde | 9. Heizstab |
| 4. Die Knöpfe | 10. Schließmagnete |
| 5. Heizungsanschluss-Stifte | 11. Sicherungsstift |
| 6. Innenkanal | |

MYHIXEL Play app Aktivierung

1. Um Ihr MYHIXEL Play-Programm zu aktivieren, müssen Sie zunächst die MYHIXEL Play App aus dem App Store oder Play Store herunterladen.

2. Drücken Sie nach dem Begrüßungsabschnitt die Schaltfläche „Aktivieren Sie Ihr Wiedergabeprogramm“ und scannen Sie den QR-Code, der sich auf der Außenseite des MYHIXEL I-Gerätebox befindet. Dieser Prozess dient dazu, die in die App eingegebenen Daten zu schützen und die Informationen anonym zu behandeln und so Ihre Privatsphäre zu schützen.

4. Geben Sie die E-Mail-Adresse, mit der Sie Ihr Konto verknüpfen möchten, und den MYHIXEL Seriencode (auf der Innenseite der MYHIXEL I Box im Format XXXX-YYYY-YYYYYYYY-ZZZZZ) ein. Es ist sehr wichtig, dass Sie diese Nummer behalten, da Sie sie in Zukunft benötigen werden, um Ihr Konto aufzurufen oder wenn Sie Ihr Mobilgerät wechseln).

4. Um Ihre Sitzung zu schützen, müssen Sie einen 4-stelligen PIN-Code eingeben.

Beachten Sie, dass die App jeweils nur auf einem mobilen Endgerät aktiviert werden kann. Wenn Sie Ihr mobiles Endgerät wechseln möchten, finden Sie die dazugehörige

Anleitung zur Aktivierung Ihres Programms auf dem neuen Gerät in der MYHIXEL Play App.



MYHIXEL I Gebrauchsanweisung

1. Nehmen Sie das MYHIXEL I Gerät aus der Verpackung.

2. Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel. Schließen Sie das Kabel wie in den Bildern beschrieben an das Gerät an und schließen Sie es über einen Adapter für ca. 3-4 Stunden an die Steckdose. Wenn Sie das Gerät nicht zum ersten Mal verwenden, vergewissern Sie sich vor dem Laden, dass das Gerät vollständig trocken ist, und achten Sie dabei besonders auf die Ladestecker, die den Deckel und den Gehäusekörper berühren.

3. Schalten Sie nach dem Laden die Heizfunktion ein, bis das Gerät die richtige Temperatur erreicht hat. Wenn es seine maximale Temperatur erreicht hat, schaltet es sich automatisch aus. Nicht zweimal hintereinander erwärmen.

4. Entfernen und positionieren Sie den Deckel immer vertikal. Schrauben Sie den Deckel nicht ab, da dies die Stecker beschädigen könnte.

5. Geben Sie Gleitmittel auf die Hülse. Achten Sie darauf, dass Sie den Einlass und den Kanal großzügig einölen. Verwenden Sie ein Gleitmittel auf Wasserbasis, wie z.B. MYHIXEL Lube.








6. Der MYHIXEL I ist nun einsatzbereit. Verwenden Sie es nur, wenn der Penis aufrecht steht. Drücken Sie die

Vibrationstaste, um die Vibration ein- und auszuschalten.

7. Wenn Sie das Zubehör „Freihändig“ besitzen, können Sie das beste freihändige Erlebnis, das Sie je haben werden, genießen, indem Sie Ihren MYHIXEL I sicher auf eine glatte Oberfläche haften, um die beste Freisprecheinrichtung zu erhalten, die Sie je erleben werden.

8. Wenn Sie beim Eindringen das Gefühl haben, dass die Reibung zu hoch ist, empfehlen wir Ihnen, etwas mehr Gleitmittel aufzutragen. Tipp: Sie können den oberen Deckel leicht abschrauben. Auf diese Weise können Sie den Saugpegel regulieren, den Sie beim Eindringen spüren.

9. Sobald die Aktivität beendet ist, reinigen Sie Ihren MYHIXEL I.

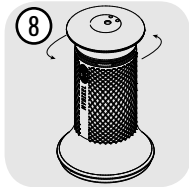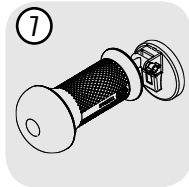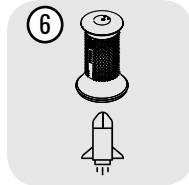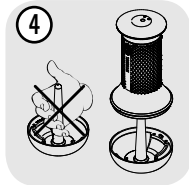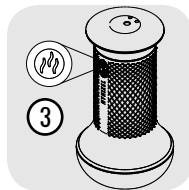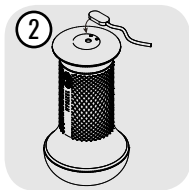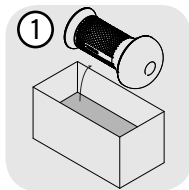

Reinigung

Reinigen Sie Ihren MYHIXEL I wie nachfolgend beschrieben.

Reinigung der Hülse

- Um Beschädigungen der vibrierende Projektilkabel zu vermeiden, entfernen Sie vorsichtig die Hülse aus dem Gehäuse.
- Entfernen Sie das vibrierende Projektil aus der Seitentasche.
- Drehen Sie die Hülse wie eine Socke nach außen. Legen Sie die Hülse unter den Wasserhahn und spülen Sie sie gut mit Wasser ab. Für bessere Ergebnisse können Sie den MYHIXEL Reiniger und Wasser verwenden. Verwenden Sie keine Seife oder andere nicht spezifische Reinigungsmittel, da dies das Material der Hülse beschädigen kann.
- Lassen Sie die Hülse nach der Reinigung an der Luft trocknen, bis sie vollständig trocken ist.
- Denken Sie daran, dass Sie MYHIXELs Ärmelersatz unter myhixel.com kaufen können

Reinigung des Gehäuses

- Entfernen Sie die Hülse.

- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch und entfernen Sie dabei das im Gehäuse verbliebene Gleitmittel.
- Achten Sie besonders darauf, dass die Stecker nicht nass werden. Obwohl sie isoliert sind, wird empfohlen, dass sie bei der Reinigung nicht nass werden.
- Trocknen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch und lassen Sie es an der Luft trocknen, bis alle Spuren von Feuchtigkeit verschwunden sind.

Wenn beide Teile gut trocken sind, stecken Sie das vibrierende Projektil wieder in die Seitentasche und stecken Sie die Hülse wieder in das Gehäuse. Setzen Sie den Deckel wieder auf und bewahren Sie den MYHIXEL I bis zum nächsten Gebrauch in seiner Box auf.

Material

- Thermoplastisches Elastomer, ABS, Silikon.
- Elektronische Komponenten und 3,7 V Lithium-Batterie.
- Phthalatfreie Materialien.

Aufbewahrung

Setzen Sie Ihren MYHIXEL I keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und vermeiden Sie extreme Hitze. Die beste Art, das Gerät aufzubewahren, ist in der Box. Im geschlossenen Zustand ist die Box perfekt vor Staub geschützt. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es lagern.

Warnings

- Verwenden Sie nur ein Gleitmittel auf Wasserbasis, z.B. das speziell entwickelte MYHIXEL Gleitgel, da andere Gleitmittel das Hülsenmaterial beschädigen können.
- Verwenden Sie das Produkt nicht länger als 25 Minuten.

8- Deutsch

Sexologen empfehlen, die kontinuierliche Penetration nicht länger als 25 Minuten durchzuführen, sei es beim Masturbieren, mit einem Masturbator oder beim Geschlechtsverkehr.

- Berühren Sie den Heizstab nicht, wenn die Heizfunktion eingeschaltet ist, da er heiß sein kann.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Ihre Haut gereizt ist. Wenn Sie während der Anwendung Schmerzen oder Unannehmlichkeiten verspüren, hören Sie auf, das Produkt zu verwenden, und wenden Sie sich an einen Spezialisten. Sie können einen unserer Fachleute unter MYHIXEL Play kontaktieren.
- Verletzungsgefahr für Kinder. Dieses Produkt sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Teilen Sie Ihren MYHIXEL I aus hygienischen Gründen nicht mit anderen.
- Verletzungsgefahr durch Feuer/Entzündung. Nicht mit Wasser löschen. Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer.
- Verletzungsgefahr durch defekte Batterien. Manipulationen können zu unkontrollierten exothermen Reaktionen von Batterien führen. In diesem Fall ist das gesamte Produkt sofort und auf geeignete Weise zu entsorgen.
- Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Flüssigkeit kann den Ladekreis beschädigen und Ihre Gesundheit gefährden.
- Trennen Sie das Gerät während der Reinigung vom Lade-

kabel/Spannungsversorgung.

- Beschädigungsgefahr durch Kontakt mit Flüssigkeiten während des Ladevorgangs. Die Kontakte, Stecker und Buchsen müssen trocken und sauber sein. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten, während Sie das Gerät aufladen.
- Gefahr der Beschädigung durch Magnetfelder. Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten beeinflussen, z.B. einen Herzschrittmacher. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher haben. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, um weitere Informationen zu erhalten. Legen Sie keine Magnetstreifenkarten, z.B. Kreditkarten, in die Nähe des Produkts, da sie beschädigt werden können.
- Beschädigungsgefahr durch Schwankungen der Umgebungstemperatur. Die Veränderung der Umgebungstemperatur, z.B. nach dem Transport, kann zu Kondensflüssigkeit führen. Verwenden Sie das Gerät in diesem Fall erst, wenn es sich an die neue Raumtemperatur angepasst hat.
- Beschädigungsgefahr durch Überladung des Gerätes. Trennen Sie das Ladekabel nach jedem Ladevorgang vom Stromnetz.
- Lassen Sie die Hülse immer an der Luft trocknen. Niemals in die Mikrowelle oder ein anderes Haushaltsgerät stellen.
- Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Reparatur. Öffnen Sie das Gerät nicht gewaltsam. Führen Sie Reparaturen

nicht selbst durch. Führen Sie keine spitzen Gegenstände in das Gerät ein.

- Stellen Sie die Verwendung des Geräts ein, wenn es beschädigt ist, das elektronische Teil freigelegt ist oder Sie das Gefühl haben, dass es möglicherweise nicht richtig funktioniert.
- Stellen Sie das Gerät nicht unter Wasser.

Widerruf

Die Nutzung des MYHIXEL erfolgt auf eigene Gefahr. Weder New Wellness Concept, SL noch seine Einzelhändler übernehmen Verantwortung oder Haftung für die Nutzung des MYHIXEL I.

Das Modell kann ohne Vorankündigung für Verbesserungen geändert werden.

Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch folgendes entstehen:

- Nichtbeachtung der Anweisungen
- Ungewollte Nutzung
- Eigenmächtige Änderungen
- Technische Änderungen
- Verwendung von nicht zugelassenen Ersatzteilen
- Verwendung von nicht autorisiertem Zubehör

FR



Félicitations! Voici la première étape pour améliorer votre vie sexuelle!




MYHIXEL est une méthode unique qui permet aux hommes de mieux gérer leur excitation de manière naturelle sans comprimés ou crèmes anesthésiantes. MYHIXEL c'est l'alliance de l'appareil le plus sophistiqué sur le marché et d'un programme d'exercices qui améliorent le bien être sexuel des hommes tout en prenant du plaisir..

Sur www.myhixel.com vous pourrez acheter de nombreux accessoires pour votre appareil MYHIXEL I et ainsi profiter d'une expérience MYHIXEL encore plus riche.

Le contenu

1. Contenu du paquet	3
2. Activation de l'application MYHIXEL Play	4
3. MYHIXEL I Instructions	5
4. Nettoyage	7
5. Matière	8
6. Conservation	8
7. Avertissements	8
8. Mentions légales	9

Contenu du paquet

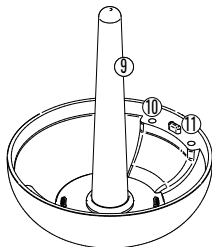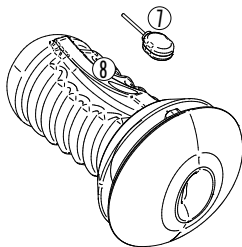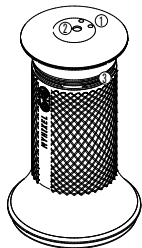

1. Broches de charge magnétiques

2. Support mains libres

3. Filetage d'aspiration régulant

4. Boutons

5. Connecteurs de chauffage

6. Canal intérieur

7. Moteur vibrant

8. Poche pour le moteur vibrant

9. Bâton chauffant

10. Aimants de fermeture

11. Bouchon de fermeture

Activation de l'application MYHIXEL Play

1. Pour activer le programme MYHIXEL Play, vous devez d'abord télécharger l'application MYHIXEL Play sur App store ou Play store.
2. Une fois sur la page d'accueil, sélectionner l'option "Activer votre programme Play" et scanner le QR code situé sur le côté de la boîte de votre appareil MYHIXEL I. Grâce à cette procédure, les données que vous entrez dans l'application sont protégées et les informations sont traitées de manière anonyme afin de protéger votre vie privée.
3. Indiquez l'adresse e-mail que vous souhaitez associer à votre compte et le numéro de série MYHIXEL que vous trouverez à l'intérieur de la boîte MYHIXEL I au format XXXX-YYYYYY-ZZZZ.. Vous devez absolument conserver ce numéro parce que vous en aurez besoin si vous souhaitez retrouver votre compte ou si vous changez de téléphone.

4. Pour protéger votre session, vous devez rentrer un code Pin à 4 chiffres.

Rappelez-vous que l'application ne peut être active que sur un téléphone à la fois. Si vous changez de téléphone, vous trouverez les instructions sur comment activer votre programme sur un nouvel appareil dans l'application MYHIXEL Play.



MYHIXEL I Instructions







1. Sortez l'appareil MYHIXEL I de son emballage.
2. Utilisez le chargeur fourni. Connectez le câble à l'appareil comme le montrent les images et branchez-le à une prise de courant en utilisant un adaptateur pendant environ 3-4 heures. Si ce n'est pas la première fois que vous utilisez l'appareil, assurez-vous qu'il est totalement sec avant de le charger, en faisant très attention à la connectique entre le couvercle et le corps de l'appareil.
3. Une fois qu'il est chargé, allumez la fonction chaleur jusqu'à ce que l'appareil atteigne une température correcte. Une fois qu'il aura atteint la température maximum, il s'éteindra automatiquement. Ne le faites pas chauffer deux fois consécutives.
4. Retirez le couvercle et placez-le toujours à la verticale. Ne dévissez pas le couvercle, vous risqueriez d'endommager la connectique.
5. Utilisez un lubrifiant pour le manche. Assurez de bien lubrifier l'orifice d'entrée et le canal. Nous vous recommandons d'utiliser un lubrifiant à base d'eau comme le MYHIXEL Lube.
6. MYHIXEL I est prêt à l'emploi. Ne l'utiliser que quand

vous êtes en érection. Appuyez sur le bouton vibration pour démarrer ou arrêter la vibration.

7. Si vous avez le kit 'mains libres', vous pouvez profiter de l'expérience au maximum en posant délicatement votre MYHIXEL I sur une surface plate pour un moment encore plus intense sans les mains.

8. Si vous sentez que la friction est trop intense pendant la pénétration, nous vous recommandons de rajouter du lubrifiant. Astuce: vous pouvez dévisser un peu le couvercle supérieur. Cela vous permettra de contrôler le niveau de succion que vous sentez pendant la pénétration.

9. Une fois que vous avez fini, nettoyez votre MYHIXEL I.

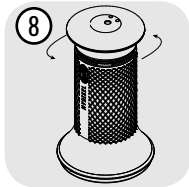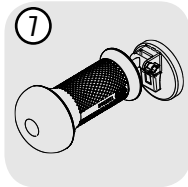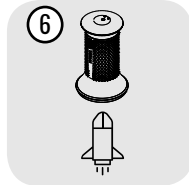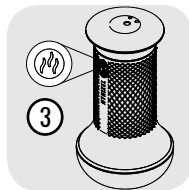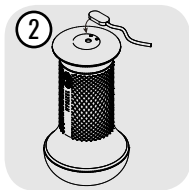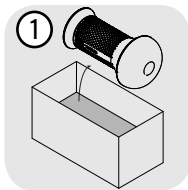

Nettoyage

Nettoyez votre MYHIXEL I comme expliqué ci-dessous.

Nettoyer le manche

- Pour éviter d'endommager les points de vibration, retirez délicatement le manche de l'étui.
- Retirez le point de vibration de la poche latérale.
- Retournez le manche comme une chaussette. Placez le manche sous le robinet et rincez bien à l'eau. Pour de meilleurs résultats, vous pouvez utiliser le nettoyant MYHIXEL et de l'eau. N'utilisez pas de savon ou d'autres nettoyants, vous pourriez endommager les matériaux du manche.
- Une fois qu'il est propre, laissez sécher le manche à l'air libre jusqu'à ce qu'il soit parfaitement sec.
- Vous pouvez toujours acheter des manches de remplacement MYHIXEL sur myhixel.com.

Nettoyer l'étui

- Retirer le manche
- Nettoyer avec un chiffon humide pour retirer le reste de lubrifiant dans l'étui.
- Faites bien attention à ne pas mettre de l'eau sur les

connecteurs. Bien qu'ils soient isolés, il est fortement recommandé de ne pas les mettre en contact avec de l'eau pendant le nettoyage.

- Sécher l'étui à l'aide d'un chiffon sec et laissez le sécher à l'air libre jusqu'à ce que toute trace d'humidité ait disparu.

Quand les deux éléments sont secs, remplacez le point de vibration dans la poche latérale et remettez le manche dans l'étui. Remettez le couvercle et conservez MYHIXEL I dans sa boîte jusqu'à la prochaine utilisation. .

Matière

- Elastomer Thermoplastique, ABS, silicone.
- Composants électroniques et batterie lithium 3.7 V.
- Matières sans Phthalates.

Conservation

Ne pas exposer votre MYHIXEL I au soleil et près d'une source de chaleur trop importante. Il est recommandé de conserver votre appareil dans sa boîte. Quand la boîte est fermée, il est protégé de la poussière. Assurez-vous que votre appareil est totalement sec quand vous le rangez.

Avertissements

- Ne pas utiliser le produit pendant plus de 25 minutes. Les sexologues recommandent de ne pas effectuer de pénétration en continu pendant plus de 25 minutes, qu'il s'agisse de masturbation avec un masturbateur ou pendant un rapport sexuel.

• Ne pas toucher le manche quand la fonction chauffe est activée car il peut être brûlant.

• Ne pas utiliser le produit si votre peau est irritée. Si vous ressentez une douleur ou un manque de confort pendant l'utilisation, arrêtez d'utiliser le produit et contacter un spécialiste. Vous pouvez contacter un de nos spécialistes sur MYHIXEL Play.

• Risque de blessures chez l'enfant. Ce produit doit être conservé à l'écart des enfants.

• Pour des questions d'hygiène, ne partagez pas votre MYHIXEL I avec quelqu'un.

• Utilisez seulement un lubrifiant à base d'eau, le gel spécialement conçu MYHIXEL Lube par exemple, car d'autres lubrifiants pourraient endommager les matériaux du manche.

• Risque de blessure en cas de feu/allumage. Ne pas éteindre avec de l'eau. Ne pas jeter le produit dans le feu.

• Risque de blessure si la batterie est endommagée. Si vous manipulez la batterie, vous vous exposez à des réactions exothermiques incontrôlables. Dans ce cas, débarrassez-vous du produit immédiatement d'une manière appropriée.

• Risque de blessure en cas de décharge électrique. Un

liquide peut endommager le circuit électrique et mettre en danger votre santé. Déconnecter l'appareil du chargeur/ prise de courant pendant le nettoyage.

- Risque d'endommagement en cas de contact avec du liquide pendant le temps de charge. Les points de contact, les prises et les boîtiers doivent être secs et propres. Éviter tout contact avec du liquide pendant le temps de charge.

- Risque d'endommagement en cas de surcharge de l'appareil. Déconnecter le câble de charge de la prise de courant après chaque chargement.

- Risque de blessure en cas de mauvaises réparations. N'ouvrez pas l'appareil de force. N'essayez pas de le réparer vous-même. N'insérez pas d'objets pointus dans l'appareil.

- N'utilisez plus l'appareil quand il est endommagé, que la connectique est exposée ou que vous avez l'impression qu'il ne fonctionne pas correctement. • Beschädigungsgefahr durch Überladung des Gerätes. Trennen Sie das Ladekabel nach jedem Ladevorgang vom Stromnetz.

- Stellen Sie die Verwendung des Geräts ein, wenn es beschädigt ist, das elektronische Teil freigelegt ist oder Sie das Gefühl haben, dass es möglicherweise nicht richtig funktioniert.

- Lassen Sie die Hülse immer an der Luft trocknen. Niemals in die Mikrowelle oder ein anderes Haushaltsgerät stellen.

- Laissez toujours le manche à l'air libre. Ne le mettez jamais dans un micro onde ou tout autre appareil ménager.

- Ne placez pas l'appareil sous l'eau.

Mentions légales

Les utilisateurs de MYHIXEL I sont responsables de son utilisation. New Wellness Concept, SL et ses distributeurs déclinent toute responsabilité concernant l'utilisation de MYHIXEL I. Le modèle peut être soumis à des modifications sans justification.

Aucune responsabilité ne saurait être engagée en cas de:

- Non respect des instructions
- Mauvaise utilisation ou utilisation détournée
- Modifications arbitraires
- Modifications techniques
- Utilisation de pièces de rechange non conformes
- Utilisation d'accessoires non conformes

