


VERVE

TENS & EMS THERAPY UNIT

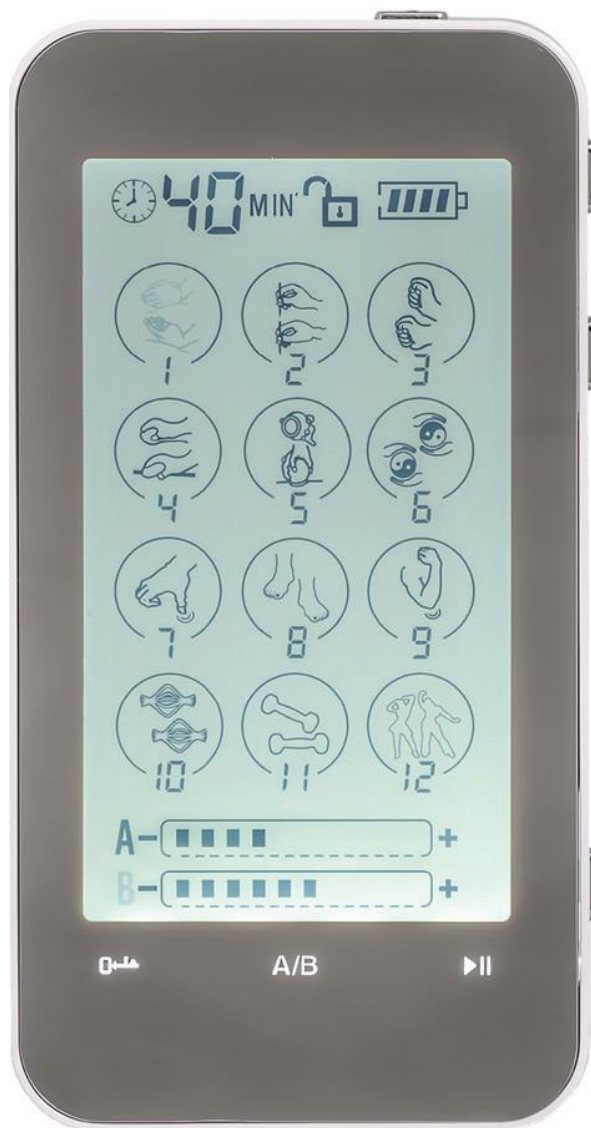

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di usare questo dispositivo.

Tabella dei contenuti

FUNZIONI E CARATTERISTICHE	2
PRINCIPIO	3
INDICAZIONE PER L'USO	4
BENEFICI CHIAVE	5
ACCESSORI.....	6
OPERAZIONE	6
DESCRIZIONI DELLE FUNZIONI DEI PULSANTI	7
DESCRIZIONI DEL MODO.....	9
LINEE GUIDA PER GLI ELETTRODI	12
PRINCIPI DI APPLICAZIONE	13
CARICARE LA BATTERIA	15
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE	15
CURA E MANUTENZIONE.....	16
PRECAUZIONI DI SICUREZZA.....	17
AVVERTENZE	18
REAZIONI AVVERSE	18
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	19
DEFINIZIONI.....	20
SPECIFICHE	21
GARANZIA.....	23

FUNZIONI E CARATTERISTICHE

- Elettroterapia di stimolazione a due canali
- 12 modalità
- 20 impostazioni di intensità
- Grande display LCD retroilluminato
- Timer regolabile fino a 60 minuti
- 4 cuscinetti sul corpo allo stesso tempo
- Batteria al litio ricaricabile di grande capacità
- Funzione di blocco dell'intensità per aiutare a prevenire l'aumento accidentale dell'intensità mentre l'unità è tenuta in tasca o su una cintura.

PRINCIPIO

Soffri di dolore, tensione muscolare, stress o cattiva circolazione?

Questo dispositivo può rilassare rapidamente i muscoli tesi e alleviare il dolore. È un dispositivo di terapia casalinga modern day che utilizza la più recente tecnologia bio-elettrica. È progettato per fornire sensazioni rilassanti e lenitive profonde nelle aree in cui hai bisogno di sollievo. Rilassati, sentiti bene e ringiovanisci il tuo corpo e la tua anima. Non vivere più con una tensione fisica e mentale malsana.

Questo dispositivo TENS EMS/PMS è alimentato da una batteria al litio ricaricabile e si possono applicare 4 pastiglie. Aiuta ad alleviare piccoli dolori nervosi e muscolari. Si compone di due componenti principali, vale a dire, lo stimolatore nervoso elettronico transcutaneo e il muscolo elettronico

Stimolatore/Stimolatore muscolare alimentato che genera i segnali di stimolazione richiesti, e 2 set di cavi con elettrodi adesivi. Questa unità deve essere usata per il sollievo temporaneo del dolore associato a nervi e muscoli doloranti nella parte bassa della schiena, nelle estremità superiori (braccio) e nelle estremità inferiori (gamba) a causa dello sforzo dovuto all'esercizio o alle normali attività lavorative domestiche.

INDICAZIONE PER L'USO

TENS e EMS/PMS:

Da utilizzare per il sollievo temporaneo del dolore associato a nervi e muscoli doloranti nelle spalle, vita, schiena, collo, estremità superiori (braccio), estremità inferiori (gamba). Scegliere le modalità Tens: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12. Scegliere le modalità EMS: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12

Stimolatore muscolare alimentato:

Questo ha lo scopo di stimolare i gruppi muscolari, migliorare la circolazione del sangue. Scegliere le modalità 10 per la costruzione del corpo o 11 per il dimagrimento del corpo.

La modalità 12 è una modalità di combinazione automatica.

BENEFICI CHIAVE

- Ad azione rapida - Anche se il tasso e il grado di risposta varia per gli individui, molti utenti riportano risultati positivi dopo 10-20 minuti di utilizzo.
- Alternativa sana sempre disponibile - Non ci sono droghe o sostanze chimiche coinvolte in questa efficace forma di sollievo dal dolore. Hai accesso a questo sollievo dal dolore 24 ore al giorno, ogni giorno. Puoi usare il dispositivo tutte le volte che vuoi.
- Portatile - Il suo formato tascabile da viaggio vi permette di ricevere il trattamento ovunque a vostro piacimento. - Economico - Il dispositivo vi farà risparmiare tempo e denaro, oltre a migliorare la vostra vita quotidiana.
- Semplice da usare - Dispositivo facile da usare e semplice da utilizzare.
- Terapia a casa - Con l'unità puoi prendere il controllo della tua salute e del tuo benessere e avere accesso alla terapia in qualsiasi momento a casa.
- Regalo della salute - Tutti, giovani e vecchi, soffrono di tensioni muscolari di qualche tipo. Puoi aiutare te stesso e gli altri con il dono della salute e del benessere.
- Sollievo efficace - L'unità fornisce risultati efficaci. La tecnologia avanzata invia più onde elettriche terapeutiche preimpostate attraverso gli elettrodi. Queste onde stimolano la combinazione di tecniche di sollievo dal dolore dei tessuti profondi e vari movimenti muscolari, alleviando la tensione muscolare.


ACCESSORI

- Unità di controllo
- 1 set di piccoli elettrodi adesivi monofacciali (1,6 pollici per 1,2 pollici)
- 1 set di grandi elettrodi adesivi monofacciali (3 pollici per 1,9 pollici)
- 1 set di elettrodi adesivi monofacciali X-Large (2 pollici per 4 pollici)
- Filo a 2 elettrodi con 2 derivazioni
- 1 manuale d'istruzioni per l'uso
- Prolunga USB
- Adattatore AC/DC
- Tabella dei punti di agopuntura di applicazione
- 1 pezzo supporto per pad




OPERAZIONE

1. L'unità potrebbe aver bisogno di essere caricata per circa un'ora prima del primo utilizzo e quando il livello della batteria è basso.
2. Collegare il filo alla porta di uscita nella parte superiore dell'unità.
3. Collegare una coppia di pad a un filo doppio facendoli scattare.
4. Rimuovere la pellicola protettiva e posizionare i due cuscinetti sul muscolo, assicurandosi che entrambi i cuscinetti siano sulla pelle e non si sovrappongano.
5. Accendere l'unità tramite l'interruttore on/off.
6. Quando avete acceso l'unità, essa si avvia in modalità 1.
7. Per cambiare le modalità, premere il pulsante M. Una volta selezionata una modalità, aumentare gradualmente l'intensità premendo il pulsante "+" (vedi schema #9). Per diminuire l'intensità, premere il pulsante "-" (vedi diagramma #10).
8. Per impostare il tempo, premere il pulsante T da 10 minuti fino a 60 minuti. L'impostazione predefinita del tempo è impostata su 20 minuti.

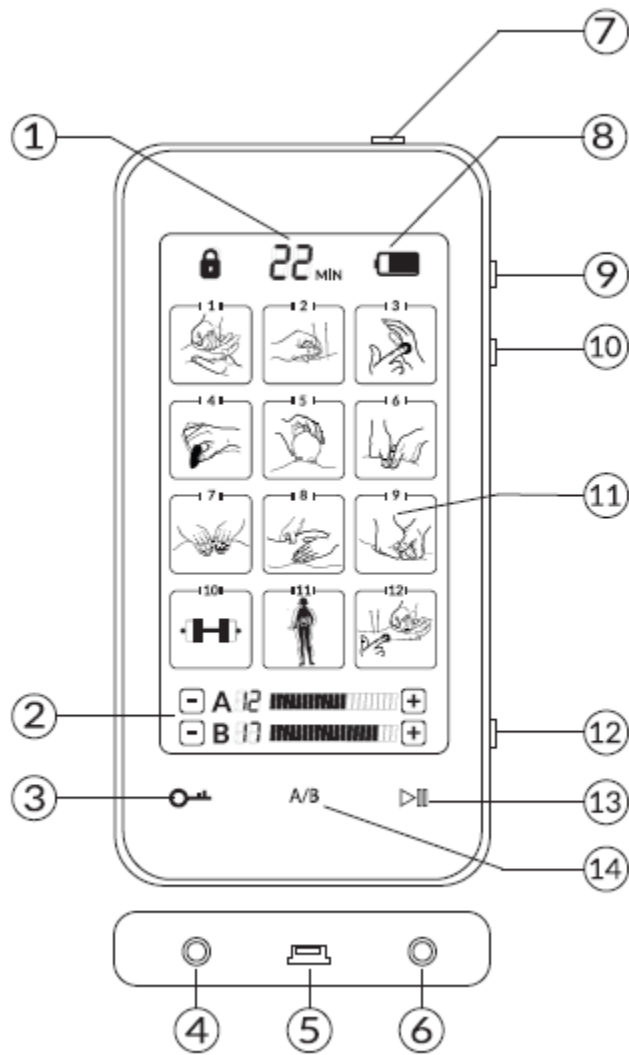DESCRIZIONI DELLE FUNZIONI DEI PULSANTI



DESCRIZIONI DELLE FUNZIONI DEI PULSANTI

1. 22MIN Impostazione del tempo: Toccare l'icona del tempo per regolare il tempo a 10, 20, 30, 40 50 o 60 minuti.
2. A B Uscita A o B Pulsante Shift: Toccare l'icona A per passare da A a B o toccare l'icona B per passare da B ad A.
3.  Icona del blocco di sicurezza: premere il tasto una volta per bloccare lo schermo e disabilitare la funzione touch screen; premere di nuovo per sbloccare lo schermo e abilitare la funzione touch screen. Quando è bloccato, l'icona 22MIN lampeggia.
4. Uscita A.
5. Porta USB per caricare la batteria.
6. Uscita B.
7. Pulsante ON/OFF: Tenere il pulsante on/off per 6 secondi per accendere/spegnere il dispositivo.
8. Indicatore del livello della batteria 
9. Pulsante di aumento dell'intensità: 10 bar/20 livelli di intensità regolabili. Premere il pulsante intensità + una volta per aumentare di 1 livello. Premere 1-20 volte per aumentare l'intensità fino al livello più alto 20.
10. Pulsante di diminuzione dell'intensità: 10 bar/20 livelli di intensità regolabili. Premere il pulsante intensità - una volta per diminuire di 1 livello. Premere 1-20 volte per diminuire l'intensità fino al livello più basso 0.
11. Impostazione della modalità: Qualsiasi icona di 12 modalità terapeutiche può essere selezionata sul touch screen.
12. Pulsante di impostazione dell'ora.
13.  Pulsante Pausa: Mettere in pausa tutte le funzioni.
14. Pulsante di spostamento dell'uscita A/B.

DESCRIZIONI DEL MODO

- Ti suggeriamo di sperimentare inizialmente ognuna delle modalità. La modalità o la combinazione di modalità che ti dà le sensazioni e il comfort più desiderabili è quella più appropriata per te da usare.
- L'intensità dovrebbe essere impostata a un livello in cui si sentirà qualche vibrazione muscolare e movimenti muscolari involontari. Dovrebbe essere impostata per dare un'intensità "confortevole" e non dovrebbe essere dolorosa.
- Il tempo di applicazione dovrebbe essere di almeno 10-20 minuti.
- La frequenza dell'applicazione dovrebbe essere da una a tre volte al giorno.

DESCRIZIONI DEL MODO

Modo	Nome	Descrizione	Funzionalità
1	Tui Na	La simulazione Tui Na è un trattamento manuale del corpo che apre il flusso del Qi attraverso i meridiani.	È particolarmente efficace per i dolori articolari, la sciatica, gli spasmi muscolari e il dolore alla schiena, al collo e alle spalle. Tui Na aiuta anche le condizioni croniche come l'insonnia, la costipazione, il mal di testa e la tensione associata allo stress.
2.	Agopuntura	La simulazione dell'agopuntura fornisce la stessa sensazione senza aghi, utilizzando impulsi elettronici per ottenere la sensazione di diverse profondità dell'ago.	Stimolando specifici punti di agopuntura, corregge gli squilibri nel flusso del Qi attraverso canali conosciuti come meridiani. Si prega di leggere la tabella di agopuntura
3.	Toccando	La simulazione del picchietto ha lo scopo di produrre una dura sensazione di battito che manda un messaggio ai tuoi muscoli, il che può darti una sensazione rinvigorita e rivitalizzata.	È particolarmente efficace per il rilassamento muscolare.
4.	Gua Sha	La simulazione del Gua Sha con un'impostazione a bassa frequenza fornisce all'utente una sensazione di graffio e impastamento. Gua Sha rilascia elementi malsani dalle aree ferite e stimola il flusso di sangue e la guarigione.	Gua Sha è efficace nei disturbi acuti e cronici degli organi interni. I pazienti possono vedere un sollievo immediato dal dolore, dalla rigidità, dalla febbre, dal freddo, dalla tosse, dal respiro sibilante, dalla nausea e dal vomito, ecc.
5.	Coppettazione	Simulando la coppettazione, la stimolazione relativamente costante contrae i muscoli.	La coppettazione è usata per alleviare i dolori alla schiena e al collo, i muscoli rigidi, l'ansia, l'affaticamento, le emicranie, i reumatismi, e anche la riduzione della cellulite, ecc.
6.	Shiatsu	Simulando lo Shiatsu, è un tipo di medicina alternativa che consiste nella pressione delle dita e dei palmi, stiramenti e altre tecniche di massaggio.	Lo Shiatsu può aiutare a facilitare la guarigione da molti disturbi minori. Da mal di testa e mal di schiena a problemi digestivi, sinusali e della pelle.
7.	Pressione	È la manipolazione degli strati superficiali e più profondi del muscolo e del tessuto connettivo utilizzando varie tecniche.	Può migliorare la funzione, aiutare il processo di guarigione, diminuire l'attività dei riflessi muscolari, inibire l'eccitabilità dei motoneuroni, promuovere il rilassamento e il benessere, e come attività ricreativa.

8.	Dolore alla schiena	Usa le vibrazioni a bassa frequenza per promuovere la circolazione del sangue e alleviare il dolore.	Da usare specificamente per la parte bassa della schiena.
9.	Massaggio del tessuto profondo	La terapia di massaggio dei tessuti profondi è simile al massaggio svedese, ma la stimolazione della pressione più profonda è utile per rilasciare la tensione muscolare cronica.	Il messaggio del tessuto profondo può fornire sollievo dal dolore e dalla rigidità associati a lesioni sportive, colpi di frusta, osteoartrite, spasmi muscolari, fibromialgia e lesioni da sforzo come la sindrome del tunnel carpale.
10.	Costruzione del corpo	L'applicazione di corrente elettrica ai muscoli provoca la contrazione dei muscoli. Stimolando i muscoli ripetutamente con l'elettricità si può alla fine ottenere dei muscoli che vengono rafforzati e tonificati in una certa misura.	La stimolazione muscolare elettrica aiuta la riduzione dei muscoli, il rilassamento degli spasmi muscolari, l'aumento della gamma di movimento, il recupero delle lesioni e il recupero post-operatorio.
11.	Perdita di peso	Combinazione di agopuntura e altre forme d'onda.	Aiuta a perdere peso, a tonificare, rassodare e rafforzare i muscoli degli addominali, della schiena, delle cosce, delle braccia, ecc.
12.	Combinazione	Combinazione automatica di diverse modalità per il relax	Rilassamento completo del corpo dopo l'allenamento: esercizi e fitness o dopo una giornata di duro lavoro.

LINEE GUIDA PER GLI ELETTRODI

1. Utilizzare solo gli elettrodi forniti dal produttore.
2. Non utilizzare gli elettrodi su persone diverse. Ogni utente deve avere il proprio set.
3. Spegnerne sempre l'alimentazione prima di rimuovere o riposizionare gli elettrodi.
4. Lavare accuratamente la pelle e poi asciugarla prima di applicare gli elettrodi, si raccomanda di usare tamponi di alcol o alcol. Posizionare gli elettrodi sulla pelle assicurandosi che siano distanti almeno 2 cm l'uno dall'altro.
5. Applicare l'intera superficie degli elettrodi saldamente alla pelle. Non utilizzare elettrodi che non aderiscono correttamente alla pelle o che vi aderiscono solo parzialmente.
6. In caso di arrossamento della pelle sotto gli elettrodi dopo la stimolazione, non utilizzare nuovamente nella stessa area se il rossore della pelle è ancora evidente.
7. Si raccomanda di usare i cuscinetti più grandi per le aree più grandi come le spalle, la vita, l'addome e i muscoli delle gambe. Usare i cuscinetti piccoli per le aree più piccole come i muscoli dell'avambraccio, le articolazioni, ecc.

PRINCIPI DI APPLICAZIONE

1. Trova il punto esatto del dolore: Posizionare i cuscinetti su questa posizione. La tabella di agopuntura può anche servire da guida per il posizionamento dei tamponi specifici per ogni disturbo.
2. Regolare l'intensità gradualmente. È più efficace raggiungere il livello di intensità più alto che puoi sopportare.
3. La durata dell'applicazione raccomandata è di 2-3 volte al giorno per 40-60 minuti per applicazione, su 10 giorni per un corso.
4. I pad possono essere posizionati in due modi:
 - Modalità Twin - con i 2 pad uno accanto all'altro sullo stesso lato del corpo e in prossimità l'uno dell'altro.
 - Modalità opposta - con i 2 pad su un punto simile ma su entrambi i lati del corpo, cioè la spalla anteriore e posteriore.



PARTE INFERIORE DELLA SCHIENA

Modalità 1,4,5,6,7, 10, 11



Modalità SCIATICHE

1,2,3,4,5



DELTOIDE

Attaccare un cuscinetto davanti e uno dietro al muscolo.

Modalità 2,3,4



BRACCIO SUPERIORE

Attacca entrambi i cuscinetti su entrambi i lati della regione dove senti dolore.

Modalità 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10



ELBOW

Attaccare entrambi i cuscinetti su entrambi i lati dell'articolazione con il dolore.


Modalità 1,2,3,4,6,7,9,11



FIANCHI E COSCE

Attaccare entrambi i cuscinetti su entrambi i lati dell'area con dolore.

Modalità 1,2,3,4,6,7

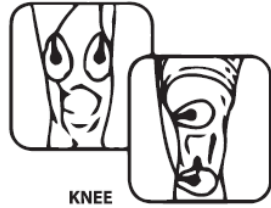


KNEE

KNEE

Attaccare entrambe le pastiglie sopra il ginocchio o sopra e sotto l'articolazione con dolore.

Modalità 1,2,3,4,6,7,9,11

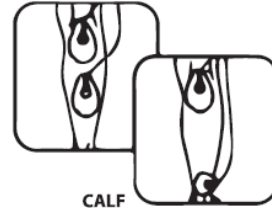


CALF

VITELLO

Fissare entrambi i pad sul polpaccio/gamba dove si sente il dolore. (Non posizionare gli elettrodi adesivi contemporaneamente sui polpacci di entrambe le gambe).


Modalità 1,2,4,5,6

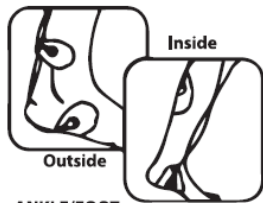

CAVIGLIA/PIEDE

Attaccare i cuscinetti secondo l'illustrazione, a sinistra per il dolore all'esterno della caviglia/piede. Attaccare i cuscinetti per il dolore all'interno della caviglia/piede

Modalità 1,2,3,6,7,12

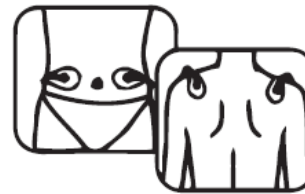

ABS/SPALLE

Modalità 1,4,5,6

CARICARE LA BATTERIA

- L'unità ha una batteria interna al litio ricaricabile che può essere caricata attraverso una presa a muro standard o attraverso la porta USB del computer.
- L'unità potrebbe anche aver bisogno di essere caricata se lo schermo è poco luminoso, le sensazioni sono deboli o se il display sullo schermo non appare all'accensione.
- Normalmente ci vogliono circa 4 ore per caricare la batteria.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Temperatura di stoccaggio:

- Da 20°C a 60°C, da -4°F a 140°F

Umidità relativa massima: 80%

Pressione atmosferica: da 80KPa a 105KPa

Evitare la conservazione ad alta temperatura, alta umidità o luce solare diretta.

CURA E MANUTENZIONE

1. Assicurati che la tua pelle sia priva di sporcizia, olio o lozioni.
2. Prima di applicare i tamponi, mettete qualche goccia d'acqua sulle dita e strofinatele su entrambi i tamponi. Questo aiuterà i cuscinetti a mantenere la loro adesività. Quando avete finito di usare l'unità, spegnetela.
3. Togliete le imbottiture.
4. Non raschiare. Non pulirlo con un panno o un tovagliolo. Non lavare con detersivo o acqua calda.
5. Lavare leggermente i tamponi, asciugarli e rimettere la pellicola protettiva sui tamponi o mettere i tamponi sul porta tamponi.
6. Togliete il filo dal dispositivo e rimettetelo nella scatola insieme all'unità fino al prossimo utilizzo.
7. Conservare l'unità in un luogo fresco e asciutto.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Si prega di utilizzare sotto la guida del proprio medico.
- Non usare questa unità vicino ad apparecchiature per la terapia a onde corte, la sua uscita potrebbe essere instabile.
- Non utilizzare gli elettrodi adesivi vicino al cuore.
- Si prega di smettere di usare immediatamente se si sente il corpo o lo strumento anormale.
- Il tempo di trattamento non dovrebbe superare i 60 minuti.
- Se si sposta, rimuove o cambia la posizione degli elettrodi adesivi, si prega di spegnerlo prima.
- Non usare il dispositivo se hai una delle seguenti condizioni mediche:
 1. Un pacemaker cardiaco impiantato, un defibrillatore o un altro dispositivo metallico o elettronico impiantato.
 2. Non usare in caso di gravidanza.
 3. Avere l'epilessia.

Si raccomanda di consultare il proprio medico prima dell'uso se si:

1. Gli è stato diagnosticato un cancro.
2. Hanno subito un trauma acuto o una recente procedura chirurgica.
3. Avere problemi cardiaci o malattie cardiache.
4. Avere un'ernia addominale.
5. Avere una trombosi venosa.

Questo dispositivo è destinato all'uso da parte di adulti, ma l'uso sui bambini è possibile, ma dovrebbe avvenire solo sotto la supervisione di un adulto.

AVVERTENZE

1. La stimolazione non deve essere applicata direttamente sulle tempie, sugli occhi, compresa la bocca, sulla parte anteriore del collo (specialmente il seno carotideo), o posta sul torace e la parte superiore della schiena o passando attraverso il cuore.
2. Non usarlo sui genitali o sulla pelle lesionata.
3. Applicare gli elettrodi adesivi solo su pelle normale, intatta e pulita. Non applicare su ferite aperte o su aree gonfie o infette.
4. Non utilizzare mai il dispositivo durante la guida, l'uso di macchinari o durante attività in cui le contrazioni muscolari involontarie possono mettere in pericolo gli altri.
5. Non utilizzare il dispositivo nella vasca da bagno o nella doccia.
6. Non immergere mai il dispositivo in nessun liquido.
7. Non usare mai il dispositivo mentre si dorme.
8. Questo dispositivo deve essere usato solo con gli accessori forniti dal produttore.
9. Non smontare o riparare il dispositivo da soli.
10. Tenere lontano da TV, radio e altre apparecchiature elettroniche

REAZIONI AVVERSE

Se si verificano irritazioni della pelle, bruciature sotto gli elettrodi adesivi applicati alla pelle o qualsiasi altra reazione avversa, il trattamento deve essere interrotto immediatamente. Dovresti consultare il tuo medico per un ulteriore utilizzo del dispositivo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1Q: L'unità non si accende o non riesco a vedere nulla sullo schermo.

R: Assicurati che l'unità sia stata completamente caricata.

2Q: L'unità non sembra caricarsi:

A:

- Assicuratevi che il cavo USB sia saldamente inserito nell'unità da un lato e inserito nell'adattatore AC nella presa elettrica dall'altro lato.
- Isolare se c'è un problema con il cavo USB o l'adattatore CA collegando il cavo USB dall'unità a una porta USB di un computer.

3Q: L'unità è accesa, ma non sento nessuna sensazione dai cuscinetti:

A:

- Controllare che i cavi siano saldamente posizionati nella porta dell'unità e saldamente agganciati ai pad conduttivi.
- Assicuratevi di usare 2 cuscinetti per un filo, altrimenti non ci sarà corrente elettrica.
- Assicurarsi che i 2 pad siano posizionati in prossimità l'uno dell'altro, cioè non su arti diversi o troppo distanti.

4Q: L'apparecchio è acceso, ma non sento nessuna sensazione nei miei piedi:

R: Potrebbe essere necessario impostare l'unità su un livello molto più alto per sentire la sensazione nei piedi, soprattutto se si ha una cattiva circolazione o danni ai nervi.

5Q: Solo una porta dell'unità funziona:

R: Isolate il problema provando un altro cavo e un set di pastiglie che sapete che funzionano nella porta problematica.

6Q: Un pad sembra più forte dell'altro:

R: Questo è normale perché diverse aree del corpo reagiscono in modo diverso, basta assicurarsi che i cuscinetti stiano facendo un buon contatto.

7Q: Durante l'uso, la pelle sente una sensazione di bruciore doloroso o la stimolazione si è indebolita:

A:

- Assicurarsi che i cuscinetti di gel adesivo aderiscano saldamente, questo è importante.
- Controllate che le pastiglie non siano troppo secche e che non debbano essere sostituite.

DEFINIZIONI

Cos'è un'unità Tens?

TENS è l'acronimo di (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) che sono usati prevalentemente per condizioni di dolore legate ai nervi (condizioni acute e croniche). Le macchine TENS funzionano inviando impulsi stimolanti attraverso la superficie della pelle e lungo i filamenti nervosi. Utilizza una corrente elettrica a bassa tensione per alleviare il dolore. Può aiutare in molte aree del corpo come il dolore alla schiena e al collo che può essere causato da un trauma o da uno sforzo continuo. Il corpo risponde a tale dolore o lesione con la protezione muscolare, un tentativo di immobilizzare l'area dolorosa stringendo i muscoli che circondano la lesione. La protezione muscolare compromette la circolazione nell'area interessata.

La diminuzione dell'apporto di sangue porta a una diminuzione del metabolismo con un accumulo di prodotti di scarto. La terapia TENS può aiutare a rompere questo ciclo di dolore e aiutare il normale processo di guarigione. Inoltre, gli impulsi stimolanti aiutano a evitare che i segnali di dolore raggiungano il cervello. I dispositivi TENS aiutano anche a stimolare il corpo a produrre livelli più alti dei propri antidolorifici naturali, chiamati "endorfine".

DEFINIZIONI

Cos'è un dispositivo EMS?

E.M.S. sta per (Electrical Muscle Stimulation) che sono usati prevalentemente per prevenire o ridurre l'atrofia muscolare. L'atrofia è l'indebolimento e la perdita di tono muscolare, che di solito si verifica dopo interventi chirurgici o lesioni. È stato dimostrato che l'EMS è un mezzo efficace per prevenire l'atrofia muscolare. L'EMS aiuta anche ad aumentare il flusso di sangue ai muscoli, ad aumentare la gamma di movimento, ad aumentare la forza muscolare e a migliorare la resistenza muscolare. L'EMS ha attributi di gestione del dolore per aiutare il dolore legato ai muscoli, come un muscolo spastico, muscoli doloranti o muscoli tesi.

SPECIFICHE

Nome: Dispositivo Tens/EMS

Tipo : VERVE (TE2017)

Alimentazione: 5V

Potenza in ingresso: AC 110~240V

Frequenza di impulso: 0~75HZ

Larghezza d'impulso: 78us

Max. Corrente di uscita: 0-55V

Umidità della temperatura di funzionamento: <85%

Umidità della temperatura di trasporto e conservazione: -4-104F (-20-40C)

Peso netto dell'unità: 94g

Dimensione dell'unità: 125*65*12.2mm

Frequenza e larghezza d'impulso dal 20% al 20%

No	Modo	Resistenza 500R onda piena (VPP)	Frequenza massima (Hz)	Larghezza d'impulso (USA)
1	Modo 1	100	50	100 STATI UNITI
2	Modo 2	200	11.5	100 STATI UNITI
3	Modo 3	220	1.1	100 STATI UNITI
4	Modo 4	85.6	66	100 STATI UNITI
5	Modo 5	22.8	72	100 STATI UNITI
6	Modo 6	160	67	100 STATI UNITI
7	Modo 7	100	50	100 STATI UNITI
8	Modo 8	76	72	100 STATI UNITI
9	Modo 9	162	65	100 STATI UNITI
10	Modo 10	200	75	100 STATI UNITI
11	Modo 11	102	67	100 STATI UNITI
12	Modo 12	220	75	100 STATI UNITI

GARANZIA

Garanzia (1 anno limitato)

Per la vostra sicurezza e per evitare qualsiasi danno alla proprietà, vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale e di utilizzarlo come indicato. La garanzia del produttore è nulla nelle seguenti circostanze, ma non solo:

1. Manutenzione o modifiche improprie o inadeguate
2. Incidente, uso improprio, abuso, contaminazione o altre cause esterne
3. L'uso di adattatori e accessori non specificati
4. Perdita o danno in transito
5. Danni che si verificano a causa del mancato rispetto delle istruzioni

Questa garanzia non si applica alle parti sacrificabili o di consumo e non si estende a qualsiasi prodotto dal quale sia stato rimosso il numero di serie.

Salva queste istruzioni

Garanzia limitata di un (1) anno dalla data di acquisto Massage Therapy Concepts garantisce questo prodotto contro i difetti dei materiali e/o della lavorazione in condizioni di uso normale per un periodo di UN (1) ANNO dalla data di acquisto da parte dell'acquirente originale ("Periodo di garanzia"). Se si verifica un difetto e viene ricevuto un reclamo valido entro il Periodo di Garanzia, a sua scelta, Massage Therapy Concepts 1) riparerà il difetto senza alcun costo, utilizzando parti di ricambio nuove o rinnovate, o 2) sostituirà il prodotto con un nuovo prodotto che sia almeno funzionalmente equivalente al prodotto originale. Un prodotto o una parte sostitutiva, compresa una parte installabile dall'utente installata secondo le istruzioni fornite da Massage Therapy Concepts, assume la garanzia rimanente del prodotto originale. Quando un prodotto o una parte viene sostituito, qualsiasi articolo sostitutivo diventa di tua proprietà e l'articolo sostituito diventa di proprietà di Massage Therapy Concepts.

Ottenere l'assistenza: Per ottenere il servizio di garanzia, inviare un'e-mail a Massage Therapy Concepts Limited Warranty Service all'indirizzo Support@MassageTherapyConcepts.com. È necessaria una ricevuta d'acquisto. Tutte le riparazioni e le sostituzioni devono essere autorizzate in anticipo. Le opzioni di assistenza, la disponibilità delle parti e i tempi di risposta variano. L'utente è responsabile della consegna e dei costi di spedizione del prodotto o di qualsiasi parte al centro di assistenza autorizzato Massage Therapy Concepts per la sostituzione, secondo le nostre istruzioni.

Limiti ed esclusioni: La copertura di questa Garanzia Limitata è limitata agli Stati Uniti d'America, compreso il Distretto di Columbia e i territori statunitensi di Guam, Porto Rico e Isole Vergini Americane. Questa Garanzia Limitata si applica solo ai prodotti fabbricati per Massage Therapy Concepts che possono essere identificati dal marchio, nome commerciale o logo "Massage Therapy Concepts" apposto su di essi o sulla loro confezione. La garanzia limitata non si applica a nessun prodotto non di Massage Therapy Concepts. Produttori o fornitori diversi da Massage Therapy Concepts possono fornire le proprie garanzie all'acquirente, ma Massage Therapy Concepts, nella misura consentita dalla legge, fornisce questi prodotti "così come sono" Questa garanzia non si applica a: a) danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni relative all'uso del prodotto o all'installazione dei componenti; b) danni causati da incidenti, abuso, uso improprio, incendio, inondazioni, terremoto o altre cause esterne; c) danni causati da un servizio eseguito da chiunque non sia un rappresentante di Massage Therapy Concepts; d) accessori usati insieme ad un prodotto coperto; e) un prodotto o una parte che è stata modificata per alterare la funzionalità o la capacità; f) elementi destinati ad essere sostituiti periodicamente dall'acquirente durante la normale vita del prodotto

compresi, senza limitazione, batterie o lampadine; g) qualsiasi prodotto venduto "così com'è" compresi, senza limitazione, modelli dimostrativi e articoli rinnovati, o h) un prodotto che viene utilizzato commercialmente o per uno scopo commerciale.

MASSAGE THERAPY CONCEPTS NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI RISULTANTI DALL'USO DI QUESTO PRODOTTO O DERIVANTI DA QUALSIASI VIOLAZIONE DI QUESTA GARANZIA. NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, MASSAGE THERAPY CONCEPTS NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA LEGALE O IMPLICITA, INCLUSE, SENZA LIMITAZIONE, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE E GARANZIE CONTRO DIFETTI NASCOSTI O LATENTI. SE MASSAGE THERAPY CONCEPTS NON PUÒ DISCONOSCERE LEGALMENTE LE GARANZIE LEGALI O IMPLICITE, ALLORA, NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, TUTTE QUESTE GARANZIE SARANNO LIMITATE ALLA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA ESPLICITA.

Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali o la durata di una garanzia implicita, quindi le suddette esclusioni o limitazioni potrebbero non applicarsi a voi. Questa garanzia vi dà diritti legali specifici e potreste anche avere altri diritti, che variano da stato a stato.



**Concetti di terapia di massaggio
Chatham, NJ
USA**