

Walk with confidence™

How to ensure the perfect fit

Folding walkers are designed to help a person remain independent and mobile by providing assistance in walking. Carex® offers several styles of folding walkers and accessories for easy mobility, maneuvering, and convenience.

WALKERS WITH WHEEL ATTACHMENTS

Turn a folding walker into wheeled walker for those who have difficulty lifting the weight of the walker.

WEIGHT CAPACITY: 300 lb

Français

Marcher avec confiance™

Comment assurer l'ajustement parfait

Les marchettes pliables sont conçues pour aider les gens à rester indépendants et mobiles en leur fournissant de l'aide pour marcher. Carex® offre plusieurs styles de marchettes pliables et d'accessoires pour une meilleure mobilité, une meilleure manœuvre et commodité.

MARCHETTES AVEC DES ACCESSOIRES DE ROUES

La marchette pliable devient une marchette sur roues pour les gens qui ont de la difficulté en soulevant le poids de la marchette.

CAPACITÉ DE POIDS: 136 kg

Español

Caminar con confianza™

Cómo asegurar el ajuste perfecto

Al proporcionarle cierto nivel de asistencia para caminar, el andador ayuda al usuario a moverse y permanecer independiente. La marca Carex® ofrece diversos estilos de andadores y una amplia variedad de accesorios para facilitar la maniobrabilidad y lograr mayor comodidad.


Andadores con accesorio para inserción de ruedas convierten el andador plegable en un andador rodante cuando la persona tiene dificultad para levantar el peso.

RESISTENCIA: 136 kg

HOW TO DETERMINE PROPER HEIGHT ADJUSTMENT

1. Extended arm forward at 30 degree bend at elbow. Measure from handgrip to the floor to determine walker height.
2. Adjust leg pin positions to match required height adjustment.

TIP REPLACEMENT - Check tips periodically and replace if worn

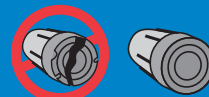

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR


1. Étendre le bras en avant en le pliant au coude à un angle de 30 degrés. Mesurer à partir de la poignée jusqu'au sol pour déterminer la hauteur de la marchette.
2. Ajuster les positions des goupilles des pattes pour le faire concorder avec l'ajustement de la hauteur.

REPLACEMENT DES EMBOUTS - Réviser les embouts périodiquement et les remplacer s'ils sont usés

AJUSTE DE LA ALTURA

1. Extender el brazo hacia adelante con el codo doblado a un ángulo de 30 grados. Medir desde la empuñadura hasta el piso para determinar la altura del caminador.
2. Ajustar la posición de los pasadores de las patas para que concuerde con el ajuste de la altura necesario.

REEMPLAZO DE LOS REGATONES - Revisar periódicamente los regatones y reemplazarlos si están desgastados

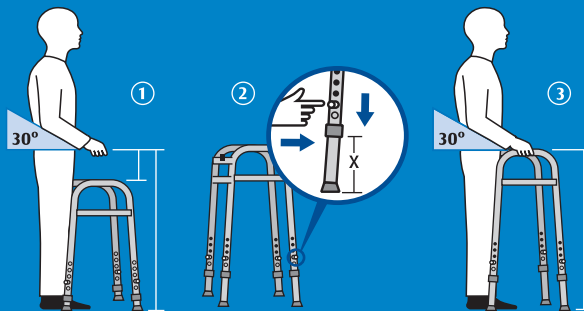

Medicare (U.S. Only): HCPCS Codes

E0135 Walker, Folding without Wheels
E0143 Walker, Folding with Wheels **E0148** Walker, Heavy Duty