


# WANDBEUGEL 45 & 90 GRADEN

Barre d'appui  
 murale 45 et 90  
 degrés

Wall Grab Rail,  
 45 & 90 degrees

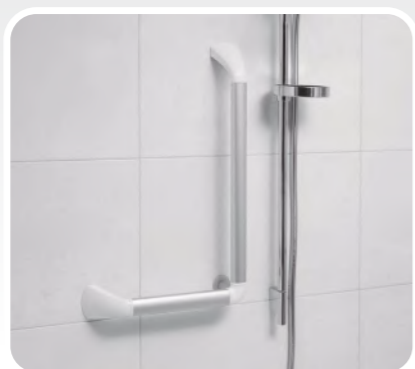

Onderdelen lijst 45 graden.  
 Liste de pièces détachées 45 degrés.  
 Onderdelen lijst 45 graden.



Onderdelen lijst 90 graden LI & Re.  
 Liste de pièces détachées 90 degrés D et G.  
 Parts list, 90 degrees left & right.



fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4



fig. 5



fig. 6

## NL

### Benodigd gereedschap:

- Boor/schroefmachine
- Steenboor 8 en 10 mm
- Inbussleutel 6 mm
- Dopje nr 10 (aandrijving schroefmachine of ratel)
- Schroevendraaier Pozidrive
- Optioneel ijzerzaag / smeervet

### Onderdelen lijst

#### 45 graden:

- 2 greep delen aluminium 231 mm
- 2 montage voeten grijs
- 2 afdekkappen wit
- 2 afsluitringen
- 1 koppelstuk grijs 45 graden
- 1 afdekkapje wit
- 1 aluminium voet rond
- 6 RVS spaanplaatschroeven 5x40
- 6 pluggen diam. 8 mm (tbv steen)
- 1 RVS inbusbout M8 x 60 mm
- 1 tandveerring diam 8 mm
- 1 Fischer MS Plug M8 (tbv steen)
- 3 Tapitte RVS zeskant (nr. 10)
- 2 Tapitte RVS Pozidrive

### Onderdelen lijst 90 graden LI & Re:

- 1 greep deel aluminium 231 mm
- 1 greep deel aluminium 431 mm
- 2 montage voeten grijs
- 2 afdekkappen wit
- 2 afsluitringen
- 1 koppelstuk grijs 90 graden
- 1 afdekkapje wit
- 1 aluminium voet rond
- 6 RVS spaanplaatschroeven 5x40
- 6 pluggen diam. 8 mm (tbv steen)
- 1 RVS inbusbout M8 x 60 mm
- 1 tandveerring diam 8 mm
- 1 Fischer MS Plug M8 (tbv steen)
- 3 Tapitte RVS zeskant (nr. 10)
- 2 Tapitte RVS Pozidrive

**Let op: de wandbeugel krijgt pas zijn volledige sterkte wanneer deze aan de wand gemonteerd is, bij het assembleren is dan ook enige voorzichtigheid geboden.**

1. Controleer de inhoud van de verpakking.
2. Plaats de witte afsluitringen over de montage voeten en bevestig deze aan de aluminium greep delen m.b.v. de meegeleverde Tapitte schroeven (zeskant uitvoering). Goed vastzetten! (fig. 1)
3. Plaats de voor gemonteerde greep delen in het koppelstuk 45 of 90 graden. (fig. 3)
4. Bepaal nu op de voorziene montage plek of een van de aluminium greep delen moet worden ingekort. Let op bepaal bij de 90 graden variant of u een linker of rechter variant nodig heeft, links (fig. 4), of rechts (fig. 5).
5. Indien de greep delen niet hoeven te worden ingekort ga naar punt 7
6. Inkorten greep delen: Bepaal de gewenste lengte en kort af met een goede metaal zaag. (fig. 6).

## F

### Outils nécessaires :

- Percuseuse/visseuse
- Foret à pierre 8 et 10 mm
- Clé six pans 6 mm
- Douille n° 10 (entraînement de visseuse ou cliquet)
- Tournevis Pozidrive
- Scie à métaux / graisse en option

### Liste de pièces détachées

#### 45 degrés :

- 2 éléments de poignée aluminium 231 mm
- 2 pieds de montage gris
- 2 capuchons de protection blanc
- 2 bagues de fermeture
- 1 raccord gris 45 degrés
- 1 capuchon de protection blanc
- 1 pied aluminium rond
- 6 vis inox pour aggloméré 5x40
- 6 chevilles diam. 8 mm (pour pierre)
- 1 boulon six pans inox M8 x 60 mm
- 1 rondelle dentée diam. 8 mm
- 1 cheville Fischer MS M8 (pour pierre)
- 3 vis Tapitte inox tête hexagonale (n° 10)
- 2 vis Tapitte inox Pozidrive

### Liste de pièces détachées 90 degrés D et G :

- 1 élément de poignée aluminium 231 mm
- 1 élément de poignée aluminium 431 mm
- 2 pieds de montage gris
- 2 capuchons de protection blancs
- 2 bagues de fermeture
- 1 raccord gris 90 degrés
- 1 capuchon de protection blanc
- 1 pied aluminium rond
- 6 vis inox pour aggloméré 5x40
- 6 chevilles diam. 8 mm (pour pierre)
- 1 boulon six pans inox M8 x 60 mm
- 1 rondelle dentée diam. 8 mm
- 1 cheville Fischer MS M8 (pour pierre)
- 3 vis Tapitte inox tête hexagonale (n° 10)
- 2 vis Tapitte inox Pozidrive

**Attention : la barre d'appui murale n'obtient sa résistance totale qu'une fois montée sur le mur ; par conséquent, il convient d'observer une certaine prudence lors de l'assemblage.**

1. Contrôlez le contenu de l'emballage pour vérifier si tout est complet.
2. Placez les bagues de fermeture blanches sur les pieds de montage et fixez-les sur les éléments de poignée en aluminium au moyen des vis Tapitte accompagnant le produit (version hexagonale). Bien serrer ! (fig. 1)
3. Placez les éléments de poignée prémontrés dans le raccord 45 ou 90 degrés. (fig. 3)
4. À présent, déterminez sur le lieu de montage prévu si un des éléments de poignée en aluminium doit être raccourci. Attention : pour la variante 90 degrés, déterminez si vous avez besoin d'une variante gauche (fig. 4) ou droite (fig. 5).
5. S'il est inutile de raccourcir les éléments de poignée, passez au point 7
6. Raccourcissement des éléments de poignée : Déterminez la longueur souhaitée et raccourcissez à l'aide d'une scie à métaux appropriée (fig. 6).

## GB

### Required tools :

- Electric drill/screwdriver
- Masonry drill, 8 and 10 mm
- Allen key, 6 mm
- Cap no. 10 (for driving electric drill or ratchet)
- Pozidrive screwdriver
- Optional hacksaw / lubricating grease

### Parts list, 45 degrees:

- 2 grip sections, aluminium 231 mm
- 2 mounting legs, grey
- 2 covers, white
- 2 sealing rings
- 1 coupling piece, grey 45 degrees
- 1 cover, white
- 1 aluminium foot, round
- 6 SS chipboard screws, 5x40
- 6 plugs, diam. 8 mm (for masonry)
- 1 SS Allen bolt, M8 x 60 mm
- 1 serrated lock washer, diam. 8 mm
- 1 Fischer MS Plug M8 (for masonry)
- 3 Tapitte SS hexagonal (no. 10)
- 2 Tapitte SS Pozidrive

### Parts list, 90 degrees left & right:

- 1 grip section, aluminium 231 mm
- 1 grip section, aluminium 431 mm
- 2 mounting legs, grey
- 2 covers, white
- 2 sealing rings
- 1 coupling piece, grey 90 degrees
- 1 cover, white
- 1 aluminium foot, round
- 6 SS chipboard screws, 5x40
- 6 plugs, diam. 8 mm (for masonry)
- 1 SS Allen bolt, M8 x 60 mm
- 1 serrated lock washer, diam. 8 mm
- 1 Fischer MS Plug M8 (for masonry)
- 3 Tapitte SS hexagonal (no. 10)
- 2 Tapitte SS Pozidrive

**Note: the wall grab rail will not attain its full strength until mounted on the wall; therefore caution is advised during assembly.**

1. Check the contents of the packaging to see if everything is complete.
2. Place the white sealing rings over the mounting legs and attach them to the aluminium grip sections using the supplied Tapitte screws (hexagonal version). Tighten them firmly! (fig. 1)
3. Place the preassembled grip sections in the 45 or 90 degree coupling piece. (fig. 3)
4. Now check the planned mounting location to see if any of the aluminium grip sections should be shortened. Attention: for the 90 degree model, check if you need a left-hand (fig. 4) or right-hand (fig. 5) version.
5. If the grip sections do not have to be shortened, continue to point 7.
6. Shortening the grip sections: Determine the desired length and shorten with a good hacksaw (fig. 6).

## Disclaimer:

### Reinigingsadvies

Dagelijks reinigen met een zachte doek en eventueel een niet agressief, niet schurend reinigingsmiddel (bijv. groene zeep). Niet reinigen met bleek en/of anti kalkmiddelen. Na reiniging goed afspolten en drogen. Er mogen geen reinigingsmiddelen achterblijven.

### Garantie

Uw aankoopbewijs voorzien van aankoopdatum en productomschrijving of naam bewaren: het is uw garantie bewijs. De garantie van vijf jaar geldt na datum aankoop door de eindgebruiker. De garantie geldt alleen voor eventuele productiefouten van de in het SecuCare-product gebruikte materialen. Een terecht beroep op garantie leidt tot geen andere aanspraak dan op kostenloze levering door SecuProducts BV van een vervangend product. SecuProducts BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige letselschade of enige gevolgschade die ontstaat tijdens montage en/of tijdens gebruik van het product.

### De garantie vervalt door:

- bovenmatige belasting, verkeerd, oneigenlijk of onnatuurlijk gebruik van het product;
- opzettelijke of door verwaarlozing ontstane beschadigingen;
- bij toepassing op een niet-effen ondergrond;
- beschadigingen veroorzaakt door gebrek aan onderhoud, verkeerd onderhoud of gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen (zie reinigingsadvies);
- beschadigingen ontstaan tijdens montage;
- incorrecte montage (o.a. niet conform de montagehandleiding of toepassen van ander dan meegeleverd montage materiaal);
- invloed van chemische/elektrochemische stoffen of invloed van elektriciteit;
- schade ontstaan door "force majeure" of natuurrampen (o.a. overstroming, brand en bevrozing).

### Belangrijk

U moet deze montagehandleiding nauwkeurig volgen. En u moet regelmatig controleren of het product nog goed vast zit.

Het is aan u zelf om te zorgen dat het product veilig bevestigd raakt, bij wat voor ondergrond dan ook.

Kijk voor belangrijke veiligheidsinstructies op: [go.secu.nl/veiligheid](http://go.secu.nl/veiligheid)

Wijzigingen voorbehouden.

## Disclaimer:

### Conseil d'entretien

Nettoyer quotidiennement à l'aide d'un tissu doux et éventuellement d'un produit de nettoyage non-abrasif ni agressif (par ex. du savon mou). Ne pas nettoyer à l'eau de Javel et/ou à l'aide d'un produit anticalcaire. Veiller à ne laisser aucun résidu de produit de nettoyage.

### Garantie

Conservez votre preuve d'achat, sur laquelle doivent apparaître la date de l'achat ainsi qu'une description ou la dénomination du produit. Celle-ci vous servira de garantie. Le produit est garanti cinq ans à compter de la date d'acquisition par l'utilisateur final. La garantie ne vaut que pour les éventuels défauts de fabrication des matériaux utilisés pour la confection du produit SecuCare. Un recours justifié à la garantie entraîne uniquement la livraison gratuite par SecuProducts BV d'un produit de remplacement et ne donne droit à aucune autre forme de revendication. SecuProducts BV décline toute responsabilité en cas de dommage corporel ou indirect survenu au cours du montage et/ou de l'utilisation du produit.

### La garantie ne s'applique pas en cas de:

- pression excessive ou d'utilisation inadéquate, impropre ou contre nature du produit ;
- détériorations intentionnelles ou dues à de la négligence ;
- installation sur une surface inégale ;
- détériorations dues à un manque d'entretien, à un mauvais entretien ou à l'utilisation de produits de nettoyage inadéquats (voir conseil d'entretien) ;
- détériorations survenues pendant le montage ;
- montage incorrect (e.a. montage non-conforme au manuel de montage ou effectué en recourant à du matériel de montage autre que celui fourni) ;
- détériorations survenues sous l'influence de produits chimiques/électrochimiques ou d'électricité ;
- détériorations survenues en cas de force majeure ou de catastrophes naturelles (e.a. inondation, incendie et gel).

### Important

Vous devez suivre minutieusement les instructions de montage. Et vous devez vérifier régulièrement que le produit est correctement fixé. Il vous incombe de veiller à ce que le produit soit fermement attaché, quelle que soit la surface.

Vérifiez les consignes de sécurité importantes: [go.secu.nl/veiligheid](http://go.secu.nl/veiligheid)

Sous réserve de modifications.

## Disclaimer:

### Cleaning advice

Clean daily with a soft towel and, if necessary, with a non-aggressive, non-scouring detergent (e.g. green soap). Do not clean using bleach and/or descaling agents. After cleaning, rinse well and dry. Ensure no traces of detergent remain.

### Guarantee

Please keep your proof of purchase with the date of purchase and product description or name stated on it: this is your guarantee certificate. The five-year guarantee commences after the date of purchase by the end-user. The guarantee only applies in the event of production errors in the materials used in the SecuCare product. A successful claim under the guarantee will result to no entitlement other than delivery of a replacement product by SecuProducts BV free of charge. SecuProducts BV accepts no liability whatsoever for any injury or consequential damage that arises during the mounting and/or use of the product.

### The guarantee will lapse through:

- excessive pressure placed on the product or the incorrect, inappropriate or unnatural use of the product;
- damage caused deliberately or through neglect;
- application on an uneven surface;
- damage caused by lack of maintenance, incorrect maintenance or the use of unsuitable cleaning agents (see cleaning advice);
- damage caused during mounting;
- incorrect mounting (including mounting that is not in accordance with the mounting instructions or use of mounting material other than that supplied);
- influence of chemical/electro-chemical substances or electricity;
- damage caused by 'force majeure' or natural disasters (including flooding, fire and freezing).

### Important

You must follow this assembly manual carefully. And you must check regularly that the product is still tight. It is up to you to make sure that the product is firmly attached to any surface.

See important safety instructions on: [go.secu.nl/veiligheid](http://go.secu.nl/veiligheid)

Subject to alteration.




## Montage handleiding

SecuCare Wandbeugel

Manuel de montage  
de barre d'appui murale SecuCare

Assembly manual  
for SecuCare Wall Grab Rail

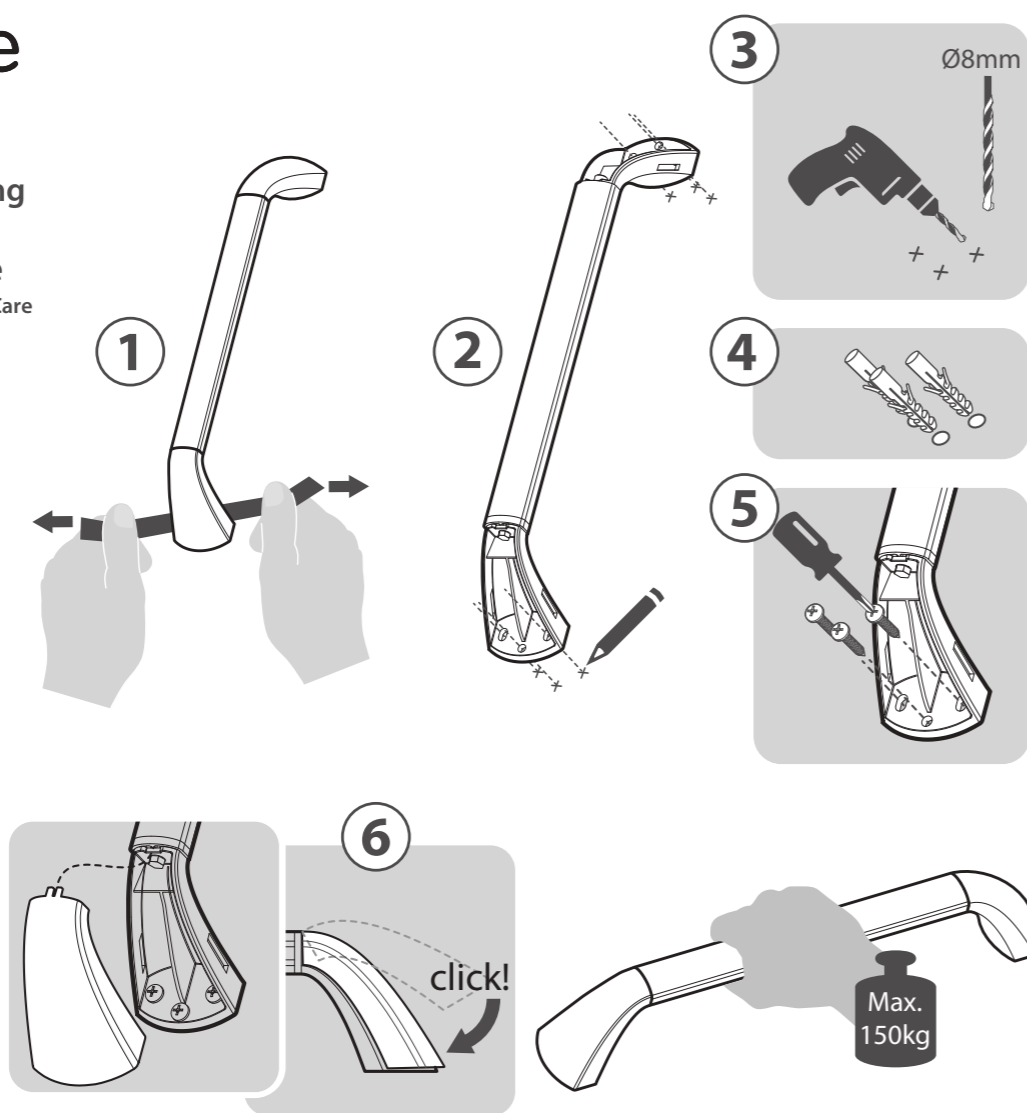

### Standaard meegeleverd montagemateriaal:

6 RVS spaanplaat Schroeven 5x40mm en  
6 pluggen ø8 (tbv steen)

### Ondergrond Aanvullend montagemateriaal nodig:

Steen	Niet van toepassing
Hout	Niet van toepassing
Holle wand	(gips plaat) 6 Toggler pluggen
Gipsblokken	6 pluggen tbv gipsblokken
Cellenbeton	6 cellenbetonankers

kijk op de website voor meer informatie: [www.seccare.nl](http://www.seccare.nl)

### Matériel de montage fourni de façon standard:

6 visser agglo en inox 5x40mm et  
6 chevilles ø8 (pour la brique)

### Surface Matériel de montage supplémentaire nécessaire :

Brique	S.o.
Bois	S.o.
Mur creux	(plaque de plâtre) 6 chevilles Toggler
Carreaux de plâtre	6 chevilles pour carreaux de plâtre
Béton cellulaire	6 chevilles d'ancrage pour béton cellulaire

consulter le site web pour plus d'informations: [www.seccare.nl](http://www.seccare.nl)


### Standard mounting hardware included:

6 Stainless steel chipboard screws 5x40mm and  
6 plugs ø8 (for stone)

### Surface Additional mounting hardware required:

Stone	Not Applicable
Wood	Not Applicable
Hollow wall	(plaster board) 6 Toggler plugs
Gypsum blocks	6 plugs tbv gypsum blocks
Aerated concrete	6 aerated concrete anchors

check the website for more information: [www.seccare.nl](http://www.seccare.nl)

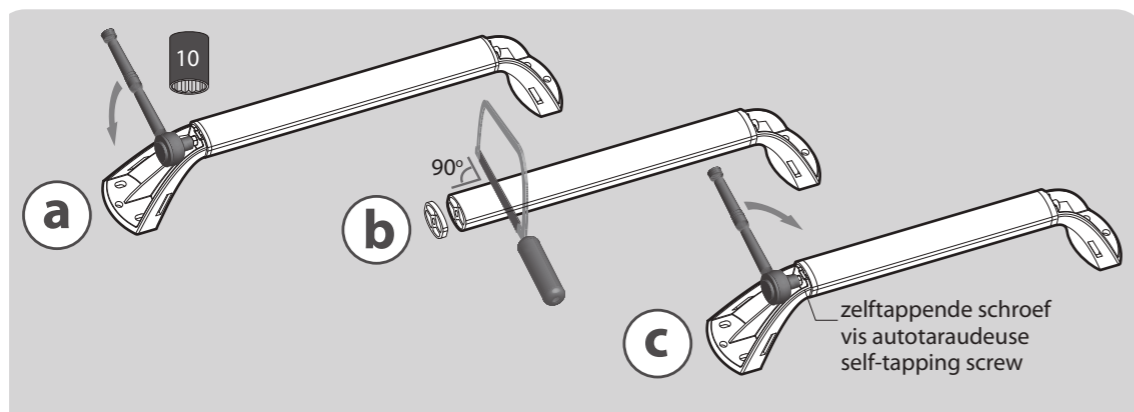

### Montagehandleiding voor toepassing van de RVS plakbevestigings plaatjes t.b.v. de SecuCare Wandbeugel aluminium lengte 40 cm. Art. Nr.: 8010.005.03 (Let op: niet geschikt voor langere lengtes!)

#### Benodigd voor montage:

- SecuCare Wandbeugel type 40 cm
- SecuCare RVS plakbevestigings plaatjes (in deze verpakking)
- Bison PolyMax Express, niet meegeleverd (geen ander merk of soort)
- Steeksleutel no. 10
- Anti-kalk middel
- Algemene ontvetter (bijv. afwasmiddel)
- Wasbenzine

**Belangrijk:** lees ook de algemene disclaimer

#### Algemeen:

De bevestiging van de wandbeugel moet zorgvuldig uitgevoerd worden voor een veilig resultaat. De tegel mag een zeer lichte structuur hebben (vlak mag natuurlijk ook). Controleer of de wandtegels voldoende hechting hebben met de achterliggende wand.

1. Bepaal de gewenste locatie
2. Kort indien nodig de SecuCare wandbeugel in (zie montage handleiding wandbeugel)
3. Reinig eerst met anti-kalkmiddel, zodat alle kalkresten verwijderd zijn
4. Ontvet met een algemene ontvetter (bijv. warm sopje met afwasmiddel)
5. Droog en reinig met wasbenzine
6. Controleer of de bevestigings-plek volledig schoon/veelvrij is.
7. Ontvet ook de RVS bevestigingsplaatjes aan de onderzijde (met wasbenzine)
8. Verwijder de afdekkappen van de wandbeugel
9. Bepaal de juiste positionering van de RVS plakbevestiging t.o.v. de voet van de wandbeugel; aan de binnenzijde van de wandbeugel gelijk aan de voet, aan de andere zijde ca. 2 mm uitstekend (wordt straks afgedekt door de rand van de afdekkap (afb. 1))
10. Plaats een klein dotje PolyMax lijm in het midden van de RVS plakbevestiging (afb. 2)
11. Voorzie de RVS plakbevestiging van voldoende PolyMax lijm (afb. 3)
12. Plaats de RVS plakbevestiging aan de onderzijde van de wandbeugel voeten en positioneer (zie punt 9)
13. Bevestig de wandbeugel met de RVS plakvoeten op de gewenste plek, goed aandrukken.
14. Controleer de posities van de RVS plakvoeten t.o.v. de voet van de wandbeugel (step 9)
15. Trek nu heel voorzichtig de wandbeugel los van de RVS plakvoeten. Let op: zorg dat de plakvoeten gepositioneerd blijven
16. Verwijder de lijmresten van de wandbeugel voeten (met wasbenzine) (afb. 4)
17. Laat nu eerst de RVS plakbevestiging aandrogen, na ca. 4 uur de overtollige PolyMax lijm verwijderen.
18. U kunt de wandbeugel na volledige droging (2 x 24 uur) m.b.v. de meegeleverde moertjes monteren op de RVS plakbevestiging (afb.5). Let op, draai de moeren handvast aan (max. 5 Nm).
19. Controleer voor 1e gebruik en regelmatig of de bevestiging nog stevig genoeg is (afb. 6)
20. De maximale belasting bedraagt 90 kg.

### Instructions de montage pour plaquettes de fixation en inox pour la barre de soutien en aluminium de 40 cm de SecuCare. Art. Nr.: 8010.005.03 (Ne convient pas pour longueurs plus!)

#### Matériel nécessaire :

- Barre de soutien SecuCare type 40 cm
- Plaquettes de fixation en inox de SecuCare (dans cet emballage)
- Colle Bison PolyMax Express, non fournie (ne pas employer une autre marque ou sorte de colle)
- Clé plate n° 10
- Produit anticalcaire
- Produit dégraissant (par ex. produit de vaisselle)
- Essence F

**Important:** Lire aussi la clause de non-responsabilité générale

#### Généralités :

La fixation de la barre de soutien doit être effectuée avec le plus grand soin pour garantir un résultat sans danger. Le carrelage peut présenter une légère structure en relief (un carrelage lisse convient bien sûr également). Vérifiez que les carreaux de carrelage sur lesquels sera fixée la barre adhérent suffisamment au mur.

1. Déterminez l'emplacement désiré pour la barre de soutien.
2. Raccourcissez éventuellement la barre de soutien SecuCare (voir instructions de montage de la barre murale).
3. Commencez par nettoyer la surface à l'aide de produit anticalcaire pour éliminer tous les résidus de calcaire.
4. Dégraissez ensuite à l'aide d'un dégraissant (par ex. eau savonneuse et produit de vaisselle)
5. Séchez puis nettoyez à l'aide d'essence F.
6. Vérifiez que la surface de montage soit parfaitement propre et dégraissée.
7. Dégraissez aussi la surface inférieure des plaques de fixation en inox (à l'aide d'essence F).
8. Retirez les caches de protection de la barre de soutien.
9. Déterminez le bon emplacement des plaquettes en inox sur la barre de soutien : au ras du pied du côté intérieur, et en dépassant d'environ 2 mm du côté extérieur (la partie de la plaque qui dépasse sera cachée par la suite par le cache de protection (voir photo 1)).
10. Mettez un point de colle PolyMax au milieu des plaquettes en inox (voir photo 2).
11. Veillez à mettre suffisamment de colle (voir photo 3).
12. Fixez les plaquettes en inox en-dessous des pieds de la barre murale et assurez-vous qu'elles soient bien positionnées (voir point 9).
13. Collez la barre de soutien avec ses plaquettes de fixation en inox à l'endroit voulu en exerçant une forte pression.
14. Vérifiez que les plaquettes en inox soient bien positionnées au niveau des pieds de la barre de soutien (point 9).
15. Détachez à présent prudemment la barre de soutien des plaquettes en inox. Attention : veillez à ce que les plaquettes restent bien en place.
16. Éliminez les restes de colle des pieds de la barre de soutien (avec de l'essence F) (voir photo 4).
17. Laissez sécher les plaquettes de fixation en inox et après 4 h environ, retirez les résidus de colle PolyMax.
18. Après un temps de séchage complet (2 x 24 h), vous pouvez monter la barre de soutien sur les fixations en inox à l'aide des petits boulons fournis (voir photo 5). Attention, serrez les écrous à la main (max. 5 Nm).
19. Contrôlez avant la 1e utilisation et régulièrement par après que les fixations de la barre soient suffisamment solides (voir photo 6).
20. La charge maximale est de 90 kg.

### Assembly instructions for application of adhesive stainless steel mounting plates for the SecuCare Aluminium wall bracket – length 40 cm. Art. Nr.: 8010.005.03 (Not suitable for longer lengths!)

#### Required for fitting:

- SecuCare Wall Bracket type 40 cm
- Adhesive stainless steel SecuCare mounting plates (supplied in the packaging)
- Bison PolyMax Express, not supplied (no other make or type)
- Open-end wrench no. 10
- Anti-lime scale
- All-purpose degreaser (e.g. washing-up liquid)
- Petroleum ether

**Important:** Also read the general disclaimer

#### General comment:

The wall bracket must be assembled carefully for maximum safety. The tile may be slightly rough (may also be smooth). Check that the wall tiles are properly attached to the wall surface.

1. Select the desired place to mount the bracket.
2. If necessary, shorten the SecuCare wall bracket (see assembly instructions for wall bracket).
3. First clean the surface with anti-lime scale, removing all lime scale residue.
4. Degrease using all-purpose degreaser (e.g. warm soapy water with washing-up liquid).
5. Dry and clean with petroleum ether.
6. Check that the mounting place is absolutely clean and free of grease.
7. Also degrease the bottom surface of the stainless steel mounting plates (with petroleum ether).
8. Remove the protective covers from the wall bracket.
9. Determine the correct position for the adhesive stainless steel mounting for the base of the wall bracket; on the inner surface of the wall bracket right at the base, on the other side protruding by approx. 2 mm – soon to be covered by the edge of the protective cover (see photo 1).
10. Place a small blob of PolyMax glue in the centre of adhesive stainless steel mounting (see photo 2).
11. Be sure to use enough PolyMax glue on the adhesive stainless steel mounting (see photo 3).
12. Place the adhesive stainless steel mounting on the bottom surface of the wall bracket bases and position them properly (see point 9).
13. Mount the wall bracket with the adhesive stainless steel bases in the desired position and press well.
14. Check the positions of the adhesive stainless steel bases in relation to the base of the wall bracket (step 9).
15. Now carefully remove the wall bracket from the adhesive stainless steel bases. NB: ensure that the adhesive bases remain in position.
16. Remove any remaining glue residue from the wall bracket base (using petroleum ether) (see photo 4).
17. Allow the adhesive stainless steel mounting to dry properly, removing any remaining PolyMax glue after around 4 hours.
18. After allowing to dry properly (2 x 24 hours), you can now mount the wall bracket onto the stainless steel adhesive plates using the nuts supplied (see photo 5). Attention, tighten the nuts hand-tight (max. 5 Nm).
19. Check before first-time use (and regularly thereafter) that the mounting is secure (see photo 6).
20. The maximum load is 90 kg.



1



2



3



4



5



6



NEN-EN12182  
93/42/EEG  
CE



SecuCare is een merk  
van SecuProducts BV,  
Nieuw-Vennep, Holland  
[www.seccare.nl](http://www.seccare.nl)