


# Cherry Love



Love to Love®

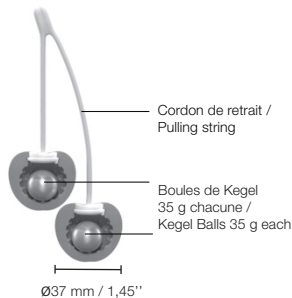

## CONSEILS D'UTILISATION

- Trouvez une position confortable : assise ou allongée.
- Insérez délicatement la plus longue des deux boules dans le vagin. Utilisez un lubrifiant si besoin.
- Insérez la seconde boule. Poussez les boules aussi loin que possible tout en veillant à laisser le cordon de retrait à l'extérieur du vagin.
- Exercez des mouvements de contraction/décontraction. Les boules de Kegel peuvent rester jusqu'à 2h.
- Pour les retirer, asseyez-vous ou allongez-vous, à votre convenance, et tirez délicatement sur le cordon de retrait pour extraire une boule après l'autre.

## DIRECTIONS FOR USE

- Lie down or stand up, choose a comfortable position.
- Slowly and steadily insert the longer ball into your vagina. Use a lubricant if needed.
- If you feel like it, gently start to insert the second ball. Push the balls into your vagina as far as you're comfortable with. Make sure the string connecting both balls remains outside of your vagina.
- Tighten your pelvic floor muscles to hold your Kegel balls inside of you, and go about your day. They can stay in place for up to two hours.
- To remove the Kegel balls, simply lie down or stand up and gently pull on the attached string to remove them.

## GB PRODUCT CHARACTERISTICS

- 100% soft silicone
- Weight : 35 g/ball
- Waterproof

## CAUTIONS AND WARNINGS

- We recommend the use of a water-based lubricant in order to respect its material and to extend the product's lifetime.
- Do not use your product on swollen areas or if you have small cuts. Stop using if you feel pain or discomfort.
- We strongly recommend to pregnant women to consult a doctor before use. After the delivery, it can be used only once the reeducation begun.
- Kegel balls are not intended for anal use. It could be absorbed by the sphincter.

## CLEANING AND CARE

- Your product will last longer if you look after it.
- Clean it before and after each use with an antibacterial gel, soap or wipe.
  - Do not use an alcohol-based, acetone-based or petrol-based cleaning product.
  - Store it in a place free from dust, light and heat.
  - Keep it away from toys made of other materials.

*Vous avez fait l'acquisition des Cherry Love et nous vous en remercions. Avant d'aller plus loin dans la découverte du produit, prenez quelques instants pour lire ce manuel.*

*Thank you for choosing Cherry Love. Before discovering your product, take a few minutes to read this manual.*

*Gracias por elegir este Cherry Love. Antes de seguir descubriendo el producto, le rogamos dedique unos instantes a leer este manual.*

*Via ringraziamo di aver acquistato Cherry Love. Prima di scoprire tutte le potenzialità del vostro nuovo prodotto, vogliate leggere queste istruzioni.*

*Vielen Dank, dass Sie sich für den Cherry Love entschieden haben. Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung zu lesen, bevor Sie Ihr produkt ausprobieren.*

*Bedankt voor uw keuze voor de Cherry Love. Neem even de tijd om deze handleiding te lezen voordat u dit product gaat gebruiken.*

## ENVIRONMENT

The symbol of a bin crossed out indicates that this product should not be disposed of as ordinary household waste. It should be taken to your electrical and electronic waste recycling centre. By disposing of this product correctly, you will be helping to protect the environment and human health.

## ADVICE OF NON-LIABILITY

You use this product as an adult. We cannot be held responsible for the consequences of its use

## WARRANTY

In compliance with European provisions, our products are guaranteed within the limits set by law.

## FR CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 100% silicone doux
- Poids : 35 g/boule
- Waterproof

## MISE EN GARDE ET AVERTISSEMENTS

- Nous vous conseillons d'appliquer un lubrifiant intime à base d'eau afin de respecter la matière de votre produit et de prolonger sa durée de vie.
- N'utilisez pas votre produit sur des zones enflées ou enflammées ou si vous avez de petites lésions. Arrêtez son utilisation si vous ressentez une douleur ou un inconfort.
- Les femmes désirant tonifier leur périnée pendant la grossesse doivent consulter leur médecin avant toute utilisation. Après l'accouchement, elles ne pourront être utilisées qu'une fois la rééducation commencée.
- Les boules de Kegel ne sont pas destinées à un usage anal. Elles pourraient être absorbées par le sphincter.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- En prenant soin de votre produit vous augmentez sa durée de vie.
- Nettoyez-le avant et après chaque utilisation avec un antibactérien: gel, savon, lingette.
  - N'utilisez pas de nettoyant à base d'alcool, d'acétone ou de pétrole.
  - Rangez-le dans un endroit à l'abri de la poussière, de la lumière et de

la chaleur.

- Gardez-le à distance de jouets composés d'autres matériaux.

## ENVIRONNEMENT

Le symbole poubelle barrée indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. Il doit être apporté à votre centre de récupération et de recyclage des appareils électriques et électroniques. En vous débarrassant correctement de ce produit vous aiderez à protéger l'environnement.

## AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Vous utilisez ce produit en adulte. Nous ne pourrions être tenus pour responsables des conséquences de son utilisation.

## GARANTIE

Conformément aux dispositions européennes nos produits, sont garantis dans les limites prévues par la loi.

## ES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 100% silicona suave
- Peso: 35 g/bola
- Waterproof

### RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

- Recomendamos usar un lubricante de base acuosa para respetar las características del material y alargar la vida útil del producto.
- No utilice el producto en zonas hinchadas o si tiene pequeñas heridas. Deje de usarlo si siente dolor o nota molestias.
- Las mujeres que desean tonificar su perineo durante el embarazo deben consultar a su médico antes de toda utilización. Después del parto, podrán ser utilizadas sólo una vez la reeducación comenzada.
- Las bolas de Kegel no son destinadas a un uso anal. Podrían ser absorbidas por el esfínter.

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El producto durará más con los cuidados adecuados.

- Limpielo antes y después de cada uso con un producto antibacteriano: gel, jabón, toallita.
- No utilice productos de limpieza a base de alcohol, acetona o petróleo.
- Guárdelo en un lugar protegido del polvo, de la luz y del calor.
- Manténgalo alejado de sextoys fabricados con otros materiales.

## DE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 100% silikon weich
- Gewicht : 35g/ball
- waterproof

### EMPFEHLUNGEN UND WARNUNGEN

- Wir empfehlen die Verwendung eines wasserlöslichen Gleitmittels, um das Material zu schonen und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.
- Verwenden Sie den produkt nicht in geschwollenen Bereichen oder Bereichen mit kleinen Schnitten. Beenden Sie die Verwendung bei Schmerzen oder Unwohlsein.
- Frauen, die ihre Beckenbodenmuskulatur während der Schwangerschaft stärken möchten, sollten vor jeder Verwendung ihren Arzt befragen. Sie können nach der Geburt wieder verwendet werden, wenn die Beckenbodenmuskulatur wieder gestärkt ist.
- Die Kegel ball dürfen nicht anal verwendet werden. Sie könnten vom Schließmuskel aufgenommen werden.

### REINIGUNG UND PFLEGE

- Das produkt hat eine längere Lebensdauer, wenn Sie ihn pflegen.
- Reinigen Sie ihn vor und nach jedem Gebrauch mit einem anmbakteriellen Misoel : Gel, Seife, feuchtes Tuch.
  - Verwenden Sie keine Reinigungsprodukte basierend auf Alkohol, Aceton oder Benzin.

## MEDIO AMBIENTE

El símbolo de un contenedor tachado indica que este producto no puede tratarse como un residuo doméstico. Hay que llevarlo a un punto de reciclaje para residuos eléctricos y electrónicos. Reciclando correctamente este producto contribuirá a proteger el medio ambiente y la salud de las personas.

### ADVERTENCIA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Usted utiliza este producto en calidad de adulto. No nos hacemos responsables de las consecuencias derivadas de su uso.

### GARANTÍA

Cumpliendo las normas europeas, nuestros productos se comercializan con una garantía dentro de los los límites estipulados por la legislación.

- Bewahren Sie es an einem Ort auf, der vor Staub, Licht und Hitze geschützt ist.
- Von Spielzeugen aus anderen Materialien fernhalten.

### UMWELT

Das durchgestrichene Müllersymbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Statt dessen sollte das Produkt als Elektromüll bei einem Recyclinghof abgegeben werden. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Sie verwenden dieses Produkt als Erwachsener. Wir übernehmen keine Haftung für die Folgen Ihrer Verwendung.

### GARANTIE

Gemäß den europäischen Vorschriften verfügen unsere Produkte über die Garantie für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum.

## IT CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 100% silicone morbido
- Peso : 35 g/palla
- Waterproof

### PRECAUZIONI E AVVERTENZE

- Vi consigliamo di utilizzare un lubrificante a base di acqua per proteggere il materiale e prolungare la durata di vita del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto su aree gonfie o in presenza di piccole ferite.
- Smettere l'uso in caso di dolori o disagi
- Le donne che desiderano tonificare il loro perineo durante la gravidanza devono consultare il loro medico prima di ogni utilizzazione. Dopo il parto, potuti stato utilizzate che una volta la rieducazione cominciata.
- Le palle di Kegel non sono destinate ad un uso anale. Potrebbero essere assorbite dallo sfintere.

### CURA E PULIZIA

- Il vostro prodotto durerà molto più tempo se ve ne prendete cura.
- Pulirlo prima e dopo ogni utilizzo con un antibatterico: gel, sapone, salvietta.
- Non utilizzare prodotti a base di alcool, acetone, o petrolio.
- Conservare in un luogo al riparo da polvere, luce e fonti di calore.
- Tenere lontano da prodotti simili realizzati con altri materiali.

## NL PRODUCTKENMERKEN

- 100% silicone zacht
- Gewicht : 35 g/ball
- Waterproof

### TIPS EN WAARSCHUWINGEN

- Wij raden je aan een glijmiddel op waterbasis te gebruiken om het materiaal in optimale conditie te houden en de levensduur van het toestel te verlengen.
- Gebruik das product niet op gezwollen zones of als je kleine verwondingen hebt. Stop het gebruik als je pijn of ongemakken ervaart.
- Vrouwen die hun perineum willen versterken tijdens de zwangerschap, moeten hiervoor eerst een arts raadplegen. Na de bevalling mogen de ballen pas gebruikt worden als de revalidatieperiode begonnen is.
- Kegel-bol mogen niet anaal gebruikt worden, aangezien deze geabsorbeerd kunnen worden door de sluitspier.

### REINIGING EN ONDERHOUD

- Als das product goed onderhoudt, gaat hij langer mee.
- Reinig het toestel voor en na elk gebruik schoon met een antibacterieel middel : gel, zeep, doekje.

## AMBIENTE

El símbolo del bidone barrato indica che questo prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti ordinari, bensì deve essere consegnato al centro di riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici. Se smaltite questo prodotto correttamente, aiuterete a proteggere l'ambiente e la salute umana.

### DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Il prodotto è destinato a persone adulte. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'utilizzo del prodotto.

### GARANZIA

Conformemente alle disposizioni europee, i nostri prodotti sono garantiti entro i limiti stabiliti dalla legge.

- Gebruik geen reinigingsmiddel op basis van alcohol, aceton of petroleum.
- Bewaar hem op een plaats die beschermd is tegen stof, licht en hitte.
- Bewaar het toestel niet samen met speeltjes die vervaardigd zijn met andere materialen.

### MILIEU

Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat dit toestel niet als huishoudelijk afval beschouwd mag worden. Breng het naar een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur in je buurt. Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt verwerkt, help je mee het milieu en de volksgezondheid te beschermen.

### DISCLAIMER

Gebruik dit product als een volwassene. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van het gebruik ervan.

### GARANTIE

In overeenstemming met de Europese bepalingen bieden wij garantie op onze producten binnen de door de wet voorziene grenzen.