

BLOCCS®



PROTEZIONE IMPERMEABILE

per ingessature e medicazioni



GUIDA PER L'UTILIZZO E LA MANUTENZIONE

IT La protezione impermeabile Bloccs® è appositamente progettata per proteggere ingessature, medicazioni e bendaggi e consentire a chi la indossa di fare il bagno o la doccia come di consueto. La protezione a tenuta stagna consente l'immersione completa e può essere utilizzata anche al mare, in piscina e nelle piscine per bambini.

ATTENZIONE: il lattice di gomma naturale può provocare reazioni allergiche. I pazienti attualmente in cura devono ottenere l'approvazione del proprio medico curante prima di utilizzare la protezione. **NON UTILIZZARE IN CASO DI ALLERGIA AL LATTICE.**

Bloccs®

Unit J, Lawrence Drive, Yate,
South Gloucestershire,
BS37 5PG
Telefono: +44 (0) 1454 318197
E-mail: info@bloccs.com
www.bloccs.com



La riproduzione, le copie, le opere derivate, la distribuzione e l'esposizione pubblica del presente manuale sono consentite solo previo consenso scritto di Bloccs®.

Prodotto nel Regno Unito

Tutti i prodotti sono fabbricati in conformità con l'attuale standard ISO 9001 del Sistema di Gestione per la Qualità.

©Bloccs® 2023



**Precision Dippings
Manufacturing Ltd**
Unit J, Lawrence Drive
Stover Trading Estate, Yate,
Bristol, BS37 5PG
UK



Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
B-1030, Brussels
Belgium



Obelis SWISS GmbH
Ruessenstrasse 12
6340 Baar/ZG
Switzerland

UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLA PROTEZIONE **BLOCCS®**

Grazie per aver scelto Bloccs®. Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare la protezione Bloccs® o di farla utilizzare ai bambini. Ciò garantirà che la protezione venga utilizzata in sicurezza e che la tenuta stagna sia efficace.

La decisione di indossare una protezione Bloccs® durante il bagno, la doccia o qualsiasi altra attività acquatica è presa a proprio rischio e pericolo. Consultare un medico per accertarsi che l'attività non abbia alcun effetto negativo sulla ferita.

Come indossare la protezione Bloccs®

Poiché la protezione Bloccs® è realizzata in lattice di gomma naturale, è necessario rimuovere eventuali gioielli appuntiti e fare attenzione a non perforarla con le unghie. Coprire i bordi ruvidi con nastro adesivo o una benda elastica.

Prima dell'uso, strofinare la guarnizione con le mani e allungarla delicatamente. Per verificare l'aderenza della guarnizione, provare la protezione sul braccio o sulla gamba sani. Se la guarnizione è troppo stretta o troppo larga, scegliere una protezione di misura diversa.

La guarnizione impermeabile aderente dovrebbe essere facile da applicare sopra una medicazione.

Seguire le semplici istruzioni in cinque fasi contenute in questo foglio illustrativo per indossare le protezioni Bloccs® per braccio/gamba e gomito/ginocchio.

Come utilizzare la protezione Bloccs®

La protezione Bloccs® riutilizzabile è pensata per mantenere le medicazioni asciutte durante l'esposizione all'acqua o l'immersione. Le protezioni Bloccs® presentano guarnizioni dello stesso tipo di quelle utilizzate per le mute stagne.

Prima di entrare in acqua, rimuovere tutta l'aria

dalla protezione Bloccs® massaggiando la copertura verso l'alto e verso l'area di tenuta, permettendo così all'aria di fuoriuscire. Questo effetto può essere ottenuto anche immergendo gradualmente l'arto in modo che la pressione dell'acqua spinga l'aria verso la sommità della protezione.

Scostare delicatamente la guarnizione dalla pelle per eliminare l'aria prima dell'immersione, assicurandosi che nella protezione non entri acqua.

Indossare la protezione appena prima di entrare in acqua e rimuoverla subito dopo esserne usciti.

La decisione di entrare in acqua è presa a proprio rischio e pericolo. Non saltare o tuffarsi in piscina. Le protezioni non sono state progettate per le immersioni, lo snorkeling o altri sport acquatici.

Si consiglia di controllare regolarmente la protezione Bloccs® durante l'uso, per garantire che la tenuta sia stagna e confortevole.

La protezione può essere indossata per un massimo di 30 minuti, posto che sia ancora comoda, non sia troppo stretta e venga controllata regolarmente.

Indossare la protezione per più di 30 minuti può intrappolare l'aria all'interno, provocando disagio e sudorazione eccessiva.

I BAMBINI IN PISCINA O IN MARE DEVONO ESSERE SORVEGLIATI COSTANTEMENTE.

Come togliere la protezione

Per rimuovere la protezione, farla scivolare delicatamente sulla medicazione o sull'ingessatura lungo il braccio o la gamba. Prestare attenzione a non danneggiare le aree di tenuta con le unghie o i gioielli.

Manutenzione della protezione Bloccs®

La protezione Bloccs® è soggetta a usura, ma dovrebbe durare per circa 4 settimane di uso regolare.

La protezione deve essere controllata prima di ogni utilizzo per verificare l'assenza di danni o di segni di usura.

Se la protezione risulta deteriorata o danneggiata è necessario sostituirla.

Le protezioni devono essere conservate a una temperatura inferiore a 26 °C e lontano da fonti di calore. In condizioni di freddo estremo, la protezione può diventare rigida: si tratta di una situazione temporanea che può essere corretta con il semplice riscaldamento.

Evitare di conservare la protezione in condizioni di umidità. Evitare l'esposizione prolungata a fonti luminose, in particolare alla luce solare diretta e alla luce artificiale ad alto contenuto UV.

La protezione Bloccs® può essere lavata in acqua tiepida e deve poi essere asciugata accuratamente all'interno e all'esterno.

Cospargendo l'interno della protezione Bloccs® di un sottile strato di talco sarà più facile indossarla. Non utilizzare termosifoni o asciugatrici per asciugare la protezione.

Evitare il contatto con il rame, le leghe contenenti rame, i solventi, gli oli e i grassi poiché queste sostanze possono danneggiare la protezione Bloccs®.

Tenere lontano da fiamme libere che potrebbero provocare gravi lesioni fisiche e persino la morte.

In caso di domande sulla protezione Bloccs®, visitare il sito www.bloccs.com o inviare un'email a info@bloccs.com

Una copia delle presenti istruzioni, la nostra tabella delle misure e la garanzia Bloccs® sono disponibili sul nostro sito web www.bloccs.com e all'indirizzo www.bloccs.com/warranty

Bloccs® si riserva il diritto di modificare il manuale nel modo in cui ritiene appropriato. Il consumatore ha la responsabilità di verificare eventuali modifiche apportate alla versione online del manuale.

Attenzione: le protezioni Bloccs® possono diventare scivolose se bagnate. Utilizzare un tappetino da bagno antiscivolo nella doccia o nella vasca e posizionare un altro tappetino antiscivolo o un asciugamano sul pavimento per quando si esce. Non camminare sul bordo delle piscine quando si indossa una protezione Bloccs® e prestare particolare attenzione alle scalette e ai gradini, che possono risultare scivolosi. Tenersi saldamente al corrimano.

Attenzione: le protezioni Bloccs® non sono giocattoli. Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere il prodotto e la confezione fuori dalla portata di bambini e neonati.

Attenzione: il lattice di gomma naturale può provocare reazioni allergiche. I pazienti attualmente in cura devono ottenere l'approvazione del proprio medico curante prima di utilizzare la protezione.

Attenzione: prestare particolare attenzione quando si immergono in acqua le gambe ingessate, poiché le ingessature possono risultare pesanti e limitare i movimenti. Non tentare di nuotare con un'ingessatura alla gamba.


Attenzione: prestare cautela nell'utilizzo in presenza di cateteri periferici o flebo.

Non è possibile fornire avvertenze su ogni possibile pericolo correlato all'uso di questo prodotto. Si consiglia pertanto ai consumatori di esercitare il buon senso quando utilizzano una protezione Bloccs®.

BLOCCS®

COME
INDOSSARE
UNA
PROTEZIONE
BLOCCS® PER
IL BRACCIO O
LA GAMBA

La protezione deve essere utilizzata in conformità con tutte le istruzioni d'uso e manutenzione. Visitare il sito www.bloccs.com per guardare i nostri video dimostrativi e consultare le domande frequenti.

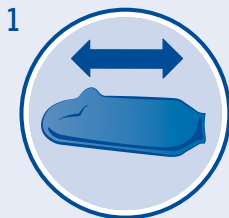

Estrarre la protezione dalla confezione e distenderla. Togliere eventuali anelli appuntiti, ecc.



Prima dell'uso, strofinare la guarnizione con le mani e allungarla delicatamente.



Partendo dall'estremità aperta, ripiegare la protezione a metà.



Per verificare l'aderenza della guarnizione, provare prima la protezione sul braccio o sulla gamba sani.

Introdurre il braccio o la gamba che richiedono la protezione attraverso l'estremità aperta, in modo che il piede o la mano si trovino all'estremità della protezione.




Srotolare la protezione sul braccio o sulla gamba finché la guarnizione aderisce alla pelle. Se la guarnizione è troppo stretta o troppo larga, scegliere una protezione di misura diversa.

Fare uscire un po' d'aria per evitare che galleggi.

BLOCCS®

COME INDOSSARE UNA PROTEZIONE BLOCCS® PER IL GOMITO O IL GINOCCHIO

La protezione deve essere utilizzata in conformità con tutte le istruzioni d'uso e manutenzione. Visitare il sito www.bloccs.com per guardare i nostri video dimostrativi e consultare le domande frequenti.

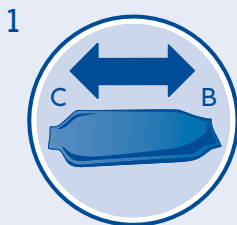


Estrarre la protezione dalla confezione e distenderla. Togliersi eventuali anelli appuntiti, ecc.


La protezione presenta due estremità: una più ampia per creare la tenuta stagna intorno al bicipite o alla coscia (B) e un'estremità più stretta per creare la tenuta stagna intorno al polso o alla parte inferiore del polpaccio (C).



Prima dell'uso, strofinare tra loro le guarnizioni con le mani e allungarle delicatamente.

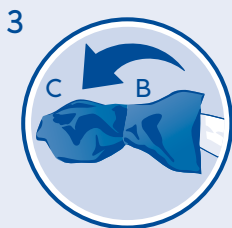


Per indossare facilmente la protezione, prendere l'estremità B e risvoltare metà della protezione dall'interno all'esterno, in modo che si trovi appena sopra l'estremità C.

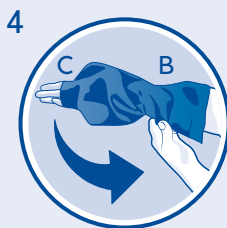

Per verificare l'aderenza della guarnizione, provare prima la protezione sul braccio o sulla gamba sani.

Introdurre lentamente la mano o il piede attraverso entrambe le estremità B e C.



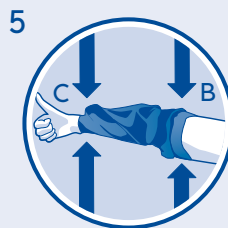

















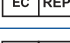

Quindi srotolare delicatamente l'estremità B finché non aderisce perfettamente al braccio o alla coscia.

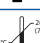

Assicurarsi di coprire l'intera area della medicazione; intorno al braccio o alla gamba, a entrambe le estremità della protezione, deve formarsi una tenuta stagna perfettamente aderente. Se la guarnizione è troppo stretta o troppo larga, scegliere una protezione di misura diversa.

Fare uscire un po' d'aria per evitare che galleggi.

GLOSSARIO DEI SIMBOLI

	Produttore
	Marchatura CE di conformità
	Dispositivo medico
	Identificativo univoco del dispositivo
	Quantità di dispositivi
	Codice lotto
	Data di produzione
	Distributore
	Rappresentante autorizzato nell'Unione europea
	Rappresentante autorizzato in Svizzera
	Importatore
	ATTENZIONE
	Presenza di lattice di gomma naturale
	Superficie scivolosa
	Rischio di soffocamento
	Tenere lontano dalla luce del sole
	Conservare tra 5 e 26 °C (41-78°F)
	Singolo paziente – uso multiplo
	Non sterile
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Imballaggio riciclabile
	Nessuna fiamma libera