




koala
babycare


koala perfect head maxi

gebrauchsanleitung


1.


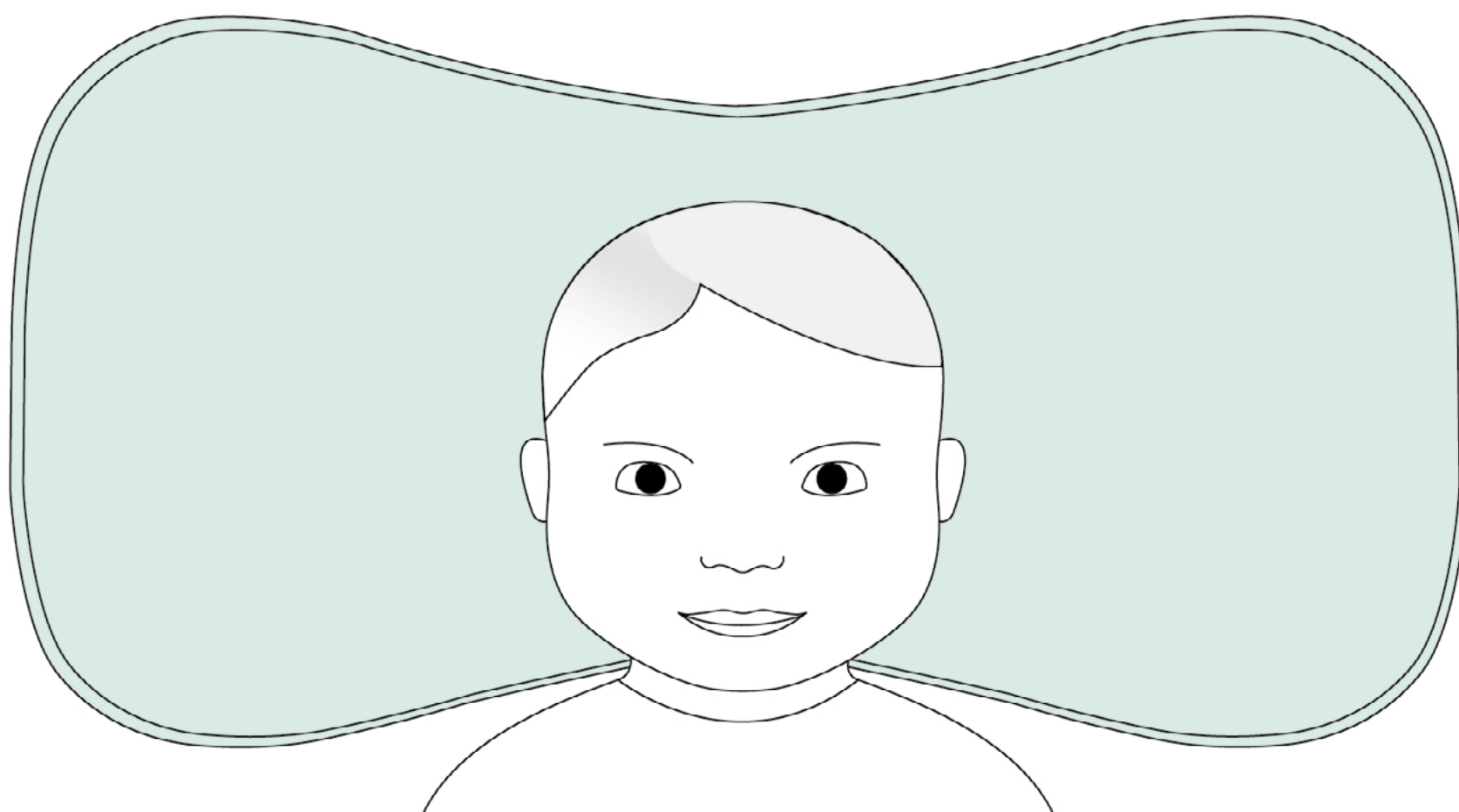


2.

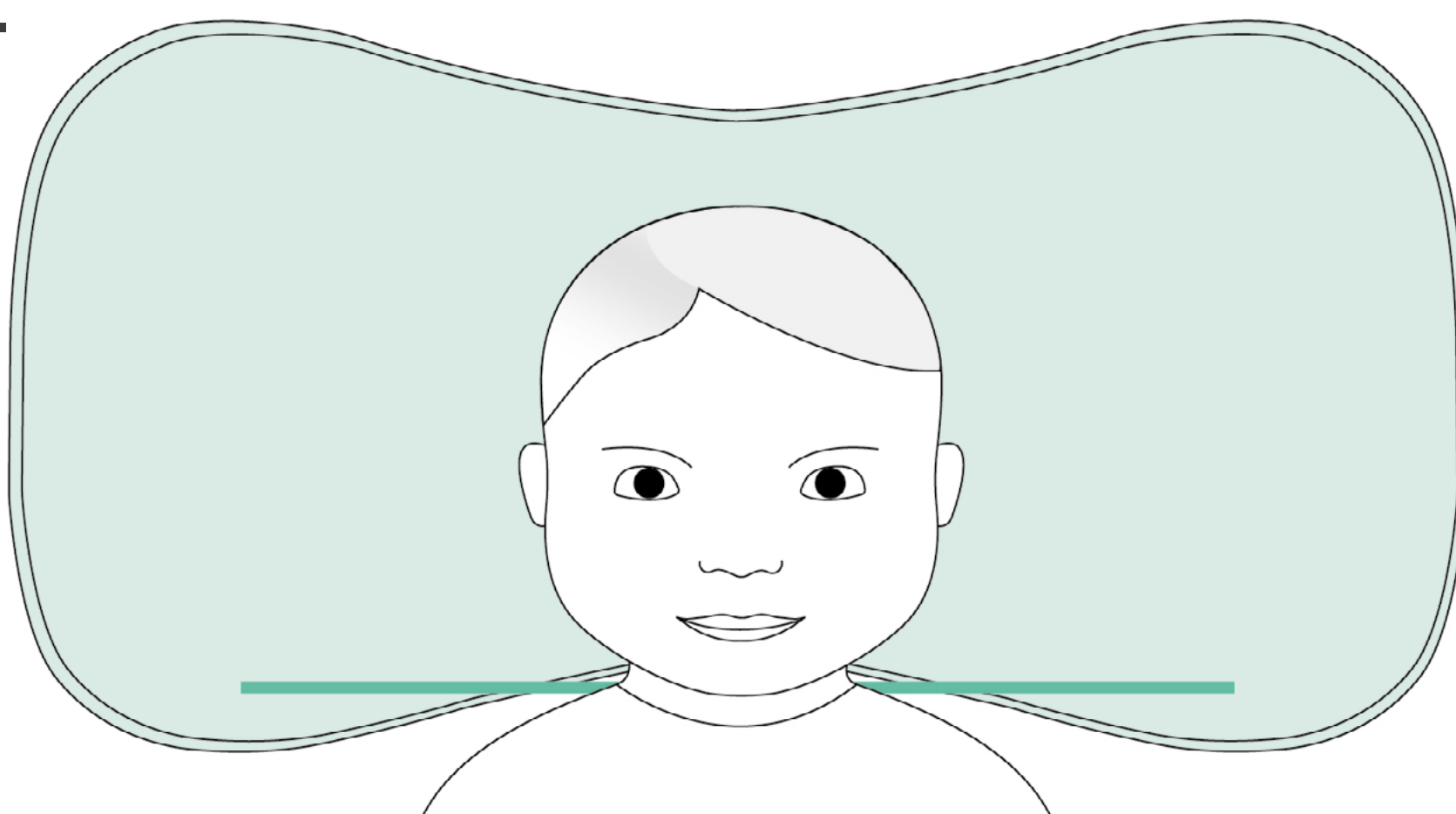

3.

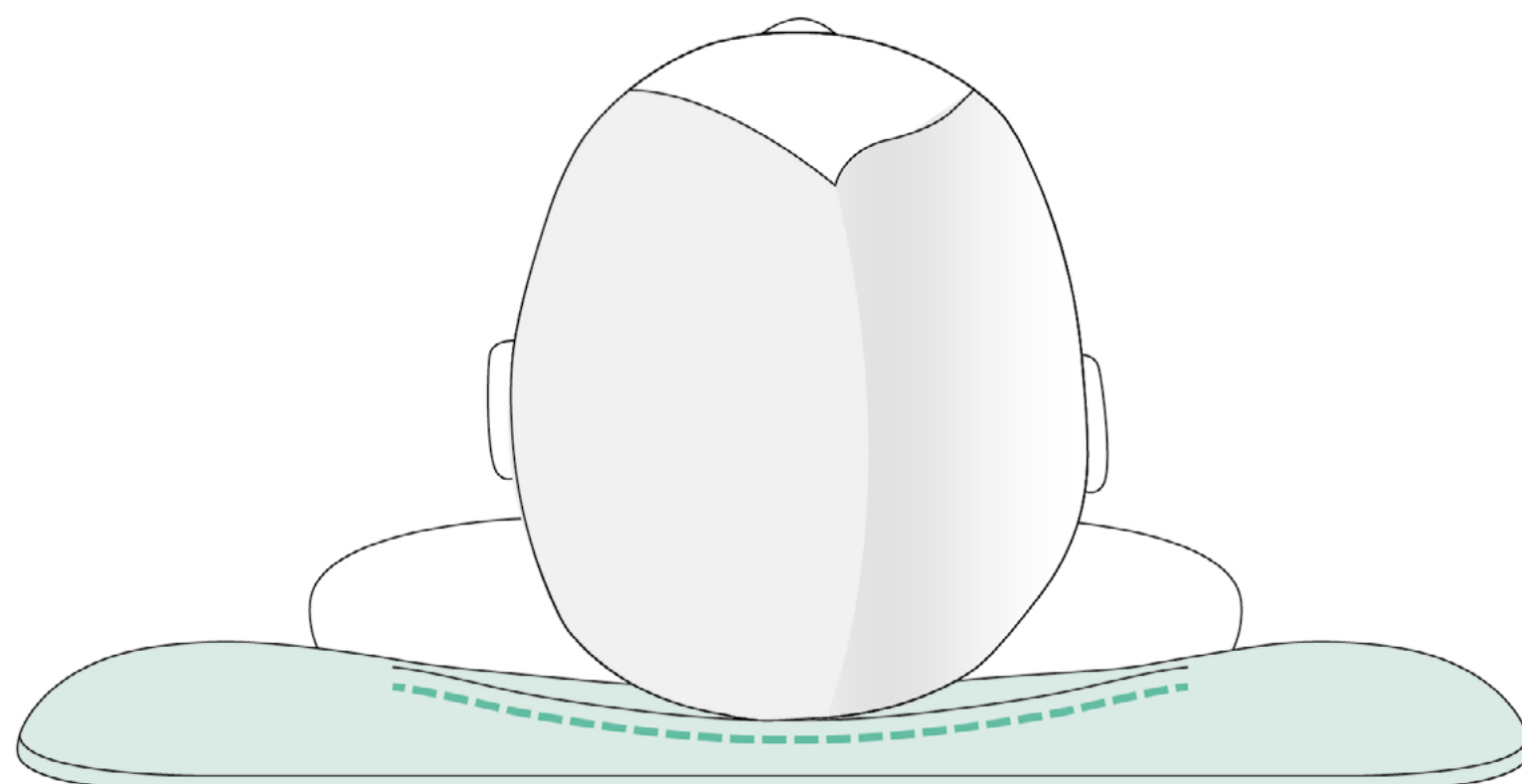

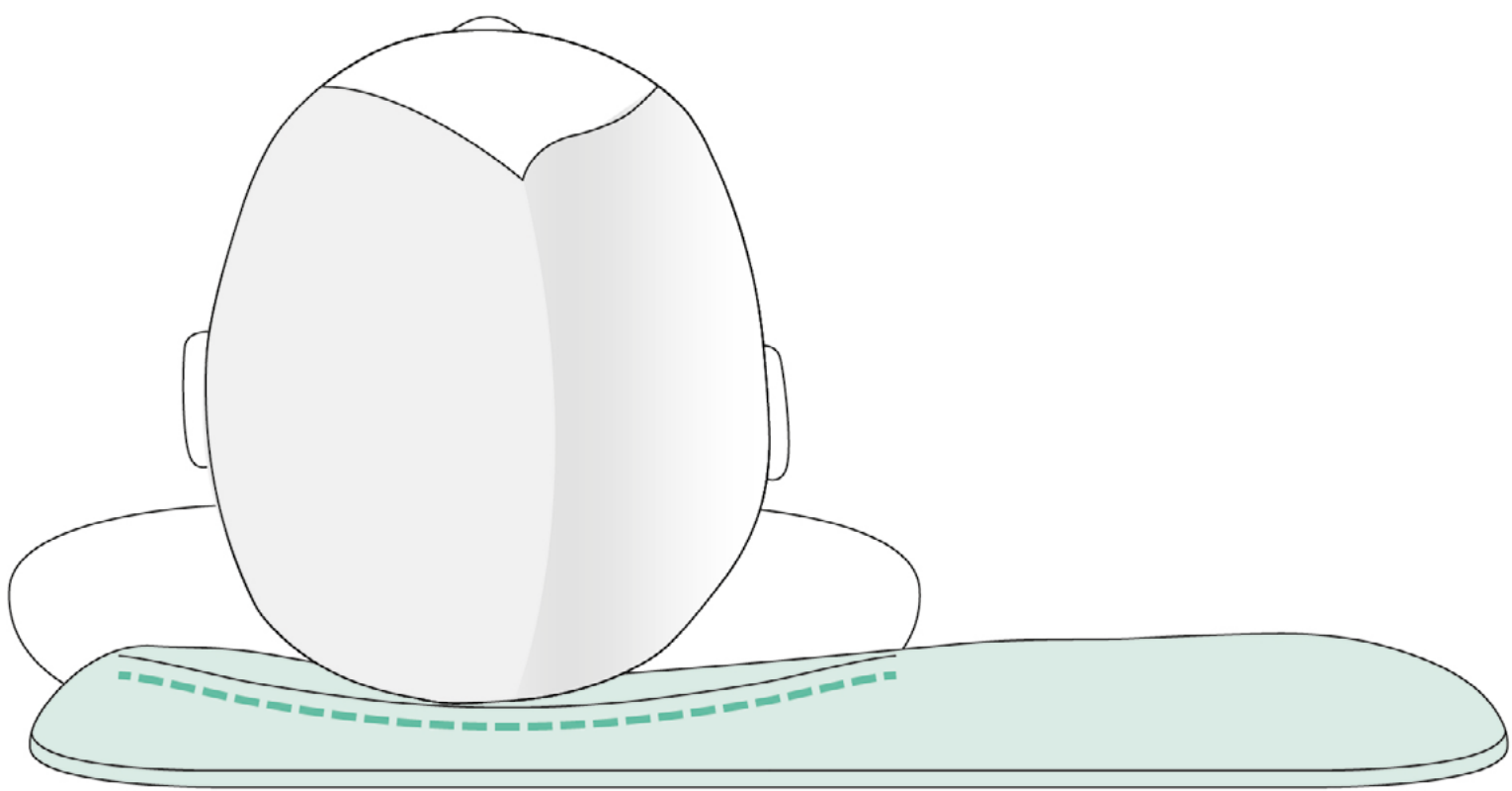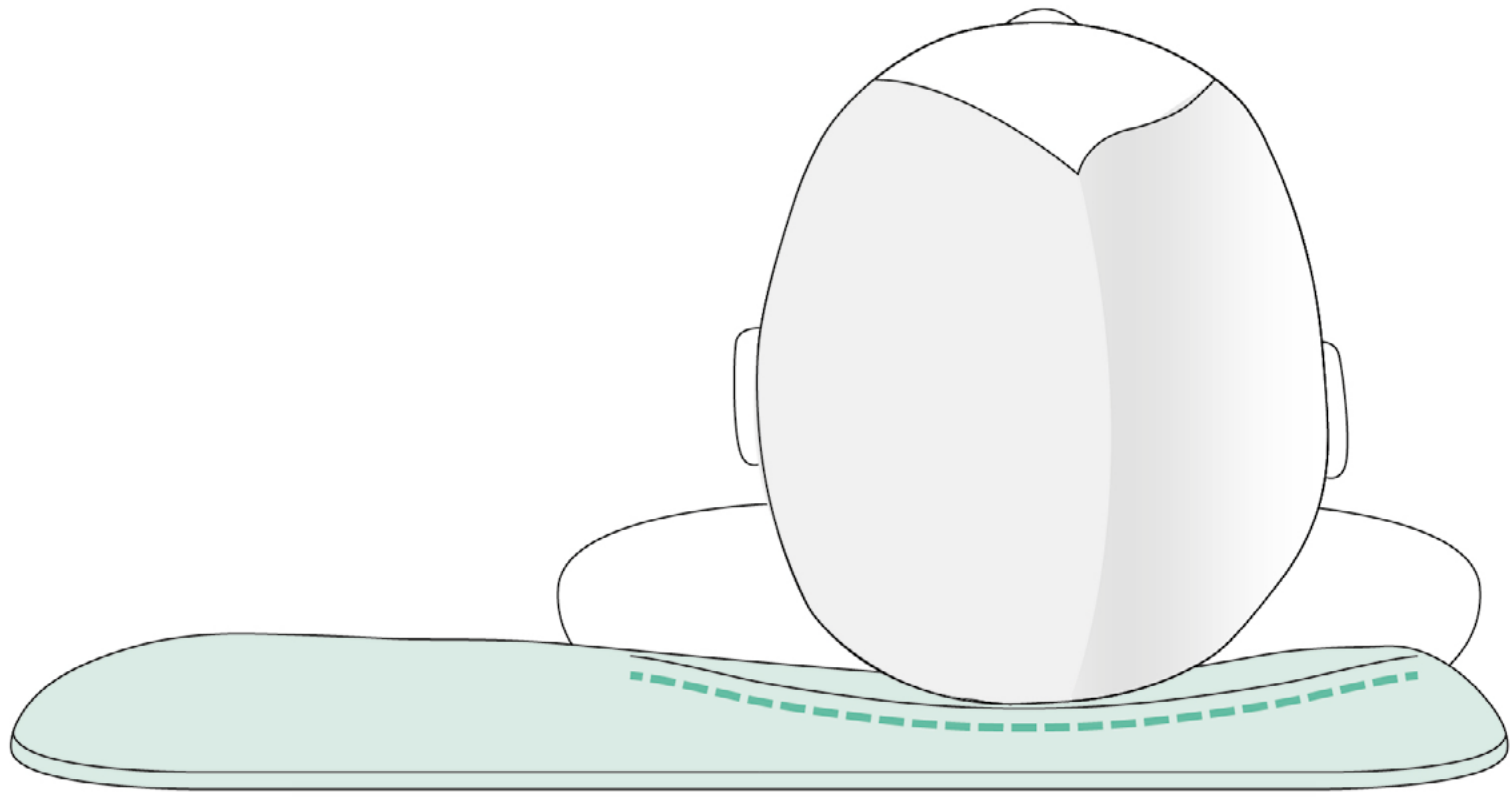

Wie verwende ich Koala Perfect Head Maxi ?

Koala Perfect Head Maxi ist nicht nur ein Kissen für Säuglinge, sondern **ein Medizinprodukt der Klasse 1 zur Vorbeugung und Behandlung von Plagiozephalie und Brachyzephalie.**

Koala Perfect Head Maxi wurde speziell für die Verwendung in Beistellbetten, Kinderbetten und Betten entwickelt. Er kann auch zum Spielen auf der Matte oder im Laufstall verwendet werden.

Es kann bis zu 36 Monate lang verwendet werden. Es ist ideal sowohl ab den ersten Tagen als auch dann, wenn das Baby größer wird und anfängt, sich mehr zu bewegen. Seine Größe (50 cm) ermöglicht es dem Kind, sich seitlich frei zu bewegen, ohne dass der Kopf außerhalb des Kissens liegt. So wird die Notwendigkeit, Plagiozephalie und Brachyzephalie zu verhindern, mit der physiologischen psychomotorischen Entwicklung kombiniert.

- 1. Legen Sie das Kind immer in Rückenlage** (Gesicht nach oben), bis es ein Jahr alt ist.
- 2. Positionieren Sie den Nacken des Babys in der Mitte des Kissens, an der zentralen Vertiefung:** Das Kissen ist so konzipiert, dass es maximalen Komfort für das Baby bietet, das sich frei bewegen kann, während es wächst. Gleichzeitig sorgt es für eine optimale Verteilung des Drucks auf den Schädel auch außerhalb der Vertiefung.
- 3. Achten Sie darauf, dass die Schultern außerhalb des Kissens bleiben:** Dadurch wird die richtige Haltung von Rücken und Nacken beibehalten und sichergestellt, dass der Nacken in der zentralen Vertiefung zentriert ist.

Wenn Sie diese drei einfachen Schritte richtig befolgen, verteilt der Memory-Foam den Druck auf den Kopf des Babys über eine große Fläche und reduziert so den lokalen Druck, der Plagiozephalie verursacht. Ärzte und Kinderärzte sind die erste Anlaufstelle für frischgebackene Eltern.

Deshalb ist es wichtig, sie umgehend zu kontaktieren. Wir empfehlen, Koala Perfect Head Maxi unter Aufsicht eines Erwachsenen zu verwenden, bis das Kind in der Lage ist, sich selbständig umzudrehen, wie es die WHO-Richtlinien vorschreiben.

Wie Koala Perfect Head Maxi waschen ?

Wie Koala Perfect Head *Air* waschen

Der äußere Kissenbezug ist abnehmbar und bei 30° in der Maschine waschbar.

Waschanleitung für den Kissenbezug

- Wenn der Kissenbezug besonders schmutzig ist, kann er auch bei 40° gewaschen werden. Allerdings garantiert das Waschen bei dieser Temperatur nicht die gleiche Widerstandsfähigkeit der Baumwolle.
- Wir empfehlen Ihnen, nicht zu bleichen, nicht zu bügeln, nicht chemisch zu reinigen und keine Fleckentferner mit Lösungsmitteln zu verwenden.

Es ist sehr wichtig, dass Sie den Memory-Foam nicht waschen. Wenn der Memory Foam in Wasser getaucht wird, nimmt er dieses auf, verliert seine Form und wird unbrauchbar.

Aus was besteht Koala Perfect Head Maxi ?

Kopfkissenbezug: 75% Baumwolle, 25% Polyester

Kissen: 100% Memory Foam



koalababycare.com
help@koalababycare.com