




koala
babycare


koala perfect head maxi

manuale d'uso


1.


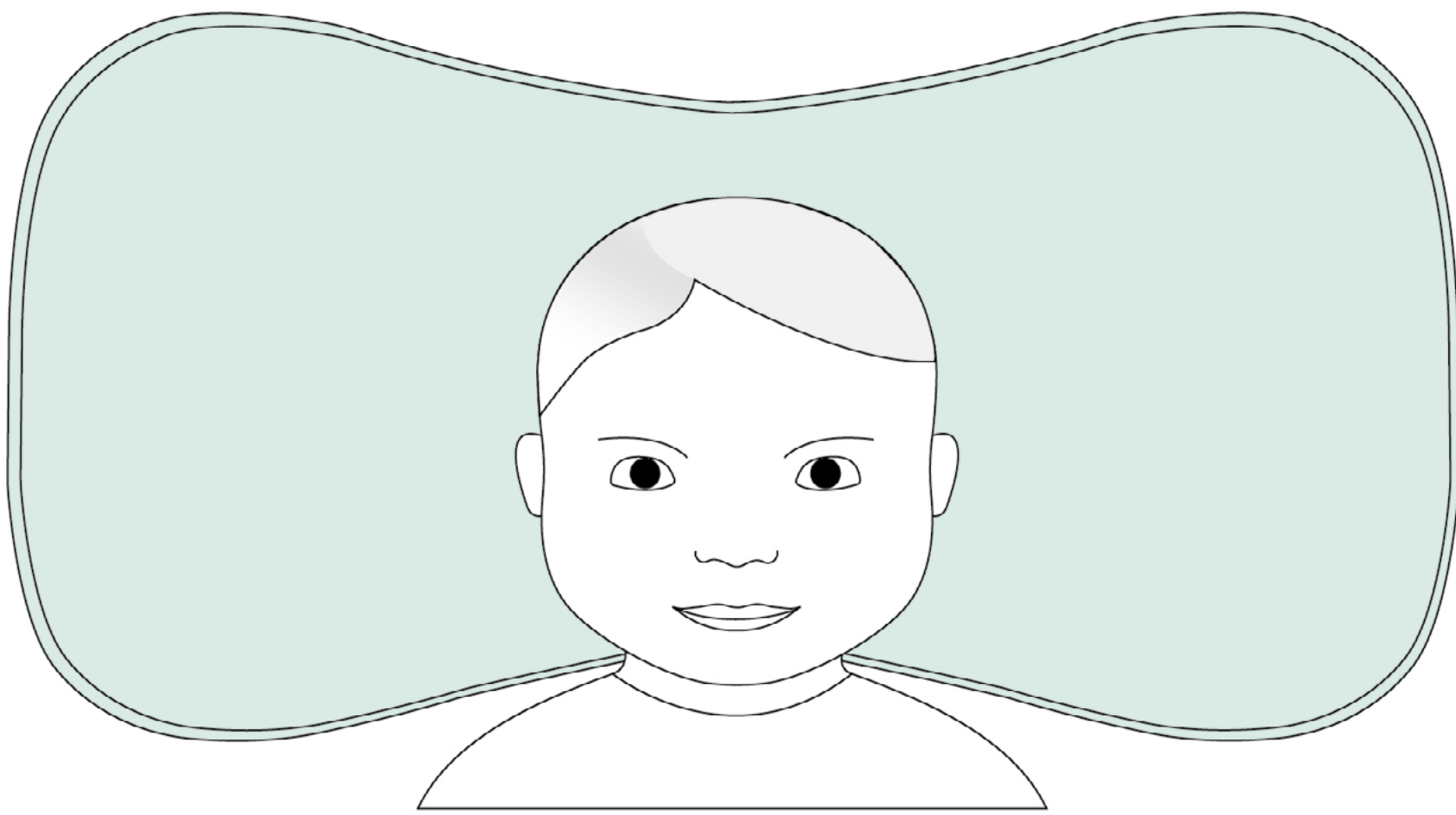


2.

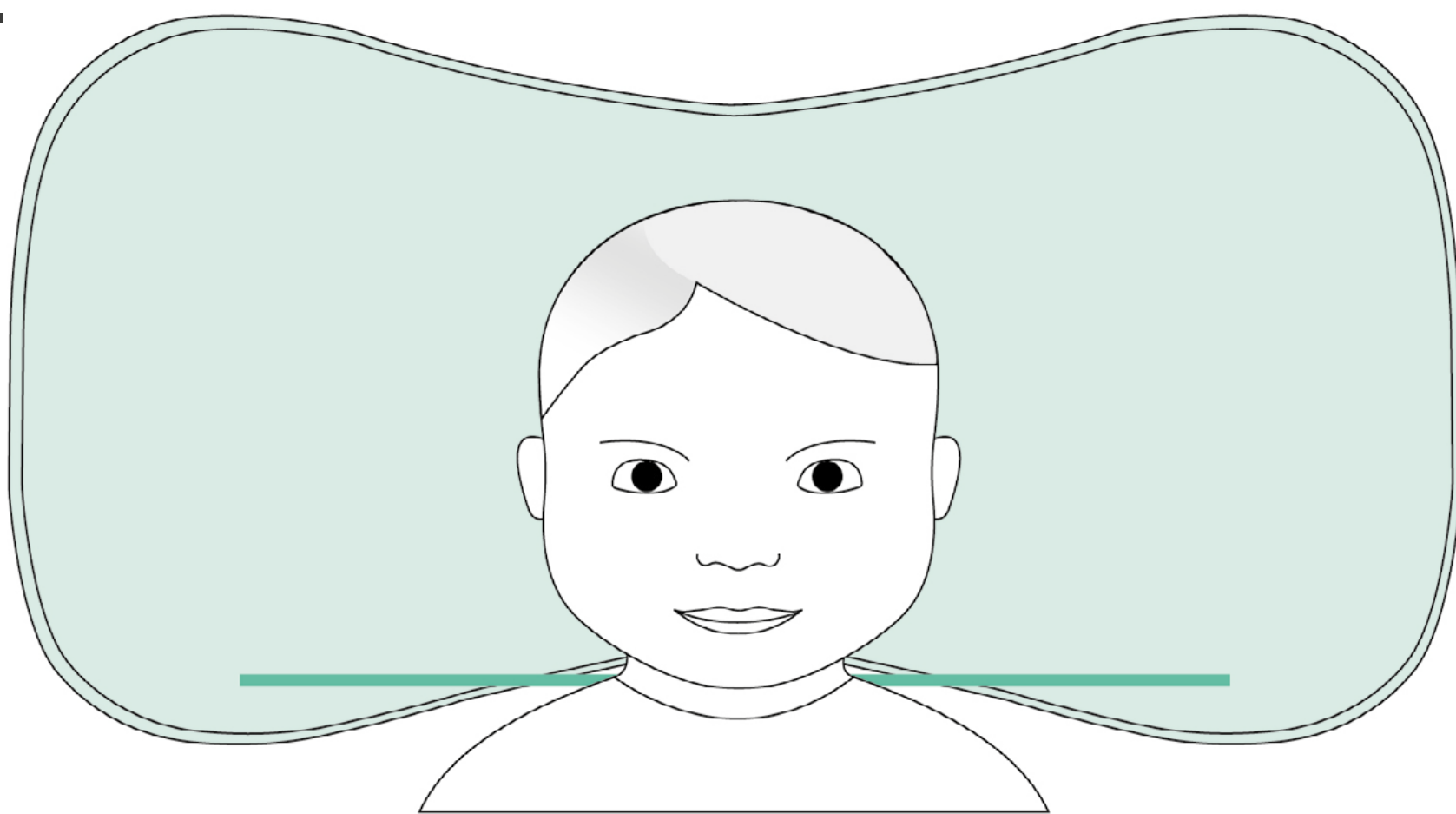

3.

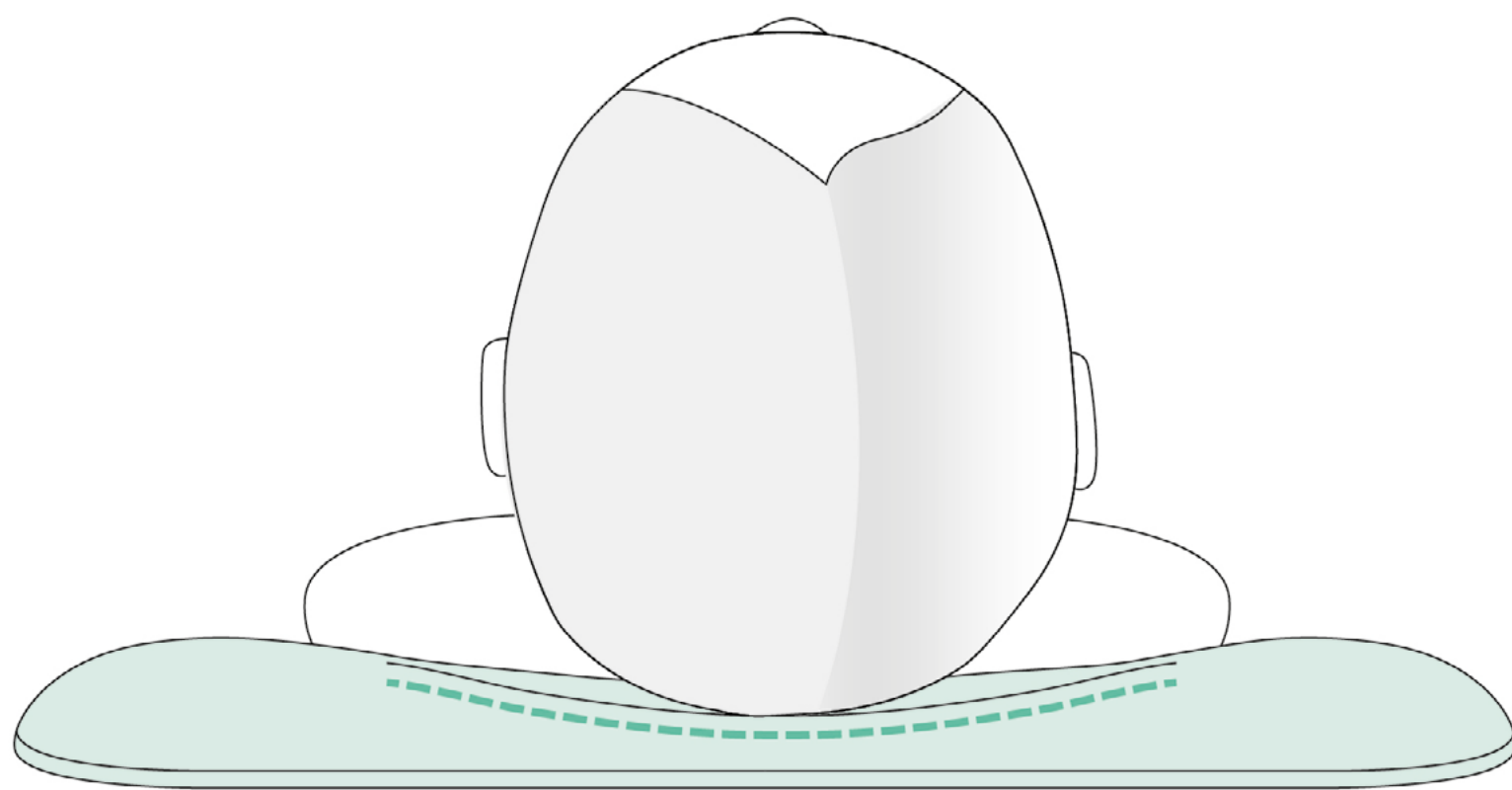

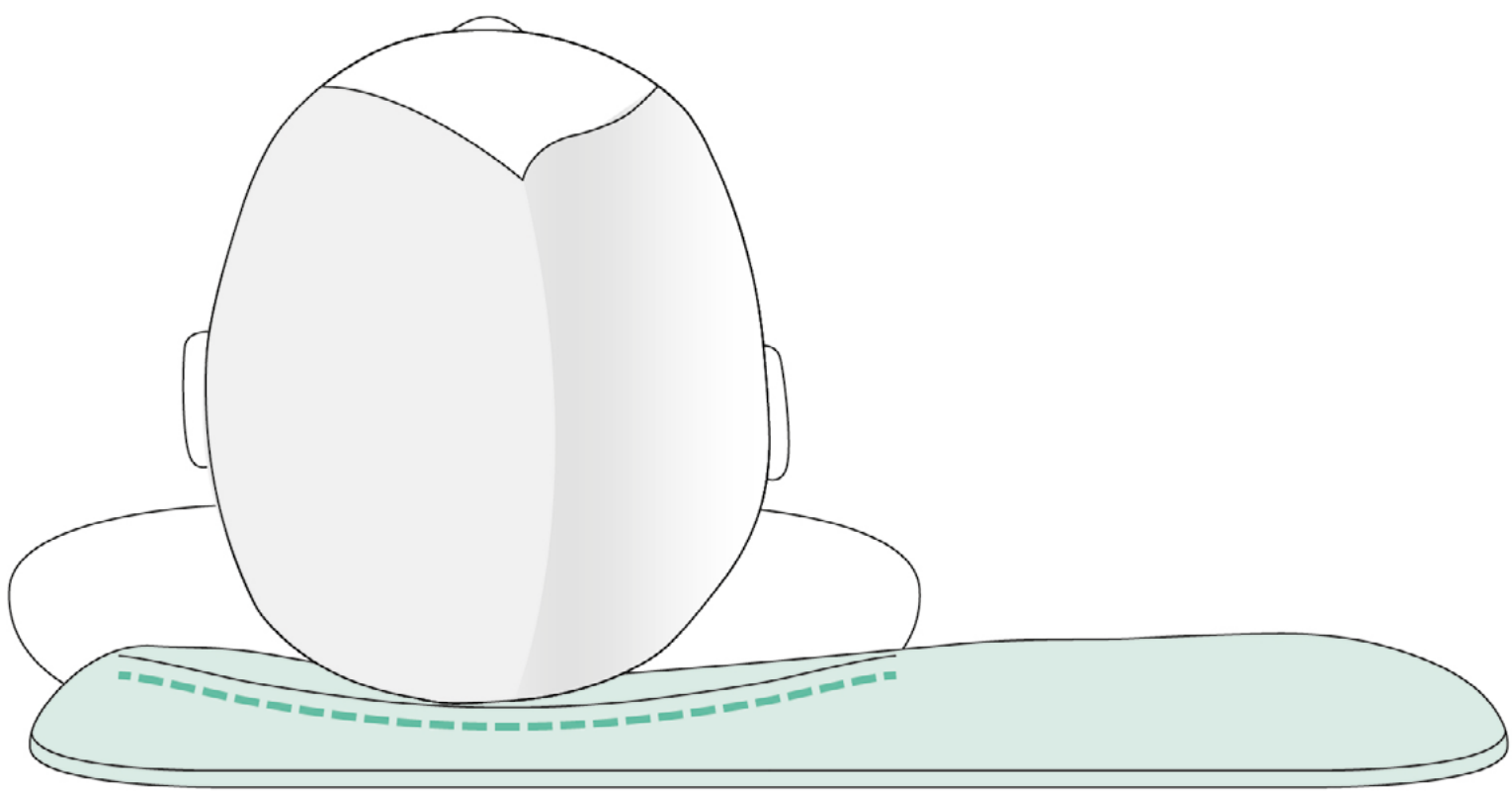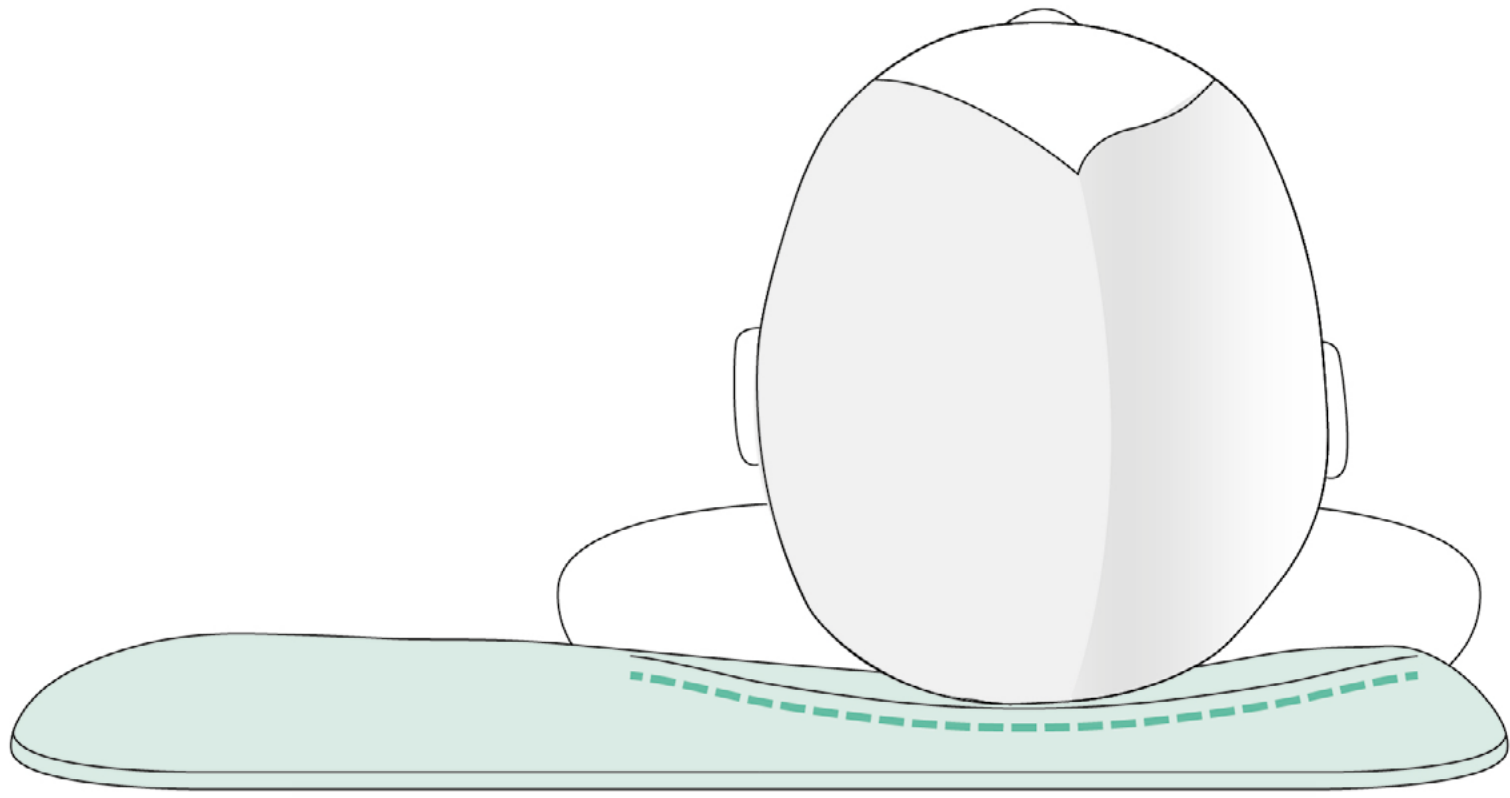

Come utilizzo Koala Perfect Head Maxi ?

Koala Perfect Head Maxi non è un semplice cuscino per neonati, ma **un dispositivo medico di Classe 1 per la prevenzione e il trattamento della Plagiocefalia e Brachicefalia.**

Koala Perfect Head Maxi è progettato appositamente per essere utilizzato nelle culle da cosleeping, nel lettino e nei letti. Può essere utilizzato anche per i giochi sul tappetone o nella palestra.

Si utilizza fino ai 36 mesi. È l'ideale sia nei primi giorni che quando il bimbo crescendo inizierà a muoversi di più. Infatti, le sue dimensioni (50 cm) fanno sì che il bambino possa muoversi liberamente lateralmente senza che la sua testa venga a trovarsi fuori dal cuscino coniugando la necessità di prevenzione della plagiocefalia e della brachicefalia con il fisiologico sviluppo psicomotorio.

- 1. Posiziona il bambino sempre in posizione supina** (con il viso rivolto verso l'alto) fino al compimento del primo anno di età
- 2. Posiziona la nuca del bambino al centro del cuscino,** in corrispondenza dell'avvallamento centrale: il cuscino è progettato in modo da assicurare il massimo comfort al bambino, che crescendo sarà libero di muoversi liberamente. Allo stesso tempo garantisce una ripartizione ottimale delle pressioni del cranio anche al di fuori dell'avvallamento.
- 3. Accertati che le spalle rimangano fuori dal cuscino:** questo consente di mantenere la corretta postura della schiena e della cervicale e fa sì che la nuca sia centrata nell'apposito avvallamento centrale

Seguendo correttamente questi tre semplici passi, il memory foam distribuirà la pressione della testa del piccolo su una superficie ampia, riducendo le pressioni localizzate che causano la Plagiocefalia.

Lo spessore ridotto del cuscino è stato progettato per garantire la postura ideale della testa e della schiena ed evitare che il collo si pieghi in avanti verso il petto, mantenendo le vie aeree sempre aperte.

Raccomandiamo di utilizzare Koala Perfect Head *Air* sotto la supervisione di un adulto finché il bimbo non è in grado di rotolare su sé stesso autonomamente, in accordo con le linee guida dell'OMS.

Come lavare Koala Perfect Head Maxi ?

La federa esterna è sfoderabile e lavabile in lavatrice a 30°.

Indicazioni per il lavaggio della federa:

- Se la federa è particolarmente sporca è possibile lavarla anche a 40°. Tuttavia, con lavaggi a questa temperatura non è garantita la medesima resistenza del cotone.
- Ci raccomandiamo di non candeggiare, non stirare, non pulire a secco e non utilizzare smacchiatori con solventi.

È fondamentale non lavare il cuscino interno in memory foam. Se immerso in acqua, il memory foam la assorbirà, perdendola sua forma e diventando inutilizzabile.

Come è fatto Perfect Head Maxi ?

Federa: 75% Cotone, 25% Polyester

Cuscino: 100% Memory Foam



koalababycare.com

help@koalababycare.com