




koala  
babycare


# koala perfect head

mode d'emploi


1.

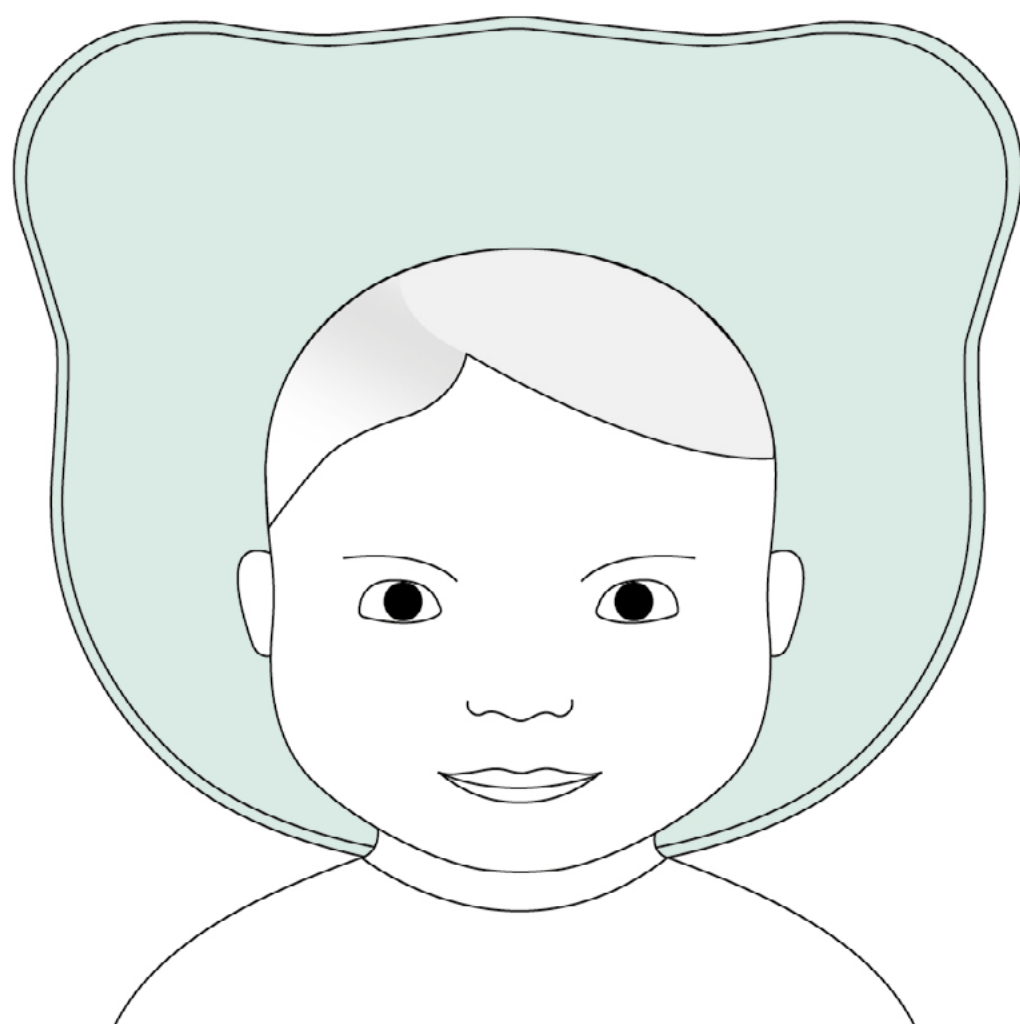

2.

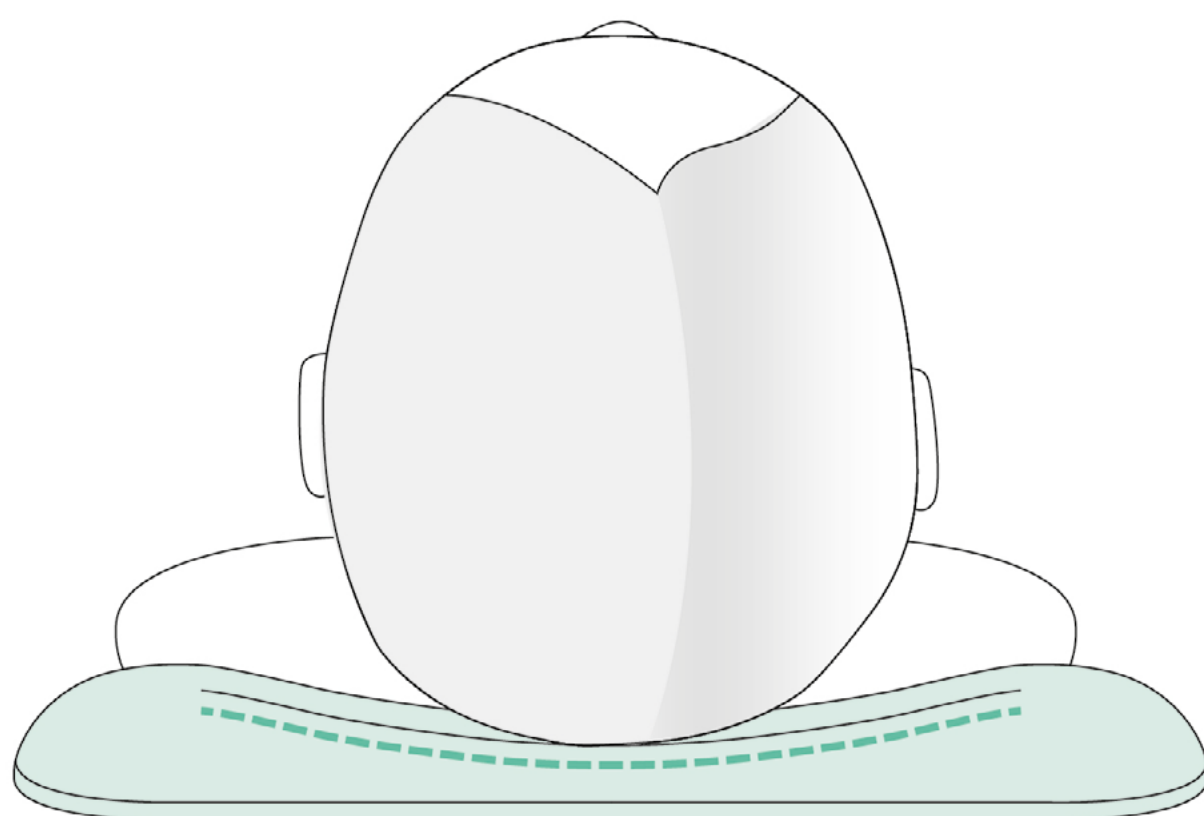

3.

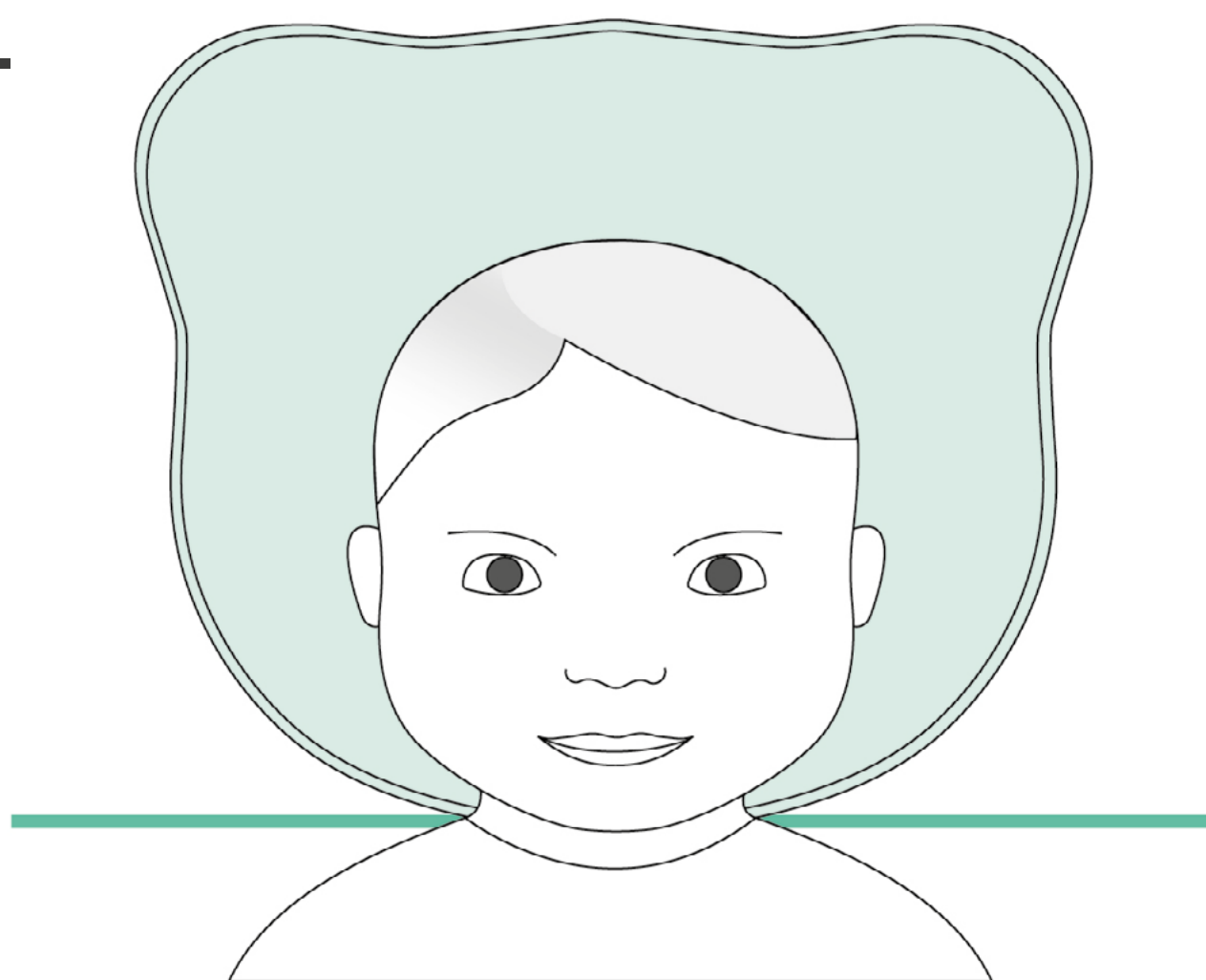

## Comment utiliser Koala Perfect Head ?

- 1) **Placez toujours l'enfant couché sur le dos** (le visage vers le haut).
- 2) **Placez la nuque du bébé au centre du trou:** de manière à ce que la pression soit bien répartie uniformément sur tout le crâne, évitant que la nuque ne s'aplatisse.
- 3) **Assurez-vous que les épaules restent à l'extérieur de l'oreiller:** cela permet de maintenir la bonne posture du dos et du cou, garantissant que la nuque soit centrée dans le trou approprié.

En suivant correctement ces trois étapes simples, la memory foam répartira la pression de la tête du bébé sur une grande surface, réduisant ainsi les pressions localisées qui causent la Plagiocéphalie.

Votre bébé retire-t-il la tête de l'oreiller pendant la journée ? Ne vous inquiétez pas, il est normal que les bébés à partir du deuxième mois deviennent plus actifs et bougent davantage, en changeant de position. Nous vous suggérons de le vérifier périodiquement pour repositionner sa tête sur l'oreiller lorsque cela est nécessaire, afin de maximiser son efficacité.

Nous vous recommandons d'utiliser le Koala Perfect Head sous la surveillance d'un adulte jusqu'à ce que le bébé soit capable de se déplacer tout seul.

## Comment laver Koala Perfect Head ?

La taie d'oreiller extérieure est amovible et lavable en machine à 30°.

Instructions pour laver la taie d'oreiller :

- Si la taie d'oreiller est particulièrement sale, elle peut également être lavée à 40°. Cependant, avec un lavage à cette température, la même résistance que le coton n'est pas garanti.
- Nous vous recommandons de ne pas blanchir, de ne pas repasser, de ne pas nettoyer à sec et de ne pas utiliser de détachants avec des solvants.

Il est essentiel de ne pas laver l'oreiller interne en memory foam. Si elle est immergée dans l'eau, la mousse à mémoire de forme l'absorbera, perdra sa forme et deviendra inutilisable.

## **Comment est fabriqué Koala Perfect Head ?**

Taie d'oreiller : 75 % coton, 25 % polyester

Oreiller : 100 % Memory Foam



[koalababycare.com](http://koalababycare.com)

[help@koalababycare.com](mailto:help@koalababycare.com)