


Acekool Earwax Removal EV1


Acekool

Ear Wax Removal EV1

INSTRUCTION MANUAL



Product Illustration

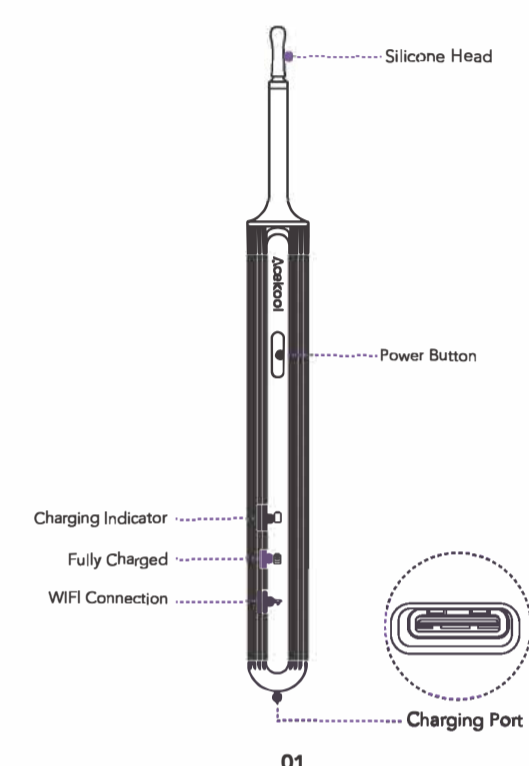

01


Steps to Use on the Phone

Step 1: Download "Suesar" App

For IOS:
Download and install the App "Suesar" from App Store.

For Android:
Download and install the App "Suesar" from Google Play Store.

Optional:
Scan the QR Code below to download the App.




Compatible Devices:
Android 4.4, IOS 9.0 and higher version.
iPhone 13 / 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 11, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S/5, iPhone 6 / 6S Plus, iPhone 5 / 5S/5C, etc.

Notice: This model can't work for computer system!

02


Step 2: Connection steps

1 Long press the switch key to open device, after 3 seconds, then step into next operation.



03


4 After the mobile phone displays "Suesar-xxxx" WIFI is connected, return to the App again and click the house icon to enter the device.

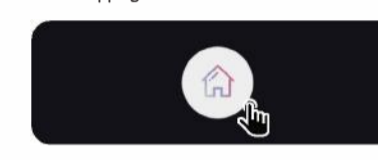

After connecting to the product WIFI connection, you will be asked some questions:


IOS:
"Suesar" would like to find and connect to devices on your local network.
Suggestion: Click "Keep".

Android:
If your mobile phone displays the following prompts, WIFI has no data connection, whether to continue trying to use the WIFI? Whether to keep the connection? Whether to switch the WIFI?
Suggestion: Click "Keep" / "CONNECT" / "Decline" option.

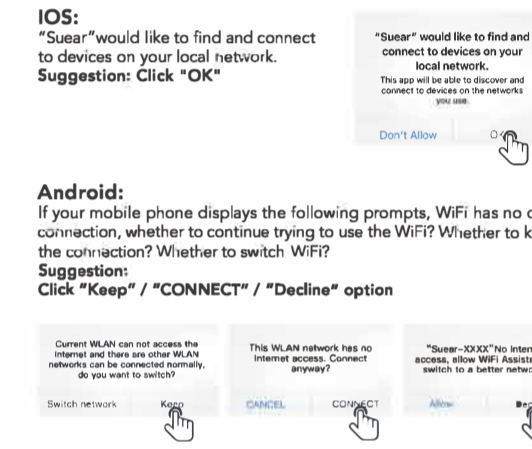


04

Interface Introduction

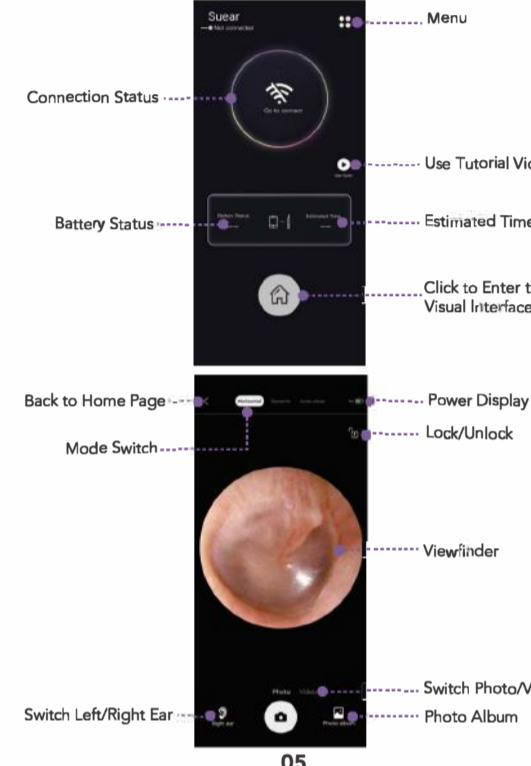

05

Ear Pick Accessories

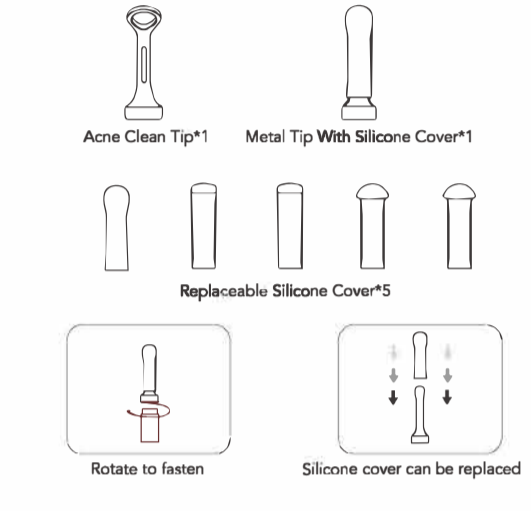

06

1 You can choose a tip which should be wipe by wet tissue or alcohol before use, if need, you can replace it with.

2 You should be careful or slowly go into your ear canal, then tracking it from APP to get the environment of ear canal.

Product Parameter


Product Name: Ear Wax Removal	Working Frequency: 2.4Ghz
Network Standard: IEEE 802.11b/g/n	Image Sensor: CMOS
Image Transmission Rate: 30fps	Battery Capacity: 350mAh
Environment Temperature: 10-50°C	Charging Time: 1.5h
Battery Life: About 90 minutes	Working Voltage: 3.7V4.2V
Input Parameter 5V=0.4A	Lens Diameter: 3.5mm
Rate Power 0.75W	Pixel: 5MP
Best Focal Length: 1.5-2cm	Charging port: USB2.0
Gravity Sensor: 6 Axis	

07


Troubleshooting

Problems	Suggestions
Cannot save pictures or videos to your phone	Allow Suesar to access photos, media, and files on your device
Camera is no response, camera doesn't light up	Please charge the device
APP crashed	Please uninstall APP and scan the QR code to install 1. Make sure your phone is connect to the "Suesar-XXXX" WIFI. 2. The question: The WLAN network has no Internet access. Connect anyway? Please be sure to choose the "Connect" if you choose "CAN-CEL" at the first time, you need to forget network of the "Suesar-XXXX" WIFI on your phone then connect with the WIFI again, continue to open the app, and choose "CONNECT" of this question so that it can work properly. 3. Enter your mobile device setting and allow the "Suesar" app to access "WLAN" or "WLAN & Cellular Data". 4. Close the App and open it again. 5. Turn the mobile phone data on then off again.
Live image does not show after launching the app	
Ear endoscope's red light on	Please charge the product
WIFI connection break	Please restart ear endoscope, open the app, connect to WIFI


08



Model: AC-X8
Email: support@acekool.jp
Website: https://www.acekool.jp
Made in China



各部の名称

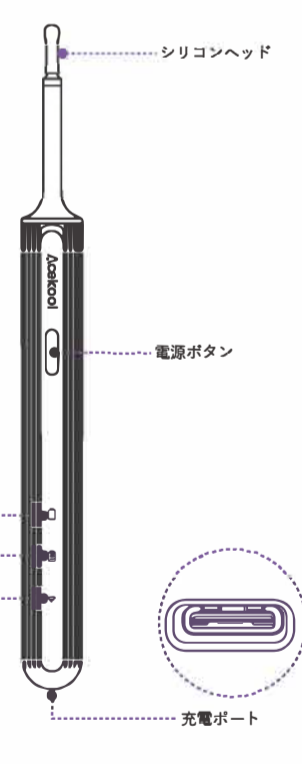

09


操作方法

ステップ1: Suesarアプリをダウンロードする

IOSの場合:
App StoreからApp "Suesar"をダウンロードしてインストールします。

アンドロイド用:
Google PlayストアからApp "Suesar"をダウンロードしてインストールします。

オプション:
以下のQRコードをスキャンしてアプリをダウンロードしてください。



互換性のあるデバイス:
Android 4.4, IOS9.0以降のバージョン。
iPhone 13/13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 11, iPhone X, iPhone8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6 / 6S, iPhone 6 / 6S Plus, iPhone 5 / 5S / SEなど。


Samsung Galaxy / Xiaomi / OPPO / Sony Xperia / Google Nexus / Asus / Fujitsu など。

お知らせ: このモデルは、パソコンなど対応できません。


10

ステップ2: 接続手順


1 スイッチボタンを長押ししてデバイスを開き、3秒後に、次の操作に進みます。



2 "Suesar"アプリを開き、"接続する"アイコンをクリックし、ポップアッププロンプトに従って、接続をクリックして、モバイルWIFI設定インターフェイスに移動します。

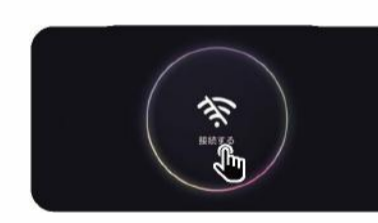


3 WIFI設定インターフェイスで"Suesar-xxxx"を見つけ、クリックして接続します。



11


4 スマートフォンに"Suesar-xxxx"と表示されたら、WIFIが接続されています。もう一度アプリに戻り、ホームのアイコンをクリックしてデバイスに入ります。



製品にWIFI接続をした後、いくつかの質問があります。


IOS:
"Suesar"は、ローカルネットワーク上のデバイスを通じて接続したいです。
[OK] ボタンをクリックしてください。

Android:
スマートフォンに次のプロンプトが表示された場合、WIFIにデータ接続がありません。
WIFIを使用するかどうか? 接続を維持するかどうか? WIFIを切り替えるかどうか?
[接続] ボタンをクリックしてください。




12

インターフェイスの紹介

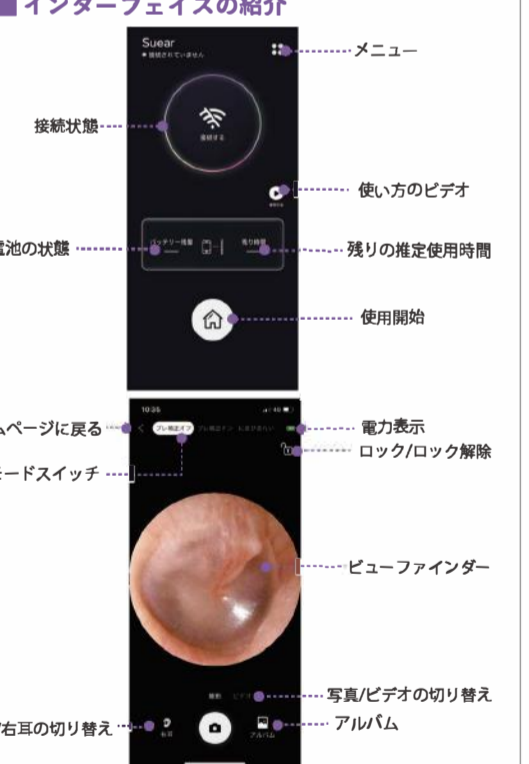

13

耳かきアクセサリ

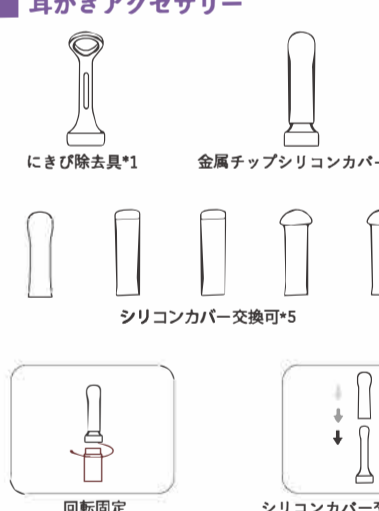

14

1 必要に応じて、使用前にウェットティッシュまたはアルコールパッドで拭く必要のあるカバーを選択できます。自由に交換することができます。

2 ゆっくりと外耳道に入れてください。次に、APP から追跡して、外耳道の状況を確認します。

製品の仕様

製品名: 耳かきカメラ	動作WIFI周波数: 2.4Ghz
ネットワーク標準: IEEE 802.11b/g/n	カメラセンサー: CMOS
画像転送速度: 30fps	バッテリー容量: 350mAh
周囲温度: 10-50°C	充電時間: 1.5h
バッテリー: 約90分	動作電圧: 3.7V4.2V
入力パラメータ: 5V=0.4A	レンズ直径: 3.5mm
定格パワー: 0.75W	ピクセル: 5MP
ベストフォーカス: 1.5-2cm	充電ポート: USB2.0
重力センサー: 6 Axis	

15

よくあるご質問

質問	回答
携帯電報に写真やビデオを保存できません	SUEARがデバイスに写真、メディア、ファイルがアクセスできるよう許可してください。
カメラが応答しない、カメラが点灯しない	デバイスを充電してください。
アプリがクラッシュしました	アプリをアンインストールしてください、その後QRコードをスキャンしてください 1. お使いの携帯電話が「Suesar-XXXX」WIFIに接続されていることを確認します。 2. 質問: このWLANネットワークはインターネットにアクセスしていません。接続しますか?必ず「接続」を選択してください。最初に「キャンセル」を選択した場合は、「Suesar-XXXX」のネットワークネットワークを接続する必要があります。スマートフォンでの操作をもう一度確認してください。この質問の接続を選択して正しく接続するようにします。 3. モバイルデバイスの設定に入り、「Suesar」アプリが「WLAN」または「WLAN & Cellular Data」にアクセスできるようにします。 4. アプリを閉じてもう一度開きます。 5. 携帯電話のデータをオンにしてからもう一度オフにします
アプリ起動後、ライブ画像が表示されない	
耳内視鏡の赤いライトが点灯	製品を充電してください
WIFI接続の切断	耳の内視鏡を再起動し、アプリを開いて、WIFIに接続してください

16

品質保証書

この製品は、厳密な品質管理及び検査を経てお届けしたものです。お買い上げ日より1年以内に取り壊し修理の保証が有効な状態で使用して故障した場合には、下記の保証規定に準拠いたします。

保証期間:
本製品の品質保証期間は製品お買い上げ日(お引渡し日)より1年間です。

取扱い:
取扱説明書、表示等に記載された使用状態で保証期間内に故障した場合に限り無料で交換または返金をさせていただきます。

保証の免除事項:
保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
①保証書をご提供いただけない場合。
②指定の項目をご記入いただけない場合、あるいは文字が書き換えられた場合。
③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
④故障の原因がお客様による転送・移動中の衝撃による場合。
⑤地震、火災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
⑥修理や中古販売、オークション、転売等で購入された場合。
⑦お客様ご自身による改造または修理がもたらした故障された場合。
⑧保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
保証書は日本国内においてのみ有効です。

お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年
お客様	ご住所: 〒 お名前: TEL:
購入店名称	
注文番号	

※ご提供頂いた個人情報、保証書に基づくアフターサービスのためにご使用し、その他の目的に使用することは一切ございません。

本製品に関するご意見・ご質問がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

株式会社セック
〒211-0093
千葉県船橋市中山05-1-711
TEL: 050-3116-8370
メール: acekool.support@acekool.jp

17