

EN English

YES® COCO Certified Organic Personal Lubricant

YES® COCO is a luxurious, natural, plant–oil based lubricant with organic coconut and jojoba to nourish and condition intimate tissues, giving lasting lubricity and comfort.

YES® COCO is intended for use by adults and is not intended for use on damaged or broken skin.

Benefits of YES® COCO

YES® COCO assists your lovemaking by providing lubricity to enable penetration and to increase pleasurable glide and sensation. YES® COCO also promotes the day-to-day comfort of intimate tissues its richly nourishing formulation provides long-lasting soothing relief from vaginal dryness and/or discomfort associated with conditions such as menopause, vaginismus, lichen sclerosus/planus and other medical conditions including but not limited to gynaecologic cancer-related treatments.

Application Frequency

YES® COCO can be used freely and frequently according to the body's own needs. To enhance pleasure and ease in love making a 5ml application is typically sufficient, but more may be used if required.

How does YES® COCO work?

Physical protection – The natural plant oils in YES® COCO provide gentle physical protection to sensitive tissues.

Intensely moisturising – Plant oils condition tissues, no need to wash off.

Possible side effects

Side effects related to reinstating vaginal lubrication – you may experience some irritation, itching or burning whilst vaginal lubrication is restored to normal levels.

Rare side effects (affecting less than 1 in 1,000 people) may include discharge or infection. YES® COCO is not made with any known allergens, however there remains a remote possibility (as with anything applied to the body) that sensitisation/allergic reaction may occur.

WARNING: If irritation occurs, discontinue use. If symptoms persist seek medical advice.

Report **serious** side effects to The YES YES Company Ltd and your local health authority.

Interactions with vaginally applied medications/examinations

YES® COCO can be safely used with silicone vaginal dilators / trainers or menstrual cups.

WARNING: Not condom compatible

CAUTION: YES® COCO is not a contraceptive or spermicide.

YES® COCO should not be applied at the same time as other medications such as vaginal HRT, vaginal antifungal or antibacterial medications without consulting your pharmacist / physician.

Not suitable for use with the ThinPrep Pap test.

Storage

Store in a cool dry place (5–30°C). Keep out of direct sunlight. Use before expiry. Once opened, use within 48 hours.

Warning: If the seal on any applicator is damaged or opened DO NOT use, return to place of purchase.


Ingredients

Sunflower seed oil", Coconut oil", Jojoba seed oil", Hydrogenated palm oil", Hydrogenated Rapeseed oil", Grape seed oil", Tocopherol (Vitamin E).

* Organically grown ingredients 99% organic.

† Ingredients responsible for product effectiveness >99%

*Sustainably sourced palm oil

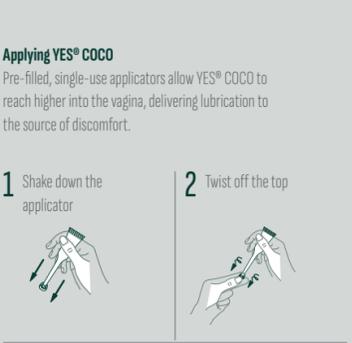

BG Български

Сертифициран органичен лубрикант за лична употреба YES® COCO

YES® COCO е луксозен натурален лубрикант на растителна основа с органичен кокос и жоjobа за подхранване и поддържане на интимните тъкани, като осигуряват дълготрайно смазване и създават комфорт.

YES® COCO е предначинан за употреба от възрастни и не трябва да се прилага върху увредена или наранена кожа.

Предимства на YES® COCO

YES® COCO улеснява вашите интимни изживявания, като осигурява смазване, за да се улесни проникването и да се увеличи приятното плъзгане и усещане. YES® COCO също така оказва благоприятно въздействие върху ежедневния комфорт на интимните тъкани чрез богата подхранваща формула, осигуряваща дълготрайно успокояващо облекчение от вагинална сухота и/или дискомфорт, създаани със състояния като менопауза, вагинизъм, лшени от склероза/планус и други медицински състояния, включително, но не само, гинекологични лечения, свързани с рак.

Прилагане на YES® COCO

Преварително натъпнените апликатори за еднократна употреба позволяват YES® COCO да достигне по-високо във вазианата, осигурявайки смазване на източника на дискомфорт.

- Разкъсайте апликатора
- Завъртете горната част
- Апликаторът може да се постави според личните удобство и предпочитания:

a) В седнало положение **b)** В изправено положение **в)** В легнало положение

4 След като го поставите, стиснете края на апликатора няколко пъти, за да освободите продукта

5 Когато е напълно празен, стиснете края на апликатора, за да го изтеглите по безопасен начин. Да не се използва повторно – риск от замърсяване.

6 Изхвърляйте чрез рециклиране (ако съществуват подходящи съоръжения)

Ако предпочитате, просто изстискайте крема върху ръката си, затоплете го, като го разтръквате между пръстите си, а след това използвайте върховете на пръстите си, за да нанесете върху пенниса или вагиналните тъкани и/или сравните усътни.

Честота на приложение

YES® COCO може да се използва свободно и често според собствените нужди на организма. За да се увеличи удоболствието и лекотата при интимните моменти, нанасянето на 5 ml обикновено е достатъчно, но може да се използва и повече, ако е необходимо.

Как действа YES® COCO?

Физическа защита – естествените растителни масла в YES® COCO осигуряват нежна физическа защита на чувствителните тъкани.

Интензивно овлажняване – растителните масла действат благоприятно на тъканите и няма нужда от измиване.

Възможни нежелани реакции

Странични ефекти, свързани с възстановяването на вагиналното смазване – може да изпитате известно дразнене, сърбеж или парене, докато вагиналното смазване се възстанови до нормални нива.

Редки нежелани реакции (засягащи по-малко от 1 на 1000 души) може да включват отделяне на секрет или инфекция. YES® COCO не съдържа никакви известни алергени, но остава отделена възможност (както при всеки продукт, приложен върху тялото) да възникне сензибилизация/алергична реакция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ако възникне дразнене, прекратете употребата. Ако симптомите продължават, потърсете медицинска помощ.

При **сериозни** нежелани реакции подайте сигнал до YES YES Company Ltd у здравния орган във вашя район.

Взаимодействие с вагинално прилагани лекарства/прелези
YES® COCO може безопасно да се използва със силиконови вагинални dilatатори/тренажори или менструални чашки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не е съвместимо с презервативи

ВНИМАНИЕ: YES® COCO не е контрацептив или спермицид.

Не бива да прилагате YES® COCO едновременно с други лекарства, като вагинална хормонозаместителна терапия, вагинални противогъбични или антибактериални лекарства, без да се консултирате с Вашя фармацевт/лекар.

Не е подходящ за употреба с места ThinPrep Pap.

Съхранение

Съхранявайте на хладно и сухо място (5 – 30°C). Дръжте далеч от пряка слънчева светлина. Използвайте преди изтичане на срока на годност. След отваряне използвайте в рамките на 48 часа.

Внимание: ако уплътнението на апликатора е повредено или отворено, НЕ използвайте. Върнете там, откъдето сте го закупили.

Съставки

Слънчогледово масло*, кокосово масло*, масло от Жоjobа*, хидрогенирано палмово масло†, хидрогенирано рапично масло*, масло от зрроздова семка †, tokoферол (Витамин Е).

* 99% органични съставки.

† Съставки, допринасящи за ефективността на продукта > 99%
*Устойчиво добито палмово масло

CS Čestina

Bio osobní lubrikant s certifikací YES® COCO

YES® COCO je luxusní přírodní lubrikant na bázi rostlinného oleje s obsahem bio kokosového a jojobového oleje, který vyživuje a ošetřuje intimní tkáň a poskytuje trvalou kluzkost a pohodlí.

YES® COCO je určen pro použití dospělými a není určen k použití na poškozenou nebo porušenou kůži.

Výhody YES® COCO

YES® COCO napomáhá vašemu milování tím, že zajistí lubrikaci, která umožňuje penetraci, zvyšuje kluzkost a umocňuje příjemné pocity. Díky svému složení, které poskytuje dlouhotrvající uklidňující úlevu od vaginální suchosti nebo nepohodlí spojeného se stavý, jako je menopauza, vaginismus, lichen sclerosus/planus a dalšími zdravotními stavy, jako jsou, mimo jiné, také následky léčby gynekologických nádorů, podporuje lubrikant YES® COCO také každodenní komfort intimních tkání.

Použití YES® COCO

Předpřipěné jednorázové aplikátory jsou vhodné k nanesení přípravku YES® COCO hlouběji do pochvy, kde působí jako lubrikant přímo v místě vzniku nepohodlí.

- Protřepjezte aplikátor
- Odšroubujte uzávěr.
- Aplikátor můžete zavést způsobem, který vám nejvíce vyhovuje: **a)** vsedě **b)** vstoje **c)** vleže
- Po zavedení uvolněte přípravek několika stisknutími konce aplikátoru.
- Po vyprázdnění stiskněte konec aplikátoru pro jeho bezpečné vytažení. Nepoužívejte opakovaně – nebezpečí kontaminace.
- Po použití zrecyklujte (pokud ve vaší zemi fungují příslušná zařízení).

Dele potřeby jednoduše vytlačte krém na ruku, třením mezi prsty ho zahřejte, a poté ho konečky prstů naneste na penis nebo vaginální tkáň nebo stydké pysky.

Četnost aplikace

YES® COCO lze používat libovolně a často podle vlastních potřeb těla. Pro ještě větší potěšení a usnadnění při mlování obvykle postačí nanesení 5 ml, ale v případě potřeby lze použít i více.

Jak funguje YES® COCO?

Fyzická ochrana – přírodní rostlinné oleje YES® COCO jemně chrání citlivé tkáňe.

Intenzivní hydratace – rostlinné oleje zajišťují péči o tkáňe, není třeba je smývat.

Možné nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky spojené s obnovením vaginální lubrikace – při obnovování vaginální lubrikace na normální úroveň můžete zaznamenat podráždění, svědění nebo pálení.

Mezi vzácné nežádoucí účinky, které postihují méně než 1 z 1000 osob, se může radit výtok nebo infekce. YES® COCO neobsahuje žádné známé alergeny, nicméně existuje malá pravděpodobnost (jako u všeho, co se aplikuje na tělo), že může dojít k senzibilizaci / alergické reakci.

VAROVÁNÍ: Pokud nastane podráždění, přerušete používání. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Nahlaste **závažné** nežádoucí účinky společnosti YES YES Company Ltd a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Interakce s vaginálně aplikovanými léky/vyšetřeními

YES® COCO lze bezpečně používat se silikonovými vaginálními dilatátory, posilovací pánevního dna a menstruačními kalisky.

UPOZORNĚNÍ: Není kompatibilní s kondomy

UPOZORNĚNÍ: Přípravek YES® COCO není antikoncepční prostředek ani spermicid.

YES® COCO by bez předchozí konzultace s lékařníkem/lékařem neměl být aplikován současně s jinými léky, jako je vaginální HRT, vaginální antimykotika nebo antibakteriální léky.

Není vhodný pro použití s testem ThinPrep Pap.

Skladování

Uchovávejte v chladu a suchu (5–30 °C). Chraňte před přímým slunečním zářením. Spotřebujte před datem expirace. Po otevření spotřebujte do 48 hodin.

Varování: Pokud je balení aplikátoru poškozeno nebo otevřeno, přípravek nepoužívejte a vraťte jej prodejci.

Složení

Slunečnicový olej*, kokosový olej*, jojobový olej*, hydrogennovaný palmový olej†, hydrogennovaný řepkový olej†, hroznový olej†, tokoferol (vitamin E).
*Organicky vypěstované suroviny (99% organické).

†Složky odpovědné za účinnost přípravku > 99%

* Palmový olej z udržitelných zdrojů

DE Deutsch

YES® COCO: zertifiziertes Bio-Gleitmittel

YES® COCO ist ein luxuriöses, natürliches Gleitmittel auf Pflanzenölbasis mit Bio-Kokosnuss und Bio-Jojoba, das nährend und pflegend auf das Hautgewebe im Intimbereich einwirkt und für dauerhafte Gleitfähigkeit und Komfort sorgt.

YES® COCO ist für Erwachsene bestimmt und nicht für die Anwendung auf beschädigter oder verletzter Haut geeignet.

Die Vorteile von YES® COCO

YES® COCO unterstützt Ihr Liebespiel, indem es für Gleitfähigkeit sorgt, um die Penetration zu ermöglichen und die Gleitfähigkeit und das Lustempfinden zu erhöhen. YES® COCO fördert auch das tägliche Wohlbefinden des Intimbereichs. Seine reichhaltige nährende Formel sorgt

für eine langanhaltende beruhigende Linderung bei vaginaler Trockenheit und/oder Beschwerden, die mit Erkrankungen wie Menopause, Vaginismus, Lichen sclerosus/planus und anderen medizinischen Erkrankungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf gynäkologische krebsbedingte Behandlungen, verbunden sind.

Die Anwendung von YES® COCO

Vorgefüllte Einweg-Applikatoren ermöglichen es YES® COCO, höher in die Vagina einzudringen und an der Quelle der Beschwerden für Gleitfähigkeit zu sorgen.

1. Schütteln Sie den Applikator nach unten

2. Schrauben Sie die Oberseite ab

3. Der Applikator kann nach persönlicher Vorliebe und Präferenz eingeführt werden:

a) Im Sitzen **b)** Im Stehen **c)** Im Liegen

4 Drücken Sie nach dem Einführen mehrmals auf das Ende des Applikators, um das Produkt freizusetzen

5 Drücken Sie nach dem Entleeren das Ende des Applikators zusammen, um ihn sicher herauszuziehen. Nicht wiederverwenden – Kontaminationsgefahr.

6. Entsorgung durch Recycling (sofern Möglichkeiten vorhanden)

Geben Sie einfach nach Belieben etwas Creme auf Ihre Hand und erwärmen Sie sie, indem Sie sie zwischen Ihren Fingern reiben. Tragen Sie sie dann mit Ihren Fingerspitzen auf die Haut des Penis oder des Vaginalbereichs und/oder die Schamlippen auf.

Häufigkeit der Anwendung

YES® COCO kann je nach den Bedürfnissen des Körpers nach Belieben und oft angewendet werden. Zur Steigerung der Lust und Leichtigkeit beim Liebespiel: Normalerweise genügt eine Anwendung von 5 ml, aber bei Bedarf kann auch mehr verwendet werden.

Wie funktioniert YES® COCO?

Physischer Schutz – die natürlichen Pflanzenöle in YES® COCO sorgen für einen sanften physischen Schutz des empfindlichen Gewebes.

Intensiv feuchtigkeitsspendend – Pflanzenöle pflegen das Gewebe; kein Abwaschen nötig.

Mögliche Nebenwirkungen

Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Wiederherstellung der vaginalen Lubrikation – Sie können möglicherweise eine Reizung, Juckreiz oder Brennen verspüren, während die vaginale Lubrikation wieder auf ein normales Niveau gebracht wird.

Seltene Nebenwirkungen (betrifft weniger als 1 von 1.000 Personen) können Ausfluss oder Infektionen umfassen. YES® COCO wird nicht mit bekannten Allergenen hergestellt, es bleibt jedoch eine geringe Wahrscheinlichkeit (wie bei allem, was auf den Körper aufgetragen wird), dass eine Sensibilisierung/allergische Reaktion auftreten kann.

ACHTUNG: Wenn Reizungen auftreten, stellen Sie die Anwendung ein. Suchen Sie bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt auf.

Melden Sie **schwerwiegende** Nebenwirkungen der YES YES Company Ltd und Ihrer örtlichen Gesundheitsbehörde.

Wechselwirkungen mit vaginal applizierten Medikamenten/Untersuchungen

YES® COCO kann sicher mit Silikon-Vaginaldilatoren/Trainern oder Menstruationstassen verwendet werden.

ACHTUNG: Nicht für Kondome geeignet

ACHTUNG: YES® COCO ist kein Verhütungsmittel oder Spermizid.

YES® COCO sollte ohne Rücksprache mit Ihrem Apotheker/Arzt nicht gleichzeitig mit Medikamenten wie vaginaler HRT, vaginalen Antimykotika oder antibakteriellen Medikamenten angewendet werden.

Nicht für die Verwendung mit dem ThinPrep-Pap-Test geeignet.

Aufbewahrung

Kühl und trocken lagern (5–30 °C). Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Verwenden Sie es vor dem Ablaufdatum. Nach dem Öffnen innerhalb von 48 Stunden verwenden.

Achtung: Wenn die Versiegelung eines Applikators beschädigt oder geöffnet wurde, verwenden Sie das Produkt NICHT, sondern bringen Sie es stattdessen zur Verkaufsstelle zurück.

Inhaltsstoffe

Sonnenblumenöl*, Kokosöl*, Jojobasamenöl†, hydriertes Palmöl†, hydriertes Rapsöl†, Traubenkernöl†, Tocopherol (Vitamin E).

* Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau, 99 % biologisch.

† Inhaltsstoffe, die für die Produktwirksamkeit verantwortlitch sind > 99 %
* Palmöl aus nachhaltiger Herkunft

DK Dansk

YES® COCO certificeret økologisk personligt smøremiddel

YES® COCO er et luksuriøst, naturligt, planteoliebaseret smøremiddel med YES® COCO kokos og jojoba til at nære og pleje intime væv, hvilket giver varig smøring og komfort.

YES® COCO er beregnet til brug af voksne og er ikke beregnet til brug på beskadiget eller ødelagt hud.

Fordele ved YES® COCO

YES® COCO hjælper din elskov ved at give smøreevne for at muliggøre penetration og for at øge behagelig glidning og fornemmelse. YES® COCO fremmer også den daglige komfort af intimt væv, dens rigt nærende formulering giver beroligende lindring af vaginal tørhed og/eller ubehag forbundet med forhold som overgangsalder, vaginisme, lichen sclerosus/ planus og andre medicinske forhold, herunder, men ikke begrænset til, gynækologiske kræftrelaterede behandlinger.

Anvendelse af YES® COCO

Fyldte engangapplikatorer gør det muligt for YES® COCO at nå højere op i skeden og levere fugt og smøring til kilden til ubehag.

1. Ryst applikatoren

2. Drej toppen af

3. Applikatoren kan indsættes i henhold til personlig lethed og præference:

a) Siddende **b)** Stående **c)** Liggende

4. Når den er indsat, skal du klemme på enden af applikatoren flere gange for at frigive produktet

5. Når den er tæmt, skal du klemme på enden af applikatoren for at trække den sikkert ud. Må ikke genbruges – risiko for kontaminering.

6. Bortskaf ved genanvendelse (hvor der findes disse faciliteter)
Hvis det foretrækkes, skal du blot klemme cremen ud på din hånd, varm den op ved at gnide den mellem fingrene. Brug derefter fingerspidsene til at påføre på penis eller vaginalt væv og/eller kønsleber.

Anvendelsesfrekvens

YES® COCO kan bruges frit og ofte i henhold til kroppsens egne behov. For at øge fornøjelsen og lethed en elskov er brug af 5ml typisk tilstrækkelig, men mere kan bruges, hvis det er nødvendigt.

Hvordan virker YES® COCO?

Fysisk beskyttelse – De naturlige planteolier i YES® COCO giver blid fysisk beskyttelse til følsomme væv.

Intens fugtgivende – Planteolier plejer væv, ingen grund til at vaske af.

Mulige bivirkninger

Bivirkninger i forbindelse med genoprettelse af vaginal smøring – du kan opleve irritation, kløe eller en brandende fornemmelse, mens vaginal smøring genoprettes til normale niveauer.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 personer) kan omfatte udflåd eller infektion. YES® COCO er ikke fremstillet med kendte allergener, men der er stadig en minimal risiko (som med alt, der påføres kroppen), at der kan forekomme sensibilisering/allergisk reaktion.

ADVARSEL: Hvis der opstår irritation, skal brugenophøre. Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.

Indberet alvorlige bivirkninger til The YES YES Company Ltd og din lokale sundhedsmyndighed.

Interaktioner med vaginalt anvendte lægemidler/undersøgelser

YES® COCO kan anvendes sikkert med vaginale dilatatorer / træningsredskaber i silikone eller menstruationskopper.

ADVARSEL: Ikke kondomkompatibel

ADVARSEL: YES® COCO er ikke et svangerskabsforebyggende middel eller sædræbende middel.

YES® COCO bør ikke anvendes samtidig med andre lægemidler såsom vaginal HRT, vaginal svampedræbende eller antibakteriel medicin uden at konsultere dit apotek / din læge.

Ikke egnet til brug med ThinPrep Pap-testen.

Opbevaring

Opbevares køligt og tørt (5–30 °C). Holdes væk fra direkte sollys. Anvendes inden udløbsdato. Efter brug anvendes inden for 48 timer.

Advarsel: Hvis forsejlingen på en tube/applikator er beskadiget eller åbnet, må den IKKE anvendes, men skal returneres til købsstedet.

Ingredienser

Solsikkeolie*, kokosolie*, jojobafrøolie*, hydrogeneret palmeolie*, hydrogeneret rapsolie†, druekerneolie†, tokoferol [E-vitamin].

†

