




Leer antes de usar

Como precaución, deben utilizarse guantes y protección ocular al manipular sustancias y utilizar unidades de prueba. No perforo ninguna parte de la unidad. No retire la sonda una vez asegurada en la unidad. En el improbable caso de un derrame, enjuague completamente el área afectada con agua. Mantenga fuera del alcance de los niños. Todos los resultados son de presunción. Si es necesario, se pueden realizar pruebas de confirmación adicionales por un laboratorio competente.

Preparación de Prueba

1 Retire la sonda Smart-Tip™ de la unidad de prueba.

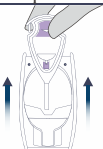

2 Muestree la sustancia sospechosa.

Tableta

Presione firmemente la sonda Smart-Tip™ en la tableta mientras frota en un movimiento circular hasta que la punta esté completamente cubierta con sustancia.



3 Asegure la sonda Smart-Tip™ en la unidad de prueba. Presione firmemente.




Las clavijas flexibles

Preparación de Prueba

PARE
No continúe a menos que la sonda esté bloqueada debajo de las clavijas flexibles y no pueda ser retirada de la unidad de prueba.

Identificación

4 Con **pulgar e índice**, apriete la cámara 1 hasta que se rompa la cápsula.

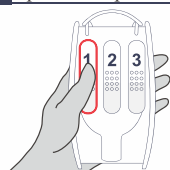

5 Sacuda suavemente la unidad de prueba durante 2 o 3 segundos.



Resultados



La aparición de un color púrpura dentro de un minuto indica la presencia de un opiáceo tal como **Morfina** o **Codeína**, si la sustancia es una tableta.



Si **no** se desarrolla color púrpura dentro de un minuto, **no** hay presente Morfina ni Codeína.




Proceda a Dilución (pasos 6-9) sin importar si aparece un color o no.



Dilución

6 Con **pulgar e índice**, apriete la cámara 2 hasta que se rompa la cápsula.

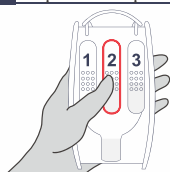


7 Sacuda suavemente la unidad de prueba durante 2 o 3 segundos.



Espera 5 minutos.
La ventana de prueba se calentará. Esto es normal.

Dilución

8 Con **pulgar e índice**, apriete la cámara 3 hasta que se rompa la cápsula.

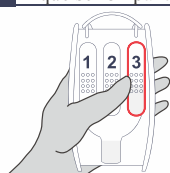

9 Sacuda suavemente la unidad de prueba durante 2 o 3 segundos.



La ventana de prueba se calentará. Esto es normal.



Eliminación Después de dilución es seguro eliminar el kit de prueba con la basura. SP 01-19

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Información importante

- Los kits discretos de prueba de drogas de IDenta Touch&Know™ se utilizan para determinar la presencia de ciertas drogas en sustancias como polvos, cristales, gránulos, escamas, píldoras, tabletas o líquidos.
- Todos los resultados son de presunción.** Si es necesario, se pueden realizar pruebas de confirmación adicionales por un laboratorio competente.
- Un alteración de color indica un resultado positivo para las drogas enumeradas **solo si ocurre dentro del primer minuto.** Si **NO** hay alteración de color dentro del tiempo indicado, las drogas enumeradas **NO** están presentes en la muestra analizada. Después de un minuto, la sonda y el líquido pueden alterar de color como un proceso normal de prueba y este alteración de color **NO** indica un resultado positivo.