

Instructions:

1. Wrap the lifter around the dog's torso with the straps fastened across their back. Adjust as needed.
2. Adjust underside cut-away profile as necessary, cinching forward to shorten (figure A).
3. Bring the chest strap around the front of your dog and clip to the opposite side; adjust as necessary. This helps keep the lifter in position and prevents it from slipping (figure B).

Anleitungen:

1. Legen Sie den Lifter um den Körper des Hundes und befestigen Sie die Gurte über dem Rücken. Bei Bedarf einstellen, damit alles gut passt.
2. Stellen Sie das Ausschnittsstück auf der Unterseite nach Bedarf ein; zum Kürzen nach vorne bewegen (Abbildung A).
3. Legen Sie den Brustgurt um die Brust des Hundes und befestigen Sie ihn mittels Klipp auf der gegenüberliegenden Seite; je nach Bedarf einstellen. Dies hilft dabei den Lifter in Position zu halten und verhindert, dass er abrutscht. (Abbildung B).

Cleaning Instructions:



Our product cleaning instructions will help ensure that your gear has a long, exciting life. Washing by hand and hang air-drying is the best way to care for your Kurgo products.

Reinigungsanleitungen:





Die Reinigungsanleitungen für unsere Produkte helfen dabei, dass sich Ihre Teile einer langen aufregenden Lebensdauer erfreuen. Waschen von Hand und Aufhängen zum Trocknen stellt die beste Art und Weise dar, Ihre Kurgo-Produkte zu pflegen.

Notice:

Please contact Kurgo directly with any product or warranty inquiries.

Hinweis:

Bitte wenden Sie sich bezüglich jedweder.

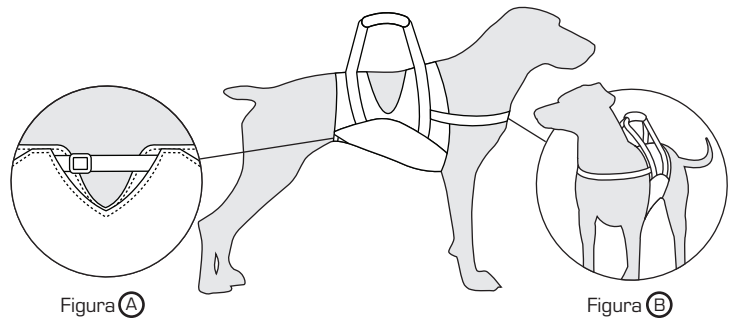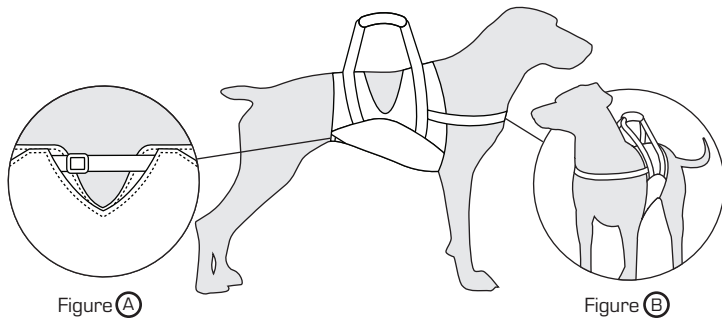

Instructions:

1. Enroulez le levage autour du torse du chien avec les sangles fixées sur leurs dos. Ajustez pour un ajustement parfait; ajuster au besoin.
2. Ajuster la portion inférieure au besoin en serrant l'avant pour le rapetisser (figure A).
3. Apportez la sangle de poitrine autour de l'avant de votre chien et le clip de l'autre côté; ajuster au besoin. Ceci permet au harnais de rester en place et l'empêche de glisser (figure B).

Instrucciones:

1. Envuelva el torso del perro con el arnés de soporte y ate las tiras en el lomo. Ajuste como sea necesario, hasta que quede perfecto.
2. Ajuste el recorte de la parte inferior según sea necesario, presionando hacia adelante para encogerlo. [Figura A].
3. Pase la correa del pecho por la parte delantera del perro y abróchela del lado opuesto. Ajuste si es necesario. Esto mantiene el arnés en su sitio y evita que se deslice. [Figura B].

Instructions de lavage:



Nos instructions de nettoyage des produits vous assurent que votre équipement aura une longue durée de vie. Laver à la main et suspendre pour sécher sont les meilleurs moyens de prendre soin de vos produits Kurgo.

Instrucciones de limpieza:



Nuestras instrucciones de limpieza le ayudarán a garantizar una estimulante y larga vida del equipo. La mejor manera de cuidar los productos Kurgo es lavarlos a mano y secarlos al aire libre.

Avis:

Veuillez communiquer toute demande relative aux produits ou au garantie directement à Kurgo.

Aviso:

Contacte directement a Kurgo para consultar sobre algún producto o garantía.