


Opticare®

eye drop dispenser

REF CG101

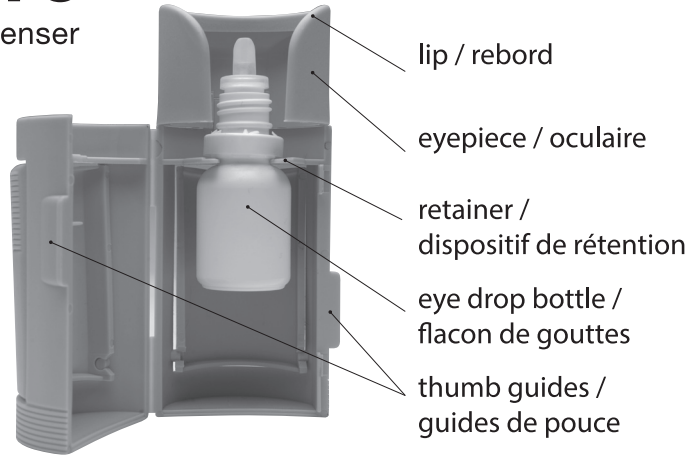

Opticare eye drop dispenser targets the eye and squeezes the bottle

L'applicateur de gouttes ophtalmiques cible l'oeil et comprime le flacon




Wash hands before use.

Se laver les mains avant utilisation.

1. Open Opticare using thumb guides. Loosen bottle cap but do not remove.

1. Ouvrez l'Opticare à l'aide des guides de pouce. Desserrez le bouchon du flacon mais ne le retirez pas.

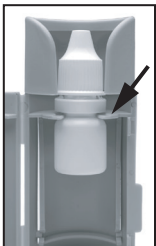

2. Place the bottle inside Opticare so that the retainer fits firmly around the base of the bottle neck.

2. Placez le flacon à l'intérieur de l'Opticare de façon à ce que le dispositif de rétention s'adapte fermement autour de la base du goulot du flacon.



2a. Some bottles require a bottle collar to ensure a secure fit. Slide collar (supplied) around the base of the bottle neck.

2a. Certains flacons ont besoin d'un collier de flacon pour assurer un bon ajustement. Glissez le collier (fourni) autour de la base du goulot du flacon.



2b. Place bottle inside Opticare as per step 2. The optional collar sits on top of the retainer and the base of the bottle neck sits below the retainer.



3. Close Opticare by clicking sides together securely. Open eyepiece to remove bottle cap before use.



4. Use finger to pull down lower eye lid. Tilt head back and rest lip of eyepiece gently against upper eye socket. Gently squeeze the side panels to deliver drop(s) into the eye. Replace bottle cap after use.

To ensure proper hygienic care, always wash Opticare in hot soapy water before installing a new eye drop bottle.

Opticare is designed for single person use and is compatible with a number of eye drop bottles. For a list, visit www.opticare.uk

Made in England by
Fabriqué en Angleterre par



MD

Cameron Graham Ltd
2-4 Lockwood House,
Lockwood Park
Huddersfield, HD4 6EN
Tel: +44 (0)1484 667 822

Email: info@cameron-graham.co.uk
www.opticare.uk

CUK
CA

2b. Placez le flacon à l'intérieur de l'Opticare comme à l'étape 2. Le collier facultatif s'installe sur le haut du dispositif de rétention et la base du goulot du flacon s'installe en dessous.

3. Fermez l'Opticare en faisant cliquer les côtés ensemble. Ouvrez l'oculaire pour retirer le bouchon du flacon avant l'usage.

4. À l'aide du doigt, tirez vers le bas sur la paupière inférieure. Inclinez la tête vers l'arrière et reposez doucement le rebord de l'oculaire contre la cavité de l'oeil. Appuyez doucement sur les panneaux latéraux pour instiller une ou plusieurs goutte(s) dans l'oeil. Remettez en place le bouchon du flacon après usage.

Pour de bons soins hygiéniques, lavez toujours l'Opticare dans l'eau chaude savonneuse avant d'installer un nouveau flacon de collyre.

Opticare est conçu pour une utilisation par une seule personne et est compatible avec un nombre des gouttes oculaires. Pour une liste, veuillez vous rendre sur www.opticare.uk

Distributed by
Distribué par

Canada
McArthur Medical Sales Inc.
1846 5th Concession West
Rockton, Ontario LOR 1X0
www.mcarthurmedical.com