

English

AH! YES® COCO is the same product as YES® OB in Applicators – rebranded for the USA. AH! YES® offers the same excellent customer service and great products for our customers in the USA. Please read this leaflet carefully before use

AH! YES® COCO – plant-oil based personal lubricant

AH! YES® COCO is a luxurious plant-oil based natural lubricant, with organic coconut and jojoba in boxes of 6 or 30 convenient pre-filled single-use applicators. AH! YES® COCO nourishes and conditions skin, giving temporary relief from vaginal dryness, lasting lubrication and comfort.

Description

- Natural, long-lasting plant-oil based intimate lubricant.
- All ingredients chosen for their beneficial skin properties.
- Enables discreet and hygienic delivery of the right amount to the right place.
- Enhances pleasure and ease in love making.
- The natural plant-based alternative to silicone lubricants.
- Not made with concerning ingredients (no glycerine, no hormones, no gluten, no petrochemicals, no parabens, no synthetic Silicone oils).
- Recommended by Health Care Professionals and trusted by women to ease and enhance comfort and provide lasting lubrication during sexual intercourse.
- Safe for use with silicone toys but not latex compatible.
- Not condom compatible
- Plant oils condition skin, no need to wash off.
- Can be used in showers, bathtubs and hot tubs (its long lasting)
- Certified Organic by the Soil Association (Bristol, UK), with 94% Certified Organic ingredients

Directions for use:

AH! YES® COCO assists your love making by enabling penetration, increasing pleasurable glide and sensation. When you want to reach higher in the vagina, this product offers you a discreet and convenient way to deliver lubrication in the right amount to the right place.

- To enhance pleasure and ease in love-making a 5ml applicator is typically sufficient, but more may be used if required.
- Applicators are single use only, dispose of applicator after use. DO NOT REUSE APPLICATOR. If additional lubrication is needed, use a new applicator or apply lubricant by hand

See diagram for instructions

Indications for use

AH! YES® COCO is a personal lubricant for vaginal and penile application, intended to moisturize and lubricate to enhance the ease and comfort of intimate sexual activity and supplement the body's natural lubrication AH! YES® COCO is NOT compatible with natural rubber latex, polyurethane or polyisoprene condoms.

Ingredients

AH! YES® COCO: Sunflower seed oil*, Coconut oil*, Jojoba seed oil*, Hydrogenated vegetable oil, Grape seed oil*, Tocopherol (Vitamin E).

* Organically grown ingredients.

Certified 94% organic by the Soil Association, Bristol, UK.

Storage: Store in a cool dry place between 41-86°F (5-30°C). Use before expiry date. Once opened use applicators within 48 hours. Keep out of direct sunlight.

Caution: AH! YES® COCO is not a contraceptive or a spermicide.

Warning: If the twist off cap is damaged or opened on any of the applicators enclosed DO NOT use, return to place of purchase. If irritation or discomfort occurs, discontinue use. If symptoms persist, seek medical advice.

NB. AH! YES® COCO is not suitable for use with the ThinPrep Pap smear test (see website)

Why certified organic?

When you buy something that is certified organic, not only are you making the best choice for your own wellbeing, your purchase is also supporting a system that respects human health, animals, wildlife and the environment. Certified organic products meet stringent standards and organic certification is your assurance that our ingredients and products have been grown and processed according to strict procedures. Only certified organic products have their production, processing, distribution and sales assessed to ensure the finest organic and ecological integrity.

Packaging and recycling

AH! YES® minimizes the environmental impacts of all our packaging. So please do help us achieve that aim. All our bottles are made from polyethylene which is the most widely accepted plastic by recycling centers. The cartons, boxes and package inserts can all be recycled.

100% Guarantee: AH! YES® products are 100% satisfaction guaranteed. Please contact us by telephone, live chat on the website or email if you have any concerns or questions about our products.

Certified Organic by: The Soil Association, Bristol, UK.

Approved by: The Vegetarian Society.

Manufactured in Great Britain for

Bio-Tech Lubricants Ltd, Contact: The Timber Barn, Selborne Road, Greatham, Liss, Hampshire, GU33 6HG, UK.

AH! YES® logos are registered trademarks of YES Syzygy Ltd.

Please contact us by telephone or email if you have any concerns or questions.

Contact us

USA Toll Free: 1-888-777-0125

Website: www.ahyes.org

Email: help@ahyes.org

Our love for Planet Earth is reflected in everything we do – creating glorious products that are amazing to use, kind to the environment, respectful of all life and natural.

Truly, madly, deeply natural.

Sarah and Susi

AH! YES® Founders

See our full range overleaf



XAMIFUC_V1_04-22

MADE WITH SAFE INGREDIENTS

MADE SAFE

MADE SAFE SCREENS
INGREDIENTS FOR KNOWN:

- ✓ BEHAVIORAL TOXINS
- ✓ CARCINOGENS
- ✓ DEVELOPMENTAL TOXINS
- ✓ ENDOCRINE DISRUPTORS
- ✓ FIRE RETARDANTS
- ✓ HEAVY METALS
- ✓ NEUROTOXINS
- ✓ HIGH RISK PESTICIDES
- ✓ REPRODUCTIVE TOXINS
- ✓ TOXIC SOLVENTS
- ✓ HARMFUL VOCs

It is imperative to follow manufacturer guidelines for use of certified products.

WWW.MADESAFE.ORG

Manufacturer

Storage conditions

Single use

Expiry date

Refer to the instructions for use

Español

AH! YES® COCO es el mismo producto que YES® OB en aplicadores, renombrado para EE.UU. AH! YES® ofrece el mismo excelente servicio al cliente y excelentes productos para nuestros clientes en los EE.UU.

Por favor, lea atentamente este prospecto antes del uso

AH! YES® COCO – Lubricante personal a base de aceite vegetal

AH! YES® COCO es un lujoso lubricante natural a base de aceite vegetal, con coco orgánico y jojoba, en cajas de 6 o 30 prácticos aplicadores precargados de un solo uso. AH! YES® COCO nutre y acondiciona la piel, brindando un alivio temporal de la sequedad vaginal, lubricación duradera y confort.

Descripción

- Lubricante íntimo natural de larga duración a base de aceite vegetal.
- Todos los ingredientes han sido elegidos por sus propiedades beneficiosas para la piel.
- Permite la aplicación discreta e higiénica de la cantidad correcta en el lugar correcto.
- Mejora el placer y la facilidad para hacer el amor.
- La alternativa natural a base de plantas a los lubricantes de silicona.
- No elaborado con ingredientes problemáticos (sin glicerina, sin hormonas, sin gluten, sin petroquímicos, sin parabens, sin aceites sintéticos de silicona).
- Recomendado por profesionales de la salud y probado por las mujeres, para facilitar y mejorar el confort y proporcionar una lubricación duradera durante las relaciones sexuales.
- Seguro para usar con juguetes de silicona pero no compatible con látex.
- No compatible con preservativos.
- Los aceites vegetales acondicionan la piel, no es necesario lavarlos.
- Se puede utilizar en duchas, bañeras y jacuzzis (es de larga duración).
- Certificado orgánico por la Soil Association (Bristol, Reino Unido), con un 94 % de ingredientes orgánicos certificados.

Instrucciones de uso:

AH! YES® COCO le ayuda a hacer el amor al permitir la penetración, aumentando el deslizamiento y la sensación placenteros. Cuando desee llegar más arriba en la vagina, este producto le ofrece una manera

discreta y conveniente de brindar lubricación en la cantidad correcta en el lugar correcto.

- Para aumentar el placer y la facilidad para hacer el amor, normalmente es suficiente un aplicador de 5 ml, pero se puede usar más si es necesario.
 - Los aplicadores son de un solo uso, deseché el aplicador después de su uso. NO REUTILICE EL APLICADOR. Si se necesita lubricación adicional, use un aplicador nuevo o aplique el lubricante a mano.
- Consulte el diagrama para obtener instrucciones

Indicaciones de uso

AH! YES® COCO es un lubricante personal para aplicación vaginal y en el pene, destinado a hidratar y lubricar para mejorar la facilidad y comodidad de la actividad sexual íntima y complementar la lubricación natural del cuerpo. AH! YES® COCO NO es compatible con preservativos de látex de caucho natural, poliuretano o poliisopreno.

Ingredientes

AH! YES® COCO: Aceite de semilla de girasol*, aceite de coco*, aceite de semilla de jojoba*, aceite vegetal hidrogenado, aceite de semilla de uva*, tocoferol (vitamina E).

* Ingredientes cultivados orgánicamente.

Certificado 94% orgánico por la Soil Association, Bristol, Reino Unido.

Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco entre 41-86°F (5-30°C). Utilizar antes de la fecha de caducidad. Una vez abiertos, utilice los aplicadores en 48 horas. Mantener el producto alejado de la luz solar directa.

Precaución: AH! YES® COCO no es un anticonceptivo ni un espermicida.

Advertencia: Si la tapa gorratoria está dañada o abierta en cualquiera de los aplicadores adjuntos, NO use el producto, devuélvalo en el lugar de compra. Si se produce irritación o malestar, suspenda el uso. Si los síntomas persisten, busque atención médica.

NB: AH! YES® COCO no es adecuado para su uso con la prueba de citología en medio líquido (ThinPrep Pap Test) (consulte el sitio web)

¡Por qué certificación orgánica?

Cuando compra algo que tiene certificación orgánica, no solo está tomando la mejor decisión para su propio bienestar, sino que su compra también respalda un sistema que respeta la salud humana, los animales, la vida silvestre y el medio ambiente. Los productos orgánicos certificados

cumplen con estándares estrictos, y la certificación orgánica es su garantía de que nuestros ingredientes y productos han sido cultivados y procesados de acuerdo con procedimientos estrictos. Solo los productos con certificación orgánica son evaluados en su producción, procesamiento, distribución y ventas para garantizar la mejor integridad orgánica y ecológica.

Embalaje y reciclaje

AH! YES® minimiza los impactos ambientales de todos nuestros envases. Por favor, ayúdenos a lograr ese objetivo. Todas nuestras botellas están hechas de polietileno, que es el plástico más aceptado por los centros de reciclaje. Los embalajes, las cajas y los insertos pueden reciclarse.

Garantía 100%: Los productos AH! YES® ofrecen un 100% de satisfacción garantizada. Comuníquese con nosotros por teléfono, chat en vivo en el sitio web o correo electrónico si tiene alguna inquietud o pregunta sobre nuestros productos.

Certificado orgánico por: The Soil Association, Bristol, Reino Unido.

Aprobado por: The Vegetarian Society.

Fabricado en Gran Bretaña para

Bio-Tech Lubricants Ltd, contacto: The Timber Barn, Selborne Road, Greatham, Liss, Hampshire, GU33 6HG, Reino Unido.

Los logotipos de AH! YES® son marcas registradas de YES Syzygy Ltd. Póngase en contacto con nosotros por teléfono o correo electrónico si tiene alguna duda o pregunta.

Contacte con nosotros

Número gratuito en EE. UU.: 1-888-777-0125

Sitio web: www.ahyes.org

Correo electrónico: help@ahyes.org

Nuestro amor por el Planeta Tierra se refleja en todo lo que hacemos: creamos espléndidos productos que son increíbles de usar, amables con el medio ambiente, respetuosos con la vida y naturales.

Verdaderamente, locamente, profundamente natural.

Sarah y Susi

Fundadoras de AH! YES®

Ve nuestra gama completa al dorso



Fabricante

Condiciones de almacenamiento

El aplicador es de un solo uso

Fecha de caducidad

Consulte las instrucciones de uso

AH! YES® COCO

Plant-oil based personal lubricant

PRE-FILLED APPLICATORS

AH! YES

Natural Intimate Health


XAMIFUC_V1_04-22

Directions for use – AH! YES® COCO in pre-filled Applicators

When you want to reach higher in the vagina, this product offers you a discreet and convenient way to deliver lubrication and moisture in the right amount to the source of discomfort.




1 Shake down the applicator
Agite el aplicador

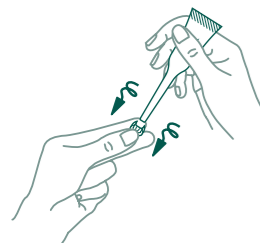


2 Twist off the top
Gire la tapa

Instrucciones de uso – AH! YES® COCO en aplicadores prellenados


Este producto le ofrece una manera conveniente y discreta de proporcionar hidratación y lubricación a la fuente de malestar en la cantidad adecuada, cuando busca tener un mayor alcance en la vagina.

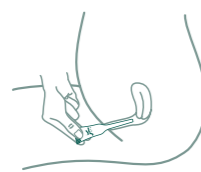

a)
How to insert the applicator when sitting
Cómo colocarse el aplicador sentado

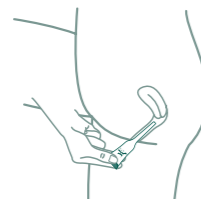


b)
How to insert the applicator when standing
Cómo colocarse el aplicador parado

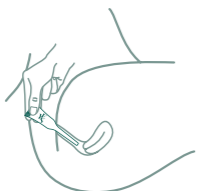

c)
How to insert the applicator when lying
Cómo colocarse el aplicador acostado

3 The applicator can be inserted from three different positions, according to personal ease and preference.
Se puede colocar el aplicador desde tres posiciones diferentes, según la facilidad y preferencia personal.

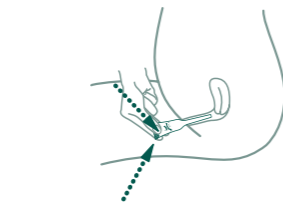

4 When inserted, squeeze the end of the applicator several times to release product high into the vagina.
Tras colocar el aplicador, comprima el extremo del mismo varias veces para liberar el producto dentro de la vagina.



5 When emptied, squeeze the end of the applicator to withdraw it safely. Do not reuse – Risk of contamination.
Una vez vacío, comprima el extremo del aplicador para retirarlo de manera segura. No reutilizar: peligro de contaminación.



6 Please dispose of the applicator tube and top by recycling.
Elimine tanto el aplicador como su tapa recicándolos.

The AH! YES® range

Whether you use a little or a lot, for pleasure or for health, discover the full AH! YES® collection of natural and organic intimate products, in a range of sizes and variants to meet your differing needs.



AH! YES® WB

Is an intimate lubricant formulated to hydrate and revitalize dry vaginal tissues and alleviate discomfort. AH! YES® WB is pH matched to the typical vaginal environment. Maintaining typical vaginal pH may help prevent Thrush and bacterial infections.



AH! YES® OB

Is a plant-oil based, longer-lasting lubricant and intense moisturizer, which is soothing and richly emollient. Nourishes delicate intimate tissues. Not condom compatible.



AH! YES® VM (Vaginal Moisturizer)

Is a long-lasting vaginal moisturizer. Designed to match the typical vaginal environment with none of the skin damaging or concerning chemicals typically found in vaginal moisturizers.



AH! YES® CLEANSE

Is a sensitively formulated intimate wash, designed to respect the delicate vaginal ecology, with a refreshing and effective cleansing action. Available in Unfragranced and Rose.

AH! YES!

Natural Intimate Health