

Hallufix® Produkte  
die richtige Entscheidung  
bei Hallux valgus

# Hallufix

INNOVATIVE ORTHOTIC SOLUTIONS



## Gebrauchsanweisung



Hallufix AG, Bavariafilmplatz 3  
D-82031 Grünwald


Tel. +49 (089) 96 05 779 - 0  
Fax +49 (089) 96 05 779 - 66

info@hallufix.de  
www.hallufix.com

(04.21/20.000)

Hallufix® ist ein eingetragenes Warenzeichen.


### Zehenspreizer

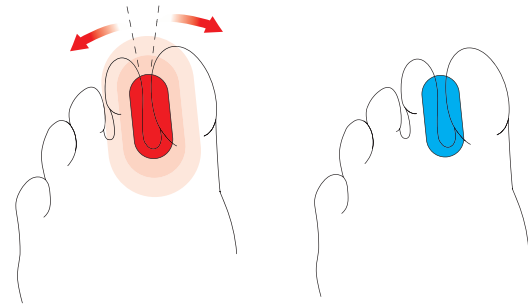

**Indikation:**  
Druckschmerz und Reibung  
verursacht durch eng  
beieinander oder  
übereinander liegende Zehen.

**Lösung:**  
Die Zehenspreizer  
trennen die Großzehe  
vom 2. Zeh.


**Anwendungsgebiet:** Trennt eng anliegende und verlagerte Zehen, z.B. bei Hallux valgus (Ballenzehen)  
**Wirkungsweise:** Die Hallufix® Softies Zehenspreizer trennen z.B. die Großzehe vom 2. Zeh oder generell eng anliegende Zehen und vermeiden damit beim Gehen in Schuhen Druckstellen, Wundreiben und Hautirritationen. Das weiche Gel ist hautfreundlich und ermöglicht eine optimale Anpassung an die Zehenzwischenräume.  
**Inhalt:** 2 Zehenspreizer (Größe siehe Packungsboden)

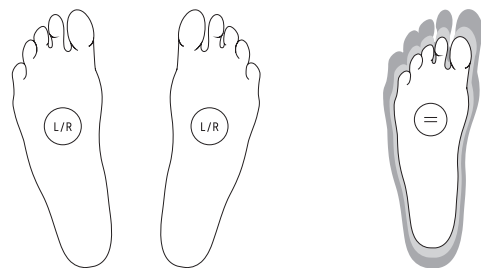

**Zehenspreizer**  
können links und rechts  
getragen werden

**Zehenspreizer**  
sind in zwei Größen  
verfügbar


### Hammerzehen Polster

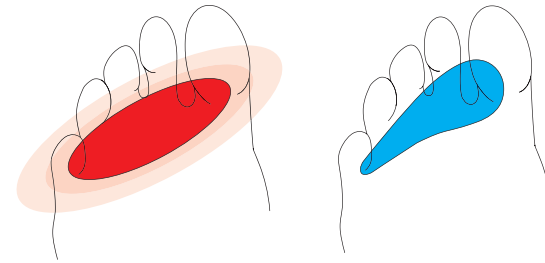

**Indikation:**  
Druckstellen und  
Wundreiben verursacht  
durch Zehenfehlstellung.

**Lösung:**  
Die Zehen werden durch  
die Polsterung gestreckt.


**Anwendungsgebiet:** Entlasten und schützen die Zehenkuppen bei Hammer- und Krallenzehe  
**Wirkungsweise:** Die Polster bringen die Zehen in eine gestreckte Position. Dadurch werden beim Gehen in Schuhen Druckstellen, Wundreiben und Hautirritationen an den Zehenoberseiten vermieden. Das weiche Gel ist hautfreundlich und ermöglicht eine optimale Anpassung an den Fuß.  
**Inhalt:** 2 Hammerzehenpolster (Größe siehe Packungsboden)

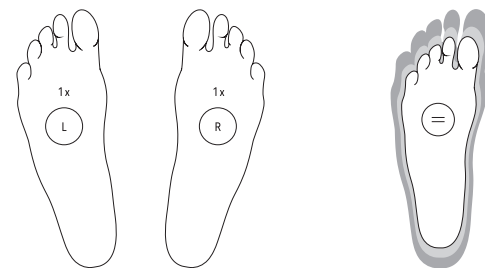

**Hammerzehen Polster**  
(1x Links + 1x Rechts)

**Hammerzehen Polster**  
ist in zwei Größen  
verfügbar


### Ballenschutz PLUS

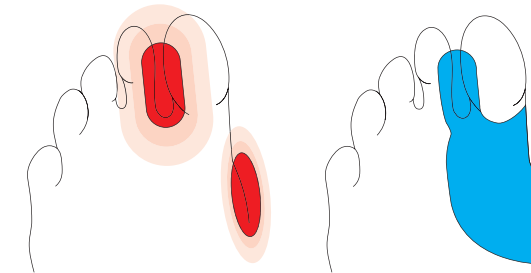

**Indikation:**  
Druckschmerz und  
Reibung zwischen den  
Zehen und am Ballen.

**Lösung:**  
Die Zehen werden  
getrennt und der  
Ballen geschützt.

**Anwendungsgebiet:** Hallux valgus (Ballenzehen)  
**Wirkungsweise:** Der Hallufix® Softies Ballenschutz PLUS schützt 2-fach. Der empfindliche Ballen wird optimal vor Reibung im Schuh geschützt. Gleichzeitig wird die Großzehe vom 2. Zeh getrennt. Die Kombination garantiert einen sicheren Halt. Druckstellen, Wundreiben und Hautirritationen werden vermieden. Das weiche Gel ist hautfreundlich und ermöglicht eine optimale Anpassung an den Fuß.  
**Inhalt:** 1x Ballenschutz mit Zehenspreizer, Einheitsgröße für den rechten und linken Fuß.

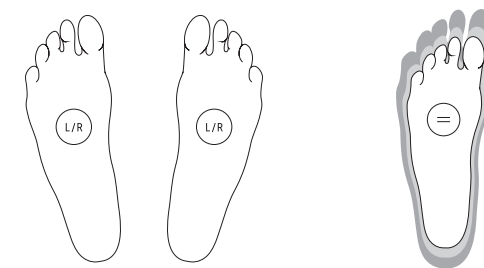

**Ballenschutz Plus**  
kann links und rechts  
getragen werden

**Ballenschutz Plus**  
ist für alle Fußgrößen  
geeignet

## Generelle Hinweise zu den Hallufix® Softies Produkten

**Material:** Das für medizinische Anwendungen eingesetzte TPE-Gel ist besonders für den Einsatz im orthopädischen Bereich geeignet. Flexibilität, optimale Rückstellkraft, rutschhemmend, stoßdämpfend und hygienisch, sind die Eigenschaften der Hallufix® Softies Produkte.

**Pflege:** Einfache Reinigung mit Wasser + Seife.

### Gegenanzeigen:

- Wenden Sie die Produkte nicht auf ungeschützten Wunden oder Geschwüren an.
- Es sind keine allergischen Reaktionen bekannt. Sollte trotzdem eine allergische Reaktion auftreten, wenden Sie die Produkte nicht mehr an.

**Nebenwirkungen:** Bei ordnungsgemäßem Gebrauch sind keine Nebenwirkungen bekannt.

**Entsorgung:** Das Produkt ist gemäß den national geltenden Vorschriften zu entsorgen.

**Gewährleistung:** Für Hallufix Softies wird bei sachgemäßer Verwendung eine Garantie von 3 Monaten ab Verkaufsdatum gewährt.

**Wiederverwendbarkeit:** Das Produkt ist nur zum Gebrauch für eine Person bestimmt und darf nicht von einer anderen Person wiederverwendet werden.



Hallufix  
INNOVATIVE ORTHOTIC SOLUTIONS

Hallux Valgus Softies - Verhindern Druckschmerz  
und Reibung bei Zehenfehlstellung.

Hallufix® products  
the perfect choice for  
Hallux valgus treatment

# Hallufix

INNOVATIVE ORTHOTIC SOLUTIONS



## Product Information




Hallufix AG, Bavariafilmplatz 3  
D-82031 Grünwald

Tel. +49 (089) 96 05 779 - 0  
Fax +49 (089) 96 05 779 - 66

info@hallufix.de  
www.hallufix.com

(04.21/20.000)  
Hallufix® is a registered trademark.


### Toe Spreader

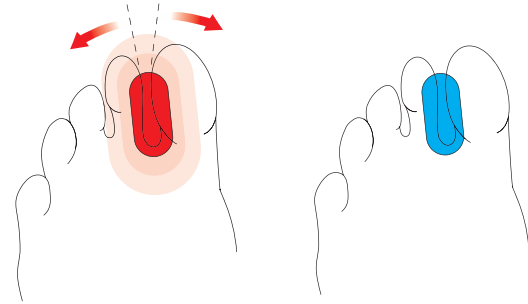

**Indication:**  
Pressure pain and  
chafing caused by toes  
that are close together or  
on top of each other.

**Solution:**  
The Toe Spreader  
separates the big toe  
from the 2nd toe.


**Recommended use:** Spreading of tight and displaced  
toes; Hallux valgus (bunion)  
**Mode of action:** Hallufix® Softies Toe Spreader gently  
spreads toes to prevent pressure marks, chafing and  
skin irritations. The soft gel gently creates space  
between the toes providing maximum comfort while  
walking.  
**Package content:** 2 Toe Spreader (see bottom of  
package for sizing)

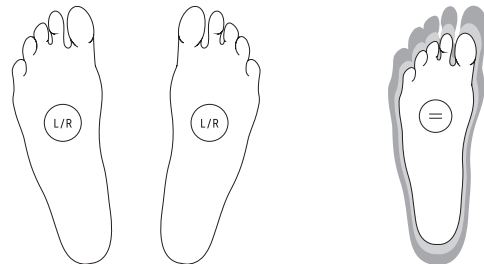

**Toe Spreader**  
can be worn left or right

**Toe Spreader**  
are available in two sizes


### Hammer Toe Crests

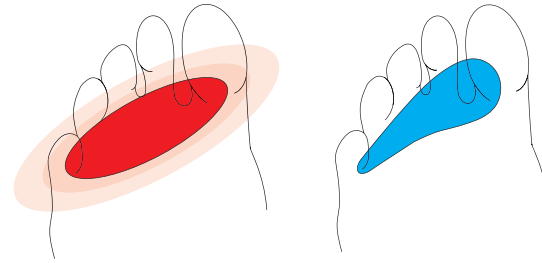

**Indication:**  
Pressure points and  
chafing caused by toe  
misalignment.

**Solution:**  
The toes are stretched  
by the cushion.


**Recommended use:** Hammer and claw toes  
**Mode of action:** Hallufix® Softies Hammer Toe Crests  
relieve and ease pressure on toe tips, caused by  
hammer or claw toes. The toe crests bring the toes in a  
stretched position. Wearing in shoes they avoid pres-  
sure marks, corns, calluses, blisters and skin irritation  
on the toe tips. The soft gel is skin friendly and allows  
optimal adjustment to the foot.  
**Package content:** 2 Hammer Toe Crests (see bottom of  
package for sizing)

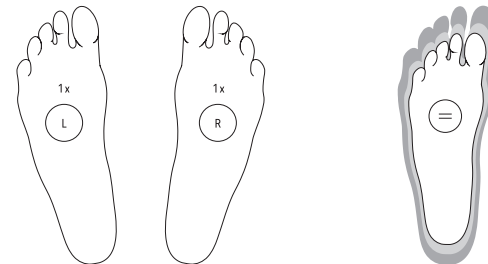

**Hammer Toe Crests**  
(1x left + 1x right)

**Hammer Toe Crests**  
are available in two sizes


### Bunion Protection PLUS

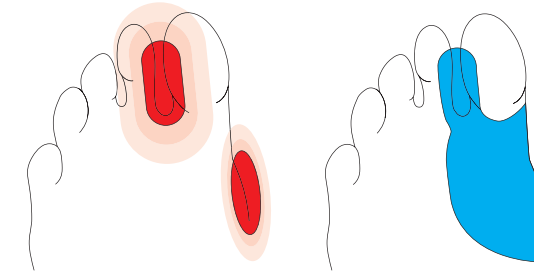

**Indication:**  
Bunion pain and chafing  
between toes.

**Solution:**  
The Bunion Protection  
PLUS protects the bunion  
and separates the big toe  
from the second toe.

**Recommended use:** Hallux valgus (bunion)  
**Mode of action:** Hallufix® Softies Bunion Protection  
PLUS protects twice. It separates the big toe from the  
second toe and protects the sensitive bunion while  
wearing shoes. Hallufix® Softies Bunion Protection  
PLUS prevent pressure marks, chafing and skin  
irritations. The soft gel gently creates space between  
the toes and molds the contour of the bunion providing  
maximum comfort while walking.  
**Package content:** 1 Hallufix® Bunion Protection PLUS,  
one size fits all

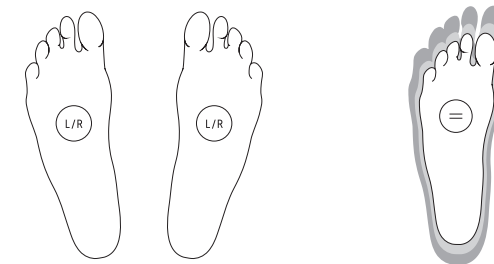

**Bunion Protection PLUS**  
can be worn left or right

**Bunion Protection PLUS**  
is suitable for all foot sizes.

## General Information on the Hallufix® Softies Products

**Material:**  
The TPE gel used in medical applications is particularly  
suited to use in the orthopaedic field. Flexibility, optimum  
reset function, slip-resistant, shock absorbing and  
hygienic, are characteristic attributes of the Hallufix®  
Softies Products.

**Cleaning:** Hand clean with water + soap.

### Contraindications:

- There is no known hypersensitivity or allergic reaction  
associated with the products when used correctly.
- Do not use on unprotected wounds or abscesses.

**Disposal:** The product must be disposed of in  
accordance with the nationally applicable regulations.  
**Warranty:** Hallufix Softies are guaranteed for 3  
months from the date of sale when used properly.  
**Reusability:** The product is only intended for use on  
one person and must not be reused on another person.



You want to know more  
about Hallux valgus (bunion) ?  
Visit our website: [www.hallufix.com](http://www.hallufix.com)

# Hallufix

INNOVATIVE ORTHOTIC SOLUTIONS