


CHARA WARM

Elektrisches Spa-Bett mit Heizung

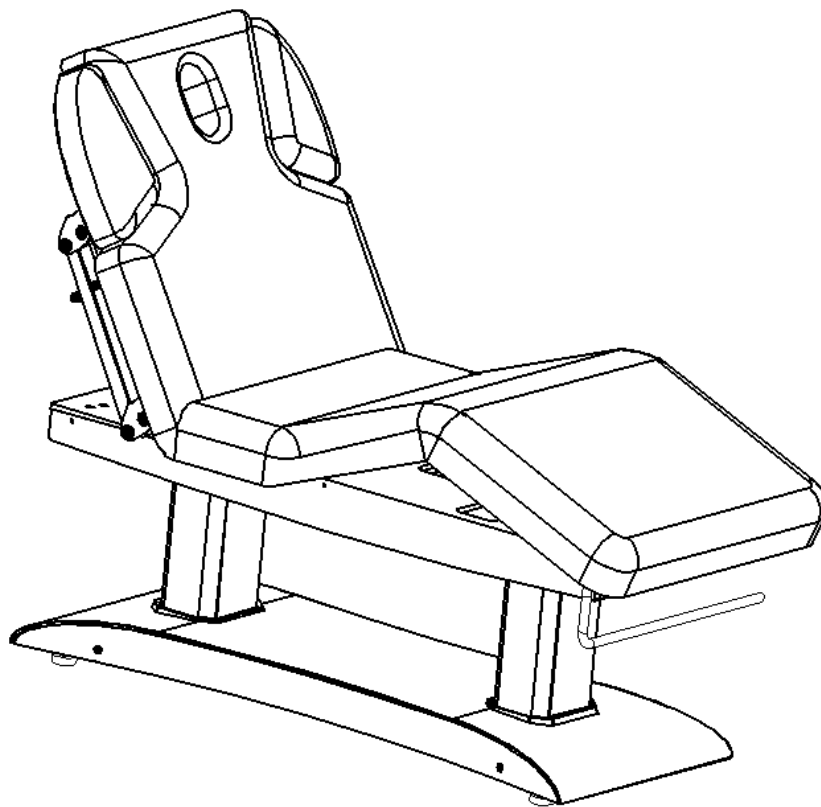


- Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Beachten Sie alle in diesem Handbuch enthaltenen Warnungen.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung immer griffbereit auf. Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, übergeben Sie die Bedienungsanleitung unbedingt, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Produkts ist.
- Einige Komponenten des Produkts können von der Abbildung in Katalogen, Websites, Broschüren usw. abweichen.
- Um das Produkt zu verbessern, behält sich der Hersteller das Recht vor, seine Funktionen und/oder Komponenten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- Bevor Sie das Bett anschließen, in Betrieb nehmen und einstellen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Frauen, die schwanger sind oder ihre Menstruation haben, sollten diesen Schönheitsstuhl nicht benutzen.
- Personen mit Verletzungen oder Behinderungen sollten diesen Schönheitsstuhl nicht benutzen.
- Kinder unter 14 Jahren ohne Aufsicht und bewusstlose Personen sollten diesen Schönheitsstuhl nicht benutzen.
- Alle an das Netzkabel angeschlossenen Stecker, Tasten und anderen Komponenten dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Es ist verboten, Ihre Hände, Füße, Ihren Kopf oder andere Körperteile in den Spalt (siehe unten) zu stecken, während Sie die Höhe des Bettes per Fernbedienung und Fußsteuerung einstellen.
- Die Verwendung ist verboten, wenn Stecker, Knöpfe und andere mit dem Netzkabel verbundene Komponenten defekt sind.
- Es ist zu beachten, dass die Frequenz 6 Min./h beträgt, wenn der Motor dieses Massagesessels verwendet wird.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es nicht verwenden.
- Demontieren Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung. Bitte informieren Sie die offiziellen Dienstleister, die sich um die Wartung kümmern

- The maintenance should not be dealt with without official training.

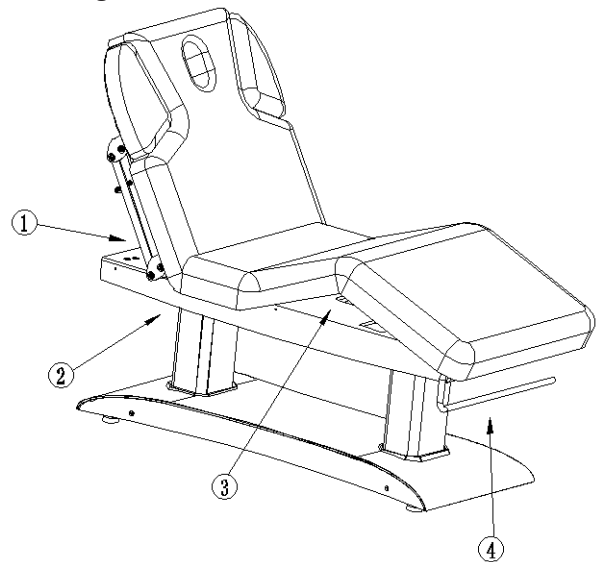

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Größe: 2000 x 760 x 660 mm

Mindestens: 660 mm

Maximal: 840 mm

Nettogewicht: 103 kg

Bruttogewicht: 128 kg


Kapazität: 200 kg

Eingangsspannung: AC100~130V/220~240V,
50/60Hz

Ausgangsspannung: DC 24 V

Leistung: 160 W

• REGLER

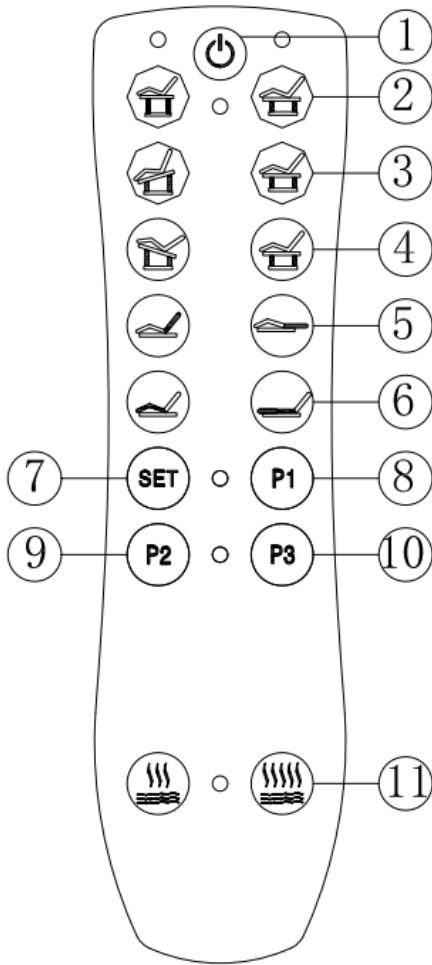

● Handsteuerung:

① SW1 button: turn on/off hand control, press button, turn on hand control, press again button, turn off hand control, bed back to original position, press again button, bed stop recover.

② SW2 press button, bed rise up, press button, bed descend.

③ SW3 press , to adjust the bed tilt forward,

press , to adjust the bed flat.

④ SW4 press , to adjust the bed tilt backward;

press , to adjust the bed flat.

⑤ SW5 press , to adjust backrest up

press , to adjust backrest down.

⑥ SW6 press , Increased footrest angle,

press , reduced footrest angle.

⑦ SW7 press , setting Memory function.

⑧-⑩ Auto mode button, the bed will automatically adjust to the pre-set height and angle when any key is pressed.

Remark: Automatic mode setting to adjust the status of the lift, tilt, seat length, backrest and footrest sections, long press until the blue light next to it is on to activate the memory cartridge function, press set memory state. are the same method as .

•Höhenverstellung:


Handbedienung einschalten, drücken




Bett anheben, Knopf




drücken, Bett absenken, wie im Bild gezeigt

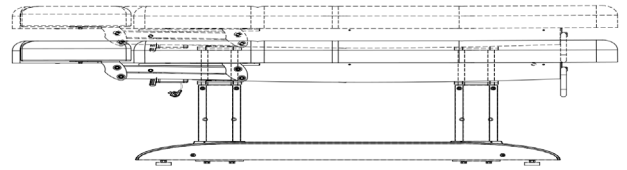

•Bettwinkelverstellung:


press  , to adjust the bed tilt

forward, press  , to adjust

the bed flat; press  , to

adjust the bed tilt

backward;press  , to adjust

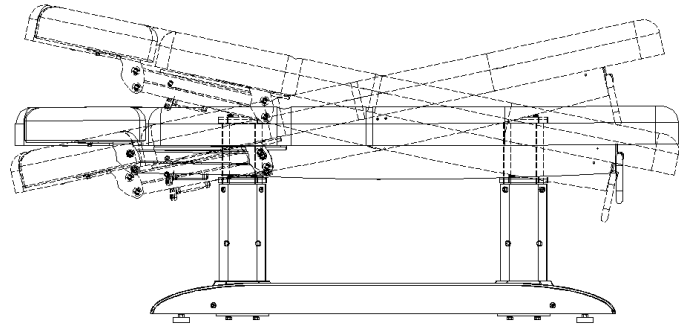


•Rückenlehnenverstellung


press  button, backrest incline angle rise up,press




button, reduce backrest incline angle, as pic shows :

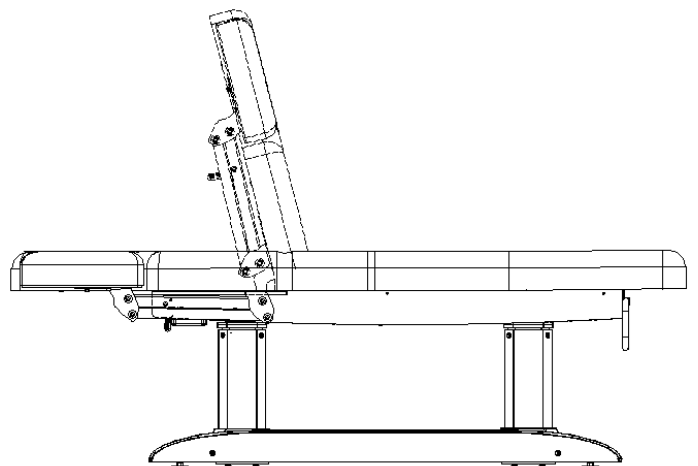


●Fußstützenverstellung:

press  button, footrest
incline angle rise up, press



 button, reduce
footrest incline angle.

As pic shows:

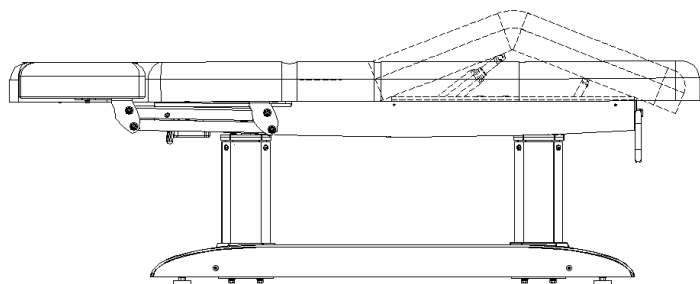


●Armlehnenverstellung:

Drücken Sie den
Gaslift in
Pfeilrichtung nach
unten und lassen Sie
die Hand nicht los.
Drücken Sie
währenddessen leicht
nach unten, um die
Armlehne zu
verstellen, da dies
sonst der Fall ist
erholen, als Bild::

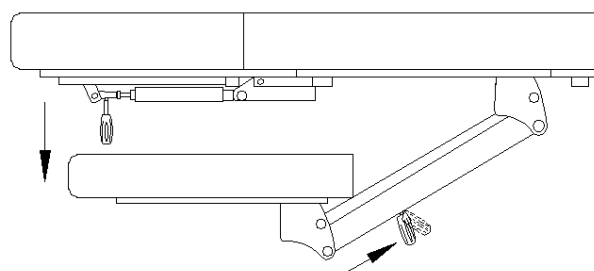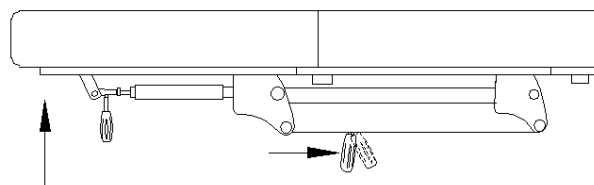

● Gummifußverstellung:

Drehen und höhenverstellen
Der Gummifuß kann später einige
unebene Bodenverhältnisse
beseitigen
Passen Sie die Höhe an, ziehen Sie
sie fest und befestigen Sie sie mit
der Mutter nach oben, wie im Bild
gezeigt:

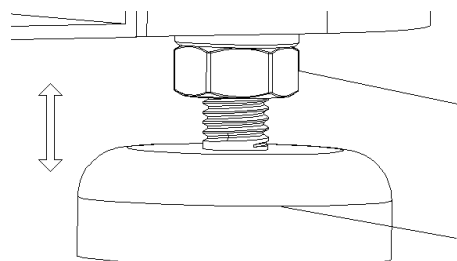

WARTUNG

- Tägliche Reinigung. Sie können den Staub mit einem weichen, trockenen Handtuch abwischen.
- Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen. Wie wir alle wissen, ist es schwierig, hartnäckigen Schmutz mit einem normalen trockenen Handtuch zu entfernen. In diesem Fall können Sie es zunächst mit einem weichen Handtuch und einem verdünnten neutralen Reinigungsmittel reinigen. Und dann können Sie zum Schrubben ein trockenes Handtuch verwenden.
- Es ist verboten, Benzol, Verdünnungsmittel, Benzin oder andere Lösungsmittel zu verwenden. Diese Lösungsmittel können das Leder beschädigen oder zu einer Korrosion des Aussehens der Produkte führen.
- Speicher- und Betriebsumgebung. Setzen Sie das Produkt keiner starken Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit aus. Andernfalls kann es zu Schäden am Produkt kommen.
- Das Produkt darf bei einer Temperatur von -5 °C bis 50 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 45 % bis 85 % verwendet werden.

FEHLERDIAGNOSE

- Wenn bei der Verwendung des Produkts etwas nicht stimmt, versuchen Sie bitte, die Fehlbedienung wie folgt zu überprüfen und zu beheben:

Phenomenon	Diagnosis	Operation of elimination
Press the pedal but without any responses.	1.Controller power switch start or not.	1.Try to re-start the controller power switch.
	2.To check if the pedal has reached to maximum.	2.Try other buttons workable or not.
	3. To check if the power plug is connected.	3.Disconnect the power plug and re-plug it again.
	4.To check if each connecting plug of the transformer is connected.	4.Re-plug and connect it again.
Letting out noises and shaking while going up and down	Screw loosen	Tighten all the screws

RECYCLING

Wenn Sie das Produkt oder Teile davon oder Zubehör entsorgen müssen, prüfen und beachten Sie bitte die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Abfallbewirtschaftung und zum Umweltschutz.