



ELLIPSETM

BY LEGXERCISE



Instructions




Ellipse By Legxercise is the new revolutionary Legxercise elliptical that keeps your legs in movement while you are sitting, working at your office desk, watching TV etc. It effortlessly keeps your legs moving, anytime, anywhere.

- Up to 165 steps per minute.
- Moves forward and reverse.
- 3 speed levels in each direction.


Speed one: 105 steps per minute
 Speed two: 140 steps per minute
 Speed three: 165 steps per minute

Assembly Instruction

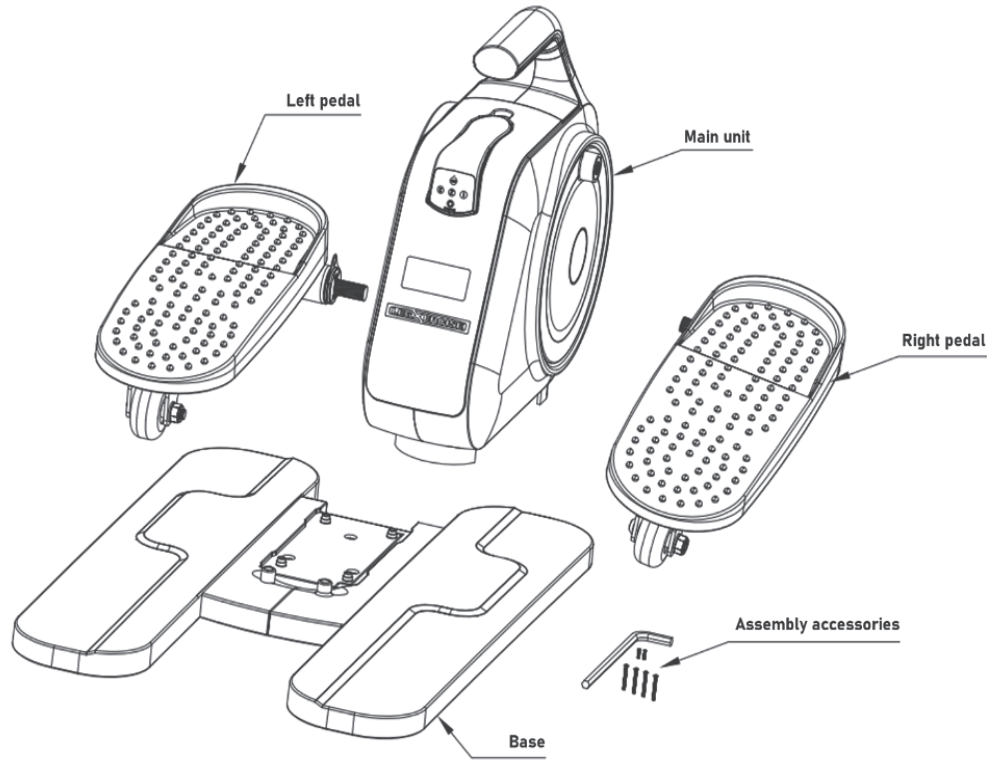


Step one:


Please take out everything within the Ellipse By Legxercise box, make sure nothing is left inside.

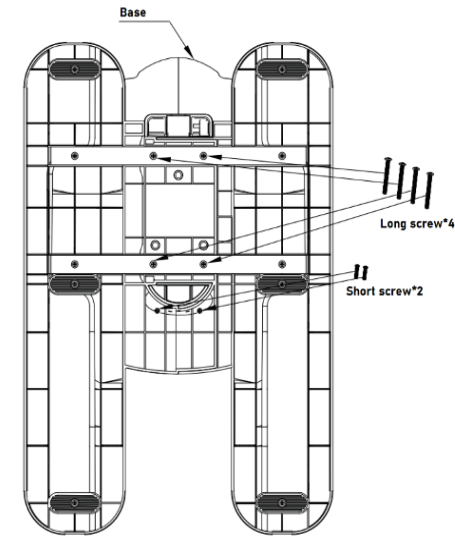

Step two:

Secure the main unit and the base together by using the six screws provided within the assembly accessory pack.

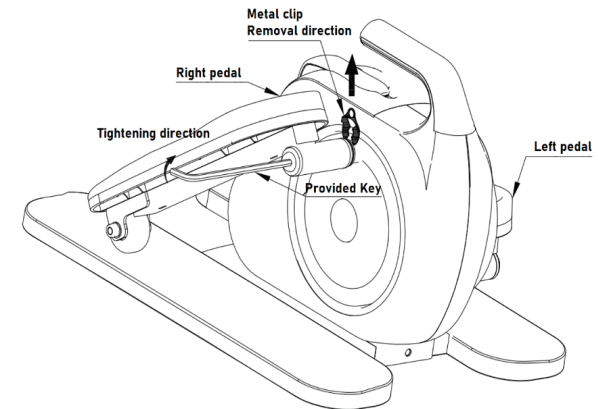

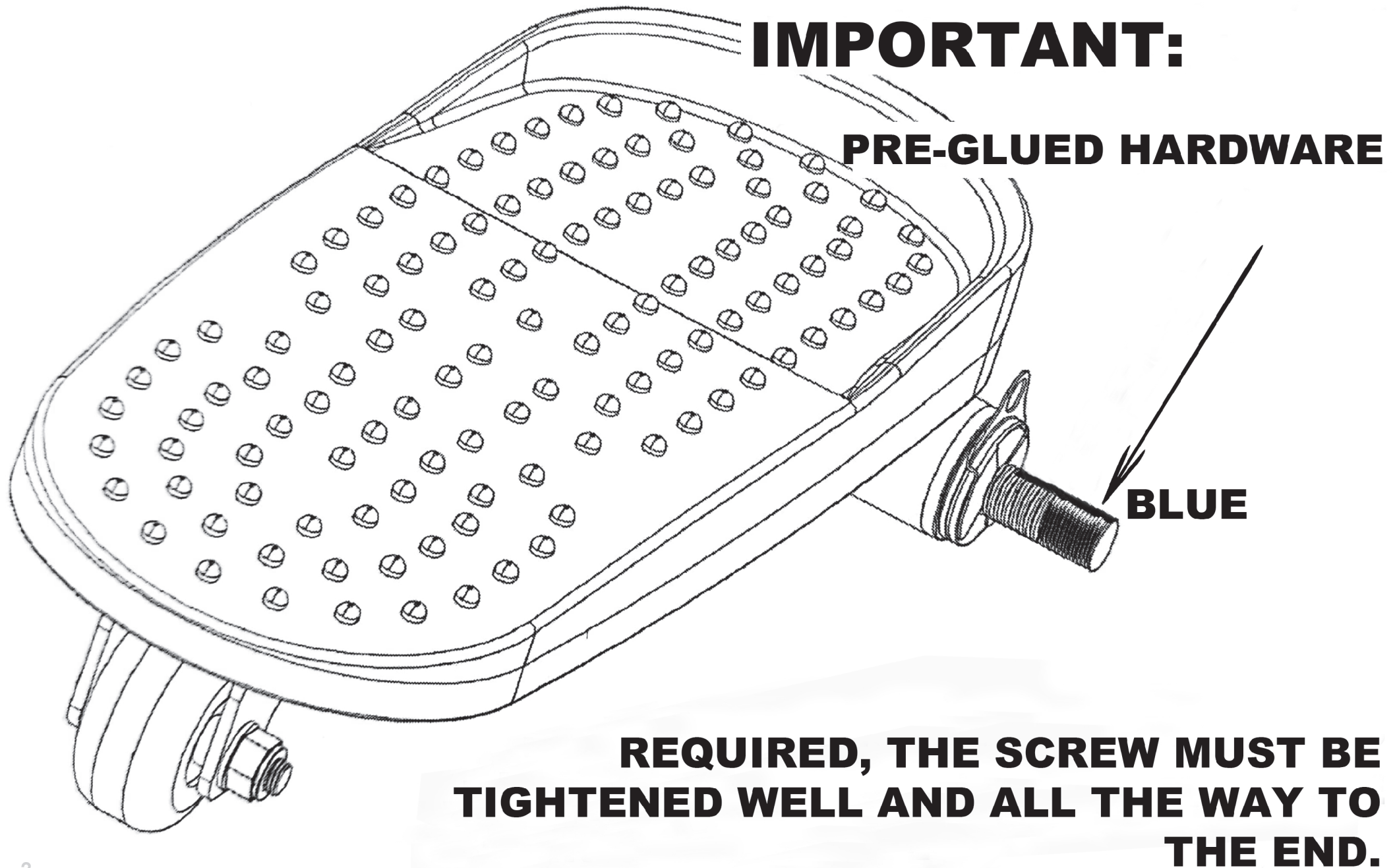


Step three:

Use the Allen wrench provided within the assembly accessory pack to secure left and right pedals onto the main unit.



ATTENTION: REMOVE THE METAL CLIP BEFORE FINAL TIGHTENING AND MAKE SURE THE WASHERS STAY ALIGNED AS YOU FINISH TIGHTENING.

Operation Instruction

Connect the power adapter provided to your Legxercise elliptical, then plug in the power adapter to a 120V power source.

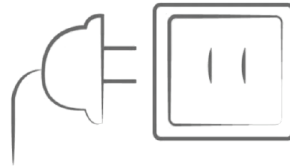

Place your feet onto the pedals of the Legxercise elliptical, select your desired speed level on the remote control and sit back and relax.

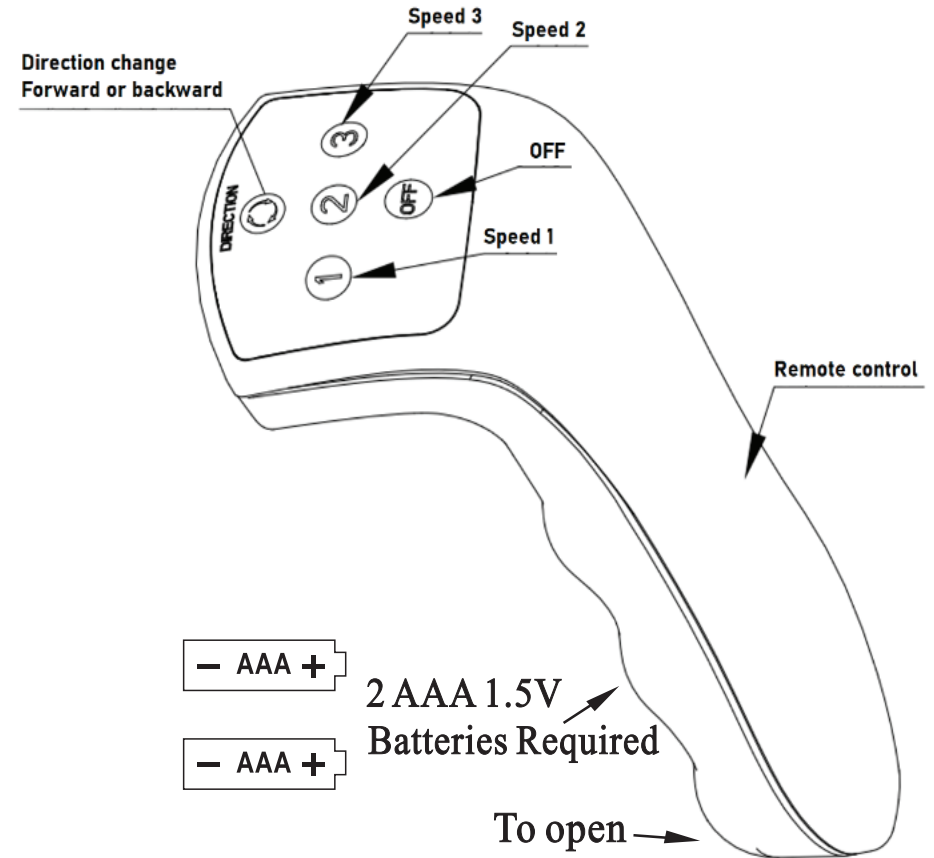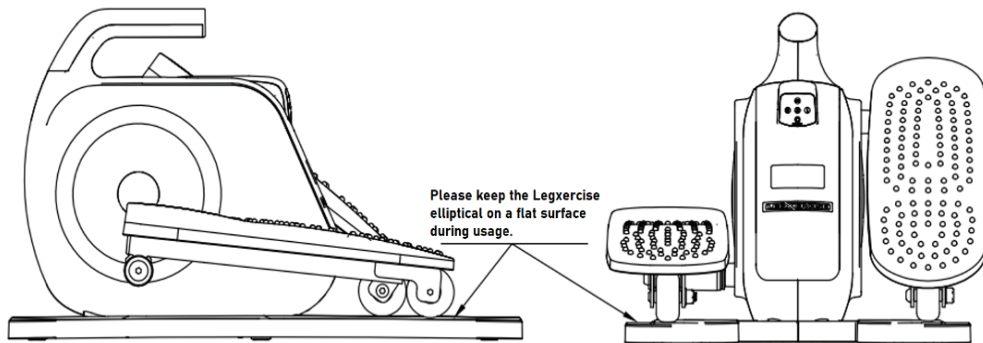


During operation, your Legxercise elliptical will count each rotation of the foot plates, once you reach 9,999 steps, the device will stop automatically. If you wish to continue, just select your desired speed and your Legxercise elliptical will reset to zero and start counting again.

Manual Push Mode:


Unplug the power adapter from the power source, place your feet onto the pedals and push them like a bicycle in the forward direction:

Your Legxercise elliptical will also count your steps during manual push mode operation (forward only), but the step counter display will auto off once you stop riding.

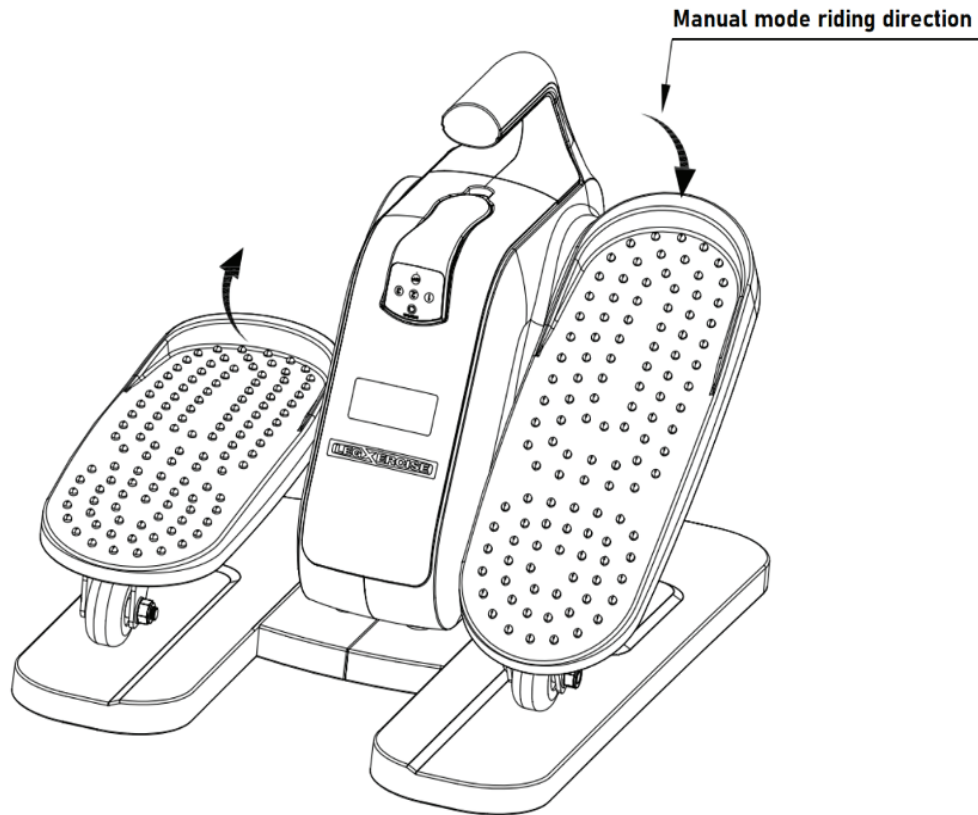

WARNING:
PLEASE KEEP FINGERS AWAY FROM ROTATION MECHANISM AT ALL TIMES.
PLEASE UNPLUG IF NOT IN USE.

ELLIPSE BY LEGXERCISE IS DESIGNED FOR SEATED USE. DO NOT STAND ON THE MACHINE, YOU WILL DAMAGE THE ROTATION MECHANISM AND MAY INJURE YOURSELF.

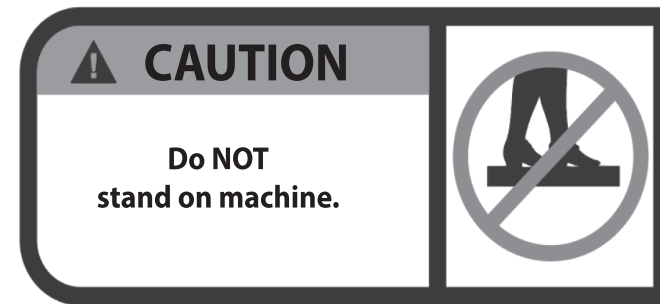

"For Best Results Use in Both Powered and Manual Mode"

Product Name: Ellipse By Legxercise

Model No.:LEGX-013

Company Name:IntelliBrands, LLC.

Customer service address:9905 NW 17th Street, Suite 108,Miami,
FL 33172, USA

CAUTION:

a) The maximum weight legs & feet:100 lbs

b) Field of application: Indoor use,HC

c) Indication that the free area shall be not less than 0,6 m greater than the training area in the directions from which the equipment is accessed. The free area must also include the area for emergency dismount.

Where equipment is positioned adjacent to each other the value of the free area may be shared.

d) Keeping unsupervised children away from the equipment is important.

e) Adjust your position according to your footstep.

f) To avoid interfere with the user's movement,please place the remote control on the stand or hold it in your hand.



ELLIPSETM

BY LEGXERCISE



Instrucciones 

Ellipse de Legxercise es la nueva y revolucionaria máquina elíptica que mantiene las piernas en movimiento mientras está sentado, trabajando en el escritorio de su oficina, mirando TV, etc. Mantiene las piernas en movimiento sin esfuerzo, en cualquier momento y en cualquier lugar.


- Hasta 165 pasos por minuto.
- Doble dirección de movimiento, hacia adelante y hacia atrás.
- 3 niveles de velocidad en cada dirección.

Velocidad uno: 105 pasos por minuto

Velocidad dos: 140 pasos por minuto


Velocidad tres: 165 pasos por minuto

Instrucciones de Ensamblaje

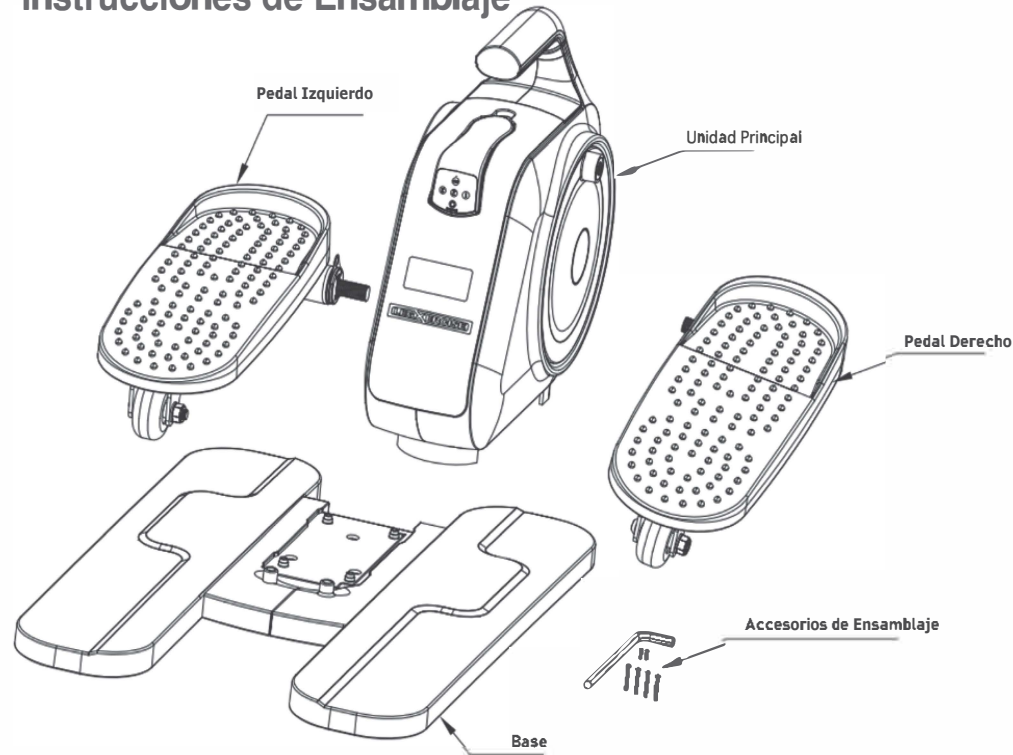


Paso uno:

Saque todo lo que hay dentro de la caja de Ellipse de Legxercise, asegúrese de que no quede nada dentro.

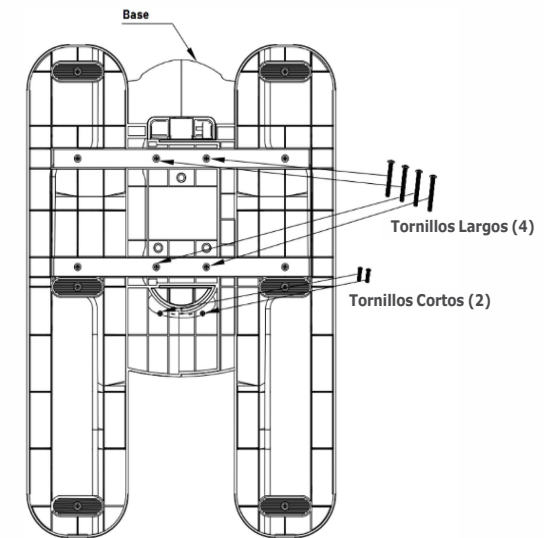


Paso dos:

Asegure la unidad principal y la base usando los seis tornillos provistos dentro del paquete de accesorios de ensamblaje..

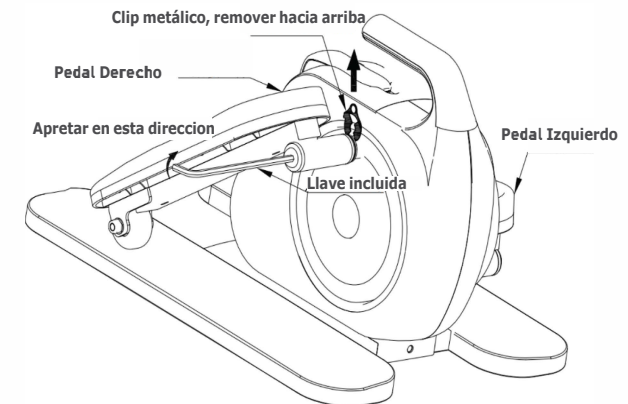

IMPORTANTE

**TORNILLO TRATADO
CON PEGANTE
SECO AZUL**

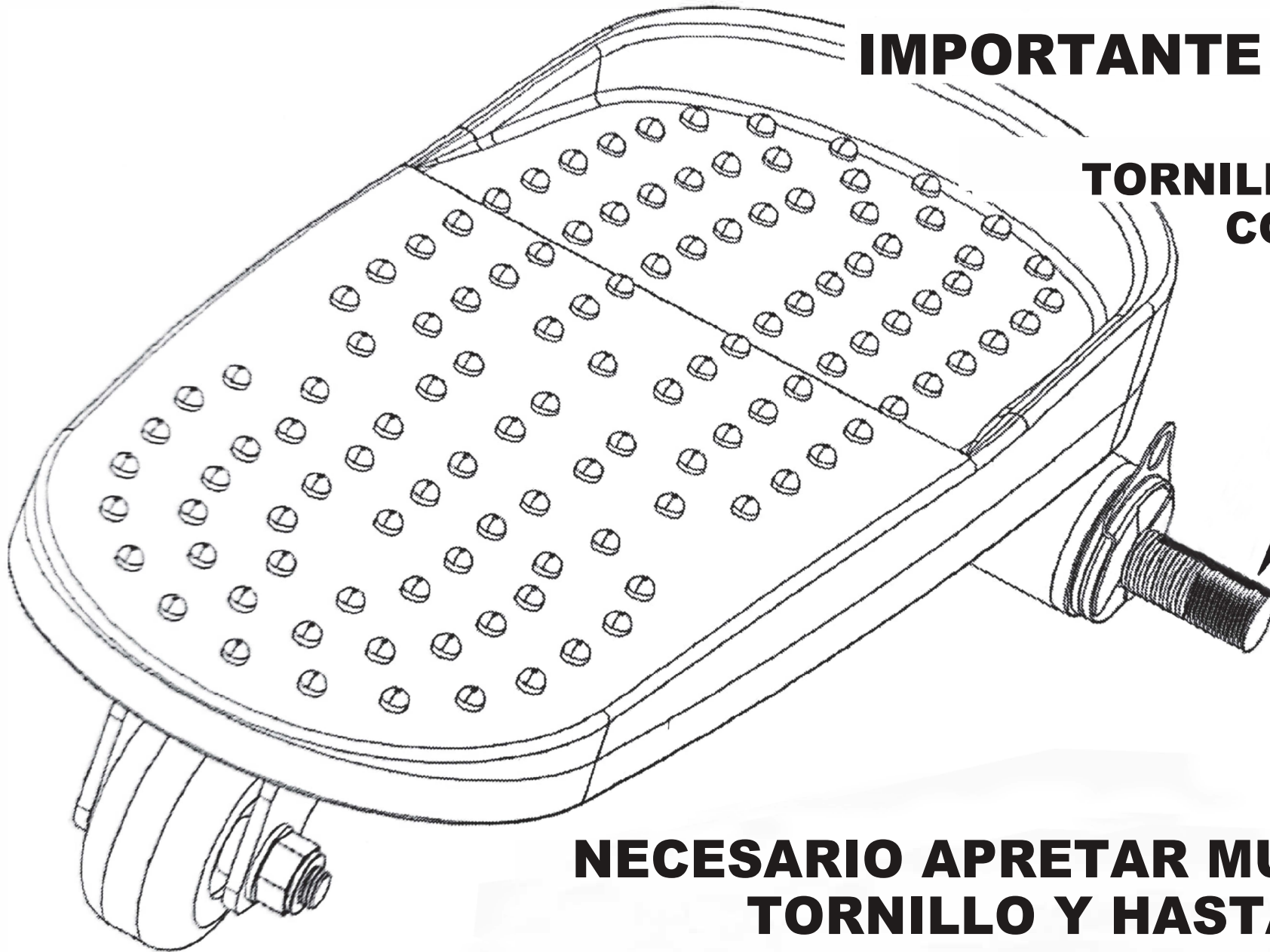

**NECESARIO APRETAR MUY BIEN EL
TORNILLO Y HASTA EL FINAL**


Paso tres:

Use la llave incluida dentro del paquete de accesorios de ensamblaje para asegurar los pedales izquierdo y derecho en la unidad principal..



ATENCIÓN: RETIRE EL CLIP METÁLICO ANTES DE APRETAR COMPLETAMENTE Y ASEGÚRESE DE QUE LAS ARANDELAS PERMANEZCAN ALINEADAS AL TERMINAR DE APRETAR..

Instrucciones de Uso

Conecte el adaptador a su máquina Ellipse de Legxercise, del otro extremo conecte a la corriente de 100V o 240V.

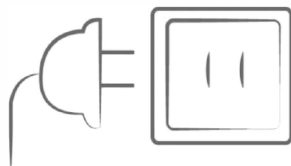

Coloque los pies sobre los pedales de la elíptica Legxercise, seleccione el nivel de velocidad deseado en el control remoto, siéntese y relájese.

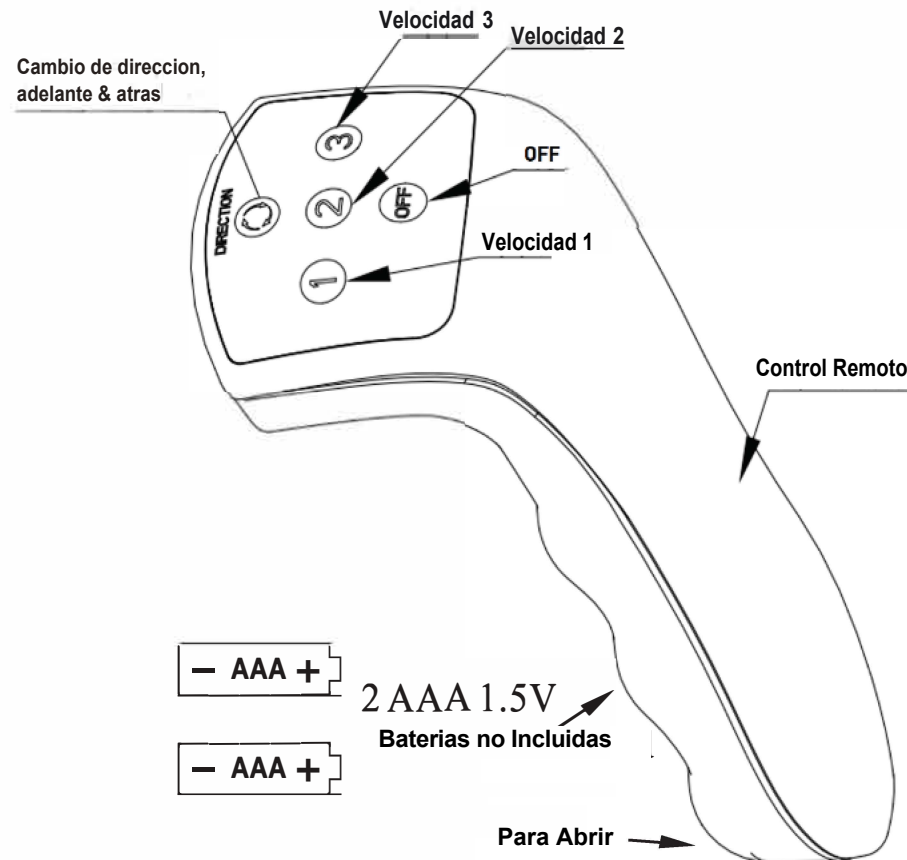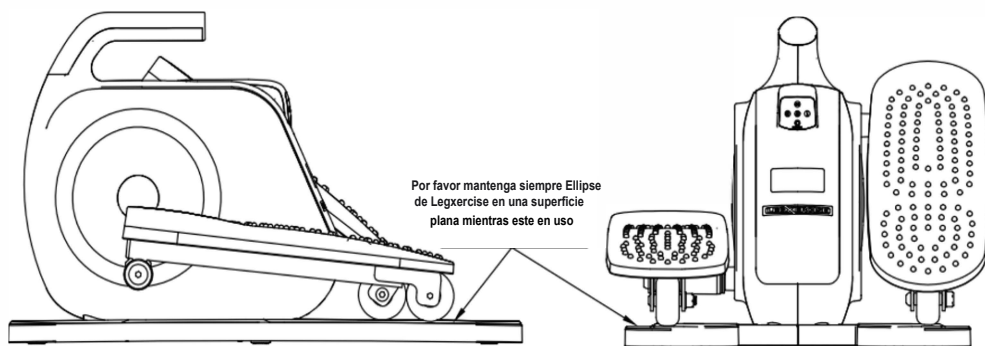


Durante el funcionamiento, Ellipse de Legxercise contará la rotación de los pedales, una vez que alcance los 9999 pasos, el dispositivo se detendrá automáticamente. Si desea continuar, simplemente seleccione la velocidad deseada y Ellipse de Legxercise se restablecerá a cero y comenzará a contar nuevamente.

Modo de uso manual:


Desconecte el adaptador de corriente, coloque los pies sobre los pedales y empújelos como una bicicleta hacia adelante:

Su máquina Ellipse de Legxercise también contará sus pasos durante la operación del modo de uso manual (solo hacia adelante), pero la pantalla del contador de pasos se apagará automáticamente una vez que deje de andar.

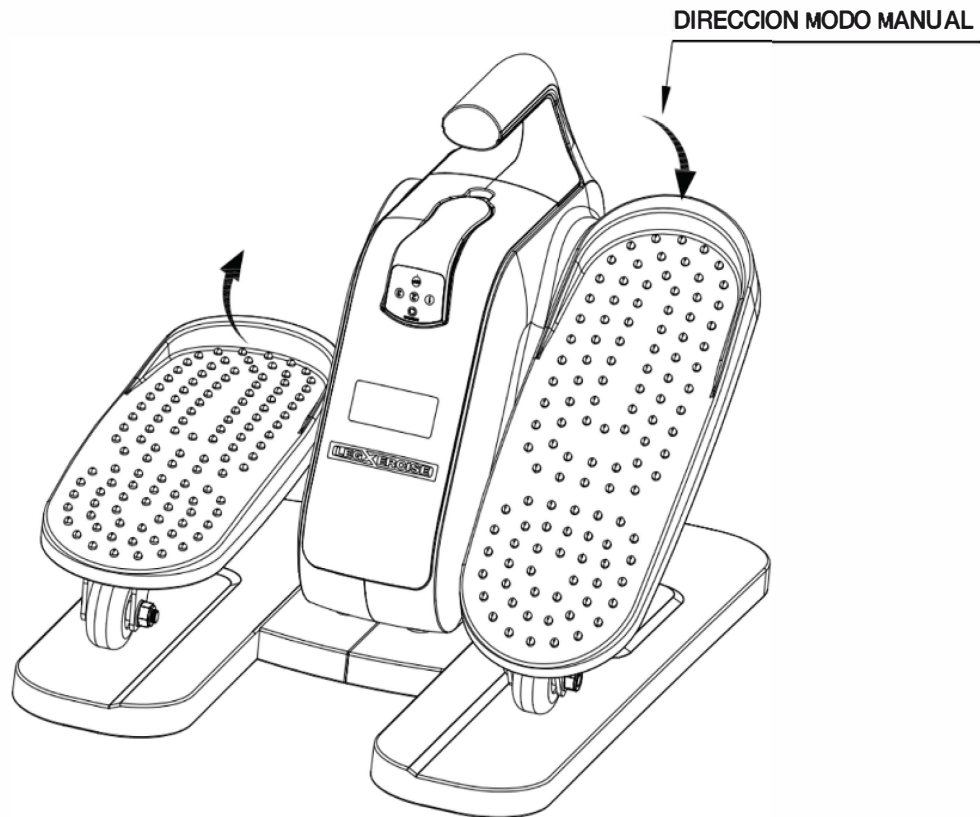**ADVERTENCIA:**

MANTENGA LOS DEDOS ALEJADOS DEL MECANISMO DE ROTACIÓN EN TODO MOMENTO. DESCONECTE SI NO ESTÁ EN USO.

ELLIPSE DE LEGXERCISE ESTÁ DISEÑADO PARA USO SENTADO. NO SE PARE SOBRE LA MÁQUINA, DAÑARÁ EL MECANISMO DE ROTACIÓN Y PODRÍA LESIONARSE.

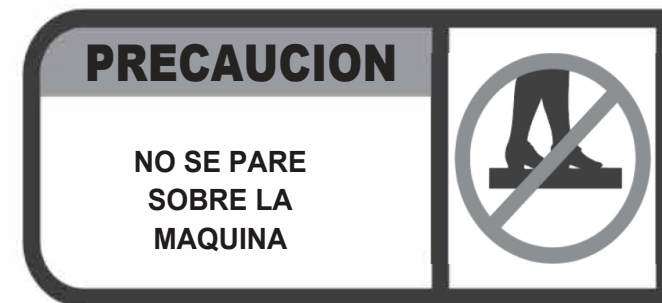

"Para Mejores Resultados Use en Ambos Modos, Asistido y Manual "

Product Name: Ellipse By Legxercise

Model No.:LEGX-013

Distribuido por :IntelliBrands, LLC.

Customer service address:9905 NW 17th Street, Suite 108,Miami,
FL 33172, USA

ADVERTENCIA:

a) El peso máximo pies/piernas: 45 KG

b) Lugar de Uso: en casa o en interiores exclusivamente.

c) Tener en cuenta que el área libre alrededor de la máquina debe ser no menor de 0,6 m más grande que el área de uso en las direcciones desde las que se accede al equipo. El área libre debe incluir también el área para el desmontaje de emergencia. Cuando los equipos se colocan uno al lado del otro, el la distancia del área libre puede ser compartida.

d) Es importante mantener alejados del equipo a los niños que no estén bajo supervisión.

e) Ajuste su posición de acuerdo con su pisada.