



Voordat jy toets, skandeer die QR-kode om die hoe om video te gebruik, of besoek www.mycovidtest.com.au/how-it-works/

VOORDAT JY BEGIN

Was jou hande met seep en water vir ten minste 20 sekondes voor en na toets. As seep en water nie beskikbaar is, gebruik handreiner met ten minste 60% alkohol.

Maak seker dat dit droog is voordat jy begin.



1 PREPARE FOR THE TEST

1A. Kontroleer die vervaldatum op die boks. Moenie gebruik as die kit as dit het is beskuldig of het vervel.

1B. Maak seker dat kit by kamertemperatuur is vir ten minste 30


Maak die boks versigtig oop, aangesien dit in 'n latere stap (1D) gebruik sal word.

Moenie individuele komponente oopmaak totdat dit onderdring word nie.

Let wel: 'n Tydsrekeningstoel (horlosie, timer, telefoon ens.) word vereis, maar nie verskaf nie.

1C. Verwyder die dekking van die buis met ekstraksiebuffer.

1D. Sit die Buis in die kit boks skinkbord houer Voordat u na die volgende stap gaan.

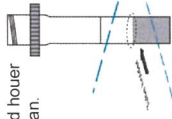

Nota: Wees versigtig om nie te mors nie

2 VERSAMEL DIE NEUSMONSTER

1 Hou vingers weg van die Swab-einde.


2A. Oop Swab beskermende sak

Verwyder die steriele swab uit die sak

1 Raak net aan die stok-einde.

2B. Depper beide neusgate.

Plaas die sagte einde van die Swab in jou neus totdat jy voel

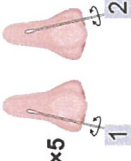

Draai die swab stadig om en vryf dit langs die binnekant van jou neus. 5 - 10 keer teen die neusmuur

Verwyder Swab liggies uit


Nota:

- Dit kan ongemaklik voel. Moenie die swab dieper invoeg as jy sterk weerstand of pyn voel nie.
- Wanneer die nasale mukosa beskuldig of bloei, word nasale swabversameling nie aanbeveel nie.
- As jy ander swabbing, dra asseblief 'n gesigsmasker. Met kinders hoef jy dalk nie die swab so ver in die neus in te sit nie.
- Vir baie jong kinders het jy dalk 'n ander persoon nodig om die kind se kop te bestendig terwyl jy swern.

2C. Gebruik dieselfde Swab, herhaal stap 2B, in jou ander neus. Onttrek die swab.


2D. Voeg die Swab in die ekstraksiebuis in.

Maak seker dat dit aan die onderkant raak en roer die swab om goed te meng.

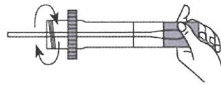

Druk die swab kop teen die buis en draai die swab vir 10 - 15 sekondes.


2E. Hou die buis stewig met een hand. Verwyder die swab terwyl druk die swab kop teen die binnekant van die Ekstraksie buis.

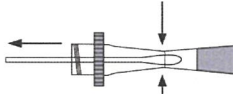

Plaas die swab in die bioveiligheidsak.

2F. Sluit die pet van die ekstraksie buis.

Gee die buis terug na die Kit Box Skinkbord Houer voordat hy na die volgende stap gaan.

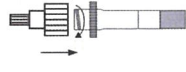


3 DOEN DIE TOETS

3A. Verwyder die toets kasset uit die verseëde foelie sak en gebruik dit binne

Let wel: Die beste resultate sal verkry word indien die toets onmiddellik uitgevoer word nadat die foeliesak oopgemaak is.


Plaas die toetskasset op 'n plat en vlak oppervlak.

3B. Maak die klein pet van die monster ekstraksie oop Buis.

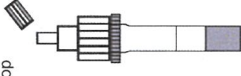

1 Moenie die toetskassette tydens toetsverwikkeling skuif nie.

3C. Keer die monster ekstraksiebuis om en voeg 3 druppels onttrekte monster by die monster goed (S) van die toets kasset.

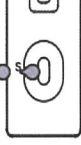

Begin die timer.

Veilige wit pet terug op ekstraksie Wag 15 minute en wag vir 15 minute.



1 Moenie die toetsstoel gedurende hierdie tydperk aanraak nie.

3D. Hou toetsstoel plat op die tafel.

Lees die resultaat op 15 minute.



Moenie die resultaat vroeër lees nie as 15 minute of na 20 minute.

4 LEES TOETSUITSLAG

Deel asseblief ons toetsuitslag met u gesondheidsorgverskaffer en versigtig


ONGELDIG: Beheerreël versuim om te verskyn

Onvoldoende monstervolume of verkeerde prosedurale tegnieke die waarskynlikste redes vir beheerfynmislukking. Her sien die prosedure en herhaal die toets met 'n nuwe toets of kontak met COVID-19-toetsentrum.



POSITIEF: *Twee afsonderlike gekleurde lyn verskyn.

Een gekleurde lyn moet in die beheerstreek (C) wees en 'n ander gekleurde lyn moet in die toetsstreek (T) wees. *Let wel: Die intensiteit van die kleur in die toetsstreek (T) sal wissel op grond van die hoeveelheid SARS-CoV-2-antigene wat in die monster teenwoordig is. Daarom moet enige kleurskaduwe in die toetsstreek (T) positief beskou word. 'n Positiewe resultaat beteken dat dit baie waarskynlik is dat jy COVID-19 het, maar die positiewe monsters moet bevestig word om dit te weerspieël. Gaan onmiddellik in selfisolasie in ooreenstemming met die plaaslike riglyne en kontak dadelik u algemene praktisyn / dokter of die plaaslike gesondheidsdepartement in ooreenstemming met die instruksies o u plaaslike owerhede. Jou toetsuitslag sal deur 'n PCR-

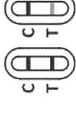

Vir alle positiewe resultate word 'n bevestigende PCR-toets deur 'n laboratorium benodig. Kontak asseblief jou plaaslike Covid-hulplyn aan die ander kant van hierdie instruksies.

NEGATIEWE RESULTAAT: Een gekleurde lyn verskyn in die beheer

Geen oënskynlike gekleurde lyn verskyn in die toetsstreek (T) ni Dit is onwaarskynlik dat jy COVID-19 sal hê. Dit is egter moontlik vi hierdie toets om 'n negatiewe resultaat te gee wat verkeerd is ('n vals negatiewe) in sommige mense met COVID-19. Dit beteken dat jy moontlik steeds COVID-19 kan hê, al is die toets negatief.

As jy simptome soos hoofpyn, migraine, koors, verlies aan reuk of smaak ervaar, kontak die naaste mediese fasiliteit volgens die reëls van jou plaaslike owerheid. Daarbenewens kan u die toets met 'n nuwe toetsstel herhaal, in die geval van agterdog, herhaal die toets na 1-2 dae, aangesien die koronavirus nie presies in alle fases van 'n infeksie opgespoor kan word nie. Selfs met 'n negatiewe toetsuitslag moet jouself enigiens nagekom word, migrasie reis, geleentheids bywoon, ens., moet jy ons plaaslike COVID-riglyne/vereistes volg.



5 ONTSLAET RAAK VAN DIE TOETSSTEL

5A. Nadat die toets voltooi is, plaas al die komponente in die plastiek

5B. Raak ontslae volgens plaaslike regulasie

Vir kliëntediens skakel 1800 472 743 vir inligting oor die korrekte gebruik van hierdie toets en vir interpretasie van die toetsuitslae. Kliëntediensure is 24 uur/7 dae

