

VODĚODOLNÝ NÁVLEK

na sádru a obvaz



NÁVOD PRO PÉČI A POUŽITÍ

CS Voděodoln návlek Bloccs® je navržen speciálně k ochraně sádrového obvazu, obvazů nebo obinadel, aby umožnil uživateli koupat se nebo sprchovat jako obvykle. Tento plně vodotěsný a zcela ponořitelný návlek lze použít na pláži nebo na koupališti nebo v brouzdališti.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Přírodní kaučukový latex může způsobit alergickou reakci. Pokud jste v péči lékaře, požádejte si před použitím návleku souhlas svého lékaře. **NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JSTE ALERGIČTÍ NA LATEX.**



**Precision Dippings
Manufacturing Ltd**
Unit J, Lawrence Drive
Stover Trading Estate, Yate,
Bristol, BS37 5PG
UK



Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
B-1030, Brussels
Belgium



Obelis SWISS GmbH
Ruessenstrasse 12
6340 Baar/ZG
Switzerland

Vyrobena ve Spojeném království

Všechny produkty jsou
vyrobeny v souladu s aktuální
schválenou normou systému
řízení jakosti ISO 9001.

©Bloccs® 2023



Bloccs®

Precision Dippings
Manufacturing Ltd, Unit J,
Lawrence Drive, Stover Trading
Estate, Yate, Bristol, BS37 5PG, UK
Telefon: +44 (0) 1454 318197
E-mail: info@bloccs.com

www.bloccs.com



Reprodukce, kopie, odvozená díla, distribuce a zveřejňování tohoto návodu jsou povoleny pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Bloccs®.

PÉČE A POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO NÁVLEKU **BLOCCS**[®]

Děkujeme, že jste si zvolili Bloccs[®]. Před použitím návleku Bloccs[®] nebo při dohlížení na dítě s návlekiem si pečlivě přečtěte následující pokyny. Tím bude zajištěno, že bude návalek používán bezpečně a voděodolné těsnění bude účinné.

Rozhodnutí nosit návalek Bloccs[®] při koupeli, sprše nebo při jakékoli jiné vodní aktivitě je na vaše vlastní riziko. Aby bylo zajištěno, že aktivita neovlivní zranění, je třeba se poradit s lékařem.

Jak si návalek Bloccs[®] navléct

Před použitím tohoto výrobku byste měli z končetiny odstranit všechny ostré šperky a dávat pozor, aby nedošlo k jeho protrhnutí nehty. Drsné hrany překryjte páskou nebo pružným obvazem.

Před použitím promněte těsnění o sebe rukama a lehce ho natáhněte. Chcete-li zkontrolovat, jak těsnění sedí, vyzkoušejte svůj krycí návalek na paži nebo na noze, kde není sádra. Pokud je těsnění při zkoušení příliš těsné nebo příliš volné, vyberte návalek jiné velikosti.

Hladké, přiléhavé a nepropustné těsnění by mělo jít snadno natáhnout přes obvaz.

Postupujte podle pěti jednoduchých kroků přiložených v tomto letáku, které vám pomohou navléci si návleky Bloccs[®] na paži/nohu a loket/koleno.

Použití vašeho návleku Bloccs[®]

Návalek Bloccs[®] je určen k udržení obvazu v suchu, když je vystaven vodě nebo ponořen do vody. Návleky Bloccs[®] používají stejný typ těsnění jako u neoprenových obleků.

Před vstupem do vody odstraňte z návleku Blocks[®] všechny vzduch stačováním krycího

návleku směrem nahoru k těsnění, aby se veškerý zachycený vzduch uvolnil.

To lze provést i postupným ponořením končetiny do vody tak, aby tlak vody vytlačoval vzduch k horní části návleku.

Před ponořením opatrně odtáhněte těsnění od pokožky, abyste odstranili vzduch a ujistíte se, že se do návleku nedostala žádná voda.

Návalek by se měl navléci těsně před vstupem do vody a sejmut, jakmile z ní vylezete.

Rozhodnutí jít do vody je na vaše vlastní riziko. Neměli byste skákat ani se potápět do bazénů. Návleky nejsou určeny k potápění, šnorchlování ani jiným vodním sportům.

Doporučujeme, aby byl návalek Bloccs[®] během používání pravidelně kontrolován, aby bylo zajištěno, že je těsnění stále vodotěsné a pohodlné.

Návalek lze mít na sobě až 30 minut - za předpokladu, že je nadále pohodlný, nezdá se být příliš těsný a je pravidelně kontrolován.

Nošení návleku po dobu delší než 30 minut může vést k zachycení vzduchu, který způsobuje pocení a nepohodlí.

DĚTI MUSÍ BÝT V BAZÉNU NEBO V MOŘI CELOU DOBU POD DOHLEDEM.

Jak návlek sejmout

Chcete-li návlek Bloccs® sejmout, opatrně jej přetáhněte přes obvaz nebo sádku na paži či na noze. Je třeba dbát na to, aby nebyla těsnění poškozena nehty či šperky.

Péče o návleky Bloccs®

Návlek Bloccs® podléhá opotřebení, ale měl by vydržet asi 4 týdny běžného používání.

U návleku je nutné před každým použitím zkontrolovat, zda nejsou známky poškození nebo opotřebení.

Pokud návlek jeví známky zhoršení kvality nebo poškození, je třeba zakoupit nový.

Návleky by měly být skladovány při teplotě nižší než 26 °C (78,8 F) a daleko od topení. V extrémních mrazech může návlek ztuhnout: to ale není trvalé a oteplením se to spraví. Je třeba vyhnout se vlhkým podmínkám skladování. Návlek nevystavujte po delší dobu světlu, zejména přímému slunečnímu záření a umělému osvětlení s vysokým obsahem UV záření.

Návlek Bloccs® lze prát v teplé vodě a poté jej pečlivě vysušit zevnitř i zvenčí. Lehké poprášení vnitřku maskem usnadňuje navlečení návleku Bloccs®. Návlek nesušte v sušičce ani na radiátoru.

Vyhňte se kontaktu s mědí, slitinami obsahujícími měď, rozpouštědly, oleji a tuky, protože mohou návlek Bloccs® poškodit.

Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, protože to může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt.

Pokud máte nějaké dotazy týkající se vašeho návleku Bloccs®, navštivte www.bloccs.com nebo použijte e-mail info@bloccs.com

Tento návod, tabulka velikostí a záruční podmínky Bloccs® jsou k dispozici na našich webových stránkách www.bloccs.com

Společnost Bloccs® si vyhrazuje právo manuál upravit, považuje-li to za vhodné. Je vaší odpovědností jako spotřebitele zkontrolovat online verzi příručky, zda neobsahuje nějaké změny.

UPOZORNĚNÍ: Návleky Bloccs® mohou být kluzké, když jsou mokré. Ve sprše nebo ve vaně používejte protiskluzovou podložku a mějte zde umístěnou další protiskluzovou podložku nebo ručník, když jdete ven. S návlekiem Bloccs® byste neměli chodit kolem bazénu a měli byste dbát zvýšené opatrnosti při používání schůdků k bazénu, protože mohou být kluzké. Pevně se přidržíte madel.

UPOZORNĚNÍ: Návleky Bloccs® nejsou hračky. Abyste předešli nebezpečí udušení, uchovávejte výrobek a jeho obal mimo dosah dětí a kojenčů.

UPOZORNĚNÍ: Přírodní kaučukový latex může způsobovat alergickou reakci. Pokud jste v péči lékaře, vyžádejte si před použitím návleku souhlas svého lékaře. **NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JSTE ALERGIČTÍ NA LATEX.**

UPOZORNĚNÍ: Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při ponořování nohou v sádře do vody, protože mohou být těžké a omezovat pohyb. Neměli byste se snažit s nohou v sádře plavat.

UPOZORNĚNÍ: Je třeba dbát opatrnosti u katetrů nebo kanyl.


Není možné poskytnout upozornění ke všem možným nebezpečím souvisejícím s používáním tohoto produktu. Spotřebitelům se proto doporučuje, aby při používání návleku Bloccs® používali zdravý rozum a dobrý úsudek.

Jakýkoli vážný incident, ke kterému došlo v souvislosti se zařízením, by měl být nahlášen výrobcí a příslušnému úřadu v zemi, ve které bylo zařízení zakoupeno.

BLOCCS®

JAK NAVLÉCI NÁVLEK BLOCCS® NA PAŽI NEBO NA NOHU BEZ POMOCI

Návlek by měl být používán v souladu s veškerými pokyny pro péči a používání. Navštivte prosím www.bloccs.com a podívejte se na naše ukázkové video a na často kladené otázky.

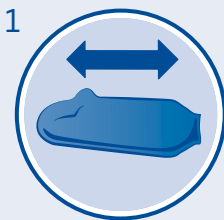

Vyjměte návlek z obalu a rozložte jej. Sundejte ostré prsty atd.



Před použitím promněte těsnění o sebe rukama a lehce ho natáhněte.



U otevřeného konce přeloženávlek napůl dozadu.



Chcete-li zkontrolovat, jak těsnění sedí, vyzkoušejte krycí návlek nejprve na paži nebo na noze, která není v sádře nebo obvazu.

Vložte požadovanou paži nebo nohu do otevřeného konce tak, aby chodidlo nebo ruka byly na konci návleku.



Vyrolujte návlek na paži nebo nohu, dokud těsnění neleží rovně ke kůži. Pokud je těsnění při zkoušení příliš těsné nebo příliš volné, zvolte návlek jiné velikosti.


Vypusťte trochu vzduchu, aby neplaval.

BLOCCS®

JAK NASADIT LOKETNÍ NEBO KOLENNÍ NÁVLEK BLOCCS® BEZ POMOCI

Návlek by měl být používán v souladu s veškerými pokyny pro péči a používání. Navštivte prosím www.bloccs.com a podívejte se na naše ukázkové video a na často kladené otázky.

1

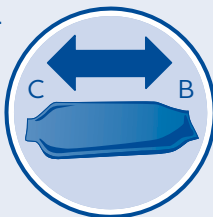

Vyjměte návlek z obalu a rozložte jej. Sundejte ostré prsty atd.


Návlek má dva konce; širší konec pro utěsnění kolem bicepsu nebo stehna (B) a užší konec pro utěsnění kolem zápěstí nebo spodní části lýtky (C).

2




Před použitím promněte těsnění o sebe rukama a lehce je natáhněte.

3

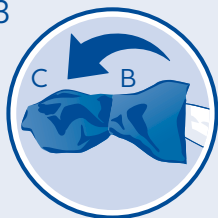

Pro snadné nasazení návleku vezměte konec B a přetočte polovinu návleku naruby tak, aby byla těsně nad koncem C.


4

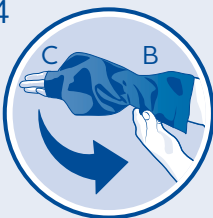

Chcete-li zkontrolovat, jak těsnění sedí, vyzkoušejte krycí návlek nejprve na paži nebo na noze, která není v sádře nebo obvazu.

Pomalou tlačte ruku nebo nohu skrz konec B a poté C. Potom opatrně vyrolujte konec B, dokud nebude hladce přiléhat na paži nebo stehno.

5

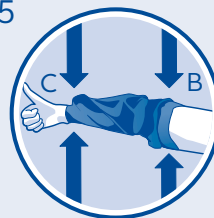













Měla by být zakryta celá část obvazu a kolem paže nebo nohy by se na obou koncích návleku mělo vytvořit hladké nepromokavé těsnění. Pokud je těsnění při zkoušení příliš těsné nebo příliš volné, zvolte návlek jiné velikosti.

Vypusťte trochu vzduchu, aby neplaval.

BLOCCS®

SLOVNÍČEK SYMBOLU

	Výrobce
	Oznacení shody CE
	Posouzení shody ve Spojeném království
	Zdravotnické zařízení
	Jedinečný identifikační kód zařízení
	Množství zařízení
	Kód šarže
	Datum výroby
	Distributor
	Autorizovaný zástupce v Evropské unii
	Švýcarský autorizovaný zástupce
	Dovozce
	POZOR
	Obsahuje přírodní latex
	Kluzký povrch
	Nebezpečí udušení
	Chrante před slunečním zářením
	Skladujte při teplotě 5–26 °C (42–78 °F)
	Jeden pacient – vícenásobné použití
	Nesterilní
	Přetete si návod k použití
	Recyklovatelné obaly
	Mimo otevřený ohen