



# VANDTÆT BESKYTTER

til gips og forbindinger



## BEHANDLINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

**DA** Den vandtætte Bloccs®-beskytter er specielt udviklet til at beskytte en gipsbandage, forbindelse eller anden form for bandage, så brugeren kan tage bad eller brusebad som normalt. Denne fuldstændigt vandtætte beskytter, som kan nedsænkes helt under vand, kan anvendes på stranden eller i et svømme- eller soppebassin.

**⚠ ADVARSEL:** Naturlig gummilætex kan medføre en allergisk reaktion. Hvis du får lægelig pleje, skal du have lægens godkendelse, før du bruger beskytteren. MÅ IKKE ANVENDES, HVIS DU ER ALLERGISK OVER FOR LATEX.



Precision Dippings  
Manufacturing Ltd  
Unit J, Lawrence Drive  
Stover Trading Estate, Yate,  
Bristol, BS37 5PG  
UK



Obelis s.a.  
Bd. Général Wahis 53  
B-1030, Brussels  
Belgium



Obelis SWISS GmbH  
Ruessenstrasse 12  
6340 Baar/ZG  
Switzerland

### Fremstillet i Storbritannien

Alle produkter er fremstillet i henhold til den aktuelt godkendte ISO 9001-kvalitetsstyringsstandard.  
©Bloccs® 2023

### Bloccs®

Precision Dippings  
Manufacturing Ltd, Unit J,  
Lawrence Drive, Stover Trading  
Estate, Yate, Bristol, BS37 5PG, UK  
Telefon: +44 (0) 1454 318197  
E-mail: [info@bloccs.com](mailto:info@bloccs.com)  
[www.bloccs.com](http://www.bloccs.com)



Reproduktion, kopier, afledte værker, distribution og offentlig visning af denne vejledning er kun tilladt med forudgående skriftlig godkendelse fra Bloccs®.

# BEHANDLING OG ANVENDELSE AF DIN **BLOCCS**<sup>®</sup>-BESKYTTER

Tak, fordi du har valgt Bloccs<sup>®</sup>. Du bedes læse følgende anvisninger nøje, før du bruger din Bloccs<sup>®</sup>-beskytter eller overvåger et barn, der bruger sin beskytter. Dette sikrer, at beskytteren anvendes på en sikker måde, og at den vandtætte forsegling fungerer.

Beslutningen om at anvende Bloccs<sup>®</sup>-beskytteren, når du tager karbad, brusebad eller til andre vandbaserede aktiviteter, træffes på egen risiko. Der skal søges lægefaglig rådgivning for at sikre, at aktiviteten ikke påvirker skaden.

## Sådan tager du din Bloccs<sup>®</sup>-beskytter på

Da din Bloccs<sup>®</sup>-beskytter er fremstillet af naturlig gummilatex, skal du tage skarpe smykker af og passe på, at du ikke laver et hul med dine negle. Dæk skarpe områder til med klæbeband eller elastisk bandage.

Inden brug skal forseglingen gribes sammen og strækkes forsigtigt med hænderne. Prøv overtrækket på armen eller benet uden gips for at kontrollere, hvordan forseglingen passer. Hvis forseglingen føles for tæt eller for løs, når du prøver den, skal du vælge en beskytter i en anden størrelse.

Den glatte, vandtætte forsegling skal sidde tæt mod huden og skal nemt kunne strækkes over en forbindelse.

**Du kan følge vores fem lette trin i denne folder som en hjælp til at tage dine Bloccs<sup>®</sup>-beskyttere til arme/ben og albuer/knæ på.**

## Anvendelse af din Bloccs<sup>®</sup>-beskytter

Bloccs<sup>®</sup>-beskytteren er udviklet til at holde en forbindelse tør, når den udsættes for eller nedsænkes i vand. Bloccs<sup>®</sup>-beskyttere anvender samme type forsegling, som findes i våddragter.

Inden du går i vandet, skal du fjerne alt luft fra Bloccs<sup>®</sup>-beskytteren ved at gribbe overtrækket opad mod forseglingen for at presse indfanget luft ud.

Dette kan også gøres ved gradvist at sænke armen eller benet ned i vand, så vandtrykket tvinger luften op til beskytterens øverste del.

Træk forsigtigt forseglingen væk fra huden for at fjerne luften, før du udsætter beskytteren for vand, så du sikrer, at der ikke trænger vand ind i beskytteren.

Beskytteren skal tages på, lige før den udsættes for vand, og den skal tages af, så snart du er ude af vandet igen.

Beslutningen om ophold i vand træffes på egen risiko. Du må ikke springe eller dykke ned i en pool. Beskytterne er ikke designet til dykning, snorkling eller andre former for vandsport.

Vi anbefaler, at Bloccs<sup>®</sup>-beskytteren kontrolleres regelmæssigt under brug for at sikre, at forseglingen stadig er vandtæt og sidder godt.

Beskytteren kan anvendes i op til 30 minutter – forudsat at den stadig føles behagelig at have på, at den ikke føles for stram, og at den kontrolleres regelmæssigt.

Hvis beskytteren anvendes i mere end 30 minutter, kan det medføre luftlommer, hvilket kan få dig til at svede og føle dig utilpas.

**BØRN I EN POOL ELLER I HAVET SKAL VÆRE UNDER OPSYN HELE TIDEN.**

# Sådan tager du din beskytter af

For at tage Bloccs®-beskytteren af skal du forsigtigt trække den over forbindingen eller gipsen på din arm eller dit ben. Du skal passe på, at forsejlingerne ikke bliver beskadiget af negle eller smykker.

## Behandling af Bloccs®-beskytter

Bloccs®-beskytteren er udsat for slitage, men bør kunne holde i cirka fire uger ved normal brug.

Beskytteren skal kontrolleres inden hver brug for at sikre, at der ikke er tegn på slitage.

Hvis beskytteren er blevet slidt eller beskadiget på nogen måde, skal der købes en ny beskytter.

Beskyttere bør opbevares ved en temperatur på under 26 °C væk fra varmeapparater. Under voldsom kulde kan beskytteren blive stiv. Dette er ikke en permanent tilstand, og varme afhjælper stivheden.

Opbevaring under fugtige forhold bør undgås. Undgå at udsætte beskytteren for en længere periode med lys, særligt direkte sollys og kunstigt lys med et højt UV-indhold.

Bloccs®-beskytteren kan vaskes i varmt vand og bør derefter tørres forsigtigt indvendig og udvendig. Hvis Bloccs®-beskytteren påføres lidt talkum indvendigt, er det lettere at tage den på. Beskytteren må ikke tørres i en tørretumbler eller på en radiator. Undgå kontakt med kobber, kobberholdige legeringer, opløsningsmidler, olier og smørefedt, da det kan beskadige Bloccs®-beskytteren.

Beskytteren skal holdes på afstand af åben ild, da det kan medføre alvorlig personskade og endda dødsfald.

*Hvis du har spørgsmål vedrørende Bloccs®-beskytteren, kan du besøge [www.bloccs.com](http://www.bloccs.com) eller sende en e-mail til [info@bloccs.com](mailto:info@bloccs.com)*

*En kopi af denne vejledning, vores størrelsesoversigt og Bloccs®-garantien er tilgængelige på vores websted [www.bloccs.com](http://www.bloccs.com)*

*Bloccs® forbeholder sig ret til at ændre vejledningen, hvis det anses for nødvendigt. Som forbruger er det dit ansvar at kontrollere onlineversionen af vejledningen for at se, om der er foretaget ændringer.*

**ADVARSEL:** Bloccs® kan være glat, når den er våd. Brug en skridsikker bademåtte i brusebadet eller badekarret, og læg desuden en skridsikker måtte eller et håndklæde på gulvet, når du træder ud af badet. Du bør ikke gå rundt langs en pool, når du bærer en Bloccs®-beskytter, og du skal være ekstra forsigtig, når du går op og ned ad trin i et svømmebassin, da de kan være glatte. Hold godt fast i gelænderet.

**ADVARSEL:** Bloccs®-beskyttere er ikke legetøj. For at undgå fare for kvælning skal produktet og emballagen opbevares utilgængeligt for børn.

**ADVARSEL:** Naturlig gummilatex kan medføre en allergisk reaktion. Hvis du får lægelig pleje, skal du have lægens godkendelse, før du bruger beskytteren. **MÅ IKKE ANVENDES, HVIS DU ER ALLERGISK OVER FOR LATEX.**

**ADVARSEL:** Der skal udvises ekstra forsigtighed, når ben i gips nedsænkes i vand, da gipsen kan blive tung og begrænse bevægelse. Du bør ikke forsøge at svømme med et ben i gips.

**ADVARSEL:** Der skal udvises forsigtighed i forhold til PICC- eller IV-slangere.

*Det er ikke muligt at advare om alle mulige farer i forbindelse med anvendelsen af dette produkt. Forbrugere rådes derfor til at udvise sund fornuft og god dømmekraft, når de anvender en Bloccs®-beskytter.*

**Alvorlige hændelser, der opstår i forbindelse med denne enhed, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i det land, hvor den er købt.**

# BLOCCS®

## SÅDAN TAGER DU EN BLOCCS® - BESKYTTER PÅ EN **ARM** ELLER ET **BEN** UDEN HJÆLP


Beskytteren skal anvendes i henhold til alle anvisninger om behandling og brug. Du bedes besøge [www.bloccs.com](http://www.bloccs.com) for at se vores demonstrationsvideo og læse ofte stillede spørgsmål.



Tag beskytteren ud af emballagen, og fold den ud. Tag skarpe ringe o.l. af.



Inden brug skal forseglingen grubbes sammen og strækkes forsigtigt med hænderne.

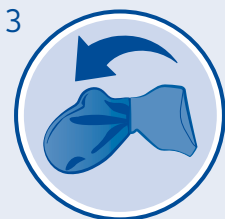

Fold beskytteren halvvejs tilbage fra den åbne ende.



Prøv overtrækket på den arm eller det ben, der ikke er i gips eller forbindelse, først for at kontrollere, hvordan forseglingen passer.

Før den påkrævede arm eller det påkrævede ben ind i den åbne ende, så foden eller hånden er i beskytterens ende.



Rul beskytteren op over armen eller benet igen, indtil forseglingen sidder fladt mod huden. Hvis forseglingen er for stram eller for løs, når du prøver den, skal du vælge en beskytter i en anden størrelse.


Lad en smule luft slippe ud, så der ikke skabes en luftlomme.

# BLOCCS®

## SÅDAN TAGER DU EN BLOCCS® - BESKYTTER PÅ EN **ALBUE** ELLER ET **KNÆ** UDEN HJÆLP

Beskytteren skal anvendes i henhold til alle anvisninger om behandling og brug. Du bedes besøge [www.bloccs.com](http://www.bloccs.com) for at se vores demonstrationsvideo og læse ofte stillede spørgsmål.

1

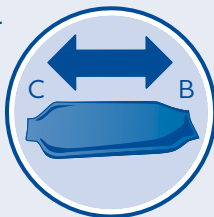

Tag beskytteren ud af emballagen, og fold den ud. Tag skarpe ringe o.l. af.


Beskytteren har to ender:  
En bred ende, der skal slutte omkring bicepsen eller låret (B), og en mindre ende, der skal slutte omkring håndledet eller den nederste del af læggen (C).

2




Før brug skal forseglingerne gribbes sammen og strækkes forsigtigt med hænderne.

3

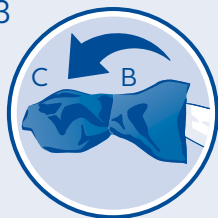

Du kan tage beskytteren nemt på ved at tage B-enden og vende vrangen ud på halvdelen af beskytteren, så den befinder sig lige over C-enden.


4

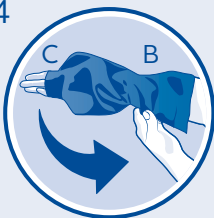

Prøv overtrækket på den arm eller det ben, der ikke er i gips eller forbindelse, først for at kontrollere, hvordan forseglingen passer.

Før forsigtigt enten hånden eller foden gennem B-enden først og derefter C-enden. Rul derefter forsigtigt B-enden op, indtil den sidder glat mod armen eller låret.



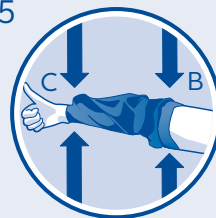


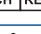






5



Hele forbindingsområdet skal være dækket, og der bør dannes en glat, stramtsiddende og vandtæt forsegling omkring armen eller benet i begge ender af beskytteren. Hvis forseglingen føles for stram eller for løs, når du prøver den på, skal du vælge en beskytter i en anden størrelse.

Lad en smule luft slippe ud, så der ikke skabes en luftlomme.

## ORDLISTE OVER SYMBOLER

	Producent
	CE-mærkning
	UK Overensstemmelse vurderet
	Medicinsk udstyr
	Unik udstyrsidentifikation
	Udstyrmængde
	Batchkode
	Produktionsdato
	Distributør
	Autoriseret repræsentant i EU
	Schweizisk autoriseret repræsentant
	Importør
	FORSIGTIG
	Indeholder naturlig gummilætex
	Glat underlag
	Risiko for kvælning
	Hold væk fra sollys
	Opbevares mellem 5-26 °C (41-78 °F)
	Enkelt patient – kan bruges flere gange
	Ikke-steril
	Læs brugsanvisning
	Genanvendelig emballage
	Ingen åbne flammer