

BLOCCS®



WATERPROOF PROTECTOR

za gipseve i zavoje



VODIČ ZA ODRŽAVANJE I UPORABU

HR Vodootporna zaštita Bloccs® posebno je osmišljena za zaštitu gipsa, zavoja ili povoja kako bi se korisniku omogućilo normalno kupanje ili tuširanje. Ta potpuno vodonepropusna zaštita može se u potpunosti uroniti u vodu i upotrebljavati na plaži, u bazenu za plivanje ili dječjem bazenu na napuhavanje.

⚠ UPOZORENJE: lateks od prirodnog kaučuka može uzrokovati alergijsku reakciju. Ako primete medicinsku skrb, prije uporabe zaštite zatražite odobrenje svog liječnika.
NEMOJTE UPOTREBLJAVATI AKO STE ALERGIČNI NA LATEKS.



**Precision Dippings
Manufacturing Ltd**
Unit J, Lawrence Drive
Stover Trading Estate, Yate,
Bristol, BS37 5PG
UK



Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
B-1030, Brussels
Belgium



Obelis SWISS GmbH
Ruessenstrasse 12
6340 Baar/ZG
Switzerland

Proizvedeno u Ujedinjenoj Kraljevini

Svi proizvodi proizvedeni su u skladu s važećom odobrenom normom ISO 9001 za sustave upravljanja kvalitetom.

©Bloccs® 2023



Bloccs®

Precision Dippings
Manufacturing Ltd, Unit J,
Lawrence Drive, Stover Trading
Estate, Yate, Bristol, BS37 5PG, UK
Telefon: +44 (0) 1454 318197
E-pošta: info@bloccs.com

www.bloccs.com



Umnoženi ili kopirani primjerci, izvedena djela, distribucija i javno izlaganje ovog priručnika dopušteni su samo uz prethodni pisani pristanak tvrtke Bloccs®.

ODRŽAVANJE I UPORABA ZAŠTITE BLOCCS®

Hvala vam što se odabrali Bloccs®. Pažljivo pročitate upute u nastavku prije nego upotrijebite zaštitu Bloccs® ili pomognete djetetu s uporabom. Time ćete osigurati sigurnu uporabu zaštite i učinkovitost vodonepropusnog ruba na otvoru.

Odluku o nošenju zaštite Bloccs® tijekom kupanja, tuširanja ili bilo koje druge aktivnosti u vodi donosite na vlastitu odgovornost. Potražite savjet liječnika kako biste osigurali da ta aktivnost neće utjecati na vašu ozljedu.

Stavljanje zaštite Bloccs®

Budući da je zaštita Bloccs® izrađena od lateksa od prirodnog kaučuka, potrebno je ukloniti sav oštar nakit i pripaziti kako ne biste probušili zaštitu noktima. Oštre rubove prekrijte trakom ili rastezljivim zavojem.

Prije uporabe protrljajte rub na otvoru između ruku i nježno ga istegnite. Kako biste provjerili prijanjanje ruba na otvoru, navlaku isprobajte na ruci ili nozi bez gipsa. Ako prilikom isprobavanja rub na otvoru prijanja prečvrsto ili prelabavo, odaberite drugu veličinu zaštite.

Glatki, vodootporni rub na otvoru treba čvrsto prijanjati uz kožu i lako se rastezati preko zavoja.

Slijedite naše jednostavne smjernice u pet koraka navedene u ovom letku kako biste stavili zaštitu Bloccs® na ruku/nogu i lakat/koljeno.

Uporaba zaštite Bloccs®

Zaštita Bloccs® namijenjena je očuvanju suhoće zavoja kada se upotrebljava u blizini vode ili u vodi.

Rub na otvoru zaštite Bloccs® iste je vrste kao zaštitni rub na suhim odijelima. Prije ulaska u vodu uklonite sav zrak iz zaštite Bloccs® masiranjem navlake nagore prema rubu kako u zaštitu ne bi ostalo zraka. To možete učiniti i postupnim spuštanjem uda u vodu kako biste pritiskom vode istisnuli zrak do vrha zaštite.

Lagano odvojite rub od kože kako biste uklonili zrak prije uranjanja i pazite da voda ne uđe u zaštitu.

Zaštitu stavite neposredno prije ulaska u vodu i uklonite je čim izađete.

Odluku o ulasku u vodu donosite na vlastitu odgovornost. Nemojte skakati u bazen. Zaštita nije osmišljena za ronjenje, ronjenje s maskom i disaljkom ili bilo koje druge vodene sportove.

Preporučujemo da zaštitu Bloccs® redovito provjeravate tijekom uporabe kako biste osigurali vodonepropusnost i udobnost ruba na otvoru.

Zaštitu možete nositi do 30 minuta ako je i dalje udobna kada je nosite, ne steže vas i ako je redovito provjeravate. Ako zaštitu nosite dulje od 30 minuta, preostali zrak može uzrokovati znojenje i neudobnost.

U SVAKOM TRENUTKU NADGLEDAJTE DJECU AKO SE NALAZE U BAZENU ILI MORU.

Skidanje zaštite

Da biste uklonili zaštitu Bloccs®, pažljivo je prevucite preko zavoja ili gipsa na ruci ili nozi kako ne biste oštetili rub na otvoru noktima ili nakitom.

Održavanje zaštite Bloccs®

Zaštita Bloccs® može se istrošiti uporabom. Tijekom normalne uporabe trebala bi trajati približno četiri tjedna.

Zaštitu provjerite prije svake uporabe kako biste osigurali da na njoj nema znakova oštećenja ili zamora materijala.

Ako je zaštita dotrajala ili na njoj postoje bilo kakva oštećenja, potrebno je kupiti novu.

Zaštitu čuvajte na temperaturi nižoj od 26 °C (78,8 °F) i skladištite dalje od izvora grijanja. Tijekom ekstremne hladnoće zaštita se može ukurutiti. Riječ je o privremenom stanju koje se ispravlja zagrijavanjem.

Potrebno je izbjegavati skladištenje u vlažnim uvjetima. Izbjegavajte izlaganje zaštite svjetlu tijekom duljeg vremenskog razdoblja, osobito ako se radi o izravnoj sunčevoj svjetlosti i umjetnom svjetlu s velikom količinom ultraljubičastog zračenja.

UPOZORENJE: Zaštita Bloccs® može postati skliska kada je mokra. U tušu ili kadi upotrijebite protukliznu podlogu, a ispred tuša ili kade postavite protuklizni otirač ili ručnik. Nemojte hodati uz rub bazena kada nosite zaštitu Bloccs®, a posebno pripazite pri uporabi stepenica bazena jer mogu biti skliske. Čvrsto se držite za rukohvat.

UPOZORENJE: zaštita Bloccs® nije igračka. Da biste izbjegli opasnost od gušenja, proizvod i njegovo pakiranje držite izvan dohvata djece i beba.

UPOZORENJE: lateks od prirodnog kaučuka može uzrokovati alergijsku reakciju. Ako primete medicinsku skrb, prije uporabe zaštite zatražite odobrenje svog liječnika. **NEMOJTE UPOTREBLJAVATI AKO STE ALERGIČNI NA LATEKS.**

UPOZORENJE: prilikom uranjanja gipsa na nozi u vodu potrebno je posebno pripaziti jer gips može biti težak i ograničiti kretanje. Nemojte pokušavati plivati s gipsom na nozi.

UPOZORENJE: Oprezno postupajte s PICC (periferno umetnutim središnjim kateterom) ili IV (intravenskim) linijama.

Nije moguće izdati upozorenja o svakoj vrsti opasnosti u vezi s uporabom ovog proizvoda. Korisnicima se stoga savjetuje da upotrijebe zdrav razum i racionalno prosude o mogućim opasnostima prilikom uporabe zaštite Bloccs®.

Svaki ozbiljan štetni događaj do kojeg je došlo u vezi s proizvodom trebao bi se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države u kojoj je proizvod kupljen.

Zaštitu Bloccs® možete oprati u toploj vodi, a zatim ju je potrebno potpuno osušiti iznutra i izvana. Ako unutrašnjost zaštite Bloccs® lagano posipate talkom, time možete olakšat njezino navlačenje. Zaštitu nemojte sušiti u sušilici ili na radijatoru.

Izbjegavajte dodir s bakrom, bakrenim legurama, otapalima, uljima i mastima jer mogu oštetiti zaštitu Bloccs®.

Zaštitu držite dalje od otvorenog plamena jer u suprotnom može doći do teških tjelesnih ozljeda te čak i smrti.

U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti Bloccs® posjetite stranicu www.bloccs.com ili pošaljite e-poruku na adresu info@bloccs.com.


Primjerak ovog priručnika, tablica za određivanje veličine i jamstvo tvrtke Bloccs® dostupni su na našem mrežnom mjestu www.bloccs.com

Bloccs® zadržava pravo izmjene priručnika kada to smatra potrebnim. Kao korisnik ovog proizvoda Vaša je odgovornost provjeriti internetsku verziju priručnika za bilo kakve izmjene.

BLOCCS®

STAVLJANJE ZAŠTITE BLOCCS® NA RUKU ILI NOGU

Zaštita se mora upotrebljavati sukladno svim uputama za održavanje i uporabu. Posjetite stranicu www.bloccs.com kako biste pogledali videozapis s demonstracijom i pročitali često postavljana pitanja.

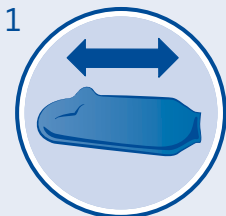

Izvadite zaštitu iz pakiranja i rasklopite je. Uklonite oštre prstene i druge slične predmete.



Prije uporabe protrljajte rub na otvoru između ruku i nježno ga istegnite.



Zaštitu preklopite na pola krenuvši od otvorenog kraja prema dolje.



Kako biste provjerili prijanjanje ruba na otvoru, navlaku najprije isprobajte na ruci ili nozi bez gipsa ili zavoja.

Ruku ili nogu umetnite u otvoreni kraj, tako da stopalo ili dlan smjestite na drugi, zatvoreni kraj zaštite.



Zaštitu odmotajte uz ruku ili nogu dok rub otvora ne prione uz kožu. Ako prilikom isprobavanja rub na otvoru prijanja prečvrsto ili prelabavo, odaberite drugu veličinu zaštite.


Kako biste izbjegli plutanje zaštite, ispustite malu količinu zraka.

BLOCCS®

STAVLJANJE ZAŠTITE BLOCCS® NA LAKAT ILI KOLJENO

Zaštita se mora upotrebljavati sukladno svim uputama za održavanje i uporabu. Posjetite stranicu www.bloccs.com kako biste pogledali videozapis s demonstracijom i pročitali često postavljana pitanja.

1

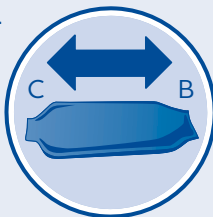

Izvadite zaštitu iz pakiranja i rasklopite je. Uklonite oštre prstene i druge slične predmete. Zaštita ima dva otvorena kraja.


Širi kraj prijanja oko bicepsa ili bedra (B), a uži kraj prijanja oko ručnog zgloba ili donjeg dijela lista (C).

2




Prije uporabe protirajte rubove na otvorima između ruku i nježno ih istegnite.

3

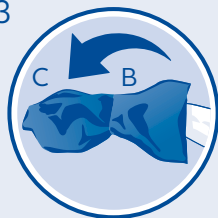

Zaštitu jednostavno navucite na sljedeći način: uzmite kraj B i pola zašтите izvrnite prema van tako da se kraj B nalazi iznad kraja C.


4

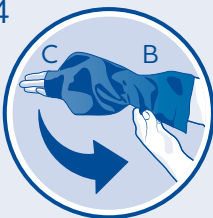

Kako biste provjerili prijanjanje ruba na otvoru, navlaku najprije isprobajte na ruci ili nozi bez gipsa ili zavoja.

Polagano umetnite ruku ili stopalo najprije kroz kraj B, a zatim kroz kraj C. Zatim pažljivo odmotajte kraj B tako da čvrsto prijanja uz ruku ili bedro.

5

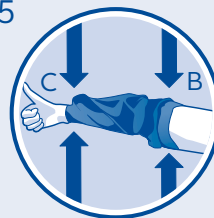




Potrebno je prekriti cijelo područje zavoja. Glatki, voodootporni rub treba čvrsto prijanjati uz kožu ruke ili noge na oba kraja zašтите. Ako prilikom isprobavanja rub na otvoru prijanja prečvrsto ili preljavno, odaberite drugu veličinu zašтите.

Kako biste izbjegli plutanje zašтите, ispuštite malu količinu zraka.

BLOCCS®

SYMBOL GLOSSARY

	Proizvođač
	CE oznaka sukladnosti
	Ocijenjena sukladnost za UK
	Medicinski proizvod
	Jedinstvena identifikacija proizvoda
	Količina proizvoda
	Serijski broj
	Datum proizvodnje
	Distributer
	Ovlašteni zastupnik u Europskoj uniji
	Švýcarský autorizovaný zástupce
	Uvoznik
	OPREZ
	Sadržava lateks od prirodnog kaučuka
	Sklika površina
	Opasnost od gušenja
	Držati dalje od sunčeve svjetlosti
	Čuvati na temperaturi između 5 i 26 °C (41 – 78 °F)
	Jedan pacijent – višestruka uporaba
	Nesterilno
	Pogledajte upute za uporabu
	Pakiranje koje se može reciklirati
	Držati dalje od otvorenog plamena