

# BLOCCS®



## VÍZÁLLÓ, GIPSZVÉDŐ

gipszkötésekhez és más kötésekhez



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**HU** A Bloccs® vízálló gipszvédőt kifejezetten gipszkötések és más kötések, fáslik védelmére fejlesztették ki, hogy a viselője a szokásos módon fürödhessen vagy zuhanyozhasson. Ez a vízálló és teljes mértékben víz alá meríthető gipszvédő a strandon, illetve úszó- vagy gyerekmedencében is használható.

**⚠ FIGYELEM!** A természetes gumilátex allergiás reakciót válthat ki. Ha egészségügyi kezelésben részesül, kérje ki egészségügyi ellátója hozzájárulását a gipszvédő használata előtt. **NE HASZNÁLJA, HA ALLERGIÁS A LATEXRE!**



**Precision Dippings  
Manufacturing Ltd**  
Unit J, Lawrence Drive  
Stover Trading Estate, Yate,  
Bristol, BS37 5PG  
UK



Obelis s.a.  
Bd. Général Wahis 53  
B-1030, Brussels  
Belgium



Obelis SWISS GmbH  
Ruessenstrasse 12  
6340 Baar/ZG  
Switzerland

### Gyártva az Egyesült Királyságban

Minden termék a jelenleg  
jóváhagyott ISO 9001-es  
minőségbiztosítási rendszerrel  
összhangban készül.  
©Bloccs® 2023



### Bloccs®

Precision Dippings  
Manufacturing Ltd, Unit J,  
Lawrence Drive, Stover Trading  
Estate, Yate, Bristol, BS37 5PG, UK  
Telefon: +44 (0) 1454 318197  
E-mail: [info@bloccs.com](mailto:info@bloccs.com)

[www.bloccs.com](http://www.bloccs.com)



Ezen használati utasítások sokszorosítása, másolása, származékos művekként való használata, terjesztése és nyilvános bemutatása kizárólag a Bloccs írásos hozzájárulásával engedélyezett.

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BLOCCS® GIPSZVÉDŐJÉHEZ

Köszönjük, hogy a Bloccs® gipszvédőt választotta. Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi utasításokat a Bloccs® gipszvédő használata előtt, vagy mielőtt egy gyermeket felügyelne használata közben. Így biztosíthatja, hogy a gipszvédő használata biztonságos, és a vízzáró rész is hatékonyan működik.

A Bloccs® gipszvédő használata fürdés, zuhanyzás vagy egyéb vízben végzett tevékenység közben kizárólag saját felelősségre történik. A tevékenység sérülésre gyakorolt hatásával kapcsolatban kérje egészségügyi szakember tanácsát.

## A Bloccs® gipszvédő felvétele

Mivel Bloccs® gipszvédője természetes gumilatexből készült, minden éles ékszert el kell távolítani magáról, és vigyázni kell, nehogy kilyukassza körmével. Az éles széleket takarja le ragasztószalaggal vagy rugalmas kötszerrel.

Használat előtt kezével dörzsölje össze a vízzáró részt, és finoman nyújtsa meg. A vízzáró rész illeszkedésének ellenőrzéséhez próbálja ki gipszvédőjét azon a karján vagy lábán, amelyik nincs begipszelve. Ha a záró rész túl szorosnak vagy lazának bizonyul a próba során, válasszon egy másik méretű gipszvédőt.

A sima, bőrhöz tapadó, vízálló záró résznek könnyedén ki kell nyúlnia a kötözést lefedve.

Kövesse a brosúrában található könyvű, öt lépésből álló útmutatónkat Bloccs® karra/lábra és könyökre/térdre való gipszvédője felvételéhez.

## A Bloccs® gipszvédő használata

A Bloccs® gipszvédőt a kötések szárazon tartására tervezték víznek való kitettség vagy vízben való elmerülés idejére.

A Bloccs® gipszvédők ugyanazzal a fajta zárral rendelkeznek, mint amelyek a vízhatlan bűvárúhákön találhatóak.

Mielőtt belépne a vízbe, távolítsa el a levegőt a Bloccs® gipszvédőből a takaró rész felfelé, a záró rész irányába tartó masszírozásával a beszorult levegő kiengedése érdekében. Ez fokozatosan is elvégezhető úgy, hogy a végtagot lassan engedi bele a vízbe, hogy a víz nyomása kiszorítsa a levegőt a gipszvédő szájánál.

Teljes elmerülés előtt óvatosan húzza el a záró részt a bőrtől a levegő eltávolítására, hogy semmiképp ne kerüljön víz a gipszvédőbe.

A gipszvédőt épp a vízbe való belépés előtt kell felvenni, és a vízből való távozás után azonnal el kell távolítani.

A vízbe saját felelősségére mehet be. Ne ugorjon be az úszómedencébe! A gipszvédőket nem búvárkodás, sznorkelés vagy más vízisport alatti használatra tervezték.

Javasoljuk, hogy a használat alatt Bloccs® gipszvédőjét rendszeresen ellenőrizze, hogy megbizonyosodjon, a záró rész továbbra is vízzáró és kényelmes.

A gipszvédőt akár 30 percig is viselheti, amennyiben az továbbra is kényelmes, nem túl szoros, és rendszeresen ellenőrzi.

A gipszvédő 30 percnél tovább való viselése a beszorult levegő miatti izzadást és kényelmetlen érzetet eredményezhet.

A GYERMEKEK AZ USZODÁBAN VAGY TENGERTEN ÁLLANDÓ FELÜGYELETET IGENYELNEK.

# A gipszvédő eltávolítása

A Bloccs® gipszvédő eltávolításához óvatosan csúsztassa le azt a karján vagy lábán található kötésről vagy gipszről. Óvatosan kell eljárnia, hogy a záró részeket ne sértse fel körmével vagy ékszereivel.

## A Bloccs® gipszvédő védelme

A Bloccs® gipszvédő elhasználódhat, de kb. 4 hétnyi normális használatot ki kell bírnia.

A gipszvédőt minden használat előtt ellenőrizni kell, hogy biztos ne legyen rajta sérülés vagy anyagfáradás.

Ha a gipszvédő elhasználódott vagy bármilyen módon megsérült, le kell cserélni.

A gipszvédők 26° C-os hőmérséklet alatt tárolandók, és hőforrásoktól távol tartandók. Extrém hidegben a gipszvédő megkeményedhet. Ez nem tartós állapot, felmelegítés után visszanyeri rendes állapotát.

A párás tárolási környezetet kerülni kell. Kerülje el a gipszvédő hosszabb ideig tartó fénynek való kitettségét, kifejezetten a közvetlen napfénynek és a magas UV-tartalmú mesterséges fénynek való kitettségét.

A Bloccs® gipszvédő meleg vízben mosható, majd körültekintően kívül-belül meg kell szárítani. A belső rész enyhe hintőporozása segít felvenni a Bloccs® gipszvédőt. Ne szárítsa a gipszvédőt szárítógépben vagy radiátoron.

Kerülje a rézzel, réztartalmú ötvözetekkel, oldószerekkel, olajokkal és zsírokkal való érintkezést, mivel ezek károsíthatják a Bloccs® gipszvédőt.

Tartsa távol nyílt lángoktól, mivel súlyos testi sérüléseket és akár halált is okozhatnak.

*Ha bármi kérdése lenne Bloccs® gipszvédőjével kapcsolatban, kérjük látogasson el a [www.bloccs.com](http://www.bloccs.com) weboldalra vagy küldjön nekünk egy e-mailt az [info@bloccs.com](mailto:info@bloccs.com) e-mail-címre.*

*Ezen használati utasítás egy másolata, méretábrázlatunk és a Bloccs® garancia elérhető weboldalunkon: [www.bloccs.com](http://www.bloccs.com)*

*A Bloccs® fenntartja a jogot ezen használati utasítás esetleges megváltoztatására. A termék használójaként az Ön felelőssége a használati utasítás online verziójának ellenőrzése az esetleges módosítások miatt.*

**FIGYELEM!** A Bloccs® nedvesség hatására csúszóssá válhat. Használjon csúszásmentes fürdőszobaszőnyeget a zuhanyzóban vagy a fürdőszobában, és készítsen elő egy másik csúszásmentes szőnyeget vagy törölközőt a kiszálláshoz is. Ne sétáljon az úszómedence szélén a Bloccs® gipszvédő viselésekor, és kifejezetten körültekintően kell eljárni az úszómedence lépcsőinek használatakor, mivel azok különösen csúszósak lehetnek. Kapaszkodjon erősen a korlátba.

**FIGYELEM!** A Bloccs® gipszvédő nem játék! A fulladásveszély elkerülése érdekében a termék és csomagolása gyermekektől és csecsemőktől távol tartandó.

**FIGYELEM!** A természetes gumilátex allergiás reakciót válthat ki. Ha egészségügyi kezelésben részesül, kérje ki egészségügyi ellátója hozzájárulását a gipszvédő használata előtt. **NE HASZNÁLJA, HA ALLERGIÁS A LATEXRE!**

**FIGYELEM!** Kifejezett körültekintés szükséges a lábon viselt gipszek vízben való elmerítése előtt, mivel azok nehezek lehetnek, és akadályozhatják a mozgást. Ne próbáljon meg lábgipszsel úszni!

**FIGYELEM!** PICC katéter vagy infúzió használata során körültekintően kell eljárni.


*Nem lehetséges a termék használata során felmerülő minden egyes lehetséges veszélyforrásról tájékoztatást adni. Ezért vásárlóinknak az tanácsoljuk, hogy a Bloccs® gipszvédők használatakor döntsenek saját meglátásuk és megítélésük szerint.*

**Az eszközzel kapcsolatos minden komoly incidenst jelenteni kell a gyártó és annak az országnak az illetékes hatósága felé, amelyben a terméket vásárolták.**

# BLOCCS®

## A KARRA VAGY LÁBRA VALÓ BLOCCS® GIPSZVÉDŐ FELVÉTELE SEGÍTSÉG NÉLKÜL

A gipszvédőt a Használati útmutatónak megfelelően kell használni. Kérjük, látogasson el a [www.bloccs.com](http://www.bloccs.com) oldalra bemutató videóink és Gyakran Ismételt Kérdéseink megtekintéséhez!

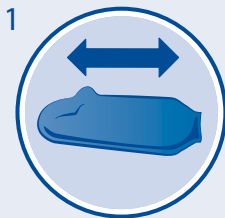

Távolítsa el a gipszvédőt a csomagolásból, és hajtogassa ki. Vegyen le minden éles gyűrűt stb.



Használat előtt kezével dörzsölje össze a vízzáró részt, és finoman nyújtsa meg.



A nyitott végét megfogva hajtsa vissza a gipszvédőt félig.



A vízzáró rész illeszkedésének ellenőrzéséhez próbálja ki gipszvédőjét azon a karján vagy lábán, amelyik nincs begipszelve vagy bekötve.

Helyezze a megfelelő kart vagy lábat a nyitott végéhez, hogy a lábfej vagy a kéz a gipszvédő végéhez kerüljön.



Tekerje fel a gipszvédőt a karon vagy lábán egészen addig, amíg a záró rész a bőrre nem simul. Ha a záró rész túl szorosnak vagy lazának bizonyul a próba során, válasszon egy másik méretű gipszvédőt.


Engedjen ki egy kis levegőt, hogy megelőzze a lebegést.

# BLOCCS®

## A KÖNYÖKRE VAGY TÉRDRE VALÓ BLOCCS® GIPSZVÉDŐ FELVÉTELE SEGÍTSÉG NÉLKÜL

A gipszvédőt a Használati útmutatónak megfelelően kell használni. Kérjük, látogasson el a [www.bloccs.com](http://www.bloccs.com) oldalra bemutató videóink és Gyakran Ismételt Kérdéseink megtekintéséhez!

1

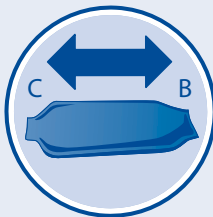

Távolítsa el a gipszvédőt a csomagolásból, és hajtogassa ki. Vegyen le minden éles gyűrűt stb.

A gipszvédőnek két vége van: egy szélesebb a bicepsz vagy comb körüli lezárásra (B), illetve egy keskenyebb a csukló vagy vádli körüli (C) lezárásra.

2




Használat előtt kezével dörzsölje össze a vízzáró részeket, és finoman nyújtsa meg őket.

3



A gipszvédő könnyű felhelyezéséhez fogja meg a B jelű végét, majd fordítsa ki a gipszvédő felét úgy, hogy a C jelű vége épp csak kilátszódjon.


4

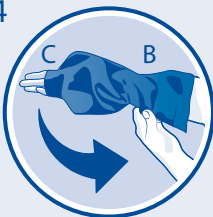

A vízzáró rész illeszkedésének ellenőrzéséhez próbálja ki gipszvédőjét azon a karján vagy lábán, amelyik nincs begipszelve vagy bekötve.

Lassan dugja keresztül a kezét vagy lábfejét a B, majd a C jelű nyíláson is, majd óvatosan göngyölje ki a B jelű végét egészen addig, amíg a záró rész a karra vagy combra nem simul.

5

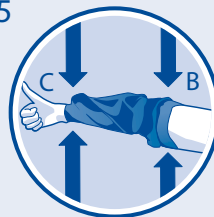

Az egész bekötött/begipszelt területet el kell fedni, és a gipszvédő mindkét végénél a bőrhez simuló vízálló zárásnak kell kialakulnia a karon és a lábon. Ha a záró rész túl szorosnak vagy lazának bizonyul a próba során, válasszon egy másik méretű gipszvédőt.

Engedjen ki egy kis levegőt, hogy megelőzze a lebegést.

# A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

	Gyártó
	CE megfelelési jelölés
	Megfelelőségértékelés az Egyesült Királyságban
	Orvostechikai eszköz
	Egyedi eszközazonosító
	Eszközök száma
	Gyártási tételszám
	Gyártás ideje
	Forgalmazó
	Meghatalmazott képviselő az Európai Unióban
	Svájci meghatalmazott képviselő
	Importőr
	FIGYELMEZTETÉS
	Természetes latex gumit tartalmaz
	Csúszós felület
	Fulladásveszély
	Napfénytől távol tartandó
	Tárolás 5–26°C között (41–78°F)
	Többszöri használatra egy betegnél
	Nem steril
	Olvassa el a használati utasítást
	Újrahasznosítható csomagolás
	Nyílt láng használata tilos