



VANDENIUI ATSPARIOS APSAUGINĖS MOVOS

gipsui ir tvarsčiams



PRIEŽIŪROS IR NAUDOJIMO VADOVAS

LT Vandeniui atspari apsauginė mova „Bloccs“[™] specialiai sukurta apsaugoti gipsui, tvarsčiams arba bintui, kad jos naudotojas galėtų praustis ir maudytis kaip įprasta. Ši vandeniui atspari ir visiškai panardinama apsauginė mova gali būti naudojama pliažoje arba plaukimo ir paprastame baseine.

⚠ ĮSPĖJIMAS! Natūraliojo kaučiuko lateksas gali sukelti alerginę reakciją. Jeigu šiuo metu gydotės, dėl apsauginės movos naudojimo pasikonsultuokite su savo medicinos paslaugų teikėju.
NENAUDOKITE, JEIGU ESATE ALERGIŠKI LATEKSUI.



**Precision Dippings
Manufacturing Ltd**
Unit J, Lawrence Drive
Stover Trading Estate, Yate,
Bristol, BS37 5PG
UK

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
B-1030, Brussels
Belgium



Obelis SWISS GmbH
Ruessenstrasse 12
6340 Baar/ZG
Switzerland



Pagaminta JK

Visi gaminiai pagaminti
laikantis patvirtinto ISO 9001
kokybės kontrolės sistemos
standarto.

©Bloccs[®] 2023

Bloccs[®]

Precision Dippings
Manufacturing Ltd, Unit J,
Lawrence Drive, Stover Trading
Estate, Yate, Bristol, BS37 5PG, UK
Tel: +44 (0) 1454 318197
El. paštas: info@bloccs.com
www.bloccs.com



Atgaminti, kopijuoti, naudoti dalimis, platinti ir skelbti šias instrukcijas viešai leidžiama tik iš anksto gavus raštišką „Bloccs“[®] sutikimą.

APSAUGINĖS MOVOS „BLOCCS“ PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMAS

Dėkojame, kad pasirinkote „Bloccs“®. Prieš naudodami arba prieš mokydami savo vaiką, kaip naudoti apsauginę movą „Bloccs“®, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Taip užtikrinsite, kad apsauginė mova bus naudojama saugiai, o vandeniui atsparus sandariklis veiks tinkamai.

Visa atsakomybė už sprendimą mėvėti apsauginę movą „Bloccs“® tuo metu, kai prausiatės duše ar užsiimate bet kuria kita veikla vandenyje, ir su tuo susijusi rizika tenka jums. Norėdami įsitikinti, kad ta veikla nedarys poveikio sužalojimui, pasitarkite su gydytoju.

Kaip užsidėti apsauginę movą „Bloccs“®

Kadangi jūsų apsauginė mova „Bloccs“® pagaminta iš natūraliojo kaučiuko latekso, reikėtų nusiimti bet kokius aštrius papuošalus ir saugoti, kad nepradurtumėte jos nagais. Uždenkite neapdirbtus galus juosta arba tampriu tvarsčiu.

Prieš naudodami patrinkite sandariklį delnais ir šiek tiek patampykite. Norėdami patikrinti, kaip prisitvirtino sandariklis, išbandykite jį ant rankos ar kojos be gipso. Jeigu pabandžius sandariklis atrodo per daug užveržtas arba per laisvas, pasirinkite kito dydžio apsauginę movą.

Švelnus, prie odos prigludęs, vandeniui atsparus sandariklis turėtų lengvai temptis ant tvarsčio.

Norėdami užsidėti ant savo rankos arba kojos ir ant savo alkūnės arba kelio apsauginę movą „Bloccs“®, atlikite penkis paprastus šiame lapelyje pateiktus veiksmus.

Apsauginės movos „Bloccs“® naudojimas

Apsauginė mova „Bloccs“® skirta išlaikyti gipsui sausam, kai jis veikiamas vandens arba jį panardinamas. Apsauginėse movose „Bloccs“® naudojami to paties tipo sandarikliai, kaip ir sausuose kostiumuose.

Prieš eidami į vandenį pašalinkite iš apsauginės movos „Bloccs“® visą orą, masažiniais judesiais braukdami per uždangalą į viršų, sandariklio link. Tą patį galima daryti

pamažu panardinant galūnę į vandenį, kad vandens slėgis nustumtų orą į apsauginės movos viršų.

Atsargiai patraukite sandariklį nuo odos, kad prieš panirdami pašalintumėte orą; pasistenkite, kad į apsauginės movos vidų nepatektų oro.

Apsauginę movą reikėtų užsimauti prieš pat einant į vandenį ir nusimauti, kai tik iš jo išlipama.

Rizika dėl sprendimo lipti į vandenį tenka jums. Negalima šokti ar nerti į baseiną. Apsauginė mova nebuvo sukurta nardymo, nardymo su vamzdeliu veiklai ar bet kokiai kitai vandens sporto rūšiai.

Rekomenduojame naudojimo metu reguliariai tikrinti apsauginę movą „Bloccs“® ir įsitikinti, kad sandariklis vis dar nepraleidžia vandens ir yra patogus.

Apsauginę movą galima mėvėti iki 30 minučių – su sąlyga, kad ją vis dar patogum mėvėti, ji per daug neveržia ir reguliariai tikrinama.

Mėvint apsauginę movą ilgiau negu 30 minučių, viduje gali atsirasti oro, ir tai gali sukelti prakaitavimą ir nemalonių pojūčių.

VAIKUS BASEINE ARBA JŪROJE BŪTINA PRIŽIŪRėti VISĄ LAIKĄ.

Kaip nusiimti apsauginę movą

Norėdami nusiimti apsauginę movą „Bloccs™“, atsargiai patraukite ją virš tvarsčio arba gipso ant rankos ar kojos. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte sandariklių papuošalais arba nagais.

Apsauginės movos „Bloccs®“ priežiūra

Apsauginė mova „Bloccs™“ nusidėvi, bet įprastai naudojant jos turėtų užtekti maždaug 4 savaitėms.

Apsauginę movą reikia tikrinti kaskart prieš naudojant, ar nėra pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių.

Jeigu apsauginėje movoje pastebite pakitimų arba ji kaip nors pažeista, reikia įsigyti naują.

Apsauginės movas reikia laikyti žemesnėje negu 26 °C (78,8 °F) temperatūroje ir atokiai nuo šildytuvų. Dideliame šaltyje apsauginė mova gali pasidaryti standi, tačiau tai nėra nuolatinė būseną ir šiltesnėje temperatūroje mova tampa normali.

Reikėtų vengti laikyti ją drėgnose vietose. Venkite ilgesnį laiką laikyti apsauginę movą šviesoje, ypač tiesioginiuose saulės spinduliuose, kai aukštas UV indeksas.

Apsauginę movą „Bloccs™“ galima plauti šiltame vandenyje ir paskui reikia kruopščiai išdžiovinti iš vidaus ir iš išorės. Iš vidaus panaudojus šiek tiek talko, apsauginę movą „Bloccs™“ užsimauti bus lengviau. Nedžiovinkite apsauginės movos skalbyklės centrifugoje arba ant radiatoriaus.

Venkite sąlyčio su variu, vario sudėtyje turinčiais lydiniais, tirpikliais, alyvomis ir tepalais, nes jie gali pažeisti apsauginę movą „Bloccs™“.

Saugokite nuo atviros liepsnos, nes tai gali sukelti sunkius kūno sužalojimus ar net mirtį.

Jeigu dėl apsauginės movos „Bloccs™“ kyla klausimų, žr. www.bloccs.com arba rašykite el. paštu info@bloccs.com.

Šių instrukcijų kopija, mūsų dydžių lentelė ir „Bloccs™“ garantija pateiktos mūsų interneto svetainėje www.bloccs.com

„Bloccs™“ pasilieka teisę šias instrukcijas keisti savo nuožiūra. Vartotojas pats atsako už tai, kad tikrintų naujausią internete įkeltą šių instrukcijų versiją, ar nėra kokių nors pakeitimų.

ĮSPĖJIMAI! Sušlapusi, „Bloccs™“ gali pasidaryti slidi. Duše ar vonioje naudokite neslystantį kilimėlį, taip pat turėkite dar vieną neslystantį kilimėlį arba rankšluostį, kurį panaudosite, kai išlipsite. Mūvėdami apsauginę movą „Bloccs™“, nevaikščiokite palei baseino kraštą ir būkite itin atsargūs lipdami baseino laipteliais, nes jie gali būti slidūs. Tvirtai laikykites turėklų.

ĮSPĖJIMAI! Apsauginės movos „Bloccs™“ nėra žaislai. Saugodamiesi užduosimo, laikykite šį gaminį ir jo pakuotę atokiai nuo vaikų ir kūdikių.

ĮSPĖJIMAI! Natūraliojo kaučiuko lateksas gali sukelti alerginę reakciją. Jeigu šiuo metu gydotės, dėl apsauginės movos naudojimo pasikonsultuokite su savo medicinos paslaugų teikėju. NENAUDOKITE, JEIGU ESATE ALERGIŠKI LATEKSUI.

ĮSPĖJIMAI! Būkite itin atsargūs nardindami į vandenį gipsą, nes jis gali būti sunkus ir gali varžyti judėjimą. Neplaukite, jeigu jūsų koja sugipsuota.

ĮSPĖJIMAI! Elkitės atsargiai su PICC arba IV linijomis.

Neįmanoma įspėti apie visas galimas grėsmes, susijusias su šiuo gaminiu. Todėl apsauginių movų „Bloccs™“ naudotojai raginami vadovautis protingumo principu.

Apie bet kokius rimtus nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl šios priemonės naudojimo, reikia pranešti gamintojui ir atsakingajai šaliai, kurioje ji buvo įsigyta, institucijai.

BLOCCS®

KAIP UŽSIMAUTI
RANKOS ARBA
KOJOS

APSAUGINĘ
MOVĄ „BLOCCS®“
BE KITO
ŽMOGAUS
PAGALBOS

Apsauginę movą reikia naudoti laikantis visų priežiūros ir naudojimo instrukcijų. Žr.

www.bloccs.com, kur įkelti demonstraciniai vaizdo įrašai ir pateikti mūsų DUK.

1



Išimkite apsauginę movą iš pakuotės ir išlankstykite ją. Nusimaukite bet kokius aštrius žiedus ir pan.

2



Prieš naudodami patrinkite sandariklį delnais ir šiek tiek patampykite.

3



Pradėdami nuo atviro galo, nulenkite apsauginę movą atgal iki pusės.

4



Norėdami patikrinti, kaip laikosi sandariklis, pirma išbandykite uždangalą ant rankos ar kojos be tvarsčio.

Įkiškite norimą ranką ar koją į atvirą galą taip, kad pėda arba plaštaka būtų apsauginės movos gale.

5



Vyniokite apsauginę movą ant rankos ar kojos viršun, kol sandariklis priglus prie odos. Jeigu sandariklis yra per laisvas, mėgindami jį užsimauti rinkitės kito dydžio apsauginę movą.

Išleiskite šiek tiek oro, kad ji neplūduriuotų.


BLOCCS®

KAIP UŽSIMAUTI ALKŪNĖS ARBA KELIO APSAUGINĘ MOVĄ „BLOCCS®“ BE KITO ŽMOGAUS PAGALBOS

Apsauginę movą reikia naudoti laikantis visų priežiūros ir naudojimo instrukcijų. Žr.

www.bloccs.com, kur įkelti demonstraciniai vaizdo įrašai ir pateikti mūsų DUK.

1

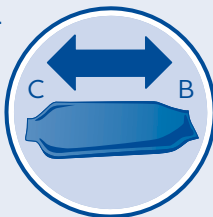

Išimkite apsauginę movą iš pakuotės ir išlankstykite ją. Nusimaukite bet kokius aštrius žiedus ir pan.


Jeigu apsauginė mova turi du galus, platesnis galas būna skirtas užsandarinti bicepsui arba šlauniai (B), siauresnis galas skirtas mauti ant riešo arba blauzdos (C).

2




Prieš naudodami, švelniai patrinkite sandariklius delnai ir šiek tiek patempkite.

3

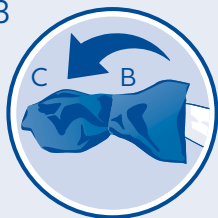

Kad lengvai užsimautumėte apsauginę movą, imkite B galą ir išverskite pusę apsauginės movos išvirkščiai, kad ji būtų tie C galu.


4

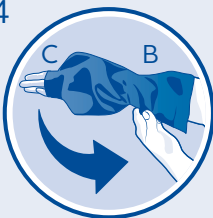

Norėdami patikrinti, kaip laikosi sandariklis, pirmą išbandykite uždangalą ant rankos ar kojos be tvarsčio.

Iš lėto stumkite savo ranką arba koją pro abu galus B ir C. Tada atsargiai nuvyniokite B galą, kol jis gerai prilgus prie rankos arba kojos.

5

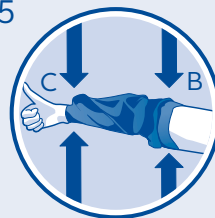

Turi būti uždengta visa sutvarstyta zona, o švelnus vandeniui atsparus sandariklis turi apgaubti ranką arba koją abiejuose apsauginės movos galuose. Jeigu sandariklis užsimovus per daug veržia arba yra per daug laisvas, rinkitės kito dydžio apsauginę movą.

Išleiskite šiek tiek oro, kad ji neplūduriuotų.

ŽENKLŲ ŽODYNĖLIS

	Gamintojas
	Atitikties ženklas CE
	JK atitiktis įvertinta
	Medicinos priemonė
	Unikalūs priemonės identifikatorius
	Priemonių skaičius
	Partijos numeris
	Pagaminimo data
	Platintojas
	Įgaliotasis atstovas Europos Sąjungoje
	Šveicarijos įgaliotasis atstovas
	Importuotojas
	ATSARGIAI
	Sudėtyje yra natūraliojo kaučiuko latekso
	Slidus paviršius
	Pavojus uždusti
	Laikykite atokiai nuo saulės šviesos
	Laikymo temperatūra 5–26 °C (41–78 °F)
	Daugkartinis, skirtas vienam pacientui
	Nesterilus
	Žr. naudojimo instrukcijas
	Perdirbama pakuotė
	Saugoti nuo atviros liepsnos